


## ⚠ ADVARSEL:

Les alltid den utførlige bruksanvisningen før første gangs bruk, og særlig alle varsel- og sikkerhetsanvisningene! Denne hurtigveiledningen erstatter ikke bruksanvisningen!



**i Vær oppmerksom på at det kan ta en komplett hårvekstsyklus (18-24 måneder) før et ferdig varig hårfjerningsresultat foreligger.**

## ⚠ ADVARSEL:

Ikke behandle det samme hudområdet mer enn én gang per hårfjerningsbehandling! Flere behandlinger på samme hudområde under én og samme hårfjerningsbehandling øker sannsynligheten for bivirkninger. Prøv å unngå overlappende pulser. Ikke bruk apparatet på solbrun hud eller når du nettopp har solt deg. Vent 2 uker etter solbadet før du bruker apparatet.

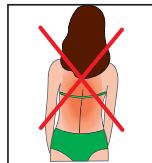

## Produktbeskrivelse

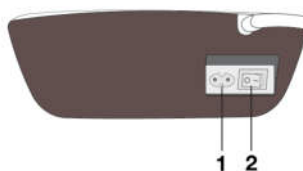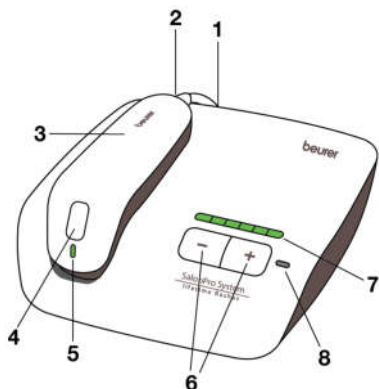


- 1 Kontakt på basisenheten
- 2 Strømbryter
- 3 Applikator
- 4 Utløsertast
- 5 Kontrollampe
- 6 Energivalgtaster
- 7 Energikontrollampe
- 8 Kontrollampe for "tom patron"

## Bruk


1

Før bruk må huden barberes, rengjøres og holdes tørt (uten parfyme, sminke, pudder, krem osv.)

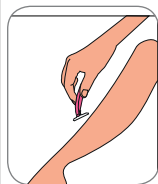


2






Kontroller om patronen er riktig satt inn i applikatoren.

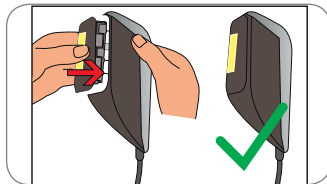

3

Sett strømledningen inn i kontakten på basisenheten. Sett den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

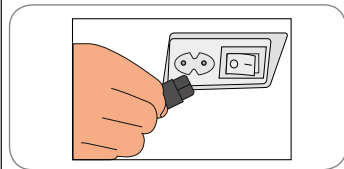
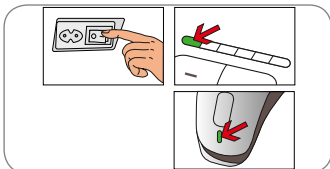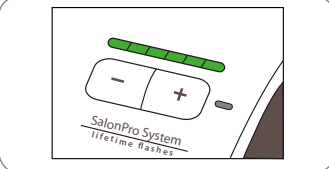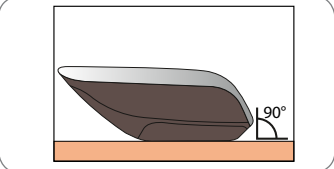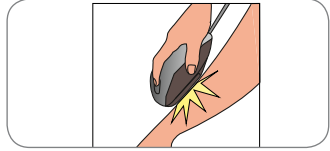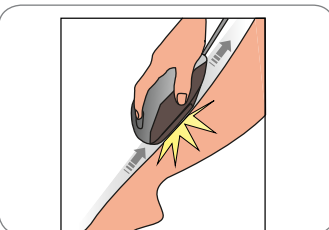
<p>4</p> <p>Vipp strømbryteren på baksiden av basisenheten -&gt; Kontrolllampen og energikontrolllampen lyser</p> 	<p>5</p> <p>Velg ønsket energitrinn med energivalgtastene "-" og "+"</p> 	<p>6</p> <p>Plasser patronens lysflate på ønsket behandlingsområde, pass på at det blir fullstendig kontakt med huden</p> 
<p>7</p> <p>Trykk på utløsertasten på applikatoren. Et lysblink vises, en kort lyd høres. Fjern patronens lysflate fra huden, og plasser den på neste behandlingsområde. Når kontrolllampen på applikatoren lyser grønt igjen, trykker du på utløsertasten på applikatoren.</p> 	<p>8</p> <p><u>Lysblinkglidefunksjon</u> Hold utløsertasten inntrykt = automatisk lysglimt hver 3. sek.</p> 	

**i** Ved behandlinger av kroppshår med beurer SalonPro-systemet skal de første fire behandlingene utføres med to ukers mellomrom. Fra den femte til og med den sjuende behandlingen skal det være et opphold på fire uker. Alle påfølgende behandlinger skal utføres så fremt det er ettervekst, helt til ønsket resultat er oppnådd. Ved behandling av hår i ansiktet under kinnbeina skal de første seks behandlingene utføres med to ukers mellomrom. Den sjuende til og med den tolvte behandlingen skal foregå med fire ukers mellomrom. Alle påfølgende behandlinger skal utføres så fremt det er ettervekst, helt til ønsket resultat er oppnådd.

## Etter bruk

<p>1</p> <p>Vipp strømbryteren på baksiden av basisenheten -&gt; Apparatet slås av</p> 	<p>2</p> <p>Trekk strømledningen ut av stikkontakten</p> 	<p>3</p> <p>Rengjør patronens lysflate med en ren og tørr klut</p> 
---	--	---