



UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy koniecznie przeczytać całą instrukcję obsługi, włącznie z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa! Niniejsza skrócona instrukcja nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi!

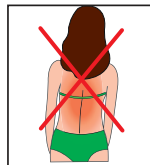


Należy pamiętać, że osiągnięcie trwałych efektów może trwać tak długo, jak długo trwa całkowity cykl wzrostu włosa (18–24 mies.).




UWAGA:


Podczas jednego zabiegu nie wolno epilować tego samego miejsca kilka razy! Wielokrotna epilacja jednego miejsca podczas jednego zabiegu może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. Należy unikać nachodzących na siebie impulsów. Nie wolno używać urządzenia na opalanej skórze lub wkrótce po opalaniu. Po opalaniu przed użyciem urządzenia należy odczekać 2 tygodnie.



Opis urządzenia

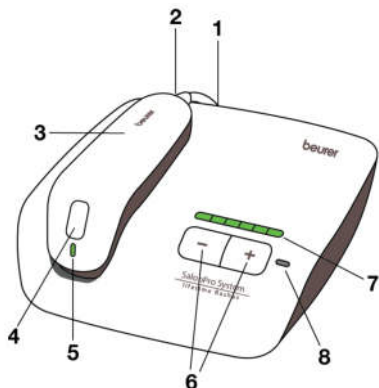

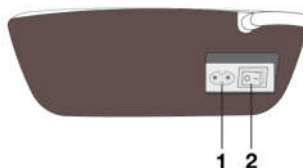
- 1 Gniazdo stacji
- 2 Wyłącznik sieciowy
- 3 Aplikator
- 4 Przycisk wyzwalający
- 5 Lampka kontrolna
- 6 Przyciski do regulacji natężenia energii
- 7 Lampka kontrolna natężenia energii
- 8 Lampka kontrolna „Pusty wkład”



Zastosowanie


1

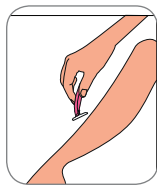Przed użyciem urządzenia należy ogolić, oczyścić i wysuszyć skórę (nie może być śladów perfum, makijażu, pudru, kremu itp.)




2





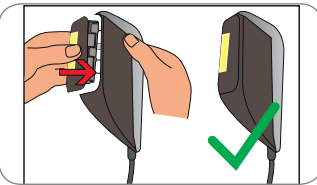
Sprawdzić, czy wkład jest prawidłowo włożony do aplikatora



3

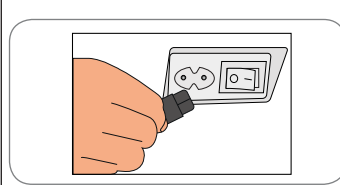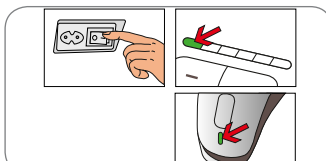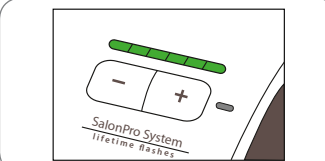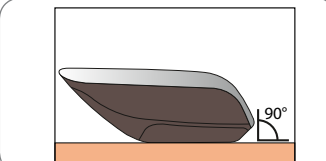
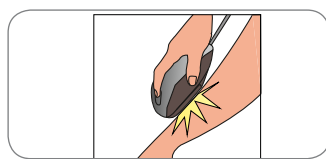
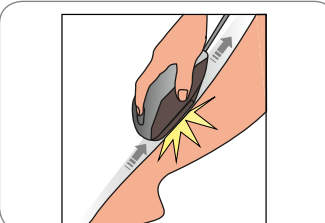
Podłączyć kabel sieciowy do gniazda stacji. Podłączyć drugi koniec kabla do gniazodka sieciowego.



4 Uruchomić włącznik sieciowy znajdujący się z tyłu stacji -> zaświeci się lampka kontrolna i lampka kontrolna natężenia energii 	5 Wybrać za pomocą przycisków do regulacji natężenia energii „-” i „+” odpowiedni poziom natężenia 	6 Przyłożyć powierzchnię świetlną wkładu do odpowiedniego miejsca, uważając, aby miała ona całkowity kontakt ze skórą 
7 Nacisnąć przycisk wyzwalający na aplikatorze. Widać jasny błysk i słyszać krótki dźwięk. Odsunąć powierzchnię świetlną wkładu od skóry i przyłożyć do kolejnego miejsca. Gdy tylko lampka kontrolna na aplikatorze ponownie zaświeci się na zielono, nacisnąć przycisk wyzwalający na aplikatorze 	8 <u>Funkcja ciągłego generowania impulsu</u> Przytrzymanie przyciśniętego przycisku wyzwalającego = automatyczny błysk co 3 s 	

i Epilacja włosów na ciele za pomocą systemu SalonPro firmy Beurer powinna odbywać się na początku (pierwsze 4 zabiegi) w odstępach dwutygodniowych. Zabiegi piąty do siódmego włącznie powinny się odbywać w odstępach czterotygodniowych. Wszystkie pozostałe zabiegi powinny się odbywać w momencie, gdy wyrosną nowe włoski, aż do osiągnięcia pożądanego efektu. W przypadku epilacji twarzy poniżej kości policzkowych pierwszych sześć zabiegów powinno się odbywać w odstępach dwutygodniowych. Zabiegi siódmy do dwunastego włącznie powinny się odbywać w odstępach czterotygodniowych. Wszystkie pozostałe zabiegi powinny się odbywać w momencie, gdy wyrosną nowe włoski, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

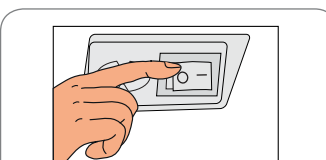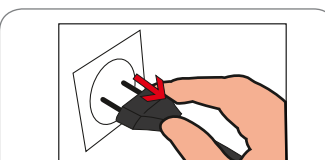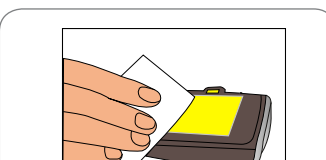Po użyciu

1 Przełączyć wyłącznik sieciowy znajdujący się z tyłu stacji -> Urządzenie wyłącza się 	2 Wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka 	3 Oczyszczyć powierzchnię świetlną wkładu za pomocą suchej, czystej szmatki 
---	--	---