

beurer

Краткое руководство по применению IPL 10000+ Прибор для эпиляции

RUS



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед первым использованием обязательно прочитайте подробное руководство по применению, включая все указания по безопасности и предупреждения! Краткое руководство не заменяет полное руководство по применению!




Помните о том, что для достижения долгосрочного результата эпиляции должен пройти полный жизненный цикл волос (18–24 месяца).





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не обрабатывайте одну и ту же поверхность кожи более одного раза за один сеанс эпиляции! Повторная обработка одного и того же участка кожи во время сеанса эпиляции повышает вероятность возникновения побочных эффектов. Следите за тем, чтобы обрабатываемые участки не пересекались.

Не используйте прибор для обработки загорелой кожи или сразу после пребывания на солнце. Использовать прибор можно только спустя 2 недели после приема солнечных ванн.

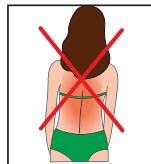

Описание прибора

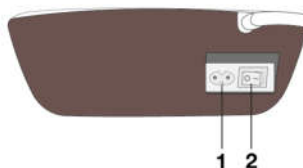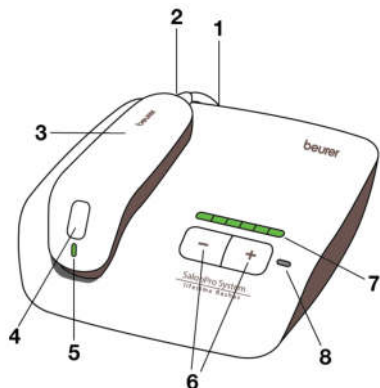


1. Разъем основного блока
2. Сетевой выключатель
3. Аппликатор
4. Кнопка пуска
5. Контрольная лампа
6. Кнопки регулировки уровня мощности
7. Индикатор контроля энергии
8. Индикатор отсутствия заряда в картридже

Применение


1

Перед применением сбрейте волосы, очистите и высушите кожу (на коже не должно быть духов, косметики, пудры, крема и т. п.).

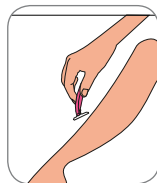


2




Проверьте, правильно ли картридж вставлен в аппликатор.

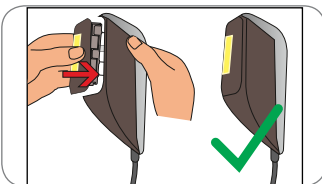

3

Вставьте сетевой кабель в разъем на основном блоке. Вставьте другой конец сетевого кабеля в розетку.



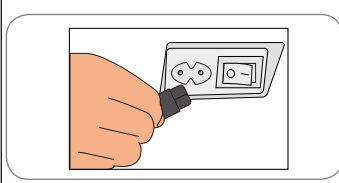

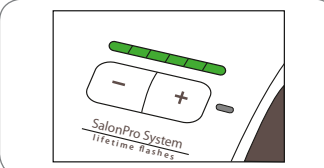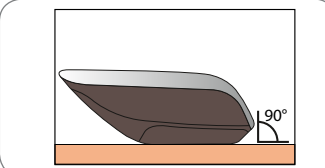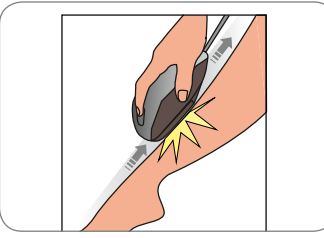
<p>4</p> <p>Нажмите кнопку питания на обратной стороне основного блока -> загорится контрольная лампа и индикатор контроля энергии.</p> 	<p>5</p> <p>С помощью кнопок «-» и «+» можно выбрать уровень мощности.</p> 	<p>6</p> <p>Приложите световое пятно картриджа к обрабатываемой поверхности, следите за тем, чтобы был обеспечен полный контакт с кожей.</p> 
<p>7</p> <p>Нажмите на аппликаторе кнопку пуска. Возникнет яркая вспышка, и раздастся непродолжительный звук. Отведите световое пятно картриджа и разместите его на следующем обрабатываемом участке кожи. Как только контрольная лампа на аппликаторе загорится зеленым светом, нажмите на аппликаторе кнопку пуска.</p> 	<p>8</p> <p><u>Функция «серийная вспышка»</u> Удерживайте нажатой кнопку пуска = автоматическая вспышка каждые 3 секунды.</p> 	

i Первые четыре сеанса эпиляции волос на теле с помощью beurer SalonPro System следует проводить с интервалом в две недели. Сеансы с пятого по седьмой должны проводиться с интервалом в четыре недели. Все последующие сеансы можно проводить по мере появления на теле новых волос до достижения желаемого результата.

Первые шесть сеансов эпиляции волос на лице ниже скул следует проводить с интервалом в две недели. Сеансы с седьмого по двенадцатый должны проводиться с интервалом в четыре недели. Все последующие сеансы можно проводить по мере появления на теле новых волос до достижения желаемого результата.

После использования
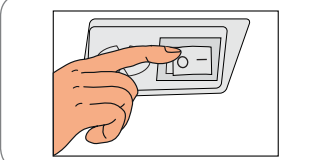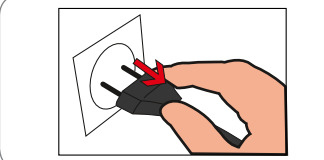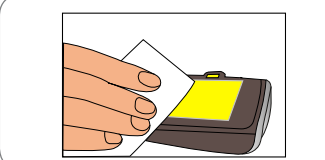
<p>1</p> <p>Нажмите кнопку питания на обратной стороне основного блока -> прибор выключится.</p> 	<p>2</p> <p>Извлеките сетевой кабель из розетки.</p> 	<p>3</p> <p>Очистите световое пятно картриджа сухой чистой салфеткой.</p> 
---	---	---