


beurer

FC 100










NL Pureo Derma Peel - microdermabrasie
Gebruiksaanwijzing




CE

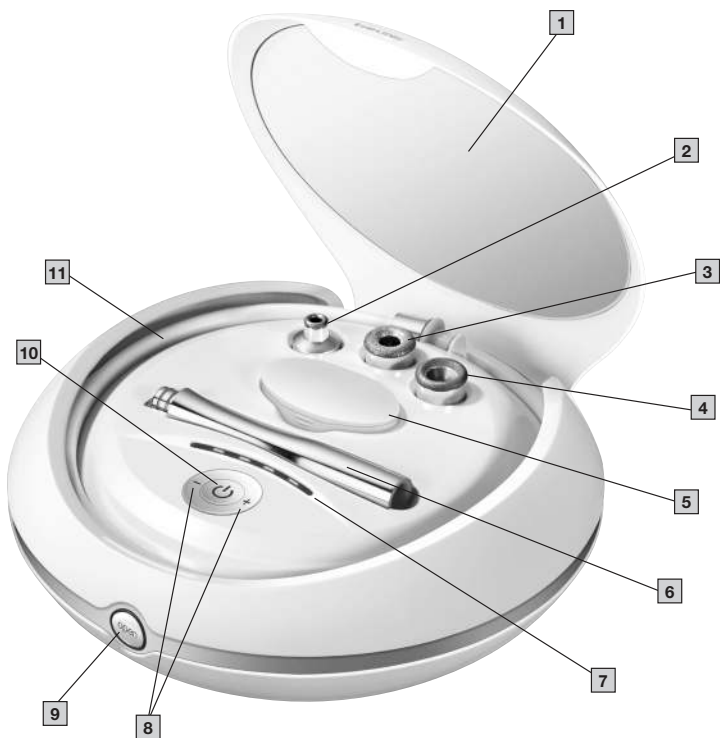

A

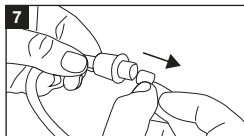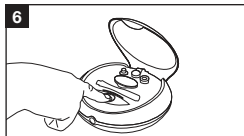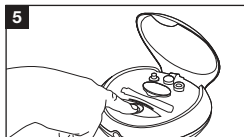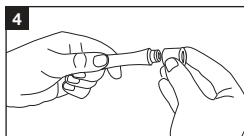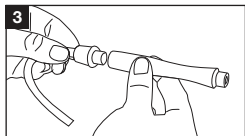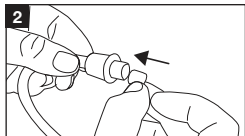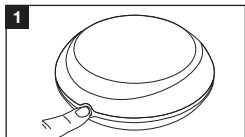

B

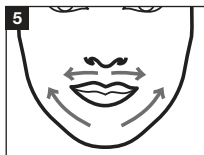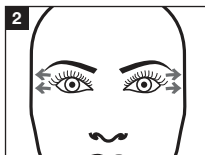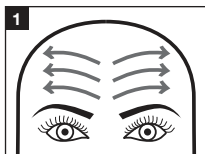



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

! WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Het apparaat is niet geschikt voor personen jonger dan achttien jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering.....	4	9. Toebehoren en reserveonderdelen.....	8
2. Verklaring van de symbolen	4	10. Veelgestelde vragen	8
3. Voorgeschreven gebruik.....	5	11. Wat te doen bij problemen	9
4. Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen	5	12. Verwijdering.....	9
5. Beschrijving van het apparaat.....	6	13. Technische gegevens.....	10
6. Ingebruikname.....	6	14. Garantie / Service.....	10
7. Gebruik.....	7		
8. Reiniging en onderhoud	8		

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 x FC100-basisstation
- 1 x handapparaat
- 1 x precisiekop
- 1 x ruwe kop
- 1 x grote kop
- 20 x wegwerpfilters
- 1 x netadapter
- Deze gebruikshandleiding

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Fabrikant
	Let op Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.		Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Gevaar Gebruik dit apparaat niet in water, in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!		Certificeringssymbool voor producten die naar de Russische Federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.
	Instructie lezen		Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton		Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)		Importeursymbool
	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet derhalve aan veiligheidsklasse 2.		CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten
	Voedingseenheid, schakelmodus; voedingseenheid met schakelmodus; SMPS		Gelijkstroom Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom.
	Veiligheidstransformator, kortsluitvast		Polariteit van gelijkspanningsstekker
	Energie-efficiëntieniveau 6		Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter
	Gebruik de netadapter niet als de stekker beschadigd is.		

3. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het behandelen van het gezicht (met uitzondering van de mond en het gebied rond de ogen) van volwassen mensen. Gebruik het apparaat niet op dieren!

Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

4. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de accessoires zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Houd de netadapter uit de buurt van water.



GEVAAR

Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) in verband met het gevaar voor elektrische schokken!

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat **NIET**

- als u kloofjes in de huid hebt.
- op open wonden.
- op de mond en het gebied rond de ogen.
- op andere delen van het lichaam dan het gezicht (ook niet op de mond en het gebied rond de ogen).
- als u een huidziekte hebt (bijvoorbeeld herpes, vaatziekten of woekeringen van de huid).
- als u huidkanker hebt.
- als u last hebt van huidirritaties.
- direct na het zonnen of bij zonnebrand.
- als u medicijnen slikt die steroïden bevatten.

- als u bloedverdunners slikt.
- als u aan een van de volgende ziekten lijdt: multiple sclerose, diabetes of auto-immuunziekten.

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat daarom alleen gebruiken met de meegeleverde netvoedingadapter en op de op de netvoedingadapter vermelde netspanning,

LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat bij storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.

WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in de badkuip of sauna).
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek meteen de netadapter uit het stopcontact.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en de netadapter niet met water, stoom of andere vloeistoffen in aanraking komen.

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

 1 Spiegel

 3 Grote kop met fijne saffiercoating, geschikt voor een gevoelige huid

 5 Opbergbox met wegwerpfilters

 7 Weergave van de intensiteitsniveaus (niveau 1-5)

 9 Openingstoets

 11 Slang

 2 Precisiestikop met fijne saffiercoating, geschikt voor een nauwkeurige behandeling van kleine oppervlakken (bijv. bij de neus)

 4 Ruwe kop met ruwe saffiercoating, geschikt voor een intensieve behandeling van probleemgebieden

 6 Handapparaat

 8 Oetsen +/- voor het instellen van het intensiteitsniveau

 10 AAN/UIT-toets

6. INGEBRIJKNAMEN



Voordat u met de behandeling begint, moet u ervoor zorgen dat uw gezichtshuid schoon, droog en vrij van alle resten van bijvoorbeeld poeder, crème of make-up is.

6.1 Huidtest uitvoeren

Voer 24 uur voor de behandeling een huidtest uit met het apparaat. Test het apparaat daarvoor op het laagste intensiteitsniveau op kleine, onopvallende plekken in de hals. Gebruik het apparaat niet als de plek waarop u het apparaat hebt getest na 24 uur rood is of pijn doet.

WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat niet vaker dan één keer per week.
- Direct na de behandeling kan de behandelde gezichtshuid een beetje rood zijn en in zeer zeldzame gevallen een beetje bloeden.
- Vermijd een dag voor en na de behandeling activiteiten waar u van gaat zweten, de sauna, de zonnebank en de zon.



Bij een ongevoelige probleemhuid kan het apparaat ook twee keer per week worden gebruikt (met een pauze van ten minste 48 uur tussen de twee behandelingen).

7. GEBRUIK

7.1 Behandeling uitvoeren

1. Sluit de netadapter aan op het apparaat en steek de netadapter in het stopcontact.
2. Druk op de **openingstoets** om het apparaat te openen. **A1**
3. Plaats een wegwerpfILTER in het uiteinde van de slang. **A2**
4. Sluit het uiteinde van de slang aan op het handapparaat. **A3**
5. Plaats het gewenste opzetstuk op de punt van het handapparaat. **A4**
6. Druk op de **AAN/UIT-toets** om het apparaat in te schakelen. De weergave van de intensiteitsniveaus begint te branden. Het laagste intensiteitsniveau is reeds ingeschakeld. **A5**
7. Start de behandeling in eerste instantie op het laagste intensiteitsniveau. Breng het handapparaat op uw gezichtshuid aan en beweeg ermee over de huid. Let op dat u met het handapparaat niet vaker dan één keer over hetzelfde deel van de huid gaat. Meer informatie over de behandeling vindt u in hoofdstuk "Te behandelen zones".

Als u het laagste intensiteitsniveau te zwak vindt, kunt u het niveau wijzigen door op de toetsen **-/+** te drukken. **A6**



De toegepaste druk moet aangenaam aanvoelen en mag geen pijn doen. Na de behandeling mag de gezichtshuid een beetje rood zijn.

8. Als u klaar bent met de behandeling, schakelt u het apparaat uit door op de **AAN/UIT-toets** te drukken en haalt u de netadapter uit het stopcontact.
9. Vervang het wegwerpfILTER na elke behandeling. Verwijder het handapparaat daarvoor van de slang. Verwijder het wegwerpfILTER met een pincet. **A7**

7.2 Te behandelen zones



Zorg ervoor dat de huid van het te behandelen gedeelte van het gezicht strak getrokken is als u met het handapparaat over de huid beweegt. Trek de huid daarvoor met uw vrije hand naar beneden of naar de zijkant toe strak.

Voorhoofd **B1:**

Beweeg het handapparaat langzaam en gelijkmatig vanaf het midden van het voorhoofd naar de buitenkant. Let er daarbij op dat u elk gedeelte van de huid niet vaker dan één keer behandelt.

Slapen **B2:**

Beweeg het handapparaat naar de buitenkant in de richting van de haaraanzet. Herhaal dit aan de linker- en aan de rechterkant van de neus. Zorg ervoor dat het apparaat ten minste 1 cm van de ogen verwijderd blijft.

Neus B3:

Beweeg het handapparaat vanaf de bovenzijde van de neusbrug over het midden naar beneden. Herhaal dit aan de linker- en aan de rechterkant van de neus.

Wangen B4:

Beweeg met het handapparaat naar buiten over de wangen.

Om de mond B5:

Beweeg het handapparaat boven de bovenlip vanaf het midden naar links en naar rechts. Beweeg het handapparaat onder de onderlip vanaf het midden naar links en naar rechts. Let op dat u uw lippen niet direct met het apparaat aanraakt!

8. REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het apparaat in geen geval onder in water of andere vloeistoffen!
- Desinfecteer de opzetstukken na elk gebruik met een in de winkel verkrijgbaar desinfectiemiddel.
- Vervang het wegwerpfILTER na elke behandeling.
- Maak het apparaat met een droge doek schoon als het vuil is. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

9. TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor bijbehorende producten naar www.beurer.com of neem contact op via het betreffende servicepunt in uw land (zie de lijst met servicepunten).

De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Omschrijving	Artikel- c.q. bestelnummer
20 wegwerpfilters	163.546
Precisiekop	163.557
Ruwe kop	163.556
Grote kop	163.555

10. VEELGESTELDE VRAGEN

Is de Pureo Derma Peel FC100 geschikt voor elk huidtype?

De Pureo Derma Peel FC100 is geschikt voor alle huidtypen. Het apparaat is geschikt voor zowel een vette en een droge huid als voor een gemengde huid. Ook is het geschikt voor alle huidskleuren.

Is de in de Pureo Derma Peel FC100 gebruikte technologie veilig?

De Pureo Derma Peel FC100 werkt op basis van de ongevaarlijke microdermabrasietechniek. Daarbij worden alleen overtollige huiddeeltjes van de buitenste huidlaag verwijderd, de andere huidlagen worden niet aangetast.

Doet de behandeling met de Pureo Derma Peel FC100 pijn?

Nee, de behandeling met de Pureo Derma Peel FC100 is mild en pijnloos. Bij een zeer gevoelige huid kan er in zeldzame gevallen een licht brandend gevoel ontstaan. Als u tijdens de behandeling toch pijn ervaart, moet u de intensiteit verlagen.

Hoe lang duurt een behandeling met de Pureo Derma Peel FC100?

De duur van een behandeling varieert afhankelijk van het te behandelen gedeelte van de gezichtshuid. Een complete gezichtsbehandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Hoe vaak moet ik de Pureo Derma Peel FC100 gebruiken?

Wij adviseren u de Pureo Derma Peel FC100 een keer per week te gebruiken. Na een behandeling moet u ten minste 48 uur wachten voordat u een nieuwe behandeling mag uitvoeren. Bij een ongevoelige probleemhuid kan het apparaat ook twee keer per week worden gebruikt. Het apparaat moet voor gebruik eerst worden getest. Bescherm uw huid na een behandeling tegen de zon.

Waar moet u na een behandeling op letten?

Voordat u de zon in gaat, moet u de eerste drie dagen na een behandeling een beschermend middel tegen zonnebrand gebruiken. Voer de eerste drie dagen na een behandeling GEEN mechanische/chemische peelings, elektrolysebehandelingen of gezichtsontharingsessies uit en gebruik GEEN ontharingsmiddelen. Make-up mag u na de behandeling meteen aanbrengen.

11. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	AAN/UIT-schakelaar defect.	Neem contact op met de klantenservice of het verkooppunt.
Geen stroom.	De netvoeding is niet correct aangesloten.	Sluit de netvoeding correct aan.
Geen stroom.	De netvoeding is defect.	Neem contact op met de klantenservice of het verkooppunt.
Het apparaat zuigt niet goed.	Het filter is verstopt/de pomp is defect.	Vervang het oude filter door een nieuw filter. / Neem contact op met de klantenservice of het verkooppunt.
Het peelingeffect wordt niet meer gegarandeerd door de opzetstukken.	De saffiercoating is versleten.	Neem contact op met de klantenservice of het verkooppunt om nieuwe opzetstukken aan te vragen.

12. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamel punten in uw land gebeuren.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



13. TECHNISCHE GEGEVENS

Netvoeding stroomvoorziening	Ingangsspanning: 100 - 240 V Frequentie ingangswisselstroom: 50/60 Hz Uitgangsspanning: 12,0 V Uitgangsstroom: 0,6 A Uitgangsvermogen: 7,2 W Gemiddelde efficiëntie bij gebruik: $\geq 80,53\%$ Energieverbruik bij nullast: $\leq 0,066$ W
Afmetingen	Ø 21,5 x 8,8 cm
Gewicht	~869 g

14. GARANTIE / SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.



Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way
WA3 2SH Golborne, United Kingdom



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com



606.67_FC100_2023-10-16_04_IM2_BEU_NL