

beurer MC3800



NL Massagestoel
Gebruiksaanwijzing



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoud

1. Voorgescreven gebruik.....	3	6. Onderhoud en bewaren	9
2. Veiligheidsrichtlijnen	3	7. Wat te doen bij problemen	9
3. Beschrijving van het apparaat.....	5	8. Technische gegevens.....	10
4. Ingebruikname.....	7	9. Verwijdering.....	10
5. Bediening	8	10. Garantie / service.....	10

Omvang van de levering

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| • Massagestoel | • Rugkussen | • Handschakelaar |
| • Zitkussen | • Hoofdkussen | • Set batterijen |



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Steek geen voorwerpen in de openingen of de roterende delen van het apparaat. Zorg dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Verklaring van de symbolen

In deze gebruikshandleiding en/of op het typeplaatje worden de volgende symbolen gebruikt.

	WAARSCHUWING Verwijzing naar verwondinggevaar of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Verwijzing naar mogelijke schade aan apparaat/toebehoren.
	Verwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Alleen in afgesloten ruimtes gebruiken.
	Geen naalden insteken!
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)

1. Voorgeschreven gebruik

De massagestoel is bedoeld voor het masseren van de rug en de benen. Houd u aan de veiligheidsrichtlijnen in deze gebruikshandleiding. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding beschreven. Het apparaat is alleen voor privégebruik en niet bedoeld voor medisch of commercieel gebruik.

2. Veiligheidsrichtlijnen

Elektrische schokken



Waarschuwing!

- Net als elk elektrisch apparaat moet ook deze massagestoel voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen met de op het apparaat aangegeven netspanning.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
- Gebruik het apparaat niet wanneer er per ongeluk water op terecht is gekomen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten en vermijd direct zonlicht.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met warme oppervlakken.
- Zorg ervoor dat het apparaat, de schakelaar en het snoer niet in aanraking komen met water, damp of andere vloeistoffen.
- Gebruik/bedien het apparaat alleen met droge handen.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

Reparatie



Waarschuwing!

- Het apparaat mag niet worden geopend.
- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer, anders vervalt de garantie.
- De ritssluiting onder de bekleding mag niet worden geopend. Deze is alleen aanwezig om producttechnische redenen.
- Prik niet met naalden of scherpe voorwerpen in de stoel.

Brandgevaar



Waarschuwing!

Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in de gebruikshandleiding kan brand veroorzaken!

- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven altijd vrij zijn. De ventilatiesleuven vrijhouden van stof, haar en dergelijke.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met andere elektrische apparaten (bijv. elektrische deken).
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

Bediening

Waarschuwing!

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het masseren van de rug en de benen van mensen.

Gebruik van het apparaat is geen vervanging voor een medische behandeling. Gebruik het massageapparaat niet als een of meer van de volgende kenmerken op u van toepassing zijn.

Gebruik het massageapparaat

- niet bij door ziekte veroorzaakte veranderingen of wonden op de rug (bijv. bij een hernia),
- niet tijdens de zwangerschap,
- niet wanneer u slaapt,
- niet bij dieren,
- niet bij activiteiten waarbij een onvoorspelbare reactie gevaar kan veroorzaken,
- niet na de inname van substanties die het waarnemingsvermogen verminderen (bijv. pijnstillende medicijnen, alcohol),

Raadpleeg uw arts, wanneer u twijfelt of het massageapparaat voor u geschikt is.

Raadpleeg uw arts voordat u het massageapparaat gebruikt, vooral


- wanneer u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie hebt ondergaan aan uw bovenlichaam,
- wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen hebt,
- bij trombose,
- bij diabetes,
- bij pijnklachten zonder duidelijke oorzaak.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
- Raak het massagemechanisme en de rollers nooit met de handen aan wanneer het apparaat in gebruik is. Kans op knelgevaar.
- Steek geen voorwerpen in de apparaatopeningen en steek niets in de roterende delen. Zorg dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen.
- Schakel het apparaat na ieder gebruik uit met de hoofdschakelaar.
- Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struikelen.
- Ga nooit op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Masseer nooit gebieden met zwellingen, ontstekingen of eczeem.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u last heeft van onverklaarbare maagpijn.
- De massagestoel mag telkens door slechts 1 persoon worden gebruikt.
- Het apparaat mag met maximaal 150 kg worden belast.

Let op!

- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet bij meer dan 40 graden.
- Controleer of het apparaat nog juist functioneert, nadat het langere tijd niet is gebruikt.

3. Beschrijving van het apparaat

Buitenzijde

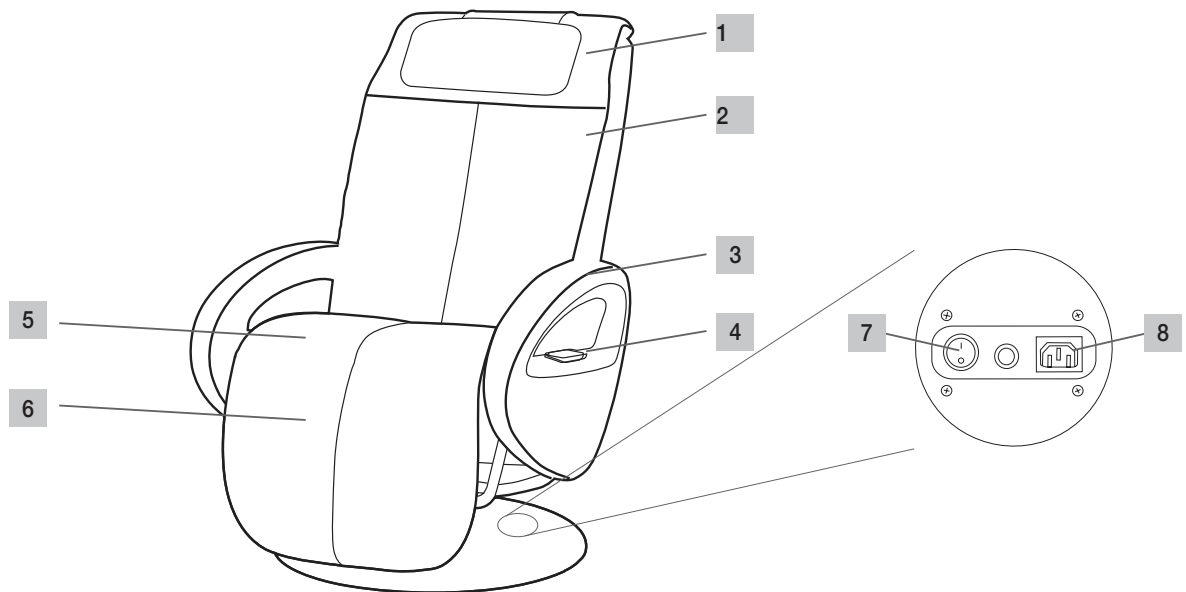

1 Hoofdkussen

2 Rugleuning

3 ArMLEuning

4 Handschakelaar met batterijcompartiment


5 Zitkussen

6 Beensteun

7 Hoofdschakelaar

8 Stroomaansluiting


Binnenzijde

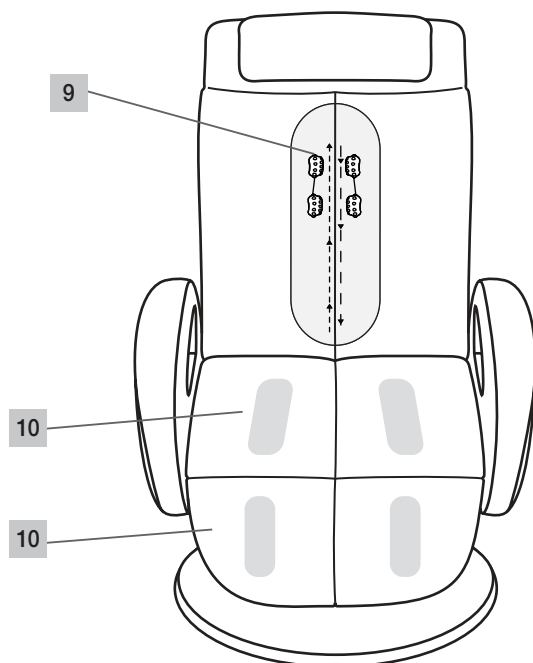

9 Massagerollers

10 Vibratiemassagepunten

Handschakelaar

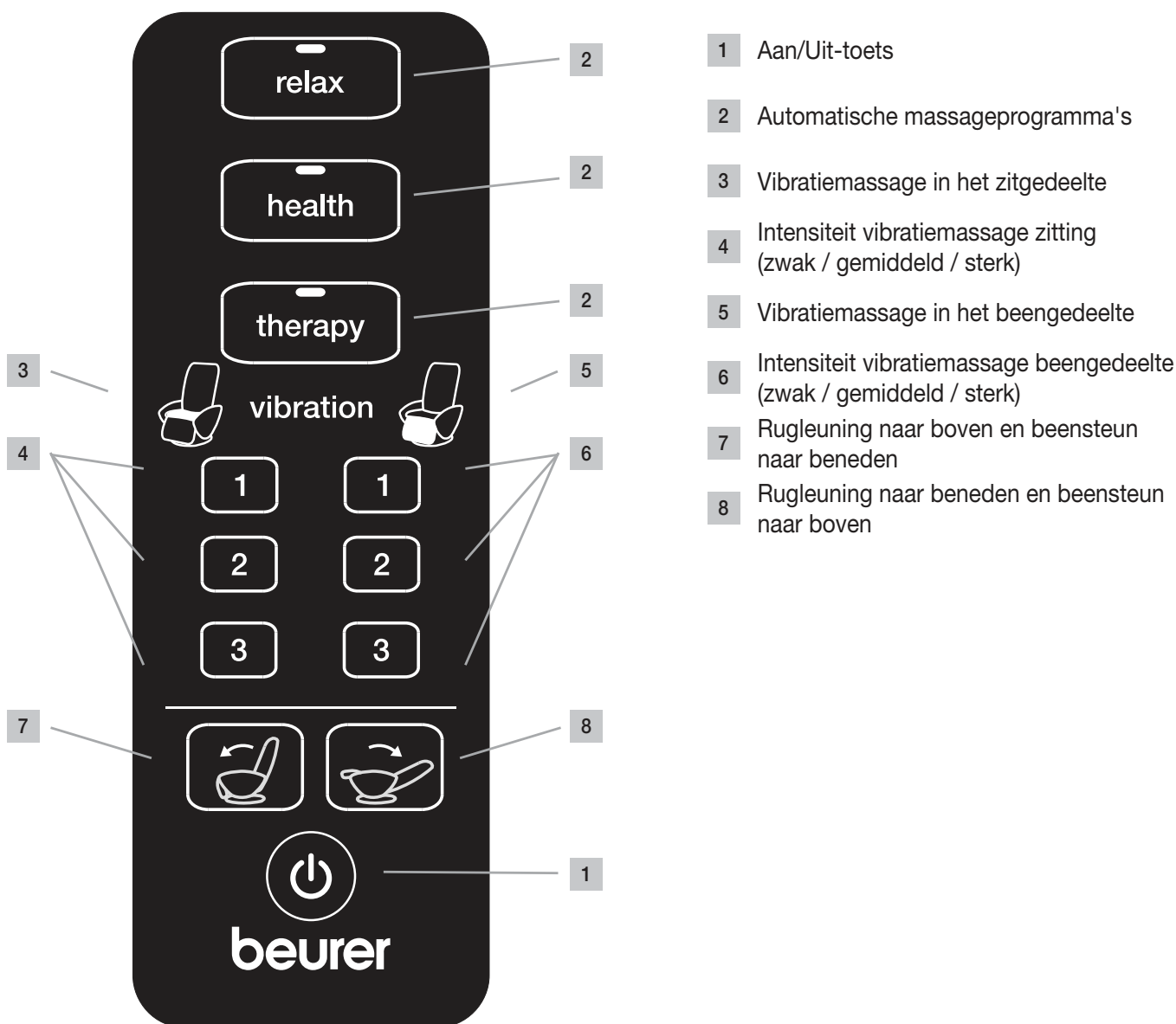

Toetsfuncties handschakelaar

Automatische massageprogramma's

Er zijn 3 massageprogramma's die automatisch aflopen: **relax, health en therapy**.

Deze automatische programma's masseren uw complete rug met een combinatie van kneed-, klop-, rol- en Shiatsu-massage.

relax

> Druk op de **relax**-toets.

Het automatische massageprogramma wordt gestart.

Totale duur: 15 minuten. Daarna blijft de massagestoel staan in de stand die door u is ingesteld.

health

> Druk op de **health**-toets.

Het automatische massageprogramma wordt gestart.

Totale duur: 15 minuten. Daarna blijft de massagestoel staan in de stand die door u is ingesteld.

therapy

> Druk op de **therapy**-toets.

Het automatische massageprogramma wordt gestart.

Totale duur: 15 minuten. Daarna blijft de massagestoel staan in de stand die door u is ingesteld.

Aanwijzing

Vibratiemassage deactiveren

De vibratiemassage functioneert onafhankelijk van de massageprogramma's.

Daarvoor moet de Aan/Uit-toets worden geactiveerd en het huidige massageprogramma worden gedeactiveerd. U kunt de vibratiemassage deactiveren door nogmaals op de intensiteitstoets te drukken.

Als u de intensiteitstoets één keer indrukt, wordt de vibratiemassage geactiveerd. Als u dezelfde intensiteitstoets nogmaals indrukt, wordt de vibratiemassage weer gedeactiveerd.

4. Ingebruikname

Waarschuwing!

- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Kinderen kunnen hierin stikken.
- Lees voordat u het apparaat gebruikt de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Veiligheid goed door.
 - ▷ Veiligheid pagina 3 tot en met 4.

Let op!

- De massagestoel kan uw vloer beschadigen. Leg een geschikte slipbestendige mat onder de massagestoel.


Plaatsing

- Plaats de massagestoel op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Verwijder voordat u de stoel gebruikt alle obstakels voor en achter de massagestoel, zodat de rugleuning vrij omlaag en de beensteun omhoog kan komen.


Let op!

Open de verpakking niet met scherp en puntig gereedschap (stanleymes).


1.) Plaats 2 AAA-batterijen volgens de marking in de handschakelaar.

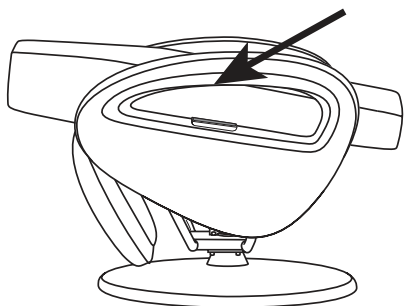


2.) Til de massagestoel aan de aangegeven draagpunten uit de doos. Hiervoor zijn twee personen nodig.

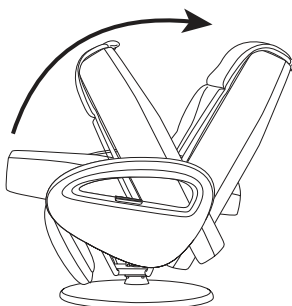

3.) Klap de rugleuning omhoog in de zitpositie totdat de vergrendeling hoorbaar vastklikt.

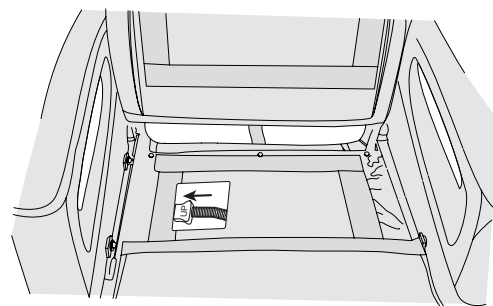

4.) Steek de aan een spiraalveer bevestigde stekker in de daarvoor bestemde aansluiting. Klap vervolgens het zitkussen tegen de rugleuning.

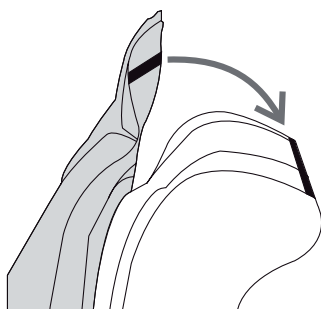

5.) Verbind nu het rugkussen met het zitkussen en met de rugleuning.



6.) De massagestoel is nu klaar voor gebruik.

5. Bediening

Waarschuwing!

- Lees voordat u het apparaat gebruikt de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Veiligheid goed door.
 - ▷ Veiligheid pagina 3 tot en met 4

Kantelgevaar.

- Ga altijd in een rechte houding en voorzichtig in de stoel zitten. Ga nooit in de stoel zitten als deze in de ligpositie staat.

Let op!

- Als er huidirritaties optreden, in welke vorm dan ook, dient u de behandeling direct te stoppen.

Belangrijk!

- Verwijder tijdens de massage nooit het rugkussen.

Voor het inschakelen

- Draag tijdens de massage comfortabele kleding.
- Haal alle voorwerpen uit uw broekzakken (bijv. sleutels, zakmessen, mobiele telefoons).
- Neem een comfortabele, ontspannen houding aan.
- Ga altijd in het midden van de stoel zitten, zodat de wervelkolom precies tussen de massagerollers ligt.
- De massage hoort te allen tijde als aangenaam en ontspannen ervaren te worden. Als u het gevoel hebt dat de massage pijnlijk of onaangenaam wordt, stop dan met de massage of wijzig uw zitpositie.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, controleer dan eerst of het nog juist functioneert alvorens het opnieuw te gebruiken.


De massage starten

Druk op de Aan/Uit-toets op de handschakelaar.

Na het inschakelen beweegt de rugleuning naar beneden en komt de beensteun omhoog. Tegelijkertijd wordt de volledige rug afgetast om de omvang van de gebruiker te bepalen. Nadat het aftasten van de rug is voltooid, wordt het **relax**-massageprogramma geactiveerd.

- Druk op de vibratie-intensiteitstoets om de intensiteit van de vibratiemassage in het zit- en voetgedeelte in te stellen of uit te schakelen.
- De vibratiemassage kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld voor het zitgedeelte en de voeten.

Ligpositie/zitpositie

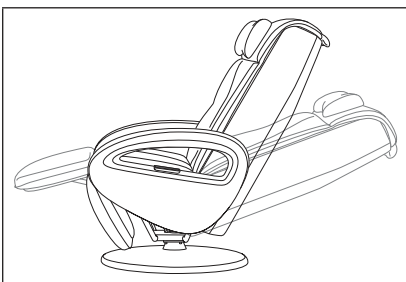

- Breng de massagestoel in de gewenste ligpositie.

De massagestoel uitschakelen

Nadat een massageprogramma is afgelopen, wordt de stoel automatisch uitgeschakeld. De massagestoel blijft in de actuele stand staan. Door nogmaals op de Aan/Uit-toets te drukken, wordt het massageprogramma relax weer gestart. Als u twee keer op de Aan/Uit-toets drukt, wordt de massagestoel teruggezet in de uitgangspositie.

Let op!


Gebruik het apparaat hooguit 15 minuten aan een stuk, anders bestaat het risico op oververhitting. Laat het apparaat ten minste 30 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.

Tijdens de massage kunt u het apparaat te allen tijde uitschakelen met de Aan/Uit-toets.

- Schakel de massagestoel uit met behulp van de hoofdschakelaar onder de rugleuning.
- Trek de stekker uit het stopcontact.

Overige instellingen, bedieningsmogelijkheden

Inklapmechanisme

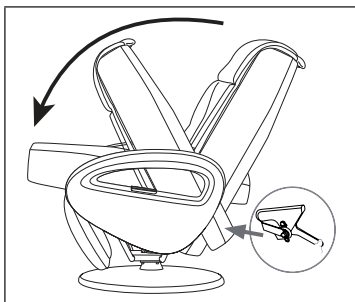

Om de massagestoel ruimtebesparend op te kunnen bergen, kan deze worden ingeklapt.

Voer daarbij de ingebruikname onder punt 5 in omgekeerde volgorde uit.

6. Onderhoud en bewaren

⚠ Waarschuwing!

- Schakel het apparaat na ieder gebruik en voor iedere reiniging uit met behulp van de hoofdschakelaar.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Veeg de massagestoel regelmatig af met een pluisvrije, droge doek of een licht bevochtigde doek.

i Belangrijk!

- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
- Er mogen geen vloeistoffen doordringen in het apparaat.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Kunstleer is vetgevoelig. Reinig de massagestoel alleen met bewezen verzorgingsproducten voor kunstleer.

7. Wat te doen bij problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Schurende geluiden tijdens het gebruik.	Deze geluiden zijn normaal en zijn afkomstig van de werkende motor of de massagerol- lers die tegen het kussen wrijven.	Er hoeft niet te worden ingegrepen.
De massage kan niet wor- den gestart.	De stekker is niet verbonden met het stop- contact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De massagestoel is niet met behulp van de hoofdschakelaar ingeschakeld.	Schakel de massagestoel met behulp van de hoofdschakelaar in.
	De zekering voor de massagestoel heeft de stroomtoevoer onderbroken.	Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.
Rugleuning en beensteun kunnen niet omhoog of omlaag worden bewogen.	Rugleuning en beensteun zijn overbelast of geblokkeerd.	Verwijder objecten die het apparaat blokkeren.
De massagefunctie stopt terwijl de stoel in gebruik is.	De beveiliging tegen oververhitting is in werking gezet.	Schakel de massagestoel uit en laat deze 30 minuten afkoelen. Schakel het apparaat daarna opnieuw in.
	De maximale gebruiksduur is bereikt.	

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Handschakelaar functioneert niet.	Handschakelaar is niet met massagestoel geconfigureerd.	Om de handschakelaar te configureren, houdt u de schakelaar in de richting van de onderste helft van de rugleuning. De afstand mag niet meer dan 40 cm bedragen. Druk op de Aan/Uit-toets op de handschakelaar totdat de led boven het relax-massageprogramma brandt. Na ongeveer 3-4 seconden knippert de led 4 keer en daarna wordt de led uitgeschakeld. De handschakelaar is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik.
De handschakelaar/massagestoel reageert niet wanneer er meerdere apparaten zijn geplaatst.	Het signaal van de handschakelaar is niet eenduidig aan één apparaat toegewezen.	Zorg voor een minimale afstand van ca. 15 meter tussen de massagestoelen.

8. Technische gegevens

Voeding	220-240 V~, 50/60 Hz, 120 W
Afmetingen (in ligpositie)	162 x 73 x 76 cm
Gewicht	ca. 50,5 kg
Maximaal draagvermogen	150 kg

9. Verwijdering

Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood,

Cd = batterij bevat cadmium,

Hg = batterij bevat kwik.



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde verzamelpunten in uw land.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



10. Garantie / service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantiëvoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst "Service International" met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

