

beurer

MC3800



RU Массажное кресло
Инструкция по применению



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Содержание

1. Использование по назначению	3	7. Что делать при возникновении каких-либо проблем?	10
2. Указания по технике безопасности	3	8. Технические характеристики	10
3. Описание прибора	5	9. Утилизация	11
4. Подготовка к работе	7	10. Гарантия	11
5. Обслуживание	8		
6. Уход и хранение	9		

Комплект поставки

- Массажное кресло
- Подушка под спину
- Пульт управления
- Подушка для сиденья
- Подушка для головы
- Комплект батареек








ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга.
- Не помещайте какие-либо предметы в отверстия на приборе и не вставляйте ничего в его вращающиеся части. Следите за тем, чтобы подвижные части не были зажаты.
- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этого требования ведет к потере гарантии.

Пояснения к символам

В инструкции по применению и/или на заводской табличке используются следующие символы:.

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора или принадлежностей.
	Указание Отмечает важную информацию.
	Применяйте только в закрытых помещениях.
	Не вставляйте иголки в прибор!

	Знак CE Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Производитель
	Знак соответствия требованиям Великобритании

1. Использование по назначению

Массажное кресло предназначено для массажа спины и ног. Внимательно следуйте указаниям по технике безопасности в данной инструкции по применению. Используйте прибор только указанным способом. Прибор предназначен исключительно для частного пользования, запрещается применение в медицинских и коммерческих целях.

2. Указания по технике безопасности

Удар электрическим током



Предостережение!

- Во избежание опасности поражения электрическим током используйте данное массажное кресло осторожно и бережно, как и любой другой электрический прибор.
- Эксплуатируйте прибор только при напряжении, указанном на блоке питания.
- Не используйте прибор или его принадлежности при видимых повреждениях.
- Не используйте прибор при случайном попадании на него воды.
- Не используйте прибор во время грозы.
- Используйте прибор только в закрытых помещениях и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- В случае появления дефектов или неполадок в работе немедленно отключите прибор. Выньте сетевой штекер из розетки.
- Никогда не тяните за сетевой кабель, чтобы вынуть штекер из розетки.
- Не зажимайте сетевой кабель.
- Сетевой кабель должен находиться на расстоянии от горячих поверхностей.
- Убедитесь, что прибор, выключатель и кабель не контактируют с водой, другими жидкостями или паром.
- Прикасайтесь к прибору только сухими руками.
- Берегите прибор от ударов и падений.

Ремонт прибора



Предостережение!

- Запрещено открывать прибор.
- Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. При неправильном выполнении ремонта пользователь подвергает себя большой опасности. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу или к авторизованному торговому представителю, в противном случае гарантия теряет свою силу.
- Запрещается открывать застежку-молнию в нижней части чехла. Она используется только для технических целей.
- Не втыкайте иголки или другие острые предметы в кресло.

Опасность пожара

Предостережение!

Использование прибора не по назначению или несоблюдение правил, указанных в этой инструкции, может при определенных обстоятельствах привести к пожару!

- Всегда следите за тем, чтобы прорези для вентиляции оставались открытыми. Предохраняйте прорези для вентиляции от попадания пыли, волос и т. д.
- Не используйте массажное кресло вместе с другими электрическими приборами (например, с электроодеялом).
- Никогда не используйте прибор вблизи от емкостей с бензином или другими легковоспламеняющимися веществами.

Обслуживание

Предостережение!

Данный прибор предназначен исключительно для массажа спины и ног человека. .

Он не может заменить медицинского лечения! Не пользуйтесь массажными приборами в случаях, соответствующих одному или нескольким из следующих предупредительных указаний.

Не используйте массажный прибор

- не использовать при болезненных изменениях или повреждениях в области спины (например, при грыже межпозвоночных дисков);
- во время беременности;
- во время сна;
- для массажа животных;
- при любых видах деятельности, при которых непредвиденная реакция может быть опасной;
- после приема веществ, которые приводят к ограничению восприимчивости (например, болеутоляющих медикаментов, алкоголя).

Проконсультируйтесь с врачом, если не уверены в правильности выбора массажного прибора.

Перед использованием массажного прибора проконсультируйтесь с врачом, в особенности в следующих случаях:


- при тяжелых заболеваниях или имеющихся операциях в верхней части тела;
- при наличии электростимулятора, имплантатов или других медицинских устройств;
- при тромбозах;
- диабете;
- при необъяснимых болях.
- Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.
- Никогда не трогайте руками массажный механизм и ролики во время работы прибора. Опасность заземления!
- Не засовывайте никакие предметы в отверстия на приборе и не вставляйте ничего в его вращающиеся части. Следите за тем, чтобы подвижные части не были зажаты.
- После каждого использования выключайте прибор с помощью главного выключателя.
- Положите сетевой кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Никогда не вставайте на прибор ногами и не ставьте на него предметы.
- Никогда не используйте кресло для массажа припухлостей, воспаленных участков или мест с кожными заболеваниями.
- Не используйте прибор при болях в желудке, причины которых нельзя объяснить.
- Не допускается использование массажного кресла одновременно несколькими лицами.
- Не превышайте максимальную нагрузку 200 кг.

Внимание!

- Берегите прибор от прямых солнечных лучей.
- Не эксплуатируйте прибор при температуре выше 40 °C.
- После долгого простоя убедитесь в исправном функционировании прибора.

3. Описание прибора

Вид снаружи

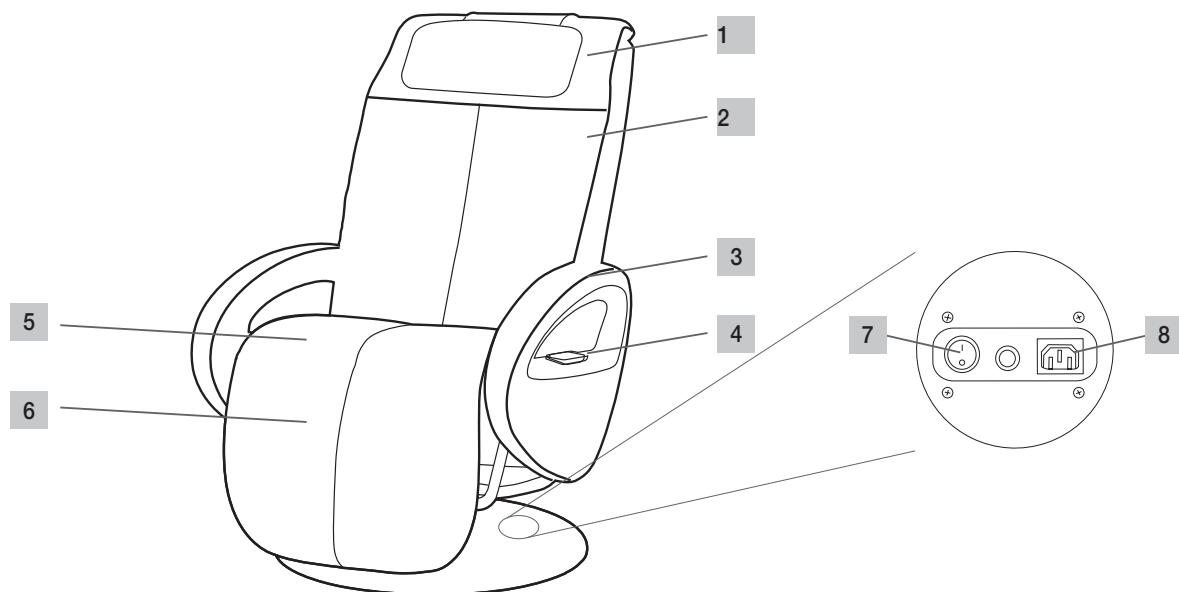

1 Подушка для головы

2 Спинка

3 Подлокотник

4 Пульт управления с отделением для батареек


5 Подушка для сиденья

6 Подставка для ног

7 Главный выключатель

8 Подключение от сети


Внутреннее устройство

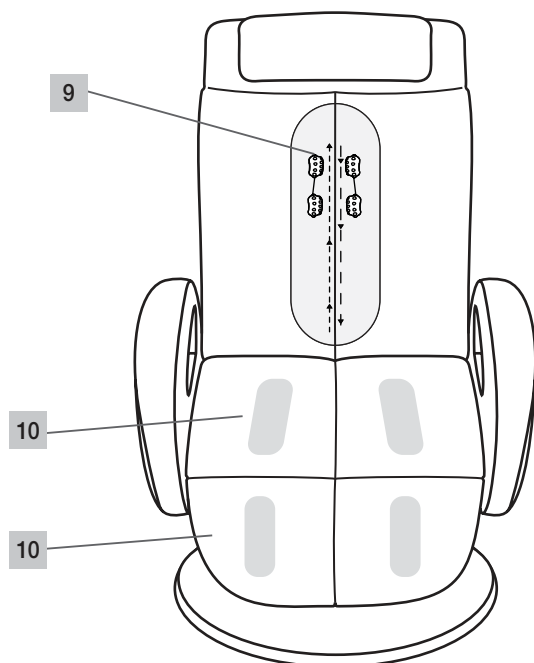

9 Массажные ролики

10 Точки вибромассажа

Пульт управления

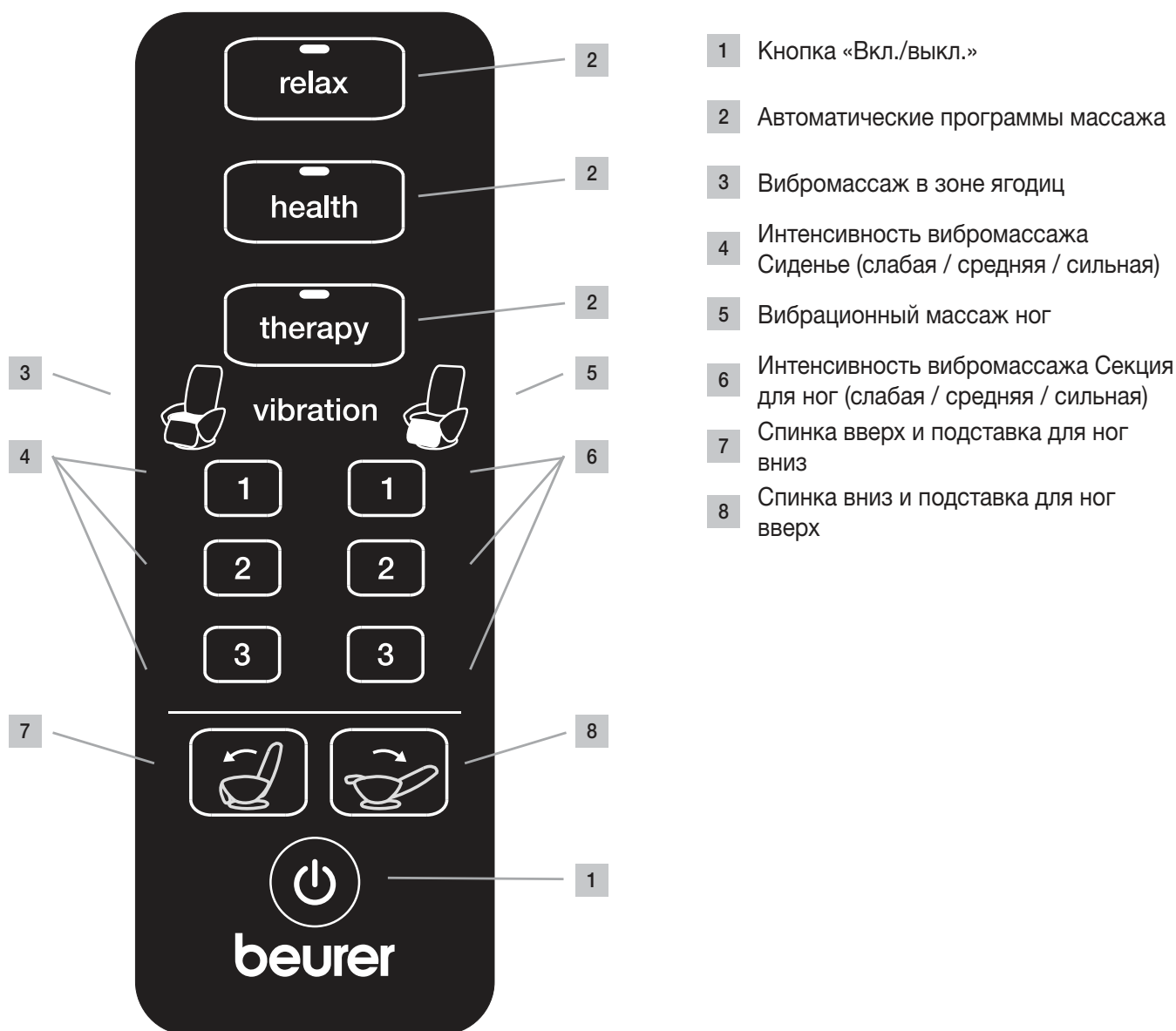

Функции кнопок на пульте управления

Автоматические программы массажа

Массажное кресло имеет 3 автоматически запускаемые программы: «**relax**», «**health**», «**therapy**» (расслабляющий, освежающий, лечебный массаж).

Автоматические программы позволяют выполнять комбинированный массаж для всей спины: разминающий, похлопывающий, перекатывающий и массаж шиацу.

relax

> Нажмите кнопку «**relax**»

Программа массажа запустится автоматически.

Общая продолжительность 15 минут. Затем массажное кресло остается в установленном Вами положении.

health

> Нажмите кнопку «**health**»

Программа массажа запустится автоматически.

Общая продолжительность 15 минут. Затем массажное кресло остается в установленном Вами положении.

therapy

> Нажмите кнопку «therapy»

Программа массажа запустится автоматически.

Общая продолжительность 15 минут. Затем массажное кресло остается в установленном Вами положении.



Примечание

Вибрационный массаж работает независимо от программ массажа.

Для этого необходимо нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и выключить текущую программу массажа.

Вибромассаж, выключение

Вибромассаж можно также выключить повторным нажатием кнопки интенсивности.

Однократное нажатие кнопки интенсивности включает вибромассаж, повторное нажатие той же кнопки интенсивности выключает его.

4. Подготовка к работе



Предостережение!

- Не давайте упаковочный материал детям. Опасность удушья.
- Прежде чем приступить к использованию прибора, прочтите указания по технике безопасности в разделе «Безопасность».
- ▷ См. раздел «Безопасность», стр. 3–70.



Внимание!

- Массажное кресло может повредить напольное покрытие. Подложите под кресло подходящую нескользящую подстилку.

Место установки прибора


- Установите кресло на устойчивую и ровную поверхность.
- Перед вводом в эксплуатацию очистите пространство перед массажным креслом и позади него, чтобы спинка могла свободно опускаться, а подставка для ног подниматься.




Внимание!

Не используйте для удаления упаковки острые инструменты (например, канцелярский нож).


1) Вставьте 2 батарейки AAA в пульт управления в соответствии с маркировкой.

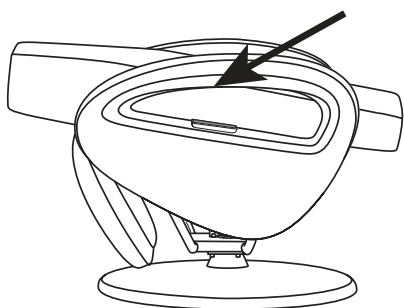


2) Достаньте массажное кресло из коробки, держась за обозначенные места. Для данной работы требуются два человека.

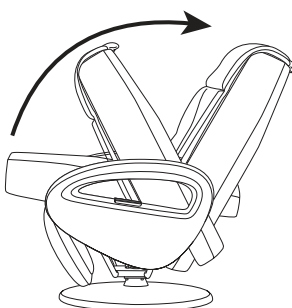

3) Откиньте спинку вверх так, чтобы она зафиксировалась с характерным щелчком.

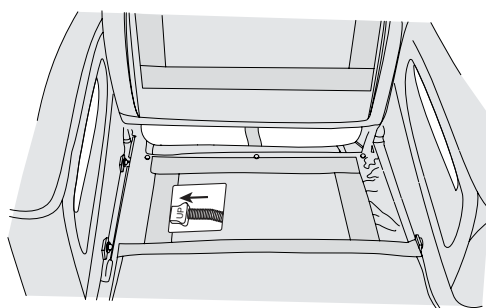

4) Вставьте закрепленную на спиральной пружине штепсельную вилку в предусмотренное гнездо. Затем откиньте к спинке подушку для сиденья.

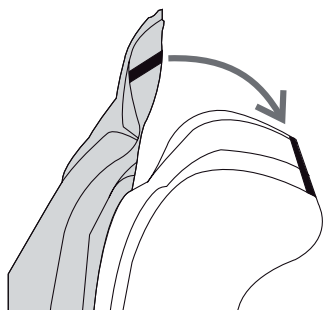

5) Соедините подушку для спины с подушкой для сиденья и спинкой.



6.) Теперь массажное кресло готово к работе

5. Обслуживание

Предостережение!

- Прежде чем приступить к использованию прибора, прочтите указания по технике безопасности в разделе «Безопасность».
- ▷ См. раздел «Безопасность», стр. 3–74.

Опасность опрокидывания!

- Всегда осторожно садитесь в кресло, установленное в положении сидя. Никогда не садитесь в кресло, находящееся в положении лежа.

Внимание!

- При раздражении любого рода немедленно прекратите массаж

Важно!

- Никогда не снимайте подушки для спины во время массажа.

Перед включением

- На время массажа надевайте удобную одежду.
- Выньте все из карманов (например, ключи, складной нож, мобильный телефон).
- Примите удобное расслабленное положение тела.
- Всегда садитесь ровно посередине кресла, чтобы позвоночник находился точно между массажными роликами.
- Массаж всегда должен быть расслабляющим и приятным. Если массаж вызывает неприятные ощущения или боль, прервите массаж или измените свое положение.
- Если массажное кресло долгое время не используется, проверьте надлежащее состояние прибора перед новым использованием.


Включение массажа

Нажмите кнопку «Вкл./выкл.» на пульте управления.

После включения спинка сиденья и подставка для ног опускаются. Параллельно проводится исследование всей зоны спины, чтобы определить размер пользователя. После успешного сканирования спины активируется массажная программа **relax** (расслабляющий массаж).

- Нажмите на кнопку интенсивности вибрации, чтобы установить интенсивность вибромассажа в зоне ягодиц и стоп или отключить его.
- „Вибромассаж в области ягодиц и ступней можно включать и выключать отдельно.

Положение лежа/положение сидя

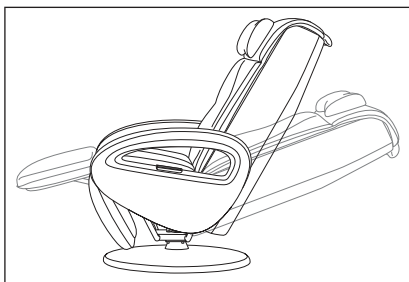

- Установка массажного кресла в положение лежа.

Выключение массажного кресла

По завершении массажной программы кресло отключается автоматически. Сохраняется текущее положение массажного кресла. Повторным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ массажная программа relax запустится снова. Двойным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ массажное кресло можно вернуть в исходное положение.



Внимание!


Продолжительность непрерывного включения прибора не должна превышать 15 минут, в противном случае существует опасность перегрева. Перед новым использованием дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

Во время массажа прибор можно выключить в любое время, нажав кнопку «Вкл./выкл.»

- Выключите массажное кресло, нажав главный выключатель в нижней части спинки.
- Выньте сетевой штекер из розетки

Дополнительные настройки, возможности управления

Складывание кресла

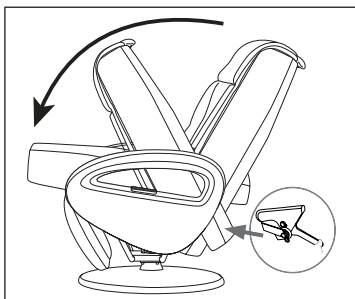

Чтобы массажное кресло не занимало много места при хранении, его можно сложить.

Выполните действия, описанные в пункте 5 раздела «Ввод в эксплуатацию», в обратном порядке.

6. Уход и хранение



Предостережение!

- Выключайте прибор после каждого применения и перед чисткой, нажав главный выключатель.
- Выньте сетевой штекер из розетки.
- Протрите массажное кресло сухой или чуть влажной салфеткой, не оставляющей ворсинок.



Важно!

- Очищайте прибор только указанным способом.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Не используйте чистящие средства, содержащие растворитель.
- Не используйте агрессивные чистящие средства. Они могут повредить поверхность кресла.

Жир может оставлять пятна на кожаменителе. Очищайте массажное кресло, используя только рекомендованные чистящие средства для кожаменителя.

7. Что делать при возникновении каких-либо проблем?

Проблема	Причина	Меры по устранению
Шум трения во время работы.	Эти шумы нормальны и исходят от работающего мотора или массажных роликов, которые трутся об мягкую обивку.	Вмешательство не требуется.
Массаж не запускается.	Сетевой штекер не включен в розетку.	Вставьте сетевой штекер в розетку.
	Главный выключатель кресла не включен.	Включите главный выключатель.
	Сработал предохранитель, и прервалось электропитание кресла.	Обратитесь в сервисную службу.
Невозможно поднять и опустить спинку или подставку для ног.	Спинка и подставка для ног перегружены или заблокированы.	Уберите предметы, блокирующие прибор.
Функция массажа отключается во время работы.	Сработала защита от перегрева.	Отключите массажное кресло и дайте ему остыть в течение 30 мин., затем включите его снова.
	Достигнута максимальная продолжительность работы.	
Пульт управления не работает.	Пульт не настроен для управления массажным креслом.	Чтобы настроить пульт управления, держите его в направлении нижней половины спинки кресла. Расстояние до спинки кресла должно составлять не более 40 см. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления, чтобы загорелся светодиод над программой массажа relax. Через 3–4 секунды светодиод три раза мигнет и отключится. Пульт управления настроен и готов к работе.
Ручной выключатель/массажное кресло не реагирует на размещение нескольких приборов.	Сигнал ручного выключателя не привязан к прибору	Соблюдайте минимальное расстояние в 15 метров между массажными креслами.

8. Технические характеристики

Электропитание	220-240 В~, 50/60 Гц, 120 W
Размеры	162 x 73 x 76 см
Вес	са. 50,5 кг
Максимальная грузоподъемность	150 кг

9. Утилизация

Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.

Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:

Pb = свинец,

Cd = кадмий,

Hg = ртуть.



В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране.

Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

10. Гарантия

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.

