



beurer

MG 40



NL Infrarood-massageapparaat
Gebruiksaanwijzing

CE

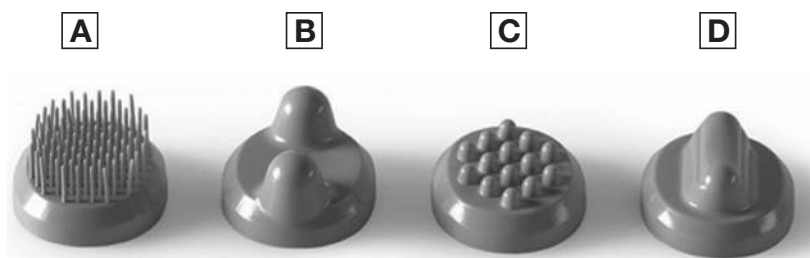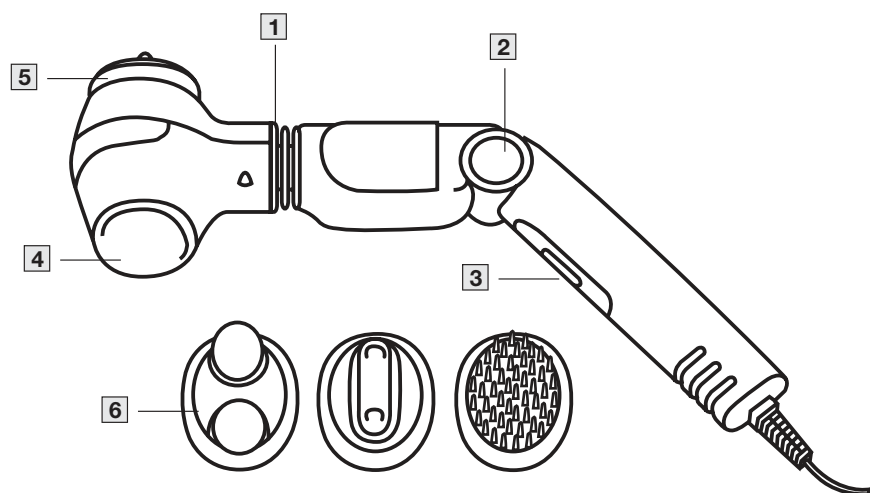



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg de waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen op. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing toegankelijk is voor andere gebruikers. Geef als u het apparaat aan iemand anders geeft, ook de gebruiksaanwijzing mee.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering.....	4	8. Gebruik.....	6
2. Verklaring van symbolen	4	8.1 Infraroodwarmte/-massage.....	6
3. Informatie	4	8.2 Massage.....	6
4. Voorgeschreven gebruik.....	4	9. Reiniging en onderhoud	6
5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen ...	5	10. Verwijdering.....	6
6. Beschrijving van het apparaat	5	11. Technische gegevens	7
7. Ingebruikname.....	6	12. Garantie/service	7



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

1. OMVANG VAN DE LEVERING

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1 x Infrarood-massageapparaat
4 x verwisselbare massageopzetstukken
1 x Deze gebruiksaanwijzing

2. VERKLARING VAN SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	Let op Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
	Instructie lezen
	Het (elektrisch) apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid
	Importeursymbool
	Fabrikant
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).

	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton
	Apparaat uit veiligheidsklasse II

3. INFORMATIE

Massage wordt in het kader van alle vormen van gezondheidszorg, fitness en training aanbevolen. Een massage vergroot niet alleen het algemene welzijn, maar is ook bevorderlijk bij spierpijn, spierspanningen, doorbloedingsstoornissen en vermoeidheidsverschijnselen.

De extra warmte van het infraroodlicht versterkt de werking van de massage, doordat deze de huid niet alleen oppervlakkig verwarmt, maar ook de doorbloeding stimuleert. Zo worden ook de diepere weefsel- en spierlagen bereikt.

4. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Dit apparaat is bestemd voor de massage van afzonderlijke lichaamsdelen van het menselijk lichaam. Het vervangt geen behandeling door een arts. Gebruik het massageapparaat niet, wanneer één of meer van de volgende waarschuwingen op u van toepassing is. Wanneer u twijfelt of dit massageapparaat geschikt voor u is, raadpleeg dan uw dokter.

WAARSCHUWING

Gebruik het massage apparaat

- niet bij dieren,
- niet bij ziekelijke veranderingen of verwondingen in het te masseren lichaamsgedeelte (bijv. hernia, open wond),
- in geen geval voor massages om en nabij het hart als u een pacemaker hebt. Raadpleeg in dat geval ook voor het masseren van andere lichaamsdelen eerst uw arts,
- nooit op gezwollen, verbrande, ontstoken of verwonde huid- en lichaamsgedeeltes,
- niet tijdens de zwangerschap,
- niet in het gezicht (ogen), op het strottenhoofd of ander bijzonder gevoelige lichaamsdelen,
- nooit tijdens de slaap,
- niet na het innemen van medicamenten of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen!),
- niet op botten (bijv. gewrichten, ruggengraat),
- niet in motorvoertuigen.
- niet in de schaamstreek

Raadpleeg voor dat u het massage apparaat gaat gebruiken uw arts

- wanneer u aan een zware ziekte lijdt of een operatie aan uw bovenlichaam hebt ondergaan,
- wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen draagt,
- Trombose,
- Diabetes,
- bij pijn met onbekende oorzaak.

Dit apparaat is alleen geschikt voor het doel zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. De producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door verkeerd of lichtzinnig gebruik.

5. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan schade aan personen en goederen veroorzaken. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor, dat andere gebruikers hier toe ook toegang hebben. Geef deze gebruiksaanwijzing door wanneer u het apparaat doorgeeft.



WAARSCHUWINGA

Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Verstikingsgevaar.

Elektrische schok



WAARSCHUWING

Zoals elk elektrisch apparaat moet ook dit massageapparaat voorzichtig en omzichtig worden gebruikt, om het risico van een elektrische schok te vermijden.

Gebruik het apparaat daarom

- alleen met de op het apparaat vermelde netspanning,
- nooit, wanneer het apparaat of toebehoren zichtbare beschadigingen bevat,
- niet tijdens onweer.

Schakel het apparaat in geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat indien nodig uit het stopcontact. Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd of draag het apparaat nooit aan de stroomkabel. Houd afstand tussen de kabels en warme oppervlakken.

Open onder geen enkele voorwaarde het apparaat.

Verzeker u er van dat het massageapparaat, de stekker en de kabel niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.

Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen terwijl de netadapter in het stopcontact is gestoken. Trek meteen de netadapter uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet als het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.

Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

Gebruik het apparaat daarom

- uitsluitend binnenshuis in droge ruimten,
- uitsluitend met droge handen,
- nooit in de bad, onder de douche of bij gevulde wastafels,
- nooit in zwembaden, whirlpools of in de sauna,
- nooit buitenshuis.

Grijp in geen enkel geval naar een apparaat wat in het water is gevallen. Neem direct de stekker uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet als het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.

Stel het apparaat niet bloot aan schokken en laat het apparaat niet vallen.

Reparatie



WAARSCHUWING

Reparaties aan elektronische apparatuur mag slechts door vaklieden worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Richt u zich voor reparaties tot de klantenservice of tot een geautoriseerde handelaar.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Bij niet vakkundig gebruik resp. gebruik niet volgens de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat eventueel brandgevaar!

Gebruik het massageapparaat daarom

- nooit langer dan 15 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt,
- nooit zonder toezicht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn,
- nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen,

Onderhoud



OPGELET

Na ieder gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en uitgenomen.

- Let op dat er geen haren verstrikt raken in het apparaat. Draag indien nodig een haarnetje.
- Contact met puntige of scherpe voorwerpen vermijden.
- Apparaat en kabels niet knikken.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, radiatoren of direct zonlicht.
- Steek nooit voorwerpen door de openingen in het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u de massageopzetstukken verwijdt of aanbrengt.

6. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 2.

1

Draaischarnier voor massagekop

2

Drukknop voor het buigen van de handgreep (4 standen)

3

Schuifknop

4

Infraroodoppervlak

5


Massageoppervlak

6

Massageopzetstukken

7. INGEBRUIKNAME


Stel met de schuifknop de gewenste functie in:

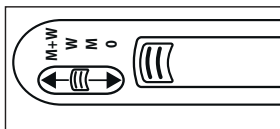

Stand	
0	Uit
M	Vibratiemassage
W	Infraroodwarmte
W + M	Infrarood-warmtemassage

8. GEBRUIK

8.1 Infraroodwarmte/-massage

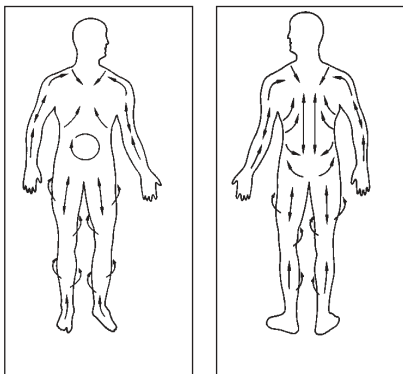

Voorkant van het lichaam Achterkant van het lichaam

Schuif de schakelaar op "W" om het infraroodoppervlak op te warmen. Het oppervlak licht nu op. Na enkele minuten is het opgewarmd en klaar voor gebruik.

Let op: bij het langdurig opwarmen van het infraroodoppervlak zonder contact met de huid, kan de temperatuur eventueel onaangenaam hoog zijn. Controleer daarom voordat u het oppervlak op de huid aanbrengt altijd eerst met uw vingertoppen de temperatuur van het infraroodoppervlak. Een te sterke verwarming kan worden gereduceerd door de infraroodwarmte korte tijd uit te schakelen.

Als het infraroodoppervlak de juiste temperatuur heeft, zet u de schakelaar op "W + M". Nu kunt u starten met de infrarood-warmtemassage.

Dankzij het draaischarnier aan de massagekop en de mogelijkheid om de hoek van de handgreep eenvoudig in te stellen, kan elk deel van het lichaam zonder problemen worden bereikt. Door op de knop te drukken (zie nr. 2 in de afbeelding), kan de handgreep in 4 standen worden ingesteld.

8.2 Massage

Massaer met langzame, cirkelvormige bewegingen en oefen daarbij geen druk uit. Houd de huid voor een optimale werking zo strak mogelijk.

Op de afbeeldingen ziet u de ideale massagerichting.

Voor een intensievere massage adviseren wij u de volgende massageopzetstukken op het massageoppervlak aan te brengen:	
A Borstelopzetstuk:	voor een intensieve massage van de lichaamshuid; voelt aangenaam en stimuleert de doorbloeding.
B Noppenopzetstuk 2:	voor een intensieve en plaatselijke dieptemassage; is zeer weldadig na lichamelijke inspanning.
C Noppenopzetstuk 1:	voor een intensieve massage bij spierpijn en spierspanningen.
D Kegelopzetstuk:	voor een intensieve en plaatselijke dieptemassage; is zeer weldadig na lichamelijke inspanning.

Zonder opzetstuk wordt het apparaat vooral gebruikt voor het masseren van gevoelige delen van het lichaam en voor het gebruik van alleen de infraroodwarmte.

9. REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging



WAARSCHUWING

- Schakel het apparaat voor elke reiniging uit.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een licht bevochtigde doek.
- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat of de toebehoren binnendringen.
- Gebruik het apparaat pas weer wanneer het helemaal droog is.
- Reinig het apparaat niet in een vaatwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels!

Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact.

Doe het apparaat met een vochtige doek af. De massageopzetstukken kunnen met warm water met zeepsop worden gereinigd. Gebruik alleen milde huishoudelijke reinigingsmiddelen.

Gebruik het infrarood-massageapparaat pas weer wanneer het helemaal droog is.

Onderhoud

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u het in de originele verpakking en op een droge plek op te bergen. Plaats geen andere spullen op het apparaat.

10. VERWIJDERING

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



11. TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	220-240 V~, 50/60 Hz, 12 W
Afmetingen	ca. 39,0 x 8,8 x 8,5 cm
Gewicht	ca. 650 g

12. GARANTIE/SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in de meegeleverde garantiebrochure.

