

beurer

IPL 10000+



NL Ontharing	
Gebruiksaanwijzing	2

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat of het netsnoer beschadigd is. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – risico op elektrische schok!
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd stevig en recht staat.
- Kijk nooit direct in het licht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat niet zijn afgedekt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage, beauty, lucht en baby.

Met vriendelijke groet,

Het Beurer-team

Inhoudsopgave

1. Bij levering inbegrepen	3	9. Gebruik	16
2. Verklaring van de symbolen	3	10. Reiniging en onderhoud	18
3. Beoogd gebruik	4	11. Wat te doen bij problemen	19
4. Waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen ..	4	12. Veelgestelde vragen	19
5. Wat is het beurer SalonPro System?	7	13. Afvoeren	22
6. Beschrijving van het apparaat	8	14. Technische gegevens	22
7. Voordat u begint	10	15. Garantie/service	22
8. Ingebruikname	15		

1. Bij levering inbegrepen

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

1 x beurer SalonPro System

1 x precisiekop

1 x netsnoer

1 x deze gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing Waarschuwing voor situaties met risico op verwonding of gevaar voor uw gezondheid.
	Let op Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Lees de instructie
	Voer het apparaat af conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	Apparaat uit veiligheidsklasse II Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet dan ook aan veiligheidsklasse 2.
	Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieueisen.
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU)
	Stel het product niet bloot aan vocht.
	Gevaar Gebruik dit apparaat niet in of in de buurt van water, en niet als u zich in of onder water bevindt (bijv. bij wastafels, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
	Houd het apparaat uit de buurt van de ogen!



Gebruik het apparaat niet op een gebruide huid of na het zonnen.

3. Beoogd gebruik

Het beurer SalonPro System is bedoeld voor het verwijderen van ongewenste lichaamsbehaarings bij volwassenen.

Ideale lichaamszones voor het beurer SalonPro System zijn de benen, oksels, bikinilijn, borst, buik en het gezicht onder de jukbeenderen. Het beurer SalonPro System is niet bedoeld voor ontharing bij de anus, de genitaliën of de tepels. Gebruik het beurer SalonPro System uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

4. Waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen



WAARSCHUWING

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, de veiligheidsopmerkingen zorgvuldig door en neem deze opmerkingen goed in acht bij het gebruik van het beurer SalonPro System. Als u de volgende opmerkingen niet in acht neemt, kan dit leiden tot letsel of materiële schade. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Wanneer u dit apparaat van de hand doet, geef dan deze gebruiksaanwijzing mee.

- Personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of wanneer zij van deze persoon uitgebreide instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet tijdens de zwangerschap of in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.
- **STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELIJK** als de huid extreem rood wordt, als zich blaasjes op de huid vormen of bij verbranding van de huid!
- Voer 48 uur voor het eerste gebruik van het beurer SalonPro System een huidverdraagzaamheidstest uit op een klein stukje huid van de lichaamszone waarop u het apparaat wilt gebruiken (zie hoofdstuk 7, stap 2: 'Huidverdraagzaamheidstest').
- Kijk in geen geval direct in het licht uit de patroon. Dit product produceert mogelijk gevaarlijke optische straling. Zorg ervoor dat het lichtvlak van de patroon volledig contact maakt met de huid.
- Probeer nooit een lichtimpuls te verzenden als u de applicator in de lucht houdt!
- Bepaal aan de hand van de 'Tabel voor haar- en huidskleuren' op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor de kleur van uw huid en uw lichaamsbehaarings en controleer of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een 'x').
- Gebruik het beurer SalonPro System niet op een van nature donker gekleurde huid. De behandeling van een donkere huid met het beurer SalonPro System kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).
- Het beurer SalonPro System werkt het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste, en hoewel bruin en lichtbruin haar ook reageert, zijn er voor dergelijke haartypen meestal meer ontharingsbehandelingen nodig. Rood haar reageert mogelijk ook. Wit, grijs en blond haar reageert gewoonlijk niet op het beurer SalonPro System, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingsbehandelingen.
- Het beurer SalonPro System kan tijdelijke pigmentatie veroorzaken.
- Probeer het beurer SalonPro System-apparaat niet te openen of te repareren. Bij het openen van het beurer SalonPro System kunt u in contact komen met gevaarlijke elektrische onderdelen of met lichtimpulsen, wat ernstig letsel en/of blijvende schade aan de ogen tot gevolg kan hebben.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met contactgel. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.

GEVAAR

Houd het beurer SalonPro System uit de buurt van water! Het beurer SalonPro System is een elektrisch apparaat. Plaats het apparaat niet in water en laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.



Dit kan een krachtige elektrische schok tot gevolg hebben!

- Gebruik het beurer SalonPro System niet terwijl u een bad neemt.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als het apparaat nat of vochtig is geworden.
- Probeer het beurer SalonPro System niet te pakken als het in het water is gevallen.
- Trek direct de netstekker van het beurer SalonPro System uit het stopcontact als het apparaat in het water is gevallen.
- Pak de netstekker en het apparaat nooit vast met natte handen!



LET OP

Om schade te vermijden

- Probeer het beurer SalonPro System-apparaat niet te openen of te repareren. Een poging het beurer SalonPro System te openen, kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben en zorgt ervoor dat de garantie vervalt.
- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan temperaturen van minder dan 10 °C of meer dan 40 °C.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als de netstekker in een stopcontact is gestoken.
- Gebruik het beurer SalonPro System uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en uitsluitend op de in de gebruiksaanwijzing beschreven manier.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als het snoer of de stekker beschadigd is en houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Trek de netstekker van het beurer SalonPro System altijd meteen na gebruik uit het stopcontact.
- Trek de netstekker van het beurer SalonPro System uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet met opzetstukken of toebehoren die niet worden aanbevolen door Beurer GmbH.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als u tijdens het gebruik van het apparaat rook ziet of ruikt.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd lijkt te zijn.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als de ventilatiesleuf van de applicator gescheurd is, loskomt of geheel ontbreekt.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als de huidskleursensor in de applicator gescheurd of gebroken is.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet als de behuizing gescheurd is of uit elkaar valt.
- Gebruik het beurer SalonPro System niet met een beschadigde patroon of als het lichtvlak gescheurd of gebroken is of ontbreekt.
- Schakel het beurer SalonPro System niet in als het snoer of de stekker beschadigd is.



WAARSCHUWING

Gebruik het beurer SalonPro System in geen geval als u aan een van de volgende ziekten lijdt:

- Als u huidkanker hebt of hebt gehad.
- Als u aan epilepsie lijdt.
- Als u een keloïd hebt.
- Als u herpes of psoriasis hebt.
- Als u aan fotosensibiliteit of andere lichtgevoeligheden lijdt, zoals porfyrie, polymorfe lichterruptie, urticaria solaris, lupus, enz.
- Als u een stofwisselingsziekte hebt, zoals diabetes.
- Als u aan een bloedstollingsstoornis lijdt.

Gebruik het beurer SalonPro System in geen geval als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

- Als u medicijnen gebruikt die de huid gevoeliger maken voor licht, inclusief niet-steroïdale ontstekingsremmers (bijvoorbeeld aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, fenothiazines, thiazidediuretica, sulfonylurea, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvine, alfa-hydroxycarbonsuren (AHA's), bèta-hydroxycarbonsuren (BHA's), Retin-A®, Accutane® en/of topische retinoïden.
- Als u onlangs bent behandeld of momenteel wordt behandeld met azelaïnezuur.
- Als u in de afgelopen twee weken tetracycline-antibiotica hebt ingenomen.
- Als u in de afgelopen 6 maanden bent behandeld met Accutane® (isotretinoïne).
- Als u in de afgelopen 3 maanden een kuur met steroïden hebt ondergaan.
- Als u in de afgelopen 6 tot 8 weken een huidpeeling of een andere behandeling voor een gladdere huid hebt laten uitvoeren.
- Als u in de afgelopen 3 maanden bent bestraald of chemotherapie hebt ondergaan.

Gebruik het beurer SalonPro System in geen geval op de volgende plaatsen:

- Op slijmvliezen bij de neus en oren.
- Op of in de buurt van een actief implantaat, zoals een pacemaker, een apparaat tegen incontinentie, een insulinepomp, enz.
- Op het gezicht boven de jukbeenderen, rondom de ogen, wenkbrauwen of wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.
- Op tepels, genitaliën (zowel mannelijk als vrouwelijk) en rondom de anus.
- Op piercings of andere metalen voorwerpen, zoals oorbellen en andere sieraden.
- Op een tatoeage of permanente make-up in de te behandelen zone.
- Op donkerbruine of zwarte vlekken, zoals grote zomersproeten, moedervlekken, leverschimmels, blaren of wratten.
- Op eczeem, psoriasis, laesies, open wonden of acute infecties. Wacht tot de betreffende plek is geheel voordat u het beurer SalonPro System gebruikt.
- Op beschadigde of droge huid of op plaatsen met een risico op de groei van kwaadaardige cellen.
- Op een lichaamsdeel waar u later mogelijk haar wilt laten staan.



Waarschuwingen voor zonnen voor en na behandeling!

Zonnen voor de behandeling

1. Wacht na het zonnen ten minste 2 weken voordat u het apparaat gebruikt.
2. Controleer voorafgaand aan de behandeling of u verbrand bent door de zon. Als de zonnebrand nog niet is weggetrokken, mag u het apparaat niet gebruiken totdat de huid volledig is hersteld.
3. Voer een huidverdraagzaamheidstest uit op de gebruikte huid (zie hoofdstuk 5.1) om de geschikte energietoestand vast te stellen.



Zonnen na de behandeling

1. Wacht na de behandeling ten minste 48 uur voordat u gaat zonnen. Als de huid nog rood is, mag deze niet worden blootgesteld aan de zon!
2. Bedek de behandelde huid de eerste twee weken na de behandeling met kleding als u de zon in gaat of smeer de huid in met zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30).

Bruinen met kunstmatig licht


De aanwijzingen onder 'Zonnen voor de behandeling' en 'Zonnen na de behandeling' gelden ook voor het bruinen met kunstmatig licht en bruiningslotion.

Las voor en na een bezoek aan de sauna of het zwembad een pauze in van 24 uur voordat u apparaat gebruikt, omdat het chloor huidirritaties kan veroorzaken.

Opmerking


Deze lijst biedt geen garantie voor volledigheid. Raadpleeg uw huisarts of een dermatoloog als u niet zeker weet of u het beurer SalonPro System veilig kunt gebruiken.

5. Wat is het beurer SalonPro System?

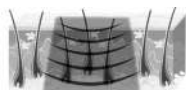

Voor het gebruik van het beurer SalonPro System

Het beurer SalonPro System is een apparaat voor langdurige ontharing met licht voor persoonlijk gebruik. Ontharing met laser en licht is een bekende en beproefde methode. Bij klinische toepassing over de hele wereld gedurende meer dan 15 jaar is gebleken dat het een veilige en effectieve methode is voor een langdurige reductie van de haargroei.

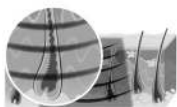

Tijdens een impuls van het beurer SalonPro System

Hoe verwijdert licht het haar?

Ontharing met licht is gebaseerd op de theorie van selectieve fotothermolyse, waarbij optische energie wordt gebruikt om haargroei tegen te gaan. Om dat thermische resultaat te bereiken, moet de haarschacht selectief lichtenergie opnemen en deze omzetten in hitte.

Die selectiviteit wordt bereikt als de optische energie, die aan het weefsel wordt afgegeven, hoofdzakelijk wordt opgenomen door het pigment van de haarschacht, terwijl de huid en het omliggende weefsel koel blijven. Melanine is het pigment in de haarschacht dat het licht opneemt en de hitte genereert, die uiteindelijk de haargroei tegengaat. Daarom kan des te meer licht worden geabsorbeerd en kan het licht bij de ontharing des te effectiever zijn, naarmate er meer melanine in het haar aanwezig is (dat wil zeggen, naarmate het haar donkerder is).



Na het gebruik van het beurer SalonPro System



Anagene fase – groeifase

Welke invloed heeft de haargroeicyclus op ontharing met licht?

Elke haar op ons lichaam doorloopt de drie fasen van de haargroeicyclus: de anagene fase, de catagene fase en de telogene fase. Deze fasen zijn erg belangrijk voor de mate waarin ontharing met licht effectief is.

De anagene fase is de groeifase, terwijl de catagene en de telogene fasen rustfasen zijn.




Catagene fase – overgangsfase

De duur van een volledige haargroeicyclus verschilt per persoon en is afhankelijk van de plek op het lichaam waar het haar groeit. In de regel bedraagt de duur echter 18 tot 24 maanden. Op een bepaald moment bevindt het grootste deel van de haarfollikels op een huidoppervlak zich in de rustfase. Op de haren in een rustfase heeft het beurer SalonPro System geen effect.

De haren in de anagene groeifase reageren echter wel op de behandeling met het beurer SalonPro System.

Langdurige ontharing met het beurer SalonPro System kan alleen worden bereikt door middel van behandelingen gedurende ten minste een volledige haargroeicyclus.

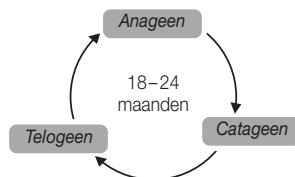

Telogene fase – rustfase

Bij het beurer SalonPro System staat veiligheid op de eerste plaats

• IPL-technologie met het beurer SalonPro System – maximale veiligheid bij een laag energieverbruik

Met de IPL-technologie (Intense Pulsed Light) zijn langdurige ontharingsresultaten mogelijk met slechts een fractie van de energie dan die nodig is bij andere apparaten voor ontharing met licht. Omdat het beurer SalonPro System zo weinig energie gebruikt, wordt het risico op schade of complicaties gereduceerd, wat een gunstig effect heeft op de algehele veiligheid.

• Het beurer SalonPro System beschermt de huid


Ontharing met licht is niet geschikt voor van nature donkere huidtinten en gebruide huid. In het beurer SalonPro System is een *huidskleursensor* geïntegreerd, waarmee de kleur van het te behandelen huidoppervlak kan worden bepaald, zodat gebruik alleen mogelijk is bij daarvoor geschikte huidskleuren. Deze veiligheidsfunctie voorkomt dat u huid behandelt die te donker of te veel gebruind is. De *applicator* van het beurer SalonPro System heeft een geïntegreerde uv-bescherming die schadelijke uv-straling tegenhoudt.

- **Het beurer SalonPro System beschermt de ogen**

De *applicator* van het beurer SalonPro System heeft ter bescherming van de ogen een geïntegreerde huidcontactsensor. Deze is ontwikkeld om te voorkomen dat een lichtimpuls wordt verzonden als de *applicator* in de lucht wordt gehouden. Er wordt alleen een lichtflits verzonden als de huidcontactsensor op de huid aansluit.

6. Beschrijving van het apparaat

Basisunit

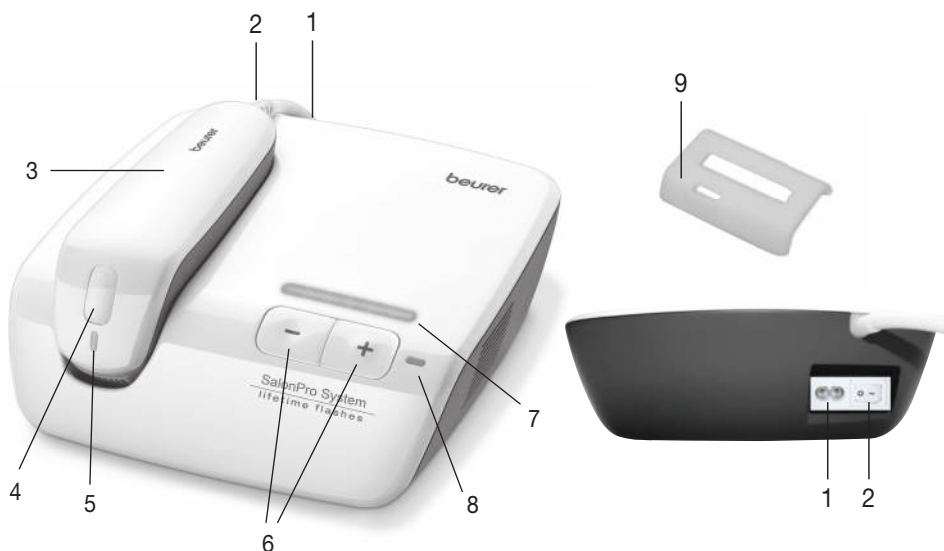

1. Voedingsaansluiting van de basisunit

2. Aan-/Uit-schakelaar

3. Applicator

4. Activeringstoets

5. Indicatielampje

6. Energiekeuzetoetsen

7. Energiecontrolelampje

8. Indicatielampje voor 'Patroon leeg'

9. Precisieop

Applicator



Op de applicator bevindt zich een activeringstoets. Met de activeringstoets wordt de flitslamp geactiveerd.

Binnenin de applicator is de *patroon* aangebracht.

Het indicatielampje bevindt zich in het midden boven op de kop van de applicator en geeft de volgende indicaties:

Het <i>indicatielampje</i> brandt niet	Impuls is niet gereed
Het <i>indicatielampje</i> brandt groen	Impuls is gereed
Het <i>indicatielampje</i> brandt rood	De impuls wordt geblokkeerd, omdat de huidskleur niet geschikt is (zie de 'Tabel voor haar- en huidskleuren' op de achterkant van de gebruiksaanwijzing).
Het <i>indicatielampje</i> brandt oranje	De impuls wordt geblokkeerd, omdat er geen volledig contact is met de huid.
Het <i>indicatielampje</i> knippert rood/energiecontrolelampje knippert groen	<i>Patroon</i> is niet juist geplaatst.

Patroon



De *patroon* van het beurer SalonPro System heeft een geïntegreerde *huidskleursensor*.

Ontharing met licht kan bij donkere huidtinten nadelige gevolgen hebben, zoals verbranding, blaren en verandering van huidskleur (hyper- of hypopigmentatie). Om dergelijke toepassingsfouten te voorkomen, bepaalt de *huidskleursensor* van het beurer SalonPro System voorafgaand aan elke lichtimpuls de kleur van de behandelde huid. Als de *huidskleursensor* constateert dat de huid te donker is voor de behandeling met het beurer SalonPro System, breekt het apparaat het verzenden van impulsen automatisch af.

Als er geen lichtimpuls te zien is en het *indicatielampje* brandt rood, dan betekent dat, dat de door de *huidskleursensor* gemeten huid te donker is voor een veilige behandeling.

De huidskleursensor voorkomt echter niet alleen het verzenden van lichtimpulsen bij een te donkere huid; bij een geschikte huidskleur helpt de sensor u ook bij het bepalen van de juiste energiestand voor uw huidskleur (zie hoofdstuk 7).

De *patroon* van het beurer SalonPro System heeft ook een huidcontactsensor ter bescherming van uw ogen. Deze is ontwikkeld om te voorkomen dat een lichtimpuls wordt verzonden als de *applicator* in de

lucht wordt gehouden. Als er geen lichtimpuls te zien is en het *indicatielampje* brandt oranje, dan betekent dat, dat er onvoldoende contact is tussen de *huidcontactsensor* en de huid.

Probeer het apparaat in dat geval uit op een andere plek van het lichaam of neem contact op met de klantenservice voor het beurer SalonPro System.

De *patroon* van het beurer SalonPro System heeft een geïntegreerde uv-bescherming die schadelijke uv-straling tegenhoudt.

7. Voordat u begint

STAP 1: Controleer of het beurer SalonPro System geschikt is voor u



WAARSCHUWING

Controleer voordat u het beurer SalonPro System voor de eerste keer gebruikt of het apparaat geschikt is voor u.

Om te controleren of het beurer SalonPro System geschikt is voor u, leest u hoofdstuk '4. Waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen' en bepaalt u aan de hand van de 'Tabel voor haar- en huidskleuren' op de achterkant van de gebruiksaanwijzing welke lichtintensiteit het beste geschikt is voor uw huid en lichaamsbehandling en of deze methode wel voor u geschikt is (als dat niet het geval is, wordt dat in de tabel aangegeven met een 'x').

STAP 2: Huidverdraagzaamheidstest



WAARSCHUWING

Voer een huidverdraagzaamheidstest uit voordat u het beurer SalonPro System gebruikt.

Met de huidverdraagzaamheidstest moet worden vastgesteld hoe uw huid reageert op een behandeling met het beurer SalonPro System. Bovendien helpt de test u bij het instellen van de optimale energiestand voor elke te behandelen zone.

Voer op elk gedeelte van de huid dat u wilt behandelen, **48 uur** voor de daadwerkelijke behandeling een huidverdraagzaamheidstest uit.



Opmerking

Bij gezichtsbehandelingen dient de huidverdraagzaamheidstest te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals.

1. Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).



WAARSCHUWING

Reinig de huid IN GEEN GEVAL met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, vlak voordat u het beurer SalonPro System gebruikt.

2. Stel het apparaat in zoals beschreven in punt 2 tot en met 5 van hoofdstuk 8.1 'Beginnen met de behandeling'.
3. Plaats het lichtvlak van de patroon op het gewenste testgedeelte van de huid en zorg ervoor dat er volledig contact is met de huid.
4. Het apparaat is automatisch ingesteld op de laagste energiestand. Verzend de eerste impuls met energiestand 1 door op de activeringstoets te drukken. U ziet een felle lichtflits, hoort een knallend geluid en ervaart mogelijk een licht branderig en/of warm gevoel. Het apparaat is binnen 3 seconden gereed voor de volgende impuls als het indicatielampje op de applicator permanent groen brandt.
5. Haal de applicator van de huid en plaats deze op de volgende plek van het testgedeelte.

Opmerking

Verhoog de energiestand alleen als de vorige energiestand geen onaangenaam gevoel veroorzaakt.
Verhoog de energiestand niet als energiestand 1 al een onaangenaam gevoel veroorzaakt.

6. Met de energiekeuzetoets '+' kunt u de energiestand met 1 stand verhogen. De energiecontrolelampjes branden overeenkomstig de geselecteerde energiestand.
Verzend de tweede impuls met energiestand 2 door op de activeringstoets te drukken.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 alleen als u zich goed voelt, tot u de hoogste energiestand (stand 6) hebt bereikt. Breek de test af als de behandeling een onaangenaam gevoel teweegbrengt, omdat bij het verhogen van de energiestanden het risico op nadelige gevolgen bestaat. Breek de test onmiddellijk af als u nadelige effecten constateert, zoals een extreem rode huid of de vorming van blaasjes.
8. Wacht 48 uur en onderzoek dan het behandelde oppervlak.
Als de behandelde huid er normaal uitziet (geen reactie of lichte roodheid), kunt u beginnen met een volledige behandeling op de hoogste energiestand die u bij de test als aangenaam hebt ervaren. Laat een volledige behandeling van het gedeelte van de huid achterwege als u daar zelfs bij de laagste energiestand extreme roodheid, zwellingen of blaasjes constateert.

Opmerking

Voer geen volledige behandeling uit met een energiestand die u niet eerst hebt getest!
Behandel de geteste oppervlakken op zijn vroegst 1 week na de test.

STAP 3: Plan het ontharen met het beurer SalonPro System voor een optimaal resultaat

Een gemiddelde haargroeycyclus kan 18 tot 24 maanden duren. Tijdens die periode kunnen meerdere behandelingen met het beurer SalonPro System nodig zijn voor een langdurige ontharing. De effectiviteit van de ontharing verschilt per persoon en is bovendien afhankelijk van lichaamszone en haarkleur en van hoe het beurer SalonPro System wordt gebruikt.

De standaardplanning voor ontharing met het beurer SalonPro System gedurende een volledige haargroeycyclus:

- De eerste 3 tot 4 ontharingssessies met het beurer SalonPro System dienen steeds ongeveer twee weken na elkaar plaats te vinden.
- De 5e tot en met de 7e ontharingssessies met het beurer SalonPro System dienen ongeveer vier weken na elkaar plaats te vinden. Daarna zult u het beurer SalonPro System normaal gesproken van tijd tot tijd en wanneer nodig gebruiken, tot u een langdurig resultaat hebt bereikt.

Dit komt overeen met het aanbevolen behandelingsschema, waarmee aantoonbaar de beste resultaten worden bereikt. U kunt uw persoonlijke behandelingsschema ook anders invullen en toch bevredigende resultaten bereiken.

Opmerking

Als dezelfde delen van het lichaam binnen twee weken meerdere keren worden behandeld, levert dat geen betere ontharingsresultaten op.

Typische nazorg met het beurer SalonPro System na het bereiken van een langdurige ontharing:

Als gevolg van hormonale of andere fysiologische veranderingen kunnen haarfollikels in de rustfase actief worden. Daarom kunnen van tijd tot tijd ontharingssessies met het beurer SalonPro System nodig zijn als nazorg.

STAP 4: Bereid de te behandelen zone voor

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u het beurer SalonPro System gebruikt.

STAP 5: Stel de energie-intensiteit in/automatische huidtypeherkenning

Energiestand

De energiestand bepaalt de intensiteit van de lichtimpuls die door het beurer SalonPro System aan de huid wordt afgegeven (van de laagste stand (-) tot de hoogste stand (+)). De bijbehorende *energiecontrolelampjes* op de *basisunit* laten zien wanneer de energiestand wordt verhoogd. Bij een hogere energiestand nemen ook de ontharingsresultaten toe, evenals het gevaar voor mogelijke bijwerkingen en complicaties.

Begin de eerste ontharingssessie altijd met de via de automatische huidtypeherkenning vastgestelde en door de huidverdraagzaamheidstest bevestigde energiestand.

Automatische huidtypeherkenning/huidtypemeting

Met de automatische huidtypeherkenning kunt u de voor uw huidskleur geschikte energiestand op het apparaat laten weergeven.

Gebruik van de huidtypeherkenning

1. Start de huidtypeherkenning door de twee energiekeuzetoetsen (+ en -) 2 seconden lang gelijktijdig in te drukken.
2. Het apparaat bevindt zich in de huidtypeherkenningsmodus als de afzonderlijke leds van het energiecontrolelampje achtereenvolgens van links naar rechts branden.
3. Plaats het lichtvlak van de patroon nu op het gewenste testgedeelte van de huid en zorg ervoor dat er volledig contact met de huid wordt gemaakt.

Opmerking

Kies voor uw veiligheid altijd het donkerste stuk huid (bijvoorbeeld de buitenkant van uw onderbeen of de rug van uw hand).

Belangrijk: Alvorens het apparaat op een andere plek op het lichaam te gebruiken, moet u opnieuw een meting uitvoeren.

4. U start de huidtypeherkenning door op de activeringstoets te drukken. De huidtypeherkenning kan 1 tot 2 seconden duren.

Opmerking

Het apparaat verzendt geen lichtimpulsen als het zich in de huidtypeherkenningsmodus bevindt.

5. Als de huidtypemeting met succes is voltooid, wordt met de leds van het energiecontrolelampje de voor uw huidskleur geschikte energiestand weergegeven. De leds van de weergegeven energiestand branden permanent.
6. Als de leds van het energiecontrolelampje net als voorheen achtereenvolgens van links naar rechts branden, is de huidtypeherkenning mislukt.
7. Let daarvoor op het indicatielampje op de applicator. Als het indicatielampje oranje brandt, was er onvoldoende contact met de huid om de meting uit te voeren. Als het indicatielampje rood brandt, is uw huid te donker of kon de huidskleur niet worden herkend.
8. Herhaal in dat geval de meting door nogmaals op de activeringstoets te drukken.

Opmerking

Als u de huidtypeherkenning voortijdig wilt afbreken, kunt u op een van de energiekeuzetoetsen (+ of -) drukken om weer naar de normale modus terug te keren.

9. Als de huidtypeherkenning met succes is voltooid, controleert u het resultaat van de meting door het met de gegevens in de tabel voor haar- en huidskleuren te vergelijken.
10. Als er sprake is van een verschil tussen de vastgestelde waarde en de waarde in de tabel voor haar- en huidskleuren, moet u altijd uitgaan van de lagere energiestand.
11. U kunt de energiestand op elk moment verhogen of verlagen door op de toets + of - te drukken.

Als de huid tijdens of na uw eerste ontharingssessie met de aanbevolen energiestand slechts licht of helemaal niet geïrriteerd raakt, kunt u de energiestand bij de volgende behandelingen telkens met 1 stand verhogen.



WAARSCHUWING

Verhoog de energiestand niet als u tijdens of na de behandeling met het beurer SalonPro System abnormale pijn voelt! (Zie stap 6 'Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen')

Verhoog de energiestand niet tijdens een ontharingssessie, zelfs niet als u geen onaangenaam gevoel constateert.

De huid kan ook enige tijd na de behandeling tekenen van irritatie vertonen.

STAP 6: Vertrouwd raken met mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van het beurer SalonPro System

Als u het beurer SalonPro System volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing gebruikt, komen bijwerkingen en complicaties in samenhang met het gebruik van het beurer SalonPro System zelden voor. Toch is aan elke cosmetische behandelingsmethode, ook aan methoden die zijn ontwikkeld voor privégebruik, een zeker risico verbonden. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties, die kunnen optreden bij ontharingssystemen die zijn gebaseerd op lichtimpulsen, begrijpt en accepteert.

Complicatie	Waarschijnlijkheid van het optreden van de complicatie	Bijwerking	Waarschijnlijkheid van het optreden van de bijwerking
Effect van meerdere impulsen op hetzelfde huidgedeelte	Gering	Lichte irritatie van de huid	Gering
		Roodheid van de huid	Gering
		Verhoogde gevoeligheid van de huid	Gering
		Verwondingen van de huid en brandwonden	Zelden
		Littekenvorming	Zelden
		Pigmentveranderingen	Zelden
		Extreme roodheid en zwellingen	Zelden
		Infectie	Verwaarloosbaar
		Hematoom	Verwaarloosbaar

Een licht pijnlijke huid

Hoewel ontharing met lichtimpulsen thuis over het algemeen zeer goed wordt verdragen, ervaren de meeste gebruikers tijdens de ontharingssessie toch een licht onaangenaam gevoel, dat meestal wordt omschreven als een licht stekend gevoel op de behandelde delen van de huid. Het stekende gevoel duurt normaal gesproken tot het einde van de behandeling of tot enkele minuten daarna. Alles wat dat licht onaangename gevoel overschrijdt, is niet normaal en duidt erop dat u het beurer SalonPro System niet langer moet gebruiken, omdat de ontharingsbehandeling niet geschikt is voor uw huid, of dat de energiestand te hoog is.

Roodheid van de huid

Uw huid kan meteen na het gebruik van het beurer SalonPro System, maar ook nog binnen de 24 uur daarna rood worden. De roodheid trekt over het algemeen binnen 24 uur weer weg. Raadpleeg uw huisarts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen is weggetrokken.

Verhoogde gevoeligheid van de huid

De huid van behandelde delen van het lichaam is gevoeliger, met mogelijk een droge huid of vervellen tot gevolg.

Verwondingen van de huid en brandwonden

Er is zeer zelden sprake van brandwonden of wonden in de huid na een behandeling. Het kan enkele weken duren voordat de (brand)wonden zijn geneeld en in zeer zeldzame gevallen kan er een zichtbaar litteken achterblijven.

Littekenvorming

Hoewel dit slechts zeer zelden voorkomt, kan er blijvend littekenweefsel worden gevormd. Een dergelijk litteken neemt normaal gesproken de vorm aan van een vlakke, witte laesie op de huid (hypotroof). Het kan echter ook breed en rood (hypertroof) of breed en uitdijend over de randen van de verwonding (keloid) zijn. Mogelijk zijn aanvullende cosmetische behandelingen nodig om het uiterlijk van het litteken te verbeteren.

Pigmentveranderingen

Het beurer SalonPro System is gericht op de haarschacht, in het bijzonder op de cellen met pigment in de haarfollikel en op de haarfollikel zelf.

Niettemin bestaat het gevaar voor hyperpigmentatie (te veel pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de omringende huid. Dit risico op veranderingen van de huidpigmentatie is groter bij mensen met een donkere huidskleur. Normaal gesproken zijn de verkleuringen en pigmentveranderingen van tijdelijke aard; blijvende hyper- of hypopigmentatie treedt slechts zelden op.

Extreme roodheid en zwellingen

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid zeer rood worden en opzwellen. Dit komt vaker voor op gevoelige delen van het lichaam. De roodheid en zwellingen zouden binnen 2 tot 7 dagen moeten afnemen en dienen regelmatig te worden gekoeld met ijs. Voorzichtig reinigen van de huid is geen probleem, maar u dient zonlicht te mijden.

Infectie

Een geïnfecteerde huid treedt uiterst zelden op, maar is wel een mogelijke complicatie bij brandwonden en wonden die zijn veroorzaakt door het beurer SalonPro System.

Hematoom

Het gebruik van het beurer SalonPro System heeft in zeer zeldzame gevallen blauwpaarse bloedingstoringen (hematomen) tot gevolg; het kan 5 tot 10 dagen duren voordat deze zijn weggetrokken. Na het wegtrekken van de bloedingstoring, kan een mogelijk blijvende, roestbruine verkleuring van de huid achterblijven (hyperpigmentatie).

STAP 7: Wat mag worden verwacht van een behandeling met het beurer SalonPro System?

Voor veel gebruikers van het beurer SalonPro System is het wellicht de eerste ervaring met een apparaat voor ontharing met licht, dat is ontwikkeld voor privégebruik. Het beurer SalonPro System is eenvoudig te bedienen en ontharingssessies zijn kort van duur. Tijdens een sessie met het beurer SalonPro System zijn de volgende verschijnselen normaal:

- **Ventilatorgeluid** – De ventilator van de koeling van het beurer SalonPro System maakt een geluid dat doet denken aan dat van een föhn. Dat is normaal.
- **Een knallend geluid bij elke impuls** – Als het beurer SalonPro System een impuls verzendt, gaat dat gepaard met een lichtflits en een soort knallend geluid; beide zijn normaal.
- **Lichte druk van de applicator** – Dat draagt bij aan en is noodzakelijk voor het plaatsen van aan elkaar grenzende lichtimpulsen; het is een onderdeel van de veiligheidsfunctie van het beurer SalonPro System.
- **Een warm en kriebelend gevoel** – Het is normaal dat u bij elke lichtimpuls een enigszins warm en licht kriebelend gevoel ervaart, veroorzaakt door de lichtenergie. Denk erom dat u het apparaat bij de eerste ontharingssessies altijd met lage energiestanden gebruikt. Tot een uur na het gebruik van het beurer SalonPro System kunt u een zekere warmte ervaren.

- **Lichtrode of roze kleur van de huid** – Tijdens of direct na een sessie met het beurer SalonPro System is het niet ongewoon als de behandelde huid lichtrood of roze wordt. Normaal gesproken is dit het beste waarneembaar rondom de haren. Stop echter onmiddellijk met het gebruik van het beurer SalonPro System als de huid volledig rood wordt, of bij blaarvorming of het ontstaan van brandwonden.

8. Ingebruikname



WAARSCHUWING

Als u het apparaat voor uw gezicht wilt gebruiken, lees dan eerst de aanwijzingen in hoofdstuk 8.2 tot en met 8.6, voordat u verder gaat met hoofdstuk 8.1 'Beginnen met de behandeling'.

Beginnen met de behandeling

1. Haal de basisunit, de applicator en de andere onderdelen van het beurer SalonPro System uit de doos.
2. Controleer of de *patroon* goed in de applicator is geplaatst.
3. Steek de stekker van het netsnoer in de aansluiting van de basisunit van het beurer SalonPro System.
4. Steek de andere stekker van het netsnoer in een stopcontact. Het beurer SalonPro System is nu klaar voor gebruik.



Opmerking

Zorg ervoor dat de huid voor de behandeling geschoren, schoon en droog is (vrij van alle resten van poeder, crème, make-up, antitranspirant of deodorant).

Laat het apparaat enkele minuten afkoelen wanneer u vindt dat het apparaat onaangenaam heet aanvoelt. Na een korte afkoelfase kunt u de behandeling zoals gebruikelijk voortzetten.



WAARSCHUWING

Reinig de huid niet met brandbare vloeistoffen, zoals alcohol of aceton, kort voordat u het beurer SalonPro System gebruikt.

5. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar op de achterkant van de basisunit. Het indicatielampje en de energiecontrolelampjes gaan branden en u hoort het geluid van de ventilator (vergelijkbaar met het geluid van een haardroger).
6. Het apparaat is automatisch ingesteld op de laagste energiestand. Het apparaat is dan gereed voor het verzenden van de eerste lichtimpuls.
7. Met de energiekeuzetoetsen '+' en '-' voor de energiestand kunt u de energiestand verhogen of verlagen om de bij de automatische huidtypeherkenning bepaalde en de door de huidverdraagzaamheidstest bevestigde energiestand te selecteren of om de instelling aan uw wensen aan te passen. De energiecontrolelampjes branden overeenkomstig de geselecteerde energiestand groen.
8. Plaats het lichtvlak van de patroon op het gewenste te behandelen oppervlak en zorg ervoor dat er volledig contact is met de huid.



Opmerking

Als u op de *activeringstoets* drukt terwijl uw huid te donker of te sterk gebruind is, gaat het *indicatielampje* op de *applicator* rood branden. In dat geval verzendt de *applicator* geen impuls naar dit huidgedeelte.

Als u op de *activeringstoets* drukt terwijl er onvoldoende contact is tussen de *applicator* en de huid, gaat het *indicatielampje* op de *applicator* oranje branden. In dat geval verzendt de *applicator* ook geen impuls naar dit huidgedeelte.

9. Druk op de activeringstoets. U ziet een felle lichtflits, hoort een knallend geluid en ervaart mogelijk een licht branderig en/of warm gevoel. Het beurer SalonPro System is uitgerust met een functie voor 'flitsherhaling'. Als u de activeringstoets ingedrukt houdt, wordt er elke 3 seconden automatisch een felle lichtflits verzonden, zodat u de activeringstoets niet steeds opnieuw hoeft in te drukken.

WAARSCHUWING

Behandel een gedeelte van de huid niet meer dan één keer per ontharingssessie!
Het meerdere keren behandelen van een gedeelte van de huid tijdens een ontharingssessie vergroot de kans op bijwerkingen.
Probeer elkaar overlappende impulsen te vermijden.

Opmerking

Pas de impulsen van het beurer SalonPro System in rijen toe – begin bij het einde van elke rij en werk zo naar het andere einde toe. Op die manier is het gemakkelijker om controle te houden over reeds behandelde huidoppervlakken en wordt voorkomen dat u een reeds behandeld deel van de huid of overlappende delen opnieuw behandelt. Het *lichtvlak* van het beurer SalonPro System is zo ontworpen dat het korte tijd een afdruk op het behandelde huidoppervlak achterlaat. Deze zichtbare afdruk kunt u gebruiken om de volgende impuls precies op de juiste plaats te verzenden. Op de linker- en rechterzijde van de *patroon* is bovendien een langwerpige markering aangebracht. Met behulp van deze markering kunt u bepalen waar het *lichtvlak* zich precies bevindt.

10. Haal de applicator van de huid en plaats deze op het volgende te behandelen gedeelte van de huid. Zorg er bij het verplaatsen van de applicator voor dat te behandelen huidgedeelten elkaar niet overlappen en dat u ook geen huidgedeelten overslaat. Het apparaat wordt meteen weer opgeladen en is binnen 3 seconden gereed voor een volgende impuls (als het indicatielampje op de applicator weer continu groen brandt). Herhaal de procedure totdat u het volledige huidoppervlak hebt behandeld.

Na de behandeling met het beurer SalonPro System

- Druk op de *Aan-/Uit-schakelaar* om het apparaat uit te schakelen als u de ontharingssessie met het beurer SalonPro System hebt voltooid.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- Het wordt aanbevolen om het beurer SalonPro System-apparaat, in het bijzonder het *lichtvlak*, na iedere ontharingssessie te reinigen (zie hoofdstuk 9.1 'Reinigen van het beurer SalonPro System').
- Na het reinigen kunt het beurer SalonPro System-apparaat het beste opbergen in de originele doos. Houd de doos met het apparaat uit de buurt van water.

9. Gebruik

Gezichtsbehandeling

WAARSCHUWING

Gebruik het beurer SalonPro System in het gezicht niet met een hogere energiestand dan stand 3. Gebruik het beurer SalonPro System in het gezicht niet boven de jukbeenderen en niet bij de ogen, wenkbrauwen en wimpers, omdat dat ernstig oogletsel tot gevolg kan hebben.
Gebruik het beurer SalonPro System niet op de slijmvliezen bij de neus en oren.

De huid van het gezicht is zeer gevoelig en vereist een speciale behandeling. Neem altijd alle waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen in deze gebruiksaanwijzing in acht om nadelige gevolgen te vermijden. Wij raden u aan om eerst een behandeling op het lichaam uit te voeren om het apparaat te leren kennen, voordat u een gezichtsbehandeling uitvoert.

U kunt met het beurer SalonPro System alle zones van het gezicht onder de jukbeenderen behandelen, zoals de bovenlip, de wangen, de kaak, de kin en de hals.


Opmerking

Om de behandeling van het gezicht gemakkelijker te maken, kunt u de meegeleverde precisiekop gebruiken. Deze verkleint het lichtvlak en maakt een nauwkeurigere behandeling mogelijk.

U kunt de precisiekop eenvoudig op de applicator bevestigen door de precisiekop op het lichtvlak te plaatsen en vast te drukken.

Breng de precisiekop zo aan dat de betreffende inkeping in de precisiekop zich boven de huidcontact-/huidskleursensor bevindt. Als de huidcontact-/huidskleursensor bedekt is, kan er geen lichtimpuls worden verzonden.

Gebruik de precisiekop alleen bij een energiestand van 3 of lager en alleen als uw huidskleur lichter is dan huidtype 5.

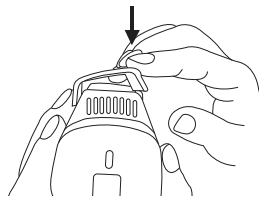

1. Voer 48 uur voor de behandeling altijd een plaatselijke huidverdraagzaamheidstest uit (zie hoofdstuk 7, stap 2). De huidverdraagzaamheidstest dient te worden uitgevoerd op een gedeelte zonder haar, bijvoorbeeld onder het oor of op de zijkant van de hals, om de geschikte energiestand te bepalen.

WAARSCHUWING

Behandel het geteste oppervlak op zijn vroegst 1 week na de huidverdraagzaamheidstest.

2. Markeer het behandelde oppervlak met een wit kohlpotlood. Gebruik de markering als oriëntatienijl voor het verzenden van de impulsen. Op die manier kunt u voorkomen dat behandelde huidgedeelten elkaar overlappen of dat u ongewenste delen van het gezicht behandelt.
3. Gebruik een spiegel om de applicator goed op het te behandelen oppervlak te plaatsen.
4. Volg de instructies voor het gebruik (zie het vorige hoofdstuk 8.1 'Beginnen met de behandeling') en neem vooral de volgende specifieke instructies in acht.

Opmerking

Gezichtsbehandling kan hormonaal bepaald zijn, waardoor voor een langdurige haarreductie wellicht meerdere behandelingssessies noodzakelijk zijn.

Behandeling van de bovenlip

Plaats het behandelingsvenster van de applicator op de huid zoals weergegeven op de afbeelding. Verzend in elk van de gemarkeerde zones een impuls.

Vermijd het behandelen van de neusgaten en de lippen, omdat die plekken gevoeliger zijn.



Opmerking

U kunt uw lippen naar binnen trekken of samenknijpen om de te behandelen huid strak te trekken of met een wit kohlpotlood een dikke laag op de lippen en de rand van de lippen aanbrengen. Deze witte lijn zorgt ervoor dat de energie van de lichtflits wordt gereflecteerd en uw lippen niet bereikt als u toch per ongeluk een impuls op de lippen richt.

Behandeling van de wangen en de kaaklijn

Plaats het behandelingsvenster van de applicator op de huid zoals weergegeven op de afbeelding. Verzend op elke plek een impuls en beweeg het apparaat daarbij van de ene zijde van de wang/kaak naar de andere zijde.



Behandeling van de hals en de kin

Plaats het behandelingsvenster van de *applicator* op de huid zoals weergegeven op de afbeelding. Verzend op elke plek een impuls en beweeg het apparaat daarbij van de ene zijde van de hals/kin naar de andere zijde.



Opmerking

In het onderste derde deel van de hals is de huid gevoeliger. Zorg er daarom voor dat behandelde huidgedeelten elkaar niet overlappen.

Huidverzorging na een gezichtsbehandeling

- Breng een kalmerende lotion aan, zoals aloë vera.
- Vermijd minstens 24 uur lang het gebruik van peelingcrèmes en blekende crèmes of vergelijkbare producten, omdat die ervoor kunnen zorgen dat de behandelde huid geïrriteerd raakt.
- Vermijd gedurende minstens 48 uur na de behandeling een blootstelling van meer dan 15 minuten aan direct zonlicht. Als onlangs behandelde huid gedurende die periode wordt blootgesteld aan zonlicht, dient u absoluut zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30 of hoger te gebruiken.
- Verwijder geen haren op de behandelde huid door middel van harsen of epileren.

Houd er rekening mee dat volledige ontharing mogelijk pas resultaat heeft na een volledige haar-groeycyclus.

10. Reiniging en onderhoud

Reinigen van het beurer SalonPro System

Het wordt aanbevolen om het beurer SalonPro System-apparaat, in het bijzonder het *lichtvlak*, na iedere ontharingssessie te reinigen.



LET OP

Dompel het beurer SalonPro System of de onderdelen ervan nooit onder in water!

- Trek de netstekker van het beurer SalonPro System uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik een droge, schone doek en een schoonmaakmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van elektronische apparatuur om de oppervlakken van het beurer SalonPro System en in het bijzonder het lichtvlak zacht af te nemen.

Vervangen van de patroon

De *patroon* heeft een levensduur van maximaal 250.000 lichtimpulsen, wat bij normaal gebruik (gebruik door één persoon, behandeling van het hele lichaam, inclusief benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht) voldoende is voor tot wel 40 jaar. Om die reden hoeft de *patroon* bij dit model normaal gesproken niet vervangen te worden.

Opmerking

Een patroon hoeft alleen vervangen te worden als er grote vlekken in te zien zijn of als de lens gebroken is. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van Beurer.

11. Wat te doen bij problemen

'Ik kan mijn beurer SalonPro System niet inschakelen'

- Controleer of u de stekker van het netsnoer goed in het beurer SalonPro System-apparaat hebt gestoken.
- Controleer of u de stekker van het netsnoer in het stopcontact hebt gestoken.

'Als ik op de activeringstoets druk, wordt er geen lichtimpuls verzonden'

- Zorg ervoor dat de applicator goed contact maakt met de huid en dat het *lichtvlak* gelijkmatig en stevig op de huid wordt gedrukt. Om veiligheidsredenen wordt met de *activeringstoets* alleen een impuls verzonden als het *lichtvlak* stevig op de huid wordt gedrukt.
- Controleer het indicatielampje. Als het *indicatielampje* op de *applicator* rood brandt, betekent dat dat uw huidskleur, die door de *huidskleursensor* is gemeten, te donker is voor een veilige behandeling. Probeer het apparaat in dat geval uit op een andere plek van het lichaam of neem contact op met de klantenservice voor het beurer SalonPro System.
Als het indicatielampje op de *applicator* oranje brandt, betekent dat dat het huidcontact, dat door de huidcontactsensor is gemeten, te gering is. Vergroot het contact met de huid of neem contact op met de klantenservice voor het beurer SalonPro System.
- Bij een algemene storing knipperen alle 6 *energiecontrolelampjes* tegelijkertijd groen. Reset het apparaat dan. Schakel het apparaat daartoe met de Aan-/Uit-schakelaar uit, wacht 30 seconden en schakel het apparaat weer met de Aan-/Uit-schakelaar in. Neem contact op met onze klantenservice als u nog steeds problemen met het apparaat hebt.
- Controleer het *indicatielampje*. Als het *indicatielampje* op de *applicator* rood knippert en het *indicatielampje* op het apparaat groen knippert, betekent dat dat de patroon niet goed in de *applicator* zit. Plaats de patroon opnieuw in de *applicator*.

12. Veelgestelde vragen

1. Werkt het beurer SalonPro System echt?

Ja. In door artsen uitgevoerde klinische tests is aangetoond dat met de technologie in het beurer SalonPro System langdurige ontharingsresultaten kunnen worden behaald.

2. Op welke delen van mijn lichaam kan ik het beurer SalonPro System gebruiken?

Het beurer SalonPro System is ontwikkeld voor volledige ontharing van het lichaam. De lichaamszones die het meest met het beurer SalonPro System worden behandeld, zijn de benen, oksels, armen, bikini-lijn en het gezicht onder de jukbeenderen.

3. Hoe lang duurt een behandelingssessie met het beurer SalonPro System?

De tijd varieert afhankelijk van de te behandelen lichaamszone. Een volledige behandeling van het lichaam (benen, armen, oksels, bikini-lijn en gezicht onder de jukbeenderen) duurt ongeveer 26 minuten. Omdat het beurer SalonPro System met elektrische stroom wordt gevoed, kan het zo lang als maar nodig is worden gebruikt om een volledige ontharingssessie of een behandeling van bepaalde delen van het lichaam uit te voeren.

4. Is het beurer SalonPro System veilig?

Het beurer SalonPro System is met nadrukkelijke aandacht voor uw veiligheid ontwikkeld en werkt met een klinisch geteste technologie. Toch moet dit apparaat, net als alle andere producten of elektronische apparaten voor gebruik op de huid, worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksinstructies en veiligheidsopmerkingen voor de gebruiker.

5. Veroorzaakt het beurer SalonPro System pijn?

Bij juist gebruik melden de meeste gebruikers van het beurer SalonPro System dat ze bij het verzenden van de lichtimpuls een enigszins warm gevoel ervaren. Gebruikers met dikkere en donkerdere haren kunnen iets meer onbehagen ervaren, maar dit onbehagen verdwijnt zodra de ontharingssessie is afgerond. Het beurer SalonPro System heeft 6 energiestanden die kunnen worden ingesteld op de gevoeligheid van uw huid.

6. Hoe vaak moet ik het beurer SalonPro System gebruiken?

Bij het behandelen van lichaamsbeharing met het beurer SalonPro System dienen de eerste vier sessies om de twee weken plaats te vinden. De vijfde tot en met de zevende sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen verdere sessies plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

Bij het behandelen van beharing in het gezicht onder de jukbeenderen dienen de eerste zes sessies om de twee weken plaats te vinden. De zevende tot en met de twaalfde sessie dienen om de vier weken plaats te vinden. Daarna dienen verdere sessies plaats te vinden als er opnieuw sprake is van haargroei, tot het gewenste resultaat is bereikt.

7. Werkt het beurer SalonPro System ook bij wit, grijs of blond haar?

Het beurer SalonPro System werkt het beste bij donkere haartypen en haar dat meer melanine bevat. Melanine is het pigment dat het haar en de huid kleur geeft en dat de energie uit licht opneemt. Zwart en donkerbruin haar reageert het beste. Bruin en lichtbruin haar reageert ook, maar normaal gesproken zijn bij die haartypen meer ontharingssessies nodig. Bij rood haar is een zeker effect mogelijk. Wit, grijs en blond haar reageren gewoonlijk niet op het beurer SalonPro System, hoewel enkele gebruikers wel resultaat hebben geconstateerd na meerdere ontharingssessies.

8. Kan ik het beurer SalonPro System gebruiken op een bruine of zwarte huid?

Gebruik het beurer SalonPro System niet op een van nature donker gekleurde huid! Dat werkt niet! Het beurer SalonPro System is een apparaat dat met licht werkt en dat ongewenste beharing verwijdert door middel van selectieve behandeling van het haarpigment. In het omringende huidweefsel is daarnaast een verschillende hoeveelheid pigmenten aanwezig. De hoeveelheid pigmenten in de huid van een persoon, die kan worden afgelezen aan de huidskleur, bepaalt de risicograad die verbonden is aan het gebruik van het beurer SalonPro System. Behandeling van een donkere huid middels ontharing met licht kan nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie). In het beurer SalonPro System is een *huidskleursensor* geïntegreerd die bij aanvang van elke behandelingssessie en van tijd tot tijd gedurende de sessie de kleur van de behandelde huid meet. De *huidskleursensor* verhindert het verzenden van impulsen door het beurer SalonPro System als wordt vastgesteld dat het apparaat wordt gebruikt op een donkere huid.

9. Vanaf wanneer zijn de resultaten van het beurer SalonPro System zichtbaar?

Net als bij elk ander ontharingsapparaat dat met licht of laser werkt, zijn de resultaten niet meteen zichtbaar; u zou zelfs kunnen denken dat er helemaal niets is gebeurd. Het haar lijkt na een ontharingssessie soms door te groeien, maar normaal gesproken vallen veel van deze haren na twee weken uit. Bovendien groeien haren in drie verschillende fasen en heeft het beurer SalonPro System alleen invloed op het haar in de actieve groeifase. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom meerdere sessies nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken.

10. Kan het beurer SalonPro System door mannen worden gebruikt?

Hoewel het beurer SalonPro System is ontwikkeld voor vrouwen, kan het apparaat ook geschikt zijn voor mannen. Het haar van mannen, met name het borsthaar, vergt echter meer ontharingssessies dan dat van vrouwen om het gewenste resultaat te bereiken.

11. Waarom groeit het haar, terwijl ik het een week geleden behandeld heb?

Het kan er absoluut alle schijn van hebben dat het haar tot twee weken na een ontharingssessie met het beurer SalonPro System nog steeds groeit. Dit proces staat bekend als 'uitstoting'; na ongeveer twee weken zult u constateren dat deze haren gewoon uitvallen of dat u ze kunt verwijderen door er licht aan te trekken. (We adviseren u echter om niet aan de haren te trekken – laat de haren op natuurlijke wijze uitvallen.) Het is ook mogelijk dat bij de behandeling met het beurer SalonPro System een paar haren zijn overgeslagen of dat haren zich in een andere groeifase bevinden. Deze haren worden bij volgende sessies behandeld; dat is ook de reden dat er meerdere ontharingssessies nodig zijn met het beurer SalonPro System voor het beste resultaat.

12. Ik heb gehoord dat sommige haren na ontharing met licht dunner en fijner teruggroeien?

Dit fenomeen is uitvoerig gedocumenteerd door artsen en schoonheidsspecialisten die licht- en laserrapparaten gebruiken voor ontharing. Het is mogelijk dat sommige haren na een ontharingsbehandeling

ling met het beurer SalonPro System dunner en fijner teruggroeien. Normaal gesproken groeit slechts een fractie van de oorspronkelijke beharing terug, en een verdere behandeling kan bij deze haren tot het gewenste resultaat leiden.

13. Waarom kan ik geen behandeling bij mezelf uitvoeren als ik een 'actieve' gebruinde huid heb?

Gebruik het beurer SalonPro System niet op een gebruinde huid of na het zonnen. Een gebruinde huid, met name na het zonnen, bevat een hoge dosis van het pigment melanine. Dat geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook voor de huidtypen en huidskleuren die niet zo snel bruin lijken te worden. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid melanine betekent een hoger risico dat de huid negatieve gevolgen zal ondervinden van het gebruik van het beurer SalonPro System, zoals verbranding, blaren en verandering van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).

14. Is langdurig gebruik van het beurer SalonPro System gevaarlijk voor mijn huid?

Het gebruik van licht- en laserenergie in de esthetische geneeskunde wordt al meer dan 15 jaar uitvoerig gedocumenteerd in professionele, door experts gecontroleerde vaktijdschriften en door vooraanstaande instellingen zoals de Mayo Clinic. Deze tijdschriften en instellingen hebben geen melding gemaakt van enige vorm van bijwerkingen of schadelijke gevolgen van het langdurige gebruik van licht- en laserapparaten.

15. Kan ik het beurer SalonPro System gebruiken om het haar op mijn kin of andere beharing in mijn gezicht te verwijderen?

Het beurer SalonPro System **kan** worden gebruikt voor het behandelen van gezichtsbeharing onder de jukbeenderen. Bij gebruik in het gezicht moet er met name op worden gelet dat het gebied rond de ogen wordt ontzien: het beurer SalonPro System mag in geen geval rond of op de ogen worden gebruikt. En net als voor en na de behandeling van andere lichaamsdelen dient ook bij de behandeling van delen van het gezicht blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Goede middelen ter bescherming tegen de zon zijn bedekkende kleding en zonnebrandcrème (ten minste beschermingsfactor 30), die voor en na behandelingen gedragen of aangebracht moeten worden.

16. Hoe lang moet ik na onbeschermd blootstelling aan de zon wachten met een behandeling met het beurer SalonPro System?

U dient na onbeschermd blootstelling aan de zon 2 weken te wachten voordat u een behandeling met het beurer SalonPro System mag uitvoeren. Raadpleeg bij twijfel over blootstelling aan de zon uw huisarts.

17. Moet ik nog bepaalde dingen doen voordat ik het beurer SalonPro System gebruik?

Voorafgaand aan elke behandelingssessie met het beurer SalonPro System is het belangrijk om de te behandelen lichaamsgedeelten 2 weken lang niet bloot te stellen aan zonlicht. Daarbij kan een uv-zonnebrandcrème (beschermingsfactor 30+) uitkomst bieden, evenals kleren die de te behandelen gedeelten van de huid bedekken. Bovendien moet de te behandelen huid met milde zeep en water worden gewassen en het haar tot op de huid worden afgeschoren.

18. Hoe moet ik de behandelde delen van de huid na de behandeling met het beurer SalonPro System verzorgen?

U kunt de huid die met het beurer SalonPro System is behandeld met in de winkel verkrijgbare huidverzorgingsproducten reinigen en verzorgen. Let er vooral op dat u onbeschermd blootstelling aan de zon vermijdt. Zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor (30+) en bedekkende kleding vormen een goede bescherming tegen de zon.

13. Afvoeren

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Voer het apparaat af conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



14. Technische gegevens

Behandelingsoppervlak		7 cm ²
Technologie		IPL (Intense Pulsed Light) voor privégebruik
Golflengte		475–1200 nm
Max. energieniveau		Max. 5 J/cm ²
Selecteerbare energiestanden		6
Stroomvoorziening		100–240 V AC, 50–60 Hz
Snelheid		1 impuls per 3 seconden: 2,3 cm ² per seconde
Max. impulsen per lamp		250.000
Temperatuur	bij gebruik	10–40 °C
	bij opbergen	-10–70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	bij gebruik	30–70% rel. luchtvl.
	bij opbergen	0–90% rel. luchtvl. bij 55 °C (niet condenserend)

Technische wijzigingen voorbehouden

15. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt. Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst "Service International" met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Tabel voor haar- en huidskleuren

Skin Type Hair	I	II	III	IV	V	VI
Black	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Light blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Red head	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Gray/white	✗	✗	✗	✗	✗	✗



NL * Stem de energiestand met name af op uw eigen welzijn.
** Hoe hoger de energiestand, hoe efficiënter de behandeling.

