

beurer

FC 41



NL Poriënreiniger
Gebruiksaanwijzing





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privé-gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat is niet geschikt voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	3
2. Verklaring van de symbolen	4
3. Kennismaking.....	5
4. Voorgeschreven gebruik.....	5
5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	6
6. Beschrijving van het apparaat	8
6.1 Apparaat.....	8
6.2 Opzetstukken	8
7. Gebruik.....	9
8. Gebruik.....	10
8.1 Huidtest uitvoeren	10
8.2 Accu opladen	10
8.3 Voorafgaand aan het gebruik in acht nemen	11
8.4 Te behandelen zones	11
9. Reiniging en onderhoud	12
10. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen....	13
11. Verwijdering.....	13
12. Technische gegevens.....	13
13. Garantie/service	14

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 1 x FC 41
- 1 x rond opzetstuk (groot)
- 1 x rond opzetstuk (klein)
- 1 x ovaal opzetstuk
- 10 x reservefilters
- 2 x afsluitringen
- 1 x filterafdekking
- 1 x USB-oplaadkabel
- 1 x gebruiksaanwijzing



2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	GEVAAR Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van een wastafel, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie
	Instructie lezen
	Gelijkstroom Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom.
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Fabrikant
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton

	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)
	Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	Importeursymbool

3. Kennismaking

De poriënreiniger FC 41 maakt dankzij de ultramoderne vacuümtechnologie een reiniging tot diep in de poriën mogelijk. Met behulp van de ronde opzetstukken kunnen puistjes, mee-eters en overtollige huidschilfers effectief worden verwijderd. De poriënreiniger heeft daarnaast ook een ovaal opzetstuk, waarmee de elasticiteit van de huid en de doorbloeding in het gezicht verbeterd kunnen worden.

De poriënreiniger heeft een overzichtelijk lcd-display waarop het accuniveau en de intensiteitsstand worden weergegeven. Met in totaal 5 intensiteitsstanden maakt de poriënreiniger een individuele reiniging en verzorging volgens uw wensen mogelijk.

4. Voorgeschreven gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend in het gezicht (met uitzondering van de bewegende delen van het oog en de lippen) van volwassen mensen. Gebruik het apparaat niet op dieren!

Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn! De fabrikant is niet

aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik. Gebruik het apparaat niet als een of meer van de volgende waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw arts wanneer u twijfelt of het apparaat voor u geschikt is.

5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal! Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat **NIET**

- als u een gesprongen huid hebt
- op open wonden
- op de ogen of op de mond
- op andere delen van het lichaam dan het gezicht (ook niet op de ogen of op de mond)
- tijdens de zwangerschap
- als u een plastische ingreep in het gezicht hebt gehad
- als u een hartaandoening hebt
- als u een huidziekte hebt (bijv. herpes, vaatziekten of woekeringen van de huid)
- als u huidkanker hebt
- als u last hebt van huidirritaties
- direct na het zonnen of bij zonnebrand
- als u medicijnen slikt die steroïden bevatten
- als u bloedverduunners slikt
- als u aan een van de volgende ziekten lijdt: multiple sclerose, diabetes of auto-immuunziekten

LET OP

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opgeleide personen. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.

WAARSCHUWING


- Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel en de netadapter niet in aanraking komen met water, damp of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in de badkuip of sauna).
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken en laat het apparaat niet vallen.
- Gebruik het apparaat alleen met droge handen.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu's

- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen accu's inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar accu's daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu's in acht.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.

6. Beschrijving van het apparaat

6.1 Apparaat

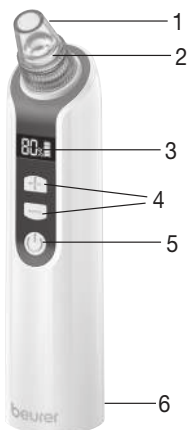

1. Opzetstuk

2. Zuigkop met filterafdekking

3. Weergave van intensiteitsstand en accuniveau

4. Toets +/-

Voor het instellen van de intensiteitsstand (20%, 40%, 60%, 80% of 99%)

5. AAN/UIT-toets

6. Micro-USB-aansluiting

Voor het opladen van de accu met de micro-USB-oplaadkabel

6.2 Opzetstukken



Rond opzetstuk (groot)

Geschikt voor een omvangrijke reiniging van de poriën. Kan overal in het gezicht worden gebruikt, behalve op de huid rondom de ogen.



Rond opzetstuk (klein)

Geschikt voor het reinigen van de poriën op moeilijk te bereiken plekken (bijv. op de neus). Kan overal in het gezicht worden gebruikt, ook op de gevoelige huid rondom de ogen.




Ovaal opzetstuk


Stimuleert de elasticiteit van de huid en de doorbloeding in het gezicht. Uitermate geschikt voor gebruik op de neusvleugels en rondom de ogen en de mond. Wij adviseren u het ovale opzetstuk met intensiteitsstand 1 te gebruiken.

7. Gebruik


1. Trek het opzetstuk met een draaiende beweging van het apparaat en verwijder de afdekking op de zuigkop.

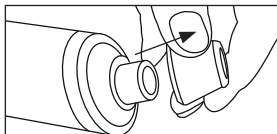


2. Plaats een filter op de zuigkop en sluit het filter af met de afdekking. Zorg er daarbij voor dat het filter droog blijft.

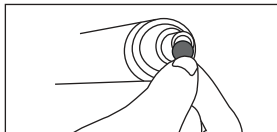


3. Plaats het gewenste opzetstuk op de zuigkop.

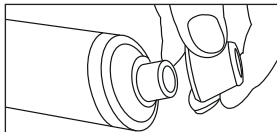

4. Druk op de AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen. De weergave van de intensiteitsstand en het accuniveau gaat branden.

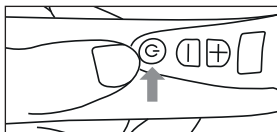

5. Selecteer de gewenste intensiteitsstand met de toetsen -/+. Wij adviseren u bij de eerste behandelingen met een lage intensiteitsstand te beginnen, zodat u langzaam aan het apparaat kunt wennen.

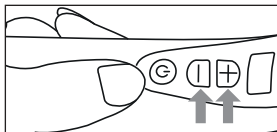


6. Beweeg met het opzetstuk over de gezichtshuid. Let op dat u met het opzetstuk niet vaker dan één keer over hetzelfde deel van de gezichtshuid beweegt. Meer informatie over de behandeling vindt u in hoofdstuk 8.4 "Te behandelen zones".


Aanwijzing

De toegepaste druk moet aangenaam aanvoelen en mag geen pijn doen. Na de behandeling mag de gezichtshuid een beetje rood zijn.

7. Druk op de AAN/UIT-toets om de behandeling te beëindigen. De weergave van de intensiteitsstand en het accuniveau gaat uit.

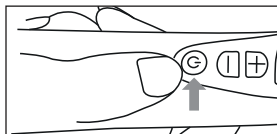

8. Vervang het filter na elke behandeling. Trek hiervoor het opzetstuk met een draaiende beweging naar boven en verwijder de afdekking daaronder. Verwijder het filter met een pincet.

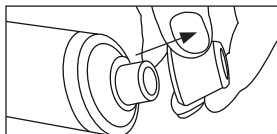

8. Gebruik

8.1 Huidtest uitvoeren

Voer 24 uur voor de behandeling een huidtest uit met het apparaat. Test het apparaat daarvoor op de laagste intensiteitsstand op kleine, onopvallende plekken in de hals. Gebruik het apparaat niet als de plek waarop u het apparaat hebt getest na 24 uur rood is of pijn doet.



LET OP

Gebruik het apparaat nooit langere tijd op dezelfde plek op de huid, anders kunnen er bloeduitstortingen ontstaan.

8.2 Accu opladen

Laad het apparaat eerst minstens 5 uur op, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Verbind de USB-oplaadkabel met een geschikte netadapter (uitgang: 5 V; 0,5 A) en met het apparaat. Steek de netadapter vervolgens in een geschikt stopcontact. U kunt het apparaat eventueel ook met de USB-oplaadkabel via de USB-aansluiting van uw computer of laptop opladen.

Tijdens het opladen kunt u op het display het actuele accuniveau zien. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, wordt  op het display weergegeven. Met een volledig opgeladen accu kunt u het apparaat ongeveer 90 minuten gebruiken (op de hoogste intensiteitsstand). Zodra de accuniveauweergave  op het display knippert, moet u het apparaat weer opladen.

8.3 Voorafgaand aan het gebruik in acht nemen



Aanwijzing

Voordat u met de behandeling begint, moet u ervoor zorgen dat uw gezichtshuid schoon, droog en vrij van alle resten van bijvoorbeeld poeder, crème of make-up is.



WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat niet vaker dan één keer per week.
- Direct na de behandeling kan de behandelde gezichtshuid een beetje rood zijn. Dit is normaal en de roodheid trekt na uiterlijk 30 minuten vanzelf weer weg.
- Vermijd een dag voor en na de behandeling de sauna, de zonnebank, de zon en activiteiten waar u van gaat zweten.
- Na het gebruik: reinig uw gezicht met water en bescherm het tegen de zon.



Aanwijzing

Bij een ongevoelige probleemhuid kan het apparaat ook 2 keer per week worden gebruikt (met een pauze van ten minste 48 uur tussen de twee behandelingen).

8.4 Te behandelen zones



Aanwijzing

Zorg ervoor dat de huid van het te behandelen gedeelte van het gezicht strak getrokken is als u met het apparaat over de huid beweegt. Trek de huid daarvoor met uw vrije hand naar beneden of naar de zijkant toe strak. **Gebruik het apparaat nooit langere tijd op dezelfde plek op de huid.**


Voorhoofd:

Beweeg het apparaat langzaam en gelijkmatig vanaf het midden van het voorhoofd naar de buitenkant. Let er daarbij op dat u elk gedeelte van de huid niet vaker dan één keer behandelt.



Slapen:

Beweeg het apparaat naar de buitenkant in de richting van de haaraanzet. Herhaal dit aan de linker- en aan de rechterkant van de neus. Zorg ervoor dat het apparaat ten minste 1 cm van de ogen verwijderd blijft.

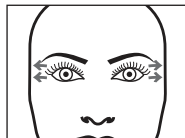**Neus:**


Beweeg het apparaat vanaf de bovenzijde van de neusbrug over het midden naar beneden. Herhaal dit aan de linker- en aan de rechterkant van de neus.

**Wangen:**

Beweeg het apparaat over de wangen naar de buitenkant.

**Rondom de mond:**

Beweeg het apparaat boven de bovenlip vanaf het midden naar links en naar rechts. Beweeg het apparaat onder de onderlip links en rechts naar boven. Let op dat u uw lippen niet direct met het apparaat aanraakt!

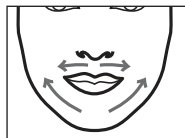

9. Reiniging en onderhoud

- Dompel het apparaat in geen geval onder in water of andere vloeistoffen!
- Desinfecteer de opzetstukken na elk gebruik met een in de winkel verkrijgbaar desinfectiemiddel.
- Vervang het filter na elke behandeling.
- Maak het apparaat met een droge doek schoon als het vuil is. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

10. Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen

De reserveonderdelen en de aan slijtage onderhevige onderdelen zijn verkrijgbaar via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten). Geef het bijbehorende bestelnummer op.

Reserveonderdeel	Artikel-/bestelnummer
10 reservefilters	164083
2 afsluitringen	164084
Rond opzetstuk (groot)	164080
Rond opzetstuk (klein)	164081
Ovaal opzetstuk	164082
USB-oplaadkabel	164079
Filterafdekking	164085

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land.



Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

12. Technische gegevens

Voeding	5 V === 0,5 A
Afmetingen	Ca. 169 x 43 x 43 mm
Accu:	
Capaciteit	900 mAh
Nominale spanning	3,7 V
Typenaam	Li-ion
Gewicht	~150 g

13. Garantie/service

Meer informatie over de garantie en de garantievoorzwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.

