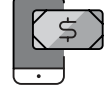




Für weitere Informationen zum Notrufarmband, inklusive Einrichtungsprozess, nebenstehenden QR-Code scannen.

For more information on the emergency wristband, including the setup process, scan the QR code next to it.

Schnelle Inbetriebnahme	Quickstart
 1. Gerät auspacken Notrufarmband und Zubehör aus Verpackung entnehmen.	1. Unpack device Remove the emergency wristband and accessories from the packaging.
 2. App „My Gardia“ herunterladen App „My Gardia“ kostenlos im Apple App Store (iOS) oder Google Play (AndroidTM) herunterladen.	2. Download app „My Gardia“ Download the app „My Gardia“ app from the Apple App Store (iOS) or Google Play (AndroidTM).
 3. In der App „My Gardia“ registrieren In der App „My Gardia“ registrieren und Anweisungen befolgen. Schritt für Schritt Anleitung erfolgt in der App.	3. Register in app „My Gardia“ Register in app „My Gardia“ and follow the instructions. Step-by-step instructions are in the app.
 4. Ladezubehör verbinden Ladekabel mit Ladeschale und beiliegendem Netzstecker verbinden. Netzstecker in geeignete Steckdose stecken.	4. Connect charging accesories Connect the charging cable to the charger and the mains plug provided. Insert the mains plug into a suitable socket.
 5. Gerät hinzufügen In der App „My Gardia“ auf „Gerät hinzufügen“ tippen, um die Einrichtung zu starten.	5. Add device In the app „My Gardia“, tap „Add device“ to start the setup.
 6. Notrufarmband einlegen Notrufarmband in Ladeschale legen, sobald Aufforderung dazu in der App erfolgt. Das Notrufarmband schaltet sich selbstständig ein.	6. Emergency wristband placement Place the emergency wristband in the charger as soon as the app prompts you to. The emergency wristband turns on automatically.
 7. Warten auf Blinkmuster Warten bis am Notrufarmband abwechselnd ein rotes und blaues Blinkmuster erscheint. Dies kann mehrere Minuten dauern.	7. Waiting for flashing pattern Wait until an alternating red and blue flashing pattern appears on the emergency wristband. This may take several minutes.

	8. Taste drücken Taste während des Blinkens für eine Sekunde drücken, sobald Aufforderung dazu in der App erfolgt. Notrufarmband währenddessen NICHT aus der Ladeschale nehmen.	8. Push the button While this is flashing, press the button for one second as soon as prompted in the app. Do NOT remove the emergency wristband from the charger during this time.
	9. Kopplung erfolgreich Die LEDs leuchten grün zur Bestätigung. Notrufarmband bis zum Einrichtungsende NICHT aus Ladeschale entfernen.	9. Coupling successful The LEDs light up green as confirmation. Do NOT remove the emergency wristband from the charging cradle until the end of setup.
	10. Updates ausführen Geräte-Updates werden bei Einlegen in die Ladeschale automatisch ausgeführt. LEDs leuchten nach erfolgreicher Durchführung blau.	10. Run updates Device updates are performed automatically when inserted into the charger. LEDs light up blue after successful execution.
	11. Einrichtung in App fortsetzen Einrichtung in der App fortsetzen und Anweisungen folgen.	11. Continue set-up process in app Continue setup in the app and follow the instructions.
	12. Abo abschließen und Bezahlmethode wählen Um Notrufarmband nutzen zu können, Abomodell und Bezahlmethode in der App auswählen. Bezahlvorgang in der App abschließen.	12. Select subscription and payment method To use the emergency wristband, select the subscription model and payment method in the app. Complete the payment process in the app.
	13. Notfallkontakte einladen Bis zu 6 Einladungen an Notfallkontakte versenden. Notfallkontakt muss nach Erhalt der Einladung einen kostenlosen Account in der App „My Gardia“ anlegen.	13. Invite emergency contacts Send up to 6 invitations to emergency contacts. Emergency contact must create a free account in the app “My Gardia” after receiving the invitation.
	14. Annahme der Notfallkontakt-Einladungen Notfallkontakte nehmen Einladung über die App „My Gardia“ an und werden künftig bei eingehendem Notfall benachrichtigt.	14. Accept emergency contact invitations Emergency contacts accept invitations via the app “My Gardia”. Once they are accepted, the emergency contacts will be notified in the future in the event of an incoming emergency.
	15. Notrufarmband anlegen Träger kann Notrufarmband nun anlegen und in Notfallsituationen Notfall per Knopfdruck auslösen. Bei Sturz wird Notfall automatisch ausgelöst.	15. Put on emergency wristband The wearer can now put on the emergency wristband and trigger an alarm at the push of a button in an emergency. In the event of a fall, an emergency is triggered automatically.