

beurer

FT 90

NL Contactloze koortsthermometer
Gebruiksaanwijzing



CE 0483

Inhoud

1. Verklaring van de symbolen	3
2. Voorgescreven gebruik	4
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	5
3.1 Risico's voor gebruikers	5
3.2 Risico's voor het apparaat	5
3.3 Tips voor de omgang met batterijen	6
4. Informatie over de thermometer	7
5. Beschrijving van het apparaat	9
5.1 Beschrijving van het display	10
6. Ingebruikname	10
7. Thermometer inschakelen en instellen	11
7.1 Basisfuncties instellen	11
8. Voorhoofdmeting	13
8.1 Opgeslagen gemeten waarden weergeven	14
9. Objecttemperatuur/kamertemperatuur meten	15
10. Foutmeldingen	16
11. Batterijen	16
12. Apparaat reinigen	17
13. Apparaat bewaren	18
14. Apparaat verwijderen	18
15. Technische gegevens	18
16. Richtlijnen	20
17. Garantie/service	21



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage en lucht.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem de aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Koortsthermometer
- 2 AAA-batterijen van 1,5 V (LR03)
- Opbergbox
- Gebruiksaanwijzing

1. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
	LET OP Waarschuwt voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Aanwijzing Verwijst naar belangrijke informatie.
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Toegepast deel type BF
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Fabrikant

Storage/Transport  	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag en transport
Operating  	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik
IP22	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en tegen vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat
SN	Serienummer
	Belangrijke informatie/tip
▷	Kruisverwijzing naar een andere paragraaf.
  PAP	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

2. Voorgeschreven gebruik

Deze koortsthermometer is bedoeld voor het contactloos meten van voorhoofd-, object- en kamertemperaturen. Met het apparaat kan de lichaamstemperatuur snel en eenvoudig worden vastgesteld. De waarden worden automatisch opgeslagen.

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

3.1 Risico's voor gebruikers

- Ga pas over op het gebruik van deze thermometer indien u deze gebruiksaanwijzing gelezen hebt en de inhoud begrijpt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Alle aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- Leg de thermometer minimaal 30 minuten voor de meting in de ruimte waar u de meting gaat uitvoeren.
- De FT 90-thermometer is alleen bestemd voor gebruik op het in de gebruiksaanwijzing aangegeven meetpunt op het menselijk lichaam.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel.
- De thermometer is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Medische apparatuur is geen speelgoed.
- Controleer voor ieder gebruik of de lens onbeschadigd is. Neem contact op met uw verkoop- of servicepunt als deze beschadigd is.
- De thermometer is ontworpen voor praktisch gebruik, maar kan niet de plaats innemen van een bezoek aan een arts.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van de thermometer, dan kunt u zich wenden tot uw leverancier of tot de klantenservice.

3.2 Risico's voor het apparaat

- Stel de thermometer niet bloot aan mechanische schokken.
- Stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met vloeistoffen. De thermometer is niet waterdicht. Vermijd elk direct contact met water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat alleen repareren door geautoriseerde servicebedrijven, anders vervalt uw garantie.
- Draagbare en mobiele HF-communicatie-installaties kunnen de thermometer beïnvloeden.

3.3 Tips voor de omgang met batterijen

- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
-  **Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
-  **Explosiegevaar!** Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

4. Informatie over de thermometer

De gemeten temperatuurwaarde kan variëren, afhankelijk van het lichaamsdeel waar deze wordt gemeten. De afwijking kan bij gezonde mensen voor afzonderlijke lichaamsdelen liggen tussen 0,2 °C - 1 °C (0,4 °F - 1,8 °F).

Normaal temperatuurbereik bij verschillende thermometers

	Meetwaarden	Gebruikte thermometer
Voorhoofdtemperatuur	35,8 °C tot 37,6 °C (96,4 °F tot 99,7 °F)	Voorhoofdthermometer
Oortemperatuur	36,0 °C tot 37,8 °C (96,8 °F tot 100,0 °F)	Oorthermometer
Mondtemperatuur	36,0 °C tot 37,4 °C (96,8 °F tot 99,3 °F)	Conventionele thermometer
Rectale temperatuur	36,3 °C tot 37,8 °C (97,3 °F tot 100,0 °F)	Conventionele thermometer



Tip van Beurer

- Vergelijk nooit temperaturen met elkaar die zijn gemeten met verschillende thermometers.
- Geef daarom aan uw arts door met welke thermometer en bij welk lichaamsdeel u de lichaamstemperatuur hebt gemeten. Houd hier ook rekening mee bij zelfdiagnose.



Wanneer de thermometer voor de meting te lang wordt vastgehouden, wordt het apparaat verwarmd. Dit kan tot onjuiste meetresultaten leiden.

Invloeden op de lichaamstemperatuur

- Individuele, persoonsafhankelijke stofwisseling
- Leeftijd

De temperatuur is hoger bij zuigelingen en kleine kinderen dan bij volwassenen. Bij kinderen komen hogere temperatuurafwijkingen sneller en vaker voor. Naarmate de leeftijd vordert, neemt de normale lichaamstemperatuur af.

- Kleding
- Buitentemperatuur
- Moment van de dag

's Ochtends is de lichaamstemperatuur lager. Deze stijgt gedurende de dag.

Activiteit

- Lichamelijke, en in mindere mate ook mentale, activiteit zorgen voor verhoging van de lichaamstemperatuur.




Tip van Beurer

Lichaamstemperatuurmeting levert een meetwaarde met de actuele lichaamstemperatuur van een mens. Als u niet zeker weet hoe u de resultaten moet interpreteren of als er abnormale waarden voorkomen, kunt u zich het beste tot uw huisarts wenden. Dat geldt ook voor kleine temperatuurveranderingen als er bijkomende ziekteverschijnselen optreden, zoals onrust, sterk zweten, rode huid, hoge polsslag, neiging tot flauwvallen enz.

5. Beschrijving van het apparaat


- 1 Display
- 2 **MODE/MEM**-toets
- 3 Aan/Uit-toets **ⓘ**
- 4 **LIGHT/SET**-toets
- 5 **SCAN**-toets
- 6 Meetsensor
- 7 Ontgrendeling batterijvak
- 8 Deksel batterijvak

Toetsen	Functies
ⓘ	Thermometer in- en uitschakelen.
SCAN	Temperatuurmeting starten.
MODE/MEM	MODE Instellen van de meetmodus. MEM Weergave van de opgeslagen gemeten waarden.
LIGHT/SET	LIGHT Handmatig inschakelen van de displayverlichting. SET Instellen van de basisfuncties.

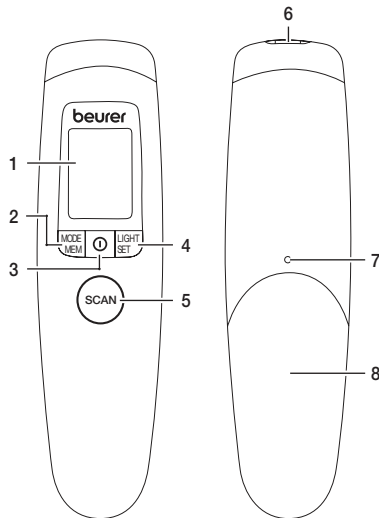

5.1 Beschrijving van het display

- 1 Modus Objecttemperatuur
- 2 Modus Kamertemperatuur
- 3 Modus Voorhoofdtemperatuur
- 4 Symbool geluidssignaal
- 5 Jaar
- 6 Geheugenfunctie
- 7 Datum
- 8 Batterijstatus
- 9 Weergave temperatuurwaarde/geheugenplaats
- 10 Meeteenheid Celsius/Fahrenheit
- 11 Meetresultaat $\geq 38,0$ °C "Koorts"
- 12 Meetresultaat $< 38,0$ °C "Geen koorts"
- 13 Symbool displayverlichting
- 14 Weergave jaar/datum/tijd

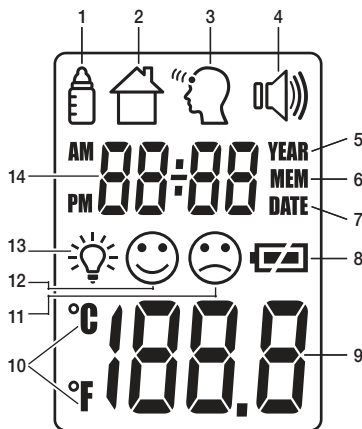

6. Ingebruikname

Indien aanwezig verwijdt u de isolatiestrook van de batterijen bij het deksel van het batterijvak c.q. de beschermende folie van de batterij en plaatst u de batterij volgens de poling in het apparaat.

▷ 11. Batterijen

Na een korte zelftest en twee korte pieptonen kunt u de thermometer gebruiken voor een meting bij het voorhoofd.

7. Thermometer inschakelen en instellen

Druk kort op de Aan/Uit-toets ①.

Na een korte zelftest en twee korte pieptonen kunt u de thermometer gebruiken voor een meting bij het voorhoofd. Het apparaat staat na inschakeling altijd in de modus Voorhoofdtemperatuur .


7.1 Basisfuncties instellen

In dit menu kunt u achtereenvolgens de volgende functies individueel instellen.



Tijdweergave

- Houd de **LIGHT/SET**-toets 5 seconden ingedrukt wanneer de thermometer is ingeschakeld.
- Op het display knippert de tijdweergave (afb. 1).
- Stel met de **MODE/MEM**-toets de gewenste tijdweergave in en bevestig met de **LIGHT/SET**-toets.

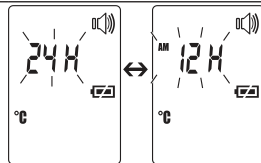


Afb. 1

Datum

- Op het display knippert het jaartal (afb. 2).
- Stel met de **MODE/MEM**-toets het jaar in en bevestig met de **LIGHT/SET**-toets.
- Op het display knippert de dag/maand (afb. 3).
- Stel met de **MODE/MEM**-toets de dag en de maand in en bevestig met de **LIGHT/SET**-toets.

① In de 24-uursweergave wordt de datum in dag/maand weergegeven. In de 12-uursweergave wordt de datum in maand/dag weergegeven.

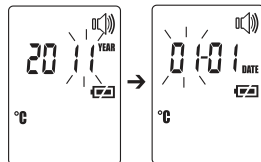

Afb. 2

Afb. 3

Op het display knippert het tijdstip (afb. 4).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets de tijd in en bevestig met de **LIGHT/SET**-toets.

❗ In de 12-uursweergave wordt de tijd met AM/PM weergegeven.




Afb. 4

Op het display knippert de temperatuurmeeteenheid (afb. 5).

U kunt de meetresultaten laten weergeven in de temperatuurmeeteenheid graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F).

- Wilt u de meetresultaten in graden Celsius laten weergeven, selecteer dan °C met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets.
- Wilt u de meetresultaten in graden Fahrenheit laten weergeven, selecteer dan °F met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets.

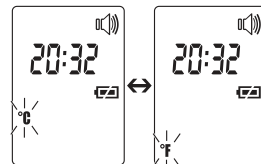


Afb. 5

Op het display knippert het symbool van het geluidssignaal (afb. 6).

U kunt de geluidssignalen (die klinken bij inschakeling van de thermometer, tijdens de meting en na voltooiing van de meting) in- of uitschakelen.

- Om de geluidssignalen in te schakelen, selecteert u **ON** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig u met de **LIGHT/SET**-toets.
- Om de geluidssignalen uit te schakelen, selecteert u **OFF** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig u met de **LIGHT/SET**-toets.

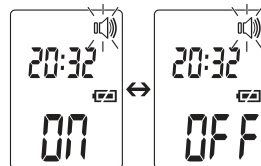


Afb. 6

Op het display knippert het verlichtingssymbool (afb. 7).

U kunt de automatische displayverlichting (die na het meten van de voorhoofdtemperatuur begint te branden) in- of uitschakelen.

- Om de automatische displayverlichting in te schakelen, selecteert u **ON** met de **MODE/MEM**-toets en bevestigt u met de **LIGHT/SET**-toets.
- Om de automatische displayverlichting uit te schakelen, selecteert u **OFF** met de **MODE/MEM**-toets en bevestigt u met de **LIGHT/SET**-toets.

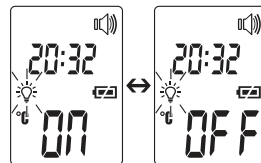

Afb. 7

U kunt de displayverlichting ook handmatig inschakelen, door de **LIGHT/SET**-toets kort in te drukken. Het display wordt 5 seconden verlicht.

❗ Tijdens de meetprocedure kan de automatische of handmatige displayverlichting niet worden gebruikt.

8. Voorhoofdmeting

Druk kort op de Aan/Uit-toets ❶.

Na een korte zelftest en twee korte pieptonen kunt u de thermometer gebruiken voor een meting bij het voorhoofd. De thermometer staat in de modus Voorhoofdtemperatuur. Dit ziet u aan het pictogram .



Tip van Beurer

Houd er rekening mee dat

- lichamelijke inspanning, veel zweet op het voorhoofd, inname van bloedvatvernauwende medicijnen en huidirritaties tot onjuiste meetresultaten kunnen leiden,
- het voorhoofd, respectievelijk de slapen, vrij moeten zijn van zweet en cosmetica.

Houd de thermometer 2-3 cm van de meetplek. Druk op de **SCAN**-toets en beweeg de thermometer heen en weer over het voorhoofdgebied (afb. 8).

Tijdens de meting hoort u mogelijk pieptonen (alleen wanneer het geluidssignaal is ingeschakeld), die u waarschuwen dat de thermometer een nieuwe hoogste meetwaarde heeft gevonden.

Het einde van de meettijd wordt aangegeven met een lange piepton.

Laat de toets **SCAN** los.

Nu kunt u de gemeten waarde aflezen.

Daarnaast geeft het display afhankelijk van het meetresultaat het pictogram Koorts ☹️ of Geen koorts 😊 weer:

Het pictogram Geen koorts 😊 geeft aan dat de lichaamstemperatuur binnen het normale bereik ligt, het pictogram Koorts ☹️ geeft aan dat een gemeten waarde gelijk is aan of hoger is dan 38,0 °C, dat betekent een koortsalarm.

Als het geluidssignaal is ingeschakeld, klinken na afloop van de meting ook nog drie pieptonen als de temperatuur hoger dan of gelijk aan 38,0 °C is.

De meettijd bedraagt normaal 2 seconden, maar deze kan ook tot 30 seconden duren.

De thermometer geeft met twee korte pieptonen en een niet meer knipperend voorhoofd-pictogram 🧠 aan dat het apparaat klaar is voor een volgende meting. De gemeten waarde wordt automatisch samen met de datum/tijd en de classificatie “Koorts” ☹️ / “Geen koorts” 😊 opgeslagen.



Afb. 8

8.1 Opgeslagen gemeten waarden weergeven

De thermometer slaat uitsluitend waarden op in de modus Voorhoofdtemperatuur 🧠. De thermometer slaat automatisch de gemeten waarden van de laatste 60 metingen op.

Wanneer de 60 geheugenplaatsen zijn gevuld en er een nieuwe waarde moet worden opgeslagen, wordt de oudste waarde gewist.

- Het geheugen kan op de volgende wijze worden opgeroepen:
- Houd de **MODE/MEM**-toets 5 seconden ingedrukt wanneer de thermometer is ingeschakeld.

De laatste gemeten waarde wordt weergegeven.

- Bij elke volgende keer drukken op de **MODE/MEM**-toets wordt eerst het geheugenplaatsnummer weergegeven en bij het loslaten van de toets de gemeten waarde.
- In de bovenste regel worden afwisselend de tijd en datum weergegeven.

9. Objecttemperatuur/kamertemperatuur meten

Modus Objecttemperatuur

Wilt u met deze thermometer de objecttemperatuur meten, dan moet u de modus Objecttemperatuur selecteren.

- Daarvoor drukt u, als de thermometer is ingeschakeld, kort op de **MODE/MEM**-toets. De thermometer schakelt naar de modus Objecttemperatuur .
- Houd de thermometer 2-3 cm van de gewenste meetplek. Druk kort op de **SCAN**-toets en lees de temperatuur af van het display (afb. 9).

Gemeten waarden in de modus Objecttemperatuur worden niet opgeslagen.



Afb. 9

Modus Kamertemperatuur

Wilt u de thermometer gebruiken voor het meten van de kamertemperatuur, dan moet u de modus Kamertemperatuur inschakelen.

- Daarvoor drukt u, als de thermometer is ingeschakeld, twee keer kort op de **MODE/MEM**-toets. De thermometer schakelt naar de modus Kamertemperatuur .
- De kamertemperatuur wordt direct weergegeven (afb. 10).

Gemeten waarden in de modus Kamertemperatuur worden niet opgeslagen.



Afb. 10

10. Foutmeldingen

Foutmelding	Probleem	Oplossing
	Meting tijdens de zelftest, apparaat nog niet klaar voor de meting.	Wacht tot het voorhoofd-pictogram niet meer knippert.
	(1) Modus Voorhoofdtemperatuur: de gemeten temperatuur is hoger dan 42,2 °C (108 °F). (2) Modus Objecttemperatuur: de gemeten temperatuur is hoger dan 80 °C (176 °F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatuurbereik. Neem bij herhaaldelijke foutmeldingen contact op met de dealer of de klantenservice.
	(1) Modus Voorhoofdtemperatuur: de gemeten temperatuur is lager dan 34 °C (93,2 °F). (2) Modus Objecttemperatuur: de gemeten temperatuur is lager dan -22 °C (-7,6 °F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatuurbereik. Neem bij herhaaldelijke foutmeldingen contact op met de dealer of de klantenservice.
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen.

11. Batterijen


Voor deze thermometer zijn twee batterijen nodig van het type AAA, LR03.

- Open het batterijvak.

Druk daarvoor met een voorwerp met een spitse punt in de ontgrendeling van het batterijvak en schuif tegelijkertijd het deksel van het batterijvak omlaag.

- Haal de lege batterijen uit het batterijvak.
- Plaats nieuwe batterijen.

Let er daarbij op dat u de batterijen in de juiste richting plaatst.

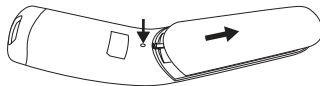

- Sluit het batterijvak.
- Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood,
Cd = batterij bevat cadmium,
Hg = batterij bevat kwik.



12. Apparaat reinigen

- ⚠ • De meetsensor is het gevoeligste onderdeel van de thermometer. Ga bij het reinigen van de meetsensor zeer voorzichtig te werk.
 - Gebruik geen agressief reinigingsmiddel.
 - Neem altijd de veiligheidsrichtlijnen voor de gebruiker en het apparaat in acht.
- ▷ 3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen
-

Reinig de meetsensor na elk gebruik. Gebruik daarvoor een zachte doek of een wattenstaafje, eventueel bevochtigd met een desinfecterend middel of 70% alcohol.

Gebruik voor het reinigen van het gehele apparaat een zachte, licht met zeepsop bevochtigde doek. Er mag geen water in het apparaat binnendringen.

Gebruik het apparaat pas weer wanneer het helemaal droog is.

13. Apparaat bewaren



Bewaar of gebruik de thermometer niet in ruimten met een te hoge of te lage temperatuur of luchtvochtigheid (zie technische gegevens), in zonlicht, in combinatie met elektrische stroom of in stoffige ruimten. Anders kunnen er meetfouten ontstaan.

Verwijder de batterijen als u de thermometer voor langere tijd wilt opbergen.

14. Apparaat verwijderen

- Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde verzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering in uw gemeente.

15. Technische gegevens

Als het apparaat niet binnen de specificaties wordt gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat correct functioneert!

De nauwkeurigheid van deze thermometer is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange gebruiksduur.

Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de geneeskunde moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie voor het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aangevraagd via het serviceadres.

Technische wijzigingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.

Type	FT 90/1
Meetmethode	Contactloze infraroodmeting
Basisfuncties	Meting voorhoofdtemperatuur Meting objecttemperatuur Meting kamertemperatuur
Maateenheden	Celsius (°C) of Fahrenheit (°F)
Gebruiksvoorwaarden	10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid ≤ 95%
Bewaarongeving	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid ≤ 85%
Meetafstand	2-3 cm afstand tot de meetplek
Meetbereiken en nauwkeurigheid meting voorhoofdtemperatuur	Meting voorhoofdtemperatuur 34 °C tot 42,2 °C (93,2 °F tot 108 °F) Meetnauwkeurigheid 36 °C tot 39 °C: ± 0,2 °C (96,8 °F tot 102 °F: ± 0,4 °F) In het overige meetbereik ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Klinische herhalingsprecisie	0,23 °C (0,41 °F)
Meetbereik en nauwkeurigheid meting objecttemperatuur	Meting objecttemperatuur -22 °C tot 80 °C (-7,6 °F tot 176 °F) Meetnauwkeurigheid ± 4% of ± 2 °C (± 4 °F)
Geheugenfunctie meting lichaamstemperatuur	Slaat automatisch de laatste 60 gemeten waarden op.
Geluidssignaal (instelbaar)	Klinkt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, tijdens de meting en na voltooiing van de meting.
Weergave	LCD-scherm

Energiebesparingsfuncties	Apparaat wordt na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.
Afmetingen breedte x diepte x hoogte	Ca. 47,6 mm x 29,0 mm x 188,0 mm
Gewicht	82 g (zonder batterijen)
Batterijen	2 AAA-batterijen van 1,5 V (LR03) Capaciteit voor ca. 3000 metingen De levensduur van de batterij wordt korter wanneer er extra functies zijn ingeschakeld, zoals het geluidssignaal of de displayverlichting.

Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijvak.

16. Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC, de Duitse wet inzake medische hulpmiddelen, de norm ASTM E 1965 - 98 en aan de Europese norm EN 60601-1-2 (overeenstemming met CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit.

Aanwijzingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het display/apparaat uitvallen.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of met andere apparaten in gestapelde vorm moet worden vermeden, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschre-

ven wijze noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.

- Het gebruik van andere toebehoren dan de toebehoren die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan verhoogde elektromagnetische storingen of een verminderde bestandheid tegen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Als deze instructie niet in acht wordt genomen, kan dit de prestatiekenmerken van het apparaat negatief beïnvloeden.

17. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 5 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Contracted Manufacturer: AVITA (WuJiang) Co. LTD
Factory address: No. 858, Jiao Tong Rd., Wujiang Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C.
Phone number: 0512-82078288
Product Name: Touch Free Infrared Thermometer
Model: NT series, REF Nr: FT 90
ISO Standard: ISO 80601-2-56:2017
China medical production Licence No: SSYJXSCX20040018
Manufactured in China



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

