

IVD



GL 44 / LD 03

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



Lancet needles / Lanzetten / lancettes / lancetas / lancette:
SteriLance Medical (Suzhou) Inc., No. 168 PuTuoShan Road
New District, 215153 Suzhou, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



CE 0483 / CE

EC REP

Emergo Europe B.V., Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

CE 0123

Indicaciones de advertencia y de seguridad

Antes del primer uso



Antes de medir por primera vez la glucemia, lea las instrucciones de uso detalladas. Controle la unidad de medición de acuerdo con las instrucciones de uso.


Peligro de infección



El aparato de medición y sus accesorios pueden entrar en contacto con sangre humana y, por lo tanto, pueden constituir una posible fuente de infecciones.

- No permita que el aparato de medición, el dispositivo de punción y los accesorios sean utilizados por más de una persona.
- Si el sistema de medición se utiliza en distintas personas, se deberán seguir las normas generales de higiene.
- Utilice una lanceta estéril nueva cada vez que tome una muestra de sangre.
- Lávese las manos con agua caliente y jabón, y séqueselas antes de tomar la muestra de sangre.


Preparar dispositivo de punción y aparato

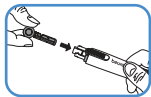

Colocar la lanceta

Retire la caperuza del dispositivo de punción. Inserte la lanceta en el dispositivo de punción.


Sostenga la lanceta por el mango y extraiga el disco de protección girándolo. Guarde el disco de protección. Vuelva a colocar la caperuza en el dispositivo de punción. Gire la parte móvil superior de la caperuza hasta que se muestre la profundidad de punción deseada. Tire del dispositivo tensor hacia atrás hasta que encaje.

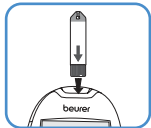

Colocar la tira reactiva

Inserte la tira reactiva en el aparato de medición con los contactos hacia delante. Espere un poco hasta que, tras verse brevemente la pantalla de inicio, se vea en la pantalla el símbolo parpadeante de la mano y la gota de sangre.

Obtener la prueba de sangre

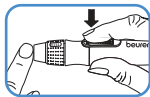


Hacer la punción

Coloque el dispositivo de punción ligeramente a un lado desde el centro con firmeza en la yema del dedo. Pulse el botón de accionamiento.

La gota de sangre recogida debe:

- tener forma de gota y no puede estar embadurnada,
- tener un tamaño de por lo menos 1,4 mm (tamaño original ●).

Colocar sangre en la tira reactiva

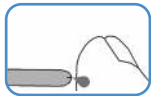

Mantenga la ranura para la recogida de la muestra de sangre de la tira reactiva en la gota de sangre hasta que se llene por completo y el medidor de la pantalla comience a contar hacia atrás. Espere unos 5 segundos hasta que el valor de glucemia medido aparezca en la pantalla.

Valor normal: 2 horas después de comer: 70-140 mg/dL (3,9-7,8 mmol/L)
en ayunas: 70-100 mg/dL (3,9-5,6 mmol/L)



Eliminar la lanceta

Retire la caperuza. Coloque el disco de protección guardado sobre una superficie y pínchelo con la punta de la aguja.

Mantenga pulsado el botón de accionamiento y tire con la otra mano del dispositivo tensor. De este modo, la lanceta se desprende del soporte. Deseche la tira reactiva y la lanceta adecuadamente. Vuelva a colocar la caperuza.

Valoración de valores de medición críticos

Lo		Hipoglucemia < 20 mg/dL (< 1,1 mmol/L)	Es necesario iniciar de inmediato un tratamiento médico.
65 mg/dL	3,6 mmol/L	Glucemia baja < 70 mg/dL (< 3,9 mmol/L)	Coma algo. Siga las instrucciones del médico.
150 mg/dL	8,3 mmol/L	Glucemia alta en ayunas > 100 mg/dL (> 5,6 mmol/L) 2 horas después de comer > 140 mg/dL (> 7,8 mmol/L)	Consulte a un médico.

300 mg/dL	16,7 mmol/L	Glucemia alta, posiblemente cetonas >240 mg/dL (>13,3 mmol/L)	Se recomienda prueba de cetonas. Consulte a su médico.
H i		Hiperglucemia >630 mg/dL (>35,0 mmol/L)	Mida la glucemia con una tira reactiva nueva. En caso de que obtenga la misma indica- ción, busque inmediatamente atención médica.

Mensajes en la pantalla

LP	Pilas agotadas	Sustituya todas las pilas.
Ht o Lt	Temperatura fuera del rango admisible.	Repita la prueba con una tira nueva a una temperatura ambiente de +20 °C a +26 °C.
Err 	Tira reactiva usada o sucia.	Inserte la tira nueva y no caducada y repita la medición.
Err001/005	Fallo del sistema.	Extraiga las pilas. Vuelva a colocarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Err002	La tira reactiva no está suficientemente llena.	Repita la medición con una nueva tira reactiva.