

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW (Ολικό αίμα/Ορός/Πλάσμα) Ένθετο συσκευασίας

REF VISEAC-445	Ελληνικά
----------------	----------

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW (Ολικό Αίμα/ Ορός/Πλάσμα) είναι μια συνδυασμένη κασέτα για τη διαφορική διάγνωση της παρουσίας αντισώματος LSH σε σκύλους, αντισώματος Ehrlichia σε σκύλους και αναπλάσματος σε σκύλους. αντισώματα phagocytophilum και Anaplasma platys και αντιγόνο καρδιοσκόληκα σκύλου στο πλήρες αίμα, τον ορό ή το πλάσμα του σκύλου.

Μόνο για κτηνιατρική χρήση.

ΑΡΧΗ

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW βασίζεται σε ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία πλευρικής ροής. Η κασέτα δοκιμής έχει τέσσερα παράθυρα δοκιμής. Κάθε παράθυρο δοκιμής έχει μια αόρατη ζώνη T (Test) και μια ζώνη C (Control). Όταν το δείγμα εφαρμόζεται στην υποδοχή δείγματος στην κασέτα, το υγρό θα ρέει πλευρικά στην επιφάνεια της ταινίας δοκιμής. Εάν υπάρχει αρκετή LSH για σκύλους, ένα αντίσωμα, η Ehrlichia του σκύλου. ένα αντισώμα, Αναπλάσμα Σκύλου Αντισώματα phagocytophilum και Anaplasma platys και αντιγόνο Canine Heartworm στο δείγμα, θα εμφανιστεί μια ορατή γραμμή T στο αντίστοιχο παράθυρο εξέτασης. Η γραμμή C θα πρέπει πάντα να εμφανίζεται μετά την εφαρμογή ενός δείγματος, υποδεικνύοντας ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, η κασέτα μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια την παρουσία αντισώματος LSH του σκύλου, Ehrlichia. ένα αντίσωμα, Αναπλάσμα αντισώματα phagocytophilum και Anaplasma platys και αντιγόνο Heartworm στο δείγμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Φυλάσσετε στη συσκευασία του στη σφραγισμένη συσκευασία είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε στο ψυγείο (2-30 °C). Το τεστ είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμένη συσκευασία. Η κασέτα του τεστ πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη συσκευασία μέχρι τη χρήση. **ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.** Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
- Χειριστείτε όλα τα δείγματα σαν να περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες. Τηρείτε τις καθιερωμένες προφυλάξεις κατά των μικροβιολογικών κινδύνων καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες για την ορθή απόρριψη των δειγμάτων.
- Να φοράτε γάντια μιας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά όταν εξετάζονται δείγματα.
- Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα.
- Μην αφαιρείτε την κασέτα δοκιμής από τη συσκευασία της μέχρι αμέσως πριν από τη χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το kit δοκιμής.
- Μην αναμειγνύετε συστατικά από διαφορετική παρτίδα και διαφορετικά προϊόντα.

ΥΛΙΚΑ

Παρεχόμενα υλικά

- Κασέτες δοκιμών
- Σταγονόμετρα
- Ρυθμιστής
- Εισαγωγή πακέτου

Απαιτούμενα αλλά μη παρεχόμενα υλικά


- Χρονοδιακόπτης
- Δοχεία δειγμάτων
- Φυγόκεντρος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφίστε το δοκιμαστικό c asette, το δείγμα και το ρυθμιστικό διάλυμα να

εξισορροπηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 °C) πριν από τη δοκιμή.

- ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος σκύλου δείγματα και βεβαιωθείτε ότι τα δείγματα δεν μπορούν να θωλώσουν ή να καθίζουν. Χρησιμοποιήστε μόνο διαυγή, μη αιμολυμένα δείγματα. Μην αφήνετε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου για παρατεταμένες περιόδους. Τα δείγματα ολικού αίματος, ορού και πλάσματος μπορούν να αποθηκευτούν στους 2-8 °C για έως και 3 ημέρες. Για μακροχρόνια αποθήκευση, τα δείγματα ορού και πλάσματος πρέπει να διατηρούνται κάτω από -20 °C. Μην καταψύχετε δείγματα ολικού αίματος.
- Τοποθετήστε την κασέτα δοκιμής σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε το σταγονόμετρο κάθετα και **μεταφέρετε 1 σταγόνα δείγματος** (περίπου 20μL) και αμέσως **προσθέστε 2 σταγόνες ρυθμιστικού διαλύματος** (περίπου 120 μL) σε κάθε φρεάτιο δείγματος (S) και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το χρονόμετρο. Δείτε την παρακάτω εικόνα.
- Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 10 λεπτά.** Μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα μετά από 15 λεπτά.

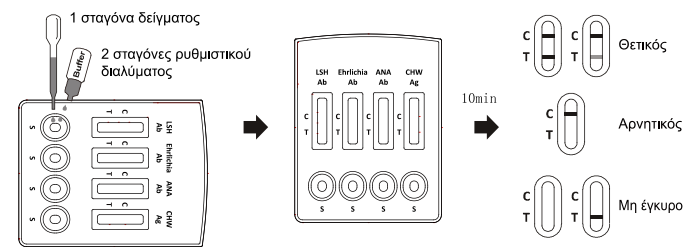

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Θετικό: Η παρουσία και της γραμμής C και της γραμμής T.

Αρνητικό: Εμφανίζεται μόνο η καθαρή γραμμή C.

Μη έγκυρο: Δεν εμφανίζεται έγχρωμη γραμμή στη ζώνη C, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται η γραμμή T.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW έχει αξιολογηθεί με δείγματα που λαμβάνονται από κτηνιατρικό νοσοκομείο. Η δοκιμή εμπορικού ελέγχου χρησιμοποιείται ως μέθοδος αναφοράς για το αντίσωμα LSH Canine+Ehrlichia+Anaplasma αντίσωμα+CHW αντιγόνο COMBO Rapid Test Cassette. Τα δείγματα θεωρήθηκαν θετικά εάν η δοκιμή εμπορικού ελέγχου έδειξε θετικό αποτέλεσμα.

Δοκιμές LSH AB	δοκιμή εμπορικού ελέγχου		Σύνολο
	Θετικός	Αρνητικός	
Θετικός	28	3	31
Αρνητικός	2	67	69
Σύνολο	30	70	100

Σχετική ευαισθησία: 93,33%(95%CI*: 77,93%-99,18%)

Σχετική εξειδίκευση: 95,71%(95%CI*: 87,98%-99,11%)

Ακρίβεια: 95,00%(95%CI*: 88,72%-98,36%)

*Διάστηματα εμπιστοσύνης

Δοκιμές ehrlichia ab	δοκιμή εμπορικού ελέγχου		Σύνολο
	Θετικός	Αρνητικός	
Θετικός	38	1	39
Αρνητικός	2	62	64
Σύνολο	40	63	103

Σχετική ευαισθησία: 95,00%(95%CI*: 83,08%-99,39%)

Σχετική εξειδίκευση: 98,41%(95%CI*: 91,47%-99,96%)

Ακρίβεια: 97,09%(95%CI*: 91,72%-99,40%)

*Διάστημα εμπιστοσύνης

Γρήγοροι Έλεγχι για Κυνό Anaplasma AB	δοκιμή εμπορικού ελέγχου		Σύνολο
	Θετικός	Αρνητικός	
Θετικός	21	1	22

Αρνητικός	1	80	81
Σύνολο	22	81	103

Σχετική ευαισθησία: 95,45%(95%CI *: 77,16%-99,88%)

Σχετική εξειδίκευση: 98,77%(95%CI*: 93,31%-99,97%)

Ακρίβεια: 98,06%(95%CI*: 93,16%-99,76%)

*διάστημα εμπιστοσύνης

CHW AG RAPID	δοκιμή εμπορικού ελέγχου		Σύνολο
	Θετικός	Αρνητικός	
Θετικός	22	1	23
Αρνητικός	1	79	80
Σύνολο	23	80	103

Σχετική ευαισθησία: 95,65%(95%CI *: 78,05%-99,89%)

Σχετική εξειδίκευση: 98,75%(95%CI*: 93,23%-99,97%)

Ακρίβεια: 98,06%(95%CI*: 93,16%-99,76%)

*διάστημα εμπιστοσύνης

Διασταυρούμενη-αντιδραστικότητα

Για LSH AB:

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW έχει δοκιμαστεί από Distemper, Parvovirus, Ehrlichia AB, Coronavirus και Rotavirus θετικό δείγμα?

Για την Ehrlichia AB:

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW έχει δοκιμαστεί με θετικό δείγμα Distemper, Parvovirus, LSH AB, Coronavirus και Rotavirus.

Για το Canine Anaplasma AB:

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW έχει δοκιμαστεί από Giardia, LSH AB, Ehrlichia AB, Rotavirus, CHW AG θετικό δείγμα.

Για CHW AG:

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW έχει δοκιμαστεί από Dipetalonema Reconditum, Giardia, LSH AB, Ehrlichia AB, θετικό δείγμα ροταϊού.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διασταυρούμενη αντιδραστικότητα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Κασέτα ταχείας δοκιμής Canine Αντίσωμα LSH + Αντίσωμα Ehrlichia + Αντίσωμα Anaplasma + Συνδυασμός αντιγόνου CHW προορίζεται μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση. Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με άλλες κλινικές πληροφορίες που διατίθενται από τον κτηνίατρο. Για ακριβές αποτέλεσμα, προτείνεται η εφαρμογή άλλης μεθόδου, όπως η PCR. ή δοκιμή απομόνωσης παθογόνων ή Elisa για τελικό προσδιορισμό στην πράξη.

Ευρετήριο συμβόλων

	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης		Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> δοκιμές		30°C 2°C Όριο θερμοκρασίας
	Κατασκευαστής		Κωδικός παρτίδας		Κατάλογος αριθμός
	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Ημερομηνία λήξης		Μην το ξαναχρησιμοποιείτε



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Αριθμός: V145188301
αναθεώρησης : 2025-06-26