

Κυνικός Κασέτα ταχείας δοκιμής αντισωμάτων αναπλάσματος (Ολικό αίμα/Ορός/Πλάσμα)

Ένθετο συσκευασίας

【ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ】

Το Κυνικός Κασέτα ταχείας δοκιμής αντισωμάτων αναπλάσματος (ολικού αίματος/ορού/πλάσματος) είναι μια ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία πλευρικής ροής σάντουιτς για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά του αναπλάσματος του σκύλου (ANA Ab) στο πλήρες αίμα του σκύλου. ορό ή πλάσμα.

Μόνο για κτηνιατρική χρήση.

【ΑΡΧΗ】

Ο Σκύλος Κασέτα ταχείας δοκιμής αντισωμάτων αναπλάσματος (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) βασίζεται σε ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία πλευρικής ροής. Η κασέτα δοκιμής διαθέτει ένα παράθυρο δοκιμής με μια αόρατη ζώνη T (δοκιμής) και μια ζώνη C (ελέγχου). Όταν το δείγμα εφαρμόζεται στο φρεάτιο δείγματος στην κασέτα δοκιμής, το υγρό θα ρέει πλευρικά στην επιφάνεια της ταινίας δοκιμής. Εάν υπάρχουν αρκετές Αντισώματα Αναπλάσματος στο δείγμα, θα εμφανιστεί μια ορατή γραμμή T. Η γραμμή C θα πρέπει πάντα να εμφανίζεται μετά την εφαρμογή ενός δείγματος, υποδεικνύοντας ένα έγκυρο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, η κασέτα δοκιμής μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια την παρουσία αντισωμάτων Αναπλάσματος στο δείγμα.

【ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ】

Φυλάσσετε στη συσκευασία του στη σφραγισμένη συσκευασία είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε στο ψυγείο (2-30 °C). Το τεστ είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη σφραγισμένη συσκευασία. Η κασέτα του τεστ πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη συσκευασία μέχρι τη χρήση. **ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.** Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

【ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ】

- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
- Χειριστείτε όλα τα δείγματα σαν να περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες. Τηρείτε τις καθιερωμένες προφυλάξεις κατά των μικροβιολογικών κινδύνων καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες για την ορθή απόρριψη των δειγμάτων.
- Να φοράτε γάντια μιας χρήσης και προστατευτικά γυαλιά κατά τη δοκιμή δειγμάτων.
- Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα.
- Μην αφαιρείτε την κασέτα δοκιμής από τη συσκευασία της μέχρι αμέσως πριν από τη χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το kit δοκιμής.

- Μην αναμειγνύετε συστατικά από διαφορετικές παρτίδες και διαφορετικά προϊόντα.

【ΥΛΙΚΑ】

Παρεχόμενα υλικά

- Στοιχεία δοκιμής
- Ρυθμιστικό διάλυμα
- Σταγονόμετρα
- Ένθετο συσκευασίας


Απαιτούμενα αλλά μη παρεχόμενα υλικά

- Χρονοδιακόπτης
- Φυγόκεντρος
- Δείγμα Γ κοντέινερ s

【ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ】

Επιτρέψτε τη δοκιμή c asette, δείγμα, ρυθμιστικό διάλυμα να εξισορροπηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (15-30 °C) πριν από τη δοκιμή.

- Συλλέξτε φρέσκο ολικό αίμα σκύλου ή διαχωρίστε τον ορό ή το πλάσμα από το αίμα το συντομότερο δυνατό για να αποφύγετε την αιμόλυση. Χρησιμοποιήστε μόνο διαυγή, μη αιμολυμένα δείγματα. Μην αφήνετε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου για παρατεταμένες περιόδους. Τα δείγματα ορού και πλάσματος μπορούν να αποθηκευτούν στους 2-8 °C για έως και 3 ημέρες. Για μακροχρόνια αποθήκευση, τα δείγματα ορού και πλάσματος πρέπει να διατηρούνται κάτω από -20°C. **Μην καταψύχετε δείγματα ολικού αίματος.**
- Τοποθετήστε την κασέτα δοκιμής σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε το σταγονόμετρο κάθετα και **μεταφέρετε 2 σταγόνες δείγματος** (περίπου 20 μL) και αμέσως προσθέστε **2 σταγόνες ρυθμιστικού διαλύματος** (περίπου 80 μL) στην υποδοχή δείγματος (S) και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το χρονόμετρο.
- Διαβάστε το αποτέλεσμα στα 10 λεπτά.** Μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα μετά από 15 λεπτά.

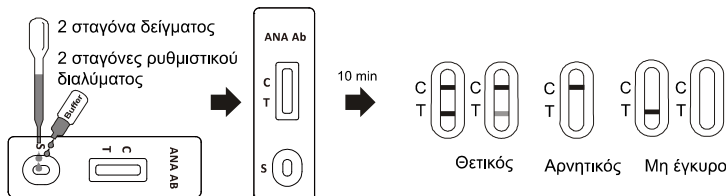

【ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ】

Θετικό: Η παρουσία και της γραμμής C και της γραμμής T, ανεξάρτητα από το αν η γραμμή T είναι σαφής ή ασαφής.

Αρνητικό: Εμφανίζεται μόνο η καθαρή γραμμή C.

Μη έγκυρο: Δεν εμφανίζεται έγχρωμη γραμμή στη ζώνη C, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται η γραμμή T.

【ΑΚΡΙΒΕΙΑ】

Ο Σκύλος Ταχεία αντισώματα αναπλάσματος Η κασέτα δοκιμής έχει αξιολογηθεί με δείγματα που ελήφθησαν από κτηνιατρικό νοσοκομείο. Ως μέθοδος αναφοράς για τη δοκιμή ANA Ab χρησιμοποιείται εμπορική δοκιμή ελέγχου. Τα δείγματα θεωρήθηκαν θετικά εάν η εμπορική δοκιμή ελέγχου έδειξε θετικό αποτέλεσμα.

Κασέτα ταχείας δοκιμής	Εμπορική δοκιμή ελέγχου	Σύνολο
------------------------	-------------------------	--------

αντισωμάτων αναπλάσματος σκύλου	Θετικός	Αρνητικός	
Θετικό τεστ	21	1	22
Αρνητικό τεστ	1	80	81
Σύνολο	22	81	103

Σχετική ευαισθησία: 95,45 % (95% ΔΕ*: 77,16 %-99,88 %)

Σχετική Ειδικότητα: 98,77 % (95% ΔΕ*: 93,31 %-99,97 %)

Ακρίβεια: 98,06 % (95% ΔΕ*: 93,16 %-99,76%)

*Διάστημα Εμπιστοσύνης

【ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ】

Ο Σκύλος Η κασέτα ταχείας δοκιμής αντισωμάτων αναπλάσματος έχει δοκιμαστεί με Giardia, LSH Ab, Ehrlichia Δείγματα θετικά για Ab, ροταϊό, CHW Ag. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διασταυρούμενη αντιδραστικότητα.

【ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ】

Ο Κυνικός Η κασέτα ταχείας δοκιμής αντισωμάτων αναπλάσματος προορίζεται μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση. Όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με άλλες κλινικές πληροφορίες που διατίθενται από τον κτηνίατρο. Για ακριβές αποτέλεσμα, προτείνεται η εφαρμογή άλλης μεθόδου όπως PCR ή εξέταση αίματος ή ELISA. για τελική απόφαση στην πράξη.

Ευρετήριο συμβόλων

	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης		Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> δοκιμές		Όριο θερμοκρασίας
	Κατασκευαστής		Κωδικός παρτίδας		Κατάλογος αριθμός
	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Ημερομηνία λήξης		Μην το ξαναχρησιμοποιείτε

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Αριθμός: V145361500
αναθεώρησης: 2026-05-28