

Laboratory

Incubator

DI 30 (Affichage numérique)
TI 30 (Écran tactile)
DI 55 (Affichage numérique)
TI 55 (Écran tactile)
DI 80 (Affichage numérique)
TI 80 (Écran tactile)
DI 120 (Affichage numérique)
TI 120 (Écran tactile)

Connect & Go

Incubateur TI 55 - Écran Tactile

L'incubateur DragLab est la solution idéale pour la croissance des milieux et les besoins d'incubation dans les domaines de la recherche, de la pharmacie, de la médecine et de la chimie alimentaire. Son système de chauffage à air forcé est spécialement optimisé pour maintenir une température homogène et précisément au point de consigne.



Environnement entièrement contrôlé avec le système d'incubation DragLab

Les incubateurs de laboratoire DragLab ont démontré leur efficacité et leur précision grâce à une circulation d'air optimale à l'intérieur de la chambre entièrement contrôlée, même lorsqu'elle est totalement chargée. Tous les modèles, disponibles en différentes capacités, sont équipés d'un ventilateur automatique assurant une répartition homogène de la température, entraîné par un système de chauffage unique, spécialement conçu pour la circulation d'air forcée à l'aide d'une technologie intelligente adaptée à chaque utilisation.

Ils sont dotés d'un logiciel convivial permettant de contrôler facilement de nombreux paramètres, notamment la température et le minuteur. Le tableau de bord clair affiche la température cible et réelle, l'état de l'appareil ainsi qu'un aperçu complet de tous les événements et messages d'alarme.

Applications :

- Microbiologie clinique et surveillance
- Biotechnologie, culture cellulaire et préparation de milieux
- Laboratoires d'essais, d'analyses et de recherche
- Préparation d'échantillons de microbiologie et de bactériologie
- Production alimentaire et de boissons
- Industrie et recherche
- Production de cosmétiques et de produits de soins de la peau
- Fabrication pharmaceutique et formulation de médicaments
- Essais de matériaux

A vertical bar with black, red, and yellow segments.

Qualité et expertise



DragLab est certifié ISO 9001:2015, reflétant ainsi notre engagement indéfectible envers la qualité et l'excellence. Nous optimisons en permanence nos processus de production afin de garantir l'efficacité et la performance à chaque étape. Grâce à un développement et une innovation continus, nous nous efforçons de respecter — et de dépasser — les normes de l'industrie. Notre approche centrée sur le client place les besoins et la satisfaction de nos partenaires au premier plan, nous incitant à maintenir des protocoles rigoureux d'assurance qualité. Cette exigence garantit que les équipements de laboratoire fabriqués par DragLab répondent constamment aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité.

Les appareils de laboratoire DragLab sont soigneusement conçus et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses de nos clients. Notre engagement envers l'excellence et l'innovation stimule un développement et une amélioration continus, guidés par l'expérience quotidienne et les avancées technologiques permanentes.


Chez DragLab, la notion de « Qualité et Expertise » ne se limite pas à la conception de produits remarquables ; elle incarne la politique de notre entreprise, qui consiste à placer la réactivité et le service orienté client au cœur de nos priorités.

Cette exigence s'étend à l'ensemble des produits DragLab, conformes aux normes européennes en vigueur et portant le marquage CE.



Incubateur TI 55 - Écran Tactile

Les étuves innovantes DRAGLAB, utilisées dans la recherche, l'industrie et le domaine médical pour une grande variété d'applications, allient efficacité et performance avec un niveau de précision exceptionnel et un temps de chauffe particulièrement court, figurant parmi les nombreux avantages qu'elles offrent.

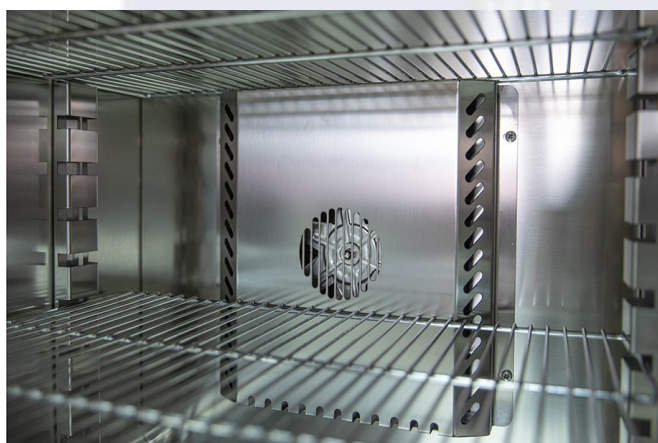

Caractéristiques :

Système de ventilation :

Flux d'air avec circulation forcée par ventilateur .

Capacité :

Volume utile de la chambre de 55 litres .

Affichage :

Écran tactile intuitif avec logiciel convivial. .

Commande :

Microprocesseur PID programmable .

Température :

Plage de contrôle de la température comprise entre +20 °C et 100 °C .

Minuterie :

Plage de contrôle de 1 minute à 99 heures et 59 minutes, ou fonctionnement en continu .

Étagères internes :

Deux étagères standard pour une utilisation polyvalente .

Chambre intérieure :

Acier inoxydable fonctionnel AISI 304 .

Boîtier :

Acier galvanisé revêtu de poudre électrostatique .

Protection :

Protection thermostatique automatique .

Homogénéité de la température :


Conforme à la norme DIN 12880 pour une répartition uniforme de la température .

Sécurité :

Conformité aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE .

Garantie :

Garantie internationale de 2 ans .

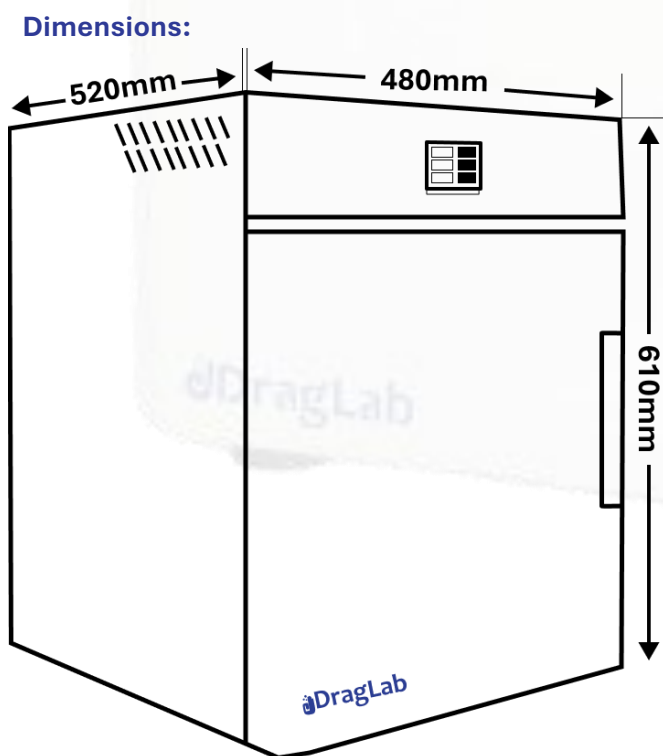

Incubateur TI 55 - Écran Tactile

Specifications:

Température

Plage de température de fonctionnement	min. +20°C ambiant jusqu'à +100°C
Fluctuation de température	0.1°C
Précision de température	± 0.3 % (sur toute l'échelle)
Unité de température	Facile à choisir Celsius ou Fahrenheit
Capteur de température	1 capteur Pt100 DIN classe A en circuit 2 fils

Technologie de contrôle

Langue	Anglais
Contrôle	Contrôleur PID multifonctionnel adaptatif à microprocesseur numérique
Affichage	Écran tactile avec logiciel convivial
Minuterie	Compteur numérique rétroactif pour réglage de l'heure cible
Contrôle de la minuterie	Réglable de 1 minute à 99:59 heures ou continu
Minuterie différée	Fonction de retard programmable
Attente du point de consigne	La minuterie ne démarre pas tant que la température définie n'est pas atteinte
Paramètres réglables	Température et temps, ventilateur automatique réglable

Équipement standard

Porte extérieure	Porte en acier extérieure avec verrou de compression
Porte intérieure	Porte intérieure en verre de sécurité trempé
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage à +100°C (optionnel)
Intérieur	Intérieur facile à nettoyer en acier inoxydable AISI 304 sur tous les côtés
Joint	Joint en caoutchouc synthétique
Boîtier	Acier galvanisé peint par poudrage électrostatique
Isolation	Chambre entièrement isolée par Rockwool recouvert d'une feuille d'aluminium pour assurer la stabilité à haute température
Bouton d'urgence	Bouton manuel en cas d'urgence
Dimensions extérieures	525 (L) X 490 (P) X 650 (H) mm
Étagères	2 étagères chromées

Sécurité

Système d'auto-diagnostic	Alarme sonore pour analyse des pannes
Alarme	Sonore, peut être désactivée, limite réglable sur l'appareil de sécurité indépendant de la température
Normes	Dispositif de sécurité de température indépendant intégré avec alarme visuelle selon DIN 12880 EN 61010-1 et EN 61010-2-010 conformément à la directive UE 2014/35/EU EN 61326-1:213 et EN 61326-1 conformément à la directive UE 2014/30/EU
Classe	Classe I conformément à la directive UE MDD 93/42/EEC
Classe de protection	IP20 selon EN 60529

Incubateur TI 55 - Écran Tactile

Specifications:

Intérieur		
Dimensions intérieures	370 (L) X 380 (P) X 370 (H) mm	
Chambre	Acier inoxydable facile à nettoyer, n° matériau: EN 1.4301 (AISI 304)	
Volume utile	55 litres	
Étagères standard	2 étagères chromées	
Nombre max. d'étagères	8	
Charge permise	110 Kg	
Charge par étagère	15 Kg	
Ventilation		
Ventilateur	Circulation d'air forcée par turbine silencieuse, réglable automatiquement	
Conditions de travail		
Installation	La distance entre le mur et l'arrière de l'appareil doit être d'au moins 15 cm. La distance latérale doit être d'au moins 5 cm. La distance par rapport au plafond doit être d'au moins 20 cm	
Température	+5 °C à +55 °C	
Humidité	Max. 80% HR	
Données électriques		
Tension	230 volts, 50/60H	
Puissance	1500 watt	
Informations de transport		
Code tarifaire douanier	8419 8998	
Dimensions approximatives incluant le carton	620 (L) X 640 (P) X 750 (H) mm	
Poids net	42 Kg	
Poids brut carton	48 Kg	
Informations de commande :		
Description	Modèle	Référence de l'article
Incubateur 55 L – Écran tactile – TEMPÉRATURE AMBIANTE : +20 °C à 100 °C – 230 V, 50/60 Hz	TI 55	1052.000