




## 1.

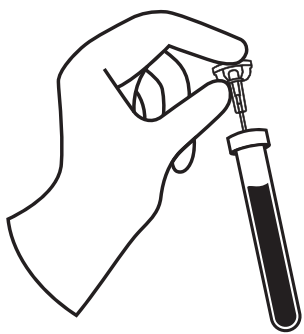

## 2.

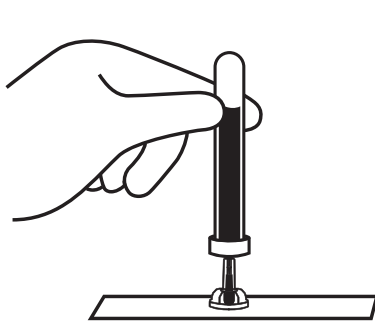

## 3.

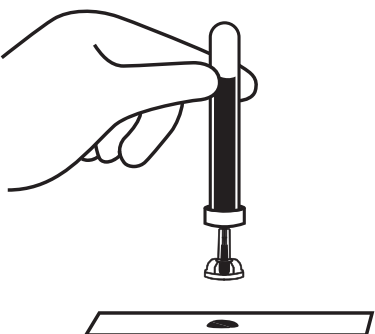

### Instructions English

**Intended Use:** Smearsafe™ is intended to provide a safe means for obtaining a drop of blood from a closed collection tube without requiring the user to open the tube. It is designed to produce a drop of blood suitable for a manual smear. It is a single-use device and is compatible with Vacutainer® and Vacuette™ tubes.

Smearsafe is clear, which allows you to see the blood drop as it is dispensed. Smearsafe is intended for use by laboratory professionals.

### Инструкции Български

**Предназначение:** Smearsafe™ е предназначено да осигури безопасно средство за получаване на капка кръв от затворена епруветка за изследване на кръв, без да се налага потребителят да отваря епруветката. Предназначено е за получаване на капка кръв, подходяща за ръчна натрипка. Това е изделие за еднократна употреба и е съвместимо с епруветки Vacutainer® и Vacuette™.

Smearsafe е прозрачно, което позволява да виждате капката кръв по време на отделенето ѝ. Smearsafe е предназначено за използване от лабораторни специалисти.

### Pokyny Čeština

**Určéné použití:** Produkt Smearsafe™ je určen k bezpečnému získání kapky krve z uzavřené odběrové zkumavky, aniž by uživatel musel zkumavku otevřít. Je navržen tak, aby vytvořil kapku krve vhodnou pro ruční stěr. Jedná se o prostředek na jedno použití kompatibilní se zkumavkami Vacutainer® a Vacuette™.

Produkt Smearsafe je průhledný, takže je kapka krve při důvkování viditelná. Produkt Smearsafe mají používat laboratorní pracovníci.

### Anvisninger Dansk

**Påberøkt anvendelse:** Smearsafe™ er beregnet til at give en sikker metode til at udtage en bloddråbe fra et lukket opsamlingsrør, uden at brugeren behøver at åbne røret. Den er designet til at producere en bloddråbe, der er egnet til et manuelt smear. Det er en engangsanordning og er kompatibel med Vacutainer®- og Vacuette™-rør.

Smearsafe er gennemsnitlig, så man kan se bloddråben, når den udtages. Smearsafe er beregnet til anvendelse af laboratoriefagfolk.

### Gebrauchsanweisung Deutsch

**Verwendungszweck:** Smearsafe™ ist als sicheres Mittel zur Gewinnung eines Blutstropfens aus einem geschlossenen Sammelröhrchen gedacht, ohne dass der Benutzer das Röhrchen dafür öffnen muss. Sein Zweck ist die Gewinnung eines Blutstropfens für einen manuellen Abstrich. Es ist ein Einweggerät und mit Vacutainer®- und Vacuette™-Röhrchen kompatibel.

Smearsafe ist durchsichtig, damit Sie den Blutstropfen beim Entnehmen sehen können. Smearsafe ist für die Verwendung durch Laborfachkräfte bestimmt.

### Kasutusjuhend Eesti

**Sihetatavate Smearsafe™** on ette nähtud veretilga ohutuks võtmiseks suletud kogumiskatsustist, ilma et kasutaja peaks katsustist avama. See on kavandatud tilga vere võtmiseks, millest piisab vereproovi kiidist tegemiseks. See on ühekordselt kasutatav seade, mis ühildub katsustega Vacutainer® ja Vacuette™.

Smearsafe on läbipaistev, länu millele näete dooseeritavat veretilga. Smearsafe on ette nähtud kasutamiseks väljõppinud laboritöötajatele.

### Οδηγίες Ελληνικά

**Προβλεπόμενη χρήση:** Το Smearsafe™ προορίζεται για την παροχή ενός ασφαλή μέσου για τη λήψη μιας σταγόνας αίματος από ένα κλειστό σωληνάριο συλλογής χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα του σωληναρίου από τον χρήστη. Είναι σχεδιασμένο να παράγει μια σταγόνα αίματος κατάλληλη για un αυτόματο επίχρισμα. Είναι συσκευή μιας χρήσης και είναι συμβατή με τα σωληνάρια Vacutainer® και Vacuette™.

Το Smearsafe είναι διαφανές, οπότε σας επιτρέπει να βλέπετε τη σταγόνα αίματος καθώς δοσείται. Το Smearsafe προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες εργαστηρίου.

### Instructions English GB

**Intended use:** Smearsafe™ is intended to provide a safe means for obtaining a drop of blood from a closed collection tube without requiring the user to open the tube. It is designed to produce a drop of blood suitable for a manual smear. It is a single-use device and is compatible with Vacutainer® and Vacuette™ tubes.

Smearsafe is clear, which allows you to see the blood drop as it is dispensed. Smearsafe is intended for use by laboratory professionals.

### Instructions English IE

**Intended use:** Smearsafe™ is intended to provide a safe means for obtaining a drop of blood from a closed collection tube without requiring the user to open the tube. It is designed to produce a drop of blood suitable for a manual smear. It is a single-use device and is compatible with Vacutainer® and Vacuette™ tubes.

Smearsafe is clear, which allows you to see the blood drop as it is dispensed. Smearsafe is intended for use by laboratory professionals.

### Instrucciones Español

**Uso previsto:** Smearsafe™ está diseñado para proporcionar un medio seguro para extraer una gota de sangre dentro de un tubo cerrado sin que el usuario deba abrir el tubo. Está diseñado para producir una gota de sangre adecuada para el frotis manual. Es un dispositivo de uso único y es compatible con los tubos Vacutainer® y Vacuette™.

Smearsafe es transparente, lo que le permite ver la gota de sangre mientras se dispensa. Smearsafe está destinado a los profesionales del laboratorio.

### Instructions Français

**Usage prévu :** Smearsafe™ constitue un moyen sécuritaire de recueillir une goutte de sang à partir d'une épreuve fermée sans que l'utilisateur n'ait à ouvrir le tube. Il est conçu pour produire une goutte de sang convenant à un frottémanuel. C'est un dispositif jetable compatible avec les tubes Vacutainer® et Vacuette™.

Smearsafe est transparent, ce qui vous permet de voir la goutte de sang pendant qu'elle est distribuée. Smearsafe est destiné à être utilisé par les professionnels de laboratoire.

### Upute Hrvatski

**Namjena:** Proizvod Smearsafe™ namijenjen je za pružanje sigurnog načina za dobivanje kapi krvi iz zatvorene sabirne epruvete bez potrebe da korisnik otvori epruvetu. Osmišljen je za dobivanje kapi krvi prikladne za ručni razmaz. To je proizvod za jednokratnu uporabu i kompatibilan je s epruvetama Vacutainer® i Vacuette™.

Proizvod Smearsafe je proziran, što vam omogućuje da vidite kap krvi dok se ispusta. Proizvod Smearsafe namijenjen je za uporabu laboratorijskim stručnjacima.

### Istruzioni Italiano

**Uso previsto:** Smearsafe™ mira a essere un mezzo sicuro per ottenere una goccia di sangue da una provetta di raccolta chiusa senza che l'utente debba aprire la provetta. È stato ideato per produrre una goccia di sangue adatta a uno striscio manuale. È un dispositivo monouso ed è compatibile con Vacutainer® e le provette Vacuette™.

Smearsafe è trasparente, cosa che consente di vedere la goccia di sangue quando erogata. Smearsafe è destinato all'uso da parte di professionisti di laboratorio.

### Instrukcijas Latviski

**Paredzētā lietošana** Smearsafe™ ierīce ir paredzēta kā drošs līdzeklis asins piliena iegūšanai no slēgtas savāktavas mēģenes, nepasot lietotājam atvērt mēģeni. Tā ir paredzēta manūālai uztriepi piemērotu asins piliena iegūšanai. Tā ir vienzēģis lietojama ierīce un ir saderīga ar Vacutainer® un Vacuette™ mēģenēm.

Smearsafe ierīce ir caurspīdīga, tāpēc var saskatīt asins pilieni, kad tas tiek izvadīts. Smearsafe ierīce ir paredzēta laboratoriju speciālistiem.

### Atsauksmes

Smearsafe™ ir drošs un ērts lietošanai. Tas ir ideāls instruments asins paraugu ņemšanai un izpēšanai. Smearsafe™ ir izstrādājis Typenex Medical.

