




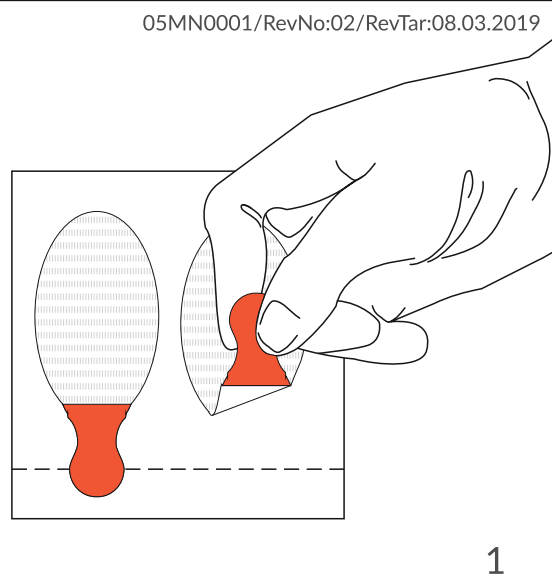

1

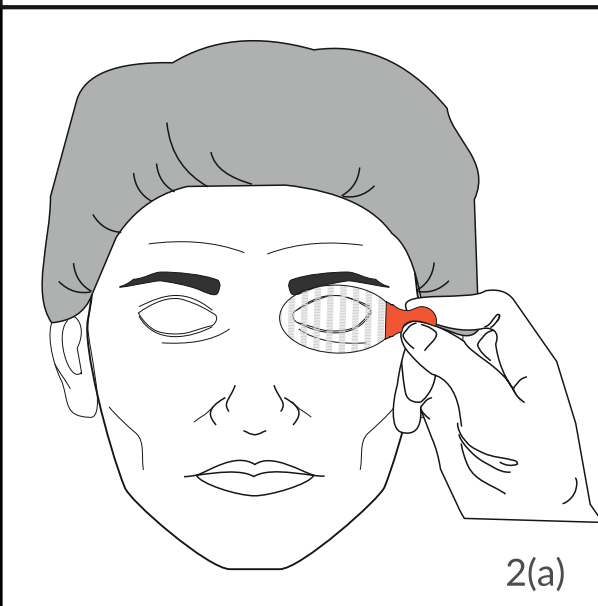

2(a)

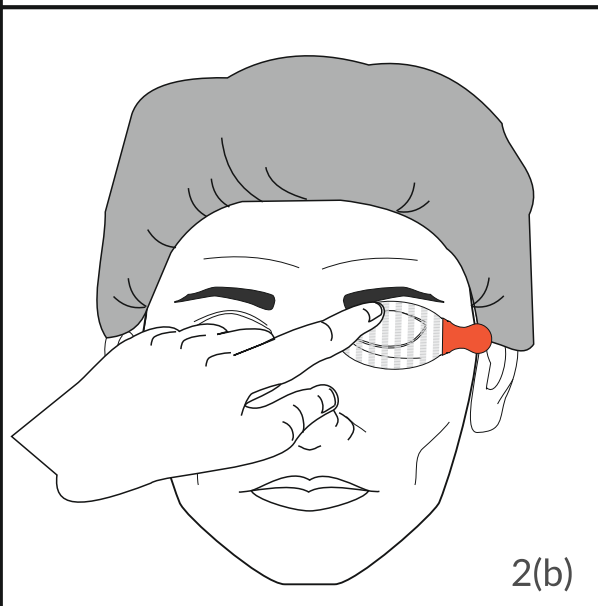

2(b)

EN Eye Safety Tape

Intended Use:

Eye safety Tape is used for covering the eyes during surgeries while patient is under general anaesthesia.

Directions for use:

1. Hold Eye Safety Tape by the red handle and remove from the protective film.
- 2(a-b). Place Eye Safety Tape by centering on the closed eye with the handle on the outside. Press lightly only along the outer edge.

Augenschutzpflaster DE

Verwendungszweck:

Das „Eye Safety Tape“ dient zur Abdeckung der Augen während Operationen, wenn sich der Patient in Vollnarkose befindet.

Gebrauchsanweisung

1. Eye Safety Tape an der roten Griffflasche fassen und von der Schutzfolie abziehen
- 2(a-b). Eye Safety Tape mit der Lasche nach außen, möglichst zentriert auf dem geschlossenen Auge platzieren und nur den Außenrand entlang leicht andrücken

FR Protection oculaire adhésive

Utilisation:

La protection, Eye Safety Tape, est utilisée pour couvrir l'oeil du patient lors d'une anesthésie générale.

Mode d'emploi:

1. Saisir la protection oculaire par la languette rouge et retirez la feuille de protection.
- 2(a-b). Placez la protection oculaire en la centrant sur l'oeil fermé, la languette rouge à l'extérieur. Appuyer légèrement seulement sur les bords.

Göz Koruma Bandı TR

Kullanım Amacı:

Göz koruma bandı, hasta genel anestezi altındayken ameliyat esnasında gözleri kapatmak için kullanılır.

Kullanım Talimatları:

1. Göz koruma bandını kırmızı tutma yerinden tutup koruyucu filminden ayırınız.
- 2(a-b). Göz Koruma Bandını kırmızı tutma yeri dışarıda kalacak şekilde kapalı gözün üzerine ortalayarak yerleştiriniz. Sabitlemek için bandın çevresine hafifçe bastırınız.”