



Oxivir Excel

Détergent désinfectant à large spectre pour les surfaces non poreuses

Description




Diversey Oxivir Excel nettoie et désinfecte en une seule étape. Il a un large spectre avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accéléré. Il s'utilise sur les surfaces dures, non poreuses.

Propriétés principales

- Bactéricide, Virucide, Levuricide
- Désinfecte dès 30 secondes (se référer au résumé d'activité désinfectante)
- Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces
- Sans parfum
- Les actifs se décomposent en eau et en oxygène

Bénéfices

- Son efficacité à large spectre apporte les plus hauts niveaux de protection aux patients/ résidents. Testé selon les normes européennes de désinfection contre de multiples pathogènes, avec une revendication virucide complète Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus, efficace contre tous les virus enveloppés selon la norme EN14476.
- Un temps de contact court qui garantit l'efficacité désinfectante
- Excellent pouvoir détergent
- Sécurité d'utilisation pour le personnel, les patients, visiteurs, non irritant pour les yeux et la peau
- Formulation AHP douce pour les surfaces pour étendre leur durée de vie
- Convient à l'utilisation dans les zones à hauts risques infectieux

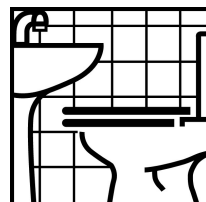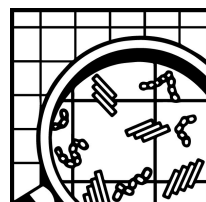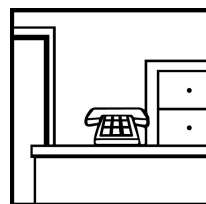

© A.I.S.E



Oxivir Excel

Mode d'emploi

Pour un dosage optimal* selon la désinfection souhaitée, veuillez vous référer au tableau fourni en page suivante, ainsi qu'au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.

Méthode spray et désinfection des surfaces:

1. Enlever les salissures résiduelles
2. Pulvériser sur une lavette et nettoyer la surface
3. Laisser agir **

Laisser sécher à l'air libre Méthode seau et désinfection des sols:

1. Enlever les salissures résiduelles
2. Appliquer la solution à l'aide d'une microfibre ou d'un mop
3. Laisser agir **
4. Laisser sécher à l'air libre

Compatible avec l'utilisation d'une lavette à usage unique (Dry Wipes) - recommandé pour la détergence et désinfection des dispositifs médicaux:

1. Préparer les lavettes à usage unique selon les instructions
2. Enlever les salissures résiduelles
3. Utiliser la lavette pour nettoyer la surface. Laisser agir **
4. Après le temps de contact recommandé pour la désinfection souhaitée, rincer la surface si nécessaire (dispositifs médicaux) et laisser sécher à l'air libre
5. Changer de lingette quand elle est souillée ou quand vous changez de surface à nettoyer

** Assurez-vous que la surface reste humide pendant la durée du temps de contact recommandé pour la désinfection.

Données techniques

Valeur pH (pur): = < 2

Valeur pH (en solution): < 2 (5%)

Densité relative (20°C): ≈ 1.07

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Selon les recommandations d'utilisation, Diversey Oxivir Excel convient à tous les matériaux traditionnellement rencontrés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou à l'acide (particulièrement sur les aciers légers : cuivre, laiton, zinc, aluminium).

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.



Oxivir Excel

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
100941436	DI Oxivir Excel 2x5L W396	En général: dosage manuel

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/07/2024 fr-FR (K00259)