

Manual de instruções

Instruções Passo a Passo para Criar um Plano de Tratamento





DR ANNIE™ Insights


pt_BR

Version: 072025V3

Disponibilidade de Idioma

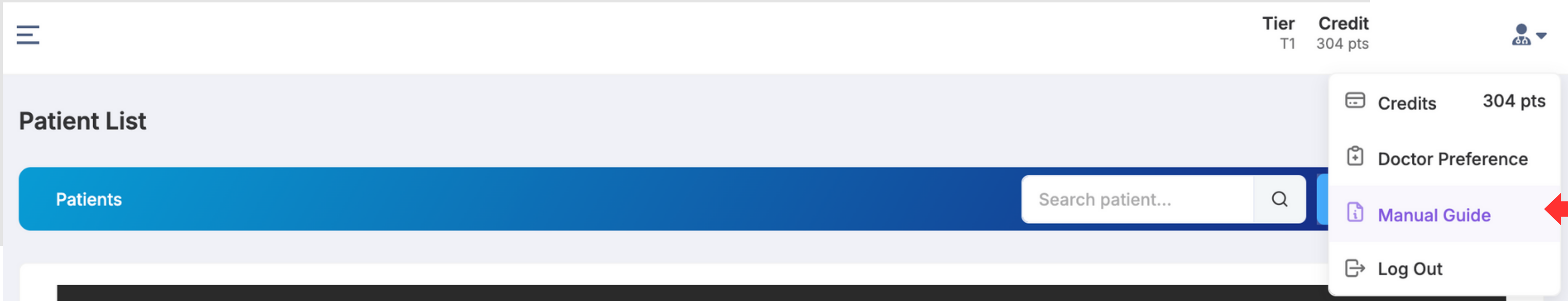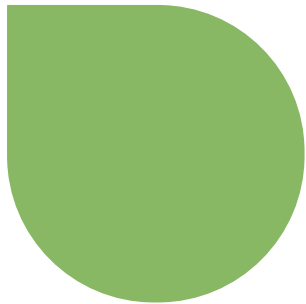

- Este documento está disponível em inglês, francês, alemão, italiano, português (Brasil) e espanhol (México).
- Para acessar o manual, clique no ícone no canto superior direito e role para baixo até “Guia do Manual”.
- Selecione a versão que melhor corresponde ao seu idioma preferido.

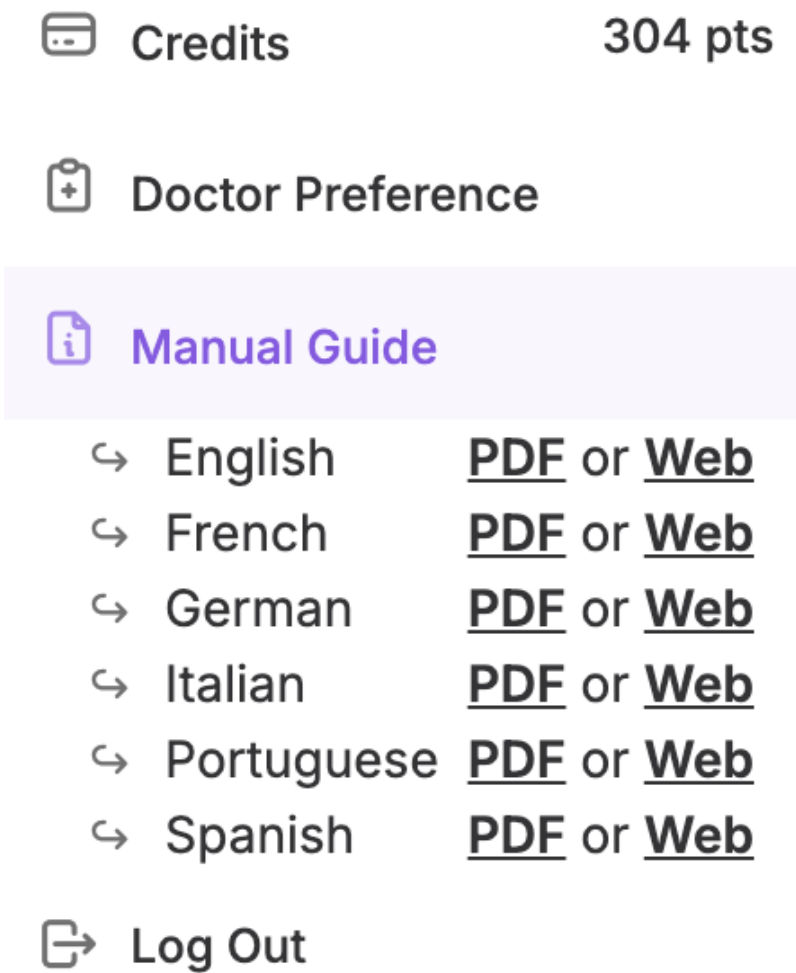

Conteúdo




DR. ANNIE™ INSIGHTS

Here to provide personalized assistance and guidance to help you address any dental concerns you may have.

- ✓ AI Dental Findings
- ✓ Report Generating
- ✓ Timepoint Feature
- ✓ AnnieInsight+

- 01 Log In
- 02 Navegar pela Página Inicial
- 03 Criar um Novo Perfil de Paciente
- 04 Editar Perfil do Paciente
- 05 Criar Timepoint
- 06 Fazer Upload de Imagens Intraorais
- 07 Fazer Upload de Imagens Extraorais
- 08 Editar o Odontograma
- 09 Fazer Upload de Imagens X-Ray e do Formulário HLD
- 10 Revisar e Verificar as Conclusões da AI
- 11 Gerar o Report
- 12 Revisar os Reports
 - ~ Tier
 - ~ User Credit
 - ~ Pricing & Tier Upgrade Guidelines
 - ~ Usage History
 - ~ Top Up
 - ~ Patient Case Search
 - ~ Doctor Preference
 - ~ Sample Case

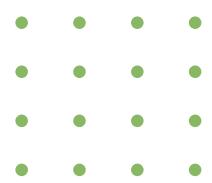

Step 1: Log In / Entrar (1)

01

Acesse iSmartDDS.com no seu navegador para entrar na plataforma DR. ANNIE™ Insights. A página de login será exibida.


02

Selecione sua opção de login preferida:


- **SIGN IN WITH GOOGLE**
- **EMAIL & PASSWORD**

03

Se preferir se registrar e usar a DR. ANNIE™ sem uma conta do Google, por favor clique no link "Create an account here" (veja a seta vermelha). Isso o levará ao [iSmartOffice registration portal](#). Consulte a próxima página para mais detalhes.

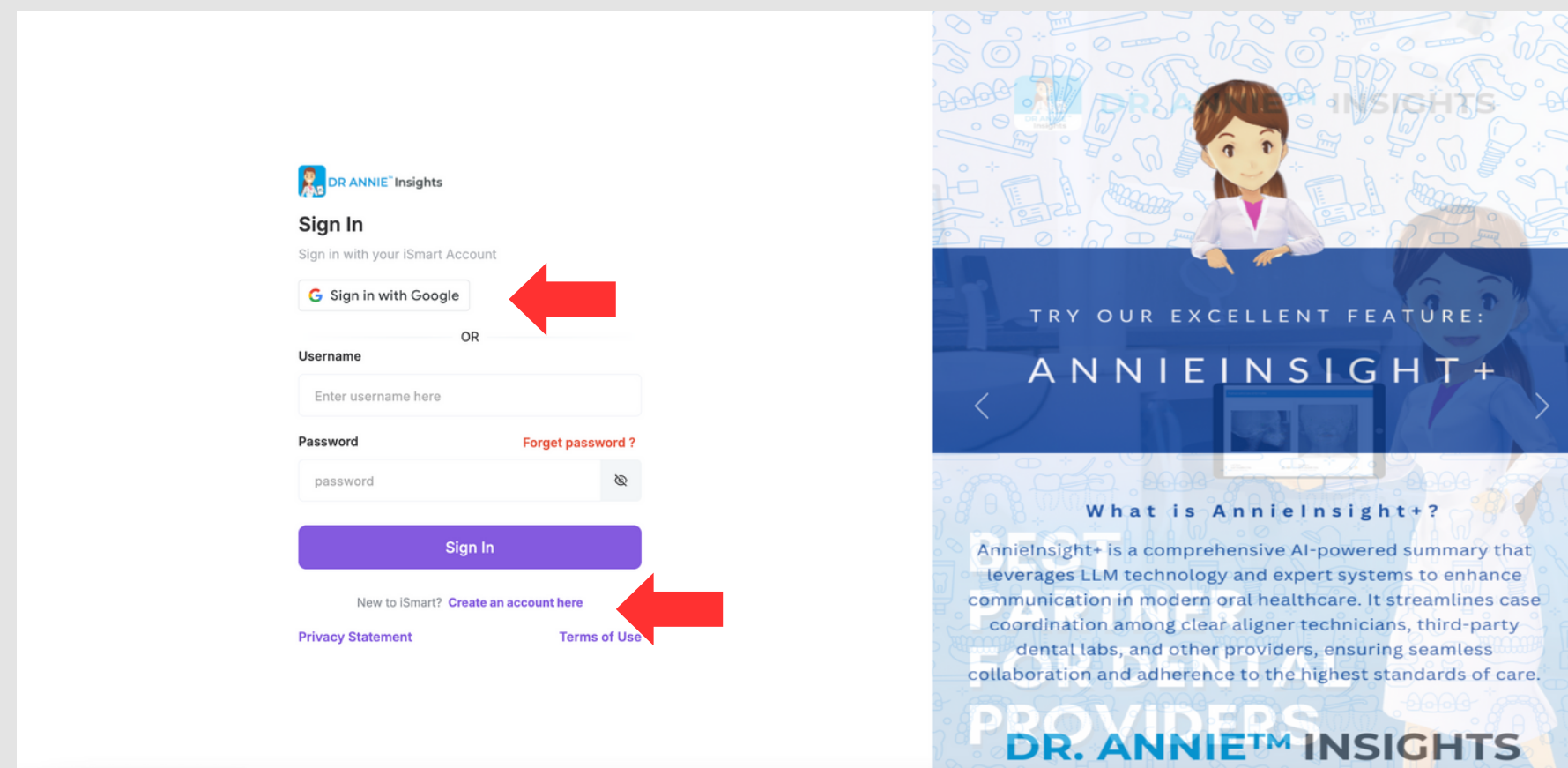

Continue...

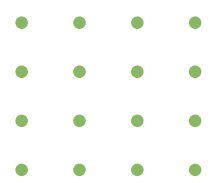

Step 1: Log In / Entrar (2)

04

Digite as informações necessárias neste formulário de registro. Depois que todas as informações estiverem corretas, por favor clique no botão de registro para continuar.

05

Por favor, confirme o registro através do e-mail fornecido. Uma vez confirmado, a conta estará pronta para uso.

The screenshot shows the 'iSmartOffice - Provider' registration page. At the top, there is a search bar and links for 'Register' and 'Login'. The main section is titled 'PROVIDER REGISTRATION FORM' and contains several input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Username' (with a hint 'Use email address as your username'), 'Password', 'Retype Password', and 'Referral Code' (with a hint 'if any'). At the bottom right, there are two buttons: 'Back' (orange) and 'Register' (blue). A red arrow points to the 'Register' button. In the bottom right corner, there is a red circular icon with a white bell.




Step 2: Navigate the Home Page / Navegar pela Página Inicial

01

Após fazer login, a página inicial
exibe duas seções principais:

- **LEFT: ACTIVE & ARCHIVE PATIENT**
- **CENTER: PATIENT LIST**

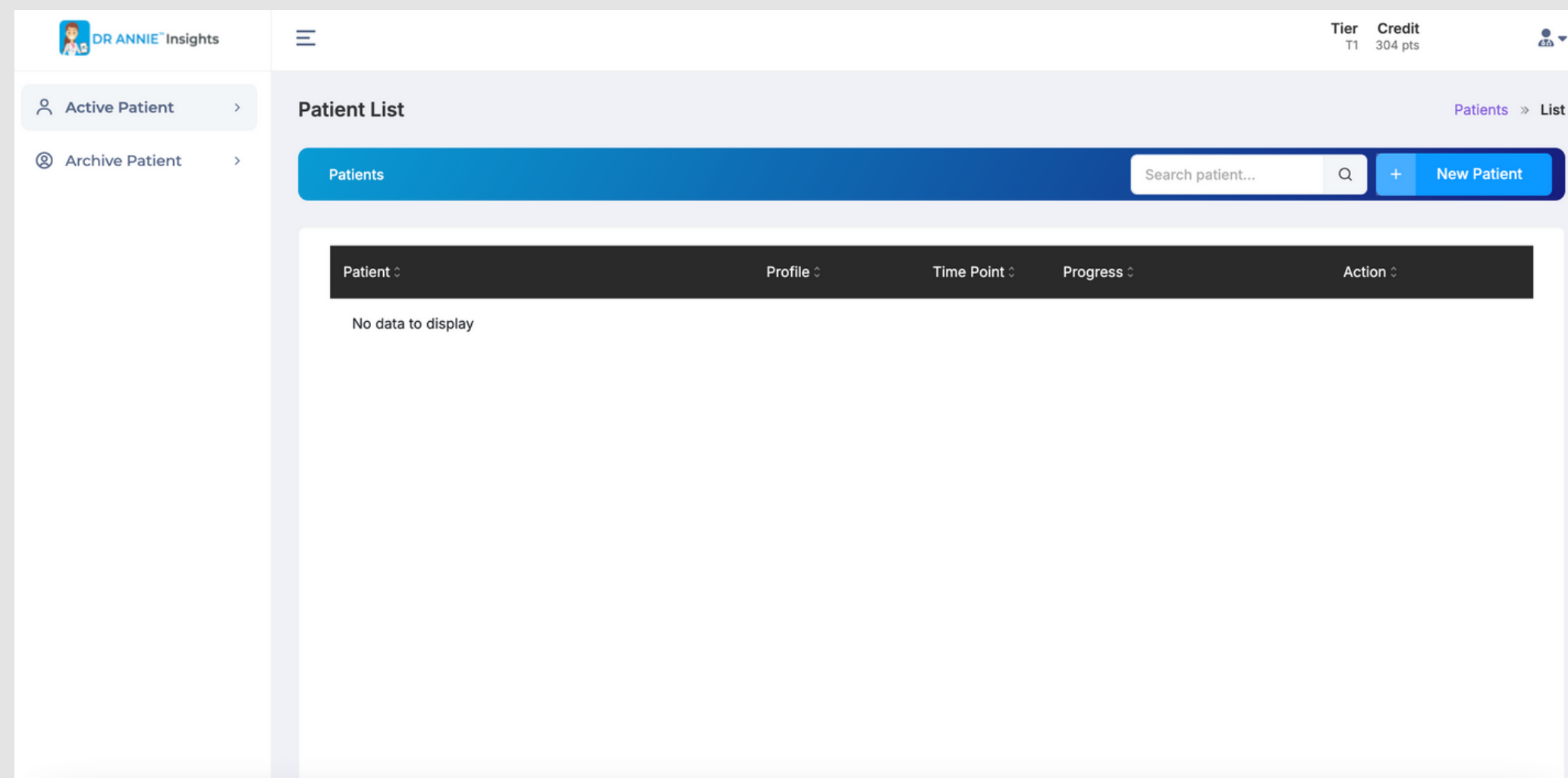

Step 3: Create a New Patient Profile / Criar um Novo Perfil de Paciente

01

Clique em 'New Patient' (veja a seta vermelha).

Antes de adicionar o nome do paciente, primeiro adicione um crédito para que a DR. ANNIE™ possa continuar o processo de análise.

Para mais detalhes, consulte a seção [User Credit & Pricing](#).

02


Digite os detalhes necessários.

03


Reveja e reconheça a HIPAA Compliance Policy.

04

Clique em 'Submit' para salvar o perfil.

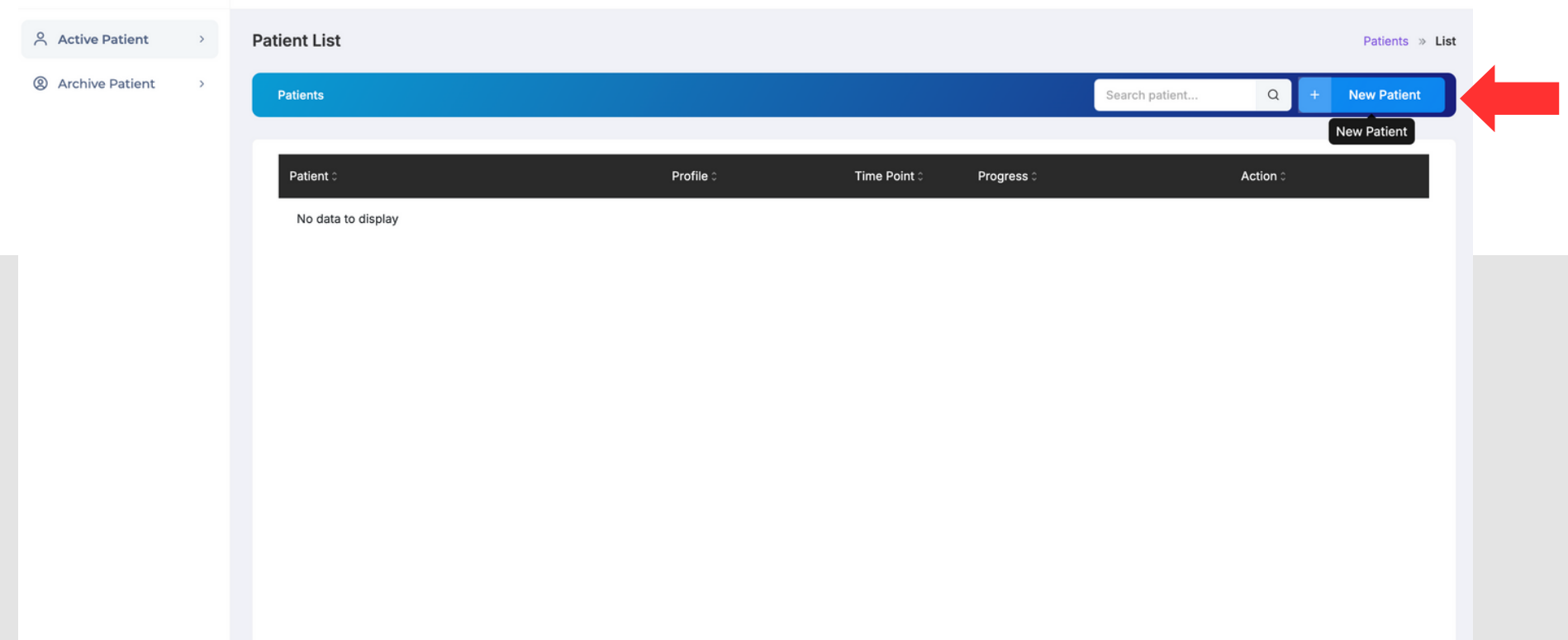

The screenshot shows the 'Patient List' interface. On the left, there are tabs for 'Active Patient' and 'Archive Patient'. The main area has a search bar and a 'New Patient' button, which is highlighted with a red arrow. Below the search bar, there is a table with columns: Patient, Profile, Time Point, Progress, and Action. The table is currently empty, showing 'No data to display'.

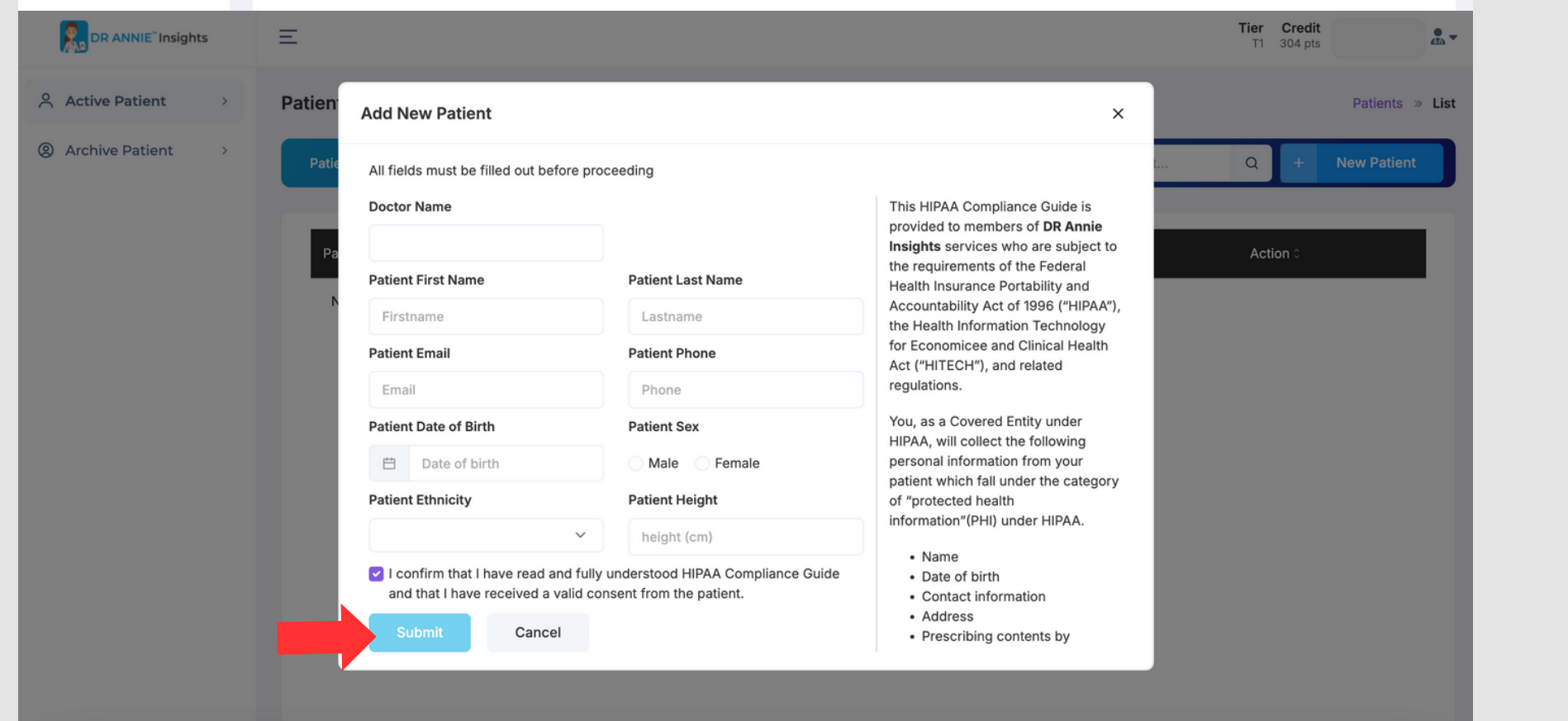

The screenshot shows the 'Add New Patient' form. It includes fields for Doctor Name, Patient First Name, Patient Last Name, Patient Email, Patient Phone, Patient Date of Birth, Patient Sex, Patient Ethnicity, and Patient Height. A red arrow points to the 'Submit' button. The form also includes a checkbox for HIPAA compliance and a list of collected information: Name, Date of birth, Contact information, Address, and Prescribing contents by.

Step 4: Edit Patient Profile / Editar Perfil do Paciente

01



Clique no nome do paciente no canto médio-esquerdo (veja a seta vermelha).

02

Edite as informações necessárias.

03

Clique em 'Submit' para salvar ou em 'Cancel' para voltar.

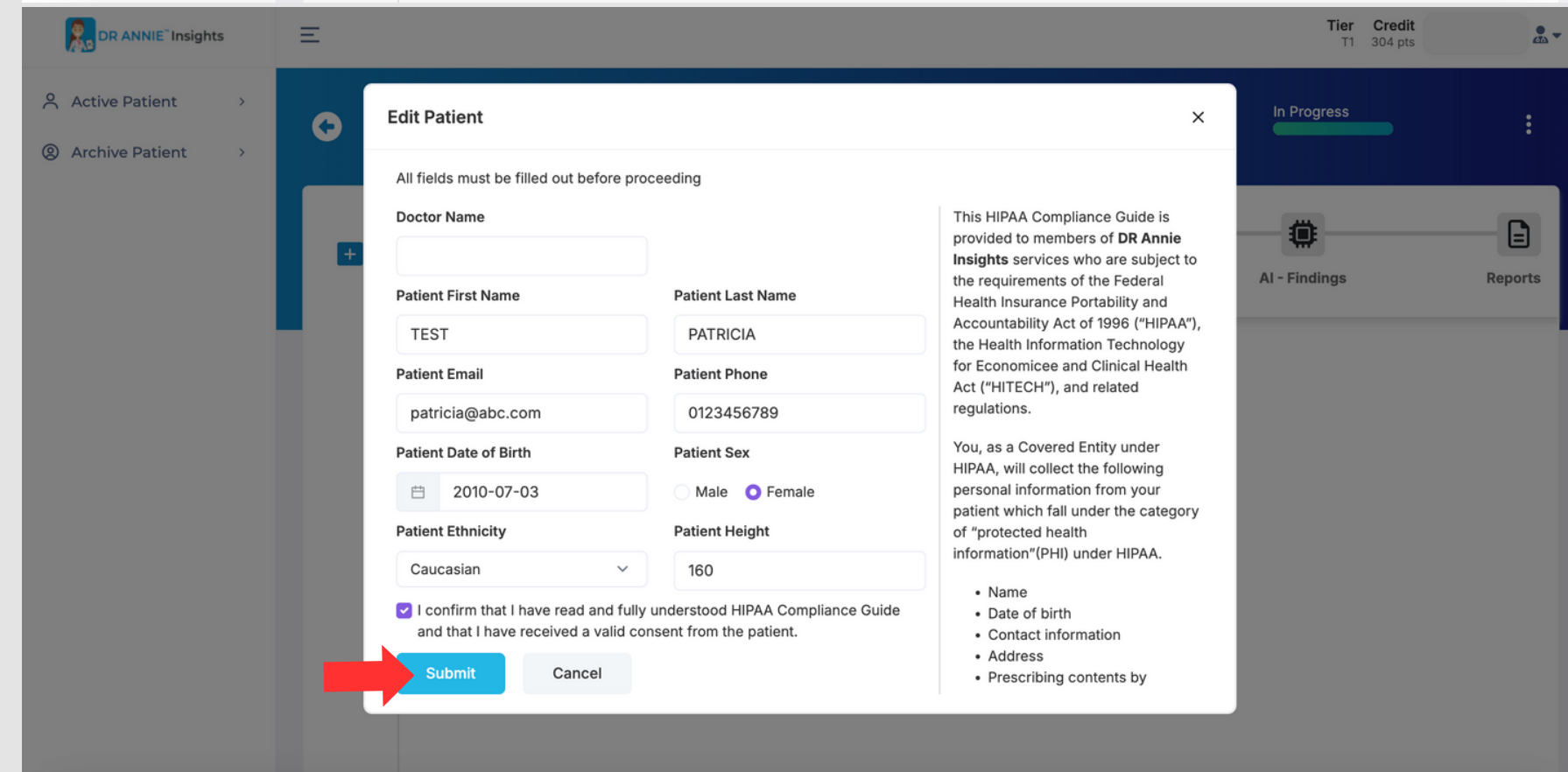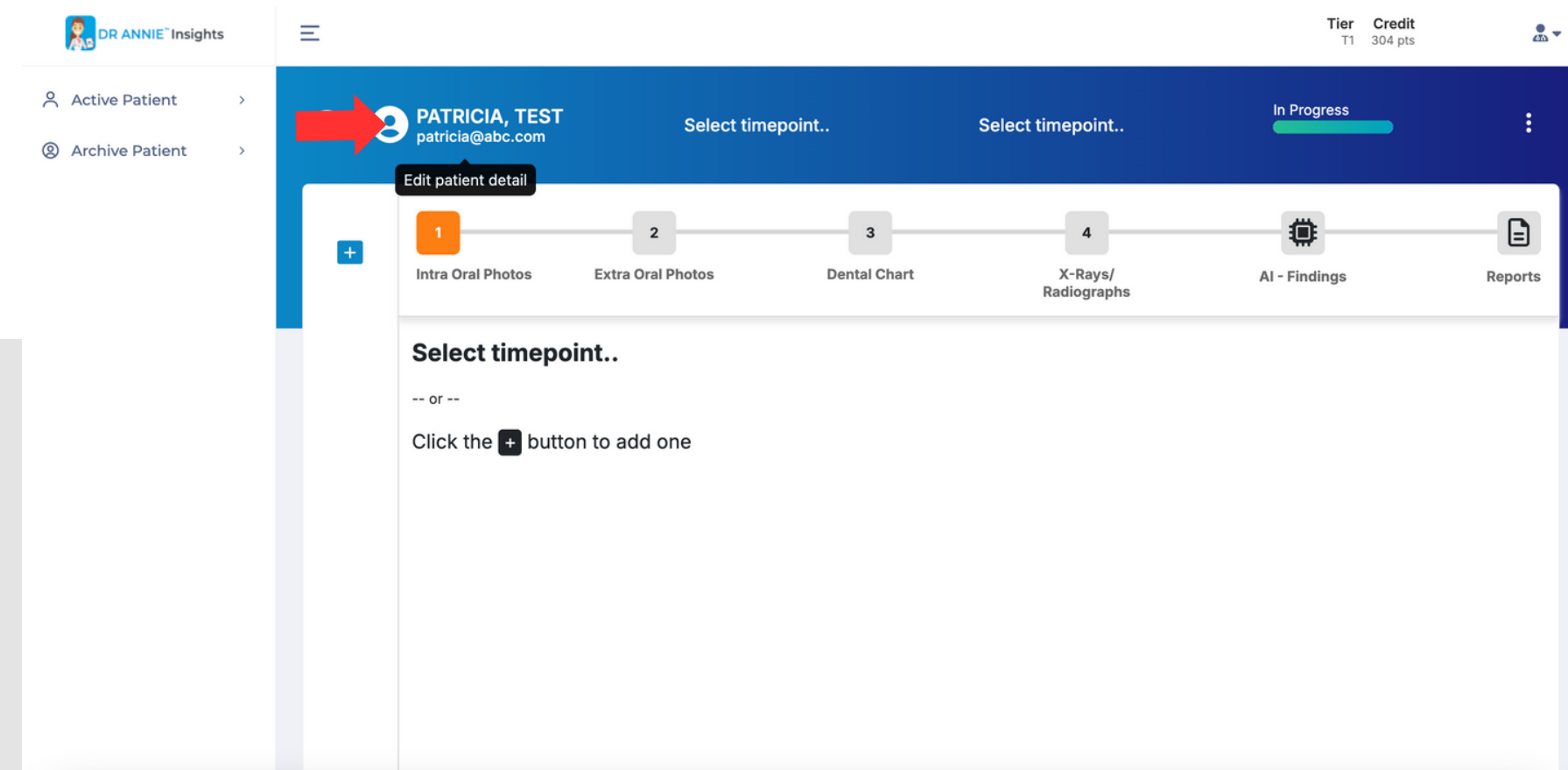

Step 5: Create Timepoint / Criar Timepoint



01

Antes de criar um novo caso ou timepoint, certifique-se de verificar as configurações de Doctor Preference.

Esta página mostra o tratamento e as ferramentas preferidas que serão usadas como padrão para gerar os reports dos seus casos.

Consulte a página **'Doctor Preference'** para mais detalhes.

02



Clique no botão '+ New Timepoint' para criar um novo timepoint (veja a seta vermelha).

03

Insira os dados obrigatórios. Clique em 'Save' para criar o timepoint e clique em 'Close' para voltar.

Observação:

- Você também pode criar mais de 1 timepoint.
- Certifique-se de ter crédito suficiente para criar um novo timepoint.
- Se a data do timepoint recém-adicionado for anterior à existente, o report do timepoint atual será removido. No entanto, não se preocupe — você pode regenerar o report a qualquer momento.

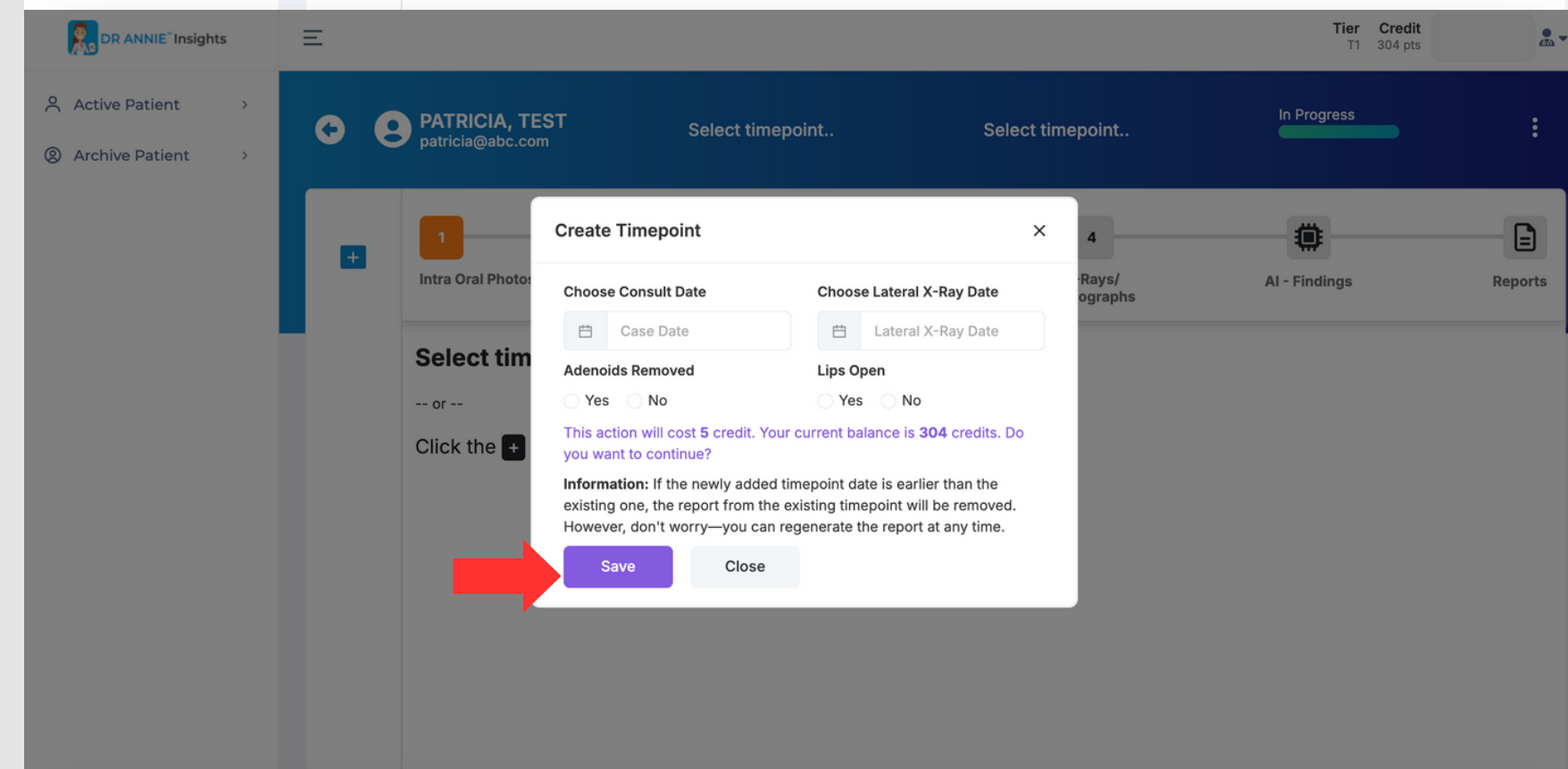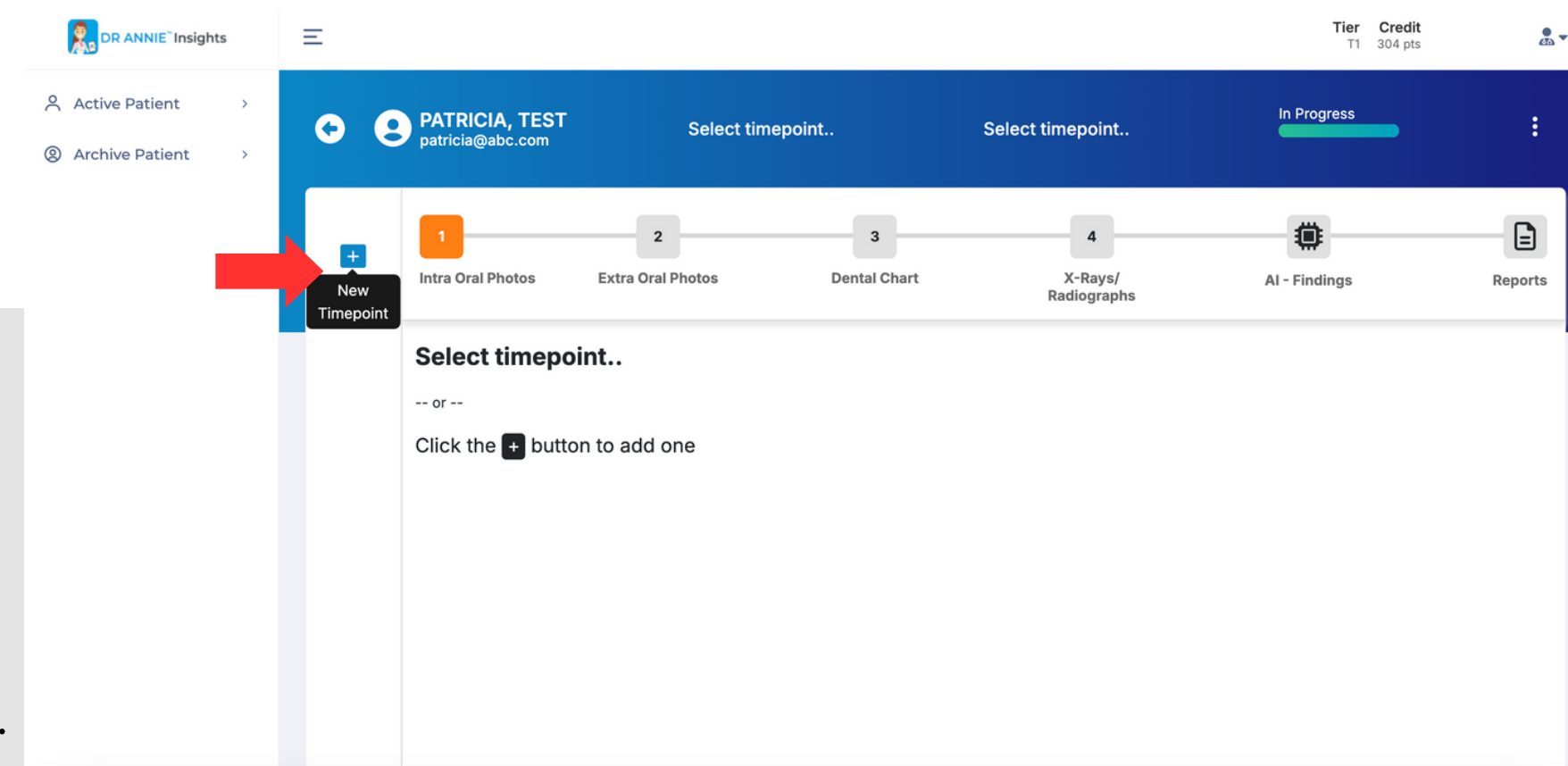

Step 6: Upload Intra-oral Images / Fazer Upload de Imagens Intraorais

01

Clique na caixa de upload para fotos intraorais. Arraste e solte os arquivos na área designada ou clique para selecioná-los manualmente.

02



Certifique-se de que as imagens atendam às especificações exigidas (por exemplo, tamanho e nitidez) para permitir um reconhecimento preciso pela AI.


03

As funções de Zoom, Rotacionar, Inverter e Redefinir estão disponíveis, se necessário.

04

Após o upload de todas as imagens obrigatórias, clique em 'Next' para continuar. Esta etapa é obrigatória, e os usuários não podem prosseguir sem concluí-la.

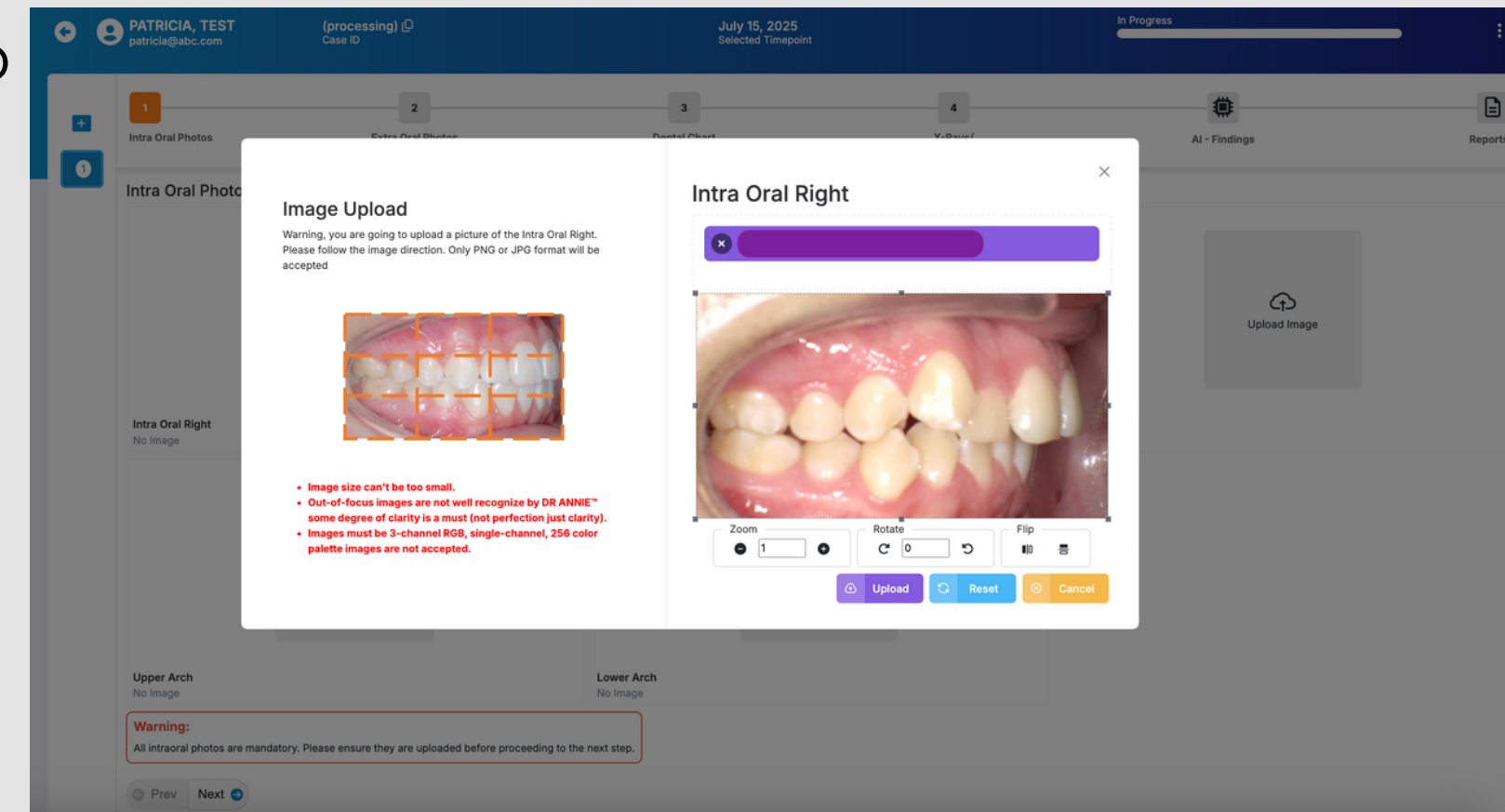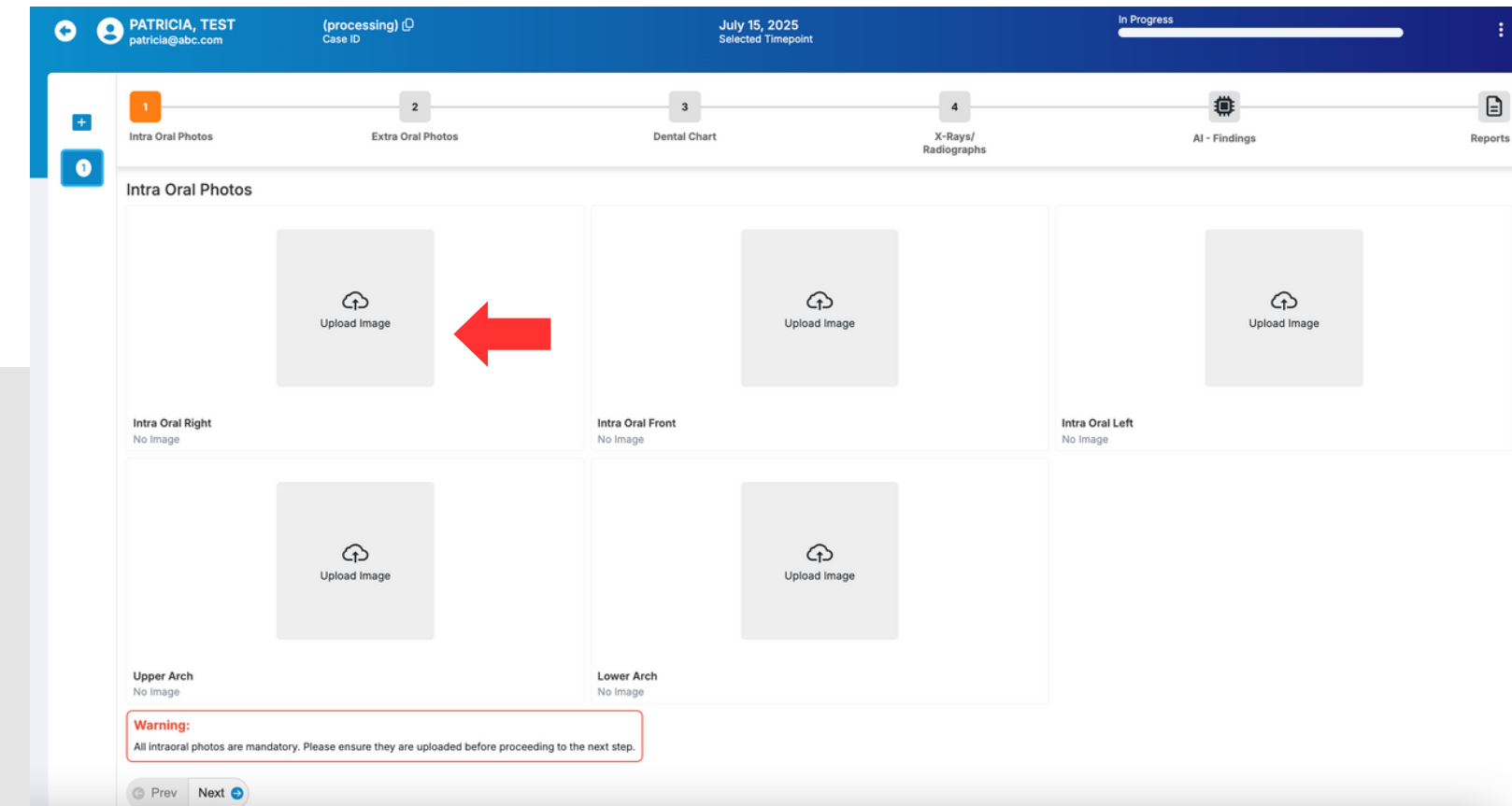

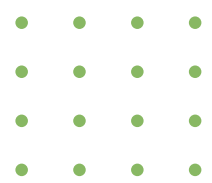


Step 7: Upload Extra-oral Images / Fazer Upload de Imagens Extraorais

01

Na próxima tela, faça o upload das fotos extraorais.

02

Esta etapa é opcional; você pode clicar em 'Next' se não for necessária.

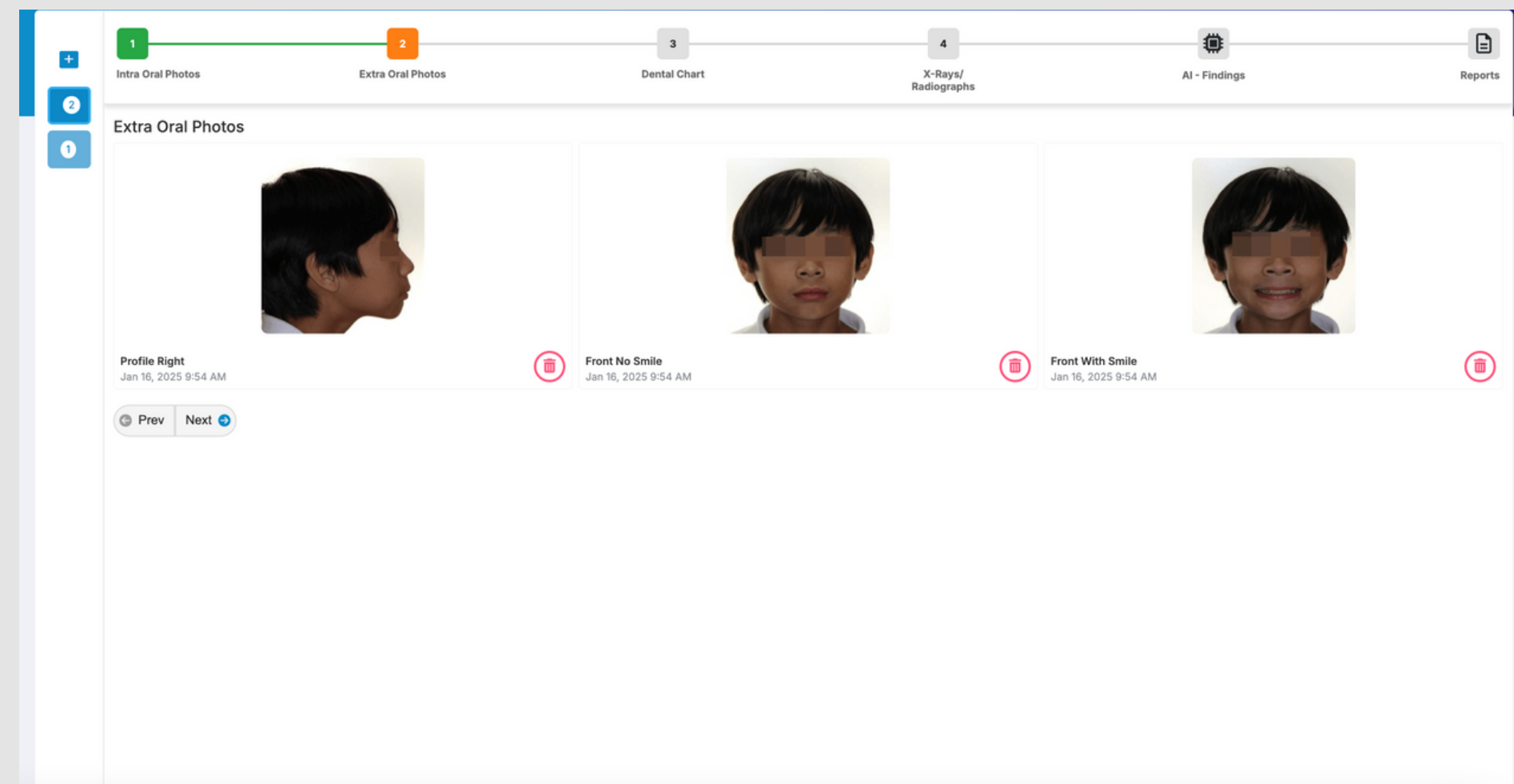



Step 8: Edit Dental Chart / Editar Prontuário Odontológico

01

Clique nos botões Upper e Lower Arch (incluindo os quadrantes direito e esquerdo) para preencher as informações obrigatórias.

02

Ajuste a condição dos dentes (permanentes e decíduos) a serem analisados no odontograma. Isso afetará os resultados da análise da DR ANNIE™.

03

O Sequence Worksheet não estará disponível se houver ausência de algum primeiro molar ou incisivo central.

04

Esta etapa é opcional; você pode clicar em 'Next' se não for necessária.

Dental Chart

Upper Arch

Upper Right Quadrant

Upper Left Quadrant

Permanent Teeth

Deciduous Teeth

Lower Arch

Lower Right Quadrant

Lower Left Quadrant

T01 :
T02 :
T03 :
T04 :
T05 :
T06 :
T07 :
T08 :
T09 :
T10 :

Disclaimer:
• Certain dental condition, such as extreme missing teeth or anomalies, may not be accurately detected by the current version of our AI engine. Verification by a doctor is needed.
• Please note: Sequence Worksheet report will not be available if there are missing 1st molar(s) OR missing central incisor(s).

Prev Next

Dental Chart

Upper Arch

Upper Right Quadrant

Upper Left Quadrant

Permanent Teeth

Deciduous Teeth

Lower Arch

Lower Right Quadrant

Lower Left Quadrant

Arch Parameter

Single Arch Parameters

☒ None
☐ Partial denture
☐ Complete denture
☐ Denture cleaning
☐ Orthodontic

Save Cancel

Tooth Status - Permanent - 01

Adult No. 01

Tooth Parameter

☒ None
☐ Missing (this option will be used on report generation)
☐ Extraction needed
☐ Restoration crown needed

Mesial
☐ Caries
☐ Filling

Distal
☐ Caries
☐ Filling

Buccal
☐ Caries
☐ Filling

Lingual/Palatal
☐ Caries
☐ Filling

Occlusal
☐ Caries
☐ Filling

Save Cancel

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / Carregar Imagens de Raios-X e Formulário HLD (1)

01

Faça upload das seguintes imagens de raio-X:

- **LATERAL X-RAY**
- **FRONTAL X-RAY (OPTIONAL)**
- **PANORAMIC X-RAY (OPTIONAL)**

02

O upload da imagem lateral do raio-X é obrigatório, pois é necessário para gerar o relatório.

Continue...

1 2 3 4 5 6

Intra Oral Photos Extra Oral Photos Dental Chart X-Rays/Radiographs AI - Findings Reports

X-Rays / Radiographs

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 9:54 AM

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 2:52 AM

Dental Panoramic
Jan 16, 2025 9:55 AM

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / Carregar Imagens de Raios-X e Formulário HLD (2)

Warning: The automated HLD calculation will only work if you have uploaded the lateral image, frontal image, panoramic X-ray, and upper & lower arch images. Please ensure all required images are uploaded before proceeding with the form.

3

HLD Form

HLD Summary

===== HLD Summary =====

1. Is there an impacted maxillary central incisor? : No
2. What is the condition of the patient oral hygiene? : Good
3. Does the patient does have any dental deformity? : No
Detail :
4. Does the patient have any traumatic deviations? : No
Detail :

4

← Prev

Next →

HLD Form

Is there an impacted maxillary central incisor?

☒ No ☐ Yes

What is the condition of the patient's oral hygiene?

☐ Poor ☒ Good ☐ Excellent

Does the patient have any dental deformity?

☒ No ☐ Yes

Please describe the dental deformity in detail, if present.

Does the patient have any severe traumatic deviations?

☒ No ☐ Yes

If applicable, provide a brief description of the severe traumatic deviations.

Does the patient have surgical malocclusion?

☒ No ☐ Yes

What is the number of ectopic eruption teeth present?

0

Is there a posterior crossbite, and does at least one of the affected teeth have to be a molar?

☒ No ☐ Yes

Cancel

Save

03

Clique em 'HLD Form' para editar, depois clique em 'Save' para aplicar as alterações.

O cálculo automatizado do HLD só funcionará se você tiver feito o upload da imagem lateral, imagem frontal, radiografia panorâmica (X-ray) e imagens dos arcos superior e inferior. Certifique-se de que todas as imagens obrigatórias foram enviadas antes de continuar com o formulário.

04

Clique em 'Next' para revisar as conclusões da AI.

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar e Verificar as Conclusões da AI (1)


01

A página AI-Findings exibe os resultados das detecções feitas pela AI com base nas imagens e informações que você enviou anteriormente, incluindo as seções Intraoral, Extraoral, Panoramic Radiographs, Cephalometric (Lateral e Frontal) e Dental Arch (Upper e Lower).

02

A AI pode levar um ou dois minutos para concluir a análise e identificar os achados dentários.

Continue...

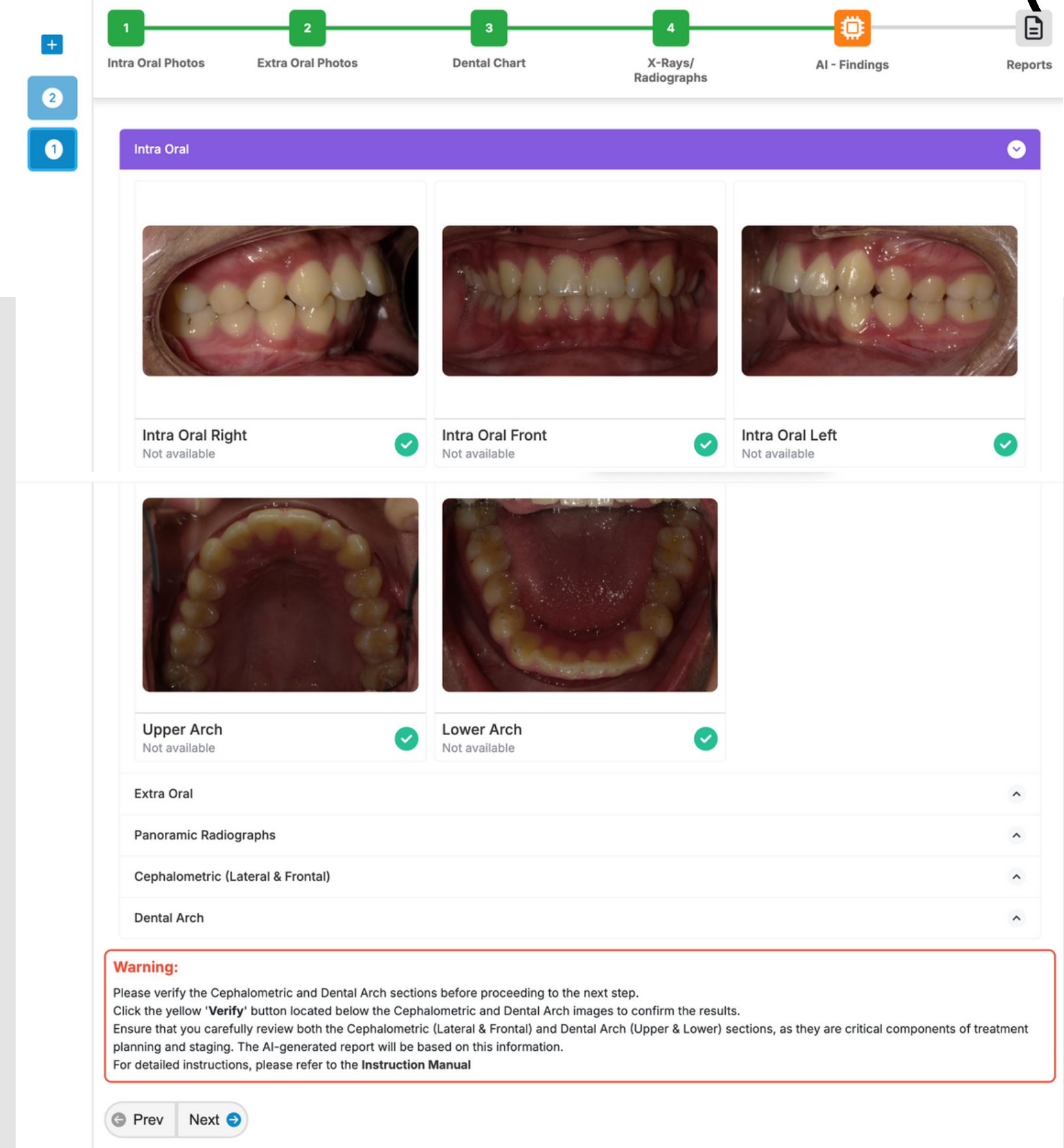

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar e Verificar as Conclusões da AI (2)

03


Role a página para baixo para encontrar as seções Cephalometric e Dental Arch. Por favor, verifique ambas as seções.

04

Clique no botão amarelo 'Verify' abaixo das imagens Cephalometric e Dental Arch para confirmar os resultados (veja a seta vermelha).

Por favor, revise as seções Cephalometric (Lateral e Frontal) e Dental Arch (Upper e Lower).

Continue...

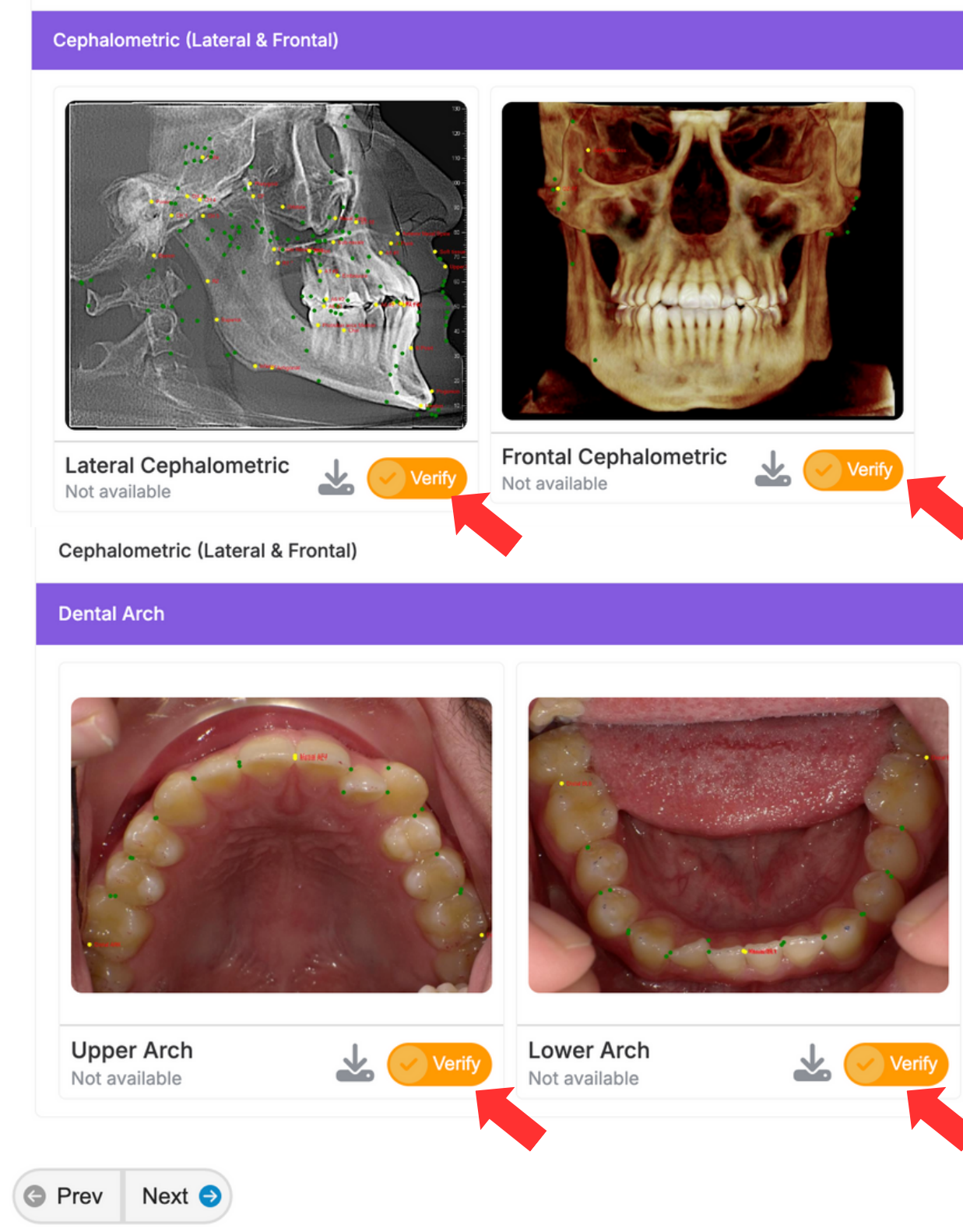

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar e Verificar as Conclusões da AI (3)

05

Após clicar no botão 'Verify' abaixo de Lateral Cephalometric, a tela aparecerá conforme mostrado.

Revise manualmente os pontos detectados pela AI para garantir a precisão. Você pode arrastar e soltar os pontos conforme necessário.

As instruções estão disponíveis no canto inferior esquerdo. Você também pode ampliar e reduzir a imagem durante a digitalização usando o mouse.

As diretrizes de digitalização aparecerão no canto superior direito ao clicar em qualquer um dos pontos, para sua referência.

Continue...



Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar e Verificar as Conclusões da AI (4)



06


Use os recursos na barra superior — como Reset Process, API Template Percentage e os controles deslizantes de Contrast e Brightness — conforme necessário.

- Reset Process: Permite reiniciar se você quiser refazer a digitalização.
- API Template Percentage: Se a AI não conseguir gerar resultados precisos ou se alguns pontos estiverem ausentes, use o template de 60% ou 70% até que a AI detecte os pontos corretamente. Ajuste a porcentagem conforme necessário.
- Contrast e Brightness Sliders: Ajuste esses controles para melhorar a visibilidade da imagem e destacar detalhes importantes.

07

Depois de concluir a revisão dos pontos, clique no botão verde 'Save' no canto superior esquerdo (veja a seta vermelha). Em seguida, clique no botão com a seta amarela para voltar.

Continue...

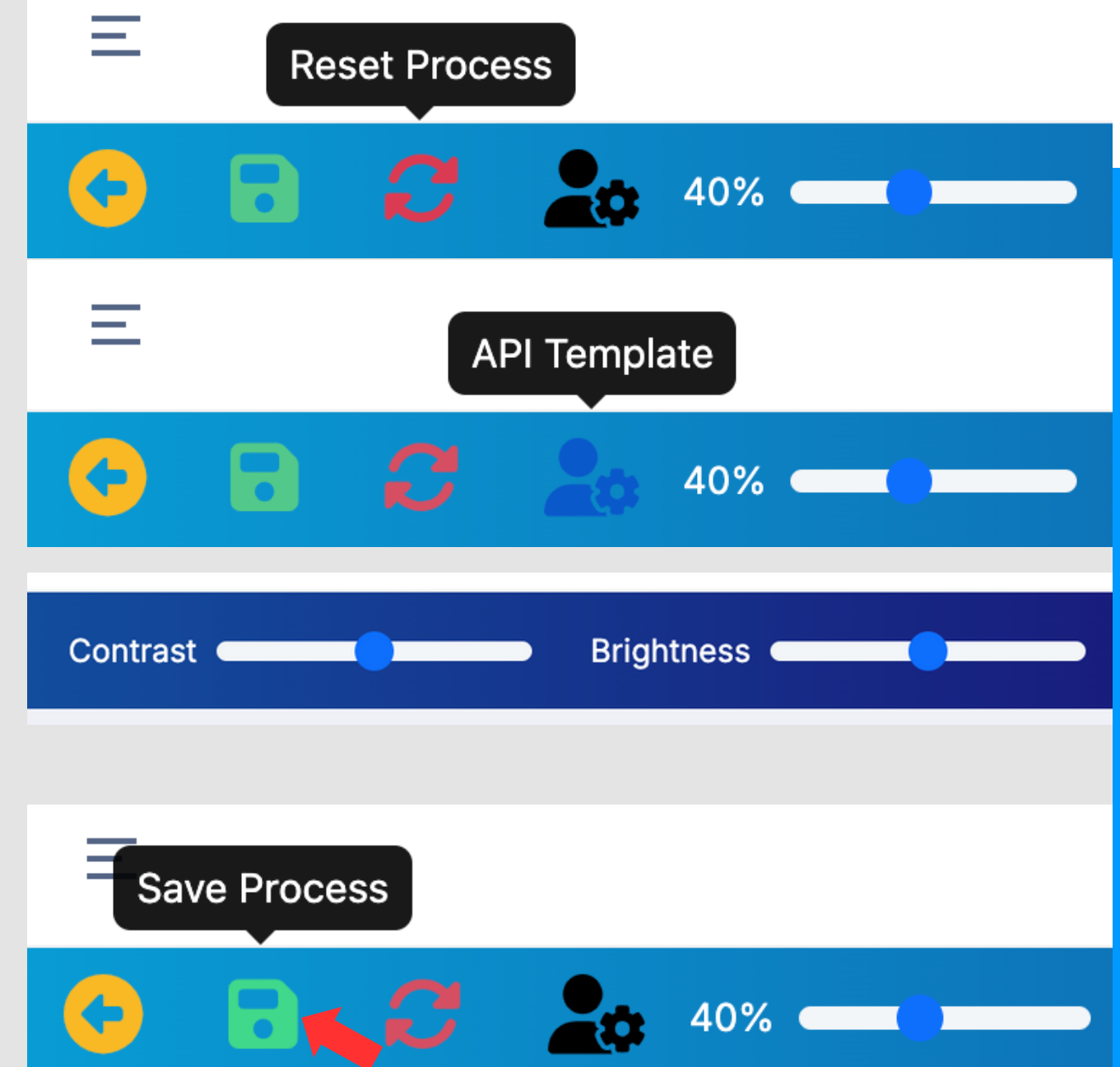

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar e Verificar as Conclusões da AI (5)

08

Depois de concluir a etapa 'Verify' para a imagem, o botão mudará para o ícone amarelo 'Check'.

09

Certifique-se de 'Verify' (ou revisar) tanto as seções **Cephalometric (Lateral e Frontal)** quanto **Dental Arch (Upper e Lower)** antes de continuar, pois são componentes essenciais para o planejamento e a fase do tratamento. O report gerado pela AI será baseado nessas informações.


10

Depois de concluir o processo de verificação, clique em 'Next' para gerar o report.
Lembre-se de que não é possível avançar para a próxima etapa sem verificar ambas as seções.


Verified



Cephalometric (Lateral & Frontal)

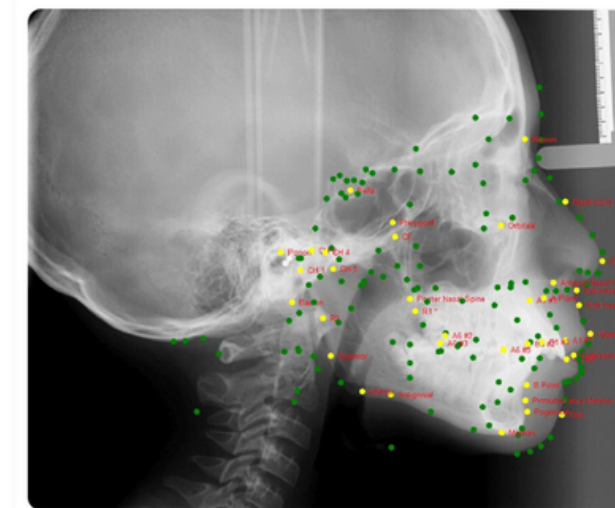

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 10:04 AM

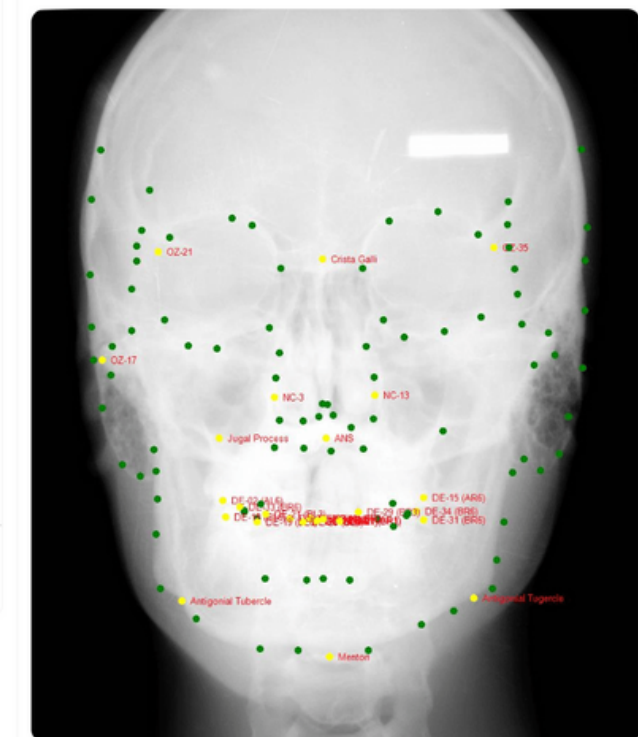

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 4:08 AM



Dental Arch

Prev Next



Step 11: Generate the Report / Gerar o Relatório (1)



Os relatórios têm 4 camadas:

Report	Required	Details
Standard	Lateral cephalometric image and intraoral photos	• Fornece um relatório básico com aproximadamente 70% de precisão • Adequado para avaliações rápidas • Relatório gerado em 2–3 minutos
Standard+	Lateral cephalometric image, intraoral photos, and panoramic X-ray	• Oferece um relatório mais detalhado, incluindo o nível de dificuldade do caso e o estágio do tratamento • Precisão em torno de 80% • Relatório gerado em 3–5 minutos
Complete	Lateral and frontal cephalometric images, panoramic X-ray, and intraoral photos	• Ideal para casos com mordida cruzada ou assimetria facial • Fornece uma análise detalhada com 85–90% de precisão e estágio do tratamento • Relatório gerado em 5–8 minutos, dependendo da complexidade
VIP	Para casos complexos, como aqueles com multiple missing teeth, supernumerary teeth, congenital anomalies ou surgical needs.	• Revisado tanto pela AI quanto por ortodontistas especialistas • Relatório disponível em 1–3 dias (não em tempo real) • Projetado para o planejamento de tratamentos altamente complexos

Step 11: Generate the Report / Gerar o Relatório (2)

01

Selecione o tipo de report que deseja gerar:

- **STANDARD**
- **STANDARD+**
- **COMPLETE**
- **VIP**

Para o VIP Report, os usuários serão direcionados a uma página especial.

Essa página oferecerá serviços especializados, que serão realizados por médicos experientes.

02

É necessário, no mínimo, um lateral cephalogram X-ray e um lower dental arch verificados para gerar o Standard Report.

03

O Standard Report será gerado em 2 a 3 minutos, o Standard+ Report em 3 a 5 minutos e o Complete Report em 5 a 8 minutos.

Report Name	Date Create	Action
01 - Dental Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
02 - Problem List	Apr 28, 2025, 10:01	
03 - Treatment Rationale	Apr 28, 2025, 10:01	
04 - Case Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
05 - Dental Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
06 - Skeletal Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
The following reports are full comprehensive advanced reporting, will be available within 10-15 minutes. Thank you for your patience		
07 - Tracing Measurement	Apr 28, 2025, 10:02	
08 - Sequences Worksheet	Apr 28, 2025, 10:02	
09 - Full Comprehensive	Apr 28, 2025, 10:02	
10 - HLD Summary	Apr 28, 2025, 10:01	

Continue...

Step 11: Generate the Report / Gerar o Relatório (3)

04

Para o VIP Report Service, os usuários serão direcionados a uma página onde os dados são preenchidos automaticamente. Após revisar e confirmar que todas as informações estão corretas, envie a solicitação.

05

O report será processado pela AI e por um ortodontista especialista, com duração dependendo da complexidade do caso — normalmente de 1 a 3 dias. Um e-mail de notificação será enviado assim que o VIP Report for concluído.

Generate VIP Report

Patient Info

Patient First Name

TEST

Patient Last Name

Patient Email

Patient Phone

Patient Date of Birth

Patient Sex

F

Patient Ethnicity

CA

Patient Height (cm)

168

Intra Oral









Upper Arch

No Image



Lower Arch


No Image

X-Rays / Radiographs



Lateral Cephalometric

No Image

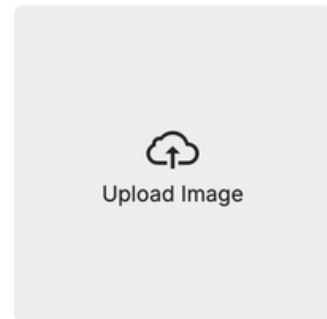

Frontal Cephalometric

No Image



Dental Panoramic

No Image

By continuing, you agree to the VIP Report processing fee and acknowledge that any previous report will be overwritten. Are you sure to submit the data?

Submit

Cancel



Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (1)

Cada report fornece informações detalhadas com diferentes níveis de precisão sobre a condição dental do paciente, incluindo:

1. DENTAL EVALUATION
2. PROBLEM LIST
3. TREATMENT RATIONALE
4. CASE EVALUATION
5. DENTAL FINDINGS
6. SKELETAL FINDINGS
7. TRACING MEASUREMENTS
8. SEQUENCES WORKSHEET
9. FULL COMPREHENSIVE ANALYSIS
10. HLD SUMMARY

Continue...

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (2)

01

Dental Evaluation

Este relatório fornece um resumo das avaliações, incluindo dental, orthodontic, periodontic, and restorative assessments, juntamente com uma estimativa de custos apresentada em forma de pontuação. Os achados dentários AI-detected também serão incluídos.

Por favor, note que todos os relatórios estão disponíveis para download em formato PDF (veja a seta vermelha).

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Evaluation Summary

Patient Name:

Evaluation Name:

Evaluation Date:
12 Jan 2025 v 1.0.0

A. Dental Evaluation:

Lower difficulty

B. Orthodontic (Tooth Alignment):

Some teeth alignment are needed (esthetic)

C. Periodontic (Gum Health):

Some dental/ oral hygiene maintenance is recommended

D. Restorative (Cavity or Fillings):

Some dental/ oral restoration is recommended (possible filling, cavities)

E. Cost Estimation:

The total cost estimation based on these assessment is 1 out of 4 (affordable)

Evaluated Image(s): 14 Image(s)

Analyzed Image(s): 1 Image(s)

Ref:

AnnieDS : AN2000014162

Assessment : TPIX-96E8F198-383F-468C-BC71-04AFDBCFA962

Score

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Image Teeth

Show 10 entries

Search:


IMAGE TYPE

DETECTED DENTAL FINDINGS

IMAGE RESULT

DENTAL
PANORAMIC

Ortho : 0, Perio : 0, Brackets : 0, Decay : 0, Restoration : 0

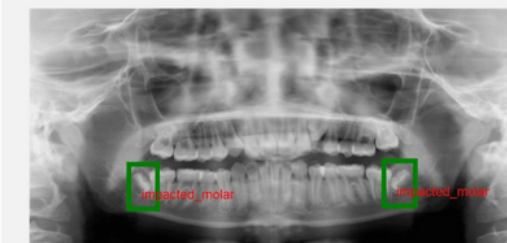

FRONTAL NO
SMILING

No Findings



Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (3)

02

Problem List

Este relatório inclui Height Prediction, Bolton Analysis, Airway Analysis, and Transverse Evaluation. Também destaca considerações importantes relacionadas às horizontal, vertical, and symmetry dimensions, bem como quaisquer special considerations.

Problem List

Problem List

Problem Summary

#Case:

Patient Name:

Doctor Name:
PORTAL DEMO

Birth Date:

01/01/2013 (12.03 years)

Sex/Gender:

Male

Last X-Ray Date:

01/12/2025

Prediction Detail

Height Prediction

Assumed skeletal age: 12.0

Current height: 150.0 cms

Amount of adult growth
achieved: 83.5 %

Bolton Analysis

Bolton 6 ratio: 0.907

Bolton 12 ratio: 1.058

Airway Analysis

If the patient is clinically
diagnosed as a
mouthbreather, observed
mouthbreathing is probably
not caused by adenoid
blockage of the airway.

Transverse

No data available

Problem List

Problem List

Significant Considerations

Horizontal

Class II malocclusion 1

due to the lower molar 18

Severe Overjet 5

Vertical

Deep Bite 7

Skeletal Deep Bite 15

due to the mandible &
palate 39

Symmetry

Midline Asymmetry 10

Special Consideration

Upper anterior teeth
relatively small.

Upper arch tooth mass
relatively small.

Comment

No data available

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (4)

03

Treatment Rationale (1)

Este relatório fornece o raciocínio por trás da decisão para o arco inferior, incluindo: original condition, computer decision, auxiliary appliance, post-treatment plan e lower third molar probabilities. Também inclui os seguintes detalhes:

- Initial conditions
- Maximum permissible arch length increase (within doctor limits) due to contributing factors
- Resultant arch length discrepancy considering all possible increases (C + G)
- Final computer-generated decision
- Work-up presented is

Continue...

Treatment Rationale

Original Condition

Facial Pattern: -0.0 CD - Mesofacial

Lower Arch form: Ovoid

Lower arch length discrepancy (ALD): 1.2 mm SHORTAGE

Leeway Space: 0.0

Max use of leeway space: 0.0 mm

Total arch length discrepancy: 1.2 mm SHORTAGE

Computer Decision

UPPER ARCH: NON-EXTRACTION

Convexity Change: REDUCE 1.0 mm

LOWER ARCH: NON-EXTRACTION

Lower Incisor: FORWARD 0.3 mm

Buccal Expansion: GAIN 0.5 mm

Lower Molar: FORWARD 0.0 mm

Auxiliary Appliances

Activator: NOT INDICATED

Palate Separation: NOT INDICATED

Headgear: CERVICAL

Headgear: LIGHT FORCES

Post Treatment

Pentamorphic Arch Form: Ovoid

Arch Length Relapse: 2.3 mm

Lower third molar probabilities

Impaction: 15 %

Marginal: 43 %

Functional: 42 %

Treatment Rationale

1. Initial Conditions

A. Original Arch Length1.2 mm shortage

B. Useable Leeway Space0.0 mm

C. Total Initial Discrepancy(A+B)1.2 mm shortage

2. Maximum Permissible Arch Length Increase (Within Doctor Limits) Due To

D. Lower Incisor Repositioning4.2 mm increase

E. Buccal Expansion0.5 mm increase

F. Lower Molar Distal Movement0.0 mm

G. Total Possible Increase (D+E+F)4.7 mm increase

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (5)

03

Treatment Rationale (2)

Este relatório também fornece Reason for Upper Arch Decision, que inclui:

- Convexity change
- Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower
- First molar movement required
- First molar movement clinical limit
- Work-Up Presented Is

Treatment Rationale

REASON FOR UPPER ARCH DECISION

1. Convexity change	1.0 mm reduce
2. Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower	5.0 mm backward
3. First molar movement required	1.5 mm backward
4. First molar movement clinical limit	5.8 mm backward
5. Work-Up Presented Is	NON-EXTRACTION

Comment

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (6)



04

Case Evaluation

Este relatório fornece Auxillary Appliance, Probability of Lower Third Molar, incluindo lower, upper analysis e Teeth Type.

Upper Analysis	
Movement of First Molar (non-ext.) Required for Class I	1.0 mm Distal
Clinical Limit	
Resulting Expected Space for 2nd & 3rd Molars at Maturity (non-ext.)	19.6 mm
Required Space for 2nd Molars	9.0 mm to 11.0 mm
Required Space for 2nd & 3rd Molars	18.0 mm to 22.0 mm

Upper Analysis	
Upper Arch	NON-EXTRACTION
Lower Arch	NON-EXTRACTION
Lower Incisor	Forward 0.3 mm
Buccal Expansion	Gain 0.5 mm
Lower Molar Movement	Forward 0.0 mm

Case Evaluation Detail

Auxiliary Appliances

Headgear:

CERVICAL

Activator:

NOT INDICATED

Palate Separation:

NOT INDICATED

Convexity Objective:

Reduce 1.0 mm

Lower Arch Length Discrepancy (original arch), Including useable leeway (E) space::

1.2 mm Shortage

Probability of Lower Third Molar

Impaction:

15.%

Eruption Questionable Function:

43.%

Eruption Functional:

42.%

Lower Arch

LOWER ANALYSIS	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (LT)	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (RT)	EFFECT ON ARCH LENGTH	RESULTING DISCREPANCY
Lower Incisor to Ideal	0.2 mm Bwd.	0.4 mm Bwd.	0.8 mm Decrease	2.0 mm Shortage

Teeth Type																
TEETH TYPE	L6	L5	L4	L3	L2	L1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	TOTAL	SUM OF INCISOR	NORM	
Lower Arch	11.4	8.0	7.7	7.6	6.3	5.7	5.7	6.3	7.5	7.8	7.5	11.7	93.2	24.0 MM	22.2	
Upper Arch	8.9	6.7	6.9	6.4	6.8	7.9	8.1	6.4	7.5	7.2	6.3	9.0	88.1	29.2 MM	N/A	

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (7)

05

Dental Findings

Este relatório fornece detalhes de Lateral view Before treatment, incluindo:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton
- Esthetics
- Nasopharyngeal Airway
- Frontal Before Treatment

Também inclui a Frontal view before treatment, abrangendo:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Lateral Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5	*
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4	*
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2	***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7	*
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7	*
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1	*

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Frontal Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5	
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1	
#06 Intermolar Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7	***
08 Inter canine Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1	*
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4	*

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (8)



06

Skeletal Findings

Este relatório mostra os detalhes skeletal cephalometric da lateral view before treatment, incluindo skeletal relations, jaw-to-cranium position e internal structure. Também inclui a mesma análise a partir da frontal view.

Imagens do Tracing Set também estão disponíveis.

Skeletal Cephalometric

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#13 Convexity	7.2 mm	6.1 mm	0.4	
#15 Lower Facial Height	39.1 dg	48.0 dg	-2.2	**
84 Present Patient Height	150.0 cm	147.7 cm		
91 Posterior face height	78.9 mm			
92 Anterior face height	118.9 mm			
93 Posterior/Anterior ratio	66.3 %			
94 Saddle Angle	130.1 dg	123.0 dg	2.4	**
96 Condylion-A point	95.7 mm	90.4 mm	1.5	*

Skeletal Cephalometric

Frontal Before Treatment

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#14 Max-Mand Width Left	-13.8 mm	-11.8 mm	-0.7	
#16 MaxiMand Width Right	-11.5 mm	-11.8 mm	0.1	
17 MaxiMand Midline	-0.3 dg	0.0 dg	-0.1	

Jaw to Cranium

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
--------	----------------	---------------	----------------	----------------

Skeletal Cephalometric

Tracing Set

AN2000014162

Zoom

VISUAL NORMS

ANN

AN2000014162

Zoom

VISUAL NORMS


ANN

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (9)

07

Tracing Measurements

Este relatório inclui medições de traçado com base nas lateral and frontal view images.

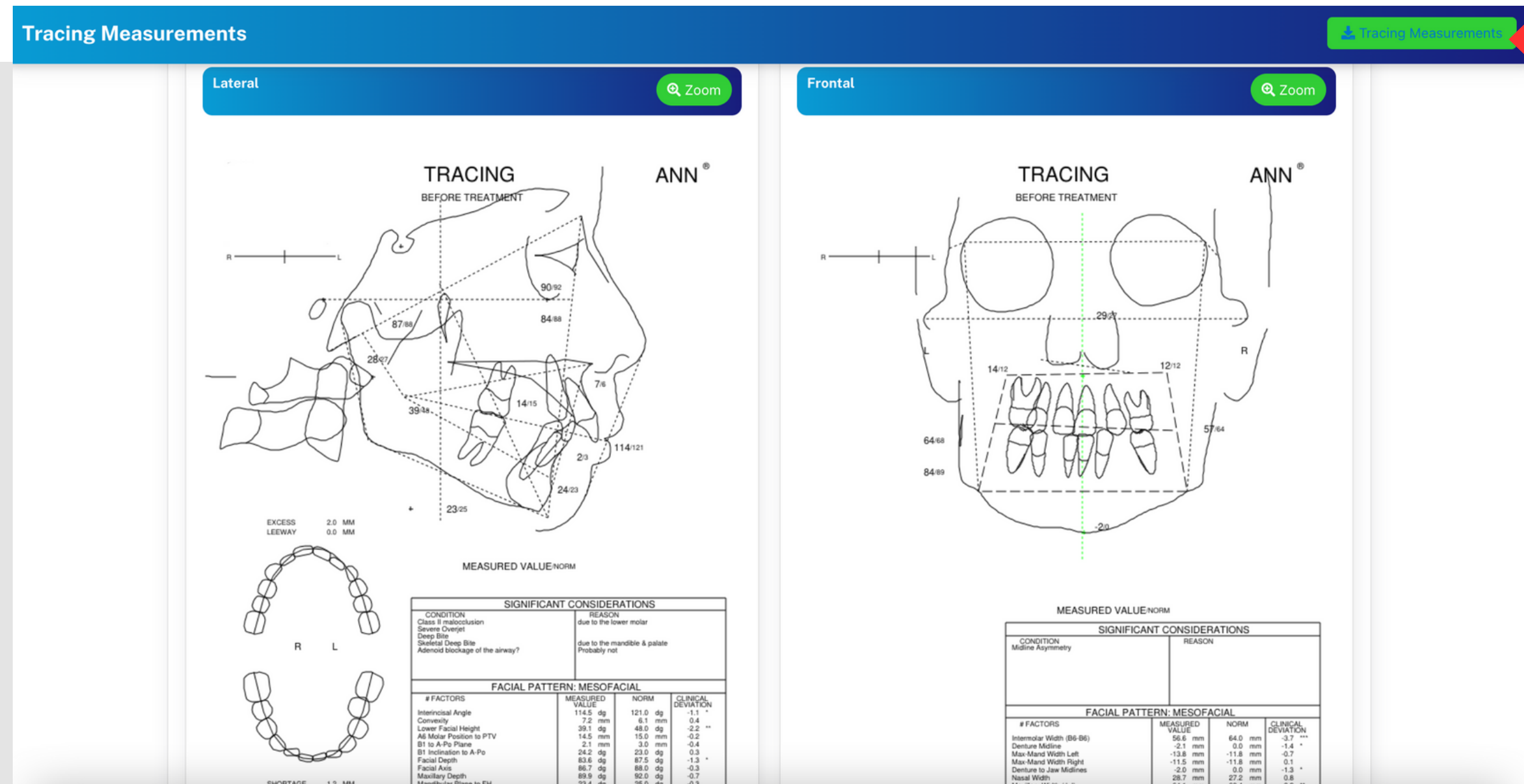

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (10)

08

Sequence Worksheet (1)

- A Planilha de Sequência fornece um relatório dividido em três seções: Narrative, Letter e Gráfico do Plano de Tratamento.
- A seção “Narrative” resume a sequência do tratamento para as arcadas superior e inferior, detalhando as atividades de cada mês. Também inclui uma carta endereçada ao paciente.
- A seção “Letter” oferece um resumo do tratamento destinado ao dentista.

Continue...

Sequence Worksheet

Sequence Worksheet

Narrative (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Step-by-Step Treatment Summary for

Upper Arch Treatment Sequence:
1. **Month 1-4: Expand Arch**
- The upper arch will be expanded. This helps to create space and improve the alignment of the teeth.

2. **Month 5-7: Correct Convexity and Distalize 6**
- Simultaneously, we will correct the convexity (the outward curvature of your teeth) and move the molar teeth (6th teeth from the front) backwards to align properly with the rest of the teeth.

3. **Month 6-10: Intrude 1 and Retract 4 and/or 5**
- From month 6, while continuing previous treatments, the front tooth (Incisor 1) will be moved downwards (intruded) to correct its height.
- The canine and premolar teeth (4 and 5) will be pulled back to improve the bite and aesthetic appearance.

4. **Month 10-11: Retract 3**

Sequence Worksheet

Sequence Worksheet

Letter (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Subject: Treatment Design Review for

Dear Dr. Portal Demo,

I hope this message finds you well. After reviewing Vincent Ann's facial structure and anticipating how they might respond to dental treatment, our planned approach indicates a significant adjustment to the position of the front teeth is necessary.

We would appreciate your expertise in evaluating our treatment plan. Could you please consider whether standard dental treatments would be effective for this case? Alternatively, we have outlined a few less conventional methods that could be considered:
- Implementing mechanisms to help open the bite
- Introducing a phase of treatment using a functional appliance
- Aiming for a slightly deeper bite than usual

These methods are not typically standard, but given the unique requirements of this case, they might be worth considering. We strive to keep you informed when a case requires exceptional procedures.

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (11)

08


Sequence Worksheet (2)

Um gráfico do Treatment Plan em formato JPG para download também é fornecido como parte do report.



Clique em 'Zoom' para ver uma visualização ampliada do diagrama.

Observação:

- O recurso 'Letter' pode não estar disponível para determinados casos.
- O Sequence Worksheet NÃO estará disponível se houver ausência de 1st molar(s) OU de central incisor(s).

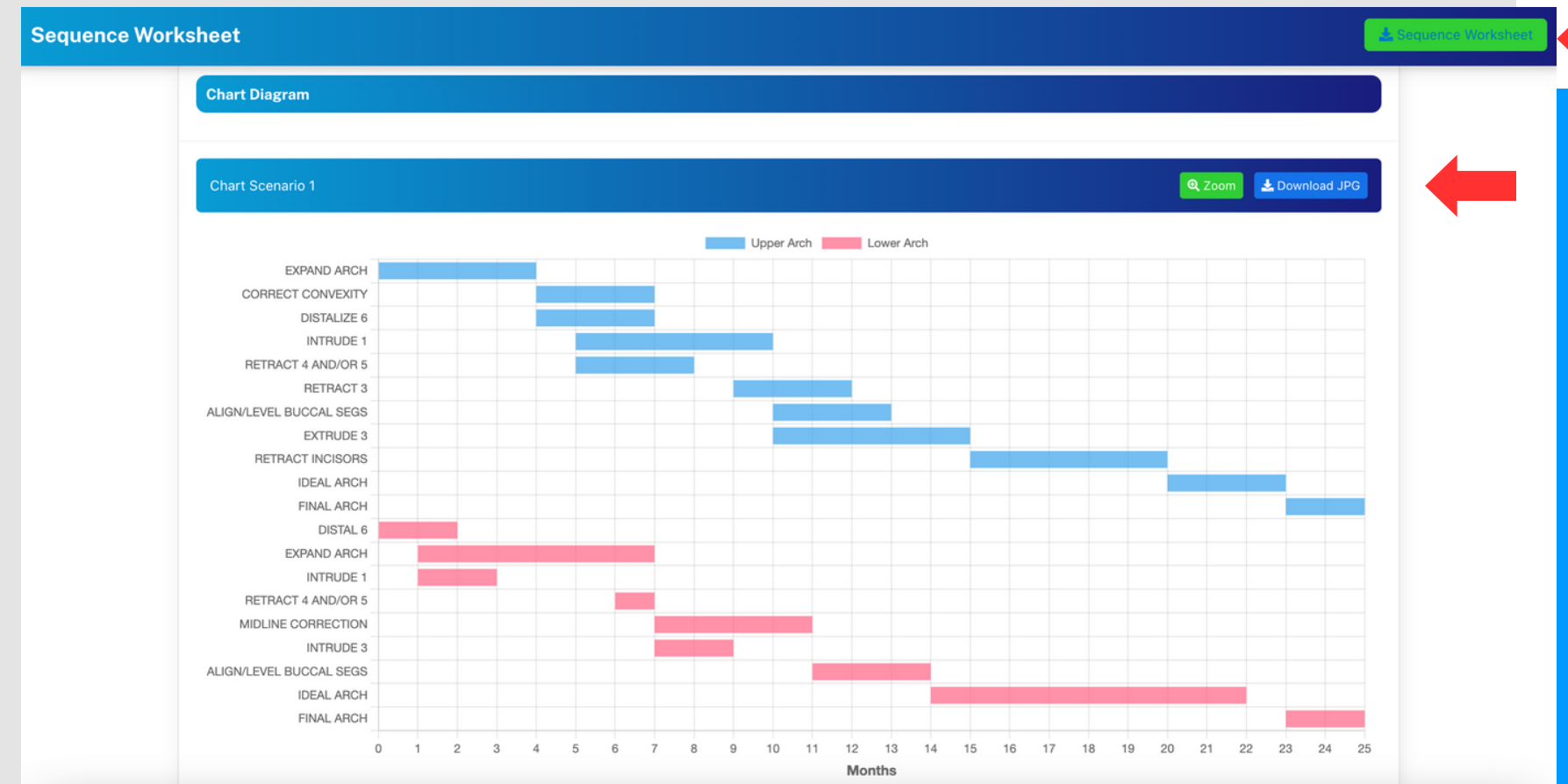

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (12)

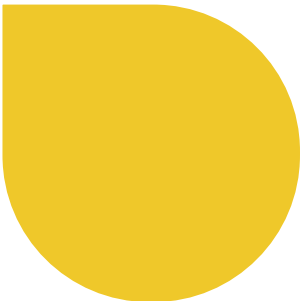
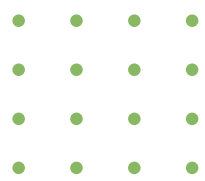


VISUAL NORMS ANN[®]

09

Full Comprehensive Report

Você poderá baixar um relatório completo em formato PDF. Ele contém todos os resultados, do Report 1 ao Report 8.

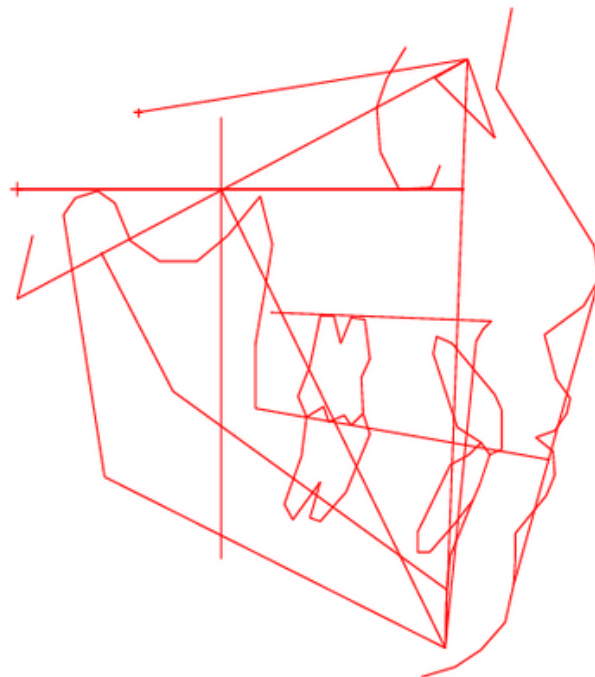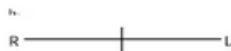

ANN

Data Services
HCDS, Inc.

+1(847)665-9458 47 W Polk St
Chicago, IL 60605

ANN Case Number: 0000 1416_2
ANN Run date: 06/17/2025

X-Ray date: 01/12/2025 Age: 12.0
Birthdate: 01/01/2013 Sex: Male 4

Reference: C C D I

CCD - ORTHODONTIC CONDITIONS

LATERAL BEFORE TREATMENT

FRONTAL BEFORE TREATMENT

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM
NORM

- Appears on tracing

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM
NORM

- Appears on tracing

DENTAL RELATIONS

DENTAL RELATIONS

01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5 *
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4 *
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2 ***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7 *
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7 *
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1 *

02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1
#06 Interolar Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7 ***
08 Inter canine Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1 *
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4 *

DENTAL TO SKELETON

DENTAL TO SKELETON

#18 A6 Molar Position to PTV	14.5 mm	15.0 mm	-0.2
#20 B1 to A-Po Plane	2.1 mm	3.0 mm	-0.4
22 A1 to A-Po Plane	13.0 mm	5.5 mm	3.4 ***
#24 B1 Inclination to A-Po	24.2 dg	23.0 dg	0.3
26 A1 Inclination to A-Po	41.3 dg	36.0 dg	1.3 *
27 Occlusal Plane to Xi	0.9 mm	-0.5 mm	0.5
28 Inclination of Occl Plane	16.0 dg	25.0 dg	-2.2 **
34 B1 Inclination to FH	49.6 dg	65.0 dg	-3.1 ***

19 B6 to J-Ag Left	6.2 mm	5.4 mm	0.4
21 B6 to J-Ag Right	9.6 mm	5.4 mm	2.1 **
#23 Denture to Jaw Midlines	-2.0 mm	0.0 mm	-1.3 *
25 Occlusal Plane Tilt	-2.2 mm	0.0 mm	-1.1 *

ESTHETICS

29 Lower Lip to Esthetic Plane	3.3 mm	2.0 mm	0.7
30 Upper Lip Length	30.5 mm	26.8 mm	1.8 *
31 Lip Embrasure to Occl Plane	-0.8 mm	-3.0 mm	1.1 *
58 Nasolabial Angle	103.0 dg	110.0 dg	-1.4 *

NASOPHARYNGEAL AIRWAY

62 N-S-Ba	133.9 dg	129.6 dg	0.9
63 Ba-S-PNS	56.3 dg	63.0 dg	-2.7
85 Airway Percent	63.0 %	58.5 %	0.3
86 Linder-Aronson AD1	22.4 mm	24.0 mm	-0.3
87 Linder-Aronson AD2	19.1 mm	19.5 mm	-0.1
88 Distance PTV to Adenoid	15.0 mm	11.7 mm	0.7

Step 12: Review The Reports / Revisar os Relatórios (13)

10

HLD Summary

Este relatório apresenta os pontos principais sobre a folha de pontuação do Handicapping Labio-Lingual Deviation (HLD).

Também mostra seu status de qualificação com base no HLD Index.

Diretrizes e regras para aplicar o HLD Index também estão disponíveis.

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

Handicapping

A. Conditions 1-5 Are Automatic Qualifiers

- 1 Cleft Palate
YES
- 2 Deep impinging bite with signs of tissue damage, not just touching palate
NO
- 3 Anterior crossbite with gingival recession
NO
- 4 Severe traumatic deviation (i.e., accidents, tumors, etc. attach description)
NO
- 5 Impacted Maxillary Central Incisor
NO

Continue to scoring below if there are no qualifying conditions checked above

B. Conditions 6-14 Must Score 28 Points or More to Qualify

6	Overjet (one upper central incisor to labial of the most labial lower incisor)	Unit mm	Index x 1	Score 11
---	--	------------	--------------	-------------

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

Handicapping

Guidelines and Rules for Applying the HLD Index

The provider is encouraged to score the case and exclude any case that obviously would not qualify for treatment. Upon completion of the HLD Index score sheet, review all measurements and calculations for accuracy.

General Instructions

☒ Indicate by checkmark next to A or B which criteria you are submitting for review.

 Position the patient's teeth in centric occlusion.

 Record all measurements in the order given and round off to the nearest millimeter.

 Enter the score "0" if condition is absent.

A. Automatic Qualifiers (Conditions 1-5)

Indicate with an "X" if condition is present.

Cleft Palate

a cleft palate deformity must be demonstrated on the study model, if the deformity cannot be demonstrated on the study model, the condition must be diagnosed by properly credentialed experts and the diagnosis must be supported by documentation. If present, enter an "X".

Deep Impinging Bite

deep impinging overbite with signs of tissue damage of the palate, not just touching palate, including inflammation or damage of the gingiva palatal to the maxillary incisors. The condition must be clearly visible in the mouth and demonstrate on photos. On study models, the mandibular teeth must be clearly touching the palate and the tissue indentations or evidence of soft tissue damage or inflammation must be clearly visible. Tissue indentions without soft tissue damage do not meet the criteria. If present, enter an "X".

Tier

Tier
T1 Credit
242 pts

DR ANNIE™ Insights

Active Patient >

Archive Patient >

Patient List

Patients

Search patient... Q

+ New Patient

Patient ⌵

Profile ⌵

Time Point ⌵

Progress ⌵

Action ⌵

No data to display



Tier
T1 Credit
242 pts

Patients >> List

- Tier mostra seu nível ou posição atual no DR ANNIE™ Insights e pode ser encontrado no canto superior direito (veja a seta vermelha).
- Existem três tiers: Tier 1, Tier 2 e Tier 3.
- Cada tier oferece seu próprio conjunto de benefícios.
- Consulte a imagem para ver os detalhes dos benefícios e as orientações para upgrade, ou visite a seção **‘Pricing & Tier Guidelines’**.

PRICING AND TIER
UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules

Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:

You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100–200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:

You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3

Standard \$10
Standard + \$15
Complete \$20

0 - 100
Report(s) Annually

TIER 2

Standard \$8
Standard + \$10
Complete \$15

100 - 200
Report(s) Annually

TIER 1

Standard \$5
Standard + \$8
Complete \$10

200+
Report(s) Annually



VIP REPORTS \$50

VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.


Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.

User Credit

- Clique no ícone no canto superior direito e selecione 'Credits' ou clique em 'Credit' na barra superior (veja as setas vermelhas) para visualizar seu saldo de créditos e estatísticas.

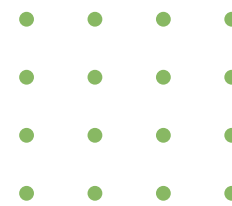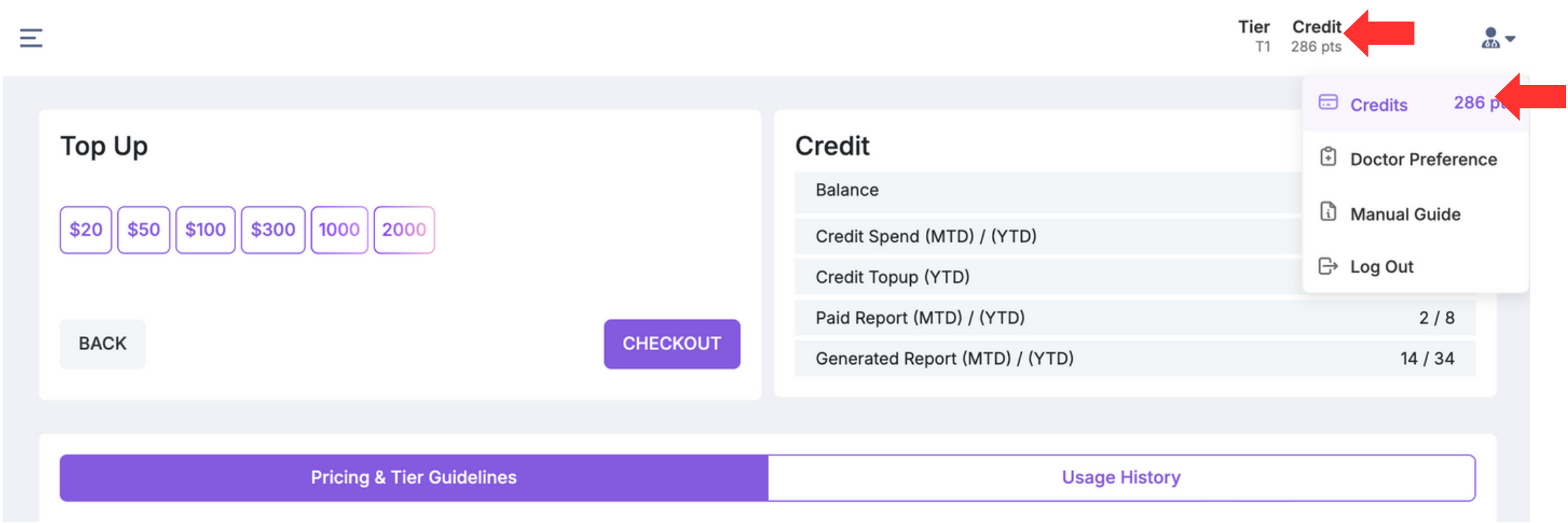

Pricing & Tier Upgrade Guidelines

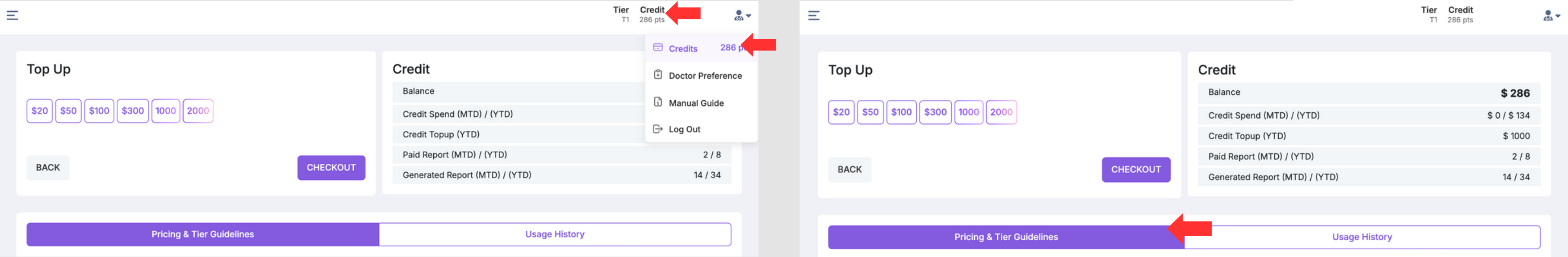

- Clique no ícone no canto superior direito e selecione ‘Credits’ ou clique em ‘Credit’ na barra superior (veja as setas vermelhas).
- Em seguida, clique em ‘Pricing & Tier Guidelines’ para visualizar o custo de cada recurso e os termos para fazer upgrade do seu tier.
- Por exemplo, se você estiver no Tier 1, gerar um Standard report custará \$5 (5 pts).
- Consulte a imagem para ver as instruções de como fazer upgrade do seu tier e os benefícios incluídos.
- Regenerar o mesmo report não terá custo adicional nem consumirá créditos extras.
- Não se esqueça de verificar se há promoções ou descontos sazonais disponíveis para ajudar você a economizar créditos.

PRICING AND TIER UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules
Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier. Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers. Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:
You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100-200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:
You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3	TIER 2	TIER 1
Standard \$10	Standard \$8	Standard \$5
Standard + \$15	Standard + \$10	Standard + \$8
Complete \$20	Complete \$15	Complete \$10
0 - 100 Report(s) Annually	100 - 200 Report(s) Annually	200+ Report(s) Annually



VIP REPORTS \$50

VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.

Usage History

- Clique no ícone no canto superior direito e selecione 'Credits' ou clique em 'Credit' na barra superior (veja as setas vermelhas).
- Clique em 'Usage History' para visualizar sua atividade, incluindo quantos pontos foram deduzidos para cada recurso utilizado.

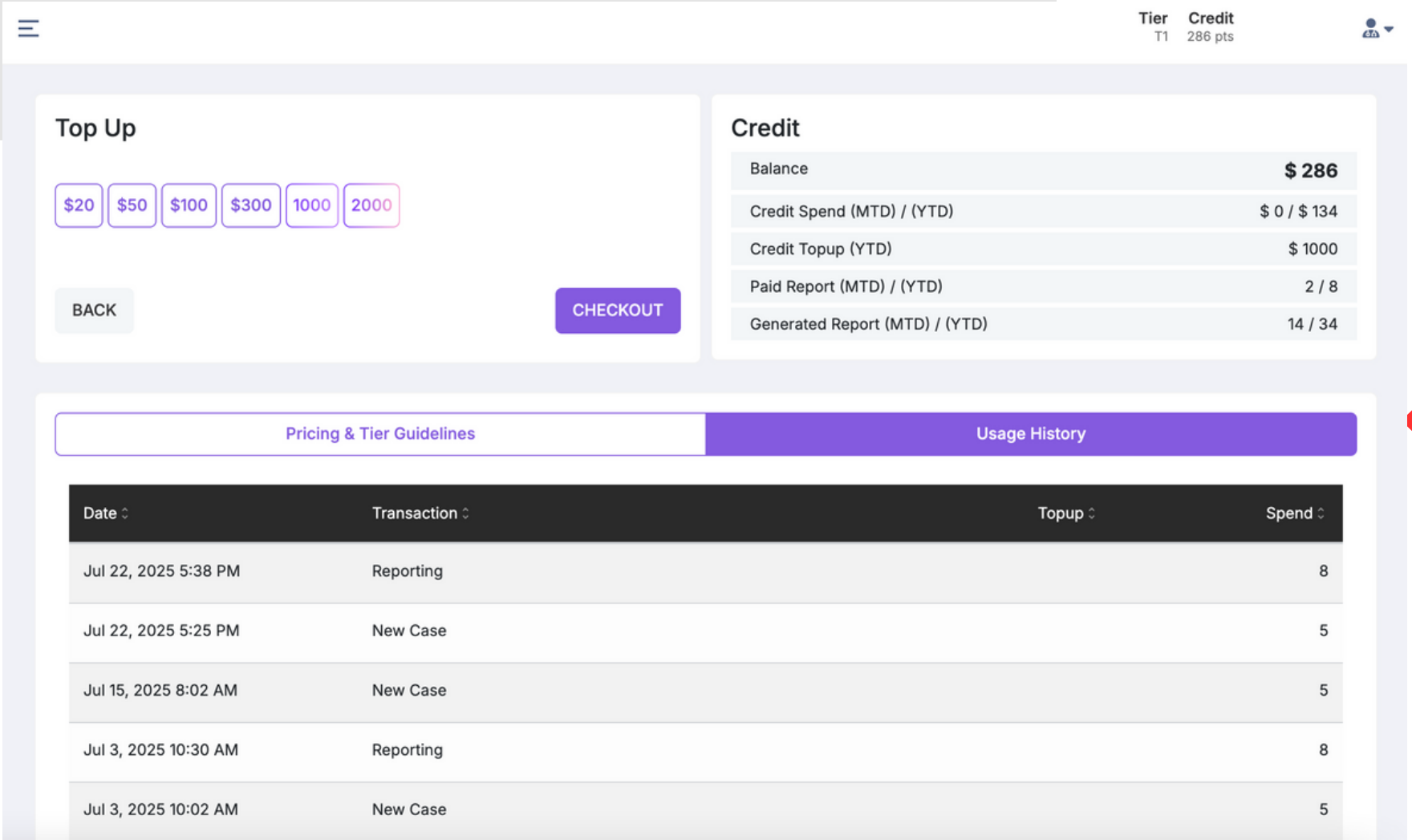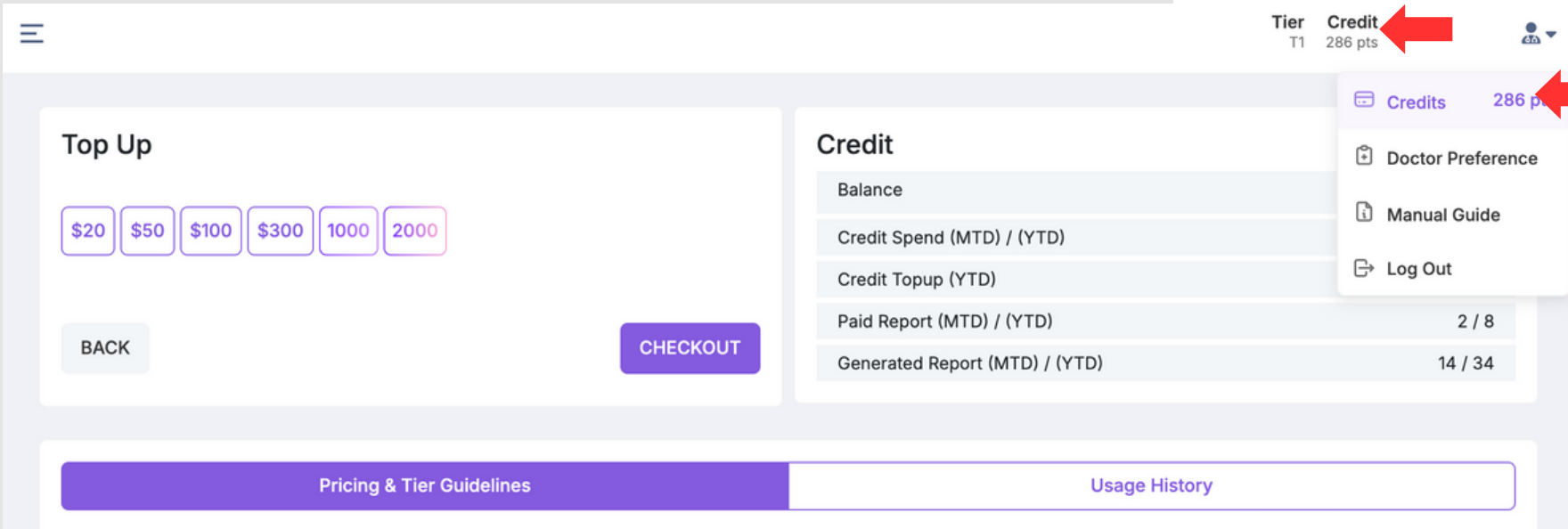


Top Up (1)


1. Clique no ícone no canto superior direito e selecione 'Credits' ou clique em 'Credit' na barra superior (veja as setas vermelhas) para visualizar seu saldo de créditos e estatísticas.
2. Clique no valor disponível que deseja adicionar. Em seguida, clique em 'Checkout'.

Continue...

1

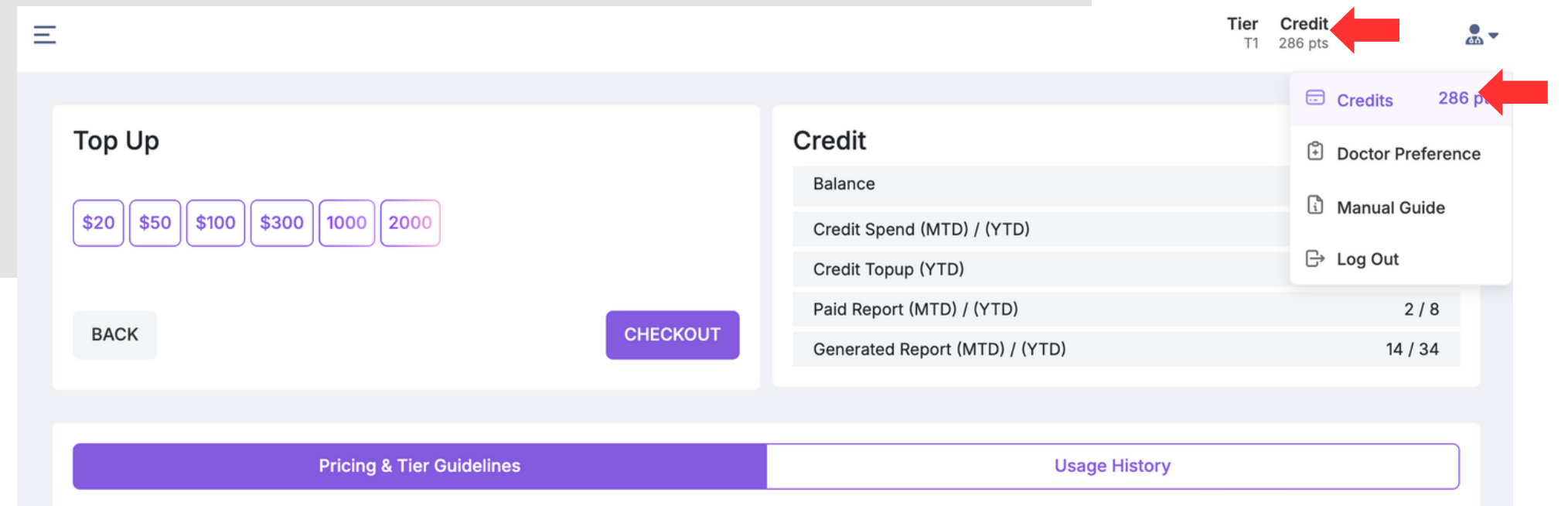

2

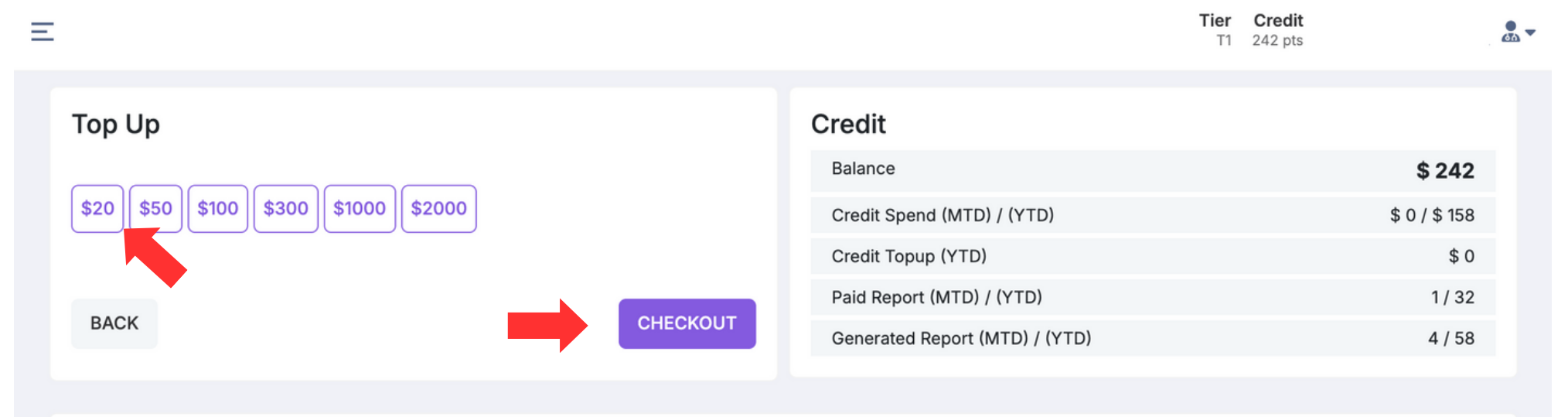

Top Up (2)

3. A página de pagamento será exibida. Escolha sua moeda preferida. Se você tiver um código promocional, poderá inseri-lo e concluir o pagamento (veja a seta vermelha).
4. Você pode selecionar 'Pay with Link' (botão verde) se já tiver uma conta Link.
5. Como alternativa, insira os dados do seu cartão de crédito manualmente. Você também pode marcar a caixa abaixo para salvar suas informações e facilitar o checkout com um clique no futuro (opcional).
6. Clique em 'Pay' para concluir a transação.

The screenshot shows the payment interface for DR ANNIE Insights. It includes a currency selection section, a payment summary table, and a payment method selection area. Red arrows and numbers 3 through 6 highlight specific steps: 3 points to the currency selection, 4 points to the 'Pay with link' button, 5 points to the card information fields, and 6 points to the 'Pay' button.

DR ANNIE Insights

Choose a currency:

Exchange rate and fees of your bank may apply

Payment for Annie-Insights Credit 20 points. Trx# TXN12345	\$20.00
Subtotal	\$20.00
Total due	\$20.00

[Add promotion code](#)

Or

Pay with link

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

☐ Securely save my information for 1-click checkout

Pay faster on Foundation for Modern Bioprogressive Orthodontics and everywhere Link is accepted.

Pay

Patient Case Search / Busca de Caso do Paciente

2

The screenshot shows the patient case management interface. At the top, there is a header bar with the patient's name "DEMO, CLASSONE", email "ismart.patient@gmail.com", and a Case ID "AN2001500011" which is highlighted with a red arrow. Below the header, there is a progress bar with five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings. The progress bar indicates that the case is "In Progress".

Search Patient Result

The screenshot shows the "Search Patient Result" interface. At the top, there is a search bar with the text "CLASSONE" and a red arrow pointing to it. To the right of the search bar is a "New Patient" button. Below the search bar, there is a table with patient details.

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	

Search Patient Result

The screenshot shows the "Search Patient Result" interface. At the top, there is a search bar with the text "AN2001500011" and a red arrow pointing to it. To the right of the search bar is a "New Patient" button. Below the search bar, there is a table with patient details.

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	

1. Você pode procurar um caso inserindo o nome do paciente ou o Patient ID na caixa de pesquisa.
2. O Patient ID fica disponível somente após a geração de um report. Veja a seta vermelha para localizar o Case ID.

Se você já enviou o caso, mas o report ainda não foi gerado, é possível fazer a busca usando o nome do paciente.

Doctor Preference / Preferência do Médico

Tier T1 Credit 242 pts

Patient List

Patients Search patient...

Credits 242 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Doctor Preference

Preferred Treatment

☒ Let DR.ANNIE suggest
The user does not have a specific preference and authorizes DR. ANNIE™ to recommend the most appropriate treatment approach, whether extraction or non-extraction.

☐ Force Non-Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily non-extraction-based, where clinically appropriate.

☐ Force Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily extraction-based, where clinically appropriate.

BACK

Tools

☒ Braces

☐ Aligner


SAVE

- Clique no ícone no canto superior direito e depois clique em 'Doctor Preference' (veja as setas vermelhas).
- Escolha seu tratamento e ferramentas preferidos.
- Clique em 'Save' para aplicar suas alterações.

A seleção de Doctor Preferences afetar os resultados da análise da DR ANNIE™.

Ela também influenciará os reports gerados.

Se você quiser atualizar os resultados da avaliação que geraram o report, será necessário resetar o timepoint e gerar o report novamente.

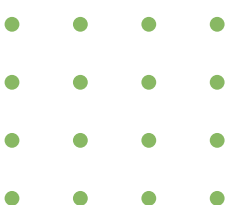

Sample Case / Caso Demonstrativo

DR ANNIE™ Insights

Active Patient ▾


- A
- B
- C
- D (3) ←
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N

Patient List

Patients Search patient... Q + New Patient



Patient ▾	Profile ▾	Time Point ▾	Progress ▾	Action ▾
DEMO, CLASSTWO ismart.patient@gmail.com 0617032211	Jan 30, 2010 M 155 cm LA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSTHREE ismart.patient@gmail.com 0617472535	Jan 30, 2000 F 160 cm CA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️

- Para referência, três casos de demonstração estão disponíveis com base nos resultados da avaliação realizada pela DR ANNIE™: Demo Class One, Demo Class Two e Demo Class Three.
- Você pode encontrá-los na seção 'D' em Active Patient (veja a seta vermelha).

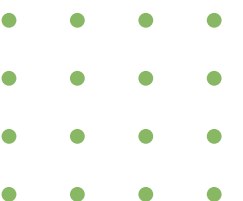

Pronto para Gerar? Certifique-se de que estes passos foram concluídos

- Certifique-se de que todas as imagens atendem aos requisitos necessários.
- Garanta que todas as entradas obrigatórias e verificações foram concluídas antes de gerar os reports.
- Os usuários também podem reproprocessar o report caso haja alterações na foto do paciente ou no processo de verificação dental.

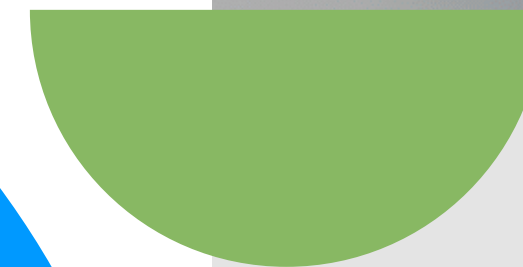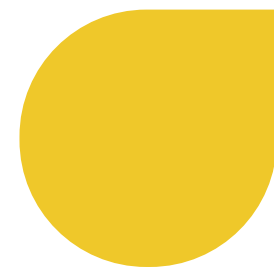

DR. ANNIETM INSIGHTS



✓ AI Dental Findings

✓ Report Generating

✓ Timepoint Feature

✓ AnnieInsight+





A tecnologia de AI da DR ANNIE™ está em constante aprimoramento, ajudando a entender melhor os pacientes e a planejar os tratamentos de forma mais eficaz.

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo

✉ support@ismartdds.com

☎ +1-833-6776676 (Toll-Free)

🌐 [iSmartDDS](https://www.ismartdds.com)