

Manual de instrucciones

Instrucciones paso a paso para crear un plan de tratamiento


DR ANNIE™ Insights

es_MX


Version: 072025V3



Disponibilidad de idiomas

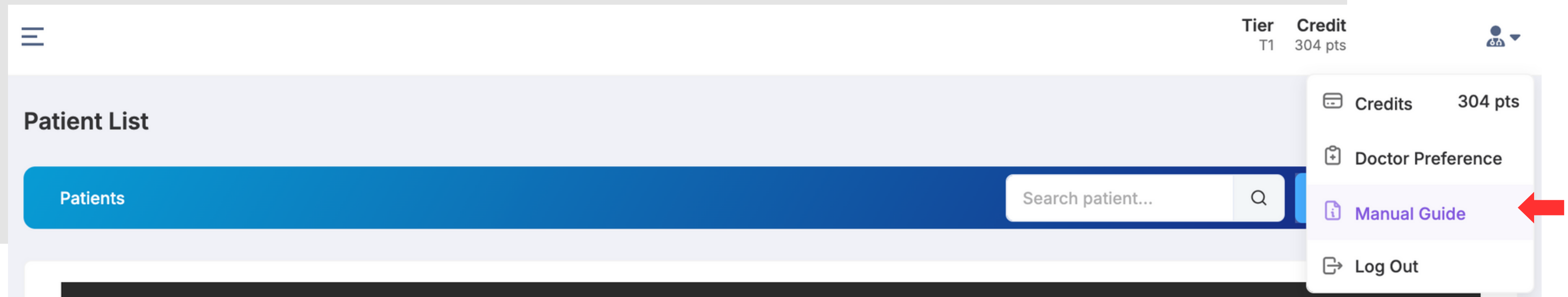

- Este documento está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, portugués (Brasil) y español (México).
- Para acceder al manual, haz clic en el ícono en la esquina superior derecha y desplázate hacia abajo hasta “Guía del manual”.
- Por favor, selecciona la versión que mejor se alinee con tu idioma preferido.

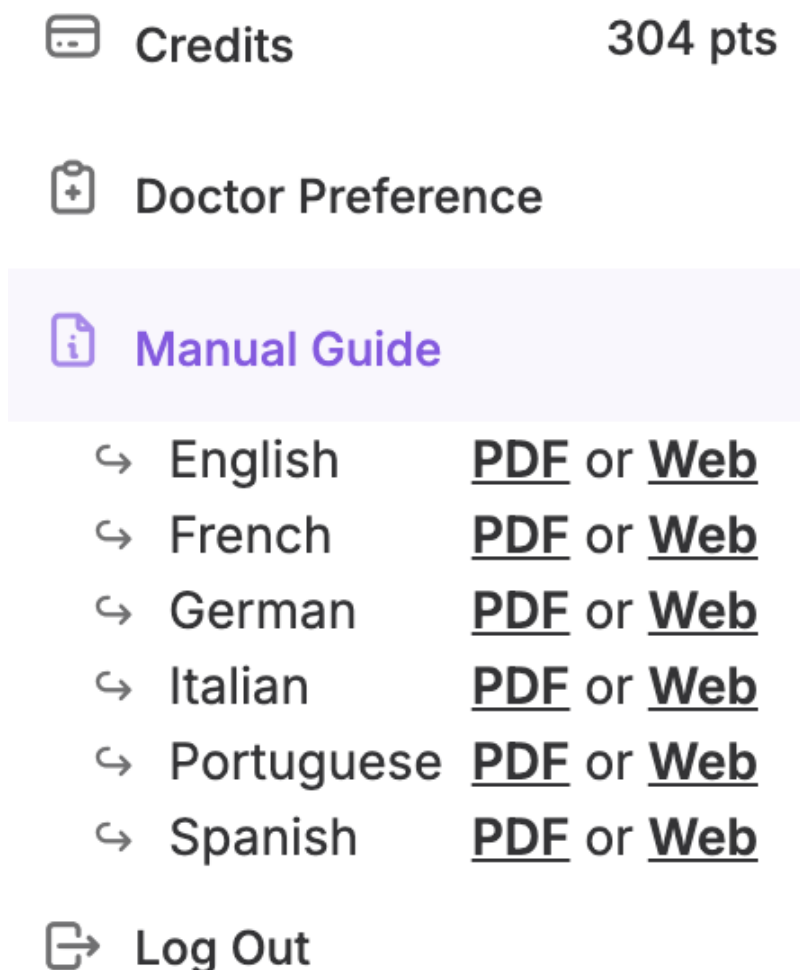

Contenido



- 01 Log In
- 02 Navegar por la página de inicio
- 03 Crear un nuevo perfil de paciente
- 04 Editar perfil del paciente
- 05 Crear Timepoint
- 06 Subir imágenes intraorales
- 07 Subir imágenes extraorales
- 08 Editar el odontograma
- 09 Subir imágenes X-Ray y formulario HLD
- 10 Revisar y verificar los hallazgos de AI
- 11 Generar el Report
- 12 Revisar los Reports
 - ~ Tier
 - ~ User Credit
 - ~ Pricing & Tier Upgrade Guidelines
 - ~ Usage History
 - ~ Top Up
 - ~ Patient Case Search
 - ~ Doctor Preference
 - ~ Sample Case



Step 1: Log In / Iniciar sesión (1)

01

Ve a iSmartDDS.com en tu navegador para acceder a la plataforma DR. ANNIE™ Insights. Aparecerá la página de inicio de sesión.


02

Selecciona tu opción de inicio de sesión preferida:


- **SIGN IN WITH GOOGLE**
- **EMAIL & PASSWORD**

03

Si prefieres registrarte y usar DR. ANNIE™ sin una cuenta de Google, por favor haz clic en el enlace "Create an account here" (ver flecha roja). Esto te llevará al [iSmartOffice registration portal](#). Consulta la siguiente página para más detalles.

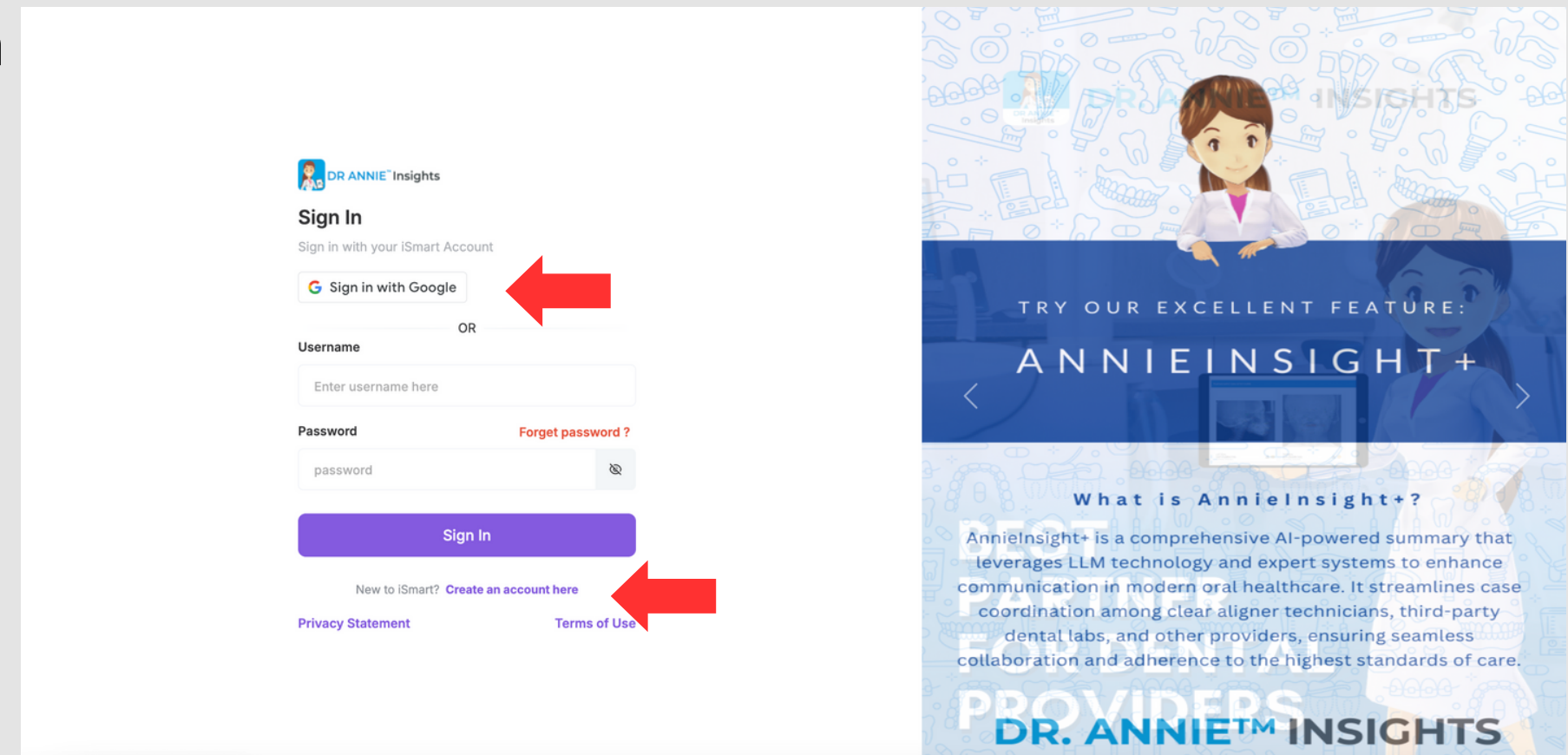

Continue...

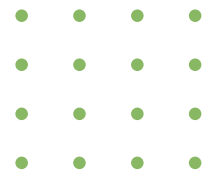

Step 1: Log In / Iniciar sesión (2)

04

Ingresa la información requerida en este formulario de registro. Una vez que toda la información sea correcta, por favor haz clic en el botón de registro para continuar.

05

Por favor, confirma el registro a través del correo electrónico proporcionado. Una vez confirmado, la cuenta estará lista para usar.

The screenshot shows the 'iSmartOffice - Provider' registration page. At the top, there is a search bar and links for 'Register' and 'Login'. The main section is titled 'PROVIDER REGISTRATION FORM' and contains several input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Username' (with a hint 'Use email address as your username'), 'Password', 'Retype Password', and 'Referral Code' (with a hint 'if any'). At the bottom right of the form, there are two buttons: an orange 'Back' button and a blue 'Register' button. A red arrow points to the 'Register' button. In the bottom right corner of the page, there is a red circular icon with a white bell inside.




Step 2: Navigate The Home Page / Navegar en la página principal

01

Después de iniciar sesión, la página principal muestra dos secciones principales:

- **IZQUIERDA: ACTIVE & ARCHIVE PATIENT**
- **CENTRO: PATIENT LIST**

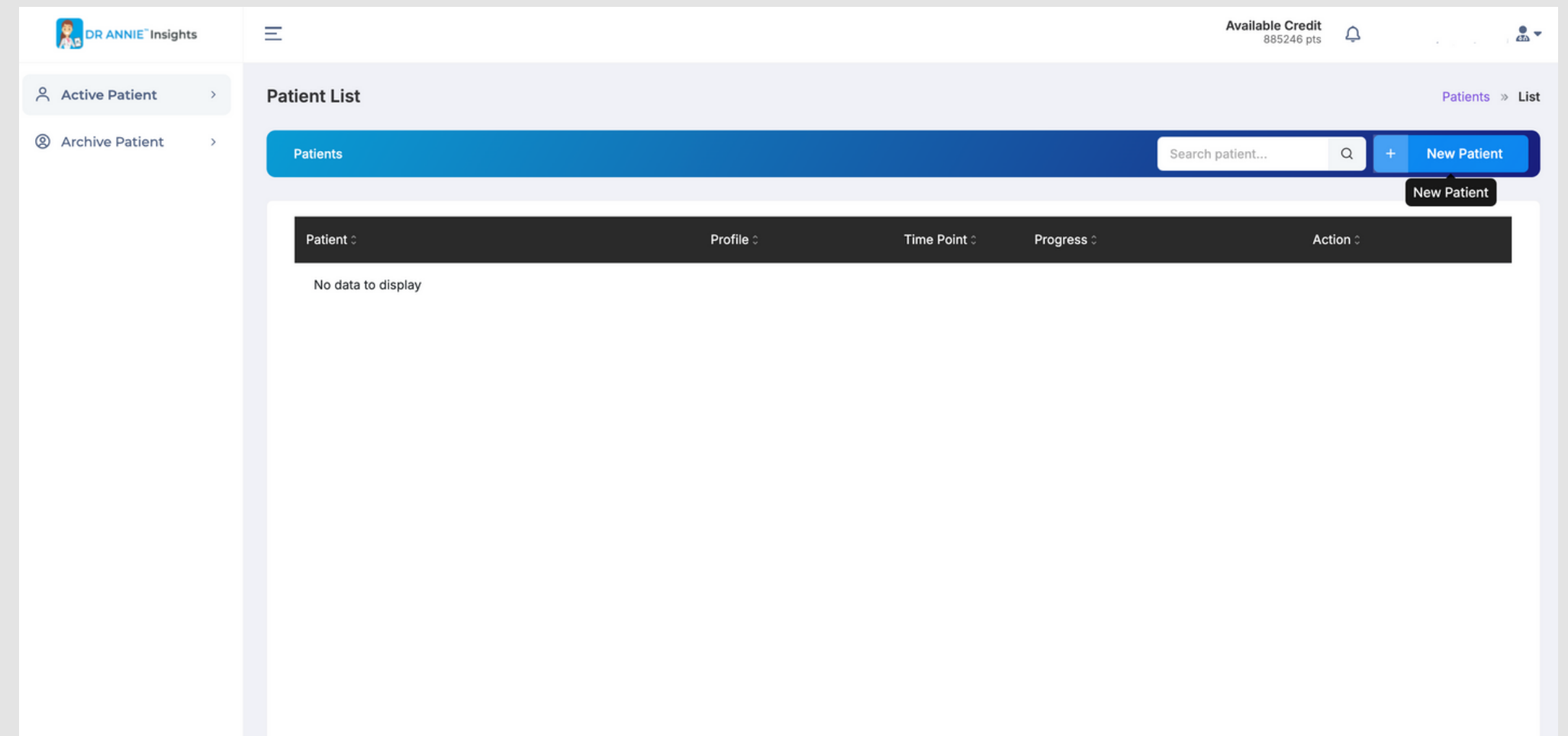

Step 3: Create a New Patient Profile / Crear un nuevo perfil de paciente

01

Haz clic en 'New Patient' (ver flecha roja).

Antes de agregar el nombre del paciente, primero agrega un crédito para que DR. ANNIE™ pueda continuar con el proceso de análisis.

Para más detalles, consulta la sección de [User Credit](#) o [Top Up](#).

02

Ingresa los datos requeridos.


Todos los campos deben completarse antes de continuar.

03


Revisa y acepta la HIPAA Compliance Policy.

04

Haz clic en 'Submit' para guardar el perfil.

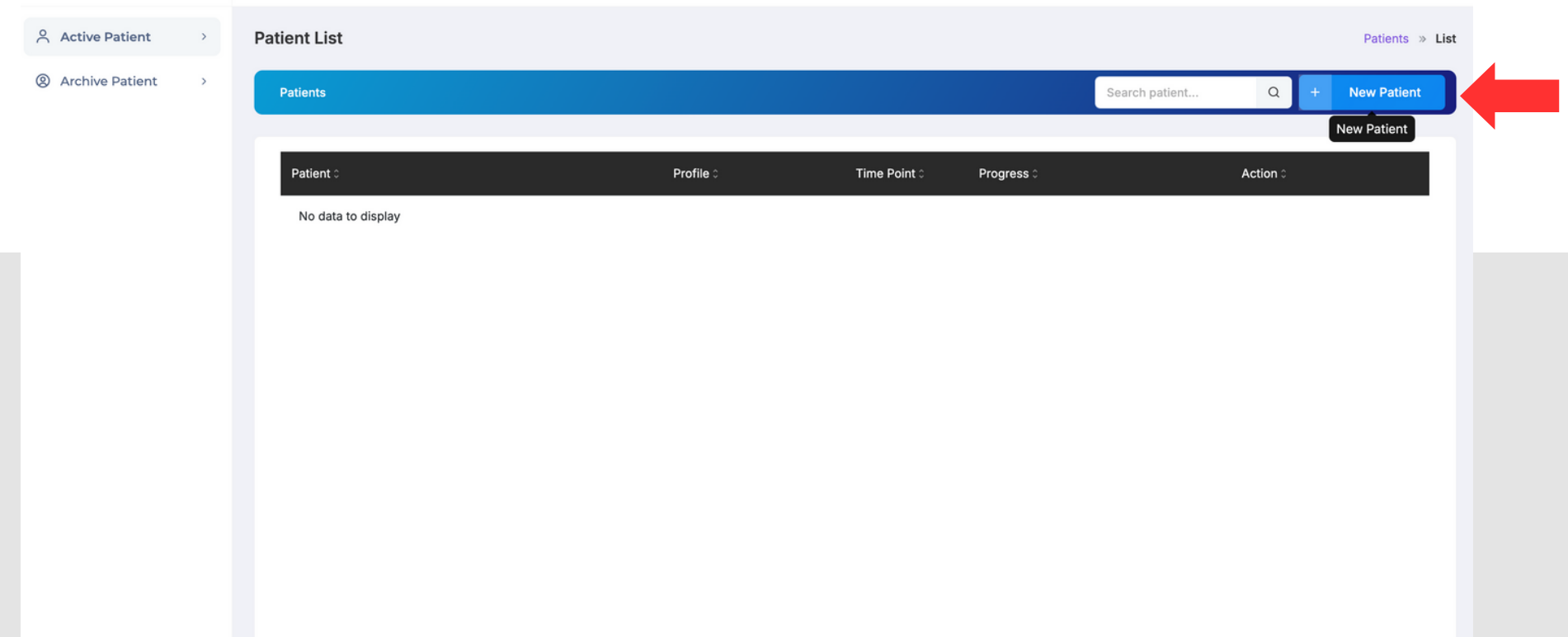

The screenshot shows the 'Patient List' interface. On the left, there are tabs for 'Active Patient' and 'Archive Patient'. The main area has a search bar and a 'New Patient' button, which is highlighted with a red arrow. Below the search bar, there is a table with columns: Patient, Profile, Time Point, Progress, and Action. The table is currently empty, showing 'No data to display'.

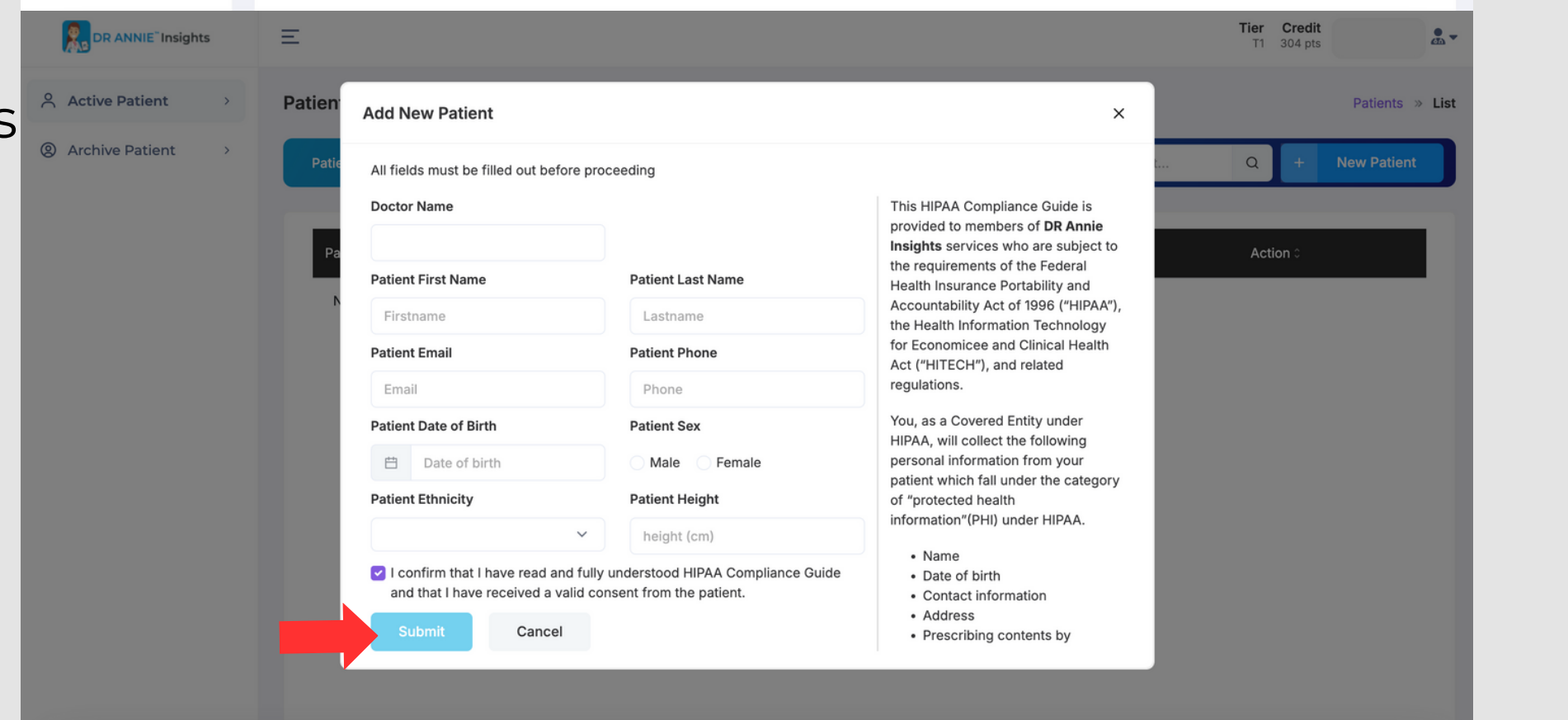

The screenshot shows the 'Add New Patient' form. It includes fields for Doctor Name, Patient First Name, Patient Last Name, Patient Email, Patient Phone, Patient Date of Birth, Patient Sex, Patient Ethnicity, and Patient Height. A red arrow points to the 'Submit' button. On the right side of the form, there is a HIPAA Compliance Guide section with a checkbox for 'I confirm that I have read and fully understood HIPAA Compliance Guide and that I have received a valid consent from the patient.' and a list of collected information: Name, Date of birth, Contact information, Address, and Prescribing contents by.

Step 4: Edit Patient Profile / Editar perfil del paciente

01



Haz clic en el nombre del paciente en la esquina central-izquierda (ver flecha roja).

02

Edita la información necesaria.

03

Haz clic en 'Submit' para guardar o en 'Cancel' para regresar.

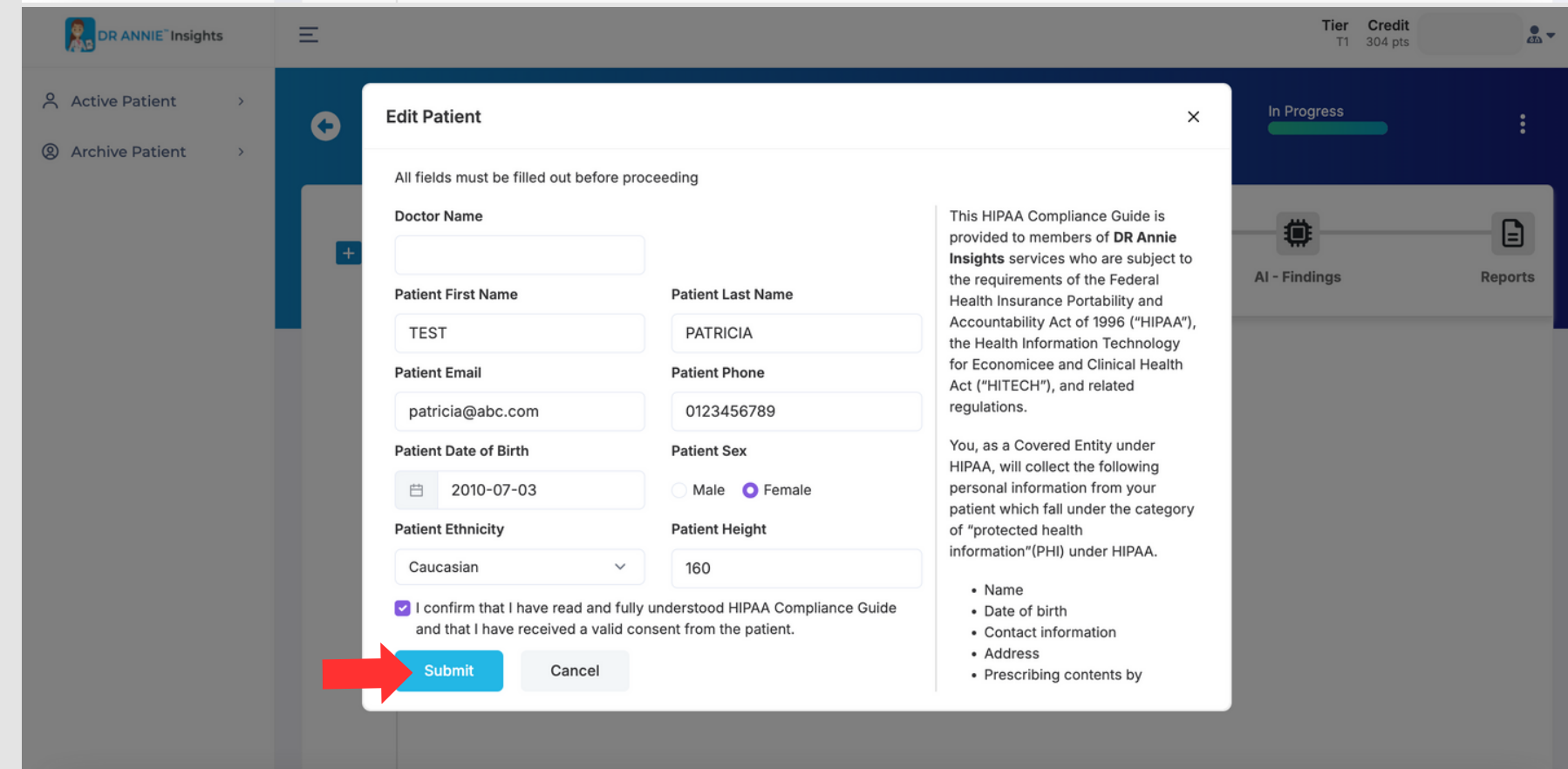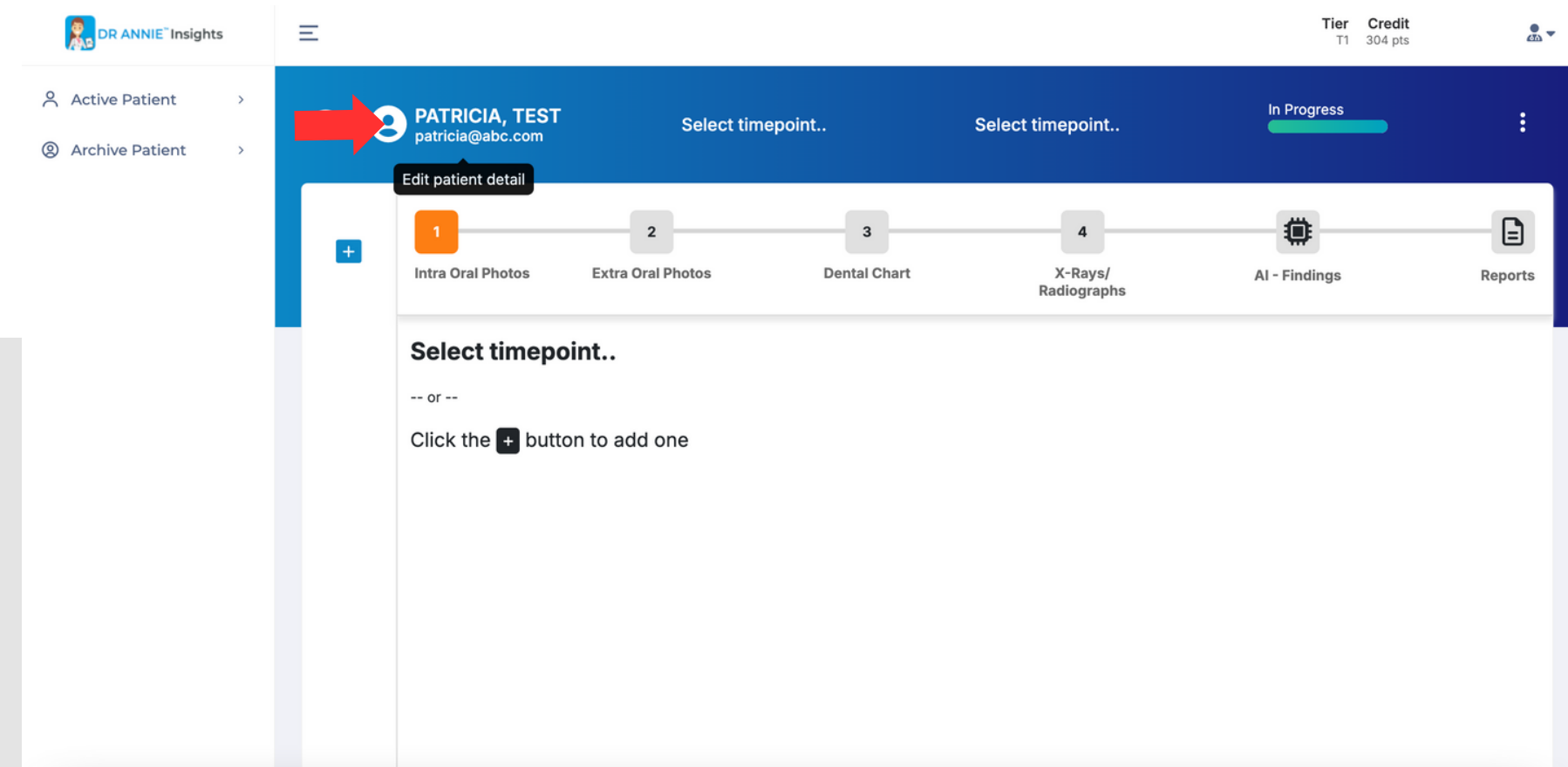

Step 5: Create Timepoint / Crear Timepoint



01

Antes de crear un nuevo caso o timepoint, asegúrate de revisar la configuración de 'Doctor Preference'. Esta página muestra el tratamiento y las herramientas preferidas que se usarán como predeterminadas para generar los reportes de tus casos. Consulta la página de **'Doctor Preference'** para más detalles.

02



Haz clic en el botón '+ New Timepoint' para crear un nuevo timepoint (ver flecha roja).

03

Ingresa los datos requeridos. Haz clic en 'Save' para crear el timepoint y haz clic en 'Close' para regresar.

Nota:

- También puedes crear más de 1 timepoint.
- Asegúrate de tener suficiente credit para crear un nuevo timepoint.
- Si la fecha del timepoint recién agregado es anterior a la de uno existente, el reporte del timepoint existente será eliminado. Sin embargo, no te preocupes—puedes regenerar el reporte en cualquier momento.

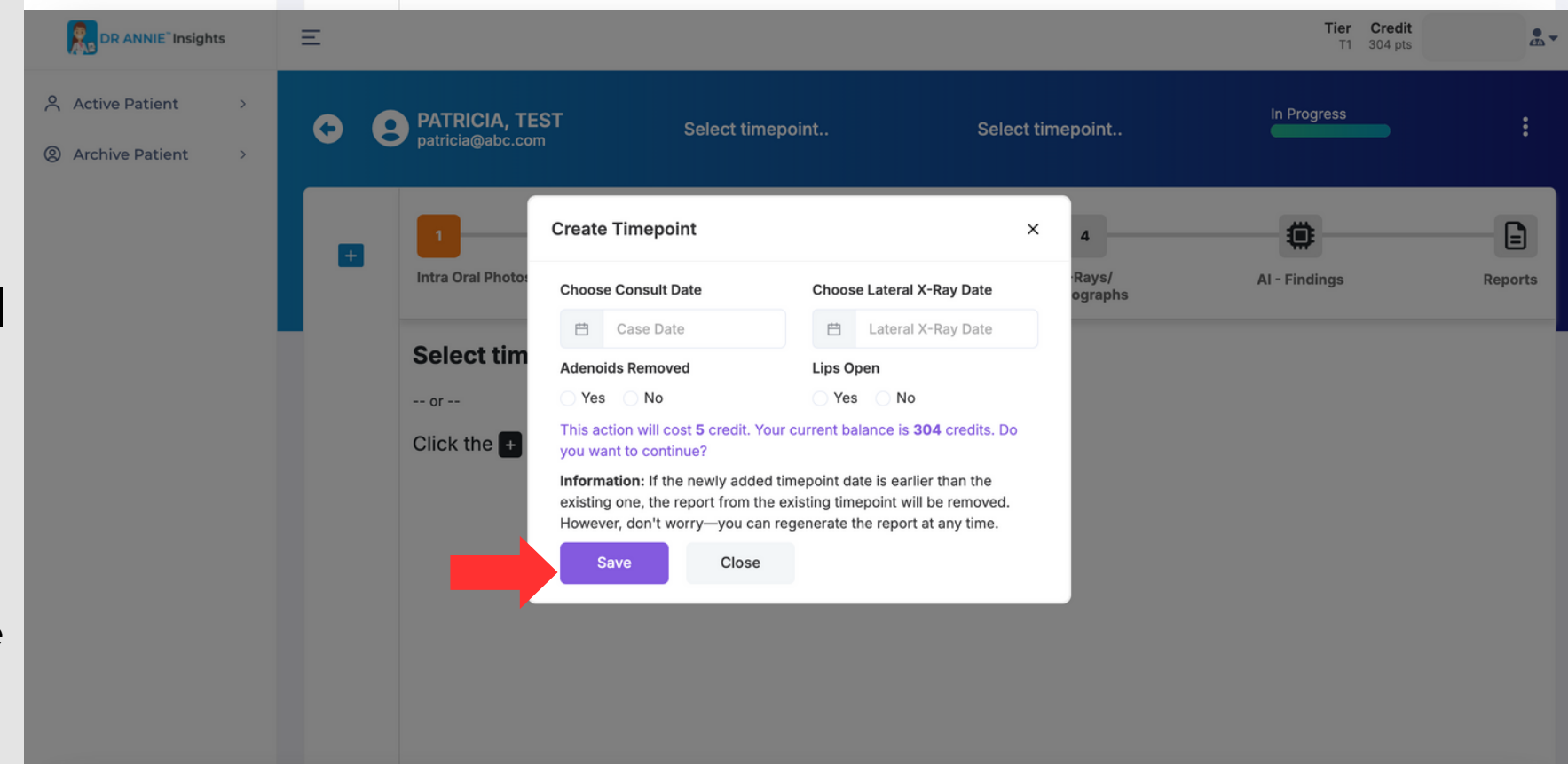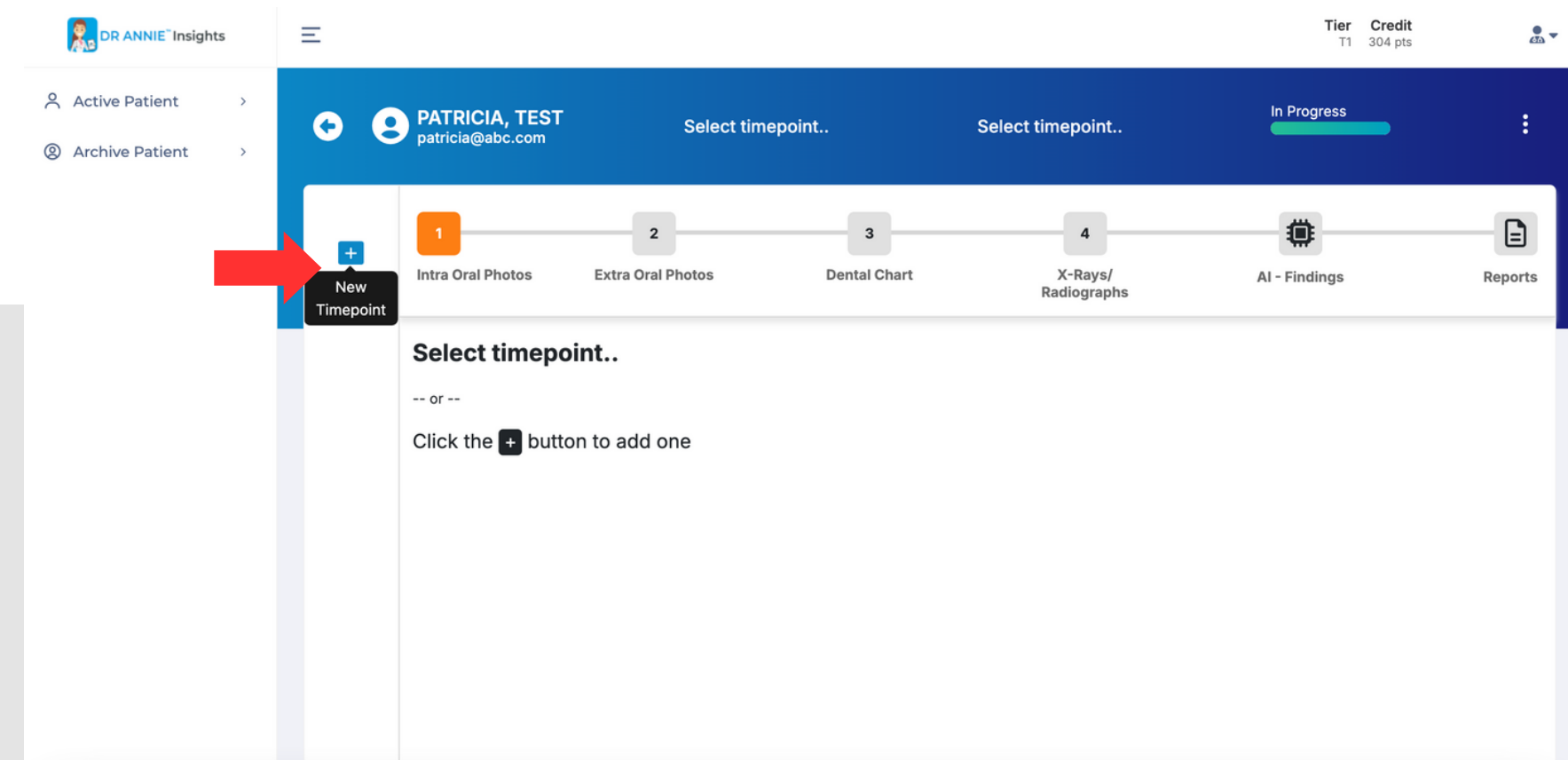

Step 6: Upload Intra-oral Images / Subir imágenes intraorales

01

Haz clic en el recuadro para subir fotos intraorales. Arrastra y suelta los archivos en el área designada, o haz clic para seleccionarlos manualmente.

02



Asegúrate de que las imágenes cumplan con las especificaciones requeridas (por ejemplo, tamaño y claridad) para permitir un reconocimiento preciso por la AI.


03

Las funciones de Zoom, Rotar, Voltear y Restablecer están disponibles si es necesario.

04

Después de subir todas las imágenes requeridas, haz clic en 'Next' para continuar. Este paso es obligatorio y no se puede avanzar sin completarlo.

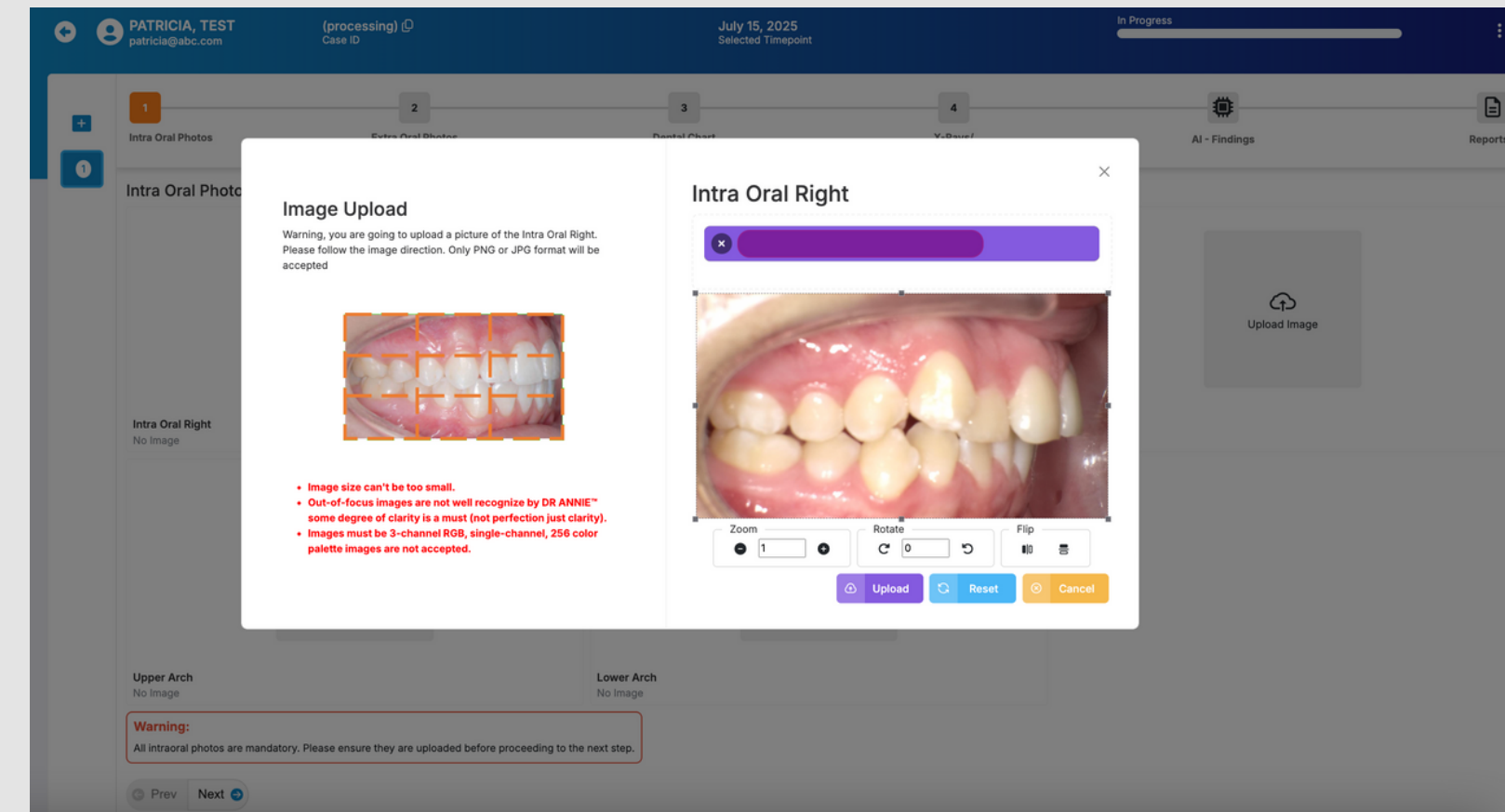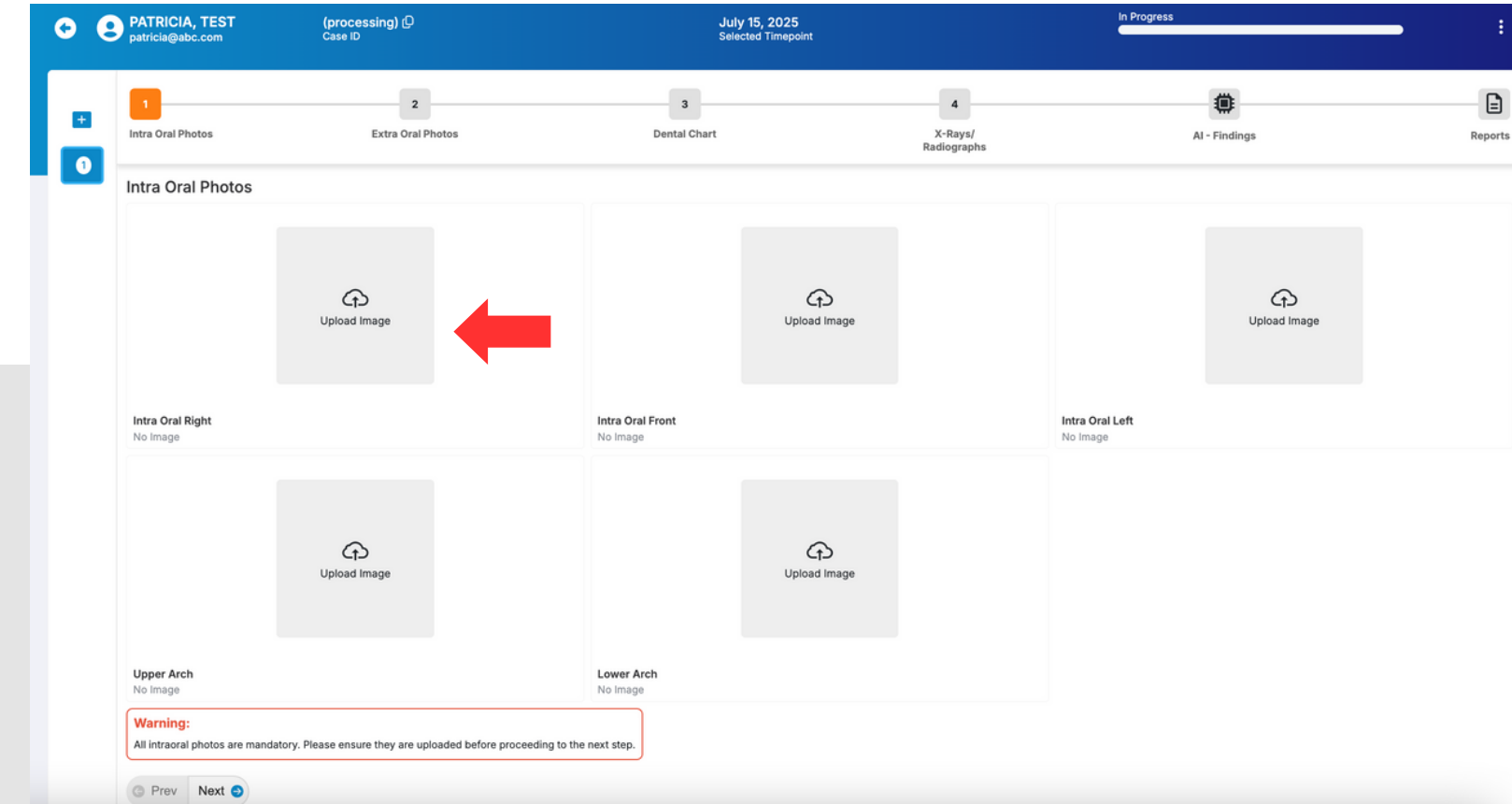

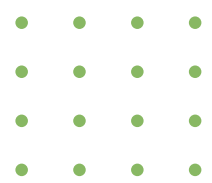


Step 7: Upload Extra-oral Images / Subir imágenes extraorales

01

En la siguiente pantalla, sube las fotos extraorales.

02

Este paso es opcional; puedes hacer clic en 'Next' si no es necesario.

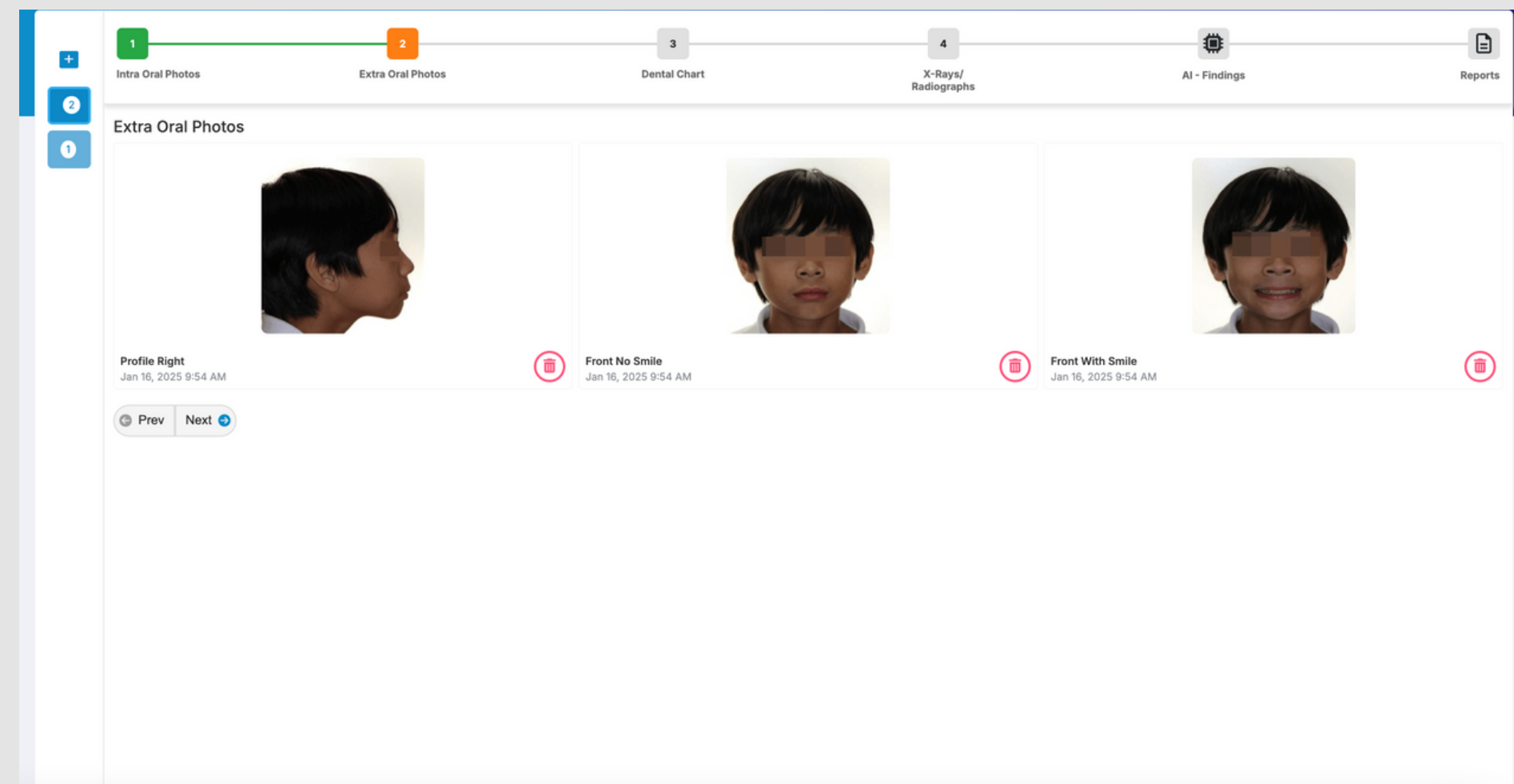

Step 8: Edit Dental Chart / Editar el odontograma

01

Haz clic en los botones de Upper y Lower Arch (incluidos los cuadrantes derecho e izquierdo) para completar la información requerida.

02

Ajusta la condición de los dientes (permanentes y temporales) que se analizarán en el odontograma. Esto afectará los resultados del análisis de DR ANNIE™.

03

La Sequence Worksheet no estará disponible si faltan los 1st molars o los central incisors.

04

Este paso es opcional; puedes hacer clic en 'Next' si no es necesario.

Dental Chart

Upper Arch

Upper Right Quadrant

Upper Left Quadrant

Permanent Teeth

Deciduous Teeth

Lower Arch

Lower Right Quadrant

Lower Left Quadrant

T01 :
T02 :
T03 :
T04 :
T05 :
T06 :
T07 :
T08 :
T09 :
T10 :

Disclaimer:

- Certain dental condition, such as extreme missing teeth or anomalies, may not be accurately detected by the current version of our AI engine. Verification by a doctor is needed.
- Please note: Sequence Worksheet report will not be available if there are missing 1st molar(s) OR missing central incisor(s).

Prev Next

Dental Chart

Arch Parameter

Single Arch Parameters

☒ None

☐ Partial denture

☐ Complete denture

☐ Denture cleaning

☐ Orthodontic

Save Cancel

Tooth Status - Permanent - 01

Adult No. 01

Tooth Parameter

☒ None

☐ Missing (this option will be used on report generation)

☐ Extraction needed

☐ Restoration crown needed

Mesial

☐ Caries ☐ Filling

Distal

☐ Caries ☐ Filling

Buccal

☐ Caries ☐ Filling

Lingual/Palatal

☐ Caries ☐ Filling

Occlusal

☐ Caries ☐ Filling

Save Cancel

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD

Form Subir imágenes X-Ray y formulario HLD (1)

01

Sube las siguientes imágenes X-ray:

- **LATERAL X-RAY**
- **FRONTAL X-RAY (OPTIONAL)**
- **PANORAMIC X-RAY (OPTIONAL)**

02

Subir la imagen X-ray lateral es obligatorio, ya que se requiere para generar el reporte.

Continue...

1 2 3 4 5 6

Intra Oral Photos Extra Oral Photos Dental Chart X-Rays/Radiographs AI - Findings Reports

X-Rays / Radiographs

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 9:54 AM

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 2:52 AM

Dental Panoramic
Jan 16, 2025 9:55 AM

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form

Subir imágenes X-Ray y formulario HLD (2)

Warning: The automated HLD calculation will only work if you have uploaded the lateral image, frontal image, panoramic X-ray, and upper & lower arch images. Please ensure all required images are uploaded before proceeding with the form.

3

HLD Form

HLD Summary

===== HLD Summary =====

1. Is there an impacted maxillary central incisor? : No
2. What is the condition of the patient oral hygiene? : Good
3. Does the patient does have any dental deformity? : No
Detail :
4. Does the patient have any traumatic deviations? : No
Detail :

4

← Prev Next →

03

Haz clic en 'HLD Form' para editar, luego haz clic en 'Save' para aplicar los cambios.

El cálculo automático de HLD solo funcionará si has subido la imagen lateral, la imagen frontal, la X-ray panorámica y las imágenes de upper y lower arch. Asegúrate de subir todas las imágenes requeridas antes de continuar con el formulario.

04

Haz clic en 'Next' para revisar los hallazgos de AI.

HLD Form

Is there an impacted maxillary central incisor?

☒ No ☐ Yes

What is the condition of the patient's oral hygiene?

☐ Poor ☒ Good ☐ Excellent

Does the patient have any dental deformity?

☒ No ☐ Yes

Please describe the dental deformity in detail, if present.

Does the patient have any severe traumatic deviations?

☒ No ☐ Yes

If applicable, provide a brief description of the severe traumatic deviations.

Does the patient have surgical malocclusion?

☒ No ☐ Yes

What is the number of ectopic eruption teeth present?

0

Is there a posterior crossbite, and does at least one of the affected teeth have to be a molar?

☒ No ☐ Yes

Cancel

Save

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar y verificar los hallazgos de AI(1)

01

La página de AI-Findings muestra los resultados detectados por AI basados en las imágenes e información que subiste previamente, incluyendo Intraoral, Extraoral, Panoramic Radiographs, Cephalometric (Lateral and Frontal), y Dental Arch (Upper and Lower).

02

Puede tomar uno o dos minutos para que la AI complete el análisis e identifique los dental findings.

Continue...

The screenshot displays the 'AI - Findings' section of a dental software interface. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings (highlighted with an orange gear icon). A 'Reports' icon is at the far right. On the left, a vertical sidebar contains a '+' icon and buttons for '2' and '1'. The main content area is titled 'Intra Oral' and contains a grid of dental images. The first row shows 'Intra Oral Right', 'Intra Oral Front', and 'Intra Oral Left'. The second row shows 'Upper Arch' and 'Lower Arch'. Each image has a green checkmark and the text 'Not available' below it. Below the images are expandable sections for 'Extra Oral', 'Panoramic Radiographs', 'Cephalometric (Lateral & Frontal)', and 'Dental Arch'. A red-bordered warning box at the bottom contains the following text: 'Warning: Please verify the Cephalometric and Dental Arch sections before proceeding to the next step. Click the yellow 'Verify' button located below the Cephalometric and Dental Arch images to confirm the results. Ensure that you carefully review both the Cephalometric (Lateral & Frontal) and Dental Arch (Upper & Lower) sections, as they are critical components of treatment planning and staging. The AI-generated report will be based on this information. For detailed instructions, please refer to the Instruction Manual'. At the bottom of the interface are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar y verificar los hallazgos de AI (2)

03


Desplázate hacia abajo para encontrar las secciones de Cephalometric y Dental Arch. Por favor, verifica ambas secciones.

04

Haz clic en el botón amarillo 'Verify' debajo de las imágenes de Cephalometric y Dental Arch para confirmar los resultados (ver flecha roja).

Por favor, revisa ambas secciones: Cephalometric (Lateral & Frontal) y Dental Arch (Upper & Lower).

Continue...

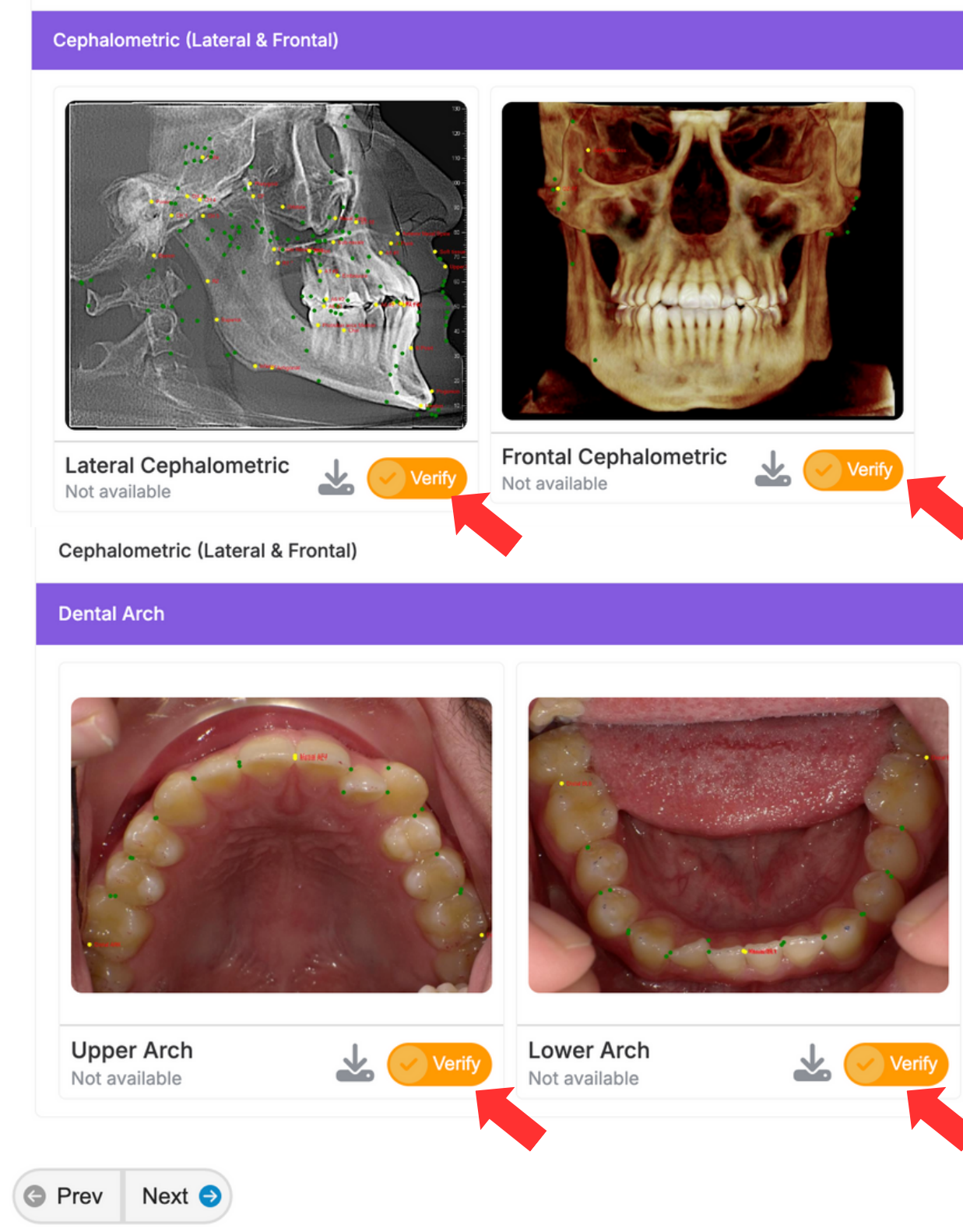

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar y verificar los hallazgos de AI (3)

05

Después de hacer clic en el botón 'Verify' debajo de Lateral Cephalometric, la pantalla se mostrará como en el ejemplo.

Revisa manualmente los puntos detectados por AI para asegurar su precisión. Puedes arrastrar y soltar los puntos según sea necesario.

Las instrucciones están disponibles en la esquina inferior izquierda. También puedes acercar y alejar la imagen mientras digitalizas usando tu mouse.

Las pautas de digitalización aparecerán en la esquina superior derecha cuando hagas clic en cualquiera de los puntos, para tu referencia.

Continue...



Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar y verificar los hallazgos de AI (4)

06


Usa las funciones en la barra superior—como Reset Process, API Template Percentage y los deslizadores de Contrast y Brightness—según sea necesario.

- Reset Process: Te permite comenzar de nuevo si deseas rehacer la digitalización.
- API Template Percentage: Si la AI no puede generar resultados precisos o si faltan algunos puntos, utiliza la plantilla API al 60% o 70% hasta que la AI detecte correctamente los puntos. Ajusta el porcentaje según sea necesario.
- Contrast y Brightness Sliders: Ajústalos para mejorar la visibilidad de la imagen y resaltar detalles importantes.

07

Una vez que hayas terminado de revisar los puntos, haz clic en el botón verde 'Save' en la esquina superior izquierda (ver flecha roja).

Luego, haz clic en el botón con la flecha amarilla para regresar.
Continue...

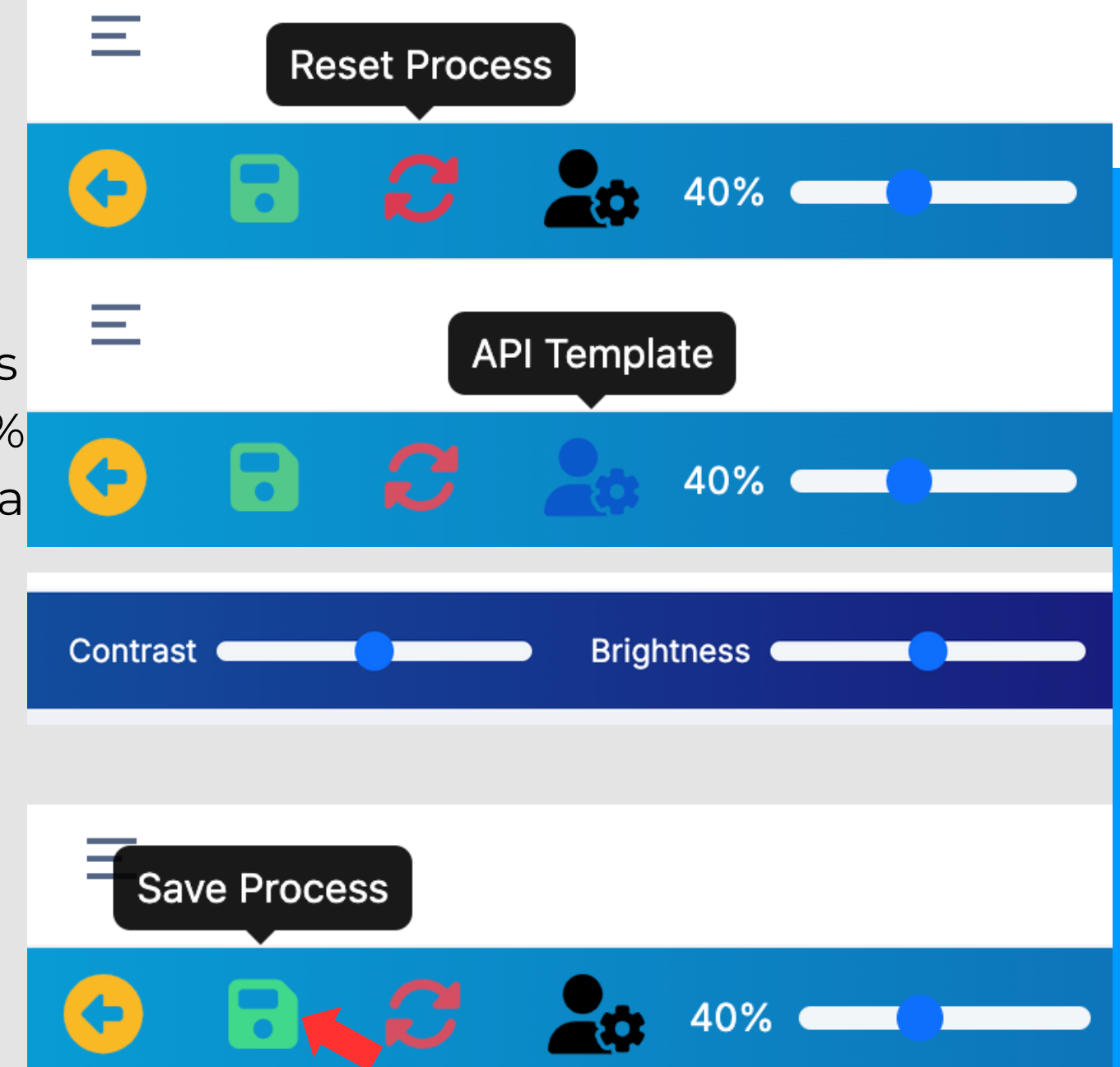

Step 10: Review & Verify The AI Findings / Revisar y verificar los hallazgos de AI (5)

08

Una vez que hayas completado el paso de 'Verify' para la imagen, el botón cambiará a un ícono amarillo de 'Check'.

09

Asegúrate de **'Verify'** (o revisar) ambas secciones: **Cephalometric (Lateral & Frontal)** y **Dental Arch (Upper & Lower)** antes de continuar, ya que son componentes fundamentales para la planificación y la etapa del tratamiento.

El reporte generado por AI se basará en esta información.

10


Una vez que hayas terminado el proceso de verificación, haz clic en 'Next' para generar el report.

Ten en cuenta que no podrás continuar con el siguiente paso sin verificar ambas secciones.


Verified



Cephalometric (Lateral & Frontal)

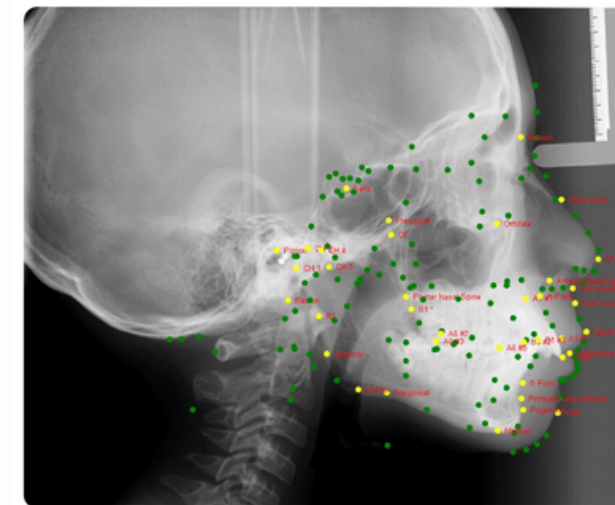

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 10:04 AM

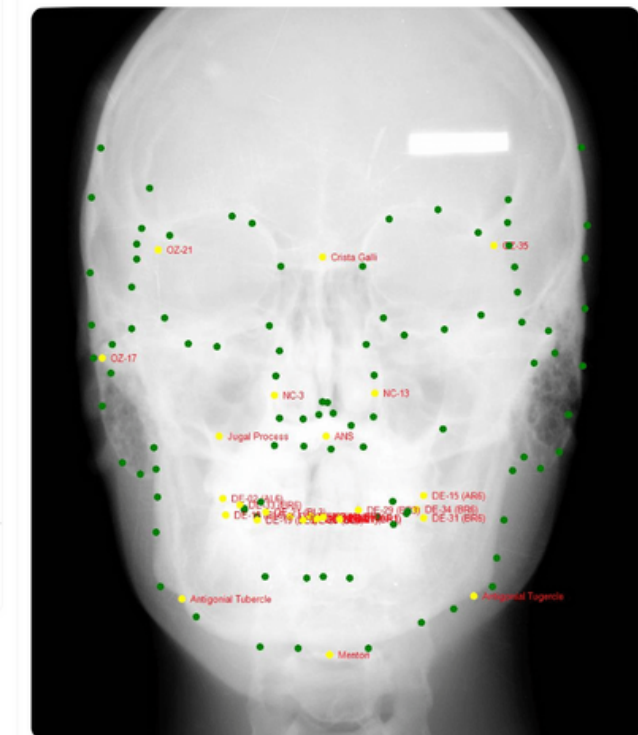

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 4:08 AM



Dental Arch

Prev Next



Step 11: Generate The Report / Generar el reporte (1)



Los informes tienen 4 capas:

Report	Required	Details
Standard	Lateral cephalometric image and intraoral photos	• Proporciona un informe básico con aproximadamente un 70% de precisión • Adecuado para evaluaciones rápidas • Informe generado en 2–3 minutos
Standard+	Lateral cephalometric image, intraoral photos, and panoramic X-ray	• Ofrece un informe más detallado, incluyendo el nivel de dificultad del caso y las etapas del tratamiento • Precisión aproximada del 80% • Informe generado en 3–5 minutos
Complete	Lateral and frontal cephalometric images, panoramic X-ray, and intraoral photos	• Ideal para casos con mordida cruzada o asimetría facial • Proporciona un análisis detallado con una precisión del 85–90% y etapas del tratamiento • Informe generado en 5–8 minutos, dependiendo de la complejidad
VIP	Para casos complejos como aquellos con multiple missing teeth, supernumerary teeth, congenital anomalies, or surgical needs.	• Revisado por la IA y por ortodoncistas expertos • Informe disponible en 1–3 días (no en tiempo real) • Diseñado para la planificación de tratamientos altamente complejos

Step 11: Generate The Report / Generar el reporte (2)

01

Selecciona el tipo de report que deseas generar:

- **STANDARD**
- **STANDARD+**
- **COMPLETE**
- **VIP**

Para el VIP Report, los usuarios serán dirigidos a una página especial. Esta página ofrecerá servicios de expertos. Los servicios serán realizados por doctores con experiencia.

02

Se requiere al menos una lateral cephalogram X-ray verificada y un lower dental arch para generar un Standard Report.

03

El Standard Report se generará en 2 a 3 minutos, el Standard+ Report en 3 a 5 minutos, y el Complete Report en 5 a 8 minutos.

The screenshot displays a web interface for generating reports. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings. Below the progress bar, there are four buttons: 'Generate Standard Report', 'Generate Standard Plus Report', 'Generate Complete Report', and 'VIP Report Service'. A table lists the generated reports with columns for 'Report Name', 'Date Create', and 'Action'.

Report Name	Date Create	Action
01 - Dental Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
02 - Problem List	Apr 28, 2025, 10:01	
03 - Treatment Rationale	Apr 28, 2025, 10:01	
04 - Case Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
05 - Dental Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
06 - Skeletal Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
The following reports are full comprehensive advanced reporting, will be available within 10-15 minutes. Thank you for your patience		
07 - Tracing Measurement	Apr 28, 2025, 10:02	
08 - Sequences Worksheet	Apr 28, 2025, 10:02	
09 - Full Comprehensive	Apr 28, 2025, 10:02	
10 - HLD Summary	Apr 28, 2025, 10:01	

At the bottom of the table, there are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Continue...

Step 11: Generate The Report / Generar el reporte (3)

04

Para el VIP Report Service, los usuarios serán dirigidos a una página donde los datos se completan automáticamente. Después de revisar y confirmar que toda la información es correcta, haz clic en 'submit' para enviar la solicitud.

05

El reporte será procesado por AI y un ortodoncista experto, y la duración dependerá de la complejidad del caso—normalmente entre 1 y 3 días. Se enviará una notificación por correo electrónico una vez que el VIP Report esté completado.

Generate VIP Report

×

Patient Info

Patient First Name

TEST

Patient Last Name

Patient Email

Patient Phone

Patient Date of Birth

Patient Sex

F

Patient Ethnicity

Patient Height (cm)

CA

168

Intra Oral



Upper Arch
No Image




Lower Arch
No Image

X-Rays / Radiographs



Lateral Cephalometric
No Image

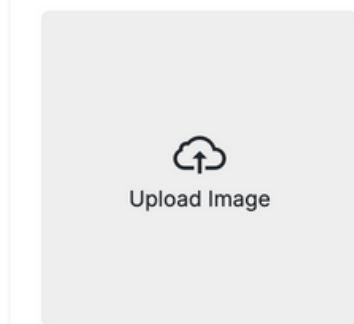

Frontal Cephalometric
No Image



Dental Panoramic
No Image

By continuing, you agree to the VIP Report processing fee and acknowledge that any previous report will be overwritten. Are you sure to submit the data?



Submit

Cancel

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (1)



Cada report proporciona información detallada con distintos niveles de precisión sobre la condición dental del paciente, incluyendo:

1. DENTAL EVALUATION
2. PROBLEM LIST
3. TREATMENT RATIONALE
4. CASE EVALUATION
5. DENTAL FINDINGS
6. SKELETAL FINDINGS
7. TRACING MEASUREMENTS
8. SEQUENCES WORKSHEET
9. FULL COMPREHENSIVE ANALYSIS
10. HLD SUMMARY

Continue...

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (2)

01

Dental Evaluation

Este informe proporciona un resumen de evaluaciones, incluyendo valoraciones dentales, ortodónticas, periodontales y restaurativas, junto con una estimación de costos presentada en puntajes. También se incluirán los hallazgos dentales detectados por AI. Ten en cuenta que todos los informes están disponibles para descargar en formato PDF (ver flecha roja).

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Evaluation Summary

Patient Name:

Evaluation Name:

Evaluation Date:
12 Jan 2025 v 1.0.0

A. Dental Evaluation:
Lower difficulty

B. Orthodontic (Tooth Alignment):
Some teeth alignment are needed (esthetic)

C. Periodontic (Gum Health):
Some dental/ oral hygiene maintenance is recommended

D. Restorative (Cavity or Fillings):
Some dental/ oral restoration is recommended (possible filling, cavities)

E. Cost Estimation:
The total cost estimation based on these assessment is 1 out of 4 (affordable)

Evaluated Image(s): 14 Image(s)

Analyzed Image(s): 1 Image(s)

Ref:
AnnieDS : AN2000014162
Assessment : TPIX-96E8F198-383F-468C-BC71-04AFDBCFA962

Score

A

B

C

D

E

1

1

1

1

1

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Image Teeth

Show 10 entries

Search:


IMAGE TYPE

DETECTED DENTAL FINDINGS

IMAGE RESULT

DENTAL PANORAMIC

Ortho : 0, Perio : 0, Brackets : 0, Decay : 0, Restoration : 0

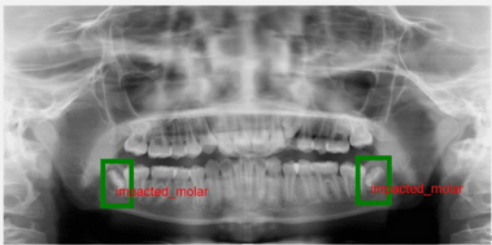

FRONTAL NO SMILING

No Findings



Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (3)

02

Problem List

Este informe incluye Height Prediction, Bolton Analysis, Airway Analysis y Transverse Evaluation. También destaca consideraciones importantes relacionadas con las dimensiones horizontal, vertical y symmetry, así como cualquier special considerations.

Problem List

Problem List

Problem Summary

#Case:

Patient Name:

Doctor Name:
PORTAL DEMO

Birth Date:

01/01/2013 (12.03 years)

Sex/Gender:

Male

Last X-Ray Date:

01/12/2025

Prediction Detail

Height Prediction

Assumed skeletal age: 12.0

Current height: 150.0 cms

Amount of adult growth
achieved: 83.5 %

Bolton Analysis

Bolton 6 ratio: 0.907

Bolton 12 ratio: 1.058

Airway Analysis

If the patient is clinically
diagnosed as a
mouthbreather, observed
mouthbreathing is probably
not caused by adenoid
blockage of the airway.

Transverse

No data available

Problem List

Problem List

Significant Considerations

Horizontal

Class II malocclusion 1

due to the lower molar 18

Severe Overjet 5

Vertical

Deep Bite 7

Skeletal Deep Bite 15

due to the mandible &
palate 39

Symmetry

Midline Asymmetry 10

Special Consideration

Upper anterior teeth
relatively small.

Upper arch tooth mass
relatively small.

Comment

No data available

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (4)

03

Treatment Rationale (1)

Este informe proporciona el razonamiento detrás de la decisión del arco inferior, incluyendo: original condition, computer decision, auxiliary appliance, post-treatment plan, y lower third molar probabilities. También incluye los siguientes detalles:

- Initial conditions
- Maximum permissible arch length increase (within doctor limits) due to contributing factors
- Resultant arch length discrepancy considering all possible increases (C + G)
- Final computer-generated decision
- Work-up presented is

Continue...

Treatment Rationale

Original Condition

Facial Pattern: -0.0 CD - Mesofacial

Lower Arch form: Ovoid

Lower arch length discrepancy (ALD): 1.2 mm SHORTAGE

Leeway Space: 0.0

Max use of leeway space: 0.0 mm

Total arch length discrepancy: 1.2 mm SHORTAGE

Computer Decision

UPPER ARCH: NON-EXTRACTION

Convexity Change: REDUCE 1.0 mm

LOWER ARCH: NON-EXTRACTION

Lower Incisor: FORWARD 0.3 mm

Buccal Expansion: GAIN 0.5 mm

Lower Molar: FORWARD 0.0 mm

Auxiliary Appliances

Activator: NOT INDICATED

Palate Separation: NOT INDICATED

Headgear: CERVICAL

Headgear: LIGHT FORCES

Post Treatment

Pentamorphic Arch Form: Ovoid

Arch Length Relapse: 2.3 mm

Lower third molar probabilities

Impaction: 15 %

Marginal: 43 %

Functional: 42 %

Treatment Rationale

1. Initial Conditions

A. Original Arch Length

1.2 mm shortage

B. Useable Leeway Space

0.0 mm

C. Total Initial Discrepancy(A+B)

1.2 mm shortage

2. Maximum Permissible Arch Length Increase (Within Doctor Limits) Due To

D. Lower Incisor Repositioning

4.2 mm increase

E. Buccal Expansion

0.5 mm increase

F. Lower Molar Distal Movement

0.0 mm

G. Total Possible Increase (D+E+F)

4.7 mm increase

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (5)

03

Treatment Rationale (2)

Este informe también proporciona Reason for Upper Arch Decision que incluye:

- Convexity change
- Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower
- First molar movement required
- First molar movement clinical limit
- Work-Up Presented Is

Treatment Rationale

REASON FOR UPPER ARCH DECISION

1. Convexity change	1.0 mm reduce
2. Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower	5.0 mm backward
3. First molar movement required	1.5 mm backward
4. First molar movement clinical limit	5.8 mm backward
5. Work-Up Presented Is	NON-EXTRACTION

Comment

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (6)



04

Case Evaluation

Este informe proporciona Auxillary Appliance, Probability of Lower Third Molar, incluyendo lower, upper analysis y Teeth Type.

Upper Analysis	
Movement of First Molar (non-ext.) Required for Class I	1.0 mm Distal
Clinical Limit	
Resulting Expected Space for 2nd & 3rd Molars at Maturity (non-ext.)	19.6 mm
Required Space for 2nd Molars	9.0 mm to 11.0 mm
Required Space for 2nd & 3rd Molars	18.0 mm to 22.0 mm

Upper Analysis	
Upper Arch	NON-EXTRACTION
Lower Arch	NON-EXTRACTION
Lower Incisor	Forward 0.3 mm
Buccal Expansion	Gain 0.5 mm
Lower Molar Movement	Forward 0.0 mm

Case Evaluation Detail

Auxiliary Appliances

Headgear:

CERVICAL

Activator:

NOT INDICATED

Palate Separation:

NOT INDICATED

Convexity Objective:

Reduce 1.0 mm

Lower Arch Length Discrepancy (original arch), Including useable leeway (E) space::

1.2 mm Shortage

Probability of Lower Third Molar

Impaction:

15.%

Eruption Questionable Function:

43.%

Eruption Functional:

42.%

Lower Arch

LOWER ANALYSIS	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (LT)	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (RT)	EFFECT ON ARCH LENGTH	RESULTING DISCREPANCY
Lower Incisor to Ideal	0.2 mm Bwd.	0.4 mm Bwd.	0.8 mm Decrease	2.0 mm Shortage

Teeth Type																
TEETH TYPE	L6	L5	L4	L3	L2	L1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	TOTAL	SUM OF INCISOR	NORM	
Lower Arch	11.4	8.0	7.7	7.6	6.3	5.7	5.7	6.3	7.5	7.8	7.5	11.7	93.2	24.0 MM	22.2	
Upper Arch	8.9	6.7	6.9	6.4	6.8	7.9	8.1	6.4	7.5	7.2	6.3	9.0	88.1	29.2 MM	N/A	

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (7)

05

Dental Findings

Este informe proporciona detalles de Lateral view Before treatment, incluyendo:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton
- Esthetics
- Nasopharyngeal Airway
- Frontal Before Treatment

También incluye frontal view before treatment, que abarca:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Lateral Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5	*
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4	*
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2	***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7	*
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7	*
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1	*

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Frontal Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5	
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1	
#06 Intermolar Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7	***
08 Inter canine Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1	*
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4	*

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (8)

06

Skeletal Findings

Este informe muestra detalles de skeletal cephalometric desde la lateral view before treatment, incluyendo skeletal relations, jaw-to-cranium position y internal structure. También incluye el mismo análisis desde la frontal view.

También están disponibles las imágenes de Tracing Set.

Skeletal Cephalometric

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#13 Convexity	7.2 mm	6.1 mm	0.4	
#15 Lower Facial Height	39.1 dg	48.0 dg	-2.2	**
84 Present Patient Height	150.0 cm	147.7 cm		
91 Posterior face height	78.9 mm			
92 Anterior face height	118.9 mm			
93 Posterior/Anterior ratio	66.3 %			
94 Saddle Angle	130.1 dg	123.0 dg	2.4	**
96 Condylion-A point	95.7 mm	90.4 mm	1.5	*

Skeletal Cephalometric

Frontal Before Treatment

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#14 Max-Mand Width Left	-13.8 mm	-11.8 mm	-0.7	
#16 MaxiMand Width Right	-11.5 mm	-11.8 mm	0.1	
17 MaxiMand Midline	-0.3 dg	0.0 dg	-0.1	

Jaw to Cranium

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
--------	----------------	---------------	----------------	----------------

Skeletal Cephalometric

Tracing Set

AN2000014162

AN2000014162

VISUAL NORMS

ANN

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (10)

08

Sequence Worksheet (1)

- La Hoja de Secuencia proporciona un informe dividido en tres secciones: Narrative, Letter y Diagrama del Plan de Tratamiento.
- La sección de 'Narrative' resume la secuencia del tratamiento para los arcos superior e inferior, detallando las actividades de cada mes. También incluye una carta dirigida al paciente.
- La sección de 'Letter' ofrece un resumen del tratamiento destinado al doctor.

Continue...

Sequence Worksheet

Narrative (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Step-by-Step Treatment Summary for

Upper Arch Treatment Sequence:

1. ****Month 1-4: Expand Arch****
- The upper arch will be expanded. This helps to create space and improve the alignment of the teeth.
2. ****Month 5-7: Correct Convexity and Distalize 6****
- Simultaneously, we will correct the convexity (the outward curvature of your teeth) and move the molar teeth (6th teeth from the front) backwards to align properly with the rest of the teeth.
3. ****Month 6-10: Intrude 1 and Retract 4 and/or 5****
- From month 6, while continuing previous treatments, the front tooth (Incisor 1) will be moved downwards (intruded) to correct its height.
- The canine and premolar teeth (4 and 5) will be pulled back to improve the bite and aesthetic appearance.
4. ****Month 10-11: Retract 3****

Sequence Worksheet

Letter (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Subject: Treatment Design Review for

Dear Dr. Portal Demo,

I hope this message finds you well. After reviewing Vincent Ann's facial structure and anticipating how they might respond to dental treatment, our planned approach indicates a significant adjustment to the position of the front teeth is necessary.

We would appreciate your expertise in evaluating our treatment plan. Could you please consider whether standard dental treatments would be effective for this case? Alternatively, we have outlined a few less conventional methods that could be considered:

- Implementing mechanisms to help open the bite
- Introducing a phase of treatment using a functional appliance
- Aiming for a slightly deeper bite than usual

These methods are not typically standard, but given the unique requirements of this case, they might be worth considering. We strive to keep you informed when a case requires exceptional procedures.

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (11)


08

Sequence Worksheet (2)


Se proporciona también una tabla de Plan de Tratamiento descargable en formato JPG como parte del report. Haz clic en 'Zoom' para ver una vista ampliada del diagrama.

Nota:

- La función 'Letter' puede no estar disponible para ciertos casos.
- Sequence Worksheet NO estará disponible si hay missing 1st molar(s) OR missing central incisor(s).

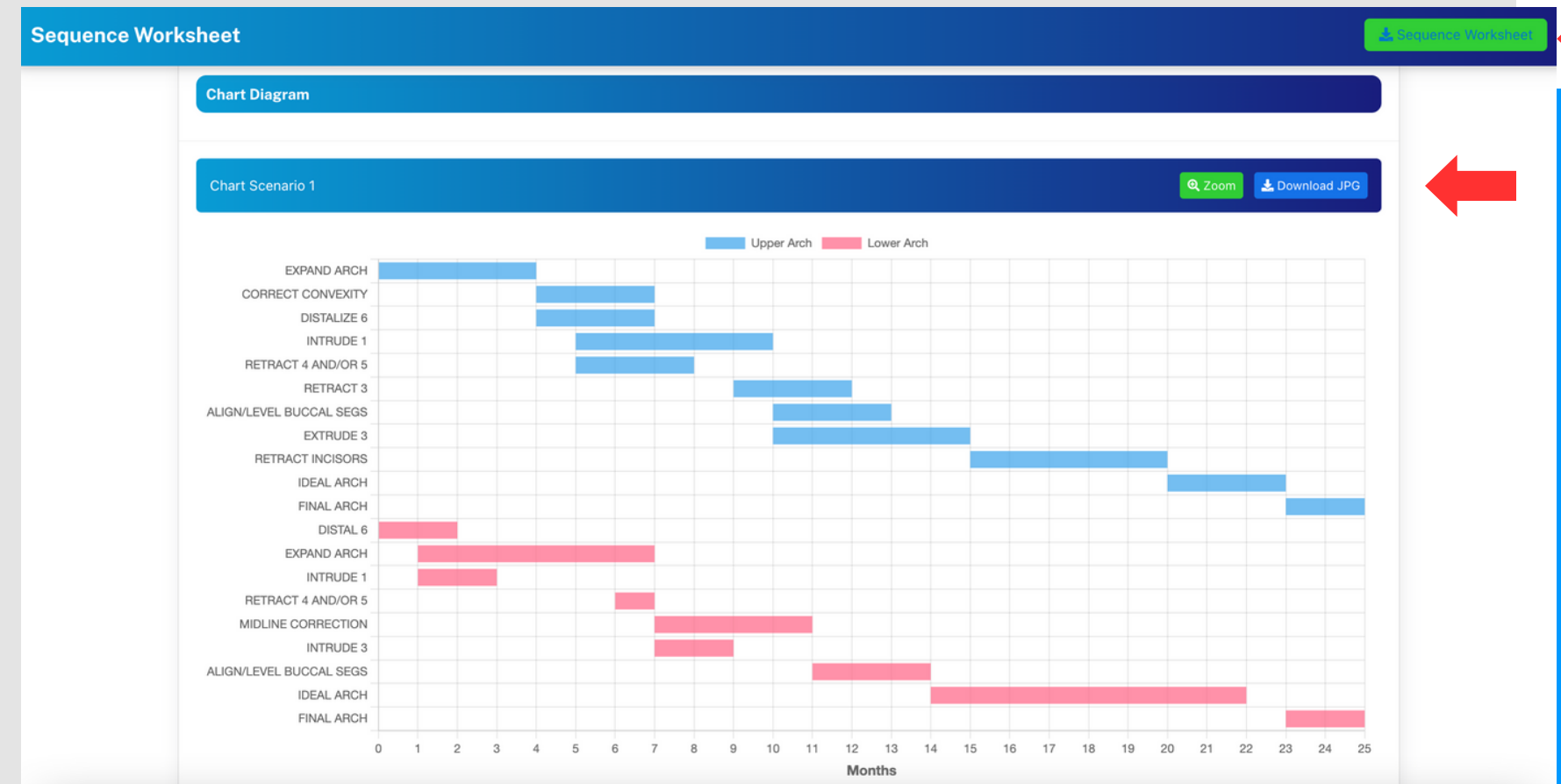

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (12)


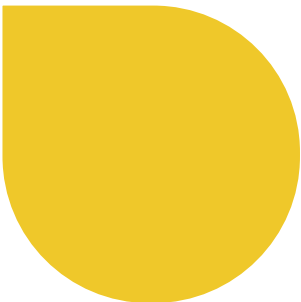


VISUAL NORMS ANN[®]

09

Full Comprehensive Report

Podrás descargar un informe completo en formato PDF. Incluye todos los resultados, desde Report 1 hasta Report 8.

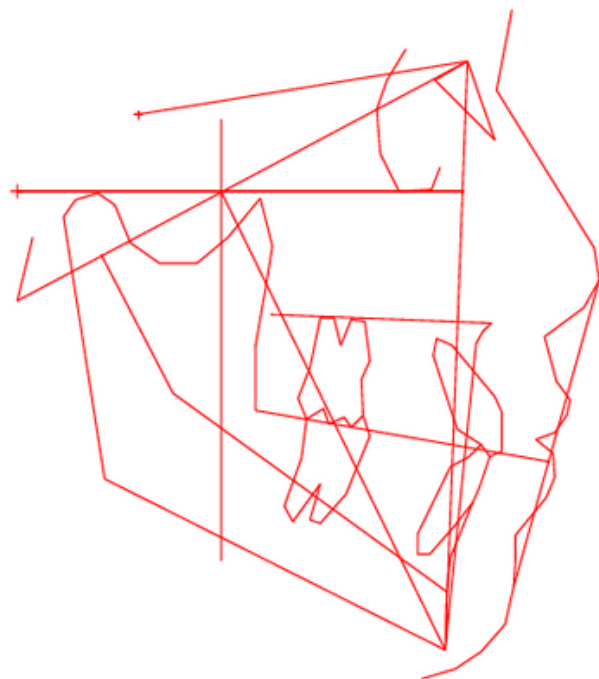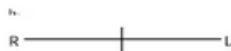

ANN

Data Services
HDS, Inc.

+1847665-9458 47 W Polk St
Chicago, IL 60605

ANN Case Number: 0000 1416 2
ANN Run date: 06/17/2025

X-Ray date: 01/12/2025 Age: 12.0
Birthdate: 01/01/2013 Sex: Male 4

Reference: C C D I

CCD - ORTHODONTIC CONDITIONS

LATERAL BEFORE TREATMENT

FRONTAL BEFORE TREATMENT

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM NORM

- Appears on tracing

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM NORM

- Appears on tracing

DENTAL RELATIONS

DENTAL RELATIONS

01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5 *
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4 *
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2 ***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7 *
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7 *
#11 Interincisor Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1 *

02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1
#06 Interincisor Width (B6-B5)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7 ***
08 Interincisor Width (B3-B5)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1 *
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4 *

DENTAL TO SKELETON

DENTAL TO SKELETON

#18 A6 Molar Position to PTV	14.5 mm	15.0 mm	-0.2
#20 B1 to A-Po Plane	2.1 mm	3.0 mm	-0.4
22 A1 to A-Po Plane	13.0 mm	5.5 mm	3.4 ***
#24 B1 Inclination to A-Po	24.2 dg	23.0 dg	0.3
26 A1 Inclination to A-Po	41.3 dg	36.0 dg	1.3 *
27 Occlusal Plane to Xi	0.9 mm	-0.5 mm	0.5
28 Inclination of Occl Plane	16.0 dg	25.0 dg	-2.2 **
54 B1 Inclination to FH	49.6 dg	65.0 dg	-3.1 ***

19 B6 to J-Ag Left	6.2 mm	5.4 mm	0.4
21 B6 to J-Ag Right	9.6 mm	5.4 mm	2.1 **
#23 Denture to Jaw Midlines	-2.0 mm	0.0 mm	-1.3 *
25 Occlusal Plane Tilt	-2.2 mm	0.0 mm	-1.1 *

ESTHETICS

29 Lower Lip to Esthetic Plane	3.3 mm	2.0 mm	0.7
30 Upper Lip Length	30.5 mm	26.8 mm	1.8 *
31 Lip Embrasure to Occl Plane	-0.8 mm	-3.0 mm	1.1 *
58 Nasolabial Angle	103.0 dg	110.0 dg	-1.4 *

NASOPHARYNGEAL AIRWAY

62 N-S-Ba	133.9 dg	129.6 dg	0.9
63 Ba-S-PNS	56.3 dg	63.0 dg	-2.7 **
85 Airway Percent	63.0 %	58.5 %	0.3
86 Linder-Aronson AD1	22.4 mm	24.0 mm	-0.3
87 Linder-Aronson AD2	19.1 mm	19.5 mm	-0.1
88 Distance PTV to Adenoid	15.0 mm	11.7 mm	0.7

Step 12: Review The Reports / Revisar los Reports (13)

10

HLD Summary

Este informe te proporciona los puntos principales sobre la Hoja de Puntuación del Índice HLD (Handicapping Labio-Lingual Deviation). También muestra tu estado de calificación basado en el Índice HLD.

También están disponibles las pautas y reglas para aplicar el Índice HLD.

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

A. Conditions 1-5 Are Automatic Qualifiers

- 1 Cleft Palate YES
- 2 Deep impinging bite with signs of tissue damage, not just touching palate NO
- 3 Anterior crossbite with gingival recession NO
- 4 Severe traumatic deviation (i.e., accidents, tumors, etc. attach description) NO
- 5 Impacted Maxillary Central Incisor NO

Continue to scoring below if there are no qualifying conditions checked above

B. Conditions 6-14 Must Score 28 Points or More to Qualify

	Unit	Index	Score
6 Overjet (one upper central incisor to labial of the most labial lower incisor)	mm	x 1	11

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

Guidelines and Rules for Applying the HLD Index

The provider is encouraged to score the case and exclude any case that obviously would not qualify for treatment. Upon completion of the HLD Index score sheet, review all measurements and calculations for accuracy.

General Instructions

- ☒ Indicate by checkmark next to A or B which criteria you are submitting for review.
- Position the patient's teeth in centric occlusion.
- Record all measurements in the order given and round off to the nearest millimeter.
- Enter the score "0" if condition is absent.

A. Automatic Qualifiers (Conditions 1-5)

Indicate with an "X" if condition is present.

Cleft Palate
a cleft palate deformity must be demonstrated on the study model, if the deformity cannot be demonstrated on the study model, the condition must be diagnosed by properly credentialed experts and the diagnosis must be supported by documentation. If present, enter an "X".

Deep Impinging Bite
deep impinging overbite with signs of tissue damage of the palate, not just touching palate, including inflammation or damage of the gingiva palatal to the maxillary incisors. The condition must be clearly visible in the mouth and demonstrate on photos. On study models, the mandibular teeth must be clearly touching the palate and the tissue indentations or evidence of soft tissue damage or inflammation must be clearly visible. Tissue indentations without soft tissue damage do not meet the criteria. If present, enter an "X".

Tier

Tier
T1 Credit
242 pts

DR ANNIE™ Insights

Active Patient >

Archive Patient >

Patient List

Patients

Search patient...

+ New Patient

Patient

Profile

Time Point

Progress

Action

No data to display



Tier
T1 Credit
242 pts



- Tier muestra tu nivel o posición actual en DR ANNIE™ Insights y se encuentra en la esquina superior derecha (ver flecha roja).
- Hay tres niveles: Tier 1, Tier 2 y Tier 3.
- Cada tier ofrece su propio conjunto de beneficios.
- Consulta la imagen para ver los detalles de los beneficios y las pautas de mejora, o visita la sección de **‘Pricing & Tier Guidelines’**.

PRICING AND TIER
UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules

Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:

You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100–200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:

You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3

Standard \$10
Standard + \$15
Complete \$20

0 - 100
Report(s) Annually

TIER 2

Standard \$8
Standard + \$10
Complete \$15

100 - 200
Report(s) Annually

TIER 1

Standard \$5
Standard + \$8
Complete \$10

200+
Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50


VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.


User Credit / Crédito del usuario

- Haz clic en el ícono en la esquina superior derecha, luego selecciona 'Credits' o haz clic en 'Credit' en la barra superior (ver flechas rojas) para ver tu saldo de crédito y estadísticas.

The screenshot shows a user interface for managing credits. At the top right, there is a header area with 'Tier T1' and 'Credit 286 pts'. A red arrow points to the 'Credit' text. Below this, a dropdown menu is open, showing options: 'Credits 286 pts' (with a red arrow pointing to it), 'Doctor Preference', 'Manual Guide', and 'Log Out'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Top Up', contains buttons for credit amounts: '\$20', '\$50', '\$100', '\$300', '1000', and '2000'. It also has 'BACK' and 'CHECKOUT' buttons. The right panel, titled 'Credit', displays a list of credit-related metrics: 'Balance', 'Credit Spend (MTD) / (YTD)', 'Credit Topup (YTD)', 'Paid Report (MTD) / (YTD)' (with a value of '2 / 8'), and 'Generated Report (MTD) / (YTD)' (with a value of '14 / 34'). At the bottom, there is a navigation bar with two tabs: 'Pricing & Tier Guidelines' (active) and 'Usage History'.

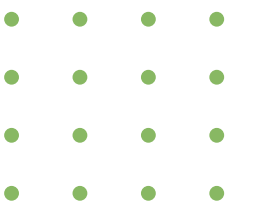

Pricing & Tier Upgrade Guidelines / Precios y pautas para la mejora de Tier

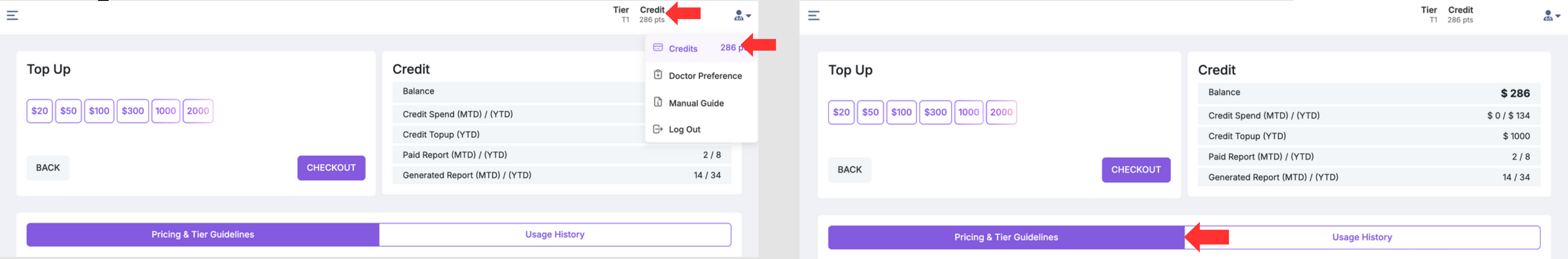

- Haz clic en el ícono en la esquina superior derecha, luego selecciona 'Credits' o haz clic en 'Credit' en la barra superior (ver flechas rojas).
- Después, haz clic en 'Pricing & Tier Guidelines' para ver el costo de cada función y los términos para mejorar tu tier. Por ejemplo, si estás en Tier 1, generar un Standard report costará \$5 (5 pts).
- Consulta la imagen para ver las instrucciones sobre cómo mejorar tu tier y los beneficios incluidos.
- Regenerar el mismo report no generará ningún costo adicional ni usará créditos extra.
- No olvides revisar si hay promociones o descuentos de temporada disponibles para ayudarte a ahorrar créditos.

PRICING AND TIER UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules
Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:
You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100-200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:
You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.



TIER 3	TIER 2	TIER 1
Standard \$10	Standard \$8	Standard \$5
Standard + \$15	Standard + \$10	Standard + \$8
Complete \$20	Complete \$15	Complete \$10
0 - 100 Report(s) Annually	100 - 200 Report(s) Annually	200+ Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50
VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.

Usage History / Historial de uso


- Haz clic en el ícono en la esquina superior derecha, luego selecciona 'Credits' o haz clic en 'Credit' en la barra superior (ver flechas rojas).
- Haz clic en 'Usage History' para ver tu actividad, incluyendo cuántos puntos se descontaron por cada función utilizada.

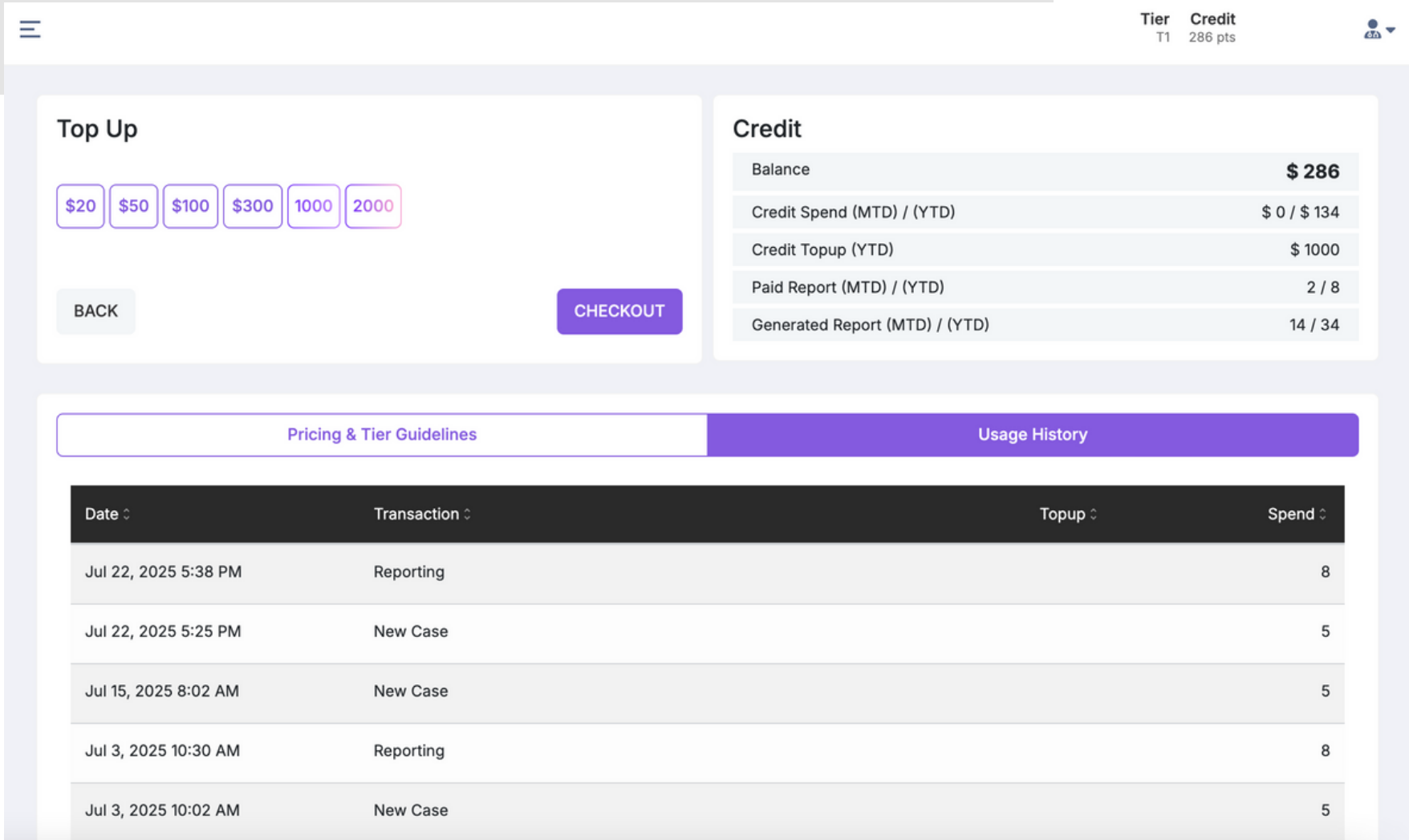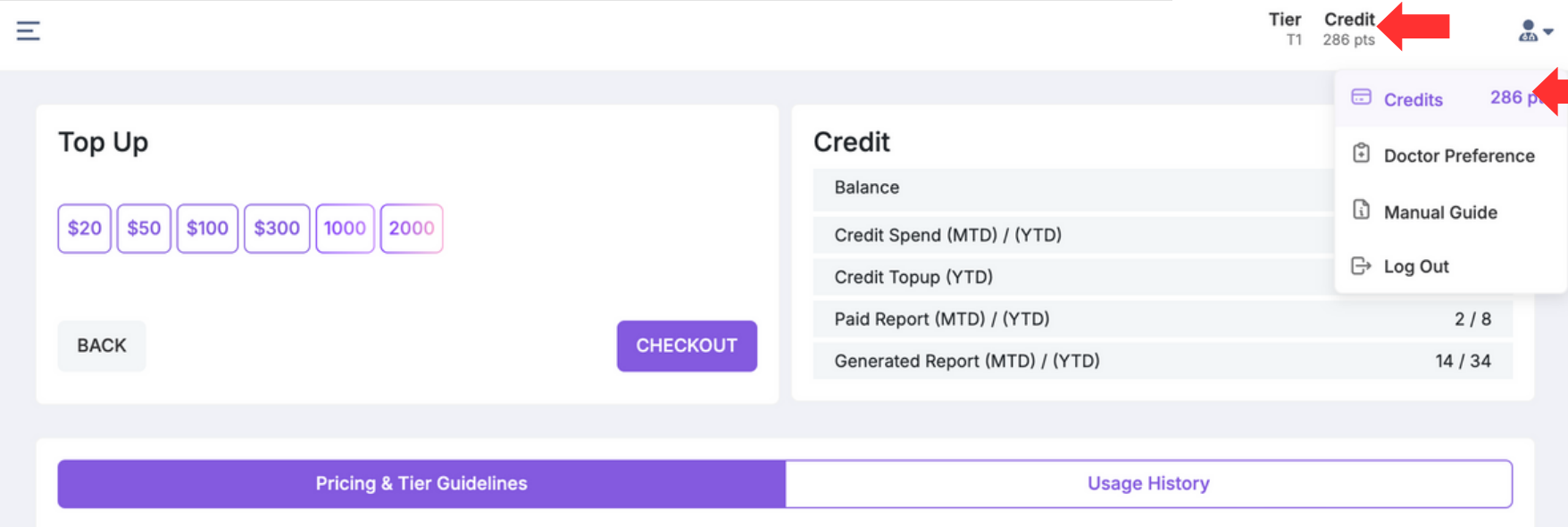


Top Up (1)

1. Haz clic en el ícono en la esquina superior derecha, luego selecciona 'Credits' o haz clic en 'Credit' en la barra superior (ver flechas rojas) para ver tu saldo de crédito y estadísticas.
2. Haz clic en el monto disponible que deseas top up. Luego haz clic en 'Checkout'.

1

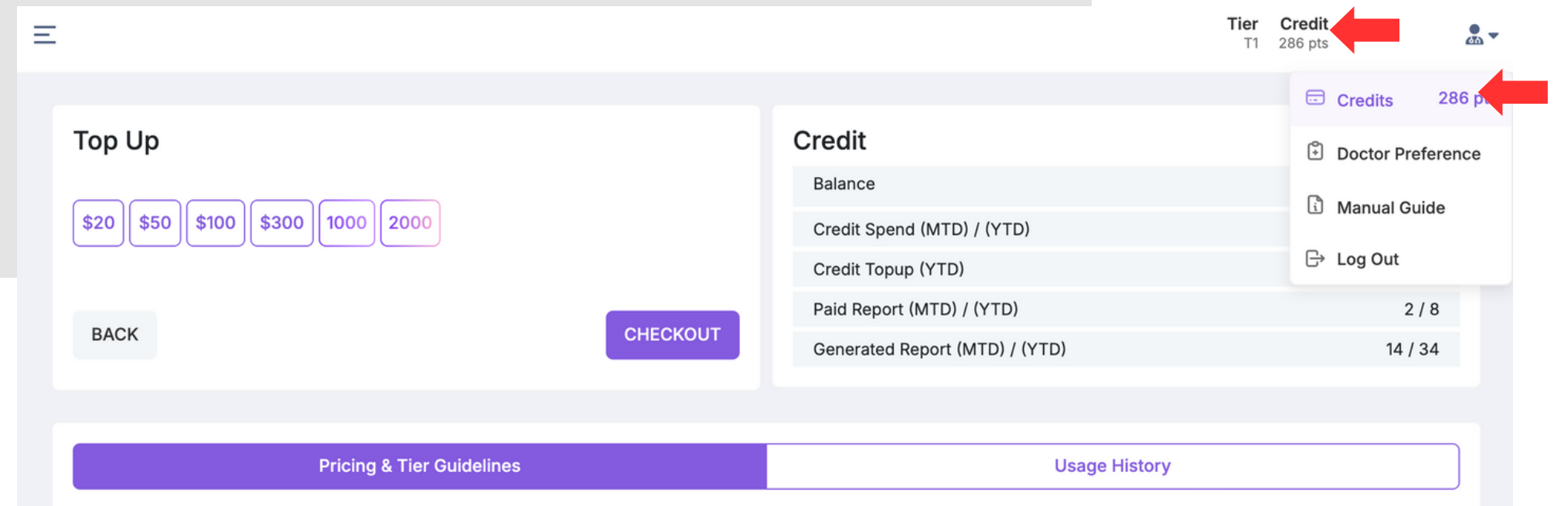

2

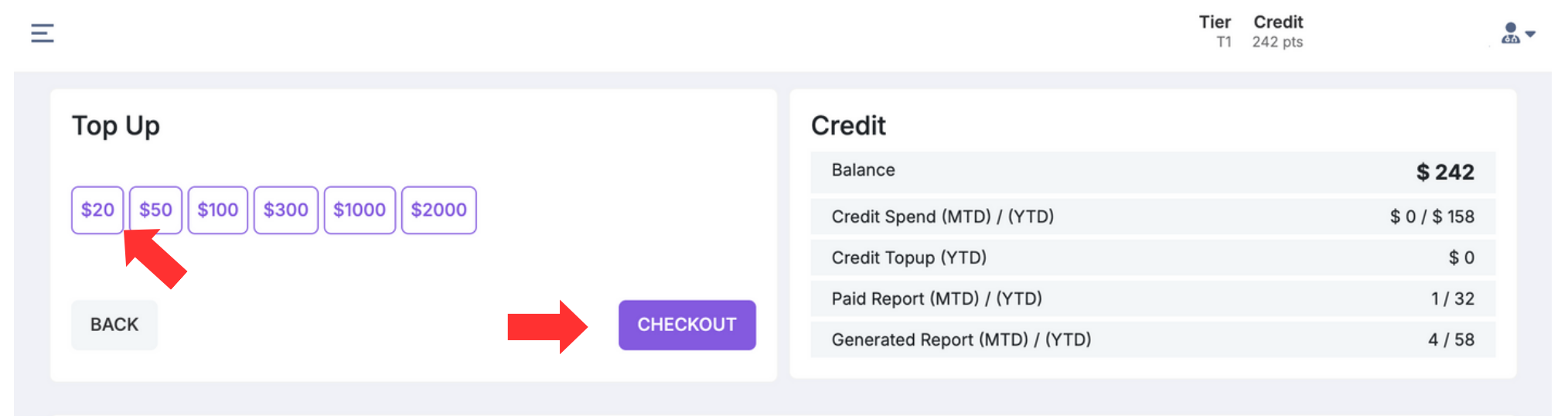

Continue...



Top Up (2)

3. Aparecerá la página de pago. Elige tu moneda preferida. Si tienes un código de promoción, puedes ingresarlo y completar el pago (ver flecha roja).
4. Puedes seleccionar 'Pay with Link' (botón verde) si ya tienes una cuenta de Link.
5. También puedes ingresar los datos de tu tarjeta de crédito manualmente. Opcionalmente, puedes marcar la casilla inferior para guardar tu información y usarla en un pago con un solo clic en el futuro.
6. Haz clic en 'Pay' para completar la transacción.

The screenshot shows the payment interface for DR ANNIE Insights. It includes a currency selection section, a payment summary table, and a payment method selection area. Red arrows and numbers 3 through 6 highlight specific steps: 3 points to the currency selection and promotion code area; 4 points to the 'Pay with link' button; 5 points to the card information fields; and 6 points to the 'Pay' button at the bottom.

DR ANNIE Insights

Choose a currency:

Exchange rate and fees of your bank may apply

Payment for Annie-Insights Credit 20 points. Trx# TXN12345	\$20.00
Subtotal	\$20.00
Add promotion code	
Total due	\$20.00

Or

[Pay with link](#)

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

☐ Securely save my information for 1-click checkout
Pay faster on Foundation for Modern Bioprogressive Orthodontics and everywhere Link is accepted.

[Pay](#)

Patient Case Search / Búsqueda de casos de pacientes

2

DEMO, CLASSONE
ismart.patient@gmail.com

AN2001500011 Case ID

January 30, 2025
Selected Timepoint

In Progress

1 Intra Oral Photos

2 Extra Oral Photos

3 Dental Chart

4 X-Rays/
Radiographs

AI - Findings

Reports

1

Search Patient Result

Patients

CLASSONE

New Patient

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	

Search Patient Result

Patients


AN2001500011

New Patient

Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	

1. Puedes buscar un caso ingresando el nombre del paciente o el Patient ID en la barra de búsqueda.
2. El Patient ID está disponible solo después de que se ha generado un reporte. Consulta la flecha roja para localizar el Case ID.

Si ya has enviado el caso pero el reporte aún no se ha generado, puedes buscarlo usando el nombre del paciente.

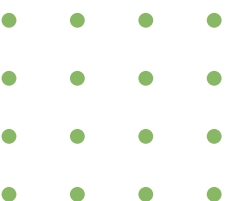

Doctor Preference / Preferencia de doctor

Tier T1 Credit 242 pts

Patient List

Patients Search patient...

Credits 242 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Doctor Preference

Preferred Treatment

☒ Let DR.ANNIE suggest
The user does not have a specific preference and authorizes DR. ANNIE™ to recommend the most appropriate treatment approach, whether extraction or non-extraction.

☐ Force Non-Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily non-extraction-based, where clinically appropriate.

☐ Force Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily extraction-based, where clinically appropriate.

BACK

Tools

☒ Braces


☐ Aligner

SAVE

- Haz clic en el ícono en la esquina superior derecha y luego haz clic en 'Doctor Preference' (ver flechas rojas).
- Elige tu tratamiento y herramientas preferidas.
- Haz clic en 'Save' para aplicar los cambios.

La selección de Doctor Preferences afectará los resultados del análisis de DR ANNIE™. También afectará los reports generados.

Si deseas actualizar los resultados de evaluación que ya han generado el report, debes reiniciar el timepoint y generar el report nuevamente.

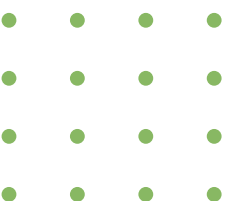

Sample Case / Caso de Ejemplo

DR ANNIE™ Insights

Active Patient


- A
- B
- C
- D (3)
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N

Patient List

Patients Search patient... Q + New Patient



Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSTWO ismart.patient@gmail.com 0617032211	Jan 30, 2010 M 155 cm LA	1	Submitted Processed Complete	
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	
DEMO, CLASSTHREE ismart.patient@gmail.com 0617472535	Jan 30, 2000 F 160 cm CA	1	Submitted Processed Complete	

- Como referencia, hay tres casos de demostración disponibles basados en los resultados de la evaluación, realizados por DR ANNIE™: Demo Class One, Demo Class Two y Demo Class Three.
- Puedes encontrarlos bajo la letra 'D' en la sección de Active Patient (ver flecha roja).

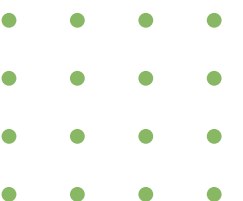

¿Listo para generar? Asegúrate de que esto esté completado

- Asegúrate de que todas las imágenes cumplan con los requisitos necesarios.
- Verifica que todos los datos requeridos y las verificaciones estén completos antes de generar los reportes.
- Los usuarios también pueden reprocesar el reporte si hay cambios en las fotos del paciente o en el proceso de verificación dental.

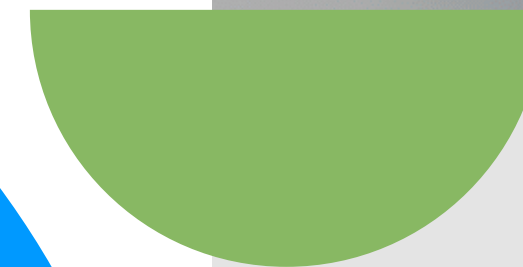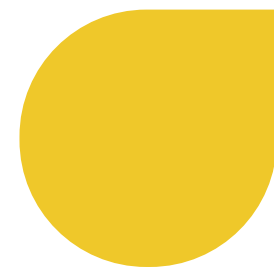



La tecnología de AI de DR ANNIE™ está en constante mejora, lo que ayuda a comprender mejor a los pacientes y planificar los tratamientos de manera más eficaz.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos en

✉ support@ismartdds.com

☎ +1-833-6776676 (Toll-Free)

🌐 [iSmartDDS](https://www.ismartdds.com)