

Bedienungsanleitung

Schritt-für-Schritt- Anleitung zur Erstellung eines Behandlungsplans



DR ANNIE™ Insights

de_DE


Version: 072025V3



Sprachenverfügbarkeit

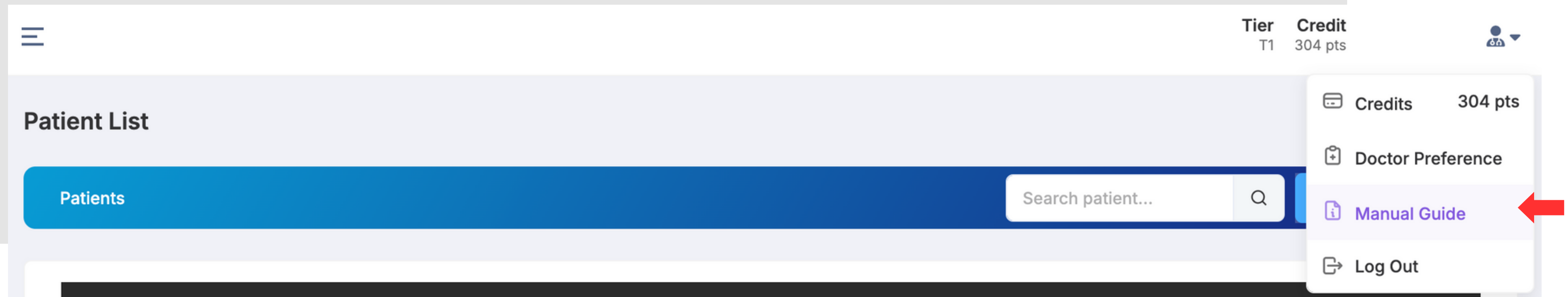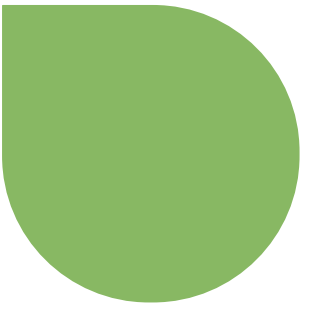

- Dieses Dokument ist in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Mexiko) verfügbar.
- Um auf das Handbuch zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und scrollen Sie nach unten zu „Handbuch-Anleitung“.
- Bitte wählen Sie die Version aus, die am besten mit Ihrer bevorzugten Sprache übereinstimmt.

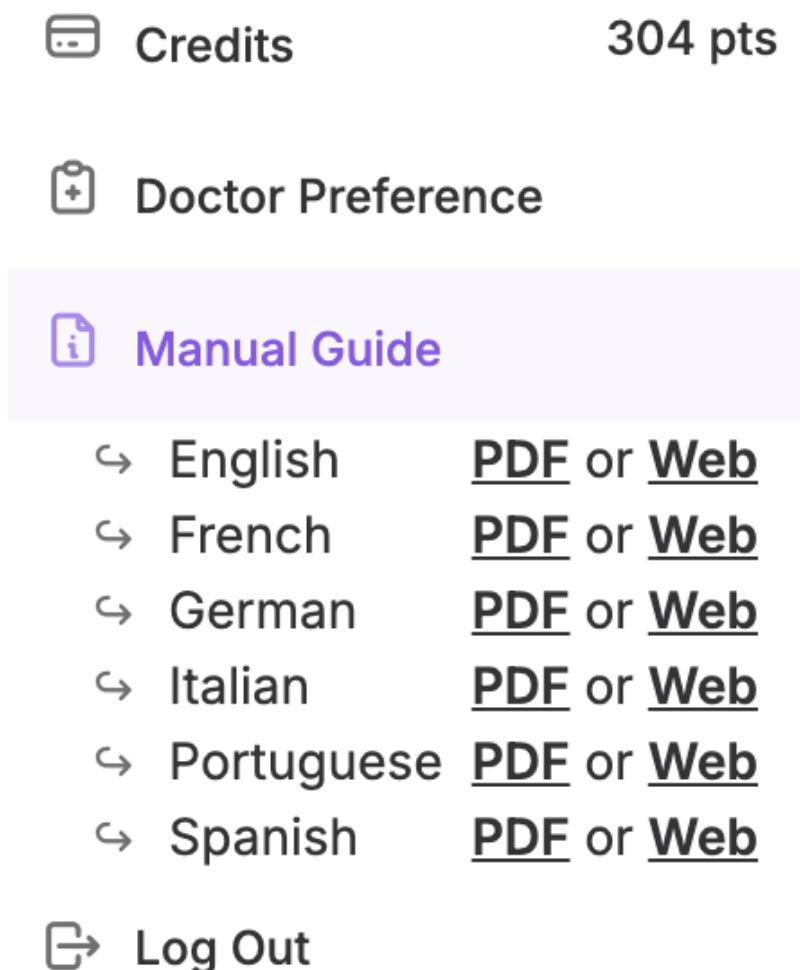

Inhalt




DR. ANNIE™ INSIGHTS

Here to provide personalized assistance and guidance to help you address any dental concerns you may have.

- ✓ AI Dental Findings
- ✓ Report Generating
- ✓ Timepoint Feature
- ✓ AnnieInsight+

- 01** Log In
- 02** Startseite navigieren
- 03** Ein neues Patientenprofil erstellen
- 04** Patientenprofil bearbeiten
- 05** Timepoint erstellen
- 06** Intraorale Bilder hochladen
- 07** Extraorale Bilder hochladen
- 08** Zahnkarte bearbeiten
- 09** X-Ray-Bilder und HLD-Formular hochladen
- 10** AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren
- 11** Bericht erstellen
- 12** Berichte überprüfen
 - ~ Tier
 - ~ User Credit
 - ~ Pricing & Tier Upgrade Guidelines
 - ~ Usage History
 - ~ Top Up
 - ~ Patient Case Search
 - ~ Doctor Preference
 - ~ Sample Case

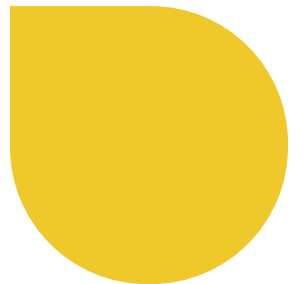



Step 1: Log In (1)

01

Gehen Sie in Ihrem Browser auf iSmartDDS.com um auf die DR. ANNIE™ Insights-Plattform zuzugreifen. Die Anmeldeseite wird angezeigt.

02

Wählen Sie Ihre bevorzugte Anmeldemethode aus:

- **SIGN IN WITH GOOGLE SSO**
- **EMAIL & PASSWORD**

03

Wenn Sie sich registrieren und DR. ANNIE™ ohne ein Google-SSO-Konto verwenden möchten, klicken Sie bitte auf den Link „Hier Konto erstellen“ (siehe roter Pfeil). Sie werden dann zum [iSmartOffice registration portal](#) weitergeleitet. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der nächsten Seite.

DR. ANNIE™ Insights

Sign In

Sign in with your iSmart Account

Sign in with Google

OR

Username

Enter username here

Password

Forget password ?

password


Sign In

New to iSmart? [Create an account here](#)

[Privacy Statement](#) [Terms of Use](#)



Continue...

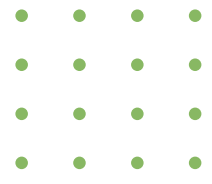

Step 1: Log In (2)

04

Geben Sie die erforderlichen Informationen in dieses Registrierungsformular ein. Sobald alle Angaben korrekt sind, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Registrieren“, um fortzufahren.

05

Bitte bestätigen Sie die Registrierung über die angegebene E-Mail-Adresse. Nach der Bestätigung ist das Konto einsatzbereit.

The screenshot shows the 'iSmartOffice - Provider' registration page. At the top right, there are links for 'Register' and 'Login'. The main section is titled 'PROVIDER REGISTRATION FORM' and contains several input fields with labels in red: 'First Name', 'Last Name', 'Username' (with a hint 'Use email address as your username'), 'Password', 'Retype Password', and 'Referral Code' (with a hint 'if any'). At the bottom right of the form, there are two buttons: an orange 'Back' button and a blue 'Register' button. A red arrow points to the 'Register' button. In the bottom right corner of the page, there is a small red circular icon with a white bell.




Step 2: Navigate the Home Page / Startseite navigieren

01

Nach dem Login zeigt die
Startseite zwei Hauptbereiche:

- **LEFT: ACTIVE & ARCHIVE PATIENT**
- **CENTER: PATIENT LIST**

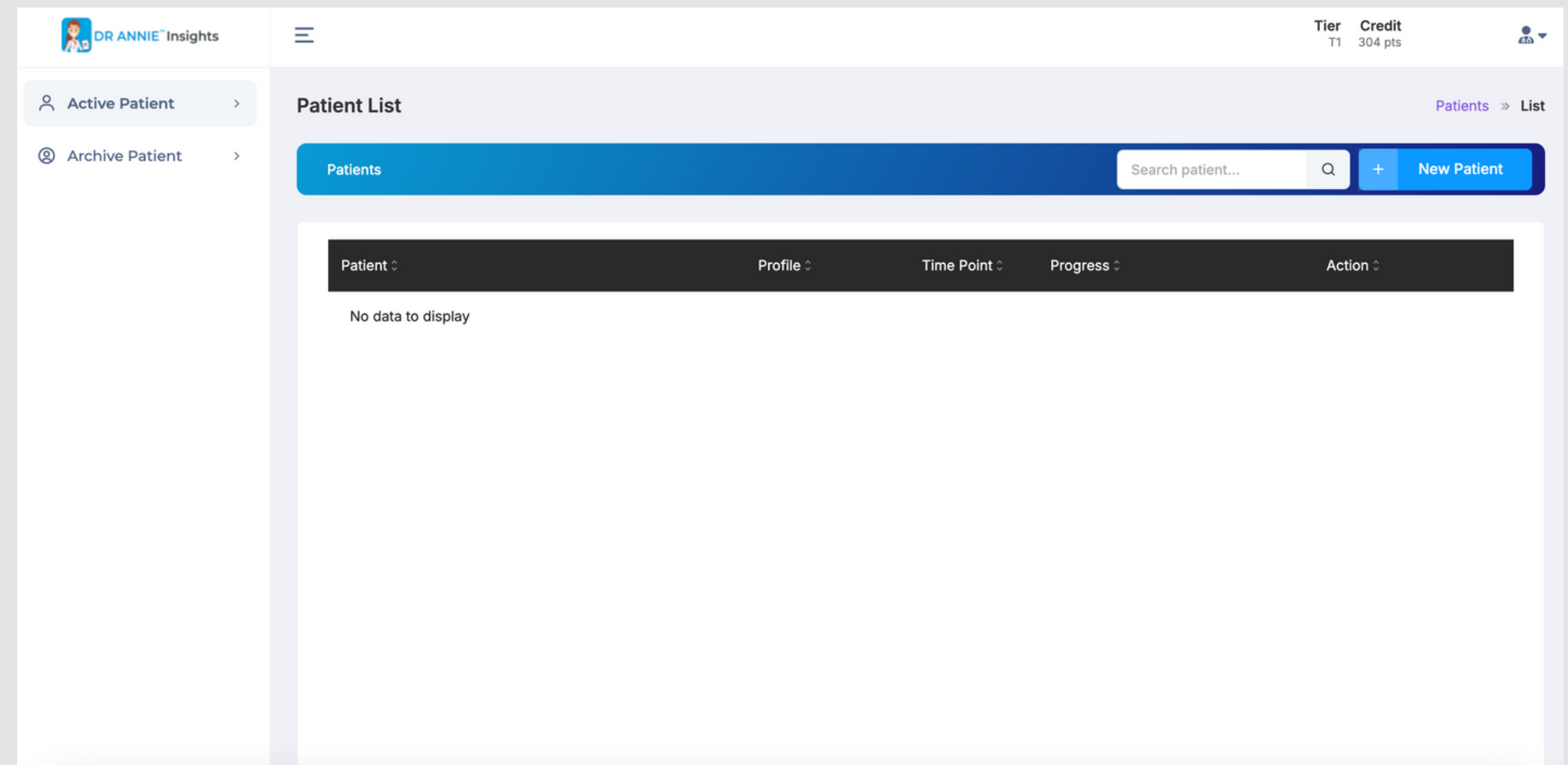

Step 3: Create a New Patient Profile / Ein neues Patientenprofil erstellen

01

Klicken Sie auf „Neuer Patient“ (siehe roter Pfeil).

Before adding the patient's name, first add a credit so that DR. ANNIE™ can continue the analysis process.

For details, please see the [User Credit](#) or [Top Up](#) Section

02


Geben Sie die erforderlichen Angaben ein. Alle Felder müssen ausgefüllt sein, bevor Sie fortfahren können.

03


Lesen und bestätigen Sie die HIPAA Compliance Policy.

04

Klicken Sie auf „Absenden“, um das Profil zu speichern.

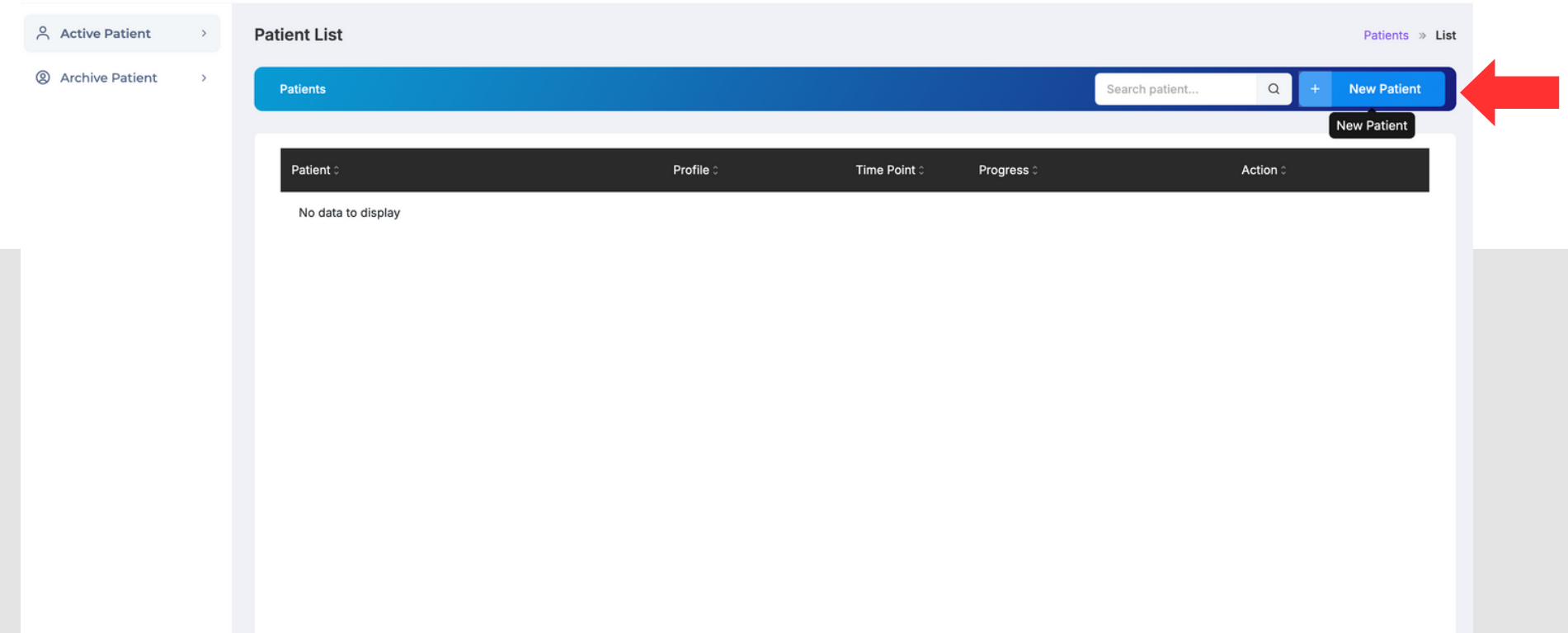

The screenshot shows the 'Patient List' interface. At the top, there are tabs for 'Active Patient' and 'Archive Patient'. Below the tabs, there is a search bar and a '+ New Patient' button, which is highlighted with a red arrow. The table below the search bar is empty, showing 'No data to display'.

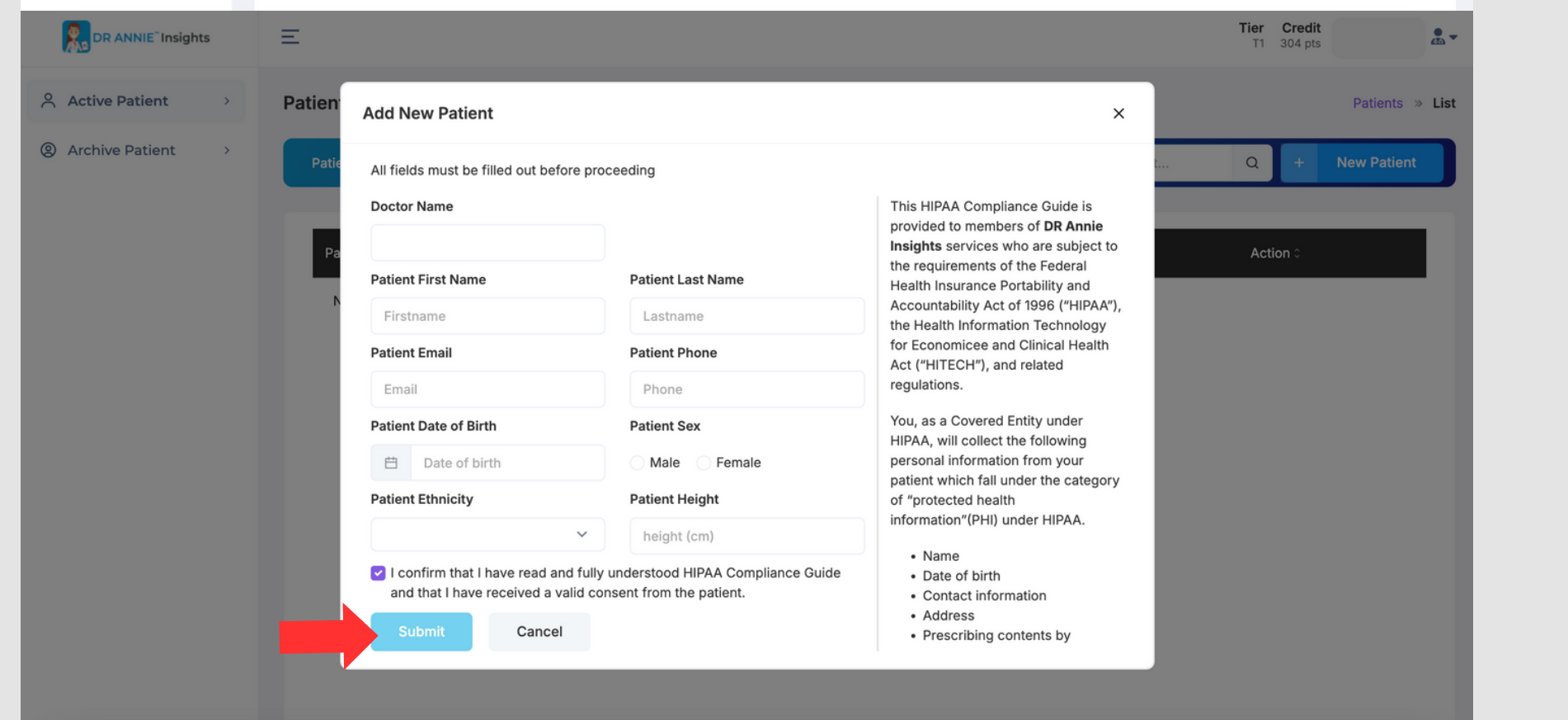

The screenshot shows the 'Add New Patient' form. The form has a title bar 'Add New Patient' and a close button. Below the title bar, there is a message: 'All fields must be filled out before proceeding'. The form contains several input fields: 'Doctor Name', 'Patient First Name' (with a 'Firstname' placeholder), 'Patient Last Name' (with a 'Lastname' placeholder), 'Patient Email' (with an 'Email' placeholder), 'Patient Phone' (with a 'Phone' placeholder), 'Patient Date of Birth' (with a 'Date of birth' placeholder), 'Patient Sex' (with radio buttons for 'Male' and 'Female'), 'Patient Ethnicity' (with a dropdown menu), and 'Patient Height' (with a 'height (cm)' placeholder). At the bottom of the form, there is a checkbox with the text: 'I confirm that I have read and fully understood HIPAA Compliance Guide and that I have received a valid consent from the patient.' Below the checkbox are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'. A red arrow points to the 'Submit' button. To the right of the form, there is a sidebar with a 'HIPAA Compliance Guide' section, which includes a list of items: 'Name', 'Date of birth', 'Contact information', 'Address', and 'Prescribing contents by'.

Step 4: Edit Patient Profile / Patientenprofil bearbeiten

01



Klicken Sie auf den Namen des Patienten in der linken Mitte (siehe roter Pfeil).

02

Bearbeiten Sie die erforderlichen Informationen.

03

Klicken Sie auf „Absenden“, um zu speichern, oder auf „Abbrechen“, um zurückzugehen.

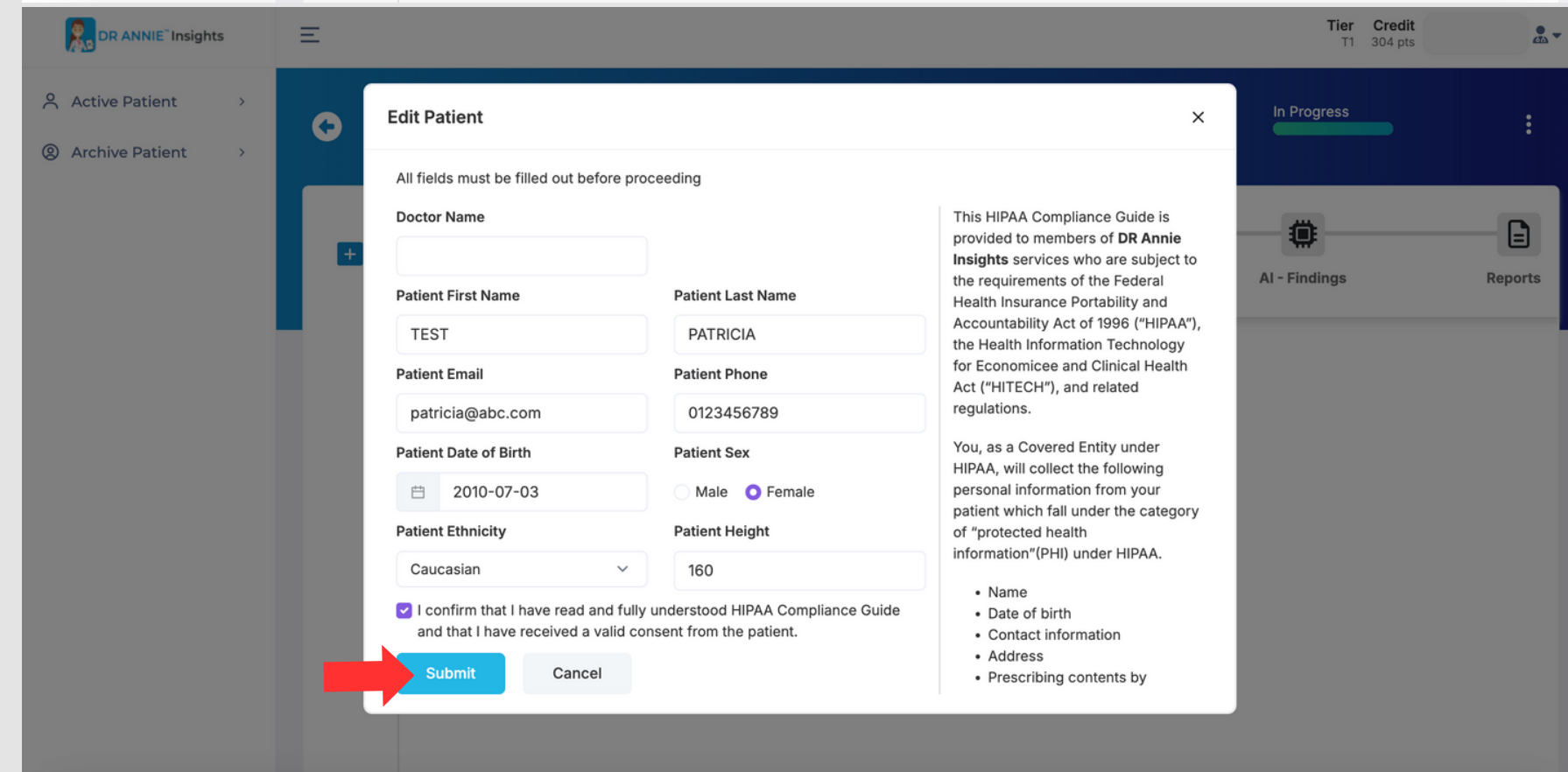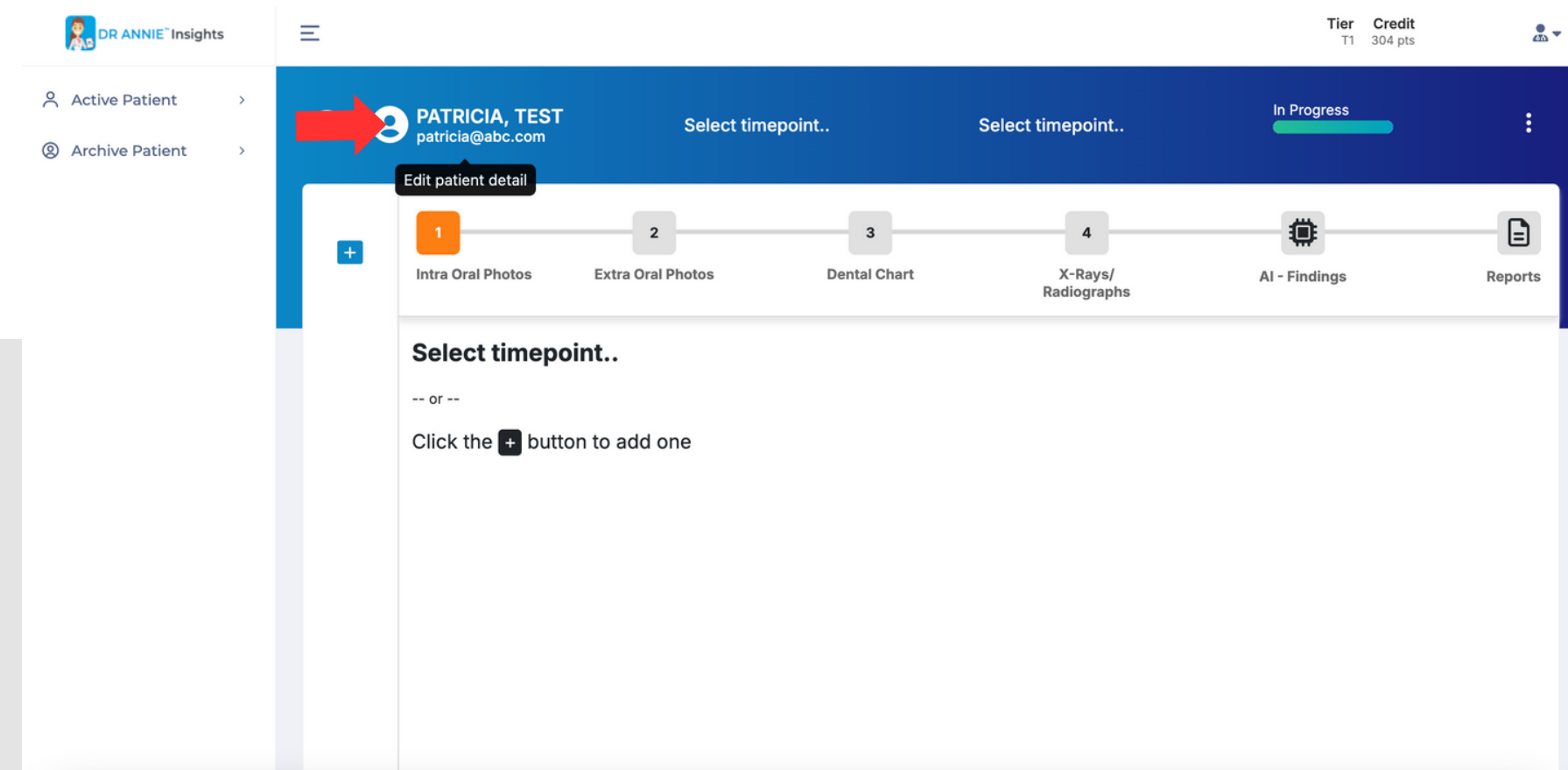

Step 5: Create Timepoint / Timepoint erstellen



01

Bevor Sie einen neuen Fall oder Timepoint erstellen, überprüfen Sie bitte die Einstellungen unter „Doctor Preference“.

Auf dieser Seite werden die bevorzugten Behandlungen und Werkzeuge angezeigt, die standardmäßig zur Erstellung von Berichten für Ihre Fälle verwendet werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite „**Doctor Preference**“.

02

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ New Timepoint“, um einen neuen Timepoint zu erstellen (siehe roter Pfeil).


03

Geben Sie die erforderlichen Angaben ein.

Klicken Sie auf „Speichern“, um den Timepoint zu erstellen, und auf „Schließen“, um zurückzugehen.

Hinweis:

- Sie können auch mehr als einen Timepoint erstellen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Guthaben verfügen, um einen neuen Timepoint zu erstellen.
- Wenn das neu hinzugefügte Timepoint-Datum früher ist als ein bereits bestehendes, wird der Bericht des bestehenden Timepoints entfernt. Keine Sorge – Sie können den Bericht jederzeit erneut generieren.

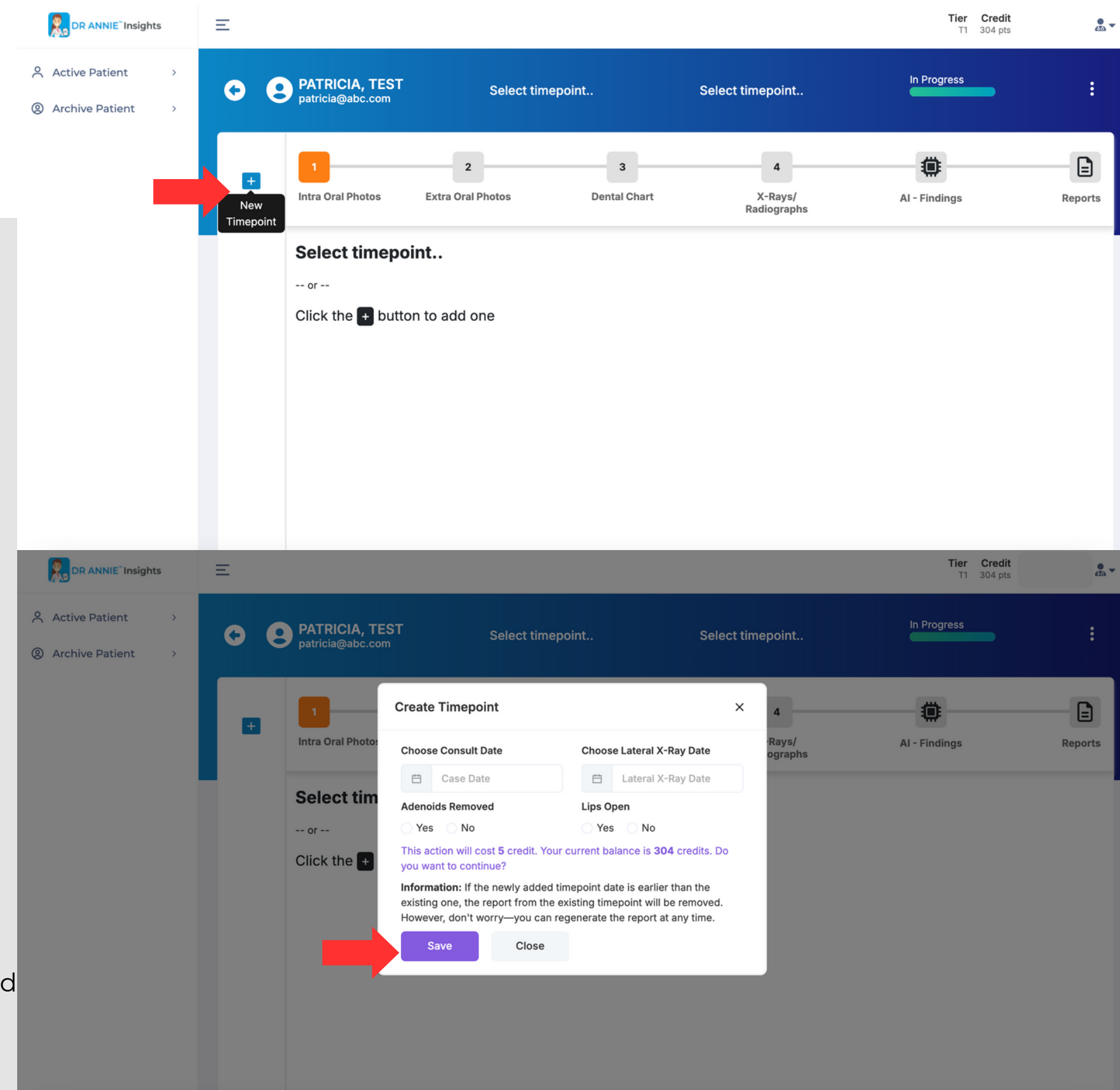

Step 6: Upload Intra-oral Images / Intraorale Bilder hochladen

01

Klicken Sie auf das Upload-Feld für intraorale Fotos. Ziehen Sie die Dateien per Drag-and-drop in den vorgesehenen Bereich oder klicken Sie, um sie manuell auszuwählen.

02



Stellen Sie sicher, dass die Bilder den erforderlichen Vorgaben entsprechen (z. B. Größe und Bildschärfe), um eine genaue KI-Erkennung zu ermöglichen.


03

Zoom-, Dreh-, Spiegelungs- und Zurücksetzungsfunktionen stehen bei Bedarf zur Verfügung.

04

Nachdem alle erforderlichen Bilder hochgeladen wurden, klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren. Dieser Schritt ist verpflichtend – ohne dessen Abschluss kann nicht fortgefahren werden.

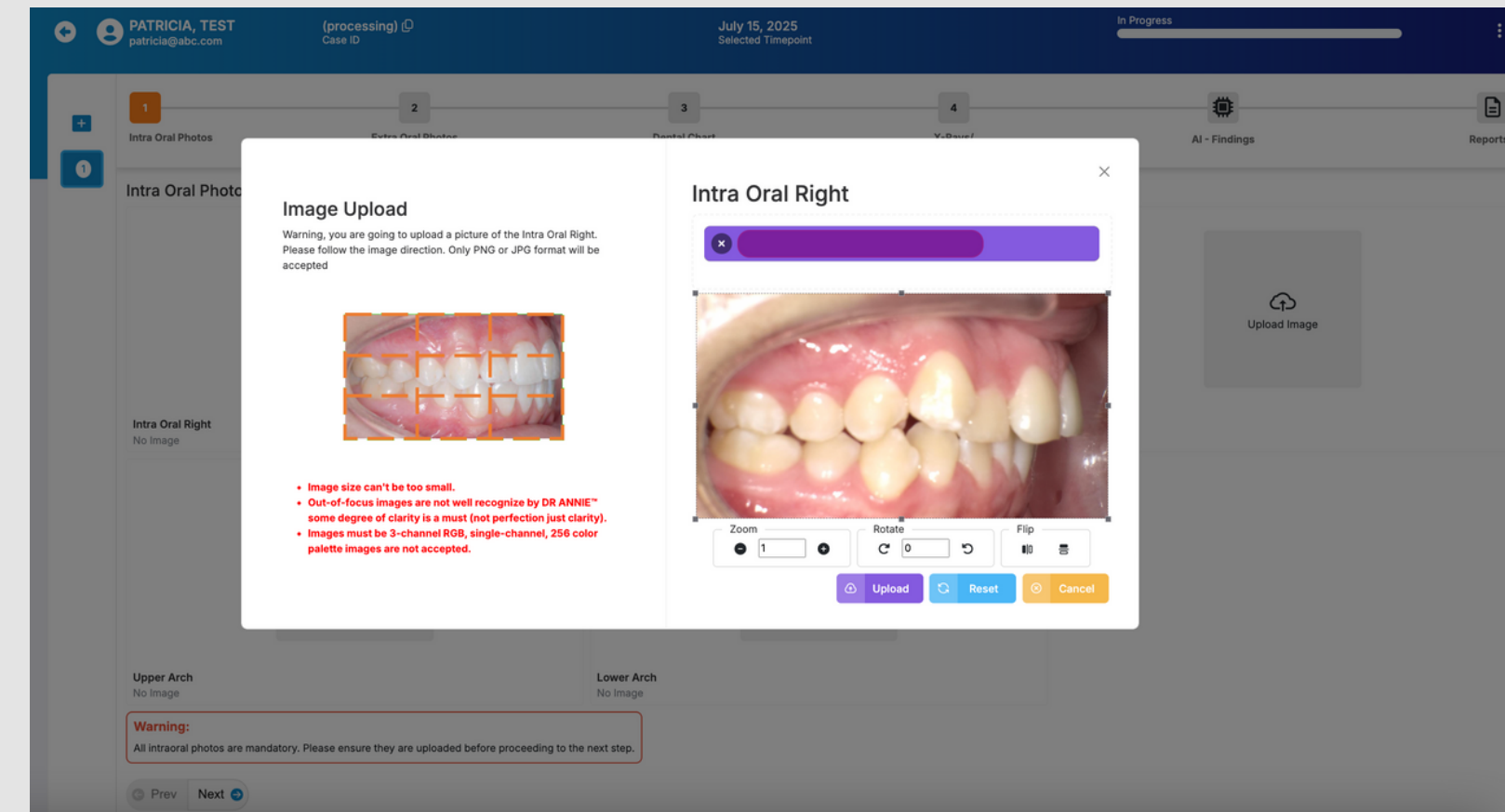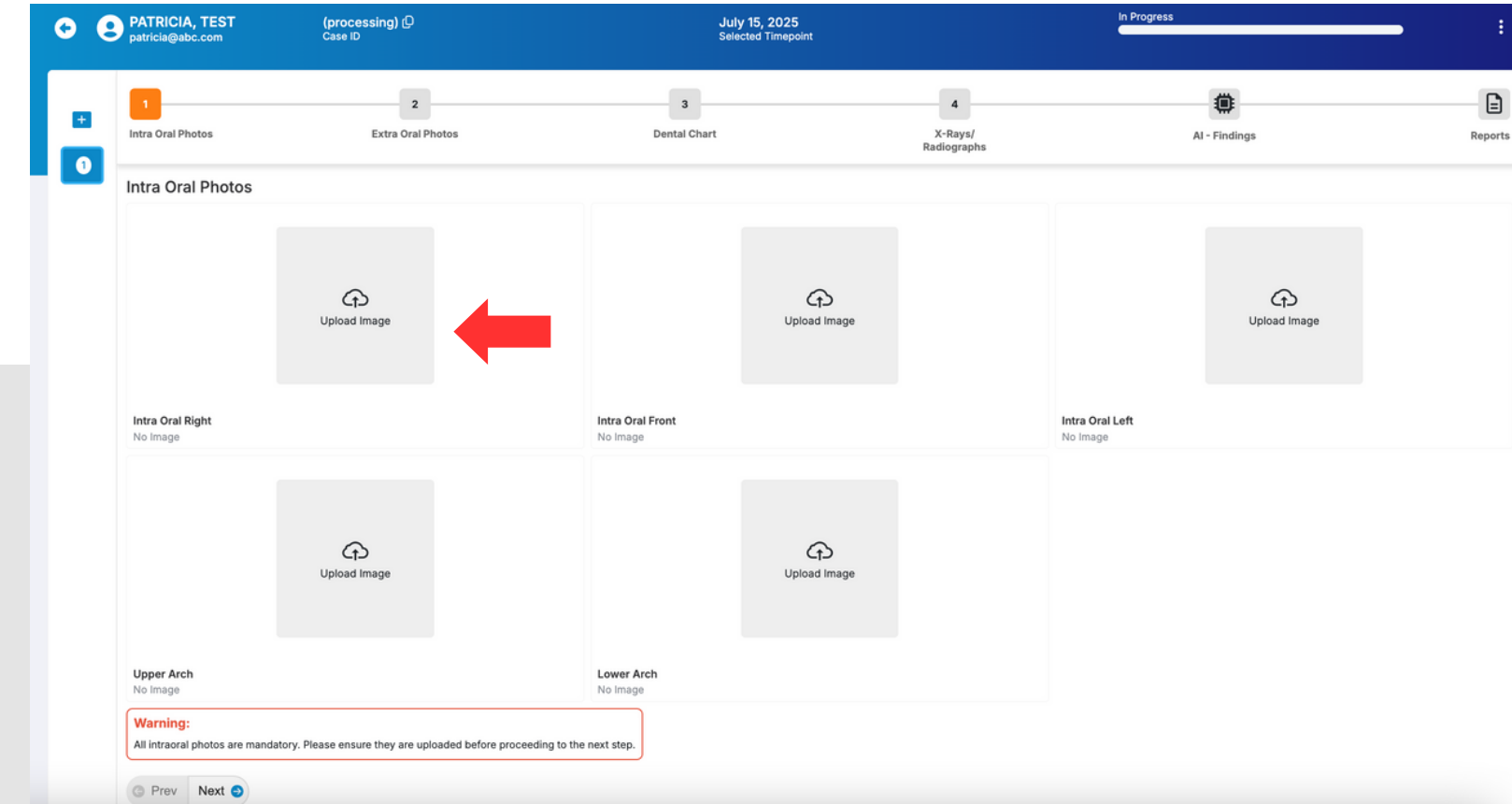

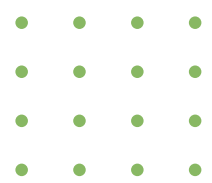


Step 7: Upload Extra-oral Images / Extraorale Bilder hochladen

01

Laden Sie auf dem nächsten Bildschirm extraorale Fotos hoch.

02

Dieser Schritt ist optional; Sie können auf „Weiter“ klicken, wenn er nicht erforderlich ist.

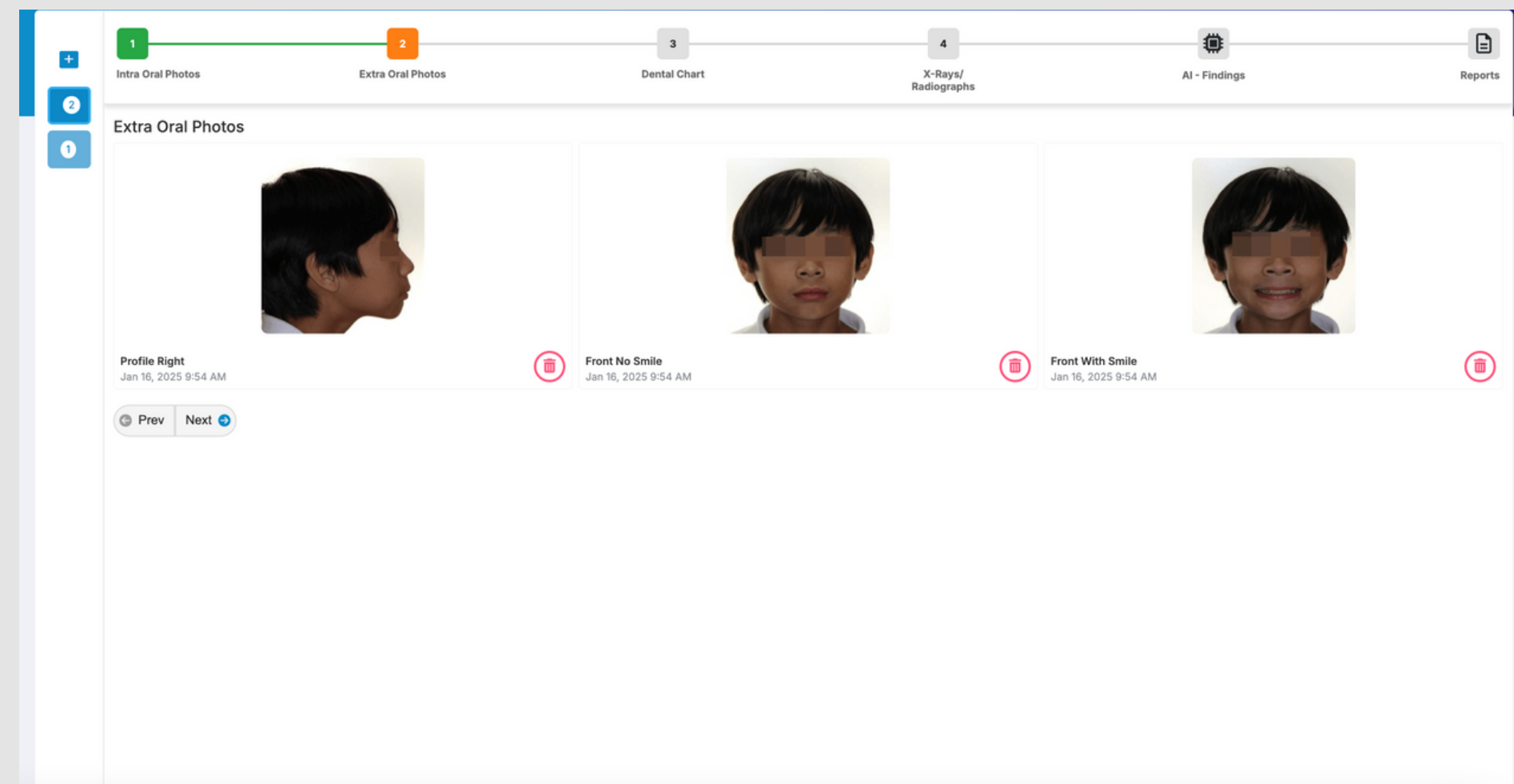

Step 8: Edit Dental Chart / Zahnkarte bearbeiten

01

Klicken Sie auf die Schaltflächen für Ober- und Unterkiefer (einschließlich rechter und linker Quadranten), um die erforderlichen Informationen einzugeben.

02

Passen Sie den Zustand der Zähne (bleibend & milchzahnartig) im Zahnchart an.
Dies wirkt sich auf die Ergebnisse der Analyse von DR ANNIE™ aus.

03

Das Sequence Worksheet ist nicht verfügbar, wenn ein 1st Molar oder ein Central Incisor fehlt.

04

Dieser Schritt ist optional; Sie können auf „Next“ klicken, wenn er nicht erforderlich ist.

Dental Chart

The screenshot shows the 'Dental Chart' interface. It has a top bar with 'Upper Arch' and 'Lower Arch' sections. Below these are grids for 'Permanent Teeth' and 'Deciduous Teeth'. Red arrows point to the 'Upper Arch' and 'Lower Arch' labels. Below the grids is a list of teeth (T01 to T10) and a 'Disclaimer' box.

Disclaimer:

- Certain dental condition, such as extreme missing teeth or anomalies, may not be accurately detected by the current version of our AI engine. Verification by a doctor is needed.
- Please note: Sequence Worksheet report will not be available if there are missing 1st molar(s) OR missing central incisor(s).

Prev Next

Dental Chart

The screenshot shows the 'Dental Chart' interface with two pop-up windows. The 'Arch Parameter' window is on the left, and the 'Tooth Status - Permanent - 01' window is on the right. Red numbers 1 and 2 are placed near the windows.

Arch Parameter

Single Arch Parameters

- ☒ None
- ☐ Partial denture
- ☐ Complete denture
- ☐ Denture cleaning
- ☐ Orthodontic

Save Cancel

Tooth Status - Permanent - 01

Adult No. 01

Tooth Parameter

- ☒ None
- ☐ Missing (this option will be used on report generation)
- ☐ Extraction needed
- ☐ Restoration crown needed

Mesial ☐ Caries ☐ Filling Distal ☐ Caries ☐ Filling

Buccal ☐ Caries ☐ Filling Lingual/Palatal ☐ Caries ☐ Filling

Occlusal ☐ Caries ☐ Filling

Save Cancel

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / X-Ray-Bilder und HLD-Formular hochladen (1)

01

Laden Sie die folgenden X-Ray-Bilder hoch:

- **LATERAL X-RAY**
- **FRONTAL X-RAY (OPTIONAL)**
- **PANORAMIC X-RAY (OPTIONAL)**

02

Das Hochladen des seitlichen X-Ray-Bildes ist verpflichtend, da es zur Erstellung des Berichts erforderlich ist.

Continue...

1 Intra Oral Photos 2 Extra Oral Photos 3 Dental Chart 4 X-Rays/Radiographs AI - Findings Reports

X-Rays / Radiographs

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 9:54 AM

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 2:52 AM

Dental Panoramic
Jan 16, 2025 9:55 AM

Step 9: Upload X-Ray Images & HLD Form / X-Ray-Bilder und HLD-Formular hochladen (2)

Warning: The automated HLD calculation will only work if you have uploaded the lateral image, frontal image, panoramic X-ray, and upper & lower arch images. Please ensure all required images are uploaded before proceeding with the form.

3

HLD Form

HLD Summary

===== HLD Summary =====

1. Is there an impacted maxillary central incisor? : No
2. What is the condition of the patient oral hygiene? : Good
3. Does the patient does have any dental deformity? : No
Detail :
4. Does the patient have any traumatic deviations? : No
Detail :

4

← Prev

Next →

HLD Form

Is there an impacted maxillary central incisor?

☒ No ☐ Yes

What is the condition of the patient's oral hygiene?

☐ Poor ☒ Good ☐ Excellent

Does the patient have any dental deformity?

☒ No ☐ Yes

Please describe the dental deformity in detail, if present.

Does the patient have any severe traumatic deviations?

☒ No ☐ Yes

If applicable, provide a brief description of the severe traumatic deviations.

Does the patient have surgical malocclusion?

☒ No ☐ Yes

What is the number of ectopic eruption teeth present?

0

Is there a posterior crossbite, and does at least one of the affected teeth have to be a molar?

☒ No ☐ Yes

Cancel

Save

03

Klicken Sie auf „HLD Form“, um sie zu bearbeiten, und dann auf „Save“, um die Änderungen zu übernehmen.

Die automatische HLD-Berechnung funktioniert nur, wenn die lateral image, frontal image, panoramic X-ray sowie die upper & lower arch images hochgeladen wurden.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Bilder hochgeladen sind, bevor Sie mit dem Formular fortfahren.

04

Klicken Sie auf „Next“, um die KI-Ergebnisse zu überprüfen.

Step 10: Review & Verify The AI Findings / AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren (1)

01

Die Seite „AI-Findings“ zeigt die Ergebnisse der KI-erkannten Befunde basierend auf den zuvor hochgeladenen Bildern und Informationen an – einschließlich Intraoral, Extraoral, Panoramic X-Ray, Cephalometric (Lateral und Frontal) sowie Dental Arch (Upper und Lower).

02

Die AI benötigt möglicherweise ein bis zwei Minuten, um die Analyse abzuschließen und die dentalen Befunde zu identifizieren.

Continue...

The screenshot displays the 'AI-Findings' interface. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings (highlighted with an orange icon). A 'Reports' icon is at the end. On the left, a vertical sidebar shows icons for '+', '2', and '1'. The main content area is titled 'Intra Oral' and contains a grid of six dental images. Each image has a label and a green checkmark indicating verification status: 'Intra Oral Right' (Not available), 'Intra Oral Front' (Not available), 'Intra Oral Left' (Not available), 'Upper Arch' (Not available), and 'Lower Arch' (Not available). Below the grid, there are expandable sections for 'Extra Oral', 'Panoramic Radiographs', 'Cephalometric (Lateral & Frontal)', and 'Dental Arch'. A red-bordered warning box at the bottom states: 'Warning: Please verify the Cephalometric and Dental Arch sections before proceeding to the next step. Click the yellow 'Verify' button located below the Cephalometric and Dental Arch images to confirm the results. Ensure that you carefully review both the Cephalometric (Lateral & Frontal) and Dental Arch (Upper & Lower) sections, as they are critical components of treatment planning and staging. The AI-generated report will be based on this information. For detailed instructions, please refer to the Instruction Manual'. At the very bottom, there are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Step 10: Review & Verify The AI Findings / AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren (2)

03


Scrollen Sie nach unten, um die Bereiche Cephalometric und Dental Arch zu finden.
Bitte überprüfen Sie beide Bereiche.

04

Klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche „Verify“ unter den Cephalometric- und Dental Arch-Bildern, um die Ergebnisse zu bestätigen (siehe roter Pfeil).

Bitte überprüfen Sie sowohl die Cephalometric-Bereiche (Lateral & Frontal) als auch die Dental Arch-Bereiche (Upper & Lower).

Continue...

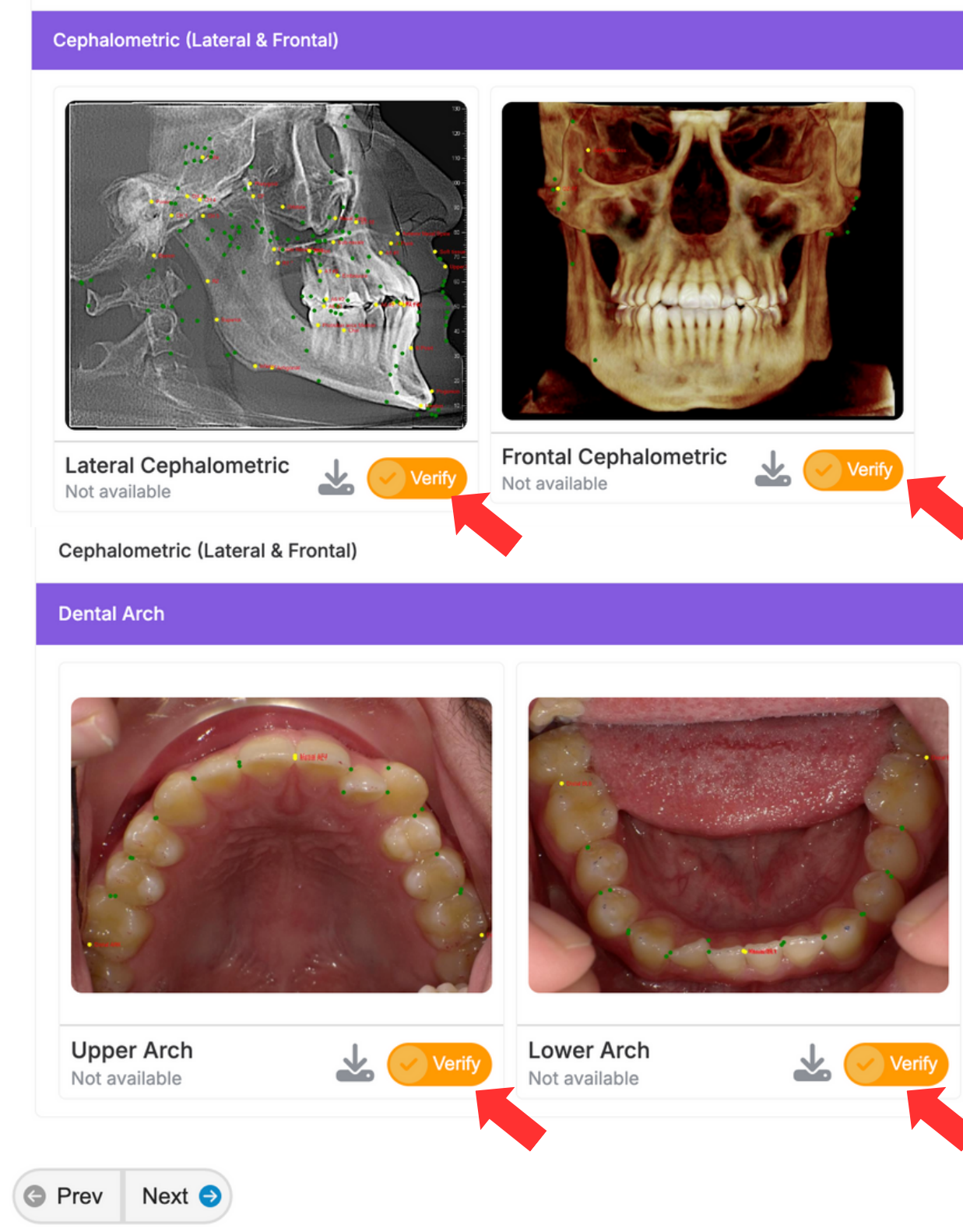

Step 10: Review & Verify The AI Findings / AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren (3)

05

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Verify“ unter Lateral Cephalometric geklickt haben, erscheint der Bildschirm wie abgebildet.

Überprüfen Sie die von der AI erkannten Punkte manuell, um die Genauigkeit sicherzustellen. Sie können die Punkte bei Bedarf per Drag-and-drop verschieben.

Anweisungen finden Sie unten links im Bildschirm. Während der Digitalisierung können Sie mit der Maus in das Bild hinein- und herauszoomen.

Wenn Sie auf einen Punkt klicken, erscheinen in der oberen rechten Ecke die Digitalisierungsrichtlinien zur Orientierung.

Continue...



Step 10: Review & Verify The AI Findings / AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren (4)

06


Verwenden Sie die Funktionen in der oberen Leiste – wie Reset Process, API Template Percentage sowie die Kontrast- und Helligkeitsschieberegler – je nach Bedarf.

- Reset Process: Ermöglicht es Ihnen, den Digitalisierungsprozess neu zu starten, falls Sie von vorn beginnen möchten.
- API Template Percentage: Falls die AI keine genauen Ergebnisse liefert oder Punkte fehlen, verwenden Sie die 60 % oder 70 % API-Vorlage, bis die AI die Punkte erfolgreich erkennt. Passen Sie den Prozentsatz bei Bedarf an.
- Contrast and Brightness Sliders: Verwenden Sie diese, um die Bildsichtbarkeit zu verbessern und wichtige Details hervorzuheben.

07

Sobald Sie die Punkte überprüft haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Save“ oben links (siehe roter Pfeil). Anschließend klicken Sie auf die gelbe Pfeiltaste, um zurückzugehen.

Continue...

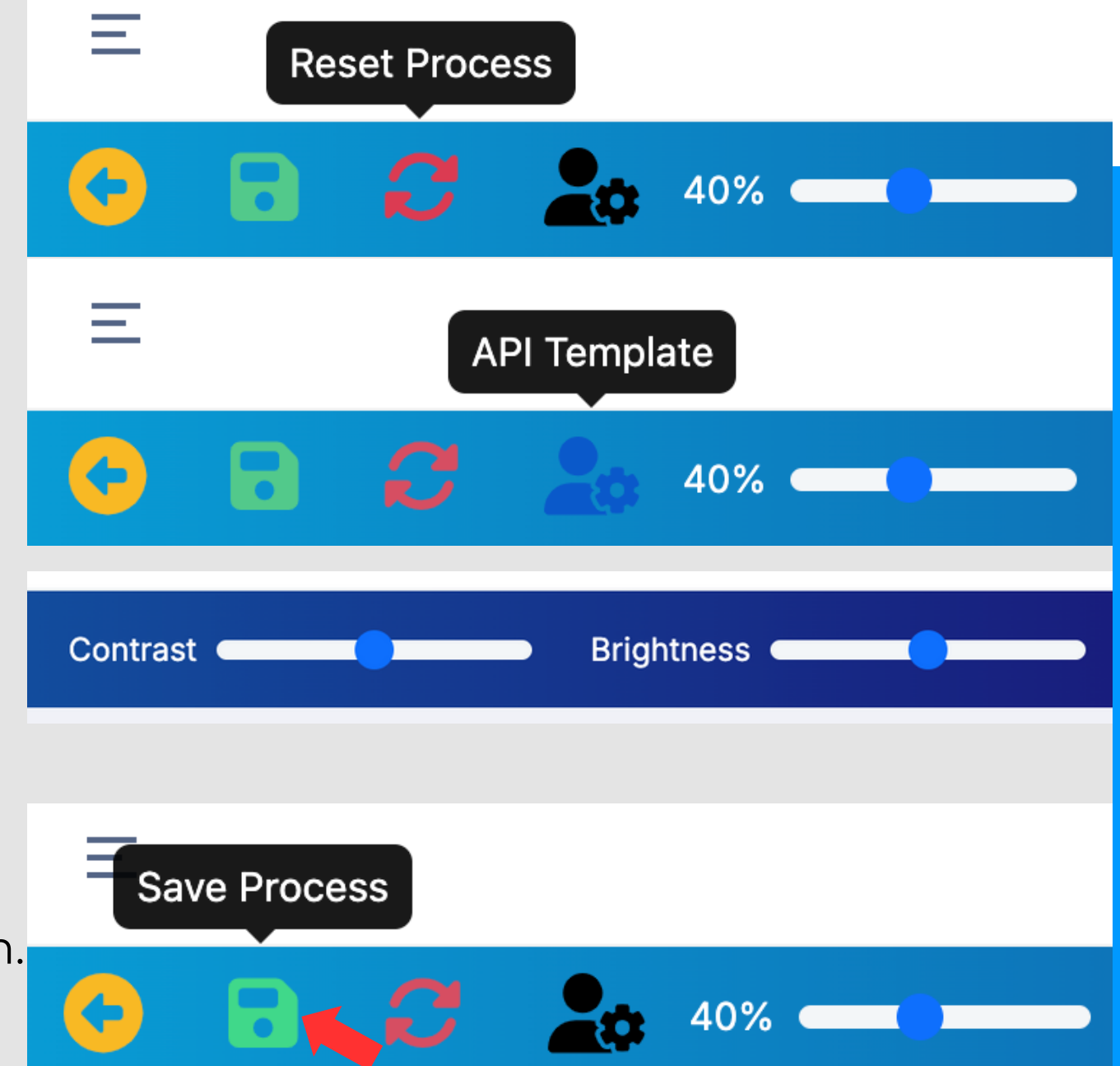

Step 10: Review & Verify The AI Findings / AI-Ergebnisse überprüfen und verifizieren (5)

08

Sobald Sie den Schritt „Verify“ für das Bild abgeschlossen haben, ändert sich die Schaltfläche in ein gelbes „Check“-Symbol.

09

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl die Bereiche Verify bzw. review für Cephalometric (Lateral & Frontal) als auch Dental Arch (Upper & Lower) abschließen, bevor Sie fortfahren – diese sind entscheidende Bestandteile der Behandlungsplanung und -einteilung.

Der von der AI generierte Bericht basiert auf diesen Informationen.


10

Sobald Sie den Verifizierungsprozess abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Next“, um den Bericht zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass Sie ohne die Verifizierung beider Bereiche nicht mit dem nächsten Schritt fortfahren können.


Verified



Cephalometric (Lateral & Frontal)

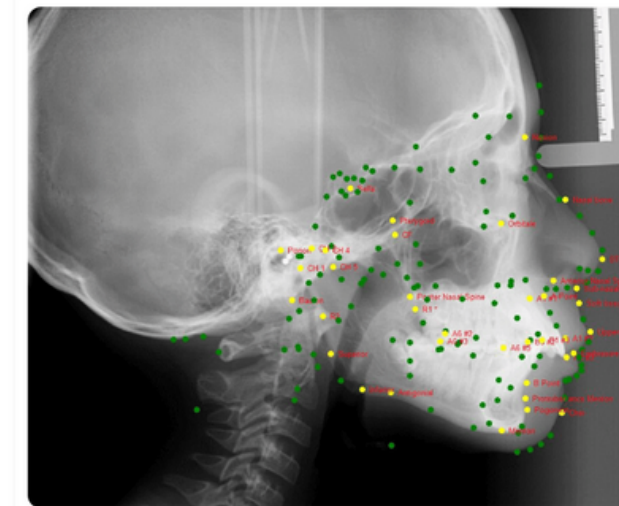

Lateral Cephalometric
Jan 16, 2025 10:04 AM

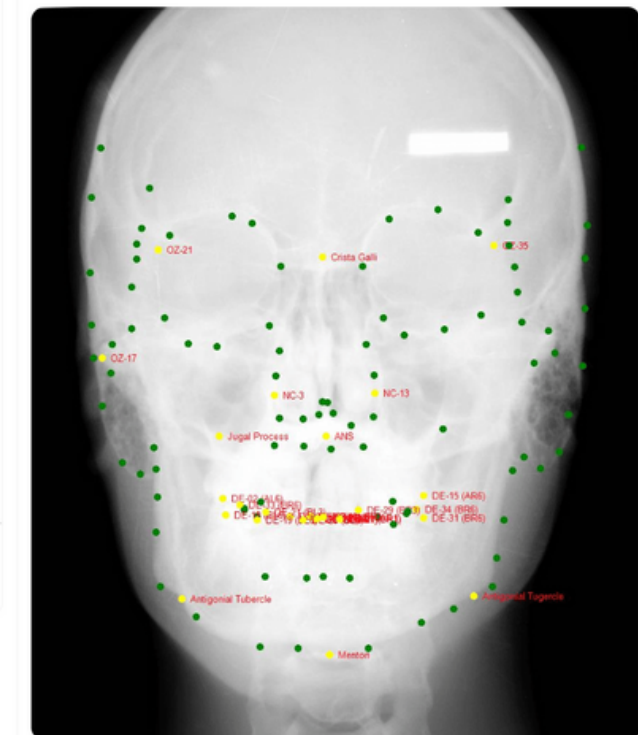

Frontal Cephalometric
Feb 14, 2025 4:08 AM



Dental Arch

Prev Next



Step 11: Generate the Report / Bericht erstellen (1)

Der Bericht besteht aus 4 Ebenen:



Report	Required	Details
Standard	Lateral cephalometric image and intraoral photos	• Bietet einen Basisbericht mit etwa 70 % Genauigkeit • Geeignet für schnelle Einschätzungen • Bericht wird in 2–3 Minuten erstellt
Standard+	Lateral cephalometric image, intraoral photos, and panoramic X-ray	• Bietet einen detaillierteren Bericht, einschließlich Schwierigkeitsgrad des Falls und Behandlungsstadien • Genauigkeit ca. 80 % • Bericht wird in 3–5 Minuten erstellt
Complete	Lateral and frontal cephalometric images, panoramic X-ray, and intraoral photos	• Ideal für Fälle mit Kreuzbiss oder Gesichtsasymmetrie • Bietet eine detaillierte Analyse mit 85–90 % Genauigkeit und Behandlungsstadien • Bericht wird je nach Komplexität in 5–8 Minuten erstellt
VIP	Für komplexe Fälle, wie z. B. solche mit missing teeth, supernumerary teeth, congenital anomalies oder surgical needs.	• Von AI und erfahrenen Kieferorthopäden geprüft • Bericht innerhalb von 1–3 Tagen verfügbar (nicht in Echtzeit) • Entwickelt für hochkomplexe Behandlungsplanungen

Step 11: Generate the Report / Bericht erstellen (2)

01

Wählen Sie den Berichtstyp aus, den Sie erstellen möchten:

- **STANDARD**
- **STANDARD+**
- **COMPLETE**
- **VIP**

Für den VIP Report werden die Nutzer auf eine spezielle Seite weitergeleitet.

Diese Seite bietet Fachdienstleistungen an.

Die Leistungen werden von erfahrenen Ärzten durchgeführt.

02

Mindestens ein verifiziertes lateral cephalogram X-Ray und der untere Dental Arch sind erforderlich, um einen Standard Report zu erstellen.

03

Der Standard Report wird in 2 bis 3 Minuten erstellt, der Standard+ Report in 3 bis 5 Minuten und der Complete Report in 5 bis 8 Minuten.

The screenshot displays a web interface for generating dental reports. At the top, a progress bar shows five steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, and 5. AI - Findings. Below the progress bar, there are four buttons: 'Generate Standard Report', 'Generate Standard Plus Report', 'Generate Complete Report', and 'VIP Report Service'. A table below these buttons lists various report types with their creation dates and download actions.

Report Name	Date Create	Action
01 - Dental Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
02 - Problem List	Apr 28, 2025, 10:01	
03 - Treatment Rationale	Apr 28, 2025, 10:01	
04 - Case Evaluation	Apr 28, 2025, 10:01	
05 - Dental Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
06 - Skeletal Findings	Apr 28, 2025, 10:01	
The following reports are full comprehensive advanced reporting, will be available within 10-15 minutes. Thank you for your patience		
07 - Tracing Measurement	Apr 28, 2025, 10:02	
08 - Sequences Worksheet	Apr 28, 2025, 10:02	
09 - Full Comprehensive	Apr 28, 2025, 10:02	
10 - HLD Summary	Apr 28, 2025, 10:01	

At the bottom left of the table, there are 'Prev' and 'Next' navigation buttons.

Continue...

Step 11: Generate the Report / Bericht erstellen (3)

04

Beim VIP Report Service werden die Nutzer auf eine Seite weitergeleitet, auf der die Daten automatisch ausgefüllt sind.

Nach Überprüfung und Bestätigung, dass alle Informationen korrekt sind, senden Sie bitte die Anfrage ab.

05

Der Bericht wird sowohl von der AI als auch von einem erfahrenen Kieferorthopäden bearbeitet. Die Bearbeitungsdauer hängt von der Komplexität des Falls ab – in der Regel zwischen 1 und 3 Tagen. Sobald der VIP Report fertiggestellt ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail.

Generate VIP Report

Patient Info

Patient First Name

TEST

Patient Last Name

Patient Email

Patient Phone

Patient Date of Birth

Patient Sex

F

Patient Ethnicity

CA

Patient Height (cm)

168

Intra Oral

Upper Arch

No Image

Lower Arch

No Image

X-Rays / Radiographs

Lateral Cephalometric

No Image

Upload Image

Frontal Cephalometric

No Image


Dental Panoramic

No Image

By continuing, you agree to the VIP Report processing fee and acknowledge that any previous report will be overwritten. Are you sure to submit the data?

Submit

Cancel

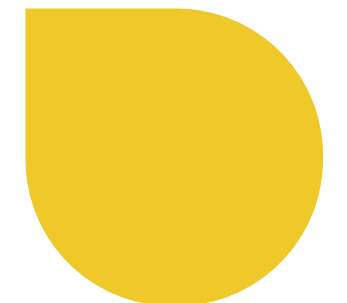

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (1)



Jeder Bericht liefert umfassende Informationen mit unterschiedlichen Genauigkeitsgraden zum zahnärztlichen Zustand des Patienten, einschließlich:

1. DENTAL EVALUATION
2. PROBLEM LIST
3. TREATMENT RATIONALE
4. CASE EVALUATION
5. DENTAL FINDINGS
6. SKELETAL FINDINGS
7. TRACING MEASUREMENTS
8. SEQUENCES WORKSHEET
9. FULL COMPREHENSIVE ANALYSIS
10. HLD SUMMARY

Continue...



Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (2)

01

Dental Evaluation

Dieser report enthält eine Zusammenfassung der Bewertungen, einschließlich dental, orthodontic, periodontic und restorative assessments, sowie eine Kostenschätzung in Form von Punktwerten.

Auch AI-detected dental findings werden einbezogen.

Bitte beachten Sie, dass alle Berichte im PDF-Format heruntergeladen werden können (siehe roter Pfeil).

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Evaluation Summary

Patient Name:

Evaluation Name:

Evaluation Date:
12 Jan 2025 v 1.0.0

A. Dental Evaluation:

Lower difficulty

B. Orthodontic (Tooth Alignment):

Some teeth alignment are needed (esthetic)

C. Periodontic (Gum Health):

Some dental/ oral hygiene maintenance is recommended

D. Restorative (Cavity or Fillings):

Some dental/ oral restoration is recommended (possible filling, cavities)

E. Cost Estimation:

The total cost estimation based on these assessment is 1 out of 4 (affordable)

Evaluated Image(s): 14 Image(s)

Analyzed Image(s): 1 Image(s)

Ref:

AnnieDS : AN2000014162

Assessment : TPIX-96E8F198-383F-468C-BC71-04AFDBCFA962

Score

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

Dental Evaluation

Dental Evaluation

Image Teeth

Show 10 entries

Search:


IMAGE TYPE

DETECTED DENTAL FINDINGS

IMAGE RESULT

DENTAL
PANORAMIC

Ortho : 0, Perio : 0, Brackets : 0, Decay : 0, Restoration : 0

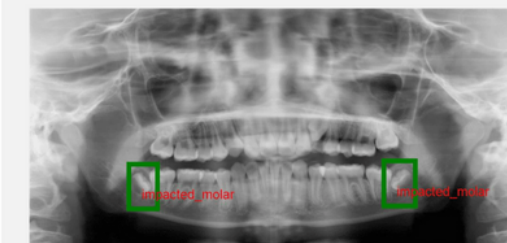

FRONTAL NO
SMILING

No Findings



Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (3)

02

Problem List

Dieser Bericht enthält Height Prediction, Bolton Analysis, Airway Analysis sowie eine Transverse Evaluation.

Außerdem hebt er wichtige Aspekte in Bezug auf horizontal, vertical und symmetry dimensions sowie special considerations hervor.

Problem List

Problem List

Problem Summary

#Case:

Patient Name:

Doctor Name:
PORTAL DEMO

Birth Date:

01/01/2013 (12.03 years)

Sex/Gender:

Male

Last X-Ray Date:

01/12/2025

Prediction Detail

Height Prediction

Assumed skeletal age: 12.0

Current height: 150.0 cms

Amount of adult growth
achieved: 83.5 %

Bolton Analysis

Bolton 6 ratio: 0.907

Bolton 12 ratio: 1.058

Airway Analysis

If the patient is clinically
diagnosed as a
mouthbreather, observed
mouthbreathing is probably
not caused by adenoid
blockage of the airway.

Transverse

No data available

Problem List

Problem List

Significant Considerations

Horizontal

Class II malocclusion 1

due to the lower molar 18

Severe Overjet 5

Vertical

Deep Bite 7

Skeletal Deep Bite 15

due to the mandible &
palate 39

Symmetry

Midline Asymmetry 10

Special Consideration

Upper anterior teeth
relatively small.

Upper arch tooth mass
relatively small.

Comment

No data available

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (4)



03

Treatment Rationale (1)

Dieser Bericht enthält die Begründung für die Entscheidung in Bezug auf den lower arch, einschließlich: original condition, computer decision, auxiliary appliance, post-treatment plan und lower third molar probabilities.

Außerdem sind folgende Details enthalten:

- Initial conditions
- Maximum permissible arch length increase (within doctor limits) due to contributing factors
- Resultant arch length discrepancy considering all possible increases (C + G)
- Final computer-generated decision
- Work-up presented is

Continue...

Treatment Rationale

Original Condition

Facial Pattern: -0.0 CD - Mesofacial

Lower Arch form: Ovoid

Lower arch length discrepancy (ALD): 1.2 mm SHORTAGE

Leeway Space: 0.0

Max use of leeway space: 0.0 mm

Total arch length discrepancy: 1.2 mm SHORTAGE

Computer Decision

UPPER ARCH: NON-EXTRACTION

Convexity Change: REDUCE 1.0 mm

LOWER ARCH: NON-EXTRACTION

Lower Incisor: FORWARD 0.3 mm

Buccal Expansion: GAIN 0.5 mm

Lower Molar: FORWARD 0.0 mm

Auxiliary Appliances

Activator: NOT INDICATED

Palate Separation: NOT INDICATED

Headgear: CERVICAL

Headgear: LIGHT FORCES

Post Treatment

Pentamorphic Arch Form: Ovoid

Arch Length Relapse: 2.3 mm

Lower third molar probabilities

Impaction: 15 %

Marginal: 43 %

Functional: 42 %

Treatment Rationale

1. Initial Conditions

A. Original Arch Length1.2 mm shortage

B. Useable Leeway Space0.0 mm

C. Total Initial Discrepancy(A+B)1.2 mm shortage

2. Maximum Permissible Arch Length Increase (Within Doctor Limits) Due To

D. Lower Incisor Repositioning4.2 mm increase

E. Buccal Expansion0.5 mm increase

F. Lower Molar Distal Movement0.0 mm

G. Total Possible Increase (D+E+F)4.7 mm increase

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (5)



03

Treatment Rationale (2)

Dieser Bericht enthält außerdem die Reason for Upper Arch Decision, einschließlich:

- Convexity change
- Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower
- First molar movement required
- First molar movement clinical limit
- Work-Up Presented Is

Treatment Rationale

REASON FOR UPPER ARCH DECISION

1. Convexity change	1.0 mm reduce
2. Upper incisor tip movement for overbite/overjet ideal to lower	5.0 mm backward
3. First molar movement required	1.5 mm backward
4. First molar movement clinical limit	5.8 mm backward
5. Work-Up Presented Is	NON-EXTRACTION

Comment

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (6)



04

Case Evaluation

Dieser Bericht enthält Angaben zu Auxiliary Appliance, Probability of Lower Third Molar, einschließlich lower, upper analysis und Teeth Type.

Upper Analysis	
Movement of First Molar (non-ext.) Required for Class I	1.0 mm Distal
Clinical Limit	
Resulting Expected Space for 2nd & 3rd Molars at Maturity (non-ext.)	19.6 mm
Required Space for 2nd Molars	9.0 mm to 11.0 mm
Required Space for 2nd & 3rd Molars	18.0 mm to 22.0 mm

Upper Analysis	
Upper Arch	NON-EXTRACTION
Lower Arch	NON-EXTRACTION
Lower Incisor	Forward 0.3 mm
Buccal Expansion	Gain 0.5 mm
Lower Molar Movement	Forward 0.0 mm

Case Evaluation Detail

Auxiliary Appliances

Headgear:

CERVICAL

Activator:

NOT INDICATED

Palate Separation:

NOT INDICATED

Convexity Objective:

Reduce 1.0 mm

Lower Arch Length Discrepancy (original arch), Including useable leeway (E) space::

1.2 mm Shortage

Probability of Lower Third Molar

Impaction:

15.%

Eruption Questionable Function:

43.%

Eruption Functional:

42.%

Lower Arch

LOWER ANALYSIS	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (LT)	REQUIRED TOOTH MOVEMENT (RT)	EFFECT ON ARCH LENGTH	RESULTING DISCREPANCY
Lower Incisor to Ideal	0.2 mm Bwd.	0.4 mm Bwd.	0.8 mm Decrease	2.0 mm Shortage

Teeth Type																
TEETH TYPE	L6	L5	L4	L3	L2	L1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	TOTAL	SUM OF INCISOR	NORM	
Lower Arch	11.4	8.0	7.7	7.6	6.3	5.7	5.7	6.3	7.5	7.8	7.5	11.7	93.2	24.0 MM	22.2	
Upper Arch	8.9	6.7	6.9	6.4	6.8	7.9	8.1	6.4	7.5	7.2	6.3	9.0	88.1	29.2 MM	N/A	

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (7)



05

Dental Findings

Dieser Bericht enthält Details der Lateral view Before treatment, einschließlich:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton
- Esthetics
- Nasopharyngeal Airway
- Frontal Before Treatment

Es enthält außerdem die frontal view before treatment, einschließlich:

- Dental Relations
- Dental to Skeleton

Dental Cephalometric Finding

Dental Cephalometric Finding

Lateral Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5	*
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4	*
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2	***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7	*
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7	*
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1	*

Dental Cephalometric Finding


Dental Cephalometric Finding

Frontal Before Treatment

Dental Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5	
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1	
#06 Intermolar Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7	***
08 Inter canine Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1	*
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4	*

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (8)

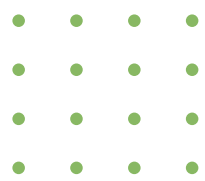

06

Skeletal Findings

Dieser Bericht zeigt skeletal cephalometric-Details aus der lateral view before treatment, einschließlich skeletal relations, jaw-to-cranium position und internal structure. Er enthält außerdem dieselbe Analyse aus der frontal view.

Tracing Set-Bilder sind ebenfalls verfügbar.

Skeletal Cephalometric

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#13 Convexity	7.2 mm	6.1 mm	0.4	
#15 Lower Facial Height	39.1 dg	48.0 dg	-2.2	**
84 Present Patient Height	150.0 cm	147.7 cm		
91 Posterior face height	78.9 mm			
92 Anterior face height	118.9 mm			
93 Posterior/Anterior ratio	66.3 %			
94 Saddle Angle	130.1 dg	123.0 dg	2.4	**
96 Condylion-A point	95.7 mm	90.4 mm	1.5	*

Skeletal Cephalometric

Frontal Before Treatment

Skeletal Relations

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
#14 Max-Mand Width Left	-13.8 mm	-11.8 mm	-0.7	
#16 MaxiMand Width Right	-11.5 mm	-11.8 mm	0.1	
17 MaxiMand Midline	-0.3 dg	0.0 dg	-0.1	

Jaw to Cranium

FACTOR	MEASURED VALUE	CLINICAL NORM	DEVIATION FROM	DEVIATION NORM
--------	----------------	---------------	----------------	----------------

Skeletal Cephalometric

Tracing Set

AN2000014162

Zoom

VISUAL NORMS

ANN

AN2000014162

Zoom

VISUAL NORMS


ANN

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (9)

07

Tracing Measurements

Dieser Bericht enthält Tracing-Messwerte basierend auf den Bildern der lateral und frontal view.

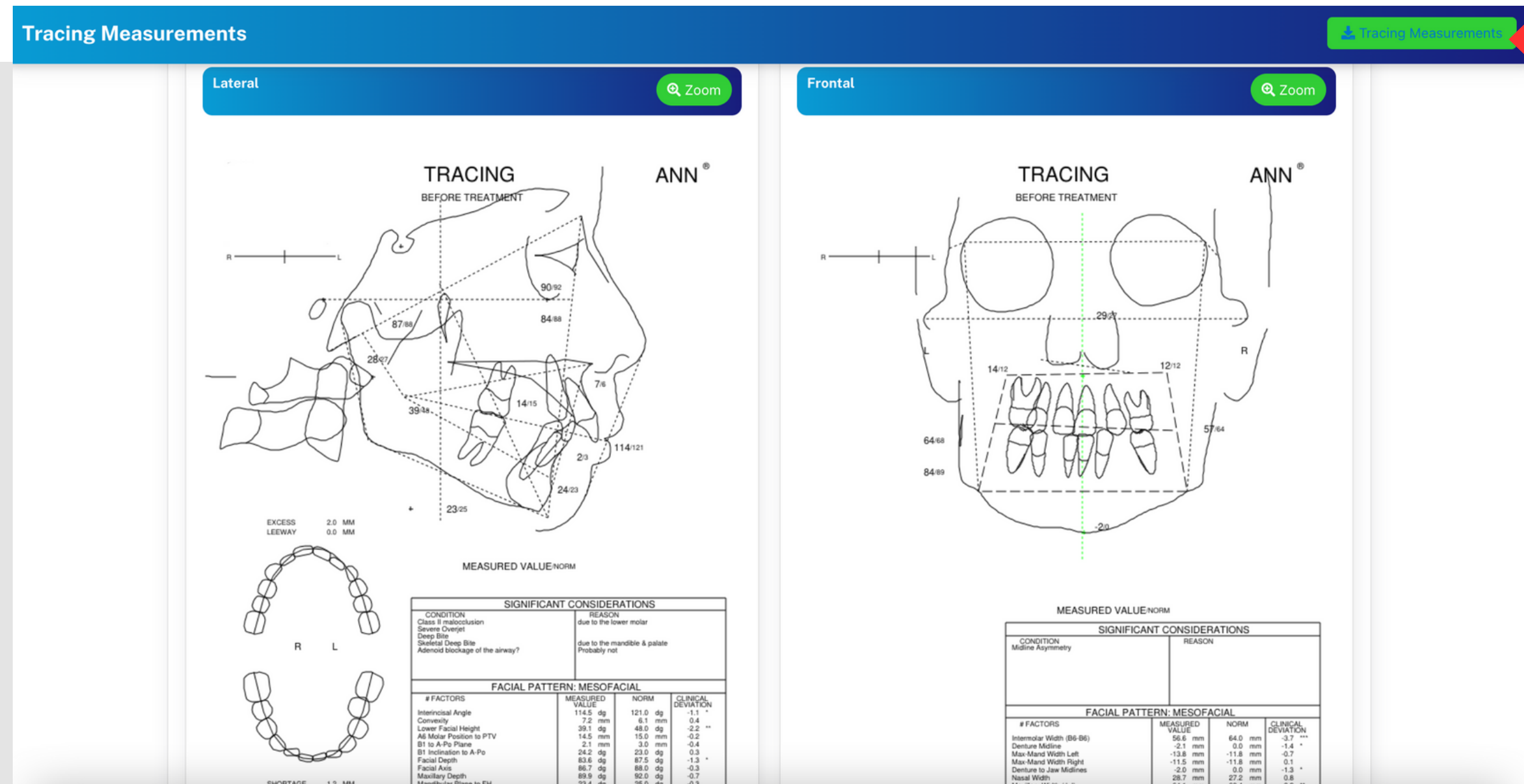

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (10)

08

Sequence Worksheet (1)

- Das Sequence Worksheet bietet einen dreiteiligen Bericht: Narrative, Letter und Treatment Plan Diagram Chart.
- Der Abschnitt „Narrative“ fasst die Behandlungsabfolge für die upper und lower arches zusammen und beschreibt die Maßnahmen für jeden Monat. Außerdem enthält er ein an den Patienten gerichtetes Letter.
- Der Abschnitt „Letter“ bietet eine Behandlungszusammenfassung, die für den Arzt bestimmt ist.

Continue...

Sequence Worksheet

Narrative (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Step-by-Step Treatment Summary for

Upper Arch Treatment Sequence:

1. **Month 1-4: Expand Arch**
 - The upper arch will be expanded. This helps to create space and improve the alignment of the teeth.
2. **Month 5-7: Correct Convexity and Distalize 6**
 - Simultaneously, we will correct the convexity (the outward curvature of your teeth) and move the molar teeth (6th teeth from the front) backwards to align properly with the rest of the teeth.
3. **Month 6-10: Intrude 1 and Retract 4 and/or 5**
 - From month 6, while continuing previous treatments, the front tooth (Incisor 1) will be moved downwards (intruded) to correct its height.
 - The canine and premolar teeth (4 and 5) will be pulled back to improve the bite and aesthetic appearance.
4. **Month 10-11: Retract 3**

Sequence Worksheet

Letter (This output might take some time to produce, please check regularly)

English (US) Español (Mexicano) Português (Brasil)

Subject: Treatment Design Review for

Dear Dr. Portal Demo,

I hope this message finds you well. After reviewing Vincent Ann's facial structure and anticipating how they might respond to dental treatment, our planned approach indicates a significant adjustment to the position of the front teeth is necessary.

We would appreciate your expertise in evaluating our treatment plan. Could you please consider whether standard dental treatments would be effective for this case? Alternatively, we have outlined a few less conventional methods that could be considered:

- Implementing mechanisms to help open the bite
- Introducing a phase of treatment using a functional appliance
- Aiming for a slightly deeper bite than usual

These methods are not typically standard, but given the unique requirements of this case, they might be worth considering. We strive to keep you informed when a case requires exceptional procedures.

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (11)

08


Sequence Worksheet (2)

Ein herunterladbares Treatment Plan-Diagramm im JPG-Format wird ebenfalls als Teil des Berichts bereitgestellt.


Klicken Sie auf „Zoom“, um eine vergrößerte Ansicht des Diagramms zu sehen.

Hinweis:

- Die Funktion „Letter“ wird möglicherweise für bestimmte Fälle nicht bereitgestellt.
- Das Sequence Worksheet ist NICHT verfügbar, wenn missing 1st molar(s) ODER missing central incisor(s) vorliegen.

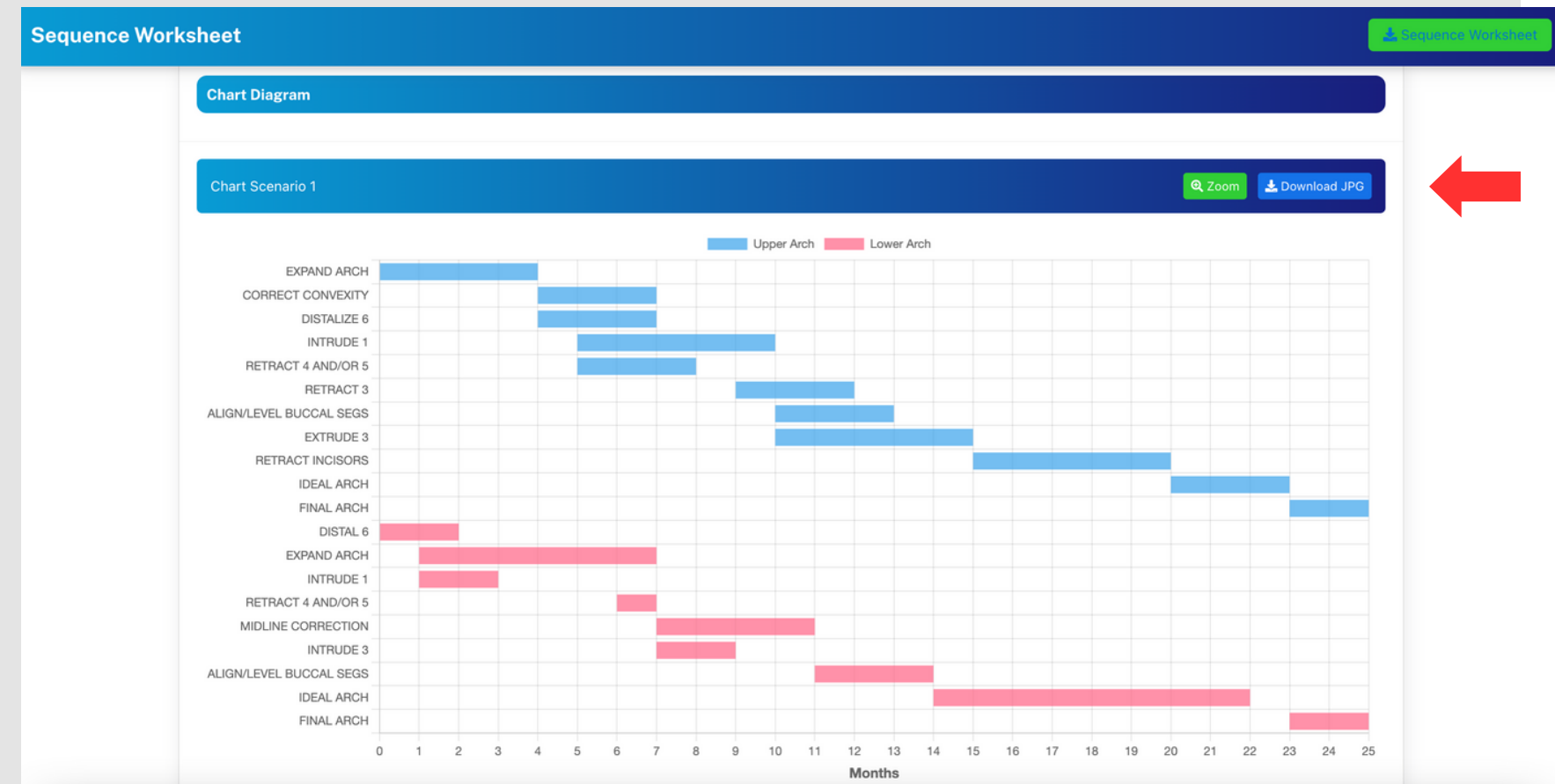

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (12)

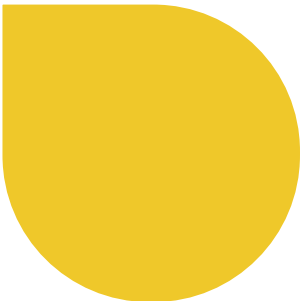


VISUAL NORMS ANN®

09

Full Comprehensive Report

Sie können einen vollständigen Bericht im PDF-Format herunterladen. Er enthält alle Ergebnisse – von Report 1 bis Report 8.

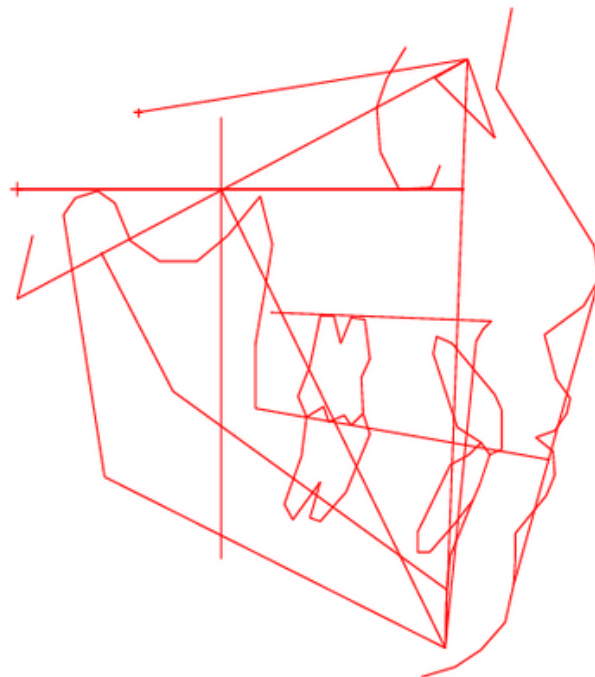

ANN

Data Services
HDS, Inc.

*1(847)665-9458 47 W Polk St
Chicago, IL 60605

ANN Case Number: 0000 1416_2
ANN Run date: 06/17/2025

X-Ray date: 01/12/2025 Age: 12.0
Birthdate: 01/01/2013 Sex: Male 4

Reference: C C D I

CCD - ORTHODONTIC CONDITIONS

LATERAL BEFORE TREATMENT

FRONTAL BEFORE TREATMENT

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM
NORM

- Appears on tracing

FACTOR

MEASURED
VALUE

CLINICAL
NORM

CLINICAL
DEVIATIONS
FROM
NORM

- Appears on tracing

DENTAL RELATIONS

DENTAL RELATIONS

01 Molar Relation	1.0 mm	-3.0 mm	1.5 *
03 Canine Relation	0.9 mm	-2.0 mm	1.4 *
05 Incisor Overjet	10.5 mm	2.5 mm	3.2 ***
07 Incisor Overbite	5.9 mm	2.5 mm	1.7 *
09 Mand Incisor Extrusion	4.7 mm	1.2 mm	1.7 *
#11 Interincisal Angle	114.5 dg	121.0 dg	-1.1 *

02 Molar Relation Left (A6-B6)	0.9 mm	0.0 mm	0.5
04 Molar Relation Right (A6-B6)	-0.2 mm	0.0 mm	-0.1
#06 Interincisor Width (B6-B6)	56.6 mm	64.0 mm	-3.7 ***
08 Interincisor Width (B3-B3)	26.5 mm	29.1 mm	-1.1 *
#10 Denture Midline	-2.1 mm	0.0 mm	-1.4 *

DENTAL TO SKELETON

DENTAL TO SKELETON

#18 A6 Molar Position to PTV	14.5 mm	15.0 mm	-0.2
#20 B1 to A-Po Plane	2.1 mm	3.0 mm	-0.4
#22 A1 to A-Po Plane	13.0 mm	5.5 mm	3.4 ***
#24 B1 Inclination to A-Po	24.2 dg	23.0 dg	0.3
26 A1 Inclination to A-Po	41.3 dg	36.0 dg	1.3 *
27 Occlusal Plane to Xi	0.9 mm	-0.5 mm	0.5
28 Inclination of Occl Plane	16.0 dg	25.0 dg	-2.2 **
54 B1 Inclination to FH	49.6 dg	65.0 dg	-3.1 ***

19 B6 to J-Ag Left	6.2 mm	5.4 mm	0.4
21 B6 to J-Ag Right	9.6 mm	5.4 mm	2.1 **
#23 Denture to Jaw Midlines	-2.0 mm	0.0 mm	-1.3 *
25 Occlusal Plane Tilt	-2.2 mm	0.0 mm	-1.1 *

ESTHETICS

29 Lower Lip to Esthetic Plane	3.3 mm	2.0 mm	0.7
30 Upper Lip Length	30.5 mm	26.8 mm	1.8 *
31 Lip Embrasure to Occl Plane	-0.8 mm	-3.0 mm	1.1 *
58 NasoLabial Angle	103.0 dg	110.0 dg	-1.4 *

NASOPHARYNGEAL AIRWAY

62 N-S-Ba	133.9 dg	129.6 dg	0.9
63 Ba-S-PNS	56.3 dg	63.0 dg	-2.7
85 Airway Percent	63.0 %	58.5 %	0.3
86 Linder-Aronson AD1	22.4 mm	24.0 mm	-0.3
87 Linder-Aronson AD2	19.1 mm	19.5 mm	-0.1
88 Distance PTV to Adenoid	15.0 mm	11.7 mm	0.7

Step 12: Review The Reports / Berichte überprüfen (13)

10

HLD Summary

Dieser Bericht gibt Ihnen die wichtigsten Informationen zum Handicapping Labio-Lingual Deviation (HLD) Index Score Sheet. Er zeigt außerdem Ihren Qualifikationsstatus basierend auf dem HLD Index.

Richtlinien und Regeln für die Anwendung des HLD Index sind ebenfalls verfügbar.

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

A. Conditions 1-5 Are Automatic Qualifiers

- 1 Cleft Palate YES
- 2 Deep impinging bite with signs of tissue damage, not just touching palate NO
- 3 Anterior crossbite with gingival recession NO
- 4 Severe traumatic deviation (i.e., accidents, tumors, etc. attach description) NO
- 5 Impacted Maxillary Central Incisor NO

Continue to scoring below if there are no qualifying conditions checked above

B. Conditions 6-14 Must Score 28 Points or More to Qualify

Condition	Unit	Index	Score
6 Overjet (one upper central incisor to labial of the most labial lower incisor)	mm	x 1	11

HANDICAPPING LABIO-LINGUAL DEVIATION INDEX (HLD) SCORE SHEET

Guidelines and Rules for Applying the HLD Index

The provider is encouraged to score the case and exclude any case that obviously would not qualify for treatment. Upon completion of the HLD Index score sheet, review all measurements and calculations for accuracy.

General Instructions

- ☒ Indicate by checkmark next to A or B which criteria you are submitting for review.
-  Position the patient's teeth in centric occlusion.
-  Record all measurements in the order given and round off to the nearest millimeter.
-  Enter the score "0" if condition is absent.

A. Automatic Qualifiers (Conditions 1-5)

Indicate with an "X" if condition is present.

Cleft Palate
a cleft palate deformity must be demonstrated on the study model, if the deformity cannot be demonstrated on the study model, the condition must be diagnosed by properly credentialed experts and the diagnosis must be supported by documentation. If present, enter an "X".

Deep Impinging Bite
deep impinging overbite with signs of tissue damage of the palate, not just touching palate, including inflammation or damage of the gingiva palatal to the maxillary incisors. The condition must be clearly visible in the mouth and demonstrate on photos. On study models, the mandibular teeth must be clearly touching the palate and the tissue indentations or evidence of soft tissue damage or inflammation must be clearly visible. Tissue indentations without soft tissue damage do not meet the criteria. If present, enter an "X".

Tier

Tier
T1 Credit
242 pts

DR ANNIE™ Insights

Active Patient >

Archive Patient >

Patient List

Patients

Search patient...

+ New Patient

Patient ▾

Profile ▾

Time Point ▾

Progress ▾

Action ▾

No data to display



- Tier zeigt Ihre aktuelle Stufe bzw. Position auf DR ANNIE™ Insights und befindet sich in der oberen rechten Ecke (siehe roter Pfeil).
- Es gibt drei Tiers: Tier 1, Tier 2 und Tier 3.
- Jedes Tier bietet eigene Vorteile.
- Siehe Abbildung für Details zu den Vorteilen und Upgrade-Richtlinien oder besuchen Sie den Bereich „**Pricing & Tier Guidelines**“.

PRICING AND TIER
UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules

Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:

You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100–200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:

You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3

Standard \$10

Standard + \$15

Complete \$20

0 - 100

Report(s) Annually

TIER 2

Standard \$8

Standard + \$10

Complete \$15

100 - 200

Report(s) Annually

TIER 1

Standard \$5

Standard + \$8

Complete \$10

200+

Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50

VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.


User Credit / Benutzerguthaben

- Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann „Credits“ oder klicken Sie auf „Credit“ in der oberen Leiste (siehe rote Pfeile), um Ihr Guthaben und Ihre Statistiken anzuzeigen.

The screenshot displays a user interface for managing credits. At the top right, the user's tier is 'T1' and their credit balance is '286 pts'. A dropdown menu is open, showing options: 'Credits' (highlighted with a red arrow), 'Doctor Preference', 'Manual Guide', and 'Log Out'. The main content area is divided into two sections: 'Top Up' and 'Credit'. The 'Top Up' section includes buttons for adding credit in increments of \$20, \$50, \$100, \$300, 1000, and 2000, along with 'BACK' and 'CHECKOUT' buttons. The 'Credit' section lists various statistics: Balance, Credit Spend (MTD) / (YTD), Credit Topup (YTD), Paid Report (MTD) / (YTD) (2 / 8), and Generated Report (MTD) / (YTD) (14 / 34). At the bottom, there are two tabs: 'Pricing & Tier Guidelines' (active) and 'Usage History'.



Pricing & Tier Upgrade Guidelines / Preis- und Upgrade-Richtlinien für Stufen

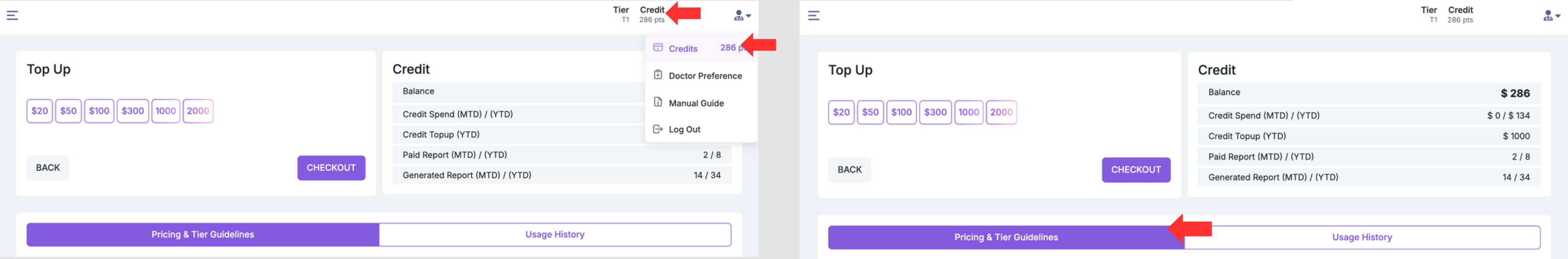

- Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann „Credits“ oder klicken Sie auf „Credit“ in der oberen Leiste (siehe rote Pfeile).
- Klicken Sie anschließend auf „Pricing & Tier Guidelines“, um die Kosten der einzelnen Funktionen sowie die Bedingungen für ein Tier-Upgrade einzusehen.
- Beispiel: Wenn Sie sich in Tier 1 befinden, kostet das Erstellen eines Standard Reports 5\$ (5 Punkte).
- In der Abbildung finden Sie Anleitungen zum Tier-Upgrade und zu den enthaltenen Vorteilen.
- Das erneute Generieren desselben Berichts verursacht keine zusätzlichen Kosten und verbraucht keine weiteren Credits.
- Vergessen Sie nicht, nach verfügbaren Aktionen oder saisonalen Rabatten zu schauen, um Credits zu sparen.

PRICING AND TIER UPGRADE GUIDELINES

Tier Upgrade Rules
Topping up \$1,000 in a single transaction will automatically upgrade you by 1 tier.
Topping up \$2,000 in a single transaction will upgrade you by 2 tiers.
Tier progression is calculated on an annual basis.

To Qualify for Tier 1 in the Following Year:
You must remain in Tier 2 for a full year and generate 100-200 cases. If you do not top up and generate fewer than 100 cases, you will be downgraded to Tier 3.

To Maintain Tier 1:
You must either top up \$1,000 or generate 200+ cases annually. If you do not top up and generate fewer than 200 cases, your tier will drop to Tier 2 or Tier 3, depending on your annual case volume.

TIER 3	TIER 2	TIER 1
Standard \$10	Standard \$8	Standard \$5
Standard + \$15	Standard + \$10	Standard + \$8
Complete \$20	Complete \$15	Complete \$10
0 - 100 Report(s) Annually	100 - 200 Report(s) Annually	200+ Report(s) Annually

VIP REPORTS \$50
VIP Reports will manually reviewed and processed by experienced professionals.

Your credits will be utilized to generate reports. The more reports you generate, the lower the cost per report, as outlined in our tiered pricing structure. When your credits are depleted, you can conveniently top up through our payment gateway and apply any available discount coupons.

Usage History / Nutzungsverlauf

- Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann „Credits“ oder klicken Sie auf „Credit“ in der oberen Leiste (siehe rote Pfeile).
- Klicken Sie anschließend auf „Usage History“, um Ihre Aktivitäten anzuzeigen – einschließlich der Anzahl der Punkte, die für jede genutzte Funktion abgezogen wurden.

Tier T1 Credit 286 pts

Credits 286 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Top Up

\$20 \$50 \$100 \$300 1000 2000

BACK CHECKOUT

Credit

Balance

Credit Spend (MTD) / (YTD)

Credit Topup (YTD)

Paid Report (MTD) / (YTD) 2 / 8

Generated Report (MTD) / (YTD) 14 / 34

Pricing & Tier Guidelines Usage History

Tier T1 Credit 286 pts

Credits 286 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Top Up

\$20 \$50 \$100 \$300 1000 2000

BACK CHECKOUT

Credit

Balance \$ 286

Credit Spend (MTD) / (YTD) \$ 0 / \$ 134

Credit Topup (YTD) \$ 1000

Paid Report (MTD) / (YTD) 2 / 8

Generated Report (MTD) / (YTD) 14 / 34

Pricing & Tier Guidelines Usage History

Date	Transaction	Topup	Spend
Jul 22, 2025 5:38 PM	Reporting		8
Jul 22, 2025 5:25 PM	New Case		5
Jul 15, 2025 8:02 AM	New Case		5
Jul 3, 2025 10:30 AM	Reporting		8
Jul 3, 2025 10:02 AM	New Case		5




Top Up (1)


1. Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Credits“ oder klicken Sie auf „Available Credit“ (siehe rote Pfeile).
2. Klicken Sie auf den verfügbaren Betrag, den Sie aufladen möchten. Anschließend klicken Sie auf „Checkout“.

Continue...

1

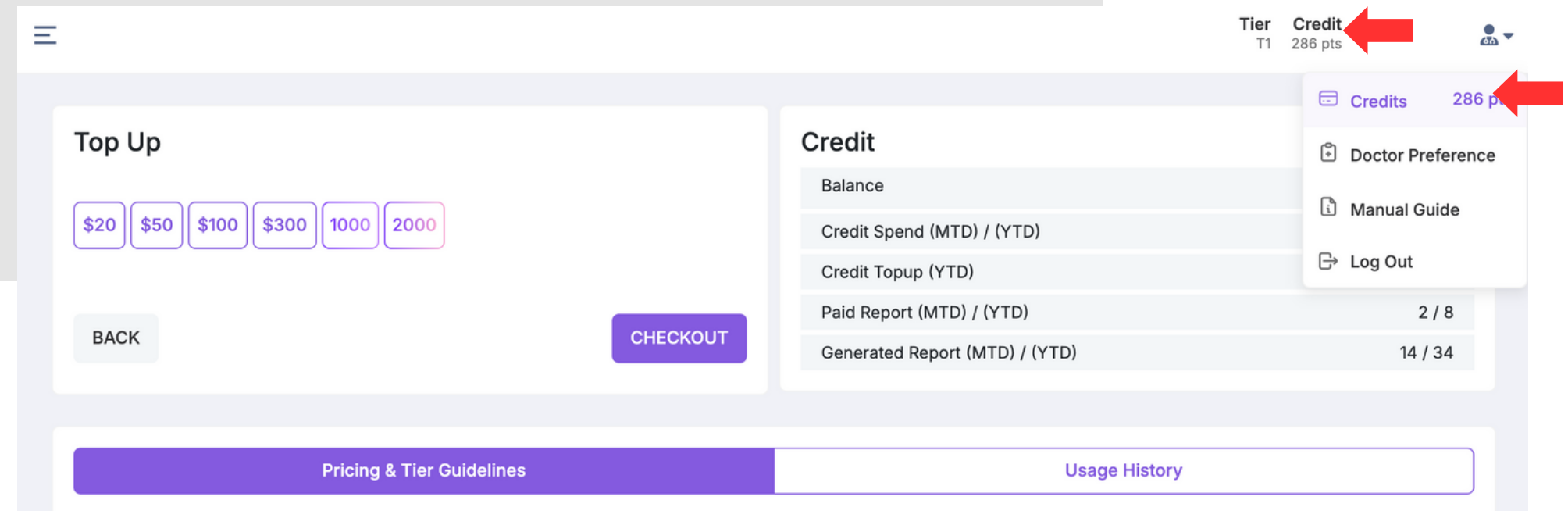

2

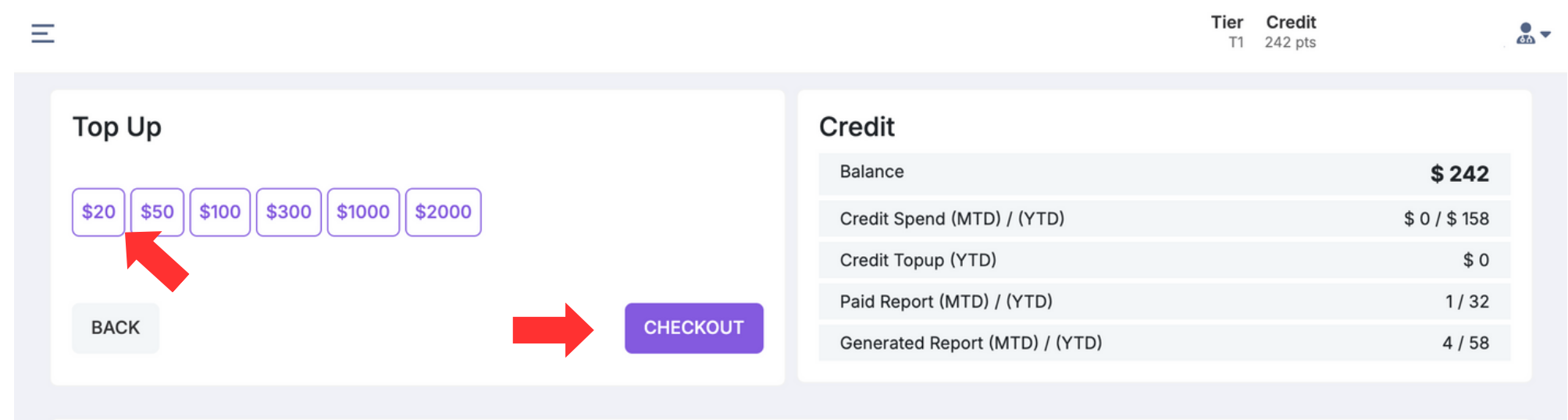

Top Up (2)

3. Die Zahlungsseite wird angezeigt. Wählen Sie Ihre bevorzugte Währung. Wenn Sie einen Promotion-Code haben, können Sie ihn eingeben und die Zahlung abschließen (siehe roter Pfeil).
4. Sie können „Pay with Link“ (grüne Schaltfläche) wählen, wenn Sie bereits ein Link-Konto haben.
5. Alternativ können Sie Ihre Kreditkartendaten manuell eingeben. Optional können Sie das Kontrollkästchen unten aktivieren, um Ihre Informationen für einen zukünftigen One-Click-Checkout zu speichern.
6. Klicken Sie auf „Pay“, um die Transaktion abzuschließen.

The screenshot shows the payment interface for DR ANNIE Insights. It includes a currency selection section, a payment summary table, and a payment method selection area. Red arrows and numbers 3 through 6 highlight specific steps: 3 points to the currency selection and the 'Add promotion code' link; 4 points to the 'Pay with link' button; 5 points to the card information fields; and 6 points to the 'Pay' button at the bottom.

DR ANNIE Insights

Choose a currency:

Exchange rate and fees of your bank may apply

Payment for Annie-Insights Credit 20 points. Trx# TXN12345	\$20.00
Subtotal	\$20.00
Total due	\$20.00

Pay with link

Or

Email

Card information

1234 1234 1234 1234

MM / YY

CVC

Cardholder name

Full name on card

Country or region

Securely save my information for 1-click checkout

Pay faster on Foundation for Modern Bioprogressive Orthodontics and everywhere Link is accepted.

Pay

Patient Case Search / Patientenfallsuche

2

The dashboard shows a patient case for DEMO, CLASSONE (ismart.patient@gmail.com). The Case ID is AN2001500011, and the Selected Timepoint is January 30, 2025. The status is In Progress. The workflow consists of six steps: 1. Intra Oral Photos, 2. Extra Oral Photos, 3. Dental Chart, 4. X-Rays/Radiographs, 5. AI - Findings, and 6. Reports. A red arrow points to the Case ID field.

1

The 'Search Patient Result' interface shows a search bar with the text 'CLASSONE' and a red arrow pointing to the search button. Below the search bar is a table with patient information.


Patient	Profile	Time Point	Progress	Action
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	[Refresh] [Download] [Delete]

The second screenshot shows the same interface but with the search bar containing the Case ID 'AN2001500011' and a red arrow pointing to the search button.

1. Sie können nach einem Fall suchen, indem Sie den Namen des Patient oder die Patient ID in das Suchfeld eingeben.

2. Die Patient ID ist erst verfügbar, nachdem ein Bericht erstellt wurde.

Wenn Sie den Fall bereits eingereicht haben, der Bericht aber noch nicht generiert wurde, können Sie stattdessen nach dem Namen des Patient suchen.

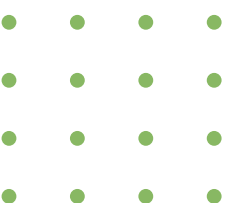

Doctor Preference / Arztpräferenz

Tier T1 Credit 242 pts

Patient List

Patients Search patient...

Credits 242 pts

Doctor Preference

Manual Guide

Log Out

Doctor Preference

Preferred Treatment

☒ Let DR.ANNIE suggest
The user does not have a specific preference and authorizes DR. ANNIE™ to recommend the most appropriate treatment approach, whether extraction or non-extraction.

☐ Force Non-Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily non-extraction-based, where clinically appropriate.

☐ Force Extraction
Based on the user's selection, DR. ANNIE™ will proceed with a treatment plan that is primarily extraction-based, where clinically appropriate.

BACK

Tools

☒ Braces

☐ Aligner

SAVE

- Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und dann auf „Doctor Preference“ (siehe rote Pfeile).
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Behandlung und die gewünschten Tools aus.
- Klicken Sie auf „Save“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Die Auswahl der Doctor Preferences beeinflusst die Analyseergebnisse von DR ANNIE™. Sie wirkt sich auch auf die generierten reports aus.

Wenn Sie die Beurteilungsergebnisse aktualisieren möchten, die bereits einen report erzeugt haben, müssen Sie den timepoint zurücksetzen und den report erneut generieren.



Sample Case / Beispielfall

DR ANNIE™ Insights

Active Patient ▾

- A
- B
- C
- D (3) ←
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N


Patient List

Patients Search patient... Q + New Patient

Patient ▾	Profile ▾	Time Point ▾	Progress ▾	Action ▾
DEMO, CLASSTWO ismart.patient@gmail.com 0617032211	Jan 30, 2010 M 155 cm LA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSONE ismart.patient@gmail.com 0618812345	Jan 30, 2012 F 150 cm CH	2	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️
DEMO, CLASSTHREE ismart.patient@gmail.com 0617472535	Jan 30, 2000 F 160 cm CA	1	Submitted Processed Complete	↔ 📁 🗑️



Tier T1 Credit 299 pts

- Zur Orientierung stehen drei Demo-Fälle basierend auf den Bewertungsergebnissen von DR ANNIE™ zur Verfügung: Demo Class One, Demo Class Two und Demo Class Three.
- Sie finden diese unter dem Buchstaben „D“ im Bereich Active Patient (siehe roter Pfeil).

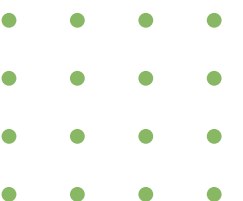

Bereit zur Generierung? Stellen Sie sicher, dass Folgendes erledigt ist

- Stellen Sie sicher, dass alle Bilder den erforderlichen Anforderungen entsprechen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Eingaben und Verifizierungen abgeschlossen sind, bevor der report generiert wird.
- Benutzer können den report auch erneut verarbeiten, wenn sich Änderungen an den Fotos des patient oder am dentalen Verifizierungsprozess ergeben.

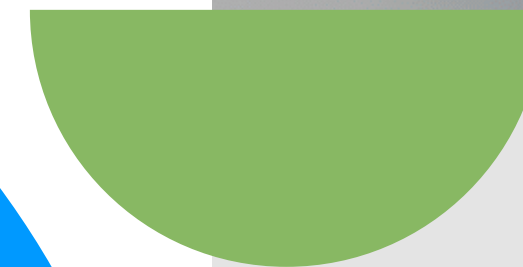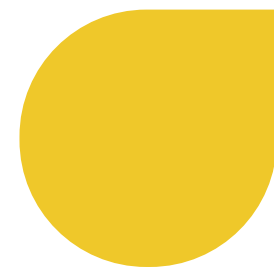

DR. ANNIETM INSIGHTS



✓ AI Dental Findings

✓ Report Generating

✓ Timepoint Feature

✓ AnnieInsight+





Die AI-Technologie von DR ANNIE™ wird ständig weiterentwickelt, um Patienten besser zu verstehen und Behandlungen effektiver zu planen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren unter

✉ support@ismartdds.com

☎ +1-833-6776676 (Toll-Free)

🌐 [iSmartDDS](https://www.ismartdds.com)