	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	<b>Vizol S INTENSIVE</b> kapi za oko, 10 ml	str.: 1/4

**Visol S INTENSIVE**  
kapi za oko

**Upute za uporabu-pažljivo pročitajte**

Kapi su namijenjene ublažavanju **smetnji** suhog oka i **obnavljanju** površine oka.

**SASTAV**

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hijaluronat 0,15%, deksantanol 2%, voda, pročišćena.

**Bez konzervansa.**

**NAMJENA**

**Vizol S INTENSIVE** kapi za oko namijenjene su ublažavanju blažih do umjerenih smetnji suhog oka, stabilizaciji suznog filma i podmazivanju oka čineći njegovu površinu glatkom.

Također, ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih nošenjem leća, dijagnostičkim ili kirurškim zahvatima na oku,
- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih vanjskim faktorima (vjetar, sunce, klorirana voda, liječenje lijekovima),
- preopterećenja oka (dugotrajan rad za računalom).

Primjena kapi omogućuje brže olakšanje navedenih tegoba.


Vizol S INTENSIVE kapi imaju dvojak učinak: sadrže natrijev hijaluronat koji vlaži i stabilizira suzni film te deksantanol koji smiruje, štiti i pomaže u regeneraciji površine oka. Smetnje suhog oka mogu se ublažiti i na taj način spriječiti komplikacije.

Suhoća oka može nastati zbog:

- operativnih zahvata, ozljeda na oku ili prisutnosti stranog predmeta u oku,
- poremećaja suznog filma uzrokovanih nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem što može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma nelagode,
- okruženja (centralno grijanje, klimatizacijski uređaji, fluorescentno svjetlo, dim i vjetar),
- dugotrajnog rada za računalom,
- korištenja dekongestivnih kapi za oko,
- starenja,
- nošenja kontaktnih leća,
- spola (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze),
- lijekova (za liječenje depresije, povišenog tlaka, za sprečavanje začeca),
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom).

Vizol S INTENSIVE kapi za oko mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća.

**UPOZORENJA I MJERE OPREZA**

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 2/4

### Nemojte koristiti Vizol S INTENSIVE:

- u slučaju preosjetljivosti (alergije) na natrijev hijaluronat, dekspantenol ili bilo koji drugi sastojak Vizol S INTENSIVE kapi za oko.  
U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda i javiti se liječniku.

### Ostala upozorenja:

- Ako primijetite da su Vizol S INTENSIVE bočica ili aplikator oštećeni nemojte koristiti proizvod.
- Kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena, svaku bočicu proizvoda trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S INTENSIVE i otopina za kontaktne leće, drugih kapi za oko ili masti za primjenu u oku. Ako koristite još neki proizvod za primjenu u oku, pričekajte najmanje 15 minuta između primjena.

### Napomena:

Neposredno nakon ukapavanja kapi vaša se vidna sposobnost može umanjiti te za to kratko vrijeme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i strojevima, već pričekajte da vam slika postane jasna.

### SIGURNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filtar koji proizvod čini **sigurnim za primjenu** jer sprečava onečišćenje otopine nakon otvaranja.


Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.

Proizvod se općenito dobro podnosi. Međutim, ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.


### UPUTE ZA UPORABU

Kapi se mogu koristiti više puta dnevno, prema potrebi.

Ukapati 1 – 2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka. Ne sadrže konzervanse te stoga nisu štetne za primjenu u oku.

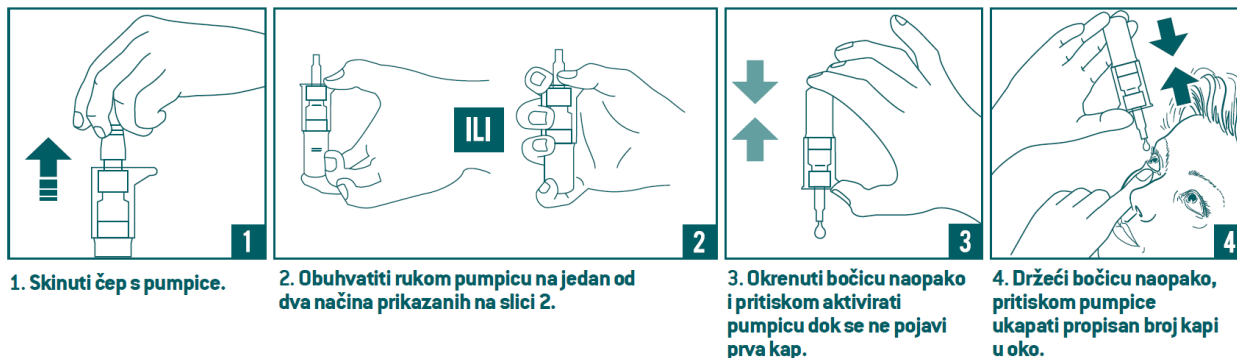

Isprobajte i ostale kapi za suho oko iz Vizol S linije:

 Kao kap vode na dlanu	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	<b>Vizol S INTENSIVE</b> kapi za oko, 10 ml	str.: 3/4

PROIZVOD	NAMJENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMJENE	KORIŠTENJE S KONTAKTNIM LEĆAMA	OSJEĆAJ NAKON NANOŠENJA
<b>Vizol S 0,21% FAST RELIEF</b>	Ublažavanje blažih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,21%	Dugotrajan rad za računalom, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim)	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi.	Da	Trenutno olakšanje i osvježanje. Dugotrajan osjećaj vlaženja.
<b>Vizol S 0,4% LONG EFFECT</b>	Ublažavanje težih smetnji suhog oka	Natrijev hijaluronat 0,4%	Agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak), centralno grijani i klimatizirani prostori, starenje, terapija lijekovima		Ne	Trenutno olakšanje i dugi učinak vlaženja. Dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
<b>Vizol S INTENSIVE</b>	Ublažavanje smetnji suhog oka i obnavljanje površine oka	Natrijev hijaluronat 0,15% dekspantenol 2%	Mehanički iritansi oka: nošenje leća, operativni ili dijagnostički zahvati, lijekovi.		Da	Trenutno osvježanje i dugotrajan osjećaj ugone i vlaženja.

### PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

### ROK VALJANOSTI

Otisnut je na pakiranju.

Rok valjanosti nakon otvaranja je 180 dana.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

### ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

### PAKIRANJE

10 ml




### DATUM REVIZIJE UPUTE


Travanj, 2021.

### Objašnjenje simbola na proizvodu



Pogledati Upute za uporabu

	PRIJEDLOG TEKSTA UPUTE	Travanj, 2021.
	Vizol S INTENSIVE kapi za oko, 10 ml	str.: 4/4


 25°C Čuvati na temperaturi do 25°C


 Proizvođač

 Broj serije


 Rok valjanosti


 CE oznaka


 Sterilno, aseptična tehnika obrade


 Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)

#### Dodatni simboli na kutiji:

 Regeneracija i vlaženje kod mehaničkih iritacija oka i terapije lijekovima

 Dvojako djelovanje kod blažih do umjerenih smetnji suhog oka

 Ublažavanje nelagode i iritacije oka kod nošenja kontaktnih leća

 Rok valjanosti nakon otvaranja: 6 mjeseci