

	UPUTSTVO	April 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oči, 10 ml	str: 1/4

Vizol S 0,21% FAST RELIEF
Vizol S 0,4% LONG EFFECT
 kapi za oči

Uputstvo za upotrebu-pažljivo pročitajte

SASTAV

Natrijum hlorid, natrijum dihidrogenfosfat dihidrat, natrijum hidrogenfosfat bezvodni, natrijum hijaluronat, voda, prečišćena.

Bez konzervansa.

NAMENA

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suve oči namenjene su za ublažavanje **blažih smetnji** suvog oka.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za suve oči namenjene su za ublažavanje **težih smetnji** suvog oka.

Kapi za oči služe za zaštitu, vlaženje i podmazivanje oka. Primena kapi omogućava brzo olakšanje tegoba.

Simptomi suvog oka mogu se ublažiti i tako sprečiti komplikacije.

Suvoća oka može nastati zbog:

- poremećaja suznog filma uzrokovanih nedostatkom suza ili njihovim obilnim isparavanjem što može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma nelagodnosti
- okruženja (centralno grejanje, klima uređaji, fluorescentno svetlo, dim i vetar)
- dugotrajnog rada za računarom
- upotrebe dekongestivnih kapi za oči
- stareња (75% populacije starijih od 65 godina pati od sindroma suvog oka)
- nošenja kontaktnih sočiva
- operativnih zahvata ili povreda oka
- pola (hormonske promene kod žena tokom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze)
- lekova (antidepresivi, lekovi za povišen krvni pritisak, kontracepcija)
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitne žlezde, glaukom).

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suve oči mogu se koristiti i tokom nošenja kontaktnih sočiva.

Vizol S 0,4% LONG EFFECT su viskozne kapi, koje obezbeđuju duže zadržavanje natrijum hijaluronata na površini oka, što rezultira produženim vlaženjem i boljom zaštitom. Prilikom upotrebe Vizol S 0,4% kapi za suve oči, preporučuje se skidanje sočiva na 15 minuta tokom ukapanja.

Natrijum hijaluronat je sastavni deo naše očne vodice i staklastog tela.

U Vizol S kapima za suve oči natrijum hijaluronat svakim treptajem stvara zaštitni film preko površine oka. Na taj način uklanja osećaj suvoće, peska i nadraženosti oka.

Koriste se i nakon operativnih zahvata kao i kod suvog oka kao posledice upotrebe protivupalnih lekova u oku (nakon savetovanja sa lekarom).

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Ne koristite Vizol S:

	UPUTSTVO Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oči, 10 ml	April 2021. str: 2/4
---	--	------------------------------------

- u slučaju preosetljivosti (alergije) na natrijum hijaluronat ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S kapi za oči.
U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda i javiti se lekaru.

Ostala upozorenja:

- Ako primetite da su Vizol S boćica ili aplikator oštećeni, nemojte koristiti proizvod.
- Da bi se osigurala bezbedna primena i higijena, svaku boćicu proizvoda treba da koristi samo jedna osoba.
- Nije poznata interakcija između Vizol S kapi za oči i rastvora za kontaktne sočive, drugih kapi za oči ili masti za primenu u oči. Ako koristite još neki proizvod za primenu u oči, sačekajte najmanje 15 minuta između primena.

Napomena:

Vizol S 0,4% može trenutno zamagliti vid, zbog toga za to kratko vreme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i mašinama, već sačekajte da vam slika postane jasna.

BEZBEDNOST PROIZVODA


Tehnologija aplikatora boćice sadrži filter koji proizvod čini **bezbednim za primenu** jer sprečava onečišćenje rastvora i nakon otvaranja.

Proizvod ne sadrži konzervanse te je time smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka. Proizvod se generalno dobro podnosi. Međutim, ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo, обратите se svom lekaru ili farmaceutu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Koristiti kapi više puta dnevno, po potrebi. Ukoliko se pravilno koristi jedna boćica je dovoljna za 30 dana. Za dužu primenu, posavetujte se sa svojim lekarom.

Ukapati 1-2 kapi u oko, treptnuti nekoliko puta kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini oka. Ne sadrže konzervanse i zbog toga nisu štetne za primenu u oči.

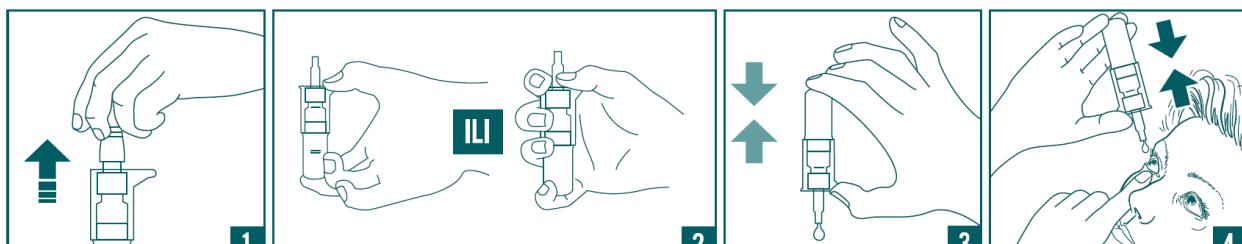

1. Skinuti čep s pumpice.

2. Obuhvatiti rukom pumpicu na jedan od dva načina prikazanih na slici 2.

3. Okrenuti boćicu naopako i pritiskom aktivirati pumpicu dok se ne pojavi prva kap.

4. Držeći boćicu naopako, pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko.

	UPUTSTVO	April 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oči, 10 ml	str: 3/4

Isprobajte i ostale kapi za suve oči iz Vizol S linije:

PROIZVOD	NAMENA	SASTAV	UZROK SMETNJI	NAČIN PRIMENE	UPOTREBA SA KONTAKTNIM SOČIVIMA	OSEĆAJ NAKON NANOŠENJA
Vizol S 0,21% FAST RELIEF	Ublažavanje blažih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,21%	Dugotrajan rad za računarem, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje sočiva, alergija, strano telo, spoljni faktori (suvu vazduh, dim)	Ukapati 1 – 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno po potrebi.	DA	Trenutno olakšanje i osveženje. Dugotrajan osećaj vlaženja.
Vizol S 0,4% LONG EFFECT	Ublažavanje težih smetnji suvog oka	Natrijum hijaluronat 0,4%	Agresivni spoljni faktori (vetar, sunce, suvi vazduh), centralno grejani i klimatizovani prostori, stareњe, terapija lekovima		NE	Trenutno olakšanje i dugi efekat vlaženja. Dugotrajan osećaj prijatnosti i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid.
Vizol S INTENSIVE	Ublažavanje smetnji suvog oka i obnavljanje površine oka	Natrijum hijaluronat 0,15% dekspantenol 2%	Mehanički ritansi oka: nošenje sočiva, operativni ili dijagnostički zahvati, lekovi.		DA	Trenutno osveženje i dugotrajan osećaj prijatnosti i vlaženja.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA:

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Sopot, Milosava Vlajića 110A

Broj rešenja:

515-02-00747-19-001

ROK VALJANOSTI

Utišnut je na pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja je 180 dana.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati van vidokruga i domaćaja dece.

PAKOVANJE

10 ml



DATUM REVIZIJE UPUTSTVA

April, 2021.

	UPUTSTVO	April 2021.
	Vizol S 0,21% FAST RELIEF Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za oči, 10 ml	str: 4/4

Objašnjenje simbola na proizvodu



Pre upotrebe pročitati uputstvo



Proizvođač



Rok upotrebe



Broj serije



CE oznaka



Sterilno, aseptična tehnika obrade



30°C Gornja granica temperature



Upozorenje, pogledajte Uputstvo za upotrebu (za važna upozorenja/mere opreza)

Dodatni simboli na kutiji:

Vizol S 0,21% FAST RELIEF



Trenutno olakšanje simptoma suvog oka kod dugog gledanja u ekran



Vlaženje i ublažavanje zamora očiju tokom vožnje i putovanja



Ublažavanje nelagodnosti i iritacije oka prilikom nošenja kontaktnih sočiva



Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci

Vizol S 0,4% LONG EFFECT



Vlaženje i zaštita kod težih smetnji suvog oka



Trenutno olakšanje tegoba iritacije i produženo delovanje



Vlaženje i zaštita oka u suvim i klimatizovanim prostorijama



Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci