

**Vizol S HYDRO LIPID BALANCE** kapljice za oko se uporabljajo za ublažitev simptomov zmerno do hudo suhega očesa zaradi pomanjkanja lipidnega sloja solznega filma, kar vodi do izhlapevanja vodnega sloja solznega filma in suhosti očesa.

## SESTAVA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE so sterilne kapljice za oko v obliki emulzije, ki vsebuje natrijev hialuronat 0,15 %, ricinusovo olje 0,25 %, tokoferol (vitamin E TPGE), glicerol, polisorbit 80, makroglicerol hidroksistearat, trometamol, klorovodikovo kislino, dinatrijev edetat, natrijev klorid, prečiščeno vodo.

Ricinusovo olje, vitamin E TPGE in makroglicerol hidroksistearat tvorijo kompleks dolgoveržnih trigliceridov (LCT).

BREZ KONZERVANSOV.

BREZ FOSFATOV.

## NAMEN UPORABE

**Vizol S HYDRO LIPID BALANCE** kapljice za oko se uporabljajo za ublažitev simptomov zmerno do hudo suhega očesa. Kapljice za oko obnovljajo lipidni sloj solznega filma, stabilizirajo solzni film in optimalno vlažijo površino očesa.

Ne glede na to ali je suho oko posledica pomanjkanja vodnega ali lipidnega sloja solz, izsušena površina očesa povzroča neprijetne simptome, ki se ob neustrezni obravnavi sčasoma poslabšajo. Suhost oči se lahko kaže z občutkom peska ali tujka v očesu, draženjem, pekočim občutkom, srbenjem, prekomernim solzenjem in rdečino očesa.

Suhost oči je povezana s procesom staranja, jemanjem določenih zdravil, hormonskimi spremembami, obremenitvijo oči (nošenje kontaktnih leč), različnimi vplivi okolja (suh zrak, veter, klimatska naprava) ter številnimi tveganji sodobnega načina življenja, kot je dolgotrajno gledanje v zaslone (računalniki, mobilni telefoni, TV), ko se bistveno zmanjša število mežikov na minuto in s tem optimalno izločanje solz.

**Vizol S HYDRO LIPID BALANCE** kapljice za oko vsebujejo nano-kapljice **kompleksa LCT** (sestavljene iz ricinusovega olja, vitamina E in površinsko aktivne snovi), ki **obnavljajo in ščitijo lipidni sloj solz, ki predstavlja naravno pregrado za preprečitev izhlapevanja vlage.**

**Natrijev hialuronat** v izdelku Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapljice za oko učinkovito navlaži oko in takoj ublaži simptome suhega očesa.

**Primeren za vse vrste suhega očesa.**

## OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

**Ne uporabljajte izdelka Vizol S HYDRO LIPID BALANCE:**

- v primeru preobčutljivosti (alergije) na katero koli sestavino izdelka.

V primeru alergijske reakcije takoj prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte z zdravnikom.

### Druga opozorila:

- Če opazite, da sta plastenka ali aplikator poškodovana, izdelka ne uporabljajte.
- Z namenom zagotavljanja varne uporabe in ustrezne higiene, sme plastenko uporabljati le ena oseba.
- Medsebojno delovanje izdelka Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapljic za oko z drugimi kapljicami za oko ali mazili za uporabo v očesu, ni znano. Če uporabljate še kateri koli drugi izdelek za oko, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapljice za oko so namenjene za uporabo pri odraslih, starejših od 18 let.

Pred uporabo kapljic za oko pri otrocih se posvetujte z zdravstvenim delavcem, da se prepričate, če so primerne za vašega otroka.

## Opomba:

Izdelek lahko povzroči rahlo zamegljen vid. V tem primeru je priporočljivo, da se za kratek čas izogibate vožnji avtomobila ali upravljanju strojev, dokler se vam vid ponovno ne zbistri.

## VARNOST IZDELKA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapljice za oko so **brez konzervansov** in **brez fosfatov**, zato je možnost draženja in poškodb površine očesa zmanjšana.

Tehnologija aplikatorja plastenke vsebuje filter, zaradi katerega je izdelek varen za uporabo, saj preprečuje kontaminacijo raztopine in **ohranja sterilnost vsebine do 6 mesecev po odprtju**.

Izdelek se na splošno zelo dobro prenaša. Če pa opazite kakršne koli neželene učinke, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## NAVODILA ZA UPORABO

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE vedno uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Če niste prepričani, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če vam zdravnik ne predpiše drugače, si po potrebi vkapajte 1-2 kapljici v oči večkrat na dan.

Večkrat pomežiknite, da se raztopina enakomerno porazdeli po očesni površini.

**Izogibajte se stiku konice kapalke s površino očesa ali katero koli drugo površino.**


Pred prvo uporabo je potrebno plastenko aktivirati. V ta namen odstranite pokrovček z aplikatorja, plastenko obrnite navzdol in **večkrat pritiskajte na aplikator, dokler se ne pojavi prva kapljica**.

### Informacije za uporabnike kontaktnih leč


Izdelek se lahko uporablja skupaj s kontaktnimi lečami.

#### Navodila za uporabo:


1. Temeljito si umijte roke.
2. Odstranite pokrovček z aplikatorja (slika 1).
3. Z roko primite aplikator, kot je prikazano na sliki 2.
4. Plastenko obrnite navzdol in pritiskajte na aplikator, dokler se ne pojavi prva kapljica (slika 3).
5. Z nazaj nagnjeno glavo previdno vkapajte 1 kapljico v oko (slika 4).
6. Namestite pokrovček na aplikator.

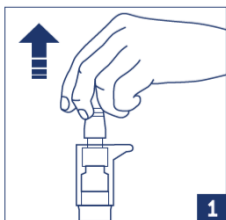


1. Odstranite pokrovček z aplikatorja.

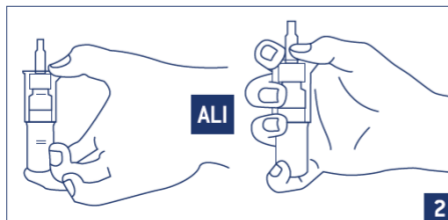

2. Primite aplikator s palcem na pokrovčku in s kazalcem ali mezincom na dnu plastenke.

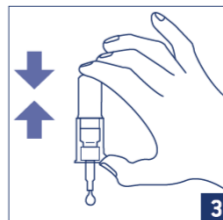

3. Obrnite plastenko navzdol in aktivirajte aplikator, dokler se ne pojavi prva kapljica.

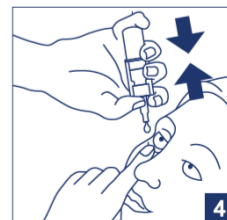

4. Držite plastenko obrnjeno navzdol in s pritiskom na aplikator vkapajte predpisano število kapljic v oko.

PROIZVAJALEC

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija

ROK UPORABNOSTI

Odtisnjen na ovojnini.  
Rok uporabnosti po odprtju je 6 mesecev.  
Ne uporabljajte izdelka po izteku roka uporabnosti.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte pri temperaturi do 30 °C, v originalnem pakiranju.  
Shranjujte nedosegljivo otrokom.

PAKIRANJE

10 ml

DATUM REVIZIJE

junij 2024

POJASNILO SIMBOLOV NA IZDELKU

| SIMBOL | POJASNILO                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Glejte navodila za uporabo!                                                           |
|        | Medicinski pripomoček                                                                 |
|        | Proizvajalec                                                                          |
|        | Rok uporabnosti                                                                       |
|        | Številka serije                                                                       |
|        | Sterilizirano z aseptičnimi tehnikami obdelave                                        |
|        | Shranjevati pri temperaturi do 30 °C                                                  |
|        | Večkratna uporaba pri enem uporabniku                                                 |
|        | Ne uporabljajte poškodovanega ali preluknjanega izdelka                               |
|        | Pozor! Preberite navodila za uporabo (glede pomembnih opozoril/previdnostnih ukrepov) |
|        | oznaka CE                                                                             |

| Vizol S HYDRO LIPID BALANCE |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatni simboli na škatli:  | Vlaženje in zaščita zmerno do hudo suhega očesa                                       |
|                             | Obnovitev in stabilizacija lipidnega in vodnega sloja solznega filma                  |
|                             | Obnova lipidnega sloja solz, ki je naravna pregrada za preprečitev izhlapevanja vlage |
|                             | Rok uporabnosti po odprtju je: 6 mesecev                                              |

HR/SI 130004838/01

