

## KAPI ZA OČI

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU – PAŽLJIVO PROČITAJTE

## SASTAV

Natrijum hlorid, natrijum dihidrogenfosfat dihidrat, natrijum dihidrogenfosfat bezvodni, natrijum hijaluronat, voda, prečišćena.

## BEZ KONZERVANSA

## NAMENA

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suve oči namenjene su za ublažavanje **blažih smetnji** suvog oka.

Vizol S 0,4% LONG EFFECT kapi za suve oči namenjene su za ublažavanje **težih smetnji** suvog oka.

Kapi za oči služe za zaštitu, vlaženje i podmazivanje oka. Primena kapi omogućava brzo olakšanje tegoba. Simptomi suvog oka mogu se ublažiti i tako sprečiti komplikacije.

## Suvoća oka može nastati zbog:

- poremećaja suznog filma uzrokovano nedostatkom suza ili njihovim obilnim isparavanjem što može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma nelagodnosti
- okruženja (centralno grejanje, klima uređaji, fluorescentno svetlo, dim i vetar)
- dugotrajnog rada za računarom
- upotrebe dekonjestivnih kapi za oči
- starenja [75% populacije starijih od 65 godina pati od sindroma suvog oka]
- nošenja kontaktnih sočiva
- operativnih zahvata ili povreda oka
- pola (hormonske promene kod žena tokom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze)
- lekova (antidepresivi, lekovi za povišen krvni pritisak, kontracepcija)
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitne žlezde, glaukom).

Vizol S 0,21% FAST RELIEF kapi za suve oči mogu se koristiti i tokom nošenja kontaktnih sočiva.

Vizol S 0,4% LONG EFFECT su viskozne kapi, koje obezbeđuju duže zadržavanje natrijum hijaluronata na površini oka, što rezultira produženim vlaženjem i boljom zaštitom. Prilikom upotrebe Vizol S 0,4% kapi za suve oči,

preporučuje se skidanje sočiva na 15 minuta tokom ukapavanja.

Natrijum hijaluronat je sastavni deo naše očne vodice i staklastog tela. U Vizol S kapima za suve oči natrijum hijaluronat svakim treptajem stvara zaštitni film preko površine oka. Na taj način uklanja osećaj suvoće, peska i nadraženosti oka.

Koriste se i nakon operativnih zahvata kao i kod suvog oka kao posledice upotrebe protivupalnih lekova u oku (nakon savetovanja sa lekarom).

## UPOZORENJA I MERE OPREZA

## Ne koristite Vizol S:

- u slučaju preosetljivosti (alerije) na natrijum hijaluronat ili na bilo koji drugi sastojak Vizol S kapi za oči.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda i javiti se lekaru.

## Ostala upozorenja:

- Ako primetite da su Vizol S bočica ili aplikator oštećeni, nemojte koristiti proizvod.
- Da bi se osigurala bezbedna primena i higijena, svaku bočicu proizvoda treba da koristi samo jedna osoba.
- Nije poznata interakcija između Vizol S kapi za oči i rastvora za kontaktna sočiva, drugih kapi za oči ili masti za primenu u oči. Ako koristite još neki proizvod za primenu u oči, sačekajte najmanje 15 minuta između primena.

## Napomena:

Vizol S 0,4% može trenutno zamagliti vid, zbog toga za to kratko vreme ne vozite automobil i ne upurljajte vozilima i mašinama, već sačekajte da vam slika postane jasna.

## BEZBEDNOST PROIZVODA

Tehnologija aplikatora bočice sadrži filter koji proizvod čini **bezbednim za primenu** jer sprečava onečišćenje rastvora i nakon otvaranja. Proizvod ne sadrži konzervanse i time je smanjena njegova mogućnost iritacije i oštećenja površine oka. Proizvod se generalno dobro podnosi. Međutim, ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kapi koristiti više puta dnevno, po potrebi. Pravilnom upotrebom jedna bočica je dovoljna za 30 dana.


Za dužu primenu, posavetujte se sa svojim lekarom.

Ukapati 1-2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se rastvor ravnomerno rasporedio po površini oka.

Ne sadrže konzervanse i zbog toga nisu štetne za primenu u oči.

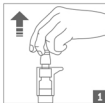

1. Skinuti čep sa pumpice.

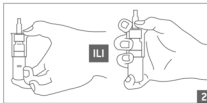

2. Obuhvatiti rukom pumpicu na jedan od dva načina prikazanih na slici 2.



3. Okrenuti bočicu naopako i pritiskom aktivirati pumpicu dok se ne pojavi prva kap.



4. Držeci bočicu naopako i pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko.

## ISPROBAJTE I OSTALE KAPI ZA SUVE OČI IZ VIZOL S LINIJE:

| PROIZVOD                  | NAMENA                                                   | SASTAV                                     | UZROK SMETNJI                                                                                                                           | NAČIN PRIMENE                                                   | UPOTREBA SA KONTAKTNIM SOČIVIMA | OSEĆAJ NAKON NANOŠENJA                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vizol S 0,21% FAST RELIEF | Ublažavanje blažih smetnji suvog oka                     | Natrijum hijaluronat 0,21%                 | Dugotrajna rad za računarom, umor očiju u vožnji i putovanju, nošenje sočiva, alergija, strano telo, spoljni faktori (suvi vazduh, dim) | Ukapati 1 - 2 kapi u oko, više puta dnevno, odnosno po potrebi. | DA                              | Trenutno olakšanje i osveženje. Dugotrajna osećaj vlaženja.                                                                   |
| Vizol S 0,4% LONG EFFECT  | Ublažavanje težih smetnji suvog oka                      | Natrijum hijaluronat 0,4%                  | Agresivni spoljni faktori (vetar, sunce, suvi vazduh), centralno grejani i klimatizovani prostori, starenje, terapija lekovima          |                                                                 | NE                              | Trenutno olakšanje i dug efekat vlaženja. Dugotrajna osećaj prijetnosti i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid. |
| Vizol S INTENSIVE         | Ublažavanje smetnji suvog oka i obnavljanje površine oka | Natrijum hijaluronat 0,15% dekspanterol 2% | Mehanički iritansi oka: nošenje sočiva, operativni ili dijagnostički zahvati, lekovi.                                                   |                                                                 | DA                              | Trenutno osveženje i dugotrajna osećaj prijetnosti i vlaženja.                                                                |

## PROIZVOĐAČ



JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,  
Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

## OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA:

JGL D.O.O. BEograd-SOPOT, Sopot, Milosava Vlajića 110A

## ROK UPOTREBE

Utištan je na pakovanju. Rok upotrebe nakon otvaranja je 180 dana. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

## ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnoj ambalaži.  
Čuvati van vidokrugai i domaćaja dece.

## PAKOVANJE:

10 ml

## DATUM REVIZIJE UPUTSTVA

April, 2021.



## OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Pre upotrebe pročitati uputstvo



Proizvođač



Rok upotrebe



Sterilno, aseptična tehnika obrade



30°C Gornja granica temperature



Broj serije



CE oznaka



Upozorenje, pogledajte Uputstvo za upotrebu (za važna upozorenja/mere opreza)



Vizol S 0,21% FAST RELIEF



Trenutno olakšanje simptoma suvog oka kod dugog gledanja u ekran



Vlaženje i ublažavanje zamora očiju tokom vožnje i putovanja



Ublažavanje nelagodnosti i iritacije oka prilikom nošenja kontaktnih sočiva



Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci



Vizol S 0,4% LONG EFFECT



Vlaženje i zaštita kod težih smetnji suvog oka



Trenutno olakšanje tegoba iritacije i produženo delovanje



Vlaženje i zaštita oka u suvim i klimatizovanim prostorijama



Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci