

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči su namenjene za ublažavanje simptoma umerenog do izrazito suvog oka zbog nedostatka lipidnog sloja suznog filma, što dovodi do isparavanja vodenog sloja suznog filma i suvoće oka.

SASTAV

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE su sterilne kapi za oči, emulzija koja sadrži natrijum hijaluronat 0,15 , ricinusovo ulje 0,25 , tokoferol (vitamin E TPGS), glicerol, polisorbat 80, makroglicerol hidroksistearat, trometamol, hlorovodoničnu kiselinu, dinatrijum-edetat, natrijum hlorid, prečišćena voda.

Ricinusovo ulje, vitamin E TPGS i makroglicerol hidroksistearat formiraju kompleks dugolančanih triglicerida (LCT).

BEZ KONZERVANSA.
BEZ FOSFATA.

NAMENA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči namenjene su za ublažavanje simptoma umerenog do izrazito suvog oka. Obnavljaju lipidni sloj suznog filma, stabilizuju suzni film i optimalno vlaže površinu oka.

Bez obzira da li je li suvoća oka pruzrokovana nedostatkom vodenog ili lipidnog sloja suza, osušena površina oka uzrokuje neprijatne simptome koji se vremenom pogoršavaju, ukoliko se ne leče adekvatno. Suvoća oka može se manifestovati kao osećaj peska ili stranog tela u oku, kao iritacija, peckanje, svrab, prekomerno suzenje i crvenilo oka.

Suvoća očiju povezana je sa starenjem, upotrebom određenih lekova, hormonskim promenama, naprezanjem očiju (nošenjem kontaktnih sočiva), raznim uticajima okoline (suv vazduh, vetar, klimatizacija) i brojnim rizicima savremenog načina života kao što je dugotrajno gledanje ekrana (računari, mobilni telefoni, TV), kada je broj treptaja u minuti značajno smanjen, a samim tim i optimalno lučenje suza.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči sadrže nano-kapi **LCT kompleksa** (formiranog od ricinusovog ulja, vitamina E i surfaktanta) **za obnavljanje i zaštitu lipidnog sloja suza, koji je prirodna barijera protiv isparavanja vlage.**

Natrijum hijaluronat koji se nalazi u Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapima za oči efikasno vlaži i trenutno ublažava simptome suvoće oka.

Pogodan za sve vrste suvog oka.

UPOZORENJA I MERE OPREZA

Nemojte koristiti Vizol S HYDRO LIPID BALANCE:

- u slučaju preosetljivosti (alergije) na bilo koji sastojak proizvoda.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti upotrebu proizvoda i javiti se lekaru.

Ostala upozorenja:

- Ako primetite da su bočica proizvoda ili aplikator oštećeni, nemojte koristiti proizvod.
- Da bi se osigurala bezbedna primena i higijena, svaku bočicu proizvoda treba da koristi samo jedna osoba.
- Nisu poznate interakcije između Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči i drugih kapi ili masti za oči. Ako koristite još neki proizvod za primenu u oko, posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe.

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči namenjene su za primenu kod odraslih osoba starijih od 18 godina.

Za pedijatrijsku primenu, konsultujte se sa zdravstvenim radnikom pre primene ovih kapi za oči, da biste bili sigurni da su pogodne za Vaše dete.

Napomena:

Proizvod može izazvati blago zamućenje vida. U tom slučaju, preporučuje se da izbegavate vožnju automobila ili rukovanje mašinama u kratkom vremenskom periodu, dok Vam vid ponovo ne postane jasan.

BEZBEDNOST PROIZVODA

Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kapi za oči su **bez konzervansa** i **bez fosfata**, što smanjuje mogućnost iritacije i oštećenja površine oka.

Tehnologija aplikatora bočice sadrži filter koji proizvod čini bezbednim za primenu jer sprečava kontaminaciju rastvora i **čuva sterilnost sadržaja 6 meseci nakon otvaranja.**

Proizvod se generalno dobro podnosi. Međutim, ako primetite bilo koju neželjenu reakciju, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uvek primenjujte Vizol S HYDRO LIPID BALANCE kako je navedeno u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre upotrebe.

Ukoliko vaš lekar nije propisao drugačije, ukapajte 1-2 kapi u oči, više puta dnevno, po potrebi.

Trepnuti nekoliko puta kako bi se kap ravnomerno rasporedila po površini oka.

Izbegavajte kontakt vrha kapaljke sa površinom oka ili bilo kojom drugom površinom.


Pre prve primene, potrebno je aktivirati bočicu. U tu svrhu uklonite čep sa pumpe, okrenite bočicu naopako i **pritisnite aplikator nekoliko puta dok se ne pojavi prva kap.**

Informacije za korisnike kontaktnih sočiva


Proizvod je kompatibilan sa kontaktnim sočivima.

Uputstvo za upotrebu:


1. Temeljno operite ruke.
2. Skinite čep sa pumpice (slika 1).
3. Držite pumpicu rukom kao što je prikazano na slici 2.
4. Okrenite bočicu naopako i pritisnite aplikator dok se ne pojavi prva kap (slika 3).
5. Nagnite glavu unazad, pažljivo ukapajte 1 kap u oko (slika 4).
6. Vratite čep na pumpicu.

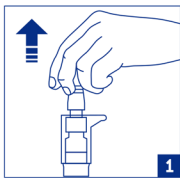


1. Skinuti čep s pumpice.

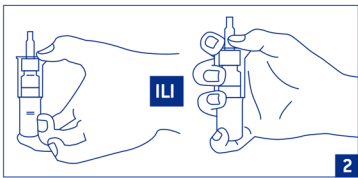

2. Obuhvatiti pumpicu sa palcem na čepu i kažiprstom ili malim prstom na dnu bočice.

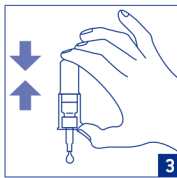

3. Okrenuti bočicu naopako i pumpicu aktivirati dok se ne pojavi prva kap.

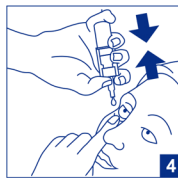

4. Držeci bočicu naopako, pritiskom pumpice ukapati propisan broj kapi u oko.

PROIZVOĐAČ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PROIZVOĐAČA

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Milosava Vlajića 110A, Sopot

Nosilac potvrde o upisu medicinskog sredstva:

Jadran – Galenski Laboratorij d.o.o. Sarajevo,

Igmanska bb, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj BiH Rješenja: 06-07.4-1-8196-2/24 od 24.02.2025. godine.

ROK UPOTREBE

Utisnut je na pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja je 6 meseci.

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnoj ambalaži.

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

PAKOVANJE

10 ml

DATUM REVIZIJE UPUTSTVA

Jun, 2024.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

SIMBOL	OBJAŠNJENJE
	Pre upotrebe pročitati uputstvo
	Medicinsko sredstvo
	Proizvođač
	Rok upotrebe
	Broj serije
	Sterilno, aseptična tehnika obrade
	Čuvati na temperaturi do 30°C
	Jedan pacijent, višekratna upotreba
	Ne koristiti oštećen ili probušen proizvod
	Upozorenje, pogledajte Uputstvo za upotrebu [za važna upozorenja/mere opreza]
	CE oznaka

DODATNI SIMBOLI NA KUTIJI

Dodatni simboli na kutiji		Vlaženje i zaštita umereno do izrazito suvog oka
		Obnavljanje i stabilizacija lipidnog i vodenog sloja suznog filma
		Obnavljanje lipidnog sloja suza, koji je prirodna barijera protiv isparavanja vlage
		Rok upotrebe nakon otvaranja je 6 meseci



1304



130003438/02