




QuikRead go[®] iFOBT

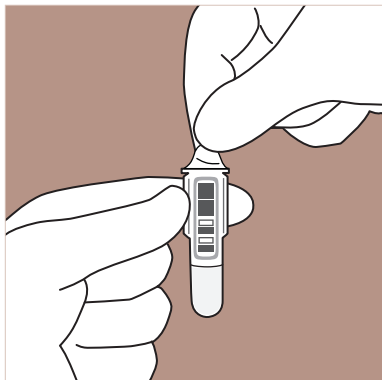

1 Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på den nedre del av kyvetten.

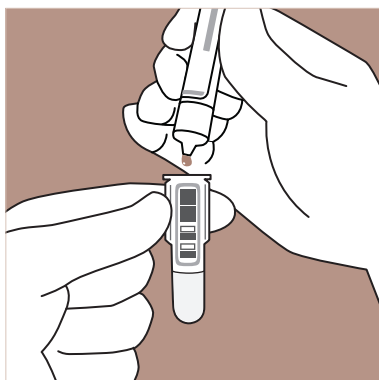


2 Rist prøvetakingsrøret og bryt av tuppen. Fjern de tre første dråpene. Drypp deretter de tre påfølgende dråpene i kyvetten.

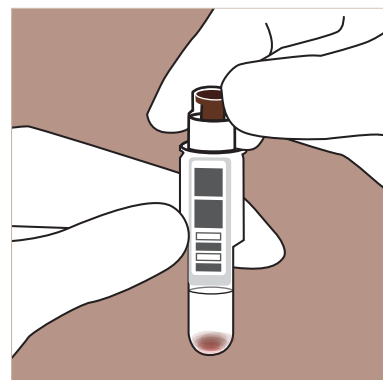


3 Lukk kyvetten tett med en FOB reagenskork. Ikke trykk ned den brune delen. Utfør testen innen 2 timer.



4 Velg **Analyse** i displayet på QuikRead go-instrumentet.

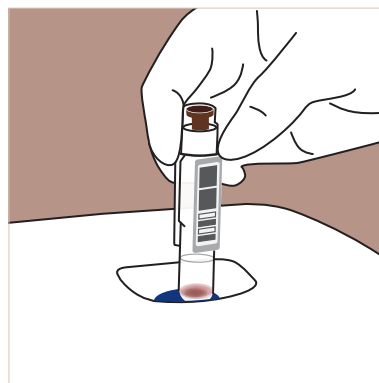

5 Sett kyvetten ned i målebrønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.

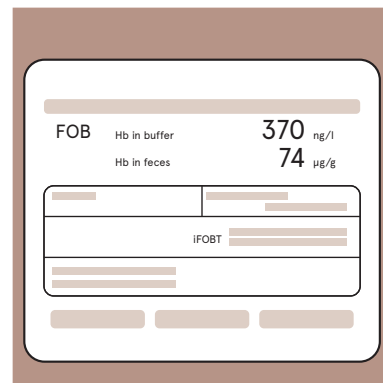

6 Når målingen er ferdig, vises resultatet i displayet og kyvetten kommer automatisk opp.

Les paknings-
vedlegget før du
utfører testen.

QuikRead go[®] iFOBT



Kit

Uåpnet kit i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet



Boksen med reagenskorker

Oppbevaring i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet
Oppbevaring i 18–25°C: **1 måned** (**3 måneder** ved 7,5 timer/dag)



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet
Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:
i 2–8°C: **6 måneder** / i 18–25°C: **3 måneder**



Åpnet kyvette

La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres
Testen må utføres innen **to timer** fra kyvetten ble åpnet
Prøven er stabil i buffer i **2 timer**



FOB positiv kontroll

Oppbevaring i 2–8°C: til **utløpsdato**



QuikRead go iFOBT kvantitativ kontroll

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **1 måned**



QuikRead iFOB prøvetakingsrør

Oppbevart i 2–25°C: til **utløpsdato**
Prøven er stabil i prøvetakingsrøret ved 2–8°C i **7 dager** eller ved 18–25°C i **5 dager**

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no / www.quikread.com

Produkt	Art.nr.
QuikRead go iFOBT	151051
QuikRead FOB Positive Control	130054
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390
QuikRead iFOB Sampling Set Prøvetakingsrør, 50 stk	151052
QuikRead go Instrument	135867