



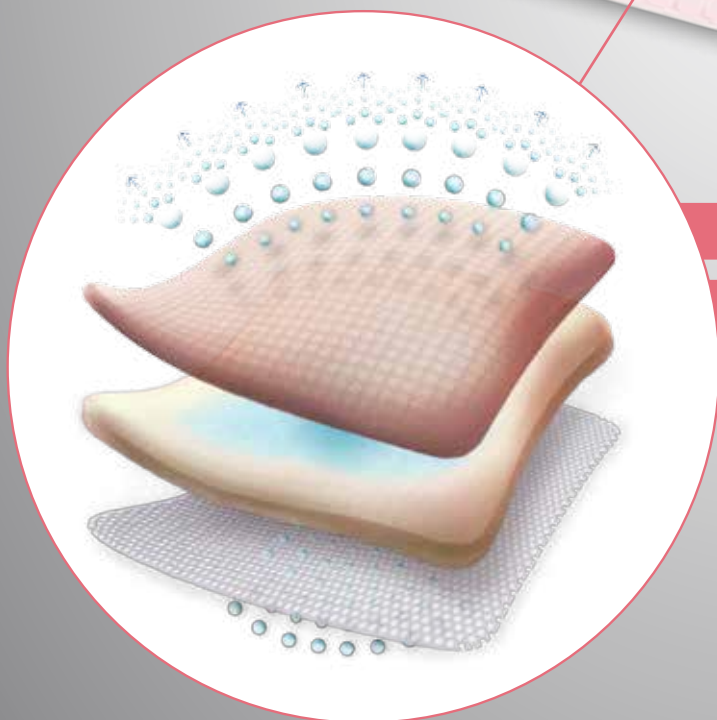

Semipermeabel film¹

Absorberende hydrocellulært skum

Silikon sårkontaktlag

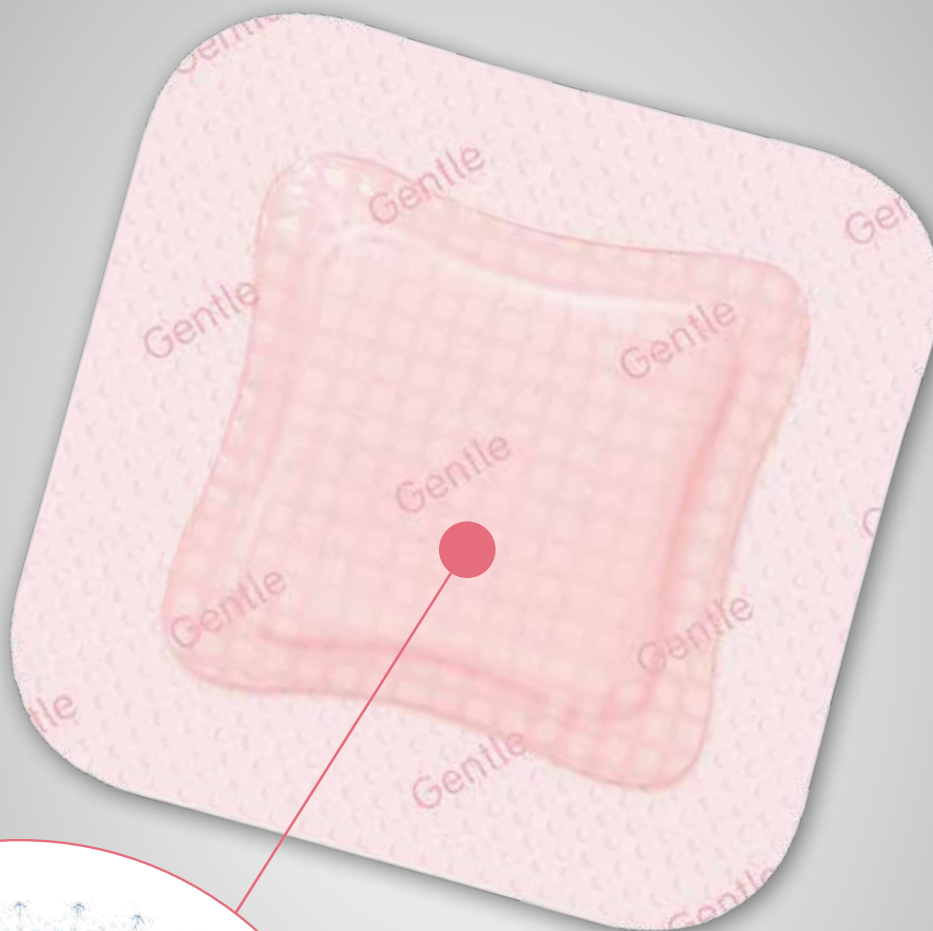

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
Gentle Border

ALLEVYN® Gentle Border gir en optimal væskehåndtering gjennom en unik triple-action teknologi som absorberer, beholder og fordampner væske^{1,2}. Dette optimaliserer fuktbalansen i såret og fremmer sårtilhelingen^{3,4}. ALLEVYN Gentle Border viktigste egenskaper er:

- Utmerket tilpassing sikrer pasientens komfort⁴
- Et mykt silikon heft reduserer traumene og smertene ved bandasjeskift - ideell for pasienter med ømfintlig hud^{4,6}
- Sikker bandasje som tåler at pasienten dusjer mens bandasjen sitter på⁷
- Toppfilmen er en effektiv bakterie barriere som reduserer risiko for infeksjon fra ekstern kontaminasjon⁸
- Lett å applikere og å fjerne^{4,6} – kan løftes og flyttes uten å miste sine klebende egenskaper⁶
- Stort utvalg av størrelser og fasonger som er lett å tilpasse alle kroppens anatomisk vanskelige områder⁶
- ALLEVYN Gentle Border Heel gir også trykkavlastning når den brukes sammen med trykkavlastende utstyr

Indikasjoner

ALLEVYN Gentle Border er indikert for sårbehandling på grunne, granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, dype eller overfladiske sår som trykksår, diabetiske fotsår, leggsår, ulcerende svulster, infiserte sår, maligne sår, kirurgiske sår, donorsteder, hudavskrapninger og første og annengrads forbrenninger.

Applikering

Rengjør såret i henhold til normale prosedyrer. Velg egnet bandasjestørrelse. Klargjør og rengjør huden rundt sårområdet ved å fjerne overflødig væske. Overflødig hårvekst klippes bort for å sikre at bandasjen sitter tett mot huden. Fjern en av beskyttelsesfilmene og fest bandasjens klebekant til huden. Fjern resten av beskyttelsesfilmen og fest bandasjen over såret uten å strekke, slik at bandasjen applikeres uten skrukker. Sørg for at bandasjens skumpute dekker hele såret. Bandasjen kan løftes og reposisjoneres uten å miste klebe egenskapene.

ALLEVYN Gentle Border kan klippes til for å passe til sår på hæler, albuer og andre anatomisk vanskelige områder. Sørg for at eventuelle eksponerte skumområder dekkes med en egnet filmbandasje uten å dekke over hele bandasjen.

Bandasjeskift

I den innledende fasen av behandlingen bør alle ALLEVYN Gentle Border bandasjene bli inspisert. Dersom produktet brukes på infiserte sår, bør infeksjonen inspiseres og behandles etter lokal klinisk praksis.

Bandasjen kan sitte på såret i opp til syv dager med unntak av sacralområdet, der bandasjen kan sitte på i opp til fem dager, avhengig av tilstanden til såret og huden omkring. Avhengig av hva som skjer først, bør bandasjen byttes når sårveske er synlig og nærmer seg 0,5cm fra kanten av bandasjen, eller når tilstanden til såret og huden omkring tilsier bandasjeskift. Ta hensyn til lokal praksis.

Fjerning

ALLEVYN Gentle Border bandasjen fjernes ved å løfte et hjørne og trekke forsiktig tilbake til bandasjen er helt fjernet fra såret. Sacralbandasjen bør fjernes fra toppen og ned mot anus for å redusere risikoen for kontaminering.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler

ALLEVYN Gentle Border skal ikke brukes sammen med oksidasjonsmidler som hypoklorittoppløsninger (for eksempel EUSOL) eller hydrogenperoksid da disse kan bryte ned det absorberende polyuretanlaget i bandasjen. Dersom det oppstår rødhet eller sensibilisering ved bruk av ALLEVYN Gentle Border skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes. ALLEVYN Gentle Border er et engangsprodukt. ALLEVYN Gentle Border må ikke brukes til trykkavlastning uavhengig av trykkavlastende utstyr.

Bestillingsinformasjon

artikkel	beskrivelse	antall pr. eske
66800269	7.5cm x 7.5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800272	12.5cm x 12.5cm	10
66800273	17.5cm x 17.5cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800959	17.1cm x 17.9cm Multisite	10
66800897	16.8cm x 17.1cm Sacral liten	6
66801031	21.6cm x 23cm Sacral stor	10
66800506	23cm x 23.2cm hæl	5



ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management
Smith & Nephew AS
Nye Vaks vei 64
1395 Hvalstad
Norge

www.smith-nephew.com

®Varemerket tilhører Smith & Nephew
™All trademarks acknowledged
© Smith & Nephew januar 2014
14-01871-NO



T +47 66 84 20 20
F +47 66 84 20 90

Referanser

1. Data on file ref DS/09/013/R2. ALLEVYN Gentle Border Dressing Physical Properties. Daubney L. May 2009.
2. Smith & Nephew Wound Management Data on File report ref. 0711080. Absorption properties of ALLEVYN Gentle Border. Tompkins L. November 2007.
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Gentle Border dressing and the moist wound environment. Myers D, November 2007.
4. Hurd T *et al*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5. No 3.
5. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference OR-DOF/017.
6. Data on file: OR-DOF/001.
7. Data on File: OR-DOF/011.
8. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.
9. Technical Justification AGB006.