




ICEROSS® POST-OP TT & TF

Notice d'utilisation
clinique

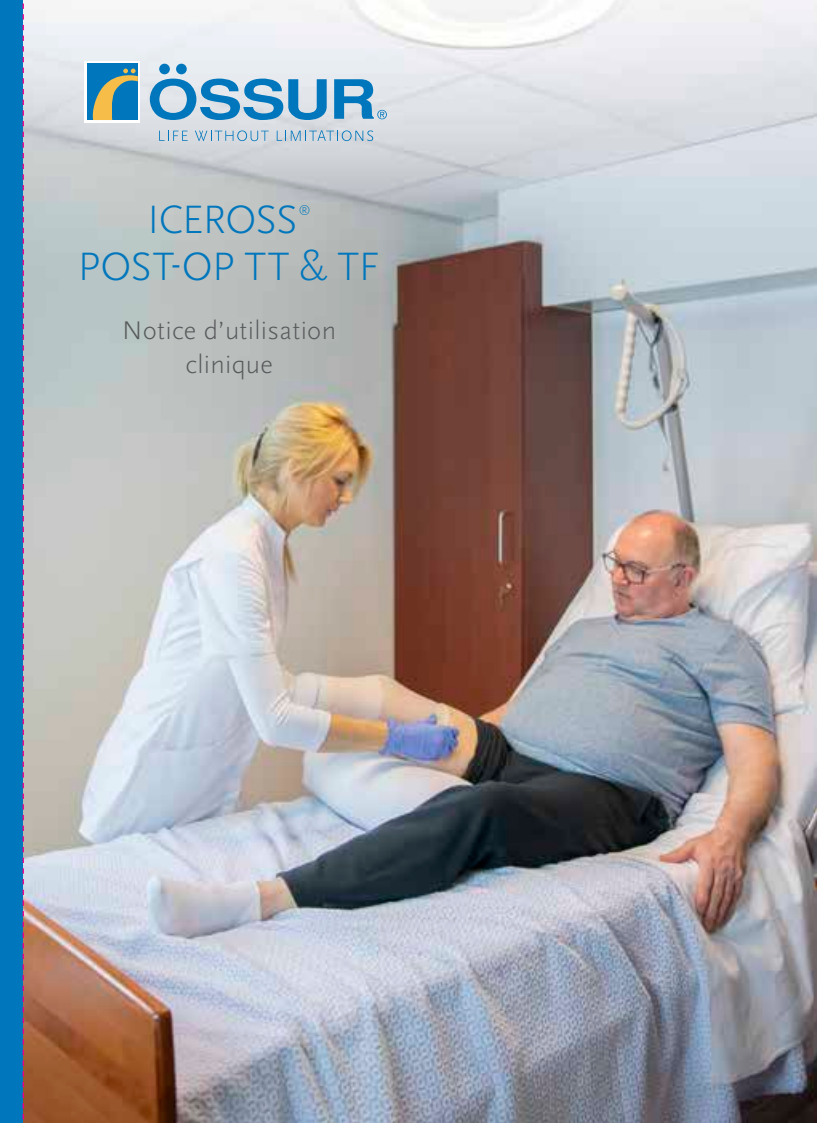

Il a été démontré qu'un traitement précoce à l'aide d'un manchon Iceross Post-Op, favorise une mobilisation rapide et accélère le processus de cicatrisation du membre résiduel. Cette notice vous guidera facilement, étape par étape, dans l'utilisation et dans le processus de nettoyage du manchon. En s'y référant, chaque personne de l'équipe de santé sera assurée de faire les bons gestes en manipulant le manchon et de garantir ainsi la cohérence du traitement et de la compression.

1 Sélection de la taille


A TT: Plier légèrement le genou, en laissant pendre les tissus mous

TF: Soulever légèrement le membre résiduel


B Mesurer 4 cm à partir de l'extrémité distale



D Sélectionner la taille de manchon correspondante ou la première taille inférieure disponible

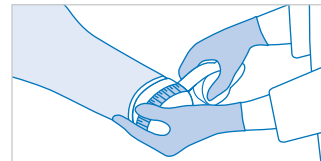


C Mesurer la circonférence à 4 cm de l'extrémité distale

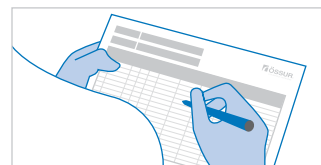


E Reporter les mesures sur la fiche de traitement


2 Mise en place du manchon

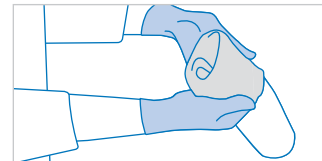

A Retourner le manchon à l'envers

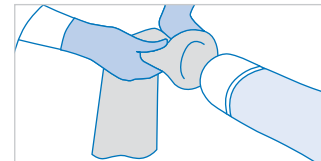


B Positionner le manchon inversé contre le membre résiduel

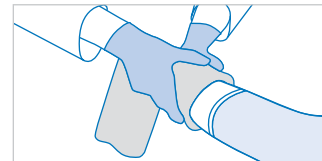

C Enrouler le manchon jusqu'en haut

TT: Plier légèrement le genou
TF: Soulever légèrement le membre résiduel

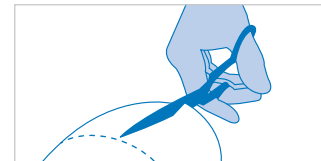


D TF: Si nécessaire, couper le manchon pour l'adapter à la forme anatomique


Remarque

- Vérifier la présence éventuelle de poches d'air et réappliquer si c'est le cas
- Noter l'heure de mise en place

3 Retrait du manchon

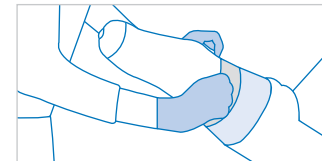


A Retourner le bord proximal

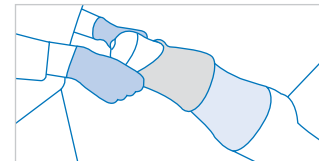


B Faire rouler doucement de la partie proximale vers la partie distale

- Noter l'heure du retrait


4 Nettoyage quotidien

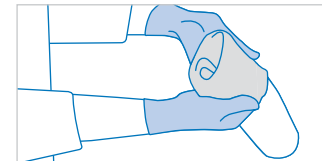


A Retourner le manchon à l'envers

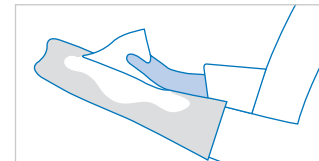

B Nettoyer la surface avec des lingettes imprégnées d'alcool jusqu'à ce qu'elle soit complètement humide

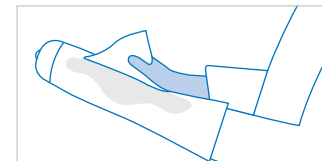

C Remettre le manchon à l'endroit et répéter l'opération sur la surface externe

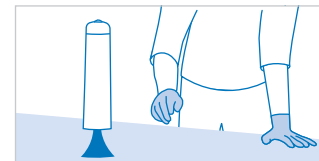


D Laisser sécher

5 Stérilisation



A Nettoyage et désinfection


- Désinfecteur de lavage 90 °C / 5 min.
- Ou manuellement comme décrit pour le nettoyage quotidien

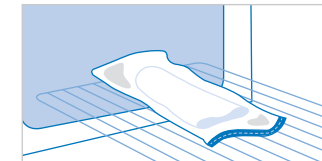


B Stérilisation

- Placer le manchon dans le film de stérilisation et sceller les deux extrémités.
- Stériliser en autoclave avec pré-vide fractionné et chaleur humide à 134° / au moins 5 min

6 Positionner le patient

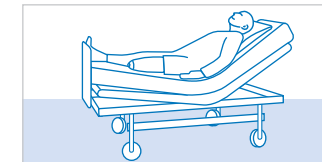

A En cas de troubles veineux

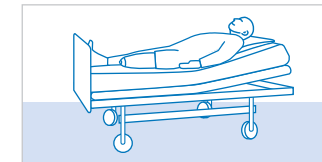

B En cas de troubles artériels



C En fauteuil roulant