

REDUCE PAIN & SWELLING

WITH THE LATEST COLD COMPRESSION TECHNOLOGY

IMPORTANT NOTES

This product is recommended for one patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability according to the Medical Devices Act will become invalid.

The final decision concerning the usage and selection of the appliance shall be made by the doctor or medical specialist.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce produit n'est recommandée que pour l'utilisation sur un seul patient. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité dans le sens de la loi sur les produits médicaux.

La décision finale concernant l'utilisation et sélection de l'application doit être prise par le docteur ou le physiothérapeute.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Dit product is slechts voor één patiënt bedoeld. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid in de zin van de wet op medische producten

De eindbeslissing over het al dan niet dragen van de orthese dient gemaakt te worden door de arts of fysiotherapeut.

WICHTIGE HINWEISE

Die Orthese wird nur zum Gebrauch an einem Patienten empfohlen. Wird sie für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers im Sinne des Medizinproduktegesetzes.

Das produkt soll immer gemäß Anweisungen eines Arztes oder Physiotherapeuten verwandt werden.

Manual CCT Knee 05/03/2018

dr. **aktive**
LIVE LIFE



Knee Support
Cold Compression Therapy

Handleiding
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung

Easy Use

Durable

Lightweight

INSTRUCTIONS FOR USE

ENGLISH

Your doctor has prescribed the **CC Knee Pad** for you. Please read through these instructions carefully to ensure that you fit your brace correctly.

IMPORTANT

This product is recommended for one patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability according to the Medical Devices Act will become invalid.

The final decision concerning the usage and selection of the appliance shall be made by the doctor or medical specialist.

INDICATIONS

- Sprains
- Sport injuries
- Rehabilitation
- Arthritis
- Muscle tiredness

CONTRA-INDICATIONS

No contra-indications are known until today.

WASHING INSTRUCTIONS

Store the product under well ventilated and dried condition and avoid direct sunlight.


Only use mild detergents and warm water to wash the product. Do not use strong detergents!

Using the washing machine and the spin-drier to wash and dry the product is not recommended.

FITTING INSTRUCTIONS

STEP BY STEP

- 1 Check the parts first. (1) compressor (2) gel pack and (3) pump with tube.
- 2 Refrigerate (2) at least 2 hours before usage.
- 3 Put (2) back on the (1) after refrigeration.
- 4 Connect the tube to the ON/OFF switch and turn "ON" the switch.
- 5 Position (A) on the center of the thigh. The (B) hole aims at the knee joint. (Picture 2).
- 6 Stick the two tapes on the appropriate position and strap them (Picture 3).
- 7 When turning ON/OFF the switch, please fixate it with one hand and turn it with the other to ensure the switch is on the appropriate position and then pump.
- 8 To get the best effect: ON for 5-10 minutes, OFF for 5-10 minutes to let the skin rest and then repeat.
- 9 Empty it before taking off and then refrigerate (2) for next usage.

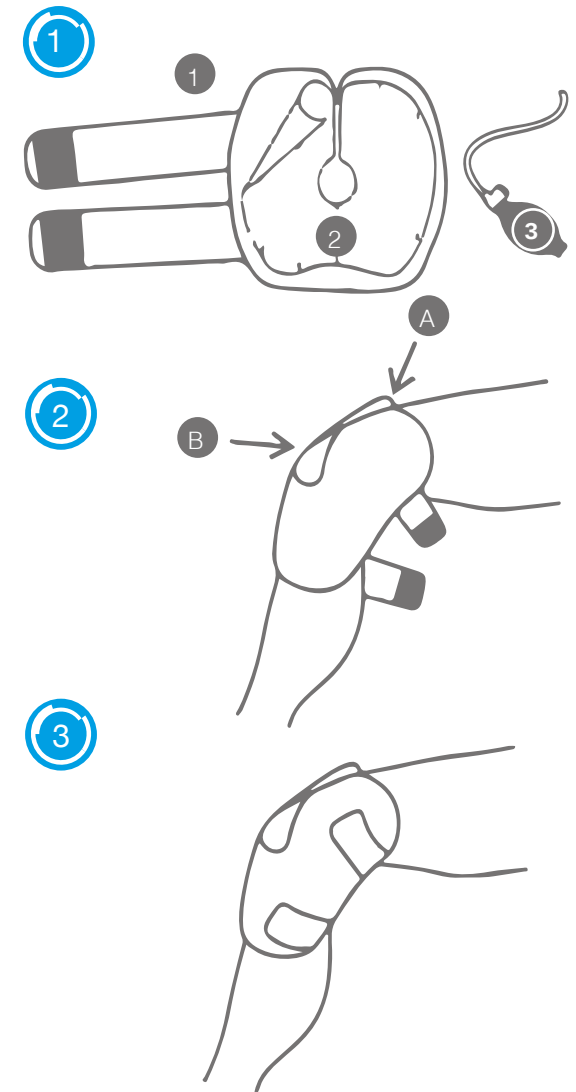

GEBRAUCHSANWEISUNG DEUTSCH

Ihr Arzt hat Ihnen die **CC Knee Pad** verschrieben. Um Ihnen das Anlegen zu erleichtern, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

WICHTIG

Das Produkt wird nur zum Gebrauch an einem Patienten empfohlen. Wird sie für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers im Sinne des Medizinproduktegesetzes.

Das Produkt soll immer gemäß Anweisungen eines Arztes oder Physiotherapeuten verwandt werden.

INDIKATIONEN

- Verrenkungen
- Sportverletzungen
- Rehabilitation
- Arthritis
- Müdigkeit der Muskeln

KONTRAINDIKATIONEN

Keine Kontraindikationen bekannt bis heute.

WASCHVORSCHRIFT


Bewahren Sie das Produkt in einer gut ventilierten und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

Gebrauchen Sie nur milden Detergens und warmes Wasser, um das Produkt zu waschen. Verwenden Sie keine starken Detergens!

Der Gebrauch der Waschmaschine und Schranktrockner ist abgeraten!

ANPROBE SCHRITTWEISE

- 1 Kontrollieren Sie zuerst die Unterteile. (1) Kompressor (2) Gel Pack und (3) Pumpe mit Tube.
- 2 Kühlen Sie (2) mindestens 2 Stunden vor Gebrauch.
- 3 Setzen Sie (2) zurück auf (1) nach der Kühlung.
- 4 Schließen Sie die Tube an am Schalter ON/OFF und setzen Sie den Schalter "ON".
- 5 Stellen Sie (A) auf der Mitte des Oberschenkels. Die (B) Öffnung befindet sich am Kniegelenk. (Bild 2).
- 6 Stellen Sie zwei Klebebanden auf die richtige Position und schnüren Sie sie. (Bild 3).
- 7 Wenn Sie den Schalter ON/OFF ansetzen, fixieren Sie ihn bitte mit einer Hand und wechseln Sie ihn mit der anderen Hand, sodass der Schalter auf der richtigen Position bleibt. Danach können Sie pumpen.
- 8 Um das ideale Ergebnis zu bekommen: ON für 5-10 Minuten, OFF für 5-10 Minuten, sodass die Haut ruhen kann, und wiederholen Sie diesen Prozess.
- 9 Leeren Sie das Knee Pad, bevor Sie es abnehmen, und kühlen Sie (2) für die nächste Anwendung.

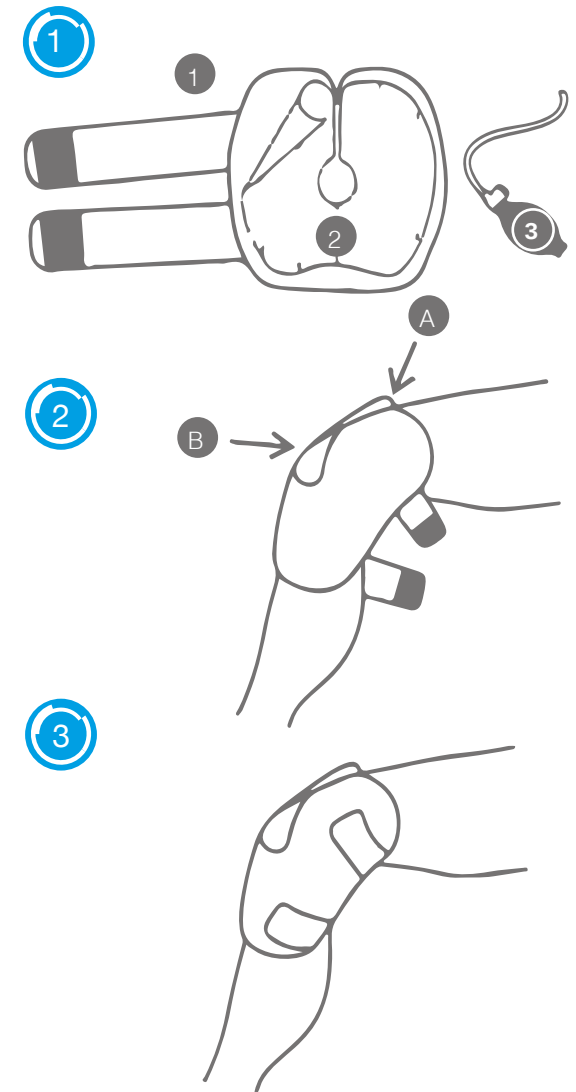

MODE D'EMPLOI FRANCAIS

Votre médecin vous a prescrit le **CC Knee Pad** pour le genou. Afin de vous faciliter la mise en place, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant.

IMPORTANT

Ce produit n'est recommandée que pour l'utilisation sur un seul patient. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité dans le sens de la loi sur les produits médicaux.

La décision finale concernant l'utilisation et sélection de l'application doit être prise par le docteur ou le physiothérapeute.

INDICATIONS

- Entorses
- Blessures sportives
- Réhabilitation
- Arthrite
- Fatigue musculaire

CONTRA-INDICATIONS

Aucune contre-indication connue jusqu'à aujourd'hui.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE


Conservez le produit dans un environnement sec et bien ventilé. Évitez la lumière du soleil directe.

Utilisez des détergents doux et de l'eau chaud pour laver le produit. N'utilisez jamais des détergents puissants!

L'utilisation d'une machine à laver et une armoire-séchoir est déconseillée!

ESSAYAGE COUP PAR COUP

- 1 Commencez par contrôler des pièces. (1) compresseur (2) gel pack et (3) pompe avec tube.
- 2 Réfrigérez (2) au moins 2 heures avant de l'utiliser.
- 3 Remettez (2) sur (1) après la réfrigération.
- 4 Connectez le tube sur le ON/OFF interrupteur et changez-le sur "ON".
- 5 Mettez (A) sur le milieu du mollet. Le (B) trou se trouve sur l'articulation du genou. (Image 2).
- 6 Placez le deux bandes sur la position adéquate et attachez-les. (Image 3).
- 7 En mettant ON/OFF l'interrupteur, veuillez le fixer avec une main et change-le avec l'autre main pour assurer que l'interrupteur se trouve sur la position adéquate. Ensuite, commencez à pomper.
- 8 Pour obtenir le meilleur résultat: ON pour 5-10 minutes, OFF pour 5-10 minutes de sorte que la peau peut se reposer. Ensuite, répétez le procès.
- 9 Videz le Knee Pad avant de le prélever et réfrigérez-le pour l'utilisation suivante.

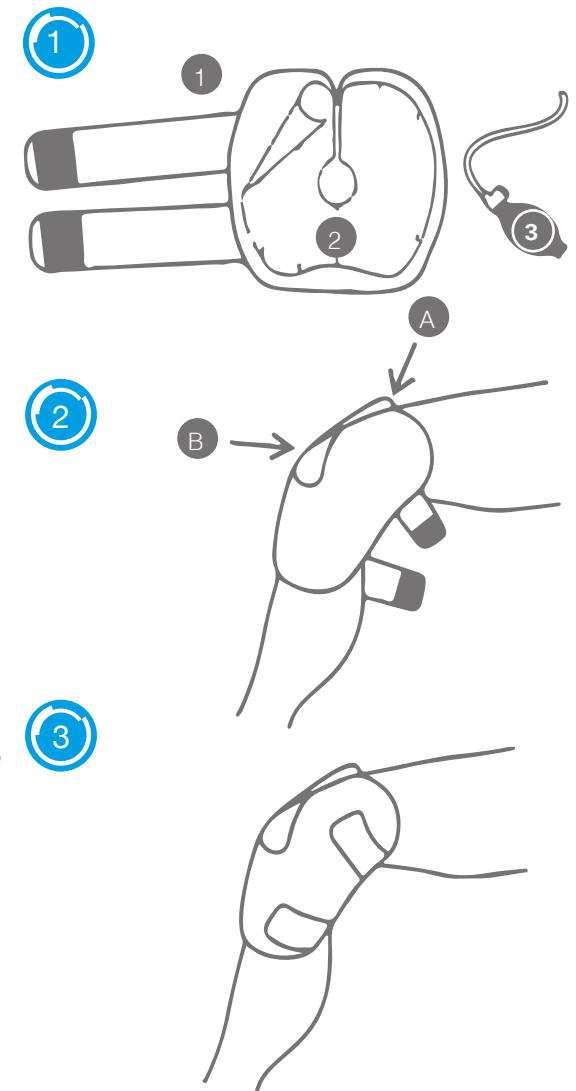

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS

Uw arts heeft u de **CC Kneepad** voorgeschreven. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat het aantrekken van de orthese veel gemakkelijker zal gaan.

BELANGRIJK

Dit product is slechts voor één patiënt bedoeld. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid in de zin van de wet op medische producten.

De eindbeslissing over het al dan niet dragen van de orthese dient gemaakt te worden door de arts of fysiotherapeut.

INDICATIES

- Verstuikingen
- Sportletsels
- Revalidatie
- Artritis
- Spiervermoeidheid

CONTRA-INDICATIES

Geen contra-indicaties zijn gekend tot op heden.

WASVOORSCHRIFTEN

Bewaar het product in een droge en goed geventileerde omgeving. Vermijd direct zonlicht.

Gebruik enkel milde reinigingsmiddelen en warm water om het product te wassen. Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen!

Het gebruik van een wasmachine en droogkast om het product te wassen en drogen is sterk afgeraden.

HET AANBRENGEN

STAP VOOR STAP

- 1 Controleer eerst alle onderdelen. (1) compressor (2) gel pack en (3) pomp met buisje.
- 2 Koel (2) minstens 2 uur voor gebruik.
- 3 Plaats (2) terug op (1) na het afkoelen.
- 4 Sluit het buisje aan op de ON/OFF schakelaar en zet de schakelaar op "ON".
- 5 Plaats (A) op het midden van het dijbeen. De (B) opening bevindt zich op het kniegewricht. (Beeld 2).
- 6 Plaats de twee banden in de geschikte positie en maak ze vast. (Beeld 3).
- 7 Gelieve bij het aan- en afzetten van de schakelaar, deze met één hand vast te houden en met de andere hand te schakelen. Zo is men er zeker van dat de schakelaar op de juiste plaats blijft zitten. Begint dan te pompen.
- 8 Om het beste resultaat te bekomen: ON voor 5-10 minuten, OFF voor 5-10 minuten zodat de huid kan rusten. Herhaal vervolgens dit proces.
- 9 Maak de Kneepad leeg alvorens deze af te nemen en koel hem alvast terug af voor het volgende gebruik.

