

REDUCE PAIN & SWELLING

IMPORTANT NOTES

This product is recommended for one patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability according to the Medical Devices Act will become invalid.

The final decision concerning the usage and selection of the appliance shall be made by the doctor or medical specialist.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce produit n'est recommandée que pour l'utilisation sur un seul patient. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité dans le sens de la loi sur les produits médicaux.

La décision finale concernant l'utilisation et sélection de l'application doit être prise par le docteur ou le physiothérapeute.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Dit product is slechts voor één patiënt bedoeld. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid in de zin van de wet op medische producten

De eindbeslissing over het al dan niet dragen van de orthese dient gemaakt te worden door de arts of fysiotherapeut.

WICHTIGE HINWEISE

Die Orthese wird nur zum Gebrauch an einem Patienten empfohlen. Wird sie für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers im Sinne des Medizinproduktegesetzes.

Das produkt soll immer gemäß Anweisungen eines Arztes oder Physiotherapeuten verwandt werden.

Manual CCT Ankle 05/03/2018

WITH THE LATEST COLD COMPRESSION TECHNOLOGY

dr. **aktive**
LIVE LIFE



Ankle Support
Cold Compression Therapy

Handleiding
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung

Easy Use

Durable

Lightweight

INSTRUCTIONS FOR USE ENGLISH

Your doctor has prescribed the **CC Ankle Pad** for you. Please read through these instructions carefully to ensure that you fit your brace correctly.

IMPORTANT

This product is recommended for one patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability according to the Medical Devices Act will become invalid.

The final decision concerning the usage and selection of the appliance shall be made by the doctor or medical specialist.

INDICATIONS

- Sprains
- Sport injuries
- Rehabilitation
- Arthritis
- Muscle tiredness

CONTRA-INDICATIONS

No contra-indications are known until today.

WASHING INSTRUCTIONS



Store the product under well ventilated and dried condition and avoid direct sunlight.

Only use mild detergents and warm water to wash the product. Do not use strong detergents!

Using the washing machine and the spin-drier to wash and dry the product is not recommended.

FITTING INSTRUCTIONS STEP BY STEP

- 1 Check the parts first. (1) compressor (2) gel pack and (3) pump with tube.
- 2 Refrigerate (2) at least 2 hours before usage.
- 3 Put (2) back on the (1) after refrigeration.
- 4 Connect the tube to the ON/OFF switch and turn "ON" the switch.
- 5 Put the right or left ankle on the black appropriate position (Picture 1). Picture 1 applies for the right ankle. If for the left, use in the same direction.
- 6 Stick the magic tape together on the appropriate position and fix it (Picture 2).
- 7 When turning ON/OFF the switch, please fix it with one hand and turn it with the other to ensure the switch is on the appropriate position and then pump.
- 8 To get the best effect: ON for 5-10 minutes, OFF for 5-10 minutes to let the skin rest and then repeat.
- 9 Empty it before taking off and then refrigerate (2) for next usage.

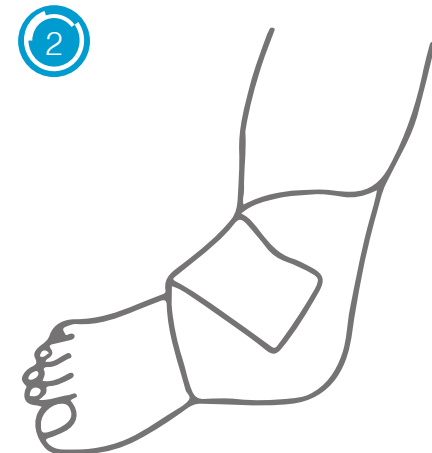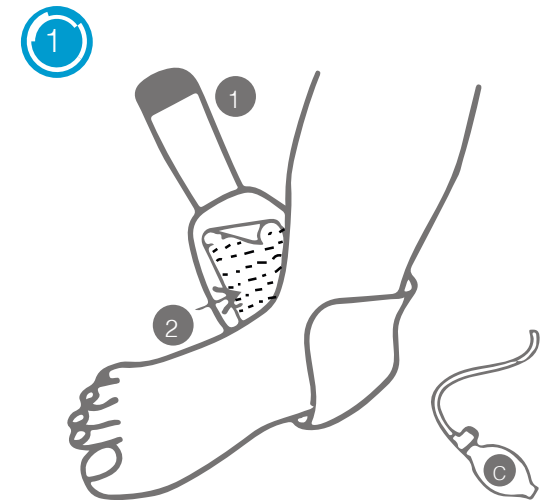

GEBRAUCHSANWEISUNG DEUTSCH

Ihr Arzt hat Ihnen die **CC Ankle Pad** verschrieben. Um Ihnen das Anlegen zu erleichtern, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

WICHTIG

Das Produkt wird nur zum Gebrauch an einem Patienten empfohlen. Wird sie für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers im Sinne des Medizinproduktegesetzes.

Das Produkt soll immer gemäß Anweisungen eines Arztes oder Physiotherapeuten verwandt werden.

INDIKATIONEN

- Verrenkungen
- Sportverletzungen
- Rehabilitation
- Arthritis
- Müdigkeit der Muskeln

KONTRAINDIKATIONEN

Kein Kontraindikationen bekannt bis Heute.

WASCHVORSCHRIFT



Bewahren Sie das Product in einer gut ventilierte und trocke Umgebung. Vermeiden Sie direkte Sonnenlicht.

Gebrauchen Sie nur milden Detergens und warme Wasser um das Product zu wassen. Verwenden Sie keine starken Detergens!

Das gebrauch der Waschmaschine und Schranktrockner ist abgeraten!

ANPROBE SCHRITTWEISE

- 1 Kontrollieren Sie zuerst die Unterteile. (1) Kompressor (2) gel pack und (3) Pumpe mit Tube.
- 2 Kühlen Sie (2) mindestens 2 Stunden vor Gebrauch.
- 3 Setzen Sie (2) Zurück auf (1) (Bild 1) nach die Kühlung.
- 4 Schließen Sie die Tube an am Schalter ON/OFF und setzen Sie den Schalter "ON" .
- 5 Setzen Sie Ihr rechter oder linker Fußgelenk in die richtige Position (Bild 1). Bild 1 geltet für das rechter Fußgelenk. Für das linker Fußgelenk verwenden Sie es in dieselbe Richtung.
- 6 Bringen Sie das Klettband zusammen und legen Sie es an auf die Richtige position.
- 7 Wenn Sie den Schalter ON/OFF ansetzen, fixieren sie ihn bitte mit einer Hand und wechseln Sie ihn mit der anderen Hand, sodass der Schalter auf dem richtigen position bleibt. Danach können Sie pumpen.
- 8 Um das ideales Effekt zu bekommen: ON für 5-10 Minuten, OFF für 5-10 Minuten, sodass die Haut ruhen kann, und wiederholen Sie dann diesen Prozess.
- 9 Leeren Sie die Ankle Pad bevor Sie es abnehmen, und Kühlen Sie (2) es für die nächste Anwendung.

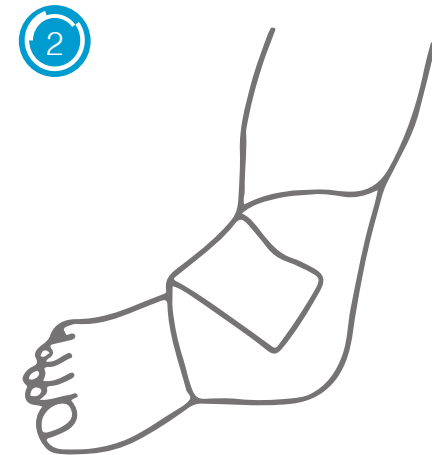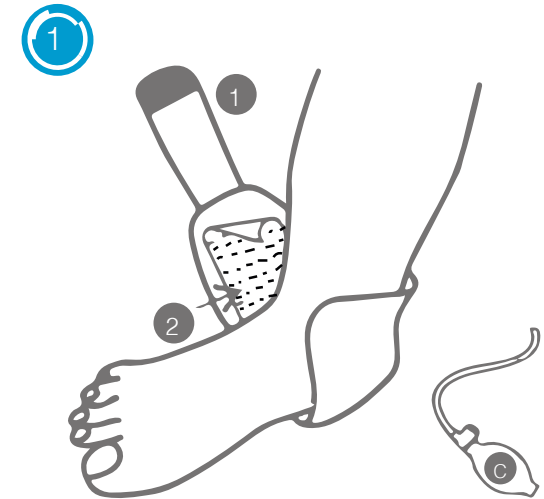

MODE D'EMPLOI FRANCAIS

Votre médecin vous a prescrit le **CC Ankle Pad** pour le genou. Afin de vous faciliter la mise en place, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant.

IMPORTANT

Ce produit n'est recommandée que pour l'utilisation sur un seul patient. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité dans le sens de la loi sur les produits médicaux.

La décision finale concernant l'utilisation et sélection de l'application doit être prise par le docteur ou le physiothérapeute.

INDICATIONS

- Entorses
- Blessures sportives
- Réhabilitation
- Arthrite
- Fatigue musculaire

CONTRA-INDICATIONS

Aucune contra-indication connue jusqu'à aujourd'hui.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Conservez le produit dans un environnement sec et bien ventilé. Évitez la lumière du soleil directe.

Utilisez des détergents doux et de l'eau chaud pour laver le produit. N'utilisez jamais des détergents puissants!

L'utilisation d'une machine à laver et une armoire-séchoir est déconseillée!

ESSAYAGE COUP PAR COUP

- 1 Commencez par contrôler des pièces. (1) compresseur (2) gel pack et (3) pompe avec tube.
- 2 Réfrigérez (2) au moins 2 heures avant de l'utiliser.
- 3 Remettez (2) sur (1)(Image 1) après la réfrigération.
- 4 Connectez le tube sur le ON/OFF interrupteur et changez-le sur "ON".
- 5 Mettez la cheville droite ou gauche dans la juste position noire (Image 1). Image 1 s'applique à la cheville droite. Pour la cheville gauche, utilisez dans la même direction.
- 6 Attachez le velcro et fixez-le sur la juste position (Image 2).
- 7 En mettant ON/OFF l'interrupteur, veuillez le fixer avec une main et change-le avec l'autre main pour assurer que l'interrupteur se trouve sur la position adéquate. Ensuite, commencez à pomper.
- 8 Pour obtenir le meilleur résultat: ON pour 5-10 minutes, OFF pour 5-10 minutes de sorte que la peau peut se reposer. Ensuite, répétez le procès.
- 9 Videz le Ankle Pad avant de le prélever et réfrigérez-le pour l'utilisation suivante.

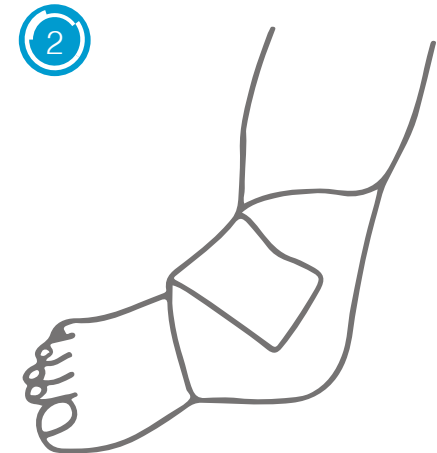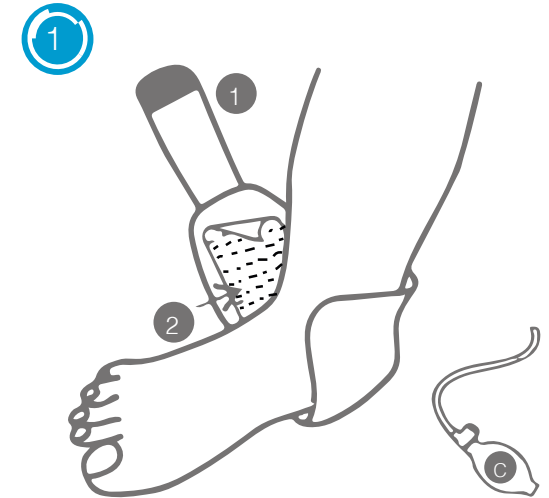

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

Uw arts heeft u de CC Ankle Pad voorgeschreven. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat het aantrekken van de orthese veel gemakkelijker zal gaan.

BELANGRIJK

Dit product is slechts voor één patiënt bedoeld. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid in de zin van de wet op medische producten.

De eindbeslissing over het al dan niet dragen van de orthese dient gemaakt te worden door de arts of fysiotherapeut.

INDICATIES

- Verstuikingen
- Sportletsels
- Revalidatie
- Artritis
- Spiervermoeidheid

CONTRA-INDICATIES

Geen contra-indicaties zijn gekend tot op heden.

WASVOORSCHRIFTEN

Bewaar het product in een droge en goed geventileerde omgeving. Vermijdt direct zonlicht.

Gebruik enkel milde reinigingsmiddelen en warm water om het product te wassen. Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen!

Het gebruik van een wasmachine en droogkast om het product te wassen en drogen is sterk afgeraden.

HET AANBRENGEN STAP VOOR STAP

- 1 Controleer eerst alle onderdelen. (1) compressor (2) gel pack (3) riem en (4) pomp met buisje.
- 2 Koel (2) minstens 2 uur voor gebruik.
- 3 Plaats (2) terug op (1) na het afkoelen.
- 4 Sluit het buisje aan op de ON/OFF schakelaar en zet de schakelaar op "ON".
- 5 Zet uw rechter- of linkerenkel in de juiste positie (Beeld 1). Beeld 1 is van toepassing op de rechterenkel. Voor de linkerenkel gebruikt u dezelfde richting.
- 6 Kleef de klittenbandsluiting samen en bevestig hem in de juiste positie (Beeld 2).
- 7 Gelieve bij het aan- en afzetten van de schakelaar, deze met één hand vast te houden en met de andere hand te schakelen. Zo is men er zeker van dat de schakelaar op de juiste plaats blijft zitten. Begint dan te pompen.
- 8 Om het beste resultaat te bekomen: ON voor 5-10 minuten, OFF voor 5-10 minuten zodat de huid kan rusten. Herhaal vervolgens dit proces.
- 9 Maak de Ankle Pad leeg alvorens deze af te nemen en koel hem alvast terug af voor het volgende gebruik.

