


B-CARDIO

Nitrogén-oxid tesztszíkok

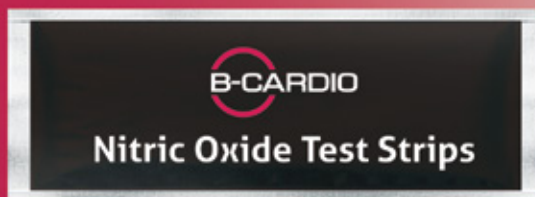

Miért tesztelje a nitrogén-oxidot?

A nitrogén-monoxid (NO) a szív egészségének, fittségének és jólétének elengedhetetlen molekulája. Az optimális NO-szint elérése és fenntartása létfontosságú az egészséges testhez és az egészséges élethez.

A B-Cardio nitrogén-monoxid tesztszíkok gyors és egyszerű módszert kínálnak NO-szintjének tesztelésére és nyomon követésére, valamint segítenek ellenőrizni a nitrogén-monoxid-kiegészítő hatékonyságát, így biztosítják, hogy elérje a célszintet.

A nitrogén-monoxid helyreállítási folyamatának nyomon követése érdekében javasoljuk, hogy minden nap tesztelje NO-szintjét, amikor először kezdi el szedni a B-Cardio-t. A nitrogén-monoxid-szint napi ellenőrzése – a B-Cardio bevétele előtt és után – lehetővé teszi a változás észlelését.

Könnnyen tesztelheti NO szintjeit

Nem invazív nyál tesztszíkjaink másodpercek alatt pontos leolvasást biztosítanak. A nap folyamán bármikor tesztelheti. A NO-szint ellenőrzésének legjobb ideje azonban a reggel. Tesztet is végezhet intenzív fizikai edzés előtt és után, vagy minden nap meghatározott időpontban.

A legjobb eredmény érdekében ne fogyasszon semmit (beleértve az étrend-kiegészítőket is) 2 órával a vizsgálat előtt. Ne feledje, hogy az antiszeptikus szájvíz és az antibiotikumok is befolyásolhatják az eredmények pontosságát.

Az eredmények azonnaliak és könnyen olvashatók. Hasonlítsa össze a tesztszíkon lévő színeredményt a szintábrával. Minden nitrogén-oxid tesztszík csak egyszer használható. A tesztszík újbóli használata pontatlan leolvasást eredményez.

A B-Cardio tesztszíkok használata

- 1) Teszt reggel ébredéskor vagy evés, ivás vagy étrend-kiegészítő bevétele után 2 órával.
- 2) Mielőtt elkezdené, mosson kezet. Ne érintse meg kézzel a csík tesztpárna végét.
- 3) Gyűjtse össze a nyálát a szájában, és köpje ki egy kanálba vagy kis csészébe.
- 4) Merítse a tesztszík tesztpárna végét 5 másodpercre a salviába. Győződjön meg arról, hogy a tesztpárna teljesen telített legyen nyállal. (Ne tegye a tesztlap végét a szájába.)
- 5) Ezután ütögesse le a felesleges nyálát, és fektesse a csíkot vízszintesen egy sima felületre.
- 6) Várjon 15 másodpercet, majd hasonlítsa össze a tesztszíkot a jobb oldali szintábrával.
- 7) Vegye be a B-Cardio-t, majd várjon 2 órát, és tesztelje újra, hogy lássa az eredmények változását.
- 8) Oszd meg és tedd közzé személyes ajánlásodat (a tesztszíkok előtti és utáni fényképével) a B-Epic Brand Partners Facebook-csoportok bármelyikében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elegendő tesztszík áll rendelkezésre a folyamat kétszeri megismétléséhez, ha szükséges.

Eredmények Ön Láthatjuk!

- ✓ **Önteszt másodpercek alatt**
- ✓ **Azonnali eredmények**
- ✓ **Gyors és kényelmes**

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK SZÍNTABRA

	Nagyon magas
	Magas
	Cél
	Küszöb
	Alacsony
	Kimerült

Ezeket a kijelentéseket nem értékelték az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság. Ezt a terméket nem diagnosztizálják,

bármely betegség kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.