


B-CARDIO

Testovacie prúžky oxidu dusnatého

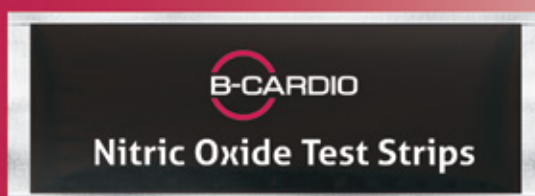

Prečo testovať oxid dusnatý?

Oxid dusnatý (NO) je nevyhnutnou molekulou pre zdravie srdca, kondíciu a pohodu. Dosiachnutie a udržanie optimálnych hladín NO je životne dôležité pre zdravé telo a zdravý život.

Testovacie prúžky oxidu dusnatého B-Cardio predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako otestovať a sledovať hladiny NO a pomôcť vám overiť účinnosť vášho doplnku pre zdravie oxidu dusnatého, aby ste sa uistili, že dosiahnete svoju cieľovú úroveň.

Aby ste mohli sledovať proces obnovy oxidu dusnatého, odporúča sa, aby ste si každý deň, keď prvýkrát začnete užívať B-Cardio, otestovali hladinu NO. Denné sledovanie hladín oxidu dusnatého – pred a po užití B-Cardio – vám umožní vidieť zmenu.

Ľahko otestujte svoje úrovne NO

Naše neinvazívne testovacie prúžky zo slín poskytujú presné odčítanie v priebehu niekoľkých sekúnd. Testovať môžete kedykoľvek počas dňa. Najlepší čas na kontrolu hladín NO je však ráno. Môžete tiež testovať pred a po intenzívnom fyzickom cvičení alebo v stanovenom čase každý deň.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nekonzumujte nič (vrátane doplnkov) 2 hodiny pred testovaním. Upozorňujeme, že antiseptická ústna voda a antibiotiká môžu tiež ovplyvniť presnosť výsledkov.

Výsledky sú okamžité a ľahko čitateľné. Porovnajme výsledok farby na testovacom prúžku s farebnou schémou. Každý testovací prúžok oxidu dusnatého možno použiť iba raz. Opätovné použitie testovacieho prúžku bude mať za následok nepresné odčítanie.

Ako používať B-Cardio testovacie prúžky

- 1) Otestujte sa po prebudení ráno alebo 2 hodiny po jedle, pití alebo užití doplnkov.
 - 2) Pred začatím si umyte ruky. Nedotýkajte sa rukami konca prúžku testovacej podložky.
 - 3) Zozbierajte sliny do úst a vyplňte ich do lyžice alebo malého pohára.
 - 4) Ponorte koniec testovacieho prúžku do šalvie na 5 sekúnd. Uistite sa, že testovacia podložka je úplne nasýtená slinami. (Nevkladajte koniec testovacej podložky do úst.)
 - 5) Potom oklepte prebytočné sliny a pásik položte vodorovne na rovný povrch.
 - 6) Počkajte 15 sekúnd a potom porovnajme testovací prúžok s farebnou schémou vpravo.
 - 7) Vezmite si B-Cardio, počkajte 2 hodiny a otestujte sa znova, aby ste videli zmenu vo vašich výsledkoch.
 - 8) Zdieľajte a uverejnite svoj osobný posudok (s fotografiou vašich testovacích prúžkov pred a po ňom) do ktorejkoľvek zo skupín B-Epic Brand Partners na Facebooku.
- Upozorňujeme, že je k dispozícii dostatok testovacích prúžkov na zopakovanie tohto procesu dvakrát, ak je to potrebné.

Výsledky Vy Vidím!

- ✓ Autotest za pár sekúnd
- ✓ Okamžité výsledky
- ✓ Rýchle a pohodlné

FAREBNÁ TABUĽKA VÝSLEDKOV TESTU

	Veľmi vysoko
	Vysoká
	Cieľ
	Prah
	Nízka
	Vyčerpaný

*Tieto vyhlásenia neboli hodnotené
Úradom pre potraviny a liečivá. Tento
produkt nie je určený na diagnostiku,
liečiv, liečiť alebo predchádzať akejkoľvek chorobe.*