




TEKNISK FIL SILICONE DUO 30

1- Identifikasjon av produkter

Navn på merkevaren:	FRESCO
Kommersielt navn:	Silikon DUO 10 / DUO 10 Startsett
Produktbeskrivelse:	Silikon (A + B) for ortoser, silikon for støping. Kun profesjonell bruk.
Referanse:	F-019 24-00, F-01924-02, F-01924-04
Emballasje:	2 krukke (A + B) på 250 gr. (Silikon Duo 10 - F-01924-00/04) 2 krukke (A+B) på 100 gr. (Duo 10 Startsett F-01924-02)

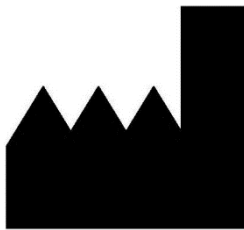

Fresco International 2005, S.A.
Calle Torre de Cellers, 5, 08150, Parets del Vallès, Barcelona, España.
(+34) 93 573 94 00
info@fresco.es
www.fresco.es

1. Beskrivelse

Duo er en tokomponent 1 + 1 blandbar myk silikon. Spesielt designet for å lage enkel palliativ eller korrigerende ortose. Veldig enkel å bruke: For å lage en ortose blander du bare samme mengde av begge komponentene (A + B) til du når en jevn farge. Deretter forme på foten (for mer info kan du gå til side 34). Resultatet er en myk og behagelig ortose. Den ferdige ortosen er både vaskbar og gjenbrukbar.

2- Hvordan å bruke

For å gjøre ortosen er det nødvendig å blande silikonene godt med samme mengde av begge komponentene (A og B). Bland i 30-60 sekunder til du oppnår en konstant og jevn farge i blandingen. Blanding trenger omtrent 5 minutter for å bli solid. Hardhet Shore A 10 oppnås 24 timer etter at ortosen er ferdig. Silikonet er vaskbart og gjenbrukbart.

1. Informasjon om komponenter

Farge:	Duo 10 A = Hvit / Duo 10 B: Rød
Aspekt:	Semi-stiv lim
Løselighet:	Uoppløselig i vann, lett separerbar ved filtrering.

3- Chemical Composition

FRESCO silikonene består av:

- Base: Polydimetylsiloksan med funksjonelle grupper og hjelpemidler for kryssbinding ved addisjon.
- A + B Polyaddition Silikon, som vulkaniserer ved romtemperatur.

Boiling Point	-
Flash Point	> 200°C
Ignition Temperature	> 450°C
Density	1.25 gr. / cm ³ a 20°C
Tensile strength	2.4
Solubility in Water	Practically insoluble
Index Ph	-
Hardness A	10 - 12
Stretching	550%
Split resistance	5

4- Identifikasjon av fare

Produktet er ikke helsefarlig ved normal håndtering. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes på åpne sår. Skulle det oppstå irritasjon, søk en medisinsk spesialist.

Produktet har vært brukt i mange år i flere land rundt om i verden, og har frem til datoen ikke funnet noen tilfeller av irritasjon eller andre hudproblemer.

4.1 - Normer

Merket (UE)

Risikosetninger:

Setninger av sikkerhet:

4.2 - Ytterligere normer:

5 - Utløpsdato og partinummer

5.1 Utløpsdato: Hvis produktet brukes og oppbevares under passende forhold som angitt i punkt nr. 9, kan produktets levetid være mer enn 5 år. Soleksponering kan variere sin opprinnelige farge.

5.2 Antall partier: Hvert produksjonsparti identifiseres med batchnummer, noe som gjør det mulig å fjerne produktet fra markedet umiddelbart, i tilfelle et eventuelt problem. Partinummeret, som er oppgitt på alle fakturaer, separat for hver produktlinje. Partinummeret legges også til hver produktpakke, av Tag.

5.2.1 Produksjonsflytskjema for partinummer:

1 - Emne:

Utarbeidelse av dokumentasjon i hver produksjonsbatch

2 - Anvendelsesområde:

Prosedyren som er beskrevet, gjelder for alle produkter produsert av Fresco International 2005, S.A. på deres installasjoner i Parets del Vallès (Barcelona).

3 - Fremgangsmåte:

Utarbeidelsen av dokumenter gjøres via datamaskin. Hver gang arbeideren skal begynne å produsere et parti med produkter, åpner du en produksjonsordre, som har følgende detaljer:

- Batch / partinummer
- Startdato for produksjon
- Arbeiderens navn
- Materialer å bruke
- Beløp til Craft

Når bunken er fullført, lukker arbeideren ordreproduksjonen og legger til:

- Beløp gjort
- Sluttdato for produksjon
- Lagringsplass på lageret.

Skriv deretter ut en etikett for hver kartong med følgende informasjon:

- Partinummer
- Antall per kartong
- Dato for produksjon

Partinummeret lagres i bedriftens datafiler, og vises på kundefakturaen for fremtidig kontroll, om nødvendig.

6 - Nød- og førstehjelpsprosedyrer

- Innånding: Ingen spesielle krav
- Hudkontakt: Produktet brukes i direkte kontakt med huden. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet mer enn 14 til 16 timer om dagen, for å tillate svette fra huden.
- Øyekontakt: Vask med ferskvann. Hvis irritasjonen vedvarer, søk legespesialist.
- Svelging: Hold deg unna barn, da det er kvelningsfare. Medisinske oljer i silikonet og silikonet i seg selv er ikke giftige, men hvis de svelges og ubehag rapporteres, kontakt lege.
- Helse tilleggsinformasjon: Ikke identifisert så langt.

7 - Brannfarlige tiltak

- Sørg for tilstrekkelige og regelmessige brannslukningsapparater, brann kan kontrolleres med sand, skum, karbondioksid.
- Spesifikke farer kan oppstå på grunn av blanding og forbrenning av kjemikalier eller gasser.
- Bruk spesielt verneutstyr for brannslukking

8 - Tiltak som skal iverksettes i tilfelle ulykke Rand

Forebyggende tiltak for personer:
Spesielle tiltak er ikke nødvendig.

Tiltak for miljøvern:
Følg den lokale standarden.

Metoder for innsamling/rengjøring:
Samle med hvilken som helst mekanisk metode, og fjern med passende metoder.

9 - Håndtering og lagring

- Pleie av håndtering: Produktet under normal bruk er i direkte kontakt med huden, noe som ikke bør være spesielt forsiktig, det er ikke engang nødvendig å bruke hansker til håndtering.
- Når dette stoffet søles, øker faren for glidning.
- Hold beholderen lukket Ved håndtering av kjemikalier må stoffer overholde generelle hygienetiltak:

o Åndedrettsvern: Ikke nødvendig

o Håndbeskyttelse: Ikke nødvendig

o Øyevern: Ikke nødvendig

- Lagringstemperatur: Romtemperatur. Oppbevares ikke ved temperaturer høyere enn 60 ° C, i ferdige (vulkaniserte) stykker kan formen variere.
- Transporttemperatur: Romtemperatur. Det skal ikke transporteres ved høyere temperaturer på 60 ° C, i ferdige stykker kan formen variere.
- Viskositet: Halvstiv
- Transporttrykk: Atmosfærisk trykk.
- Fare for elektrostatisk akkumulering: Ikke aktuelt
- Transportbeholdere: Plastflasker
- Tilstrekkelig deksel: Plast.
- Oppbevaring: Oppbevares på et tørt sted, kald luft, og unngå kontakt med sollys.
- Forsiktighet etter håndtering: Du trenger ikke å være spesielt forsiktig etter håndtering av produktet.
- Andre krav: Ikke aktuelt.

10- Transport:

- Lufttransport: Ikke klassifisert som farlig gods.

Gjeldende standard: ICAO-TI / IATA-DGR

- Fluvial transport: Ikke klassifisert som farlig gods.

Gjeldende standard: GGVBinsch / ADN

- Sjøtransport: Ikke klassifisert som farlig gods.

Gjeldende standard: GGVSea / IMDG-kode

- Landtransport: Ikke klassifisert som farlig gods.

Gjeldende standard: GGVS / ADR y GGVE / RID

- Road GGVS / ADR

- Jernbane GGVE / RID

11- Individuell beskyttelseskontroll

Ingen spesiell forsiktighet er nødvendig ved normal bruk.

12- Fysiske og kjemiske egenskaper

Stat ved 20°C: Semi-stiv

Farge: Duo 10 A: hvit / Duo 30 B: rød

Lukt : Litt fet

Tetthet: 1,25 gr. / cm³ ved 20 °C

Hardhet (Shore A) : 10-12

13 - Toksikologisk informasjon:

Effekter etter langvarig eksponering: Ikke funnet.

Kreftfremkallende effekter:

Ingen effekt rapportert av statlige myndigheter og etater.

Reproduktiv toksisitet:

Ingen effekt rapportert av statlige myndigheter og etater.

14 - Økologisk informasjon:

- Ingen forurensende produksjon.
- Produkt som ikke kan brytes ned
- Bioakkumulering usannsynlig

En skikkelig avhending, gjennom forbrenning, ved hjelp av en forbrenningsovn for farlig avfall. Mindre mengder kan forbrennes i en forbrenningsovn for husholdningsavfall, i samsvar med lokale koder. Husholdningsavfall kan deponeres sammen med det i samsvar med lokale regler, etter muligens å ha blitt komprimert.

For å tømme beholderne helt, bruk en slikkepott. Hvis emballasje gjenbrukes, gjøres det på brukernes egen risiko og bør overholde lokale forskrifter.

15 - Pakkeinformasjon:

Pakket i plastkrukker, av mengder på 250 gr. for hver komponent. Beholdere plassert i større pappesker for sikker håndtering og transport.

16 - Informasjon om forskrifter:

Produktet er en medisinsk artikkel klasse I, i samsvar med vedlegg VII til direktiv EF 93/42 / EF.

17 - Andre data:

Informasjonen som gis skal betraktes som en beskrivelse av de relevante kravene til sikkerheten til produktet vårt, det er ikke en juridisk garanti og erstatter ikke arbeidet til profesjonell helsepersonell, legg inn en forespørsel til Fresco International 2005 S.A. i tvilstilfeller.

Fresco International 2005 S.A., påtar seg ikke ansvar for misbruk av de produserte produktene, eller hvis de brukes til en annen aktivitet, er vilkårene for bruken ikke under vår kontroll.

Barcelona, 26/05/2021



FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A.

N.I.F. A63702633

Pol. Ind. Can Volart
C/ Torre de Gellers, 5, naves 3 y 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 573 94 00

Mr. Aitor Fresco

GENERAL MANAGER

Fresco International 2005, S.A.