

DO‘S

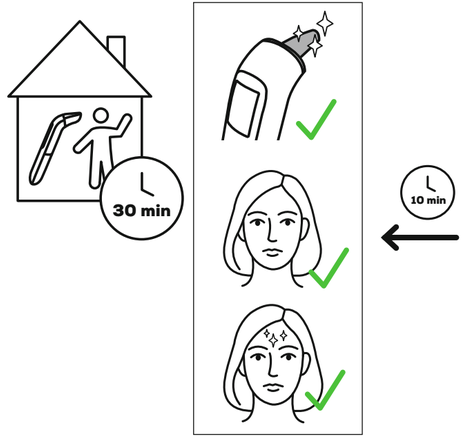


DONT‘S

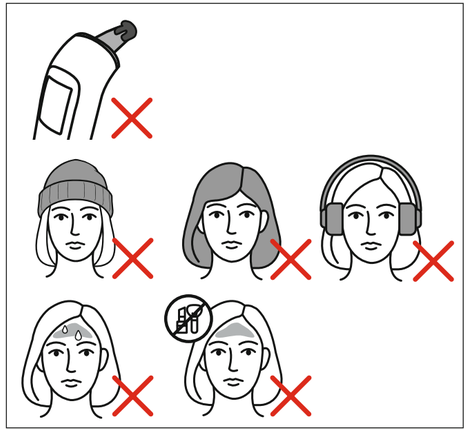


OHRMESSUNG | IN-EAR MEASUREMENT | MESURE AURICULAIRE | MEDICIÓN EN EL OÍDO | MISURAZIONE NELL‘ORECCHIO


1

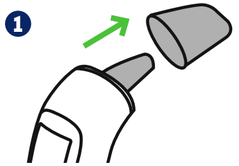

2 kurz drücken | press briefly | pression brève | pulsación breve | breve pressione

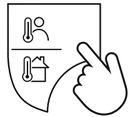


3

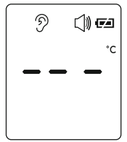

Sicherstellen, dass das Gerät im Ohrmodus ist | Make sure that the device is in ear mode | Assurez-vous que l’appareil est en mode auriculair | Asegúrese de que el aparato esté en modo de medición en el oído | Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità auricolare

4

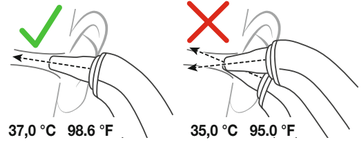

5 kurz drücken | press briefly | pression brève | pulsación breve | breve pressione



6



7



SCAN & SAVE

1 App herunterladen | Download app | Télécharger l’application | Descargar aplicación | Download dell’app

HealthManager Pro

2 Werte scannen und speichern | Scan and save values | Scanner et enregistrer les valeurs | Escanear y guardar valores | Scansionare e salvare i valori



AGE CLASSIFICATION*

3 Alter für eine altersbasierte Temperaturbewertung wählen | Select age for age-based temperature assessment | Sélectionner l’âge pour une évaluation de la température basée sur l’âge | Seleccionar edad para una evaluación de la temperatura basada en la edad | Selezionare l’età per una valutazione della temperatura in base all’età




Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

FT66_2026-02-05_01_QSG_BEU

STIRNMESSUNG | FOREHEAD MEASUREMENT | MESURE DE LA TEMPÉRATURE FRONTALE | MEDICIÓN EN LA FRENTE | MISURAZIONE FRONTALE


1

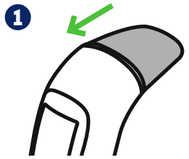

2 kurz drücken | press briefly | pression brève | pulsación breve | breve pressione




3

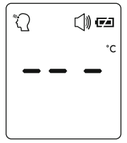

Sicherstellen, dass das Gerät im Stirnmodus ist | Make sure the device is in forehead mode | Assurez-vous que l'appareil est en mode frontal | Asegúrese de que el aparato esté en modo de medición en la frente | Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità frontale

4

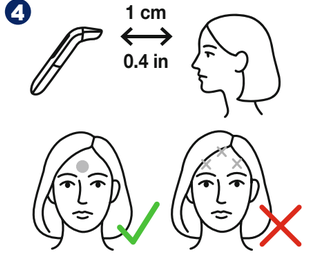

5



kurz drücken | press briefly | pression brève | pulsación breve | breve pressione

6



7



ERGEBNISSE BEURTEILEN | EVALUATING THE RESULTS | ÉVALUER LES RÉSULTATS | EVALUAR LOS RESULTADOS | INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

○	32,0 °C - 34,9 °C (89.6 °F - 94.8 °F)	Niedrige Temperatur | Low temperature | Température faible | Temperatura baja | Temperatura bassa
○	35,0 °C - 37,4 °C (94.9 °F - 99.3 °F)	Normale Temperatur | Normal temperature | Température normale | Temperatura normal | Temperatura normale
○	37,5 °C - 37,9 °C (99.4 °F - 100.3 °F)	Erhöhte Temperatur | Elevated temperature | Température élevée | Temperatura elevada | Aumento di temperatura
○	38,0 °C - 43,0 °C (100.4 °F - 109.4 °F)	Fieber | Fever | Fièvre | Fiebre | Febbre

* Altersbasierte Temperaturbewertung in der App | Age-based temperature assessment in the app | Évaluation de la température basée sur l'âge dans l'application | Evaluación de la temperatura basada en la edad en la aplicación | Valutazione della temperatura in base all'età nell'app

beurer medical

Temp°Check® MultiSense

Quick start guide
Kurzanleitung
Manuel abrégé
Guía rápida
Guida rapida

DE Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes unbedingt die ausführliche Gebrauchsanweisung. **EN** Always read the comprehensive instructions for use before using the device for the first time. **FR** Lisez impérativement le mode d'emploi détaillé avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. **ES** Antes de utilizar por primera vez el aparato, es imprescindible que lea las instrucciones de uso detalladas. **IT** Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso.

