

# ACTEON



X MIND  
**prime**

IT'S TIME  
FOR EFFICIENT  
3D DIAGNOSIS

**HERFST  
AANBIEDINGEN**

Benelux | Prijzen excl. btw  
Voor tandheelkundige dealers.

Geldig van 1 september  
tot 24 december

PHARMA

HYGIËNE Expasyl™ Exact .....3

EQUIPMENT

HANDINSTRUMENTEN  
Bliss..... 4  
Mondspiegels .....10  
Fotospiegels.....11

IMAGING

EXTRAORALE RADIOLOGIE  
X-Mind® Prime 2D/3D - 2D Ceph/3D Ceph..... 12/13  
Artikel Dr.Irfan Abas ..... 14  
X-Mind® trium..... 15

EQUIPMENT

BOTCHIRURGIE  
Kits met tips ..... 16  
Piezotome® Cube ..... 17  
Piezotome M+..... 18  
ImplantCenter 2..... 19  
Karretjes..... 21

INTRAORALE RADIOLOGIE  
PSPiX®2 .....22  
Fosforplat.....24  
X-Mind® DC .....26  
X-Mind® Unity .....27  
Sopix®2 - U Sense/U Sense HD..... 28  
X-Mind® unity + Sopix®2.....29

ULTRASOON  
Newtron® P5 XS B.LED ..... 30  
Newtron Booster.....31  
Tips ..... 32

ELEKTROSURGE/AMALGAMATOR ..... 34

POLISHER Air N GO® Easy ..... 35

POLYMERISATIE  
Mini LED™ STANDARD ..... 36  
Mini LED™ SUPER CHARGED ..... 36  
Mini LED™ ORTHO 2 ..... 36

PHARMA

HYGIËNE Riskontrol®..... 38

CONTACTGEGEVENS .....39

Speciale aanbiedingen geldig van 1 september tot 24 december. Deze promoties zijn enkel geldig bij de deelnemende verdelers. Prijzen excl. btw. Toepassingsgebied: Benelux. Niet-contractueel document. Copyright © 2021 ACTEON® - Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of verstuurd zonder voorafgaande toestemming van ACTEON. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ACTEON®. Aanmaakdatum: 09/2021.



EXPASYL EXACT:  
HETZELFDE VERTROUWDE PRODUCT,  
HANDIGER IN GEBRUIK



NU DANKZIJ DE NIEUWE MONO DOSIS  
VERPAKKINGEN OOK TE GEBRUIKEN  
IN UNIVERSELE ADAPTORS



EXPASYL™ EXACT (0.3g CAPSULES)		PRICE LIST
Ref. 261 011	Expasyl™ Exact x 50	245 €
Ref. 261 010	Expasyl™ Exact x 20	110 €

EFFECTIEF EN ATRAUMATISCH

- ▶ Expasyl™ genereert een druk die 37 keer lager is dan draad (143 vs 5396 kPa)
- ▶ De epitheliale hechting blijft behouden boven de 2400 kPa is de integriteit van de epitheliale hechting (niet gegarandeerd). Het risico op gingivale recessie en botresorptie wordt verminderd.
- ▶ Atraumatisch voor patiënt.

SNEL, SIMPEL EN KOSTEN BESPAREND



Spool en droog het preparaat voorzichtig op bij een gezond parodontium



Plaats het uiteinde van de canule om een gesloten ruimte te creëren



Extrudeer het materiaal langzaam



Injecteer de pasta in de sulcus rondom de tand om voor de best mogelijke afdrukkwaliteit te zorgen. Laat Expasyl™ Exact max. 1-2 min uitwerken. Het tandvlees wordt wit, indicatie van de compressie die door het materiaal wordt uitgeoefend



Verwijder de pasta met een zachte lucht en water nevel met gelijktijdige afzuiging




De sulcus wordt geopend en het element is helemaal droog. Geen blessure. Geen pijn. Geen bloeding. De afdruk kan gemaakt worden.

**NIEUW!**

IT'S TIME FOR  
SUPERIOR  
COMFORT

*Bliss*  
by Acteon

INDUSTRIELE EN AMBACHTELIJKE  
PRODUCTIE, ERFGOED  
VAN DE FRANSE MESSENMAKERIJ

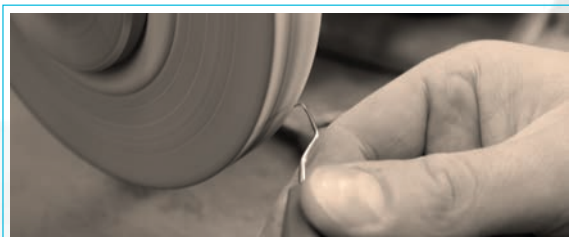

In de productievestiging in de regio Thiers (Puy-de-Dôme), zette ACTEON® de eeuwenoude kennis van de messenmakerij in voor de ontwikkeling van kwaliteitsvolle manuele instrumenten. Het verhaal begint in 1948 met de messenmaker Marcel Dubost. De fabriek begon met de productie van tandheelkundige instrumenten, om in te spelen op de vraag van de tandchirurgen. Vandaag, heeft ACTEON® het juiste evenwicht gevonden tussen ambachtelijk werk, industrie en technologische vernieuwing.



TECHNOLOGIE VAN DE  
HANDGREPEN BLISS  
NIETS WORDT OVER  
HET HOOFD GEZIEN

Om de hand van de tandarts en het instrument zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, beruste ACTEON® op wetenschappelijk onderzoek naar de ergonomie van de manuele tandheelkundige instrumenten.



ULTRALICHT  
15g

ECHT ERGONOMISCH

- 10 mm: optimale diameter van de handgreep voor een verminderde knijpkracht<sup>1</sup>
- 15g: ultralicht voor minder vermoeidheid van de hand<sup>1</sup>

UNIEKE  
HANDGREEP  
SOFT TOUCH\*

UNIEK COMFORT

- Platte vlakken voor een betrouwbare grip en een uniforme druk van de vingers
- Bijzondere gevoeligheid

40%  
SCHERPER  
DAN DE  
CONCURRENTIE\*\*

LIGT STEVIG EN AANGENAAM IN DE HAND

- Oppervlak «soft touch\*» dat niet wegglijdt
- Silicone zonder verend effect, voor een optimale grip
- Optimale precisie en controle

100%  
GOEDGEKEURD  
DOOR DE  
PROFESSIONALS<sup>2</sup>

\* Aangenaam gevoel

\*\*Studie CATRA, Cutlery & Allied Trades Research Association (CATRA), onafhankelijk laboratorium gespecialiseerd in slijptests en die de scherpte heeft gemeten van de reinigingsapparatuur Bliss en zijn belangrijkste concurrenten, december 2019.

\* Aangenaam gevoel

1 -The effects of periodontal instrument handle on hand muscle load and pinch force, D. Rempel; D. Lee; K. Dawson; P. Loomer; JADA 143 (10) - October 2012

2 - Interne evaluatie op 20 artsen in 8 verschillende landen. 100% antwoordde dat de handgreep Bliss comfortabel is

# CURETTES VAN GRACEY

U VERDIENT EEN OPTIMAAL COMFORT,  
UW PATIENTEN OOK




Gracey 1-2: de kromming past zich perfect aan de anatomie van de voorste tanden aan



Gracey 15-16: de lange sikkel is handig voor de zones achterin

50€  
**45 €**

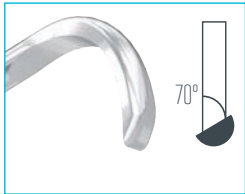

- Afgerond uiteinde
- Afgeronde achterkant
- Halfronde dwarsdoorsnede
- Figuur 70°



Gracey 1-2 Ref. 402.01SI  
Gracey 5-6 Ref. 402.05SI  
Gracey 11-12 Ref. 402.11SI  
Gracey 13-14 Ref. 402.13SI  
Gracey 15-16 Ref. 402.15SI  
Gracey 17-18 Ref. 402.17SI

# UNIVERSELE CURETTES

U VERDIENT EEN OPTIMAAL COMFORT,  
UW PATIENTEN OOK





Barnhart 5-6: Optimale hoek voor de achterste en mesiale zijden



Columbia 13-14: Kromming van de as en het actief gedeelte optimaal voor de toegang tot de achterzijden.

50€  
**45 €**

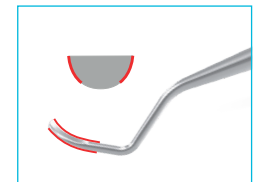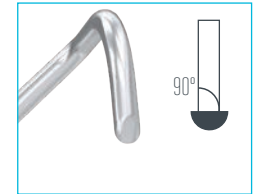

- Afgerond uiteinde
- Twee scherpe zijden
- Halfronde dwarsdoorsnede
- Figuur 90°




BARNHART 5-6 Ref. 408.05SI  
COLUMBIA 4L-4R Ref. 405.04SI  
COLUMBIA 13-14 Ref. 405.13SI  
LANGER 5-6 Ref. 406.06SI

Minder  
beweging

Minder  
druk

## ASSEN

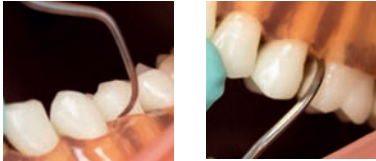

M23: Efficiënt achterin dankzij de tegenkromming en de fijne punt

H6-H7: Efficiënt voorin, in de interproximale en premolare zones

GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT NAUWE INTERPROXIMALE OPPERVLAKKEN



M23  
Ref. 404.23SI

H6-H7  
Ref. 406.07SI



- Scherp uiteinde
- Driehoekige doorsnede van het mes
- Twee scherpe randen
- Figuur 90°

50 €  
**45 €**

## DUBBEL UITEINDE



H5-L5: Makkelijk te plaatsen en aan te passen aan alle voorste tanden

L128-L5 mini: Uitstekende aanpassing, ideaal voor de interproximale toegang

DUBBELE EFFICIENTIE  
DUBBELE PRESTATIES



H5-L5  
Ref. 406.05SI

N128-L5  
Ref. 406.08SI

N128-L5 mini  
Ref. 406.09SI

De versie Mini is aangewezen voor nauw contact en voor een betere interproximale toegang.

## KIT PROPHYLAXIE *Bliss* by Acteon

**349 €**



233.30	Cassette Easy clip
210.00SI	Handgreep Spiegel
MP3624PH	Spiegel PURE REFLECT® n°5, doos van 12
418.06SI	UNC12 - Instrument dubbele : Sonde paro & sonde d'examen n°23
404.23SI	M23 - Assen
402.11SI	Curette van Gracey 11-12
402.13SI	Curette van Gracey 13-14
406.07SI	H6-H7 - Assen
405.13SI	Curette Columbia 13-14

Andere modellen zijn verkrijgbaar. Om ons gamma van manuele instrumenten te ontdekken, raadpleeg:



HANDGREEP SPIEGEL EN SPIEGEL N°5

Handgreep spiegel Europese schroefdraad (SS)  
Ref. 210.00SI

Spiegels Pure Reflect® n°5  
Ref. MP3624PH



POCKETSONDE



UNC12  
Ref. 418.06SI

ASSEN



M23  
Ref. 404.23SI

H6-H7  
Ref. 406.07SI

CURETTE COLUMBIA



Columbia 13-14  
Ref. 405.13SI

CURETTES VAN GRACEY



Gracey 11-12  
Ref. 402.11SI

Gracey 13-14  
Ref. 402.13SI

# PURERELECT



## PURE REFLECT® TECHNOLOGIE

exclusief van ACTEON® GROUP


### Geïnspireerd door de ruimtevaartsector

Geen dubbel beeld (frontaal oppervlak)



Geen vervormde kleuren en vormen  
Nauwkeurig en scherp beeld

### De authentieke kleurreflectie

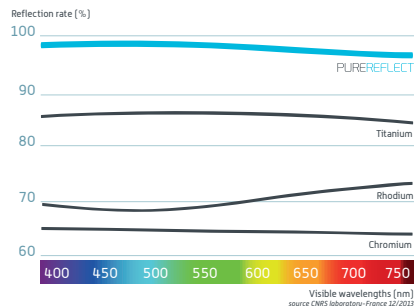

RHODIUM  
een grijze reflectie

TITAN  
een blauwe reflectie

# PURERELECT

## MICRO-SPIEGELS PURE REFLECT®



72 €  
**61 €**

Ø3 mm  
Ref. MP3303PH



72 €  
**61 €**

Ø5 mm  
Ref. MP3305PH




78 €  
**66 €**

7x2 mm  
Ref. MP3306RPH



78 €  
**66 €**

9x3 mm  
Ref. MP3310RPH

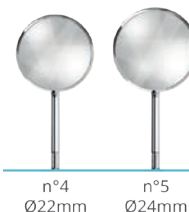

**45 €**

### PURE REFLECT®

N°	Ref.	Aant.
4	MP3622PH	12
5	MP3624PH	12

**11 €**



XL Style Ref. 210.00XL

**29 €**



Ref. 210.00SI (SS)

# SUPER PROMO

## FOTOSPIEGELS CHROME®



**45 €**

Face occlusale adulte  
Réf. MZP512

Ref. MZP214

## DRAAIENDE HOUDER

voor fotospiegels.

64.20 €  
**55 €**

Geanodiseerd aluminium, licht conusvormig. Dankzij het bovenstuk met scharnieren kunt u foto's vanuit verschillende posities nemen zonder de spiegel aan te raken. Beide zijden van onze dubbelzijdige fotospiegels kunnen worden gebruikt zodat ze langer meegaan. Op ons nieuwe heft passen alle soorten en vormen fotospiegels.

Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)



# X MIND prime



Medische apparaten klasse IIb - (IMQ - CE 0051).  
Fabrikant: de Götzen ACTEON® group (Italië).

## IT'S TIME FOR EFFICIENT 2D AND 3D DIAGNOSIS

Eenvoudige 2D  
diagnose

Eenvoudige  
positionering

Eenvoudige  
gebruikers-  
interface

Eenvoudige  
installatie

Eenvoudige  
training

56  
2D- en 3D- onderzoeken  
voor al uw klinische  
toepassingen

1  
minuut om uw  
implantaatverslag  
te bewerken met de  
intuïtieve AIS- software

1 to 1  
Face to face  
positionering

0  
vloerruimte gebruikt  
dankzij innovatief aan de  
wand gemonteerd systeem\*

100%  
Mac\* en Windows\*  
compatibel  
met AIS- software

### X-MIND® PRIME PAN 2D\*: Unieke panoramische oplossing

X-Mind® prime 23-975-€  
**13 990 €**  
Ref. W1200001:  
XMP 2D WALL 220-240V


X-Mind® prime met Ceph 40-275-€  
**23 900 €**  
CEPH: Ref. W1200009

### X-MIND® PRIME PAN 3D\*: CBCT-oplossing voor panoramische en 3D-onderzoeken

X-Mind® prime 3D 68-340-€  
**39 500 €**  
Ref. W1200005:  
XMP 3D WALL 220-240V

X-Mind® prime 3D met Ceph 78-350-€  
**52 500 €**  
CEPH: Ref. W1200010

- ▶ Nauwkeurige panoramische onderzoeken
- ▶ Verbeterde communicatie met uw patiënten
- ▶ Minimum aan voorbereiding voor onderzoeken
- ▶ Scherp beeld bij eerste weergave
- ▶ Rolstoelvriendelijk

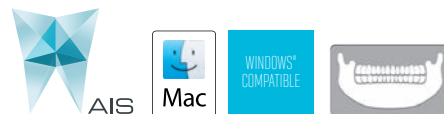

- ▶ Kies uw 2D- en 3D-onderzoek uit een brede selectie aan klinische toepassingen
- ▶ Plan uw behandeling
- ▶ Communiceer efficiënt met uw patiënt



\*Exclusief certificering en installatiekosten  
\*\*Behalve voor de modellen met Ceph



**TANDARTS - IMPLANTOLOG  
IRFAN ABAS**

Tandarts Irfan Abas is gespecialiseerd in orale chirurgie, implantologie en restauratieve tandheelkunde. Naast zijn werkzaamheden bij Tandarts Abas, is hij tevens auteur van vele artikelen en redacteur voor het klinische tijdschrift TandartsPraktijk. Sinds 2019 heeft hij zijn eigen opleidingsinstituut de Abas Implant Academy, om tandartsen op te leiden in de orale chirurgie en implantologie.

**MEET DHR. IRFAN ABAS M.SC. IN PIEZOSURGERY**

**TANDARTS - IMPLANTOLOG  
& RESTAURATIEF TANDARTS (NVRT & EPA) - REDACTEUR  
TIJDSCHRIFT TANDARTSPRAKTIJK & INTERNATIONAAL  
SPREKER EN AUTEUR (TANDARTS - IMPLANTOLOG)**

Het is een klein apparaat met 4 sterktes die overeenkomen met de hardheid van het bot volgens de kwalificering van Lekholm & Zarb namelijk botdichtheid D1 tot en met D4, waarbij de eerste hardheid corticaal bot betreft en D4 zacht, spongies bot is.

Het apparaat wordt geleverd met handstuk, steriliseerbare slang, ophangapparaat voor het infuusbestek en een siliconenhouder voor het handstuk dat steriliseerbaar is (afbeelding 1).

Het infuusbestek dat hierbij nodig is, heeft een klein wieltje en kan zowel disposable als steriliseerbaar aangeschaft worden. Het voetpedaal heeft een middelste sectie waarmee de piëzo wordt bediend en 2 zijknoppen, waarbij met de rechterzijde geswitched wordt tussen de verschillende botdichtheden en met de linkerzijde de hoeveelheid koeling aangepast kan worden.

De hoeveelheid koeling wordt uitgedrukt in het aantal milliliters per minuut. Zetten we deze op 50 ml per minuut, dan houdt dat in dat we de piëzo 10 minuten continu kunnen gebruiken alvorens de infuusfles met fysiologisch zout van 500 ml gewisseld moet worden. Het pakket wordt geleverd met één kitje met tips, genaamd de essentials kit. Hierin zitten de basistips voor botchirurgie, zoals een zaagje, bolletje, sinusips en extractietip. Uiteraard kunnen meerdere kits met tips apart aangeschaft worden, zoals een extractiekit, een botaugmentatiekit (allerlei zaagjes, ook in gehoekte uitvoering), een sinusliftkit zowel crestaal als lateraal, en een klinische-kroonverlengingstip.

De meest gebruikte tips van deze kits zijn dus samengebracht in de essentials kit (afbeelding 2). Het handstuk ligt fijn in de hand en heeft ledverlichting bij de kop (afbeelding 3). Een sleutel waarmee de piëzotop op het handstuk gedraaid kan worden, is uiteraard aanwezig.

**CASUS: LATERALE SINUSBODEMELEVATIE**

Ik besluit het apparaat te testen op zowel een laterale sinusbodemeelevatie als op extractie van een geïmpacteerd cuspidaat. Ik begin met de laterale sinusbodemeelevatie. Na afschuiven van de mucosa maak ik met het smalle, diamantgecoate zaagje een luikje in de laterale wand. Door de


dikte van slechts 1 mm van de tip blijft de botsnede zeer smal (afbeelding 4). Dit heeft als voordeel dat ik het laterale luikje in z'n geheel kan uitsnijden, om het na de sinusbodemeelevatie te gebruiken om de laterale opening weer te sluiten. Ik werk hierbij op een harde corticale wand, daarom zet ik de stand op D1. Er is nog een vijfde stand, een turbo, maar deze wordt door het apparaat zelf geactiveerd als dit veel weerstand ondervindt. Door de aanwezigheid van 6 keramische cilinders, kan de output van de piëzo behoorlijk oplopen. De piëzo start weliswaar met een behoorlijke kracht, maar doordat het weerstand ondervindt start de turbo automatisch, waardoor ik de hele luik in enkele minuten kan maken. Ik verwijder het botstuk en zie dat het om een dunne membraan van Schneider gaat (afbeelding 5).

Dit laatste is altijd lastig in te schatten, omdat dit niet te bepalen is aan de hand van de eerder vervaardigde CBCT. Gelukkig is er een trompetinstrument bijgeleverd: een brede tip waardoor er een lage puntbelasting op het membraan komt (afbeelding 6). Ik breng de stand terug naar D4 om het eerste deel van het membraan met de piëzo los te maken van het bot. Hierna ga ik handmatig verder met de sinusbodemeelevatie, waarna ik na het aanbrengen van de botpartikels in de lege sinusholte, het eerder verwijderde botstuk terugplaats.

De tweede ingreep die ik met de Cube test, is het verwijderen van een palataal horizontaal geïmpacteerd cuspidaat, teneinde een botaugmentatie te kunnen uitvoeren zodat ik nadien een implantaat kan plaatsen. Na afschuiven van een palatale flap wordt het coronale deel van de geïmpacteerd cuspidaat zichtbaar. Op de CBCT heb ik beoordeeld in welke richting en hoeveel mm de radix naar distaal verloopt. Met een zaagtipp maak ik een zaagsnede in deze richting (afbeelding 7). Het betreft hard corticaal bot, dus de stand gaat op D1 met een goede koeling van 100 ml/min. Binnen paar minuten is de zaagsnede compleet, zie ik de volledige radix lopen en kan ik de cuspidaat verwijderen.

Ik heb meerdere piëzo-apparaten van verschillende merken gebruikt tijdens uiteenlopende dento-alveolaire en (pre) implantologische chirurgische ingrepen en kom tot de slotconclusie dat de Cube door zijn gebruiksgemak de fijnste is door enkel 4 standen (plus 1 extra turbostand) te hebben, en tevens het krachtigste piëzobotchirurgie-apparaat is waarmee ik gewerkt heb. De vele leverbare kits zijn uiterst handig, maar enig nadeel vormen wel de extra kosten die de aanschaf daarvan met zich meebrengen. Nochtans: dit is een top piëzotoom!

(Irfan Abas)



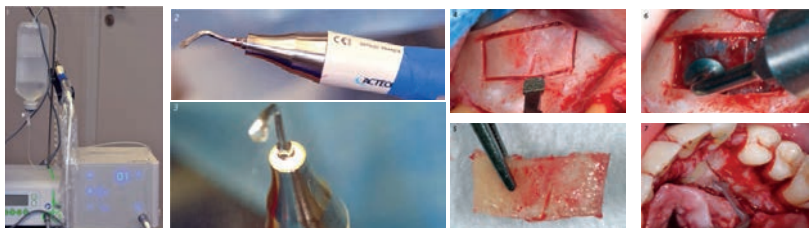


**3-in-1**  
systeem voor panora-  
mische, 3D- en cefalome-  
trische onderzoeken

**3D**  
mapping van botdichtheid  
voor een betere slag-  
gingskans

Tot **50%**  
dosisreductie\*

**75 µm**  
beeld met hogere resolutie  
voor betrouwbare diagnose

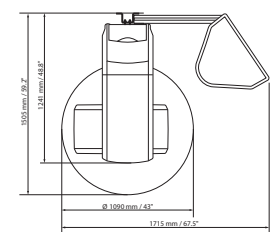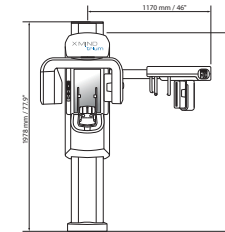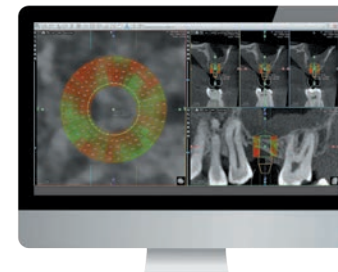

**Een brede selectie FOV's**

Met X-Mind® trium kunt u kiezen uit een brede selectie Field Of Views, zodat u zich kunt focussen op het interessegebied voor de diagnose en de blootstelling van de patiënt aan röntgenstraling kunt beperken:



ø 40x40 mm



ø 60x60 mm



► trium : ø 80x80 mm  
► trium True Low Dose:  
ø 80x90 mm



► trium : ø 110x80 mm  
► trium True Low Dose:  
ø 110x90 mm



	Werkstation met standaard beeldscherm		
	PANORAMISCH CEFALOMETRISCH	PANORAMISCH 3D	PANORAMISCH CEFALOMETRISCH 3D
<b>X MIND trium</b>			
<b>TRUE LOW DOSE</b>	42-627-€ <b>30 500 €</b>	76-074-€ <b>46 900 €</b>	87-660-€ <b>59 900 €</b>

\*Verhouding gebaseerd op DAP-metingen met standaard X-Mind® Trium-instellingen 90 kV-8 mA-300 prjs

Medische apparaten klasse IIb (IMQ - CE 0051). Fabrikant: de Götzen ACTEON group (Italië).

X-MIND® trium is een laserproduct van klasse 3R volgens IEC 60825-1:2007. Vermijd directe blootstelling van de ogen aan laserstraling. De laseroutput bekijken met vergrotende optische instrumenten (bijv. chirurgische microscoop en vergrootbril) kan gevaarlijk zijn voor de ogen, dus mag de gebruiker de straal niet richten op een gebied waar zulke instrumenten doorgaans worden gebruikt.





929€  
**850 €**



**Extractiekit**  
Ref. F87546  
Tips Ninja® LC1, LC2 (x2), LC2L, LC2R.



1.201€  
**850 €**



**Intralift™ Kit**  
Ref. F87536  
Tips TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5 (Ø 3 mm).



1.224€  
**850 €**



**Botchirurgiekit**  
Ref. F87509  
Tips BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6.



947€  
**850 €**



**Sinus Lift Kit**  
Ref. F87519  
Tips SL1, SL2, SL3, SL4, SL5.



792€  
**750 €**



**Kamsplijtingskit**  
Ref. F87567  
Tips CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6.



616€  
**550 €**



**Crown Extension Kit**  
Ref. F87554  
Tips BS6, CE1, CE2, CE3.



686€  
**650 €**



**Piezocision™ Kit**  
Ref. F87576  
Tips PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3.



1.224€  
**850 €**



**Essential Kit**  
Ref. F87528  
Tips BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2.

**Kit Universal**

Réf.F87539  
Inserts BS6 II, LC1 II, LC2 II, CE1 II, CE3 II et PZ1 II, un support métallique autoclavable et une clé plate autoclavable.

1.224€  
**850 €**



MEER  
MOGELIJKHEDEN

**BS1RD**  
Afgeronde zaag,  
280° actief oppervlak  
Ref. F87557  
**239 €**



Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459. Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

PIEZOTOME  
CUBE

IT'S TIME FOR  
ATRAUMATIC  
EXTRACTIONS

Ref. F50100  
Wordt geleverd met een multifunctionele voetschakelaar, een Piezotome® CUBE LED handstuk, 1 handstukhouder, een Essential II-kit (6 tips), een Piezotome® dynamometrische sleutel, 1 irrigatielijn staander, 2 autoclaveerbare irrigatielijnen, 5 clips en 15 perforators.


6.696,50€  
**5 250 €**



1 Kit Essential

INBERGREPEN

IMPLANTOLOGIECASSETTE

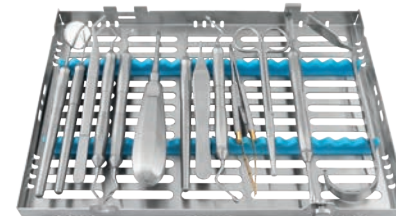

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459. Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

Implantologiecassette  
met een waarde  
van **700 €**

Ref. 360 XL  
**CASSETTE MET 13 INSTRUMENTEN**

INHOUD: Spiegel met handvat, Satin College-pincet, Adson-pincet, Sonde nr. 6, XL CK6-scaler, Hemingway-botcurette, Scalpel met handvat, H.E.I. n° 1, Botlepel, Castroviejo-naaldhouder met rechte kaken, Joseph-schaar, Oprolmechanisme met contragewicht, Luxator-lift



De Ultrasoon-expert voor snelle en veilige botoperaties

7-534 €  
**6 990 €**

Réf. F57800  
Geleverd met 2 infuusstandaarden, 5x 3m irrigatielijnen voor eenmalig gebruik en perforators, 2 handstuksteunen, 2x handstuksteen, een progressief pedaal, 1x M+ sleutel, 1x 3m snoer



## IMPLANTCENTER 2

De combinatie van technologieën voor krachtige en veilige botchirurgie

12-795 €  
**8 990 €**

3 modi:

- ▶ Piezotome® (botchirurgie)
- ▶ Newtron® (klassieke behandelingen: perio, endo,...)
- ▶ I-Surge™ (implantatiemotor).

Réf. F27200  
Wordt geleverd met een LED-motor, een LED-motorsnoer, een progressieve voetschakelaar, 2 beugels, 2 handstukhouders, 2 steriliseerbare irrigatielijnen en 30 perforators.




### OPTIONEEL

Newtron®-handstuk + snoer

Réf. F12281



Insert AS3D

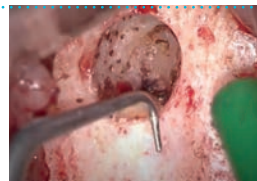

1-541,00 €  
**800 €**



Réf. F12850

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459 Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

### OPTIONEEL

Piezotome® LED-handstuk + snoer

Réf. F12815

1-436,20 €  
**790 €**



Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459 Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

# IMPLANTCENTER 2

## Accessoires



~~1.541 €~~  
**950 €**

### Newtron® LED-handstuk

F12609  
Voor Piezotome® 2  
en ImplantCenter™ 2

### Newtron® LED-snoer

F12830  
Voor Piezotome® 2  
En ImplantCenter™ 2

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459

## Irrigatielijnen



~~628 € 4 pcs~~  
**448 € 4 pcs**  
**112 € elk**

### 10 universele irrigatielijnen

F57370  
Steriel, voor eenmalig gebruik, met geïntegreerde cassette en stroomregelaar

Medische apparaten klasse Is (GMED) - CE 0459



~~662 € 4 pcs~~  
**448 € 4 pcs**  
**112 € elk**

### Autoclaveerbare irrigatielijns + 10 steriele perforators

F57374

Medische apparaten klasse I (GMED) - CE 0459

## Cocoon-karretje

F24417  
Kleur: wit  
Twee aansluitingen voor water en  
elektriciteit  
Afmetingen (DxBxH): 45 x 40 x 80 cm  
3 bladen: 40 x 30 cm

~~384 €~~  
**349 €**



## Karretje Newtron®

F03739  
Kleur: wit  
Twee aansluitingen voor water en  
elektriciteit  
Afmetingen (DxBxH): 48 x 40 x 77cm  
3 glazen bladen: 42 x 36 cm

~~580 €~~  
**510 €**




## ImplantCenter™-karretje

F27125  
Afmetingen (DxBxH): 66 x 54 x 79 cm  
3 glazen bladen: 60 x 50 cm  
Aansluitingen voor water en elektriciteit

~~1.209 €~~  
**1050 €**



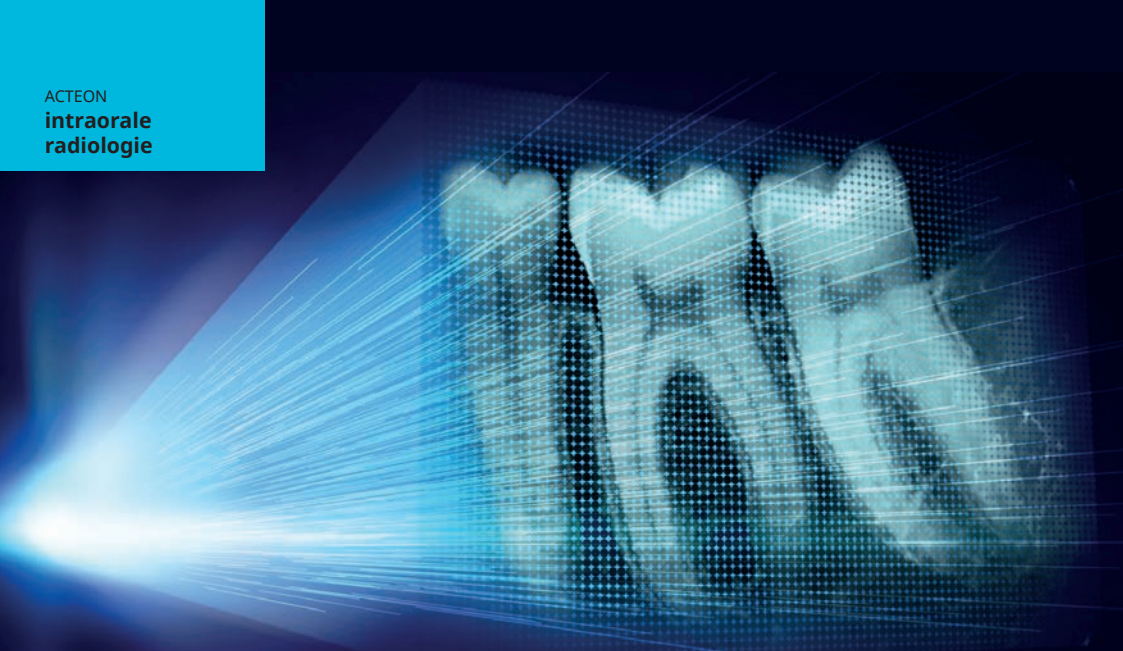

## 2 FIBER<sup>®</sup> PIXEL


### DIFFERENTIATIE VAN HET TANDWEEFSEL

FIBER2PIXEL<sup>®</sup>-technologie is gebaseerd op het gebruik van breedwerkende optische microvezels voor het geleide transport van fotonemissies met het oog op het produceren van contrastrijke beelden.


Pedodontologie  
grootte 0



Endodontie  
grootte 1

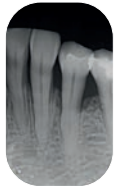

Endodontie  
grootte 1

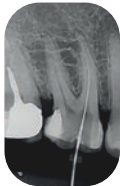

Orthodontie  
grootte 1




Cariologie  
grootte 2




Implantologie  
grootte 2




Occlusaal grootte 4

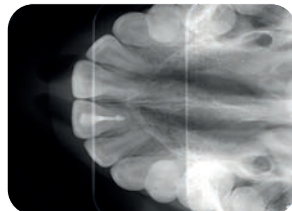

Bitewing grootte 3

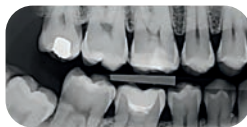

- ▶ Dankzij de FIBER2PIXEL<sup>®</sup>-technologie produceert PSPIX<sup>®2</sup> nauwkeurige beelden en opvallend contrast voor een betrouwbare diagnose.
- ▶ Er zijn verscheidene groottes verkrijgbaar, aangepast aan de morfologie van de patiënt en de klinische toepassing.

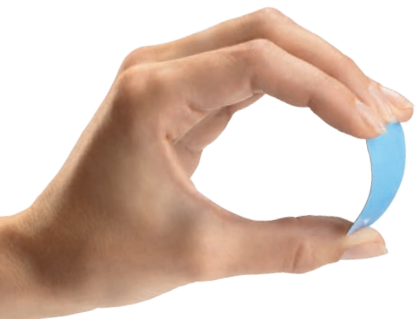

# PSPIX<sup>2</sup>

De eerste persoonlijke beeldplaatscanner



- ▶ Compact ontwerp en makkelijk bereikbaar: de kleinste beeldplaatscanner op de markt voor uw persoonlijk gemak.
- ▶ Beelden in enkele seconden: u hoeft niet langer naar een andere ruimte te gaan om uw beelden te scannen.
- ▶ Dankzij het exclusieve 'klik & scan'-concept werkt de nieuwe PSPIX<sup>®</sup> volledig intuïtief: maak uw keuze op het grote touchscreen, plaats uw beeldplaat en de PSPIX<sup>®</sup> doet de rest...



Ref. S\_702\_0013

Wordt geleverd met 4 ERLM (2x grootte 1, 2x grootte 2), 200 beschermende zakjes (100x grootte 1, 100x grootte 2), een bewaardoos voor de beeldvormingsplaten, 1 pen voor het touchscreen, 1 beschermende hoes voor het PSPIX<sup>2</sup>-systeem, 1 voeding 100-240 VAC, 1 ethernetkabel, ACTEON<sup>®</sup> Imaging Suite-software (AIS).



## Beschermhoes en karton voor fosforplaat

59 €

Voor **PSPIX<sup>®2</sup>** en **PSPIX<sup>®</sup>** (vorige generatie)



**PSPIX<sup>®</sup>**  
vorige generatie

**PSPIX<sup>®</sup>**  
(ancienne génération)

Doos met 250

Grootte 0		<b>700338L</b>
Grootte 1		<b>700339L</b>
Grootte 2		<b>700340L</b>
Grootte 3		<b>700341L</b>

## Standaard fosforplaat

113 €  
69 €

Voor **PSPIX<sup>2</sup>**



**PSPIX<sup>®2</sup>**

Doos met 2

Grootte 0 (22 x 35mm)		<b>990215</b>
Grootte 1 (24 x 40mm)		<b>990216</b>
Grootte 2 (31 x 41mm)		<b>990217</b>
Grootte 3 (27 x 54mm)		<b>990218</b>

## Beschermhoesjes voor fosforplaat

41 €  
32 €

Voor **PSPIX<sup>2</sup>** en **PSPIX<sup>®</sup>** (vorige generatie)



**PSPIX<sup>®2</sup> & PSPIX<sup>®</sup>**  
(vorige generatie)

Doos met 250

Compatibel met	PSPIX <sup>2</sup>		Grootte	Productcode
	PSPIX <sup>2</sup>	PSPIX		
PSPIX <sup>®</sup>	✓	✓	Grootte 0	<b>700342L</b>
SOREDEX <sup>®*</sup> Digora	✓	✓	Grootte 1	<b>700343L</b>
INSTRUMENTARIUM <sup>®*</sup> Express	✓	✓	Grootte 2	<b>700344L</b>
DÜRR DENTAL <sup>®*</sup> Vistascan <sup>®*</sup>	✓	✓	Grootte 3	<b>700345L</b>
KAVO <sup>®*</sup>	✓	✓		

## Beschermhoes en karton voor fosforplaat

87 €  
63 €

**PSPIX<sup>2</sup>**



**PSPIX<sup>®2</sup>**

Doos met 300

Grootte 0		<b>700546</b>
Grootte 1		<b>700547</b>
Grootte 2		<b>700548</b>
Grootte 3		<b>700549</b>

- ▶ Bescherming tegen krassen, licht en kruisbesmetting
- ▶ Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken

ERLM PSPIX<sup>2</sup> - Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.

ERLM PSPIX - Medische apparaten klasse IIa (Eurofins) - CE0537. Fabrikant: Soredex - Distributor: Sopro<sup>®</sup>

ERLM PSPIX<sup>2</sup> - Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.

ERLM PSPIX - Medische apparaten klasse IIa (Eurofins) - CE0537. Fabrikant: Soredex - Distributor: Sopro<sup>®</sup>

# X MIND DC

4-160-€  
**2 690 €**

## Intraorale röntgenopnamen

- ▶ Zeer hoge kwaliteit
- ▶ Minimale belichtingstijd: 0,02 s
- ▶ Precieze en flexibele positionering
- ▶ Programmeerbare timer
- ▶ Snel wisselen van traditionele naar digitale modus
- ▶ Montage boven of onder



Wordt geleverd met een generator (lange conus), een pantograaf, een extensor en een timer.



Versie aan de wand:	Montage boven lange conus	Montage boven vierkante conus	Montage onder lange conus	Montage onder vierkante conus
Extensor 0,40 m	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
Extensor 0,80 m	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
Extensor 1,10 m	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162

5-076-€  
**3 090 €**

# X MIND unity

## Een scherp en contrastrijk beeld

- ▶ De aanpasbare parameters zoals kV, mA en belichtingstijd gecombineerd tot een focus van 0,4 mm, zorgen ervoor dat de X-Mind® unity ongeëvenaarde beelddefinitie levert voor een betrouwbaardere diagnose.



reddot design award  
winner 2013

Versie aan de wand:	Montage boven		Montage onder	
	Lange conus	Vierkante conus	Lange conus	Vierkante conus
Extensor 0,40 m	W0800003	W0800006	W0800012	W0800015
Extensor 0,80 m	W0800004	W0800007	W0800013	W0800016
Extensor 1,10 m	W0800005	W0800008	W0800014	W0800017

Uitzonderlijke beeldkwaliteit, geschikt voor de meest complexe endodontische behandelingen

6-090-€  
**3 990 €**



## SOPIX<sup>2</sup>

SOPIX<sup>2</sup> levert een uitstekende beeldkwaliteit dankzij de beste technologieën op de markt.

### SOPIX<sup>2</sup> USB-sensor grootte 1 - Hoge definitie

▶ Ref. S\_802\_0008.

Wordt geleverd met een sensorhouder en 10 beschermhoesjes voor de sensor.

Ook verkrijgbaar in grootte 2 (Ref. S\_802\_0009)

€7-200 €5 650



▶ Dankzij de Technologie **Ace**, geen enkel risico op overmatige belichting.

▶ Ultrasnel: De opnames zijn meteen te zien op het scherm

▶ **Ace** De gepatenteerde ACE-technologie staat bij elke opname borg voor kwaliteitsvolle beelden, voor een precieze en betrouwbare diagnose zonder overmatige belichting. U bespaart tijd omdat u geen overbodige opnames meer hoeft te maken.

Een voordelige oplossing voor een perfecte diagnose



## U-SENSE

3-485-€  
**2 490 €**

Ref. W1300001  
GROOTTE 1

4-655-€  
**3 590 €**

Ref. W1300002  
GROOTTE 2



U-SENSE kan ontsmet worden door onderdompeling en beschermt worden met de beschermingshoesjes voor eenmalig gebruik, voor nog meer hygiëne en veiligheid voor de patiënten en behandelaars.

Medische inrichting van klasse IIa Fabrikant: De Gotzen

X MIND <sup>unity</sup> + SOPIX<sup>2</sup> <sup>INSIDE</sup> = **6 990 €** <sup>9-908-€</sup>

### Sensor SOPIX<sup>2</sup> INSIDE Grootte 1

▶ Ref. S\_802\_5010

Wanneer de generator X-Mind<sup>®</sup> Unity gecombineerd wordt met SOPIX<sup>2</sup> Inside, ontvangt de patiënt enkel de dosis die nodig is voor zijn morfologie. Zo beschermt u de patiënt en het personeel van uw praktijk tegen overbodige blootstelling.

Een doeltreffende bescherming met een minimale blootstellingstijd.



SOPIX<sup>®</sup> inside: Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459. Fabrikant: Sopro<sup>®</sup> (Frankrijk)

# NEUTRON

P5XS B.LED

Bescherm het glazuur door perfect gecontroleerde trillingen en tipjes van hoogwaardig medisch staal

Ref. F62100

Wordt geleverd met een Newtron® Slim B.LED-handstuk met blauwe ring, een witte LED-ring, een F.L.A.G.-kit (5x 1,5 ml), een voeding, 3 tips (N°1, N°1S, H3), een autoclaveerbare platte sleutel en een reservoir van 300 ml.

► Dankzij de eenvoudige en precieze stroomregeling geniet me van comfort voor de patiënt met grote efficiëntie en de breedste klinische toepassingen.

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459



Inbergrepen de Bliss Profylaxe Kit met een waarde van **349 €**

## KIT PROPHYLAXIE

*Bliss*  
by Acteon



Medische apparaten klasse I Fabrikant: PRODONT HOLLIGER

233.30	Cassette Easy clip
210.00SI	Handgreep Spiegel
MP3624PH	Speigel PURE REFLECT® n°5, doos van 12
418.06SI	UNC12 - Instrument dubbele : Sonde paro & sonde d'examen n°23
404.23SI	M23 - Assen
402.11SI	Curette van Gracey 11-12
402.13SI	Curette van Gracey 13-14
406.07SI	H6-H7 - Assen
405.13SI	Curette Columbia 13-14

750,10 €  
**450 €**



**NEUTRON® SLIM B.LED HANDSTUK**  
Autoclaveerbaar

- Met blauwe LED-ring: Ref. F12900
- Met witte LED-ring: Ref. F12905

# NEUTRON

BOOSTER

1.258,60 €  
**990 €**

Bescherm het glazuur door perfect gecontroleerde trillingen en tipjes van hoogwaardig medisch staal.

## COMPACT EN EFFICIËNT

**Handstuk:** No LED  
**Gewicht handstuk:** 52g  
**Gewicht van het apparaat:** 1600g  
**Afmetingen (LxWxH):** 129x160x87mm



**Ø4x6mm water**  
Provide connection for hoses:  
inner diameter: 4mm,  
outer diameter: 6mm

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459



Ref. F60203

Geleverd met NEUTRON® handstuk, universele sleutel en een tip nr. 1.

## INBERGREPEN > *Bliss* by Acteon

ASSEN  
M23 Ref. 404.23SI



UNIVERSELE CURETTES  
COLUMBIA 4L-4R Ref. 405.04SI

Medische apparaten klasse I Fabrikant: PRODONT HOLLIGER

541,90 €  
**279 €**



**NEUTRON® HANDSTUK**  
Autoclaveerbaar

F12281



VERMOGEN 0 TO 25%

periodontics

H3  
F00369  
x3 91 € pcs  
x10 81 € pcs



H4L  
F00114  
137-€  
95 €



H4R  
F00115  
137-€  
95 €

periomaintenance

BDR

TK1-1S  
F01001  
x3 91 € pcs  
x10 81 € pcs



TK2-1L  
F02162  
137-€  
95 €



TK2-1R  
F02161  
137-€  
95 €



VERMOGEN 0 TO 30%

implantProtect  
Pure Titanium

IP1  
F02121  
x3 91 € pcs  
x10 81 € pcs



IP2L  
F02122  
137-€  
111 €



IP2R  
F02123  
137-€  
111 €



IP3L  
F02124  
137-€  
111 €



IP3R  
F02125  
137-€  
111 €



perioSoft

PH1  
F00702  
122-€\*  
81 €\*



Kit de 4 inserts

VERMOGEN 25 TO 50%

endodontics

IRRISAFE™  
(Blister da 4)  
x3 69 € pcs  
x10 61 € pcs



IRR 20-21mm - F43807  
IRR 20-25mm - F43808  
IRR 25-21mm - F43805  
IRR 25-25mm - F43806

ET40  
F88012  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



endosuccess  
Canal Access Prep

CAP1  
F88181  
x3 74 € pcs  
x10 69 € pcs



CAP2  
F88182  
x3 74 € pcs  
x10 69 € pcs



CAP3  
F88183  
x3 74 € pcs  
x10 69 € pcs



VERMOGEN 25 TO 50%

endosuccess  
Retreatment

ETBD  
F88020  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



ET25  
F88018  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



ET25L  
F88022  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



PUISSANCE 100%

ET18D  
F88017  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



ET20  
F88011  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



ET25S  
F88021  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



ETPR  
F88019  
x3 120 € pcs  
x10 110 € pcs



scaling

VERMOGEN 50 TO 100%

N°15  
F00245  
x3 59 € pcs  
x10 52 € pcs



N°1  
F00246  
x3 53 € pcs  
x10 47 € pcs



N°10Z  
F00254  
x3 78 € pcs  
x10 69 € pcs



N°10P  
F00253  
x3 59 € pcs  
x10 52 € pcs



N°10X  
F00359  
x3 78 € pcs  
x10 69 € pcs



VERMOGEN 25 TO 50%

endosuccess  
Apical Surgery

AS3D  
F00065  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



AS9D  
F00067  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



ASRD  
F00081  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



AS6D  
F00079  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



ASLD  
F00080  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



P14D  
F00106  
x3 110 € pcs  
x10 95 € pcs



\*Naar keuze tussen alle tips op de pagina 32, 33 et 34. Niet cummuleerbare aanbieding.

## SERVOTOME®

Hoogfrequentie elektrosurge



Ref. F57210  
Wordt geleverd met één voetschakelaar, een doos met 10 elektroden, een geleidende armband.



met een geleidende armband

Medische apparaten klasse IIb (GMED) - CE 0459

1-783 €  
**1 399 €**

## Softly™

Amalgamator voor vooraf gemeten capsules

Ref. F03160



437 €  
**375 €**



ECOLOGISCH, EENVOUDIG,  
SNEL EN HYPOALLERGEEN

Mengt al uw alginaten in 5 seconden en zonder luchtballen!



Ref. 3055.00  
Wordt geleverd met 4 schalen, 1 doseerfles, 1 spatel, 1 menger

- ▶ Mooi
- ▶ Discreet
- ▶ Eenvoudig te gebruiken
- ▶ Kleine grootte (20x24x30 cm)
- ▶ Lichtgewicht (18 kg)

## CHROMALG'X™



## PRALG'X™



€ 1 188  
**950 €**

## AIR N GO EASY

Alle klinische toepassingen kunnen makkelijk worden uitgevoerd dankzij de all-in-one airpolisher

Wordt geleverd met een omvormbaar AIR-N-GO® easy-handstuk, een SUPRA-nozzle, 1 introductiekit met zakjes van 20 g «CLASSIC»- en «PEARL»-poeder, 1 AIR-N-GO easy-onderhoudskit (extra o-ringen, spuit met siliconenvet en borstels, canule, reinigingsboor).

\*KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air en Midwest zijn geregistreerde handelsmerken.

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE 0459 -



1-276 €  
**1 100 €**

## INBERGREPEN



### BUSE AIR-N-GO® PERIO EASY

Ref. F10126

Verandert uw handstuk in een Perio-systeem voor de niet-chirurgische behandeling van parodontitis (tanden en implantaten) op pockets van 3 tot 8 mm.



OF



### BUSE AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE

Ref. F10128

Verandert uw handstuk in een systeem dat geschikt is voor parodontaal onderhoud op pockets tot 4 mm



### AIR-N-GO® «CLASSIC»-poeder

- 4 flessen van 250 g
- ▶ Pepermunt: Ref. F10250
  - ▶ Citroen: Ref. F10251
  - ▶ Framboos: Ref. F10252
  - ▶ Cola: Ref. F10253
  - ▶ Neutraal: Ref. F10254
  - ▶ 4 smaken: Ref. F10255

**86 €**

2 pakketten  
**69 €** elk



### AIR-N-GO® "CLASSIC" POEDER

50 stokjes (20g)

- ▶ Pepermunt: Ref. F10256
- ▶ Citroen: Ref. F10257
- ▶ Framboos: Ref. F10258
- ▶ Cola: Ref. F10259
- ▶ Neutraal: Ref. F10260

**99,50 €**

vanaf 2 pakketten  
**75 €** elk



## MINILED STANDARD

988-€  
**790 €**

### Uithardingslamp

Polymerisatie van elk type composiet in minder dan 12 seconden (3 mm).  
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

**Vermogen: 1 250 mW/cm<sup>2</sup>**

Ref. F02507

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 7,5 mm en een lichtschild.



## Total Protec by Riskontrol®

28,9-€  
**26 €**

Niet-steriele wegwerptips met plastic omhulsel (x 100)

 Ref. 201 750



Medische apparaten klasse I - CE

**BESCHERMING**  
20 keer minder kans op kruisbesmetting

**FLEXIBEL**  
Respect voor de anatomie van de patiënt

**DROGE LUCHT**  
gegarandeerd door twee gescheiden kanalen



## MINILED SUPERCHARGED

1-269-€  
**990 €**

### Eenvoudig en krachtig

Polymerisatie van elk type composiet in 3 seconden.  
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

**Vermogen:**

- ▶ 2 000 mW/cm<sup>2</sup> met lichtgeleider van Ø 7,5 mm
- ▶ 3 000 mW/cm<sup>2</sup> met lichtgeleider van Ø 5,5 mm

Ref. F05214

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm en een lichtschild.

## MINILED ORTHO 2

1-314-€  
**990 €**

### Snelle polymerisatie van enkele elementen tot een halve boog

4 polymerisatiecycli: 4, 8, 12 en 32 seconden.

**Vermogen: 3 000 mW/cm<sup>2</sup>**

Ref. F05220

Wordt geleverd met 1 opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm.



## Classic by Riskontrol®

49,80-€  
**29 €**

Niet-steriele wegwerptips (x 250)

 Ref. 201 664

 Ref. 201 665

 Ref. 201 666

 Ref. 201 667

 Ref. 201 668

Medische apparaten klasse I - CE



**UNIVERSEEL**  
Geschikt voor alle lucht water spuiten

**ECONOMISCH**  
Vereenvoudigd processen / Bespaar tijd

**ECOLOGISCH**  
Milieuvriendelijk

## General Manager

**Marc COLIN**  
Tel.: +32 (0) 496 529 763  
marc.colin@acteongroup.com

## Area Sales Manager Belux

**Raphaël NEF**  
Tel.: +32 (0) 472 711 580  
raphael.nef@acteongroup.com

## Area Sales Manager Imaging Benelux / Switzerland

**Eliel VICENTE**  
Tel.: +31 (0) 641 371 224  
eliel.vicente@acteongroup.com

## Imaging Sales Promoter and Technical Manager

**Kris VLEMINCKX**  
Tel.: +32 (0) 488 253 771  
kris.vleminckx@acteongroup.com

## ACTEON KLANTENSERVICE

U kunt de klantenservice van ACTEON op de volgende manieren bereiken:

### IMAGING

**PSPIX - SOPIX - CAMERAS - X MIND**  
cs@acteongroup.com  
Tel.: +33 (0) 186 656 928

**X MIND TRIUM - X MIND PRIME**  
imaging.italysupport@acteongroup.com  
Tel.: +39 (0) 331 37 67 62

### EQUIPMENT/PHARMA

sav@acteongroup.com  
Tel.: +33 (0) 556 349 163

## Verkoopadministratie

**Sabine PARIS**  
Belgium  
Tel.: +33 (0) 556 349 332  
Fax: +33 (0) 556 349 331  
sabine.paris@acteongroup.com

**Sonia AMAR**  
Luxembourg / Netherlands  
Tel.: +33 (0) 556 349 250  
Fax: +33 (0) 556 349 331  
sonia.amar@acteongroup.com

# PSPiX<sup>2</sup>

## OPTIMALE BESCHERMING TEGEN KRUISBESMETTING



- > Beschermhoes met geïntegreerd karton **beschermt tegen kruisbesmetting.**
- > De touchscreen pen **zorgt voor een hygiënischer gebruik.**
- > **Verwijderbare onderdelen** die kunnen worden gereinigd in een **thermodesinfector.**

Medische apparaten klasse I. Fabrikant: Sopro® (Frankrijk)

## OPTIONEEL

### AFNEEMBARE ONDERDELEN VOOR DE AUTOCLAAF\*

Ref. 990241

Bevat 1 autoclaveerbaar opvangbak en 1 autoclaveerbaar geleidingsstuk voor ERLM-plaatjes

thermische desinfectie bij 93°C met een temperatuurhoudtijd van 5 minuten.

\*sterilisatie bij 121°C (250°F) gedurende 30 minuten, 30 minuten droogtijd.