

VOCO HIGHLIGHTS

Praktijk

#2/21

1.10.21 - 31.3.22



... verwarm het



... flow het



... modelleer het



VisCalor en VisCalor bulk


's werelds eerste composiet met thermo-viscous-technologie

Uniek en innovatief

Door voorverwarming is het materiaal vloeidend tijdens het aanbrengen en kan onmiddellijk gemodelleerd worden (thermo-viscous-technologie)

Uitstekend hanteerbaarheid

Applicatie zonder luchtballen met een smalle en lange canule

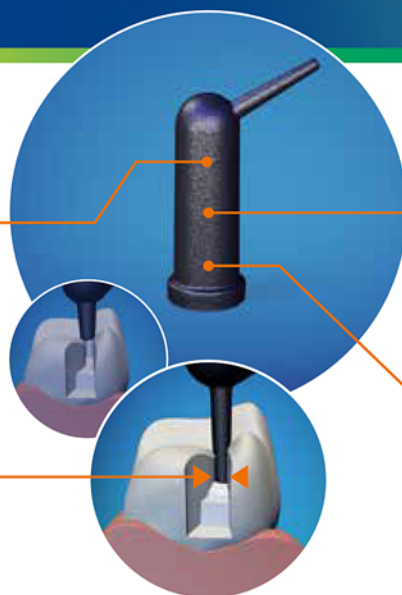

Hoge kwaliteit en duurzaam


- Optimaal vloeigedrag voor marges en ondersnijdingen
- Uitstekende fysische eigenschappen

Efficiëntie

- Combineert 2 viscositeiten in één materiaal ▶ geen materiaalwissel daardoor minder voorraad
- Geen overlay nodig

VisCalor® / VisCalor® bulk

THERMOVISKEUS UNIVERSEEL EN BULK-FILL COMPOSIT

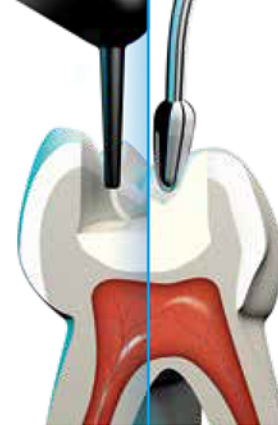

Voor een restauratie van hoge kwaliteit, vooral in diepe en nauwe caviteiten, heeft u meestal materialen nodig met verschillende viscositeiten: een vloeibaar composiet als basismateriaal en een modellerbaar en stabiel composiet. Met VisCalor is dat niet langer nodig.



Door de unieke thermo-viscous-technologie bereikt het materiaal een lage viscositeit door extraorale opwarming, waardoor de toepassing mogelijk is die lijkt op wat u gewend bent met flowables. Het materiaal vloeit optimaal op de caviteitswanden en in de ondersnijdingen. Daarna koelt het materiaal snel af tot lichaamstemperatuur, Dan wordt het hoog viskeus en kan het gemodelleerd worden als een klassieke packable composiet zonder enige vertraging.

De zeer lange en smalle canule maakt rechtstreeks aanbrengen mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, zonder luchtbellen. Met een hoge vulgraad van 83% gewichtspercenten en een zeer geringe krimp van slechts 1,4% volumeprocent is VisCalor een klasse apart onder het composietmaterialen.

U heeft de keuze: VisCalor bulk voor vullen in het posterieure gebied met diktes tot 4 mm of de nieuwe universele VisCalor voor esthetische restauraties ook in het anterieure gebied.

VisCalor

REF 6106 Set VisCalor Dispenser,
A46683 Caps 80 x 0,25 g (16 x A1,
16 x A2, 32 x A3, 16 x
A3.5), kleurenschaal, VisCalor
Dispenser

679,00 €

1.131,50 €***

REF 9143 VisCalor Dispenser –
A42684 Voorverwarm oven

799,00 €



REF 6108 Set + bonding, Caps 80 x 0,25
A46688 g (16 x A2, 16 x A3, 16 x
A3.5, 16 x OA2, 16 x Incisaal),
kleurenschaal, Futurabond U
SingleDose 20 stuks

332,50 €

416,40 €***

REF 6107 Set Caps Warmer,
A46686 Caps 80 x 0,25 g (16 x A1,
16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5),
kleurenschaal, Caps Warmer

499,00 €

785,50 €***

REF 9001 Caps Warmer –
A46685 Voorverwarm oven

453,00 €



Caps 16 x 0,25 g¹
V42685

¹ Artikelnummers van de kleurvarianten zijn terug te vinden op www.voco.dental of in de catalogus.

66,50 €

VisCalor bulk

REF 6062 Set Dispenser, Caps 80 x 0,25 g
A42683 (16 x universeel, 16 x A1,
16 x A2, 32 x A3),
VisCalor Dispenser

679,00 €

1.131,50 €***

REF 6063 Set Caps Warmer
A46687 Caps 80 x 0,25 g (16 x
universeel, 16 x A1, 16 x A2,
32 x A3), Caps Warmer

499,00 €

785,50 €***

V42685

REF 6065 Caps 16 x 0,25 g universeel
REF 6066 Caps 16 x 0,25 g A1
REF 6067 Caps 16 x 0,25 g A2
REF 6068 Caps 16 x 0,25 g A3

66,50 €

BONDING / VULMATERIALEN

Futurabond® U

Duaal uithardend universeel adhesief

- Een bonding voor alle gevallen – elk ander adhesief in de praktijk is overbodig
- Zelf-ets, selectieve-ets of total-ets: de gebruiker heeft de vrije keuze
- Uitstekende veelzijdige toepasbaarheid



A37713

REF 1571 SingleDose 50 stuks, toebehoren

71,10 € ~~100,50~~

A37671

REF 1572 SingleDose 200 stuks, toebehoren

247,50 € ~~402,00 €***~~

Admira® Fusion

Universeel nanohybride ORMOCER® composiet materiaal

- Wereldwijd het eerste volledig op keramiek gebaseerde vulmateriaal
- Met afstand de laagste polymerisatie-krimp en bijzonder lage krimpspanning in vergelijking met alle conventionele composieten
- Inert, dus excellente biocompatibel en uiterst kleurvast
- Uitstekend te verwerken. Eenvoudige hoogglans polijstbaarheid en hoge oppervlaktehardheid garanderen eersteklas lange termijn resultaat

Geen klassieke monomeren, geen restmonomeren



REF 2750

A39593

Set + bonding spuitje 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kleurschaal + Futurabond U SingleDose 20 stuks

REF 2780

A39649

Set + bonding Caps 75 x 0,2 g (15 elk A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kleurschaal + Futurabond U SingleDose 20 stuks

211,50 € ~~336,90 €~~

V39586

Spuitje 3 g¹

V39585

Caps 15 x 0,2 g¹

¹ Artikelnummers van de kleurvarianten zijn terug te vinden op www.voco.dental of in de catalogus.

Promo per 3 : **53,55 €** ~~64,60~~

Admira® Fusion Flow

Flowable lichtuithardend nanohybride ORMOCER® composiet materiaal



REF 2816

A40016

Set spuitje 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) kleurschaal, toebehoren

142,50 € ~~203,90 €~~

V39985

Spuitje 2 x 2 g, diverse kleuren¹

64,80 € ~~74,20~~

Admira® Fusion x-tra

Nanohybride ORMOCER® composiet materiaal, 4 mm



REF 2810

A39704

Spuitje 3 g universeel

REF 2811

A39597

Caps 15 x 0,2 g universeel

54,00 € ~~64,60~~

Admira® Fusion x-base

Flowable nanohybride ORMOCER® basis, composiet materiaal, 4 mm



A41247

REF 2812 Spuitje 2 x 2 g universeel

74,20 €

GrandioSO

Flowables

Don't just go with the flow. Kies de juiste flow!



Grandio®SO Light Flow

Flowable nano-hybride composiet materiaal – lage viscositeit

- Nauwkeurige applicatie dankzij de extra dunne canule en daardoor uitermate geschikt voor moeilijk bereikbare plekken en kleine caviteiten



REF 2585 Set spuitje 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kleurenschaal, toebehoren
A32018

152,70 € 223,65 €***

Grandio®SO Flow

Flowable universeel nano-hybride composiet materiaal – medium viscositeit

- Met uitstekend flow gedrag, universele toepassingen en nauwkeurige applicatie



REF 2720 Set spuitje 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kleurenschaal, toebehoren
A35264

152,70 € 223,65 €***

Grandio®SO Heavy Flow

Flowable universeel nano-hybride composiet materiaal – hoog viskeus

- Verhoogde stabiliteit, geen ongewenst weglopen van het materiaal en universele toepassing



REF 2680 Set spuitje 5 x 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), kleurenschaal, toebehoren
A34623


152,70 € 223,65 €***

BEVESTIGEN

Bifix® Hybrid Abutment

Op composietbasis universeel dualuithardend bevestigingsmateriaal voor intra- en extraorale toepassingen

- Alles-in-één – permanente bevestiging van alle bekende tandheelkundige materialen
- Hoogste flexibiliteit – intraorale applicatie in de praktijk en extraoraal in het laboratorium
- Hoog esthetisch – de perfecte maskering van donkere ondergronden door hoog opaque kleuren
- Met Try-In pasta's – nauwkeurige kleursimulaties voor hybride abutments, abutment kronen en stomp behandelingen

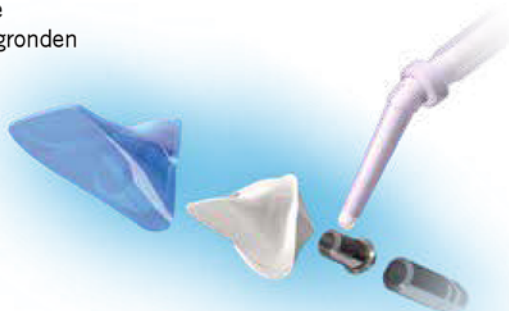

REF 2995 Implant set mixed – overeenkomend met REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x QuickMix spuitje 10 g, 3 x Try-In spuitje 2,5 g, toebehoren)
A45029

389,00 € 562,80 €***

V46607

REF 2411 QuickMix spuitje 10 g (universeel HO)
REF 2412 QuickMix spuitje 10 g (wit HO)
REF 2413 QuickMix spuitje 10 g (translucent)
+ elk incl. Try-In spuitje 2,5 g, toebehoren

159,00 €

REF 2410 Implant set QuickMix spuitje 10 g (universeel HO), Try-In spuitje 2,5 g, Ceramic Bond flesje 5 ml, Futurabond U SingleDose 5 stuks, toebehoren
A48606

199,00 € 244,80 €***

PROPHYLAXIS

Bifluorid 10®

Fluoride lak voor de behandeling van dentale gevoeligheid

- Direct desensibiliserend
- Vorming van een bescherm laag tegen thermische en mechanische invloeden
- Transparant – geen verkleuring van de elementen
- Speciale vernislaag versterkt het lange-termijn effect en diepe fluoridatie
- Bleaching compatible, verminderen van gevoeligheid zonder nadelig effect van het bleaching proces

Ideaal voor orthodontische behandelingen en bleekbehandelingen



A34636

REF 1615 Flesje 4 g, Solvent flesje 10 ml

78,30 €

A30188

REF 1616 Flesje 10 g

115,80 €

REF 1617
A46683

Flesje 3 x 10 g,
Solvent flesje 10 ml,
Pele Tim No. 1

328,80 € 404,30 €***

A31219

REF 1618 SingleDose 50 stuks, toebehoren

75,10 €

A32927

REF 1619 SingleDose 200 stuks, toebehoren

227,80 € 300,40 €***

Applicatie



VOCO Profluorid® Varnish

Fluoride-houdende dentale desensibiliserings lak (5 % NaF)

- Snelle desensibilisering en fluoride-afgifte (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluoride)
- Gemakkelijk aan te brengen – vochtigheidstolerant
- Beschikbaar in zeven aangename smaken
- Economische applicatie in dunne lagen, hoog resultaat
- Estetische lak



SingleDose 50 x 0,40 ml V34613

Meloen REF 1269	Karamel REF 2226	Kersen REF 2227
--------------------	---------------------	--------------------

Mint REF 2228	Bubble Gum REF 2238	Cola Lime REF 2240
------------------	------------------------	-----------------------

Pina Colada
REF 2242

107,20 €

SingleDose 200 x 0,40 ml V39025

Meloen REF 1271	Karamel REF 2229	Kersen REF 2230
--------------------	---------------------	--------------------

Mint REF 2231	Bubble Gum REF 2239	Cola Lime REF 2241
------------------	------------------------	-----------------------

Pina Colada
REF 2243

316,00 € 428,80 €***

A34612

SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed REF 2225

107,20 €

Bevat alle smaken

Applicatie



AFDRUKMATERIALEN

VOCO Retraction Paste

Samentrekkende pasta voor een effectief tijdelijk openen en droogleggen van de sulcus

- Dunne canule met flexibele tip – Eenvoudig en exacte applicatie in de sulcus
- Viscosity change – cosistentie van de pasta verandert tijdens de applicatie en de verwijding van de sulcus
- Goede zichtbaarheid – sterk contrast t.o.v. de gingiva
- Een schoon product – snel en eenvoudig af te spoelen

NIEUW



Eenvoudig aan te brengen in de sulcus

A45965

REF 1012 Caps 25 x 0,3 g

62,50 €

A46323

REF 1013 Caps 100 x 0,3 g

187,50 € ~~250,00 €***~~

V-Posil

Precisie afdrukmetaal, VPS

- Zéér hydrofiel A-silicone voor ultieme precisie
- Lange verwerkingstijd extra-oraal, korte verblijfsduur intra-oraal
- Hoge scheurvastheid en hoge elasticiteit bieden veiligheid bij en na het verwijderen
- Goede hydrofilie, zelfs in uitgeharde toestand, maakt het gieten en daarmee de prothetische restauratie perfect



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



NIEUW
V-Posil Putty Soft Fast

Starterset Putty Fast / Light Fast

REF 2991 A42810

Putty Fast Cartridge 2 x 380 ml

Light Fast Cartridge 2 x 50 ml

Starterset Heavy Soft Fast / Light Fast

REF 2985 A41215

Heavy Soft Fast Cartridge 2 x 380 ml

Light Fast Cartridge 2 x 50 ml

Starterset Mono Fast / Light Fast

REF 2987 A41459

Mono Fast Cartridge 2 x 380 ml

Light Fast Cartridge 2 x 50 ml

228,00 € ~~269,10 €***~~

Starterset Putty Fast / Light Fast

REF 2984 A41233

Putty Fast Potje 2 x 450 ml

Light Fast Cartridge 2 x 50 ml

Starterset Putty Soft Fast / Light Fast

REF 2904 A46690

Putty Soft Fast Potje 2 x 450 ml

Light Fast Cartridge 2 x 50 ml

136,00 € ~~160,40 €***~~

*Als u via de VOCO vertegenwoordiger 5 verpakkingen Admira Fusion / Admira Fusion Flow / Admira Fusion x-tra / Admira Fusion x-base bestelt, krijgt U 20 % korting.

Vergeleken met individuele aankoop *Totaal prijs per stuk