


TRAITEMENT CANALAIRE

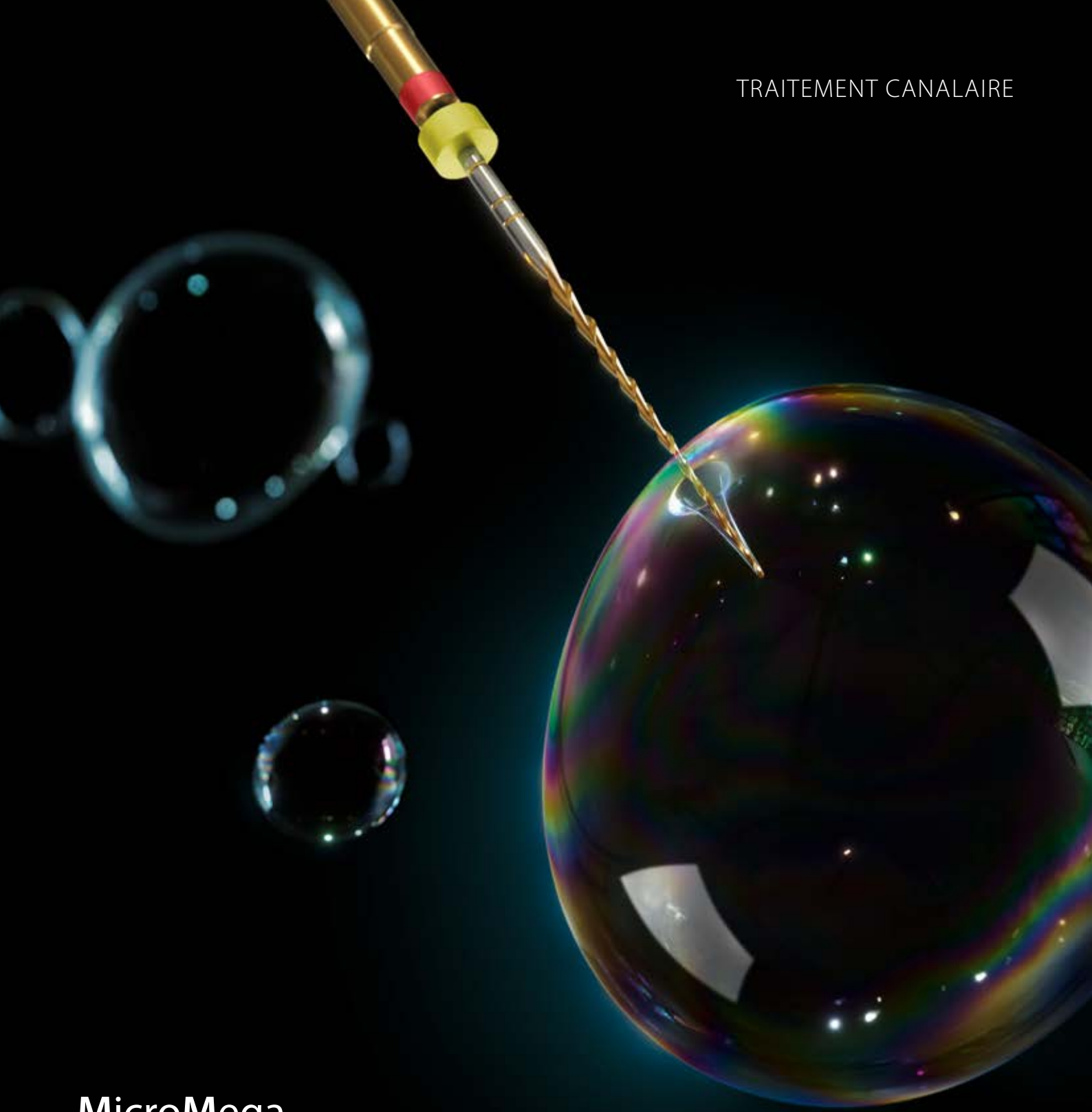

MicroMega

One Curve mini


Préparation endodontique conservatrice

micromega.coltene.com

 COLTENE

- Préservation de la dentine péricervicale
- Élimination d'un minimum de structure dentaire¹
- Respect de l'anatomie canalaire²
- Création d'un espace optimal pour une désinfection en profondeur et une obturation adéquate

Protocole MicroMega One Curve mini 25/.06*

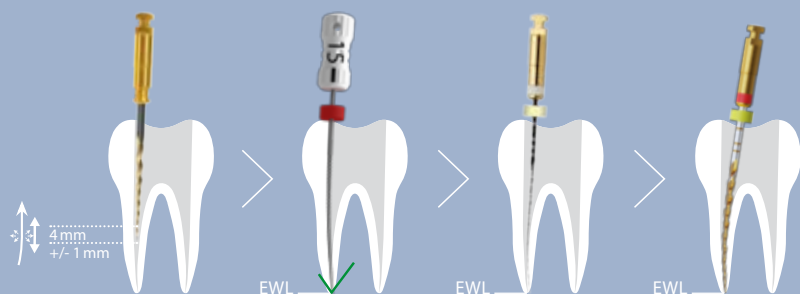

MicroMega :	One Flare	K-File	One G	One Curve mini 25/.06
Vitesse de rotation :	250-400 t/min	N/A	250-400 t/min	300-450 t/min
Couple max. :	3 N.cm	N/A	1,2 N.cm	2,5 N.cm

Complétez votre procédure de traitement à l'aide de pointes de gutta-percha et de papier appropriées.

Caractéristiques

- Revoir formulation
- Ø 1 mm
- Traitement thermique C.Wire
- Efficacité de coupe
- Lime unique, usage unique
- Blister stérile
- 3 longueurs : 21, 25, 31 mm
- Tailles 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04

Références

MicroMega One Curve mini, 5 pièces/boîte (B5)

60030021	B5 One Curve mini N25 4% L25 Sterile	
60030022	B5 One Curve mini N25 6% L25 Sterile	
60030023	B5 One Curve mini N35 4% L25 Sterile	
60030024	B5 One Curve mini N45 4% L25 Sterile	
60030034	B4 One Curve mini L25 Assorted Sterile	

(1) Survey analysis "Minimally Invasive", Caroline Dort, 2022-01-13

(2) Evaluation of Canal Transportation and Centering Ability of 4 Heat-Treated Nickel-Titanium Systems, JOE, 2020 May;46(5):675-681.doi: 10.1016/j.joen.2020.01.020. Epub 2020 Mar 11., Christina Razcha, Athanasios Zacharopoulos, Dimitris Anestis, Georgios Mikrogeorgis, Gianni Zacharakis, Kleoniki Lyroudia

* Extrait de la notice d'utilisation. Lire la notice avant utilisation.



Pour plus d'informations sur MicroMega One Curve mini, veuillez scanner le code QR.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
 12 rue du Tunnel
 FR-25000 Besançon
 T +33 3 81 54 42 42
 commercial@micro-mega.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 CH-9450 Altstätten
 T +41 71 757 5300
 info.ch@coltene.com

MicroMega One Curve mini | Publicité
 Année du marquage CE : 2021 | Dispositif médical de classe IIa conformément à la directive 93/42/EEC
 Organisme notifié : GMED. Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale | Voir l'étiquetage du produit et la notice.



COLTENE