

KaVo ESTETICA™ E30

Fabriqué en Allemagne, fabriqué pour vous



Votre position de travail est confortable et détendue grâce à l'ajustement de la hauteur du fauteuil du patient – entre 350 et 830 mm – qui garantit que vous travaillez de manière ergonomique dans toutes les positions de traitement.



Si vous appréciez la qualité « Made in Germany », vous adorerez votre nouveau KaVo ESTETICA E30 !

Cherchez-vous un fauteuil dentaire facile à utiliser qui vous offre qualité, fiabilité et efficacité ? Le voici : Le KaVo ESTETICA E30 combine commodité et efficacité dans le cadre de votre charge de travail quotidienne. Technologie judicieuse et fonctions de service intégrées garantissent un fonctionnement rentable. Nous appelons cela l'essence de l'Excellence dentaire pour un prix d'entrée de gamme abordable. Vous allez simplement penser : je l'adore !

Principaux atouts en un seul coup d'œil :

Élément praticien et assistante

1. Une technologie KaVo qui a fait ses preuves et un concept d'utilisation simple
2. Configurable individuellement pour s'adapter à vos besoins
3. Unité de traitement ambidextre (en option)

Le fauteuil du patient

4. Design épuré du fauteuil
5. Forme douce et ergonomique de l'assise
6. Poids maxi du patient : jusqu'à 180 kg
7. Position la plus basse : 350 mm, position la plus haute : 830 mm

Communication avec le patient

8. KaVo ERGOcam One*, la caméra intraorale facile à utiliser
9. Écran à haute résolution : KaVo Screen One 19"
10. CONEXIO combine le logiciel de gestion du patient, une archive de rayons X en 2D et des images intraorales en direct selon un concept de fonctionnement sans équivalent.

* Produit non présenté sur l'image

Vous apprécierez d'avance votre prochain traitement.


Fiez-vous à votre intuition – votre élément praticien le fait également.

Tout est installé sur votre élément praticien à l'endroit où vous vous attendez intuitivement à le trouver. Le concept d'exploitation est clair et simple. Utilisez des boutons directs et le simple schéma de couleurs de KaVo pour gérer facilement et rapidement les pièces à main, le fauteuil du patient et l'éclairage.

L'élément praticien peut être configuré individuellement en fonction de vos besoins techniques. Il propose cinq positions d'instrument et un porte-plateau qui peut être installé soit à droite, soit à gauche de l'unité.

Élément praticien et configuration – vos avantages en un seul coup d'œil

- Commande facile des fonctions grâce aux boutons directs et au clavier tactile intuitif.
- Toutes les informations sont disponibles en un seul coup d'œil sur l'écran intégré
- Procédures de traitement rapide et posture détendue, puisque vous n'avez qu'une courte distance à franchir pour accéder à tout

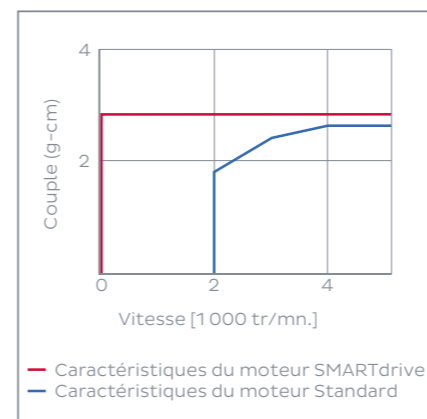

Avec le SMARTdrive, vous vous y habituez rapidement.

L'utilisation du moteur SMARTdrive crée des conditions de travail précises, efficaces et qui vous font gagner du temps, au couple maxi et avec des caractéristiques de démarrage exempts de vibrations, même dans la plage de vitesse basse de 100 tr/min. En raison de la plage de vitesse plus large de 100–40 000 tr/min, toutes les pièces à main droites et à contre-angle peuvent être utilisées d'une manière plus polyvalente, ce qui élargit la gamme d'applications de chaque pièce à main.

Version cordon pendant – gagnez de l'espace.

L'élément praticien compact apporte la liberté de mouvement requise pour vos procédures de traitement individuelles et une position corporelle saine et naturelle.



Version à fouet – accès facile à vos pièces à main

Les pièces à main parfaitement équilibrées sont positionnées immédiatement et en toute sécurité dans votre main. La longueur généreuse des cordons vous apporte la flexibilité requise pour positionner votre élément praticien à l'endroit où il est le plus commode pour vous.



Découvrez la flexibilité – dans tous vos traitements.


Des fonctions ergonomiques pour chaque traitement : un encombrement de la tablette réduit de seulement 45 cm diminue le risque d'interférence avec le scialytique ou d'autres dispositifs, et des fouets équilibrés avec une longueur de cordon de 90 cm offrent une agréable liberté de mouvement.




KaVo ESTETICA E30 : pleinement adaptable à vos besoins

C'est toujours difficile d'être gaucher dans un monde où tout est fait pour les droitiers. Par conséquent, le KaVo ESTETICA E30 est conçu comme une unité de traitement permettant de travailler des deux côtés. Le KaVo ESTETICA E30 peut être aisément modifié en moins de deux minutes d'une utilisation de gauche à droite vers une utilisation de droite à gauche (en option). Le KaVo ESTETICA E30 est un partenaire fiable, en chirurgie, à l'hôpital, à l'université, ou quel que soit votre lieu de travail.

Modifiable en seulement 2 minutes

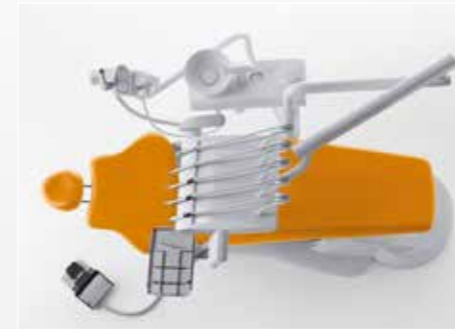

Idéal pour les opérateurs droitiers ...

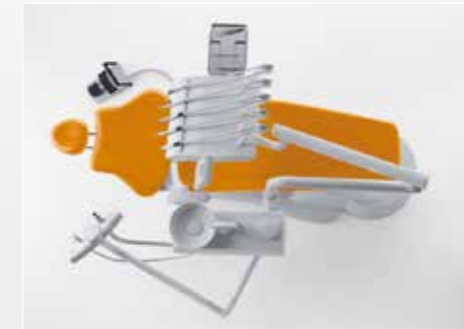

... et pour les opérateurs gauchers



Vos patients vous adoreront pour cela.

La position idéale pour vos patients

Permettez à vos patients plus lourds d'être positionnés en sécurité et confortablement sur le fauteuil du patient. Votre patient bénéficie d'une position couchée confortable. C'est aussi avantageux pour vous : vous pouvez travailler beaucoup plus efficacement.



L'assise est à la fois ergonomique et confortable.



L'appuie-tête à double articulation peut être ajusté rapidement et de manière souple par un simple mouvement.




Plus besoin de vos mains avec la commande au pied KaVo.

Gérez avec le pied toutes les fonctions du fauteuil et des instruments – vos mains seront libres de travailler de manière hygiénique sur la bouche du patient. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre travail pendant que vos jambes restent dans une position confortable.

Ergonomique et détendu grâce au mouvement droite/gauche

Votre assistante a tout sous contrôle et à portée de main.

Son ample plage de pivotement rend l'élément assistante du KaVo ESTETICA E30 toujours facilement accessible et garantit un travail confortable et sans problèmes. Le corps compact de l'appareil, qui peut être pivoté de 60°, permet à tout moment à votre assistante un accès optimal et ergonomique au patient.

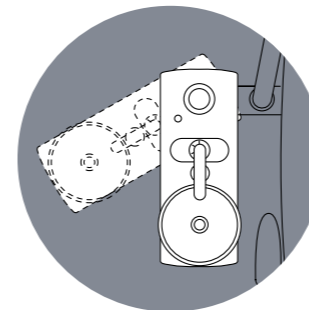

Le crachoir en option, qui est pivotant – sur environ 225° – accroît le confort de votre assistante et de vos patients.



Élément assistante – facile à utiliser grâce au boutons de sélection directe

Ajoutez une touche de couleur à votre cabinet.

Le teintier KaVo offre une polyvalence maximale pour s'adapter à votre style individuel et se distingue par un blanc dentaire lumineux du corps de l'unité.


Couleurs du garnissage



CONEXIO joint ensemble ce qui va ensemble.



Quelle que soit votre intention, CONEXIO la rend possible. Vous pouvez gérer la communication avec votre patient depuis l'élément praticien et ajouter directement de nouvelles images au dossier numérique du patient.

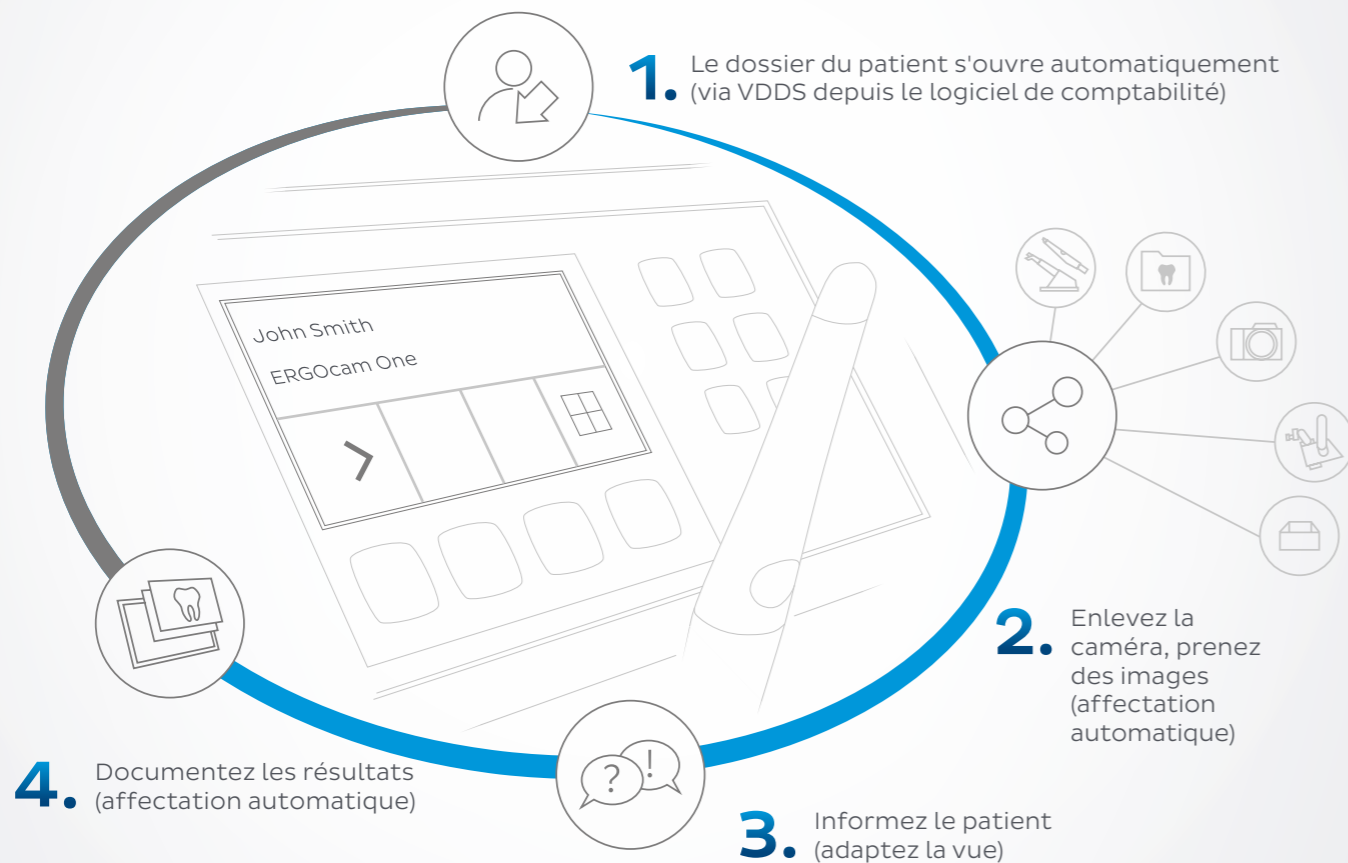

ONE
EFFICACE.
FLUX DE TRAVAIL

Commutez du mode de traitement vers le monde des images numériques et revenez en arrière par un seul clic sur l'élément praticien. CONEXIO simplifie le flux de travail du praticien, sans qu'une souris ou un clavier ne soit nécessaire.



Tout simplement net

Impressionnez vos patients avec des images d'une netteté spectaculaire. L'écran affiche une qualité d'image à haute résolution, des valeurs de contraste convaincantes et une brillante reproduction de couleurs. Des caractéristiques d'hygiène améliorées sont garanties par le panneau de verre de protection, des fentes étroites et un ajustement d'une seule main.

KaVo Screen One – la version de haute qualité en HD

- Écran plat HD-True
- Rapport hauteur/largeur : 16:9
- Diagonale d'écran : 19 pouces



Toujours à l'avant-garde

Sa technologie sophistiquée moderne fait du KaVo ESTETICA E30 un investissement rentable – dès à présent et pour l'avenir. Pour garder votre logiciel KaVo ESTETICA E30 à jour, des mises à jour ou des extensions peuvent être téléchargées efficacement via une mise à jour logiciel centralisée.

Absolument propre et parfaitement protégé

Le nettoyage approfondi et fiable de votre KaVo ESTETICA E30 est facile. Le fait que les composants tels que la cuvette du crachoir, le bras pivotant et le tapis en silicone sont amovibles, est important pour une hygiène rapide et améliorée. Le remplacement commode du filtre et des surfaces faciles à nettoyer garantissent l'efficacité de l'hygiène et permettent un gain de temps appréciable.



Made in Germany – voilà pourquoi vous pouvez compter dessus.
Ne courez aucun risque avec le KaVo ESTETICA E30 et appuyez-vous sur la qualité « Made in Germany ».



Des objectifs ambitieux pour votre hygiène chirurgicale.

Le KaVo ESTETICA E30 répond aux strictes exigences du DVGW. La fonction de réduction permanente des germes avec la bouteille d'eau et KaVo OXYGENAL 6 garantit la sécurité hygiénique pendant le fonctionnement quotidien. Pour une hygiène encore plus poussée, utilisez la décontamination intensive intégrée.

Utilisées en combinaison, ces deux fonctions assurent la réduction permanente des pathogènes.




Une hygiène sûre avec la réduction intensive supplémentaire des germes et KaVo OXYGENAL 6



La protection parfaite de votre investissement à tout moment

La haute qualité de ses composants, sa flexibilité et les fonctions d'entretien efficaces garantissent la longue durée de vie utile du KaVo ESTETICA E30.

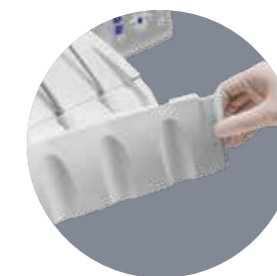

La désinfection sans compromis est rendue possible par des composants amovibles, tels que le tapis en silicone, les supports d'instruments et le bol du crachoir, ainsi que par le changement facile du filtre.



Pour le bien de l'environnement – nettoyage et désinfection efficaces avec DEKASEPTOL

Le gel de désinfection biodégradable DEKASEPTOL est un moyen efficace et fiable pour assurer l'hygiène quotidienne des systèmes d'aspiration.

La gamme Essential – efficacité et fiabilité



Éclairage opératoire MAIA LED*

- Technologie LED pour une perception naturelle des couleurs
- Positionnement flexible et facile
- Intensité lumineuse jusqu'à 35 000 lux avec possibilité de faire varier l'intensité lumineuse



Micromoteur INTRA LUX KL 701

- 100 - 40 000 tr/min
- Concept de moteur sans collecteurs pensé pour faciliter l'entretien pour une fiabilité élevée



Détartreur ultrasonique PIEZOsoft

- Technologie des ultrasons pour des résultats optimaux du traitement
- Nettoyage dentaire efficace et extrêmement précis, par vibrations linéaires contrôlées
- 3 inserts différents



Pièce à main à triple fonction One

- Canule amovible et stérilisable

La gamme Evolution – confort et technologie novatrice



Éclairage opératoire KaVoLUX 540 LED

- Lumière naturelle de qualité naturelle grâce à un système optique sans équivalent avec des LED de différentes couleurs jusqu'à 40 000 lux
- Champ lumineux uniforme, défini avec précision et dépourvu d'ombres, avec réglage de la couleur d'éclairage (°K)
- Durcissement fortement retardé du matériau de comblement grâce au mode COMPOsave™ novateur



Micromoteur INTRA LUX KL 703

- 100 - 40 000 tr/min
- Travail commode et sans fatigue grâce à une réduction de 30 % du poids**
- Manipulation optimale grâce au centre de gravité parfaitement équilibré (design plus compact de 25 %**)
- Concept de moteur sans entretien dépourvu de collecteurs, ainsi qu'une technologie LED pour une longue durée de vie utile.
- Le mode endo peut être intégré de manière optionnelle pour un flux de travail amélioré



Détartreur à ultrasons PiezoLED

- Fonction de feed-back intelligentes pour une sortie de puissance contrôlée
- Technologie LED
- 4 courbes de sortie différentes pour le traitement endo
- Assortiment complet d'inserts



Pièce à main à triple fonction

- La canule et le manchon de préhension peuvent être déposés et stérilisés
- Maniement optimal



Options supplémentaires



Lumière de durcissement Poly One

- Technologie LED avec une intensité minimale de 800 mW/cm²
- Lumière de durcissement réglable



Lumière de durcissement Satelec MiniLED

- Technologie LED avec une intensité minimale d'environ 1250 mW/cm²
- 3 programmes différents : standard, mode d'impulsions et « soft start »



Détartreur à ultrasons SONICflex

- Grande polyvalence grâce à plus de 50 inserts. Idéal pour la prophylaxie, l'endodontie, la périodontie, le traitement minimalement invasif des caries, la chirurgie et la préparation

Options d'équipements

Fauteuil du patient TM S

Sellerie souple	●	●
Position de Trendelenburg	●	●

Dossier

Dossier Progress	●	●
------------------	---	---

Appuie-tête

Bouton rotatif pour appuie-tête à double articulation	●	●
---	---	---

Accoudoir

Gauche	○	○
Droit	○	○

Élément praticien

Raccordement à l'air pour les instruments	○	○
Unité à turbine LUX	○	○
Micro-moteur INTRA LUX KL 701	○	○
Micro-moteur INTRA LUX KL 703 LED™	○	○
Pièce à main à triple fonction One	●	●
Pièce à main à triple fonction SMARTdrive™	●	●
Commande intégrée du couple (Endo)	○	○
Détartreur à ultrasons PIEZOsoft	○	○
Détartreur à ultrasons PiezoLED™	○	○
Détartreur à ultrasons SONICflex™	○	○
Support de plateau pour plateau US	○	○
Support de plateau pour 1 seul plateau standard	○	○
Support de plateau pour 2 plateaux standard	○	○

Élément assistante

Aspiration du brouillard de spray	○	○
Éjecteur de salive	○	○
Aspiration du brouillard de pulvérisation ¹	●	●
Éjecteur de salive ¹	●	●
Pièce à main à triple fonction One	○	○
Pièce à main à triple fonction	○	○
Lumière de durcissement Poly One	○	○
Lumière de durcissement Satelec MiniLED	○	○
Support pour porte-plateau	○	○
Élément d'assistante pivotant	●	●

● Équipement standard ○ Équipement en option x Doit être sélectionné

1. Avec aspiration humide à écoulement direct et aspiration humide externe
2. Avec Venturi et système d'aspiration externe
3. Avec bouteille d'eau DVGW

Corps d'appareil TM S

Cuvette crachoir en porcelaine	●	●
VACUstop ²	●	●
Réduction permanente des germes ³	●	●
Bouteille décontamination Intensive, manuelle	○	○
Crachoir pivotant	○	○
Chauffe-eau	○	○

Système d'alimentation

Bloc d'eau, compact	●	●
Avec bouteille d'eau DVGW	○	○

Système d'évacuation

Système d'aspiration Venturi	x	x
Aspiration humide avec écoulement direct	x	x
Aspiration humide externe	x	x

Divers

KaVo PHYSIO Evo	○	○
KaVo PHYSIO One	○	○
Convertible gauche/droite	○	○
Mise à jour logicielle centralisée	●	●
Éclairage opératoire MAIA LED	○	○
Éclairage opératoire LED KaVoLUX™ 540	○	○
Adaptateur pour barre de fixation de l'éclairage	○	○
Boîtier de service patient	○	○
Gel DEKASEPTOL	○	○
Pack hygiène	○	○

Communication avec le patient

KaVo Screen One	○	○
CONEXIO™	○	○
Caméra intraorale KaVo ERGOcam™ One	○	○