



**LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX:
NOTRE SAVOIR FAIRE DEPUIS 1957**




CATALOGUE SECTEUR: DENTISTE

QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale, le Laboratoire Huckert's International développe et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totalemtent sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La réussite de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et sur un équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.

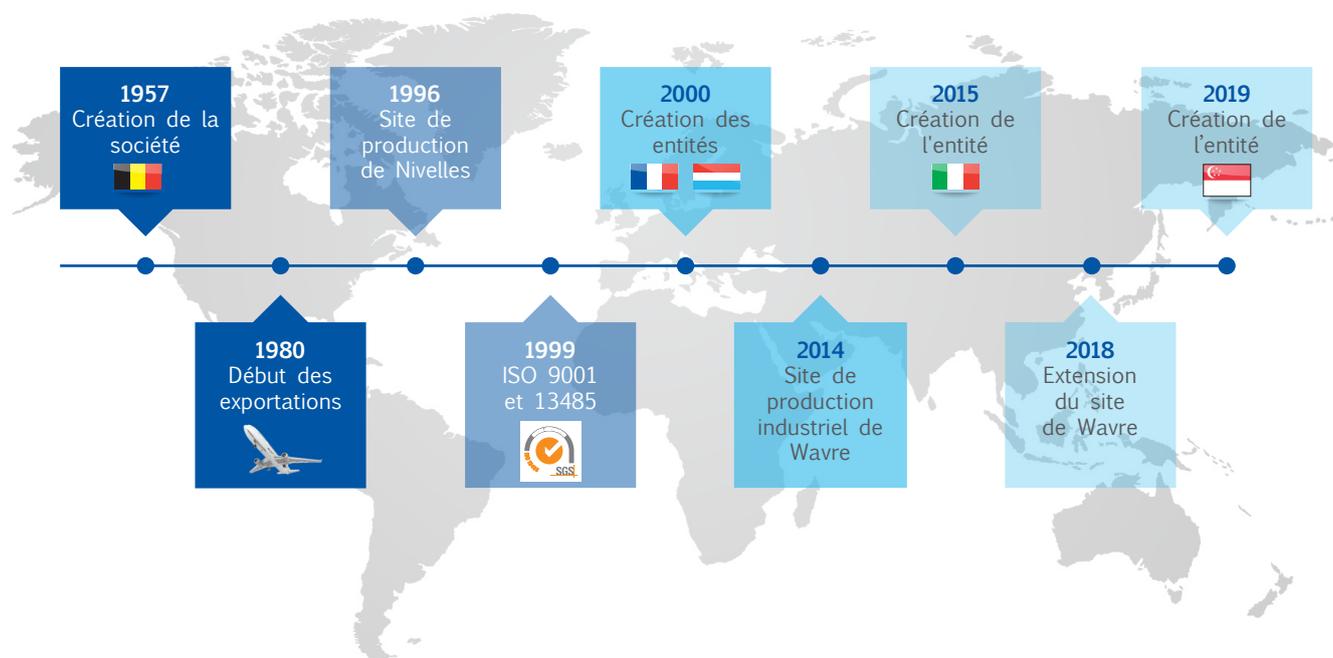

POURQUOI DÉSINFECTER ?



POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée peut engendrer une contamination croisée fongique, virale ou bactérienne, et être à la source d'une infection.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées avant chaque intervention. Seul un contrôle méticuleux peut garantir cette sécurité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : Des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisations, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **Alcool, Javel, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

NOTRE MISSION

Expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un risque biologique par un danger chimique* ”



RESPECTUEUX DE
L'OPÉRATEUR



RESPECTUEUX DU
MATÉRIEL



RESPECTUEUX DU
PATIENT



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique.**

pH
neutre

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos Biocides selon les mêmes exigences que nos Dispositifs Médicaux.** L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012.**

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nous recherchons avant tout à faire adhérer nos collaborateurs à nos **Valeurs d'Entreprise Familiale. Qualité, santé, éthique sont au coeur de toutes nos démarches.**

Allant du caractère non nocif de nos produits pour L'OPM (Opérateur, Patient, Matériel) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Afin de maîtriser les risques environnementaux, nous suivons **la voie de l'amélioration continue** car rien n'est jamais acquis. Nous **analysons, évaluons, estimons et améliorons l'impact sur l'environnement.**



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Respectueux de l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales.**
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action.**
- ✓ Des vaporisateurs prêts-à-l'emploi **sans gaz propulseur.**
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages issus d'un **PE green*** avec une **empreinte carbone négatives**, et entièrement **recyclables.**
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés.**
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMATIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE*



**CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!**

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**



* Sous réserve de disponibilité de la matière première.



Non toxique



Ininflammable



Sans vapeur
dangereuse

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH
neutre**

✓ **FORMULE SANS**



- COMPOSANT CMR
- PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes.** Les **concentrations d'utilisation sont faibles.** Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

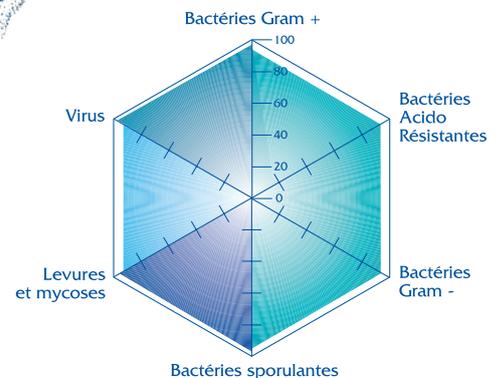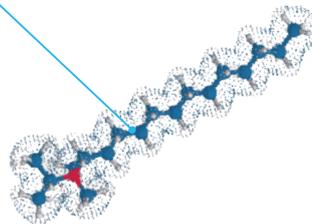

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est, en 2023, en cours de procédure de certification au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau Règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

La mise en conformité du Laboratoire Huckert's International dans le but d'obtenir cette certification permet donc la garantie de désinfectants dispositifs médicaux encore plus qualitatif que précédemment.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE		RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1	ESSAI DE SCREENING 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
	ESSAI EN SUSPENSION 	99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★★ Validation limitée
	ESSAI EN CONDITION SÈCHE 	99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation proche des conditions pratiques
	ESSAI EN CONDITIONS PRATIQUES 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★★★★ Validation en condition pratique

NORME CADRE EN 14885 : 2022

EN = Standard Normatif Européen

EN XXX = DM/Instruments

EN XXX = Biocides

EN XXX = Action mécanique

NA = Non Applicable

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**




**TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES**



STABLES



ININFLAMMABLES

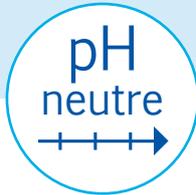

NON CORROSIFS



**SANS VAPEUR
DANGEREUSE**




NON POLLUANT



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES

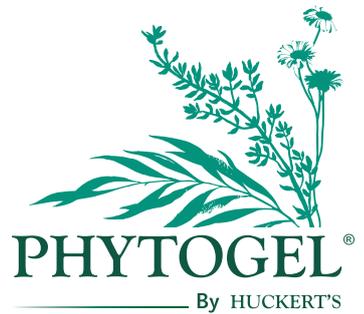

NON POLLUANT



**TEXTURE NON
COLLANTE**



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARI LES PLUS
SÉCURITAIRES



**USAGES
FRÉQUENTS**



**POUR TOUTE
LA FAMILLE**



**TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT**



**PARFUM 100%
NATUREL**



PEAUX FRAGILES



**FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES**

AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



La cavité buccale peut être le réservoir de microorganismes pathogènes et opportunistes pouvant présenter un risque de contamination croisée et d'infection systémique.

Les actes de chirurgie dentaire ou d'odontologie, particulièrement invasifs, font partie des chirurgies les plus à risque et le développement d'actes comme la parodontie ou l'implantologie nécessitent une attention accrue sur les procédures d'hygiène et de désinfection.

Les agents pathogènes peuvent transiter par le patient lui-même (salive, sang), le personnel (principalement par les mains), une surface, l'unité de soin (aérosols), un dispositif ou un instrument incorrectement désinfecté.

Par ailleurs, si un transfert d'agents pathogènes est généralement perçu et pris en compte dans le sens personnel/cabinet vers le patient, il est également important de prendre en compte le risque d'exposition du personnel ou du praticien via un patient porteur.

Dans un secteur très concurrentiel, il est essentiel de s'attarder sur les normes et les réelles performances, et de prendre en compte le risque chimique de produits utilisés au quotidien.



Finis les produits corrosifs et dangereux, **UMONIUM^{38®}** vous permet d'améliorer et de simplifier vos procédures d'hygiène et de désinfection de façon totalement sécuritaire pour l'ensemble de l'équipe, de vos équipements les plus sensibles et dans le respect d'une démarche environnementale.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM³⁸
EQUIPMENTS



Dispositif Médical Classe IIa



UMONIUM³⁸
MEDICAL SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
MEDICAL TISSUS



Dispositif Médical Classe IIa



UMONIUM³⁸
MASTER



Biocide TP2

SURFACES ET ÉQUIPEMENTS

SOL

Issus de la **chimie fine**, nos détergents-désinfectants **aux huiles essentielles** vous assurent une **désinfection de haut niveau** avec des **temps de contacts courts**, des **procédures simples** et des **dosages économiques**. Nos dispositifs médicaux sont conformes à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4) et nos biocides sont conformes à la nouvelle réglementation Européenne **Biocide N°528/2012**.

Parfaitement compatibles avec un usage quotidien, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES EN MATIÈRE VÉGÉTALE*



POUVOIR DÉSODORISANT GRACE AUX HUILES ESSENTIELLES

Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Mobiliers
- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 10 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml et 1L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Décontamination des empreintes
- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 5 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 (20 x 20 cm) et 95 lingettes (15 x 15 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Tablettes techniques
- ✓ Scialytique
- ✓ Fauteuil de soins
- ✓ Équipements et dispositifs médicaux non immergeables
- ✓ Matériel d'imagerie

TEMPS DE CONTACT

 5 secondes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L, 5L, 25L, 200L et 1000L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Carrelages
- ✓ Sols PVC
- ✓ Résines et bétons cirés
- ✓ Revêtements calcaires
- ✓ Parquets

TEMPS DE CONTACT

 15 minutes.



UMONIUM³⁸
STERILY

ÉTAPE 1
NETTOYAGE &
PRÉ-DÉSINFECTION



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
INSTRUMENTS

ÉTAPE 2
DÉSINFECTION
DE HAUT NIVEAU



Dispositif Médical Classe IIb

INSTRUMENTS

Véritables alternatives aux produits enzymatiques, acides et alcalins, **UMONIUM³⁸ STERILY** et **UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS** s'utilisent conjointement pour les phases de pré-désinfection et de désinfection de l'instrumentation.

Conformes à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4), **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**, ils ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*



FORMULE NON COAGULANTE
EFFICACE EN PRÉSENCE
DE MATIÈRES ORGANIQUES

— Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat —

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% pour une application manuel (trempage + brossage) ou en bain à ultrasons.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée.

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET PRÉ-DÉSINFECTION)

- ✓ Instrumentations
- ✓ Instrumentation rotative
- ✓ Crachoirs
- ✓ Séparateur d'amalgames
- ✓ Aspiration semi-automatique

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Instrumentations
- ✓ Instrumentation rotative
- ✓ Crachoirs
- ✓ Séparateur d'amalgames
- ✓ Aspiration semi-automatique

TEMPS DE CONTACT



10 minutes.



UMONIUM³⁸
air control &
AIR CONTROL MATIC



DESTRUCTEUR DE MAUVAISES ODEURS

À base d'huiles essentielles sélectionnées, **UMONIUM³⁸ air control** combat radicalement les mauvaises odeurs.

Chaque flacon de 100 mL contient l'équivalent d'au moins 20 kg de plantes déshydratées et offre une autonomie de plus de 900 vaporisations. Remarquablement efficace, il assainit l'air et élimine les odeurs par une simple pulvérisation.

Une version pour diffuseur automatique existe sous le nom **UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC**.



FORMAT ET CAPACITÉ


- ✓ Spray prêt à l'emploi pour un usage atmosphérique.
- ✓ Une vaporisation par 20 m³ (± 900 pulvérisations par 100 ml).

CONDITIONNEMENTS

UMONIUM³⁸ air control :
5 ml, 10 ml et 100 ml.

UMONIUM³⁸ air control matic :
250ml.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER

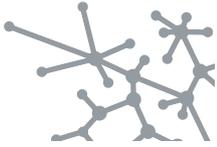

PHYTOGEL
By HUCKERT'S
genesis



PHYTOGEL
By HUCKERT'S
sanitizer



PHYTOGEL
By HUCKERT'S
microbrush



PHYTOGEL
By HUCKERT'S
nature

SANS
PARFUM



Biocide TP1



Biocide TP1



Dermo-Cosmétique

95,1%
D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE
NATURELLE**



Dermo-Cosmétique

HYGIÈNE DES MAINS

Parce qu'elles sont nos premiers outils, les mains sont les plus importants vecteurs de transmission des micro-organismes. Par conséquent, leur hygiène joue un rôle essentiel dans la maîtrise du risque infectieux.

Cependant, l'utilisation très fréquente de savons et de solutions hydroalcooliques assèche la peau et peut conduire au développement de troubles dermatologiques: dermatites, allergies, eczémas, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S® vous propose des gammes enrichies en huiles essentielles, qui respectent votre peau, même sèche et vous garantit une hygiène impeccable.

100%
EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*

GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHÉ EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, enrichi en huiles essentielles de thym, camomille et eucalyptus et **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, enrichi en actifs émollissants, hydratent en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgicale.

De plus, leurs textures non-collantes ne provoquent pas d'inconfort lors du port des gants et ne laissent aucune sensation de résidu même après de nombreuses applications.



**DÉSINFECTION
CHIRURGICALE**

→ Validée dès **3 min.**



**DÉSINFECTION
HYGIÉNIQUE**

→ Validée dès **30 sec.**

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHÉ EN HUILES ESSENTIELLES

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, enrichi en huiles essentielles de thym, camomille et eucalyptus et **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis**, enrichi en actifs émollissants, hydratent en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgicale.

De plus, leurs textures non-collantes ne provoquent pas d'inconfort lors du port des gants et ne laissent aucune sensation de résidu même après de nombreuses applications.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées et qui aiment le parfum des huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

SAVON EXFOLIANT TOUS TYPES DE PEAUX

Spécialement développé pour les mains fortement souillées, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **microbrush** lave et désincruste en profondeur les impuretés des sillons de la peau grâce à ses microbilles non abrasives et sa formule enrichie en huiles essentielles.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains fortement souillées (comme celles des prothésistes par exemple) qui ont besoin d'être lavées en profondeur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

5L.

SAVON DERMATOLOGIQUE TOUS TYPES DE PEAUX

Enrichi en huiles essentielles et naturellement parfumé, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **nature** lave en douceur, respecte la barrière cutanée et protège les peaux les plus sèches.



PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature**, votre allié au quotidien contre les agressions cutanées.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être lavées en douceur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml, 1L et 5L.

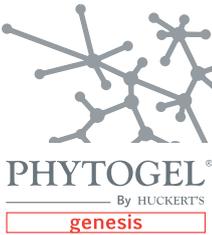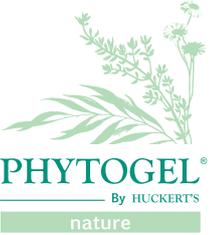NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 20803	Flacon de poche 100 mL	28 x 100 mL
		PF 20806	Flacon 400 mL	15 x 400 mL
		EMB6100	Support en inox pour flacon de 400 mL	1 pièce
		EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
		EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
		PF 20821	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L
		PF 20403	Flacon de poche 100 mL	28 x 100 mL
		PF 20807	Flacon 400 mL	15 x 400 mL
		EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
		EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
		PF 20421	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L
		PF 20811	Flacon de poche 100 mL	28 x 100 mL
		PF 20809	Flacon 400 mL	15 x 400 mL
		EMB6100	Support en inox pour flacon de 400 mL	1 pièce
		PF 20109	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L
		EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
		EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
		PF 20112	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5L
EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce		
		PF 20212	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5 L
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 12310	Flacon doseur 1L	12 x 1 L
		PF 12312	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5 L
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 %	1 pièce
		PF 12209	Flacon vapo 1L	12 x 1 L
		PF 12204	Flacon vapo 500 mL	24 x 500 mL
		PF 12203	Flacon vapo 250 mL	24 x 250 mL
		EMB 0099	100 serviettes UMONIUM ³⁸ Wipes	12 pièces
		EMB 5206	Support inox flacon 1L	1 pièce
		PF 10760	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10774	Boîte de 95 lingettes (15 x 15 cm)	6 x 95
		EMB 5206	Support inox (95 lingettes)	1 pièce
		PF 10761	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 10110	Flacon doseur 1L	12 x 1 L
		PF 10112	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5 L
		PF 10120	Bidon de 25L	1 x 25 litres
		PF 10125	Fût de 200L	-
		PF 10126	IBC de 1000L	-
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 %	1 pièce

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 10320	Flacon doseur 1L	12 x 1L
		PF 10322	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5L
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		PF 12110	Flacon doseur 1L	12 x 1 L
		PF 12112	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5 L
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 %	1 pièce
		PF 11003	Flacon vaporisateur individuel 100 mL	12 pièces
		EMB 5207	Support mural 100 mL avec antivol	1 support
		PF 11000	Flacon vaporisateur individuel 10 mL	36 pièces
		PF 11006	Aérosol 250 mL pour diffuseur	12 pièces
		EMB 0432	Diffuseur électronique pour aérosol 250 mL	1 appareil



UMONIUM[®]
maître en désinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Les produits du Laboratoire Huckert's International sont **garantis contre toute insatisfaction**.
Seul un fabricant passionné peut vous apporter cette qualité.



* Sous réserve de disponibilité de la matière première.



www.huckerts.net