

LMDualGracey[™]



-25%

Les avantages de plusieurs curettes combinés en un seul instrument !

Grâce à leur double lame innovante à deux tranchants, les Dual Graceys peuvent être utilisées comme instrument universel pour toutes les zones de racines. Comme tous les autres instruments Sharp Diamond™, Dual Graceys n'ont pas besoin d'être affûtées pendant leur durée d'utilisation. La forme et le tranchant des extrémités de travail sont conservés très longtemps grâce au revêtement spécial.




Avec seulement deux instruments, toutes les surfaces radiculaires peuvent être traitées efficacement. Les deux curettes Dual Graceys Anterior et Posterior sont utilisées à la place des curettes classiques Gracey et universelles. Deux autres instruments "mini", avec une lame 50 % plus courte et une tige 3 mm plus longue, permettent un meilleur accès aux poches profondes et aux zones radiculaires étroites.

Tous les instruments Dual Graceys sont disponibles avec les poignées ergonomiques LM-ErgoSense® ainsi qu'avec le revêtement de micromembrane LM Sharp Diamond™.



Conception intelligente de la pointe

Chaque pointe LM Dual Gracey™ possède deux bords tranchants. Ce design permet de traiter aussi bien les surfaces mésiales que distales des dents. Grâce à ce concept, il faut également moins d'instruments. Le jeu d'instruments habituel composé de quatre curettes Gracey peut être remplacé par seulement deux instruments LM Dual Gracey™.

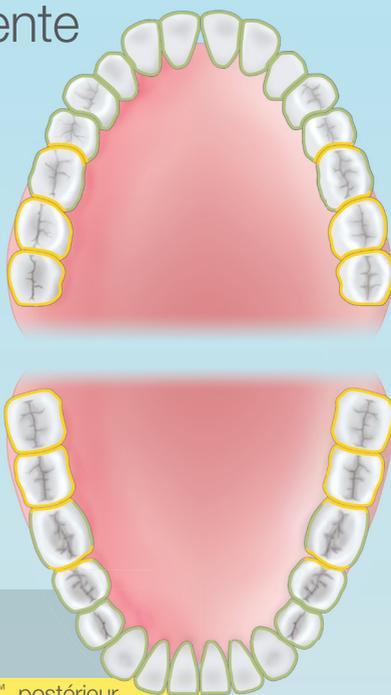

Utilisation du LM Dual Gracey™ dans les domaines spécifiques :

Syntette™ Anterior

Dents antérieures : toutes les faces

Prémolaires et molaires : vestibulaires et linguales

Syntette™, postérieur

Prémolaires et molaires : mésial et distal



De nombreux autres instruments LM Dental sont disponibles. Informez-vous sur www.lm-dental.com ou demandez un catalogue gratuit.

Instruments LM Dual Gracey™

-25%



Syntette™ Anterior SD

N° art. : LM275-276SDES

Prix : € 62,48 ~~€ 83,30~~



Mini Syntette™ Anterior SD

N° art. : LM275-276MSDES

Prix : € 62,48 ~~€ 83,30~~



LM-Syntette™ SD, postérieur

N° art. : LM215-216SDES

Prix : € 62,48 ~~€ 83,30~~



Mini Syntette™ SD, postérieur

N° art. : LM215-216MSDES

Prix : € 62,48 ~~€ 83,30~~

Promotion valable du 14.05.2025 au 30.06.2025. Tous les prix s'entendent hors TVA légale et frais de port (pour les commandes inférieures à € 100,-). Sous réserve d'erreurs et de modifications de prix. Les images peuvent différer du produit original en termes de couleurs, etc. Nos conditions générales de vente s'appliquent.