

KAVO

AmiQA

Gewoonweg onmisbaar.



KAVO
Dental Excellence

KaVo – De tandheelkundige unit.
Een investering in uw gezondheid.



De tandheelkundige units van KaVo zijn uw betrouwbare praktijkpartners. De tandheelkundige units van KaVo zijn ongeëvenaard als het gaat om het stimuleren van een natuurlijke houding met uitzonderlijke bewegingsvrijheid en korte reikafstanden. Ze vormen de ideale ergonomische oplossing voor alle denkbare behandelsituaties. Wij streven naar een combinatie van de hoogste hygiënenormen en een esthetisch design om zowel voor gebruikers als voor patiënten een feel-good ervaring te creëren. Dit perfect uitgebalanceerde pakket voor de tandheelkundige praktijk heeft een lange levensduur en biedt volledige betrouwbaarheid – Made in Germany.



ERGONOMIE

Het summum in comfort voor zowel tandartsen als hun patiënten. Het welbevinden en de gezondheid van uw team op de lange termijn is onze hoogste prioriteit.



GEBRUIKERSERVARING

Ingenieuze functionaliteit in combinatie met slimme aanpassingen – een winnende combinatie voor efficiënte, succesvolle tandartspraktijken.



HYGIËNE

Meer veiligheid bij elk proces – ontdek hoe veelomvattende hygiëne er bij KaVo uitziet. Ervaar zelf onze volledig geautomatiseerde processen en slimme, intuïtieve hygiëneoplossingen.



KWALITEIT

Made in Germany, dus bewezen betrouwbaarheid. Al meer dan 100 jaar biedt KaVo het summum in kwaliteit. We gebruiken uitsluitend robuuste onderdelen van hoge kwaliteit en controleren alle producten op strikte compliance met de meest uitgebreide internationale en interne normen. Voor meer duurzaamheid, stabiliteit en betrouwbaarheid.



ERGONOMIE



**GEBRUIKS-
ERVARING**

HYGIËNE



KWALITEIT

De beste keuze – in elke positie

- Optimale beenruimte, en een slanke rug- en hoofdsteen creëren ruimte voor toegang tot de patiënt
- Comfort van top tot teen voor patiënten en gebruikers
- Een ontspannende sfeer: indirecte verlichting en SPALight
- Flexibele aanpassingen dankzij een groot hoogte-instellingsbereik en een hoge belastingscapaciteit
- Lichtgewicht, multifunctioneel en ideaal voor ontspannen werken: het ergonomische voetpedaal van KaVo
- Zie nu nog meer met de nieuwe KaVo Lumina-operatielamp

Geavanceerde technologie, intuïtieve bediening en maximale efficiëntie voor een uitstekende praktijkbeleving

- Responsief, intuïtief, snel en eenvoudig te gebruiken: het 7 inch touchscreen met een hoge resolutie
- Efficiënt werken: snelle toegang tot alle functies om uw dagelijkse werk te optimaliseren
- Centrale bediening: snelle en eenvoudige bediening van de functies voor de patiëntstoel, hygiëne en operatielamp voor tandartsen en assistenten
- Directe patiëntcommunicatie bij de unit voor vertrouwen en transparantie

Een feel-good ervaring vóór, tijdens en na de behandeling

- Maximale veiligheid en betrouwbaarheid tijdens de behandeling: KaVo DVGW-waterblok – de onbetwiste pionier
- Het volledig geautomatiseerde hygiëncentrum verricht de water desinfectie en -processen
- Vakkundige begeleiding met eenvoudige stapsgewijze instructies
- Unieke reiniging van het afzuigstelsel met gel staat garant voor indrukwekkende prestaties voor afzuigslangen

Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland

- Bijzonder stevig: solide voet gemaakt van 143 kg metaal
- Kunststof van hoge kwaliteit: gecertificeerd voor de meest uitgebreide eisen in de dagelijkse praktijk
- Minder en eenvoudiger onderhoud: geavanceerde technologie in combinatie met beproefde elektronische componenten
- Betrouwbaar ook onder zware belasting: getest voor een levensduur van meer dan tien jaar en belastingen tot 660 kg
- Snelle professionele assistentie: vakkundige service, zowel persoonlijk als via de hotline



Eenvoudig. Nauwkeurig. Uitstekend. Omdat echte waarden ertoe doen.

Niet alleen in de naam laat de KaVo amiQa alle belangrijke aspecten van vriendschap zien. Echte vrienden laten ons nooit in de steek. Ze geven ons een gevoel van veiligheid en zorgen telkens weer voor een lach op ons gezicht. En dus is in de amiQa het DNA van KaVo opgenomen en verwerkt tot een gestroomlijnd concept: topkwaliteit, eenvoudige maar toch ingenieuze hygiëneprocessen, geavanceerde ergonomie en een fris design. Van basisfuncties tot specialistische hulpmiddelen, gebruikers zijn verrukt van de amiQa door zijn externe en interne kwaliteiten.

Iets waarop u kunt vertrouwen: de KaVo amiQa is de partner die altijd, een leven lang, voor u klaarstaat.

KaVo amiQa – de highlights:



Het design – dynamisch, modern en compact

- 1. Stijlvolle uitstraling met een ultrasportief design
- 2. Een unit met een slanke body en strakke lijnen
- 3. Compact assistentelement met drie instrumenthouders. Ook verkrijgbaar in een rechts- en linkshandig model voor omzetting in een tandheelkundige unit voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
- 4. Bekleding in 14 kleuren die perfect passen bij de huidige interieurtrends
- 5. Optioneel verlichtingselement voor indirect licht en een rustgevende spa-vibe

Het behandlelement – vertrouw op uw intuïtie

- 6. Drie compacte tafelmodellen voor rechts- en linkshandige gebruikers: TM-unit, S-unit en Cart-unit
- 7. Een 7 inch touchscreen met hoge resolutie: intuïtieve aanraaktechnologie voor snelle toegang tot alle belangrijke functies
- 8. Compact model met vier instrumenthouders. Versies met vijf of zes houders ook verkrijgbaar
- 9. Uitgebreid assortiment instrumentopties van basis tot specialistisch: voor alle indicaties, inclusief geïntegreerde endodontische en chirurgische functies
- 10. KaVo eSCALER: betrouwbare, geheel steriliseerbare ultrasone scaler voor efficiënte profylaxe, 100% Made by KaVo
- 11. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: 3-in-1 intraorale camera voor geoptimaliseerde cariësdagnostiek in volledige HD-resolutie
- 12. Eenvoudige en netwerkafhankelijke patiëntcommunicatie met de standalone KaVo CONNECTbase of de netwerkversie met CONNECTlink

Het KaVo-concept voor ergonomie – gezond werken in elke behandelsituatie


- 13. Compacte patiëntstoel voor geweldig ergonomisch comfort: beenruimte, een lichtgewicht en vrij te positioneren voetpedaal, en een slanke rugleuning en hoofdsteen creëren ruimte voor toegang tot de patiënt
- 14. Zachte bekleding voor comfort en ontspanning tijdens het liggen
- 15. De armsteunen kantelen naar beneden, waardoor het voor de patiënt eenvoudiger is om in en uit de stoel te stappen zonder dat de behandelaar daarvoor bewegingsvrijheid moet opgeven
- 16. Korte reikafstanden en geïntegreerde instrumentopties

Hygiënefuncties – veiligheid eenvoudig gemaakt

- 17. Intuïtieve hygiënegids en compact hygiënecentrum voor geautomatiseerde doorspoelen en desinfectie van instrumentenlangen. Extra tappunt voor afzuigslangen

Het opvallende accessoire – geavanceerde technologie voor uitstekend zicht

- 18. De nieuwe KaVo Lumina-operatielamp met UX Light-technologie, SPALight en COMPOshape-modus, en superieur bedieningsgemak

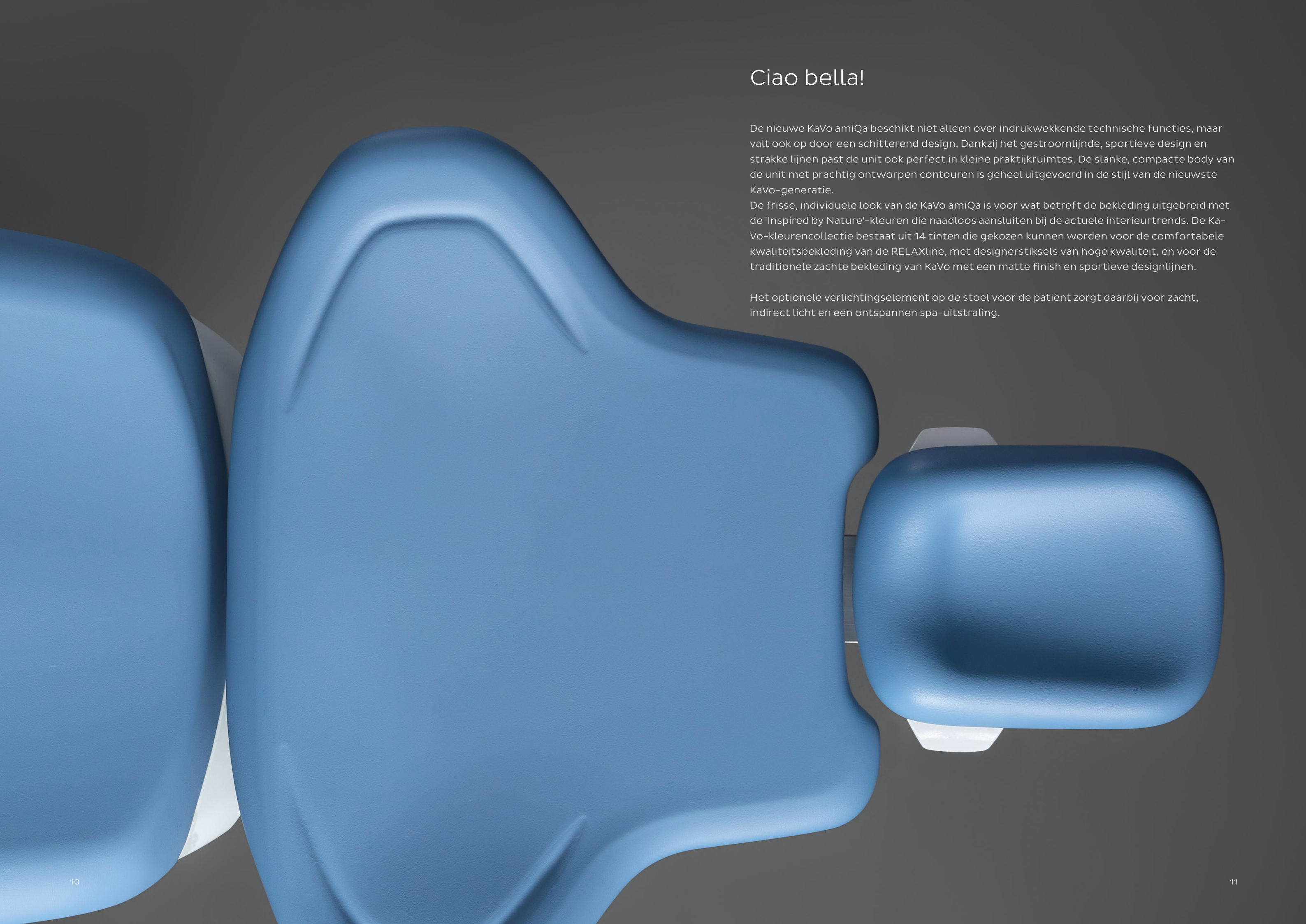

Ciao bella!

De nieuwe KaVo amiQa beschikt niet alleen over indrukwekkende technische functies, maar valt ook op door een schitterend design. Dankzij het gestroomlijnde, sportieve design en strakke lijnen past de unit ook perfect in kleine praktijkruimtes. De slanke, compacte body van de unit met prachtig ontworpen contouren is geheel uitgevoerd in de stijl van de nieuwste KaVo-generatie.

De frisse, individuele look van de KaVo amiQa is voor wat betreft de bekleding uitgebreid met de 'Inspired by Nature'-kleuren die naadloos aansluiten bij de actuele interieurtrends. De KaVo-kleurencollectie bestaat uit 14 tinten die gekozen kunnen worden voor de comfortabele kwaliteitsbekleding van de RELAXline, met designerstiksels van hoge kwaliteit, en voor de traditionele zachte bekleding van KaVo met een matte finish en sportieve designlijnen.

Het optionele verlichtingselement op de stoel voor de patiënt zorgt daarbij voor zacht, indirect licht en een ontspannen spa-uitstraling.

MEER DAN BRILJANT – DE NIEUWE GENERATIE TOUCHSCREENS



Door de reactiesnelheid en scherpte van de nieuwe generatie KaVo-touchscreens zijn gebruikers vanaf de eerste aanraking aangenaam verrast. De intuïtieve gebruikersinterface van het behandellement met het glazen paneel van topkwaliteit spreekt voor zich en staat garant voor soepele, snelle en ontspannen workflows.

Een vriend voor het leven

Het principe van de KaVo amiQa is heel eenvoudig: u kunt erop vertrouwen dat de unit altijd voor u klaar staat en in elke behandelsituatie geweldig functioneert. Als betrouwbare partner past de amiQa zich met een reeks instrumentopties voor de tandarts- en assistentelementen perfect aan uw behoeften aan. De unit biedt eenvoudig te programmeren persoonlijke instellingen voor verschillende gebruikers, waaronder het toewijzen van toetsen op het startscherm. En zelfs als de omstandigheden veranderen, blijft de KaVo amiQa u trouw. Met retrofitting kan een reeks aanpassingen worden gedaan – van vijf naar zes trays tot het toevoegen van endodontische en chirurgische functies. Dat is pas vriendschap!




Indrukwekkend intuïtief

De nieuwste generatie touchscreens is niet alleen visueel bijzonder aantrekkelijk. Het scherm met zijn hoge resolutie, eenvoudige, intuïtieve bediening en snelle respons maken de amiQa de partner waarmee u elke dag weer prettig kunt samenwerken. U kunt alle belangrijke informatie in één oogopslag zien en het scherm biedt snel en eenvoudig toegang tot de functies.

Klaar voor de start: opgeslagen parameters voor maximaal vijf behandeltypen kunnen snel en betrouwbaar worden opgeroepen voor elk instrument en voor maximaal zes behandelaars.

Gewoon perfect!

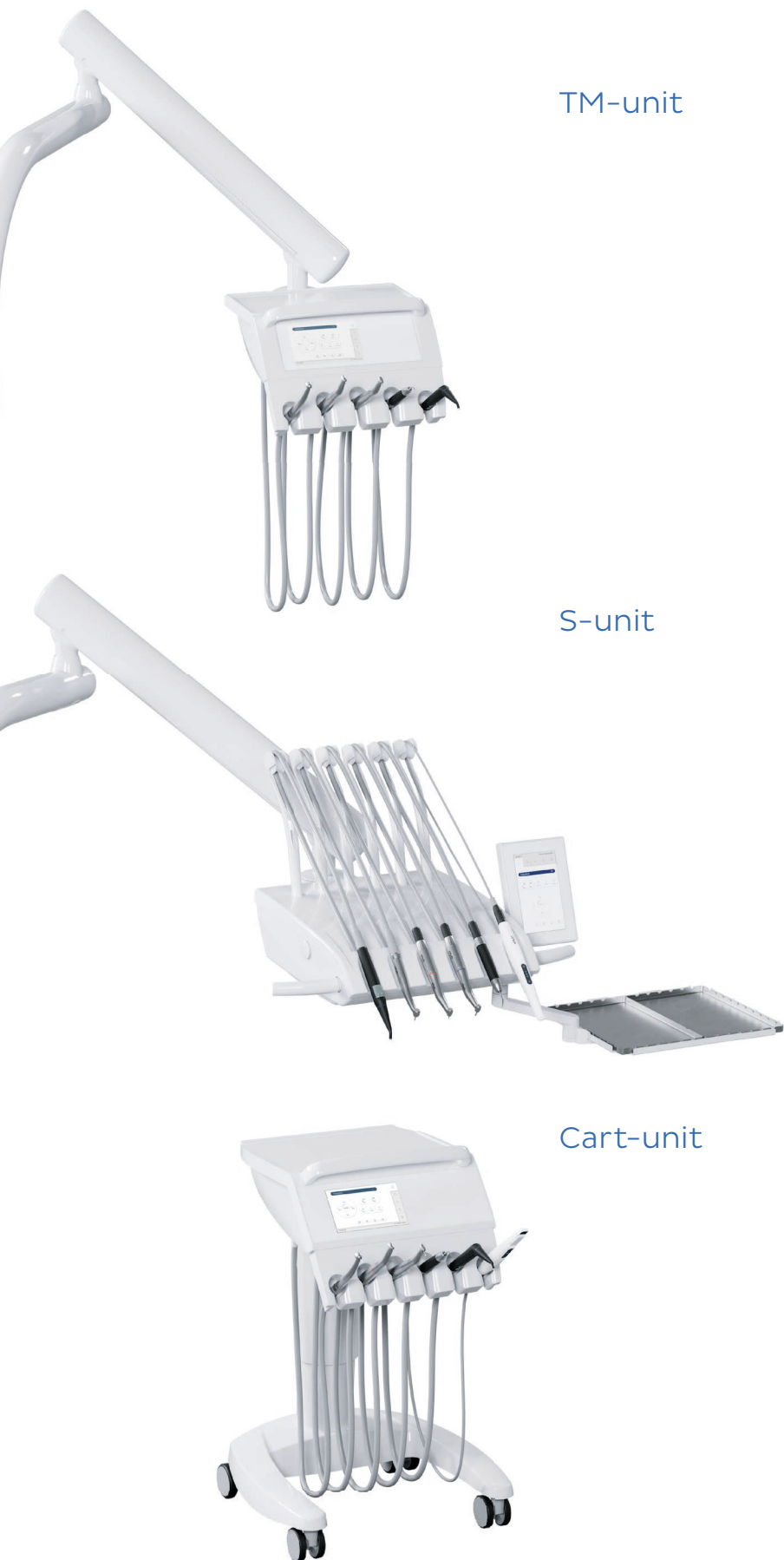


TM-unit

S-unit

Cart-unit

Links- of rechtshandig? Waarom niet allebei?

De amiQa-modellen zijn alle drie geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers. Het maakt niet uit welke versie u nu kiest. Als het nodig is kunt u de amiQa later altijd omzetten. Aangepaste combinaties zijn ook mogelijk. De S-unit en Cart-unit kunnen gekoppeld worden aan een assistentelement dat naar rechts en links gedraaid kan worden, zodat het veranderen van kant eenvoudig kan worden geregeld.

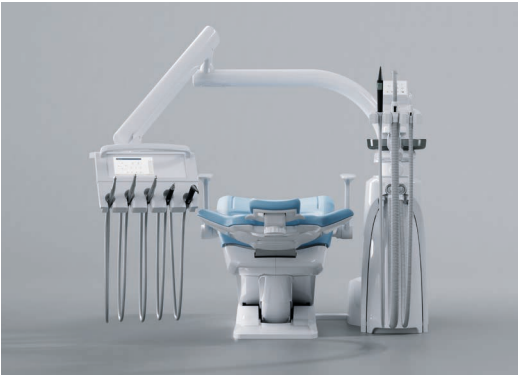

Houd het slim en simpel – en altijd passend bij uw behoeften

De praktische vier instrumenthouders van het behandellement zijn ideaal voor basisvereisten of profylactische toepassingen. Het behandellement van de amiQa kan ook worden geüpgraded naar een configuratie met vijf of zelfs zes instrumenthouders. U bepaalt wat u in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Al het goede komt in drieën: kies het voor u ideale model

De versies van het amiQa-behandellement staan alle drie garant voor korte en ergonomische hanteringsbereiken. Afhankelijk van uw voorkeur bieden de T-unit, Cart-unit en S-unit een reeks voordelen voor de dagelijkse praktijk. De S-unit beschikt bijvoorbeeld over drie ergonomische vergrendelingsposities die het gewicht van instrumentenlangen in lengtes van 50 cm, 70 cm of 90 cm in balans houden. In de Cart-versie is het behandellement niet opgehangen boven de patiënt, maar gepositioneerd op wielen naast de behandelstoel. De TM-unit is voorzien van een bijzonder ruim aflegoppervlak dat een ideale overbrugging vormt tussen de tandarts en de assistent.

KAVO-INSTRUMENTEN – VOEL HET VERSCHIL.



Onze instrumenten zijn gemaakt van de beste materialen die exclusief ontwikkeld zijn voor onze producten. Ze worden gecombineerd met onze unieke productarchitectuur – gemaakt uit één stuk massief materiaal – voor uitzonderlijke precisie en duurzaamheid. Wij zetten de standaard voor de tandheelkundige instrumenten van vandaag. Deze rijkdom aan ervaring, ontstaan uit meer dan een eeuw van voortdurende innovatie, komt tot uitdrukking in het design en de functionaliteit van onze huidige instrumenten. Die resulteren in optimale gebruikersprestaties door nauwkeurig werken zonder dat er vermoeidheid optreedt.



Producten die voldoen aan uw verwachtingen

Als het gaat om uw instrumenten, wilt u alleen het beste. KaVo-instrumenten zijn geschikt voor alle toepassingsgebieden en staan garant voor de best mogelijke zichtbaarheid van en toegang tot de mondholte, zodat u altijd behandelingen van de hoogste kwaliteit en met de meeste precisie kunt aanbieden. In combinatie met de lichtgewicht, ultracompacte en soepel draaiende KaVo INTRA LUX KL 703 LED-micromotor kunt u dankzij SMARTdrive efficiënt werken en daarbij minder snel moe worden in het gehele snelheidsbereik van 100 tot 40.000 tpm.



Specialistische technologie voor iedereen



De nieuwe KaVo eSCALER

De nieuwe high-performance KaVo eSCALER is 'Made in Germany – Made by KaVo'. De KaVo eSCALER voert tandreiniging uitzonderlijk nauwkeurig en tijdbesparend uit: de lineaire oscillatie van de tip is met tot wel 30.000 Hz bijzonder effectief. De nauwkeurig gedefinieerde ultrasone trillingen, het ergonomisch vormgegeven tandheelkundige instrument, de daglichtverlichting en ranke tip waarmee gebruikers zelfs moeilijk te bereiken gedeeltes kunnen behandelen, bieden maximaal behandelcomfort voor zowel de patiënt als de tandarts.




KaVo SONICflex – de allround professional voor topprestaties

De KaVo SONICflex is een allround professional: u kunt hiermee bijna elke indicatie op een comfortabele, vriendelijke manier behandelen. Met zacht pulserende sonische vibratie op ongeveer 6000 Hz en een keuze uit meer dan 50 tips is deze scaler populair bij zowel patiënten als tandartsen, en bijzonder geschikt voor alle toepassingsgebieden waaronder profylaxe, endodontie, periodontie, minimaal invasieve cariësbehandelingen en preparatie.

Tiptop endodontie

Met de geïntegreerde endodontische functies en hun drie verschillende bestandsbedieningsmodi hoeft u geen duur endodontieapparaat meer aan te schaffen. De geïntegreerde bestandsdatabase met bijna 200 bestanden met presets kunt u belangrijke parameters zoals transmissieratio en koppelwaarden oproepen, instellen en opslaan via het behandellement – en u kunt ook op elk moment nieuwe bestanden toevoegen.

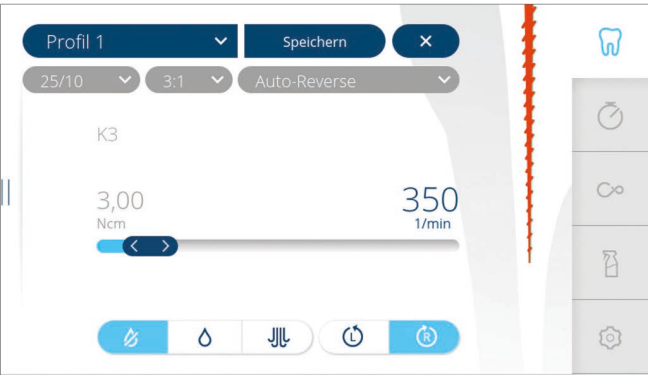


De slimme chirurgische optie


Maak zelfs de meest veeleisende procedures zo comfortabel mogelijk door uw KaVo amiQa uit te rusten met de KaVo INTRA LUX S600 LED. Dit is een van de lichtste en kleinste chirurgische motors. Bij gebruik hiervan met KaVo chirurgische instrumenten en de geïntegreerde pomp voor zoutoplossing hebt u alle functies van een moderne chirurgische unit tot uw beschikking.



WANT GEZONDHEID IS ONS WAARDEVOLSTE BEZIT

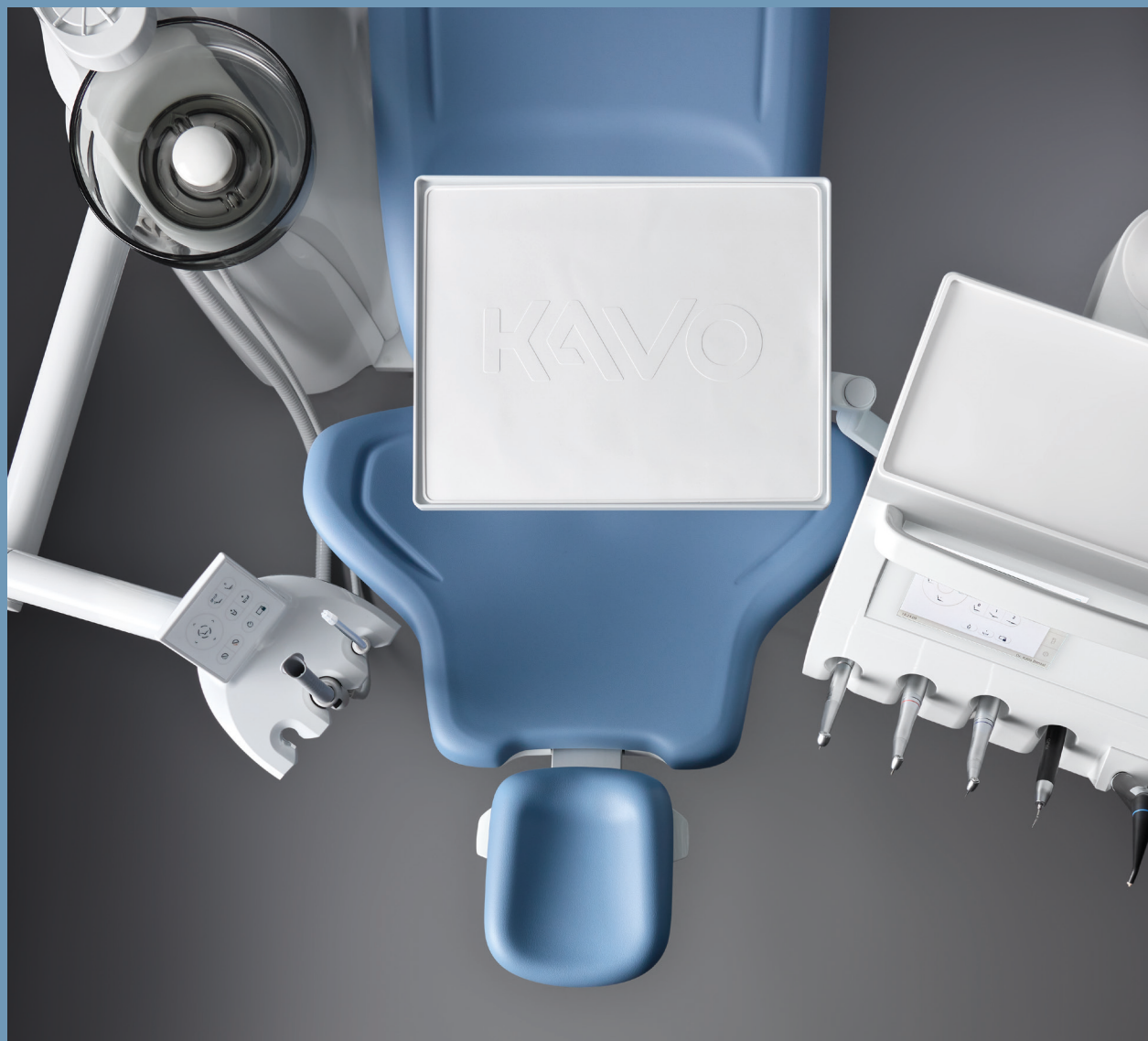

Dankzij het geavanceerde ergonomieconcept van topkwaliteit is een investering in een tandheelkundige unit van KaVo ook een investering in de gezondheid van uw praktijkteam. Het geheel aan ergonomische maatregelen van de KaVo amiQa is ontworpen om behandelprocedures zo stressvrij mogelijk te maken door met intuïtieve processen een gezonde, rugvriendelijke houding te stimuleren. En ook uw patiënten voelen het verschil als ze in een comfortabele, ontspannen positie op de behandelstoel van de KaVo amiQa liggen.

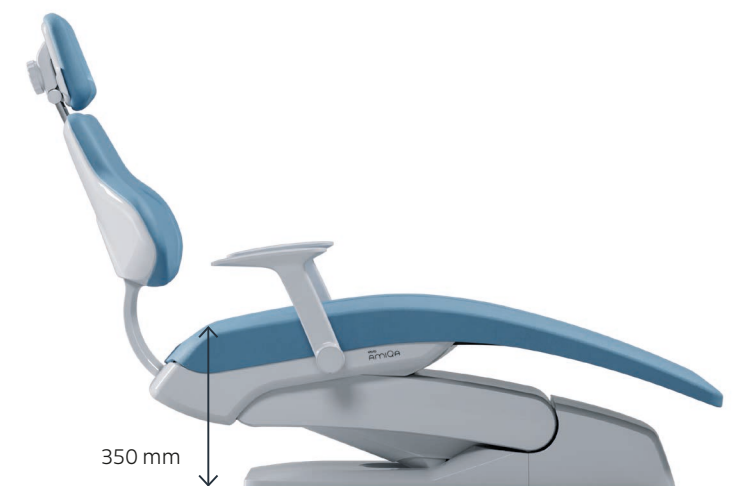

De KaVo amiQa garandeert toegang tot alle functies van de tandheelkundige unit, zelfs als een bijzonder zware patiënt plaats heeft genomen op de stoel.



Echte vrienden...

... komen elkaar tegemoet

De hoogte van de stoel voor de patiënt kan worden ingesteld tussen 350 mm en 830 mm. Dit zorgt voor optimaal ergonomisch comfort, ongeacht of u kiest voor zittend of staand werken.

... geven elkaar de ruimte

De KaVo amiQa-stoel voor de patiënt biedt volop plaats en beenruimte. U kunt het voetpedaal ook plaatsen waar dat voor u het meest comfortabel is, omdat het slanke design van de stoel van de patiënt en de voetplaat veel ruimte vrij laten. Hierdoor kunt u in een ontspannen en rugvriendelijke houding uw werk doen en toch dicht genoeg bij de patiënt komen.




De beste keuze – in elke positie


Een optimale positionering is niet alleen comfortabel voor de patiënt, maar ook essentieel voor een ergonomische werkhouding. Door het veelzijdige en omkeerbare kussen en de volledig verstelbare hoofdsteen met twee scharnieren kan de patiënt comfortabel liggen, en hebt u goed zicht op en uitstekende toegang tot uw werkgebied, ongeacht de grootte van de patiënt en de indicatie. De KaVo RELAXline en comfortabele hoofdsteen bieden nog extra comfort. De bekleding van topkwaliteit bevat geheugenschuim dat zich perfect vormt naar het lichaam van de patiënt voor een superieur comfort tijdens het liggen, zelfs tijdens langdurige behandelingen. Uw patiënten liggen volledig ontspannen en u hebt optimale toegang.



*Flexibele rugleuning: optimale werkhouding en toegang tot de mond van de patiënt.
Brede armsteun voor extra comfort.*

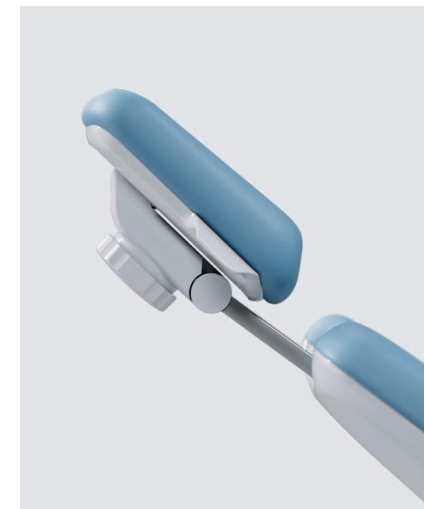

Duidelijk en handig: eenvoudig te bedienen hoofdsteen met dubbel scharnier met draaiknop of mechanische klem en kantelende hoofdsteen.

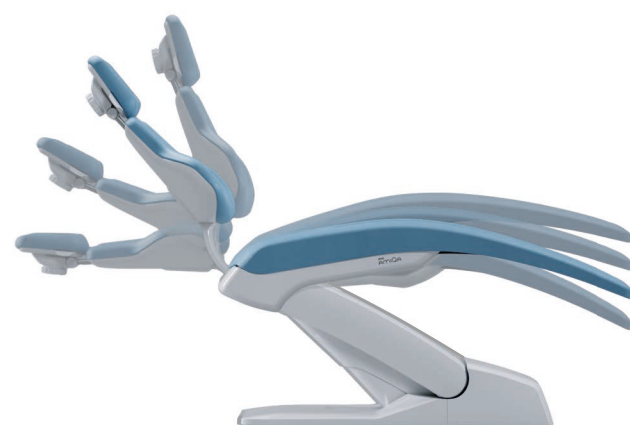


Perfekte positionering

De KaVo amiQa biedt een ergonomisch comfortabele liggende positie voor uw patiënten. Dankzij de geïntegreerde Trendelenburg-beweging kantelt de voetensteun, zodat dat hij automatisch past bij de hoek van de rugleuning. Deze gecombineerde beweging voorkomt dat de rug van de patiënt ineens wordt gedrukt of juist uitgerekt tijdens het verstellen van de rugleuning. De positie met de benen omhoog ondersteunt bovendien de circulatie van de patiënt.

Eenvoudig in- en uitstappen


De armsteunen van de KaVo amiQa kantelen omlaag om eenvoudig in- en uitstappen mogelijk te maken. U biedt uw patiënten ondersteuning en veiligheid zonder in te leveren op uw eigen bewegingsvrijheid.

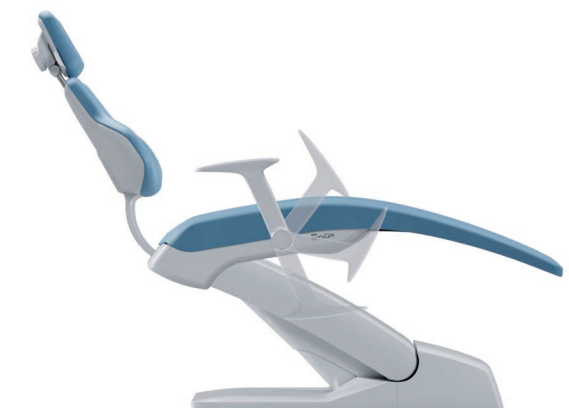

Een echte amiQa: betrouwbaar in elke situatie

Elke beweging een meesterwerk

Tijdens de behandeling moet u elke beweging precies goed uitvoeren. Reikafstanden moeten kort en intuïtief zijn, ongeacht of u de behandeling alleen uitvoert of met een assistent. De behandlelementen van de amiQa, de tray-ondersteuning en het assistentelement hebben een

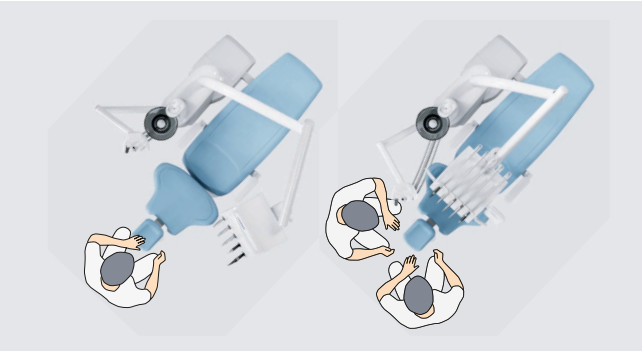

groot bewegingsbereik en kunnen op elk moment in de juiste positie worden gezet. In de S-unit versie zorgen de maximale verlenging van de instrumentslangen tot 90 cm en de lage tafelhoogte van 45 cm voor meer ruimte.



Ondersteuning voor assistenten

Het compacte assistentelement van de KaVo amiQa is uitgerust met een capacitief touchscreen en een duidelijk geconfigureerde gebruikersinterface. De centrale functies voor de stoel van de patiënt, reiniging en verlichting zijn snel en direct te bedienen. De flexibele hoogte-instelling en het grote draaibereik zorgen voor nog meer ergonomie.



Hebben uw handen het te druk? Niet met het voetpedaal van KaVo!

U kunt alle functies en geïntegreerde units moeiteloos en ergonomisch bedienen met het voetpedaal, ook de patiënt-communicatie. Het is niet alleen eenvoudig te bedienen, maar biedt als extra voordeel dat het risico op kruisbesmetting wordt verminderd. De positionering is nog flexibeler met het draadloze model.



Voor efficiënte workflows zijn korte reikafstanden noodzakelijk

Precies daar waar de actie is

Het KaVo Centro-systeem bevindt zich in het midden van de tandheelkundige unit. Dit slimme systeem organiseert alle apparaten handig en ergonomisch op één plek. Elk apparaat is snel en eenvoudig te bereiken. Wilt u op een later moment uw unit converteren of upgraden met nieuwe technologie? Het Centro-systeem maakt dat mogelijk. Apparaten en componenten kunnen met behulp van de vele adapters snel en eenvoudig worden verwisseld. Met de korte reikafstand optimaliseert de nieuwe amiQa uw workflows, zodat u uw handen vrij hebt om u te richten op wat echt belangrijk is.



Superieure flexibiliteit – het KaVo Centro-systeem



Intraorale röntgenfoto's direct beschikbaar

De KaVo ProXam iX kan met een adapter eenvoudig op de operatie lamp kolom worden geïnstalleerd. Zo kunt u op de tandheelkundige unit zelf snel, nauwkeurig en eenvoudig röntgenbeelden maken die aangepast zijn aan de radiologische indicatie.



HYGIËNE OP EEN EENVOUDIGE MANIER – REINIGING MET DE KAVO AMIQA



Het optimale hygiëneproces is simpel, moeiteloos en absoluut veilig met de KaVo amiQa. Voor desinfectie kunnen belangrijke componenten eenvoudig worden verwijderd, de oppervlakken zijn simpel schoon te maken en het reinigen van de instrumentslangen is geautomatiseerd.

Veilige hygiëne op een eenvoudige manier

In de body van de KaVo amiQa-unit is een hygiëncentrum geïnstalleerd voor betrouwbare reiniging en desinfectie van de instrumentslangen. De instrumentslangen worden hier geplaatst voor eenvoudige geautomatiseerde reiniging. Het hygiëncentrum beschikt ook over tappunten om de afzuigslangen met schoon water te kunnen spoelen. Het kan verwijderd worden en thermisch gedesinfecteerd worden.


Laat het water maar komen

Het geautomatiseerde HYDROclean-programma reinigt moeiteloos de afvoer- en afzuigsystemen, en is automatisch gecombineerd met de instrumentreinigingsprogramma's. Op deze manier maakt de amiQa uw afzuigstelsel duurzamer.



Automatisch spoelprogramma


De voorgeprogrammeerde reinigingsprotocollen bieden conform specificaties van het Duitse RKI uitgebreide hulp bij het werken met uw KaVo amiQa. De hygiënegids begeleidt u stapsgewijs bij de preparatie van de unit, of dat nu na de behandeling, 's morgens, 's avonds of op wekelijkse basis is. De programma's gaan dan zelf aan het werk voor het spoelen en reinigen van de instrumentslangen.

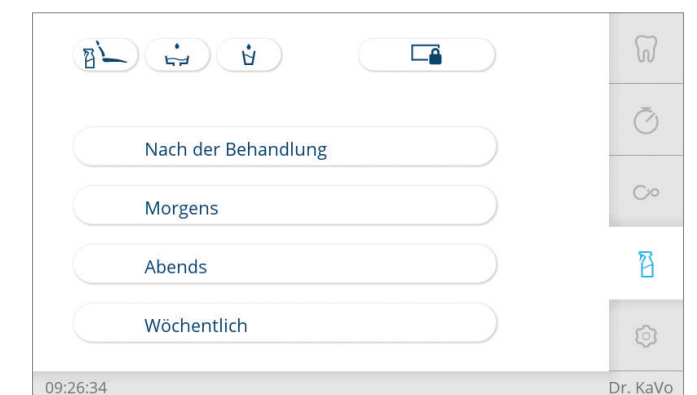



Veiligheid, hygiëne en flexibiliteit – geen uitzonderingen, geen compromissen. Met het DVGW-waterblok.

Met watertechnologie van de nieuwste generatie zet KaVo nieuwe standaarden voor het middelpunt van de tandheelkundige unit. Het DVGW-waterblok levert spray- en spoelwater voor de instrumenten en de patiënt, en zorgt voor de juiste concentratie KaVo OXYGENAL 6. Het vrije val ontwerp van het waterblok voorkomt dat water van de tandheelkundige unit terugstroomt in het drinkwatersysteem. Het behoudt de kwaliteit van uw watertoevoer en voldoet tegelijkertijd aan de nauwkeurige DVGW-normen. De systeem zelf wordt ook gereinigd door het opvangbassin te spoelen met KaVo OXYGENAL 6-concentraat. Hierdoor worden de hoogste standaarden voor hygiëne en veiligheid voor uw patiënten gegarandeerd.

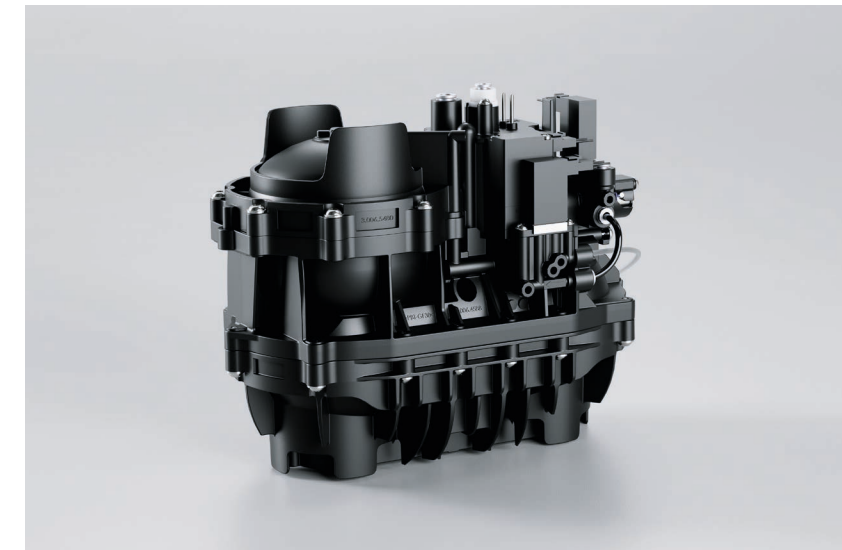

Beschermd watertoevoersysteem

De instrumenten en motoren van KaVo hebben een anti-terugzuigsysteem dat voorkomt dat verontreinigd spray-water teruggezogen wordt in de tandheelkundige unit. Dit beschermt het watertoevoersysteem.



Tijdbesparend: De kant-en-klare KaVo DEKASEPTOL Gel kan direct op de afzuigslangen en -systemen worden aangebracht. Het speciale voordeel hiervan is dat de gel zich hecht aan kritieke punten, en niet gewoon wordt doorgespoeld.

Optimale bescherming tegen verontreiniging

Bescherming tegen verontreiniging is ook supersimpel met de KaVo amiQa. Continue ontkieming met KaVo OXYGENAL 6 zorgt ervoor dat micro-organismen zich tijdens normale praktijkhandelingen niet kunnen verspreiden. Met het intensief ontkiemingsprogramma

('Wekelijks' reinigingsprogramma) kunt u uw patiënten beschermen tegen micro-organismen die zich kunnen vormen tijdens vrije dagen zoals in het weekend of in de vakantie, en zorgt u er ook voor dat de koel- en reinigingsvloeistoffen in onberispelijke staat blijven.




Handgrepen, instrumenthouders, spittoonschalen, zweeparm en silicone matten kunnen eenvoudig worden verwijderd en gedesinfecteerd. De bovenste en onderste gedeeltes van de behuizing zijn volledig gesloten zodat er geen vuil in uw tandheelkundige unit kan komen. Met de hygiënische handgreep kunnen afzuigfilters snel en veilig worden verwisseld.

KaVo Lumina met UX Light-technologie.

Enjoy the light side van tandheelkunde.

De KaVo Lumina zet nieuwe standaarden voor verlichting in de tandheelkunde. Dit werkelijk schitterende product brengt verlichtingstechnologie op een totaal nieuw niveau, beschikt over een reeks slimme functies, en is de nieuwe gouden standaard voor wat gebruikerservaring betreft. De innovatieve UX Light-technologie biedt perfecte verlichting op alle niveaus, zelfs bij de molaren. En dat zonder irritante reflecties op de anterieure tanden. In combinatie met het geoptimaliseerde lichtveld spaart de ogen en maakt geconcentreerd werken mogelijk. Met precieze kleurvorming biedt het natuurlijke lichtspectrum 'Made by KaVo'-kwaliteit, waardoor zowel fans van technologie als designliefhebbers hun dagelijkse werkzaamheden met plezier kunnen uitvoeren.

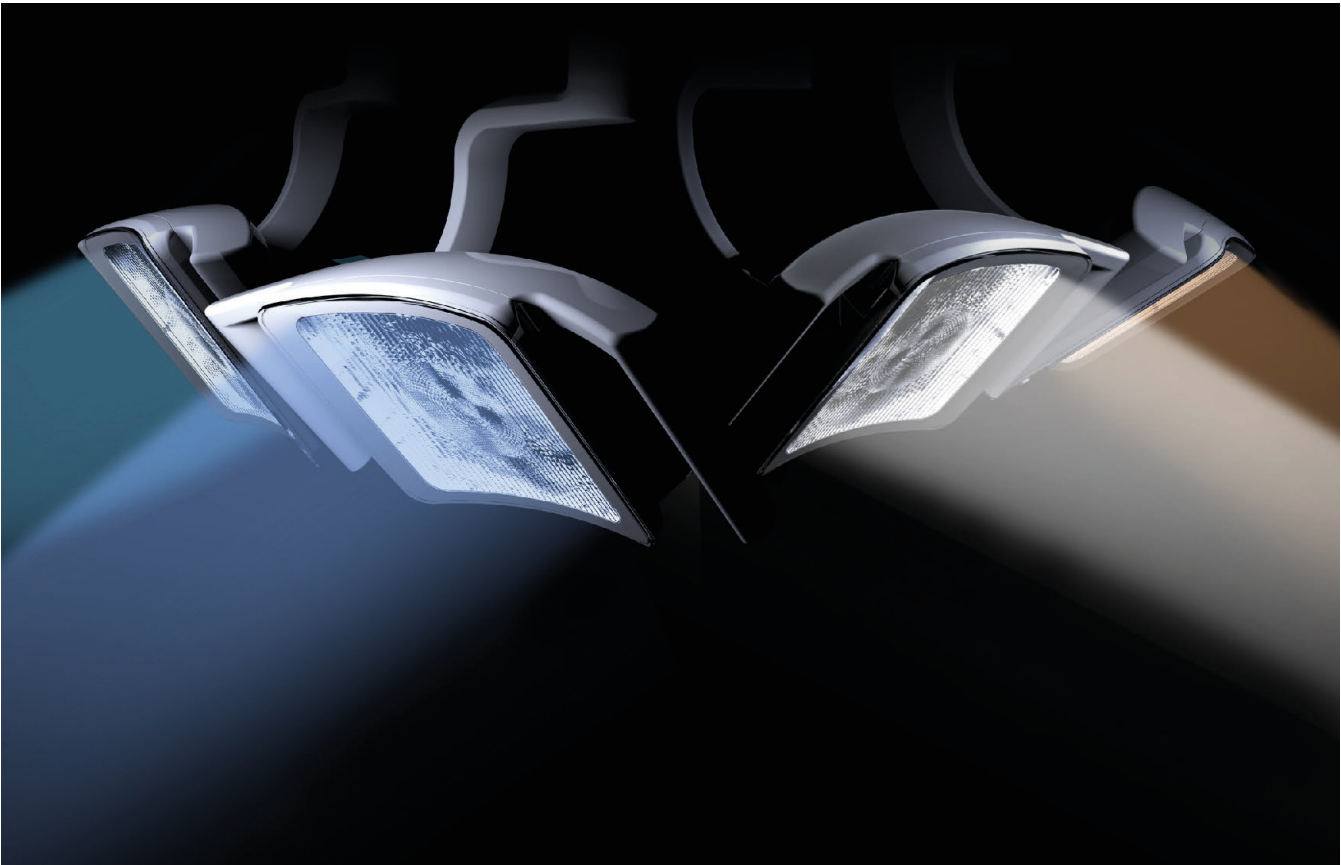

Ongekend soepele bewegingen

Dankzij de uitgebalanceerde constructie en comfortabele hendels die geïnspireerd zijn op professionele Japanse koksmessen, is de KaVo Lumina soepel te bewegen en perfect te positioneren.



COMPOshape-modus

Het kleurenspectrum van de nieuwe COMPOshape-modus met minder blauw ondersteunt esthetische layering. Dat houdt in dat dankzij de betere kleur- en structuurweergave contrasten zichtbaar zijn zonder vroegtijdig uitharden van composiet.



UX Light-technologie

De nieuwe UX Light-technologie van de Lumina is tot stand gekomen door een innovatief enkelvoudig optisch systeem te combineren met een unieke collimator. Dat zorgt voor constant, pulsvrij licht van de hoogste kwaliteit. Met het door de UX Light-technologie gecreëerde natuurlijke kleurenspectrum hoeft de kleurtemperatuur niet meer te worden aangepast en wordt geoptimaliseerde verlichting van de molaren mogelijk zonder vervelende reflecties op de anterieure tanden. Het vormt ook een nieuw, ergonomisch lichtveld.



SPAlight-modus

De SPAlight-modus biedt een kleurenspeel dat bestaat uit tinten blauw en groen waarvan door geavanceerde kleurenpsychologie bewezen is dat ze een kalmerend effect hebben. Dit houdt in dat het gebruikt kan worden om een ontspannende sfeer en een spa-vibe te creëren voorafgaand aan behandelingen en tussen de behandelingen door.*

Uw partner voor de juiste accessoires



Geef uw KaVo amiQa een extra persoonlijke touch met de juiste accessoires! Haal alles uit het mix-and-matchconcept van KaVo om uw amiQa helemaal naar uw smaak aan te passen. KaVo biedt een reeks opties voor het integreren van efficiënte en handige workflows. Met het touchscreen en het voetpedaal krijgt u eenvoudig toegang tot alle functies en parameters van uw geïntegreerde speciale apparaten. Maak de amiQa tot uw betrouwbare partner in uw dagelijkse praktijk, of het nu voor profylaxe, orthodontie, chirurgie of endodontie is.

KaVo MAIA LED

De KaVo MAIA LED biedt moderne ledverlichtingstechnologie voor een prima prijs.

- Tot wel 35.000 lux aan persoonlijk aan te passen lichtintensiteit
- Uniforme verlichting van bijna daglichtkwaliteit (5.000 K) voor levensechte kleuren en texturen
- Constant lichtveld ongeacht de positionering dankzij indirect licht via reflectors
- Verwijderbare, steriliseerbare handgrepen voor veilige en eenvoudige hygiëne



Perfecte houding.

Als tandarts is het aannemen van een ergonomisch gezonde en comfortabele houding in elke behandelsituatie moeilijk maar wel cruciaal. En niets heeft meer invloed op uw lichaamshouding dan de kruk waarop u elke dag zit. De KaVo PHYSIO Evo en Evo F zijn zodanig ontworpen dat ze precies passen bij de behoeften en workflows van tandartsen en hun assistenten.



Ergonomisch comfort en gemak tot in het kleinste detail

De zitting en de rugleuning hebben aparte instellingsfuncties, zodat ze aangepast kunnen worden aan uw anatomische behoeften en persoonlijke behandelstijl. De bekleding van de zitting en de leuning van de KaVo PHYSIO Evo is ergonomisch gegoten. De verhoging in het midden van de bekleding van de zitting zorgt voor een stabiele zithouding en voorkomt wegglijden, zelfs bij snelle, korte rollende bewegingen. De afgeronde ondersteuning voor de bovenbenen biedt veel bewegingsruimte. De rugleuning met veren geeft uw rugspieren, in het bijzonder die van de lage rug, voortdurend steun, waardoor ze ook op lange termijn beschermd zijn.

Een geweldig concept

De KaVo PHYSIO Evo-behandelstoel heeft de goedkeuring gekregen van de 'Healthy Back Campaign' (Campagne voor de gezonde rug). Een onafhankelijke, multidisciplinaire commissie van experts geeft deze goedkeuring op basis van strenge testcriteria voor ergonomie en gezondheid.



STEL U EENS VOOR: OPTIMALE PATIËNT- COMMUNICATIE.



Leg de benodigde behandelmaatregelen duidelijk en gedetailleerd uit aan uw patiënt met behulp van diagnostische beelden en foto's van een hoge resolutie en in heldere kleuren.



DIAGNOcam Vision Full HD Innovatie op zijn best.

Stel u eens voor dat er een camera was die u in één seconde drie klinisch relevante, superscherpe beelden voor cariësdiagnose kon leveren. Nou, dat is nu mogelijk: met de KaVo DIAGNOcam Vision Full HD kunt u kiezen of u een intraorale, transilluminatie- of fluorescentiefoto wilt nemen of dat u de voorkeur geeft aan het combineren van twee of drie opnamemodi. Met de HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels worden alle beelden superscherp weergegeven. Doordat de camera licht is en een ideale balans heeft, kunt u er ergonomisch en moeiteloos mee werken.

KaVo ProXam iCam – Een kleine camera met een grote impact

Gebruik perfecte beelden met een geweldige scherptediepte en uitstekende kleurenweergave om de tandheelkundige situatie uit te leggen aan uw patiënten. De gebruiksvriendelijke ProXam iCam levert u altijd een optimaal beeld. De camera zorgt ervoor dat een scherpe foto kan worden weergegeven op een beeldafstand van maar 9 tot 35 mm, en beschikt ook over een macromodus. De foto kan handmatig of met het voetpedaal worden genomen.



Laat het uw patiënten zien

Het 22 inch KaVo-scherm biedt HD-beeldkwaliteit met een hoge resolutie, indrukwekkende contrastwaarden en heldere kleuren. Met twee digitale inputs is het scherm optimaal voorbereid voor alle functies van beeldvormingsapparaten zoals camera's of microscopen. Voor maximale hygiëne is het scherm uitgevoerd met een beschermend glazen paneel en kleine openingen in de behuizing, en kan het met één hand worden aangepast. De keuze kan niet duidelijker zijn!



De nieuwe manier van communicatie met uw patiënt – geïntegreerd, eenvoudig en efficiënt.

Met de KaVo CONNECTbase creëert u een eenvoudige nieuwe workflow voor communicatie met de patiënt. Met CONNECTbase kunt u de tandheelkundige situatie direct op de KaVo amiQa uitleggen aan uw patiënt zonder dat u extra software hoeft te installeren. Sluit gewoon uw camera aan en ga direct aan de slag. De beelden worden op het scherm van de tandheelkundige unit weergegeven en kunnen worden vergeleken met eerder opgeslagen beelden.



'Plug-and-play'-principe – gestroomlijnde workflows eenvoudig gemaakt


Door camera's direct met de tandheelkundige unit van KaVo te gebruiken, hebt u in een mum van tijd toegang tot uw camerabeelden en kunt u ze via USB exporteren.

De bediening is net zo eenvoudig met het touchscreen of het voetpedaal op uw tandheelkundige unit, dus u hoeft uw werkplek tijdens de behandeling niet te verlaten of uw workflow onnodig te onderbreken.

Wilt u nog toegang tot extra inputs? Geen probleem. Er kunnen verschillende HDMI-bronnen op het scherm van uw tandheelkundige unit worden weergegeven door over te schakelen op het behandellement.

Maak uw behandelingen een beleving

Voorkom verveling tijdens wachttijden en bied uw patiënten indien nodig een welkome afleiding door middel van visuele belevingen op de KaVo amiQa. De geweldige keus aan beeldmateriaal, waaronder een aanpasbaar welkomstscherm en verschillende screensavers met een grote selectie aan foto's of slideshows, houdt patiënten van alle leeftijden wel even bezig. Tegelijkertijd kunt u uw scherm gebruiken om onderwerpen met betrekking tot uw praktijk onder de aandacht te brengen of om relevante informatie te delen. Met de KaVo amiQa kunt u een geheel persoonlijke beleving creëren.

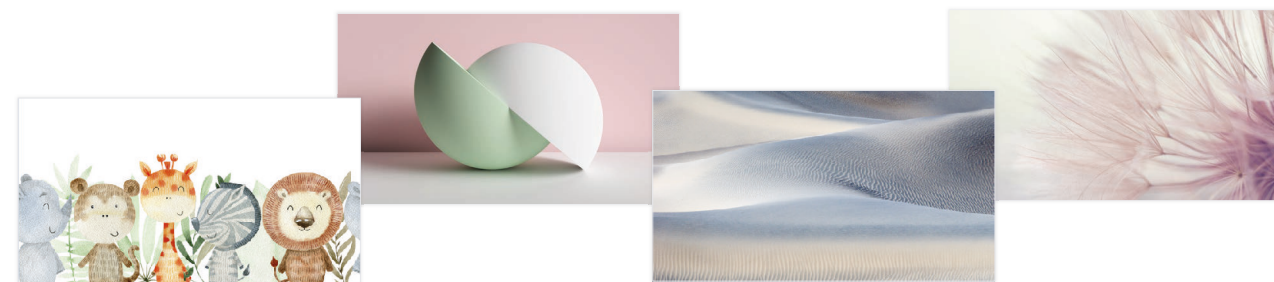

Kies uit een reeks thema's als achtergrond van uw scherm, passend bij het design van uw praktijk.



Maak eenvoudig een koppeling met uw patiëntmanagementsysteem.

Met de CONNECTlink-software koppelt u uw patiëntmanagementsysteem aan de tandheelkundige unit van KaVo, zodat u snel en eenvoudig patiëntgegevens en klinische beelden kunt overzetten. Hiermee krijgt u direct toegang tot alle relevante gegevens op het touchscreen van het behandellement van uw tandheelkundige unit van KaVo en kunt u zoals gebruikelijk nieuwe klinische beelden met de KaVo-camera's toevoegen. Dankzij CONNECTlink worden deze beelden automatisch doorgestuurd naar het patiëntmanagementsysteem en toegewezen aan het bestand van de betreffende patiënt.

De CONNECTlink-software kan als een losse module voor aangeschaft voor uw bestaande CONNECTbase-patiëntcommunicatiesysteem. Om de CONNECTlink-software te kunnen gebruiken, hebt u CONNECTbase nodig en de bijbehorende CONNECTlink-licentie op de betreffende tandheelkundige unit van KaVo.

Equipment opties

Stoel voor de patiënt

Zachte bekleding	●
Zachte RELAXline-bekleding	○
Rugleuning	
Progress (geoptimaliseerd)	●

Hoofdsteun

Dubbel scharnierend met draaiknop	●
Dubbel scharnierend met drukknop	○
Comfort hoofdsteun	○

Armleuning

Links	○
Rechts	○

Behandelelement

	TM	S	C
Touchscreen	●	●	●
SMARTdrive	●	●	●
4 instrumenthouders ²	○	○	○
5 instrumenthouders	●	●	●
6 instrumenthouders	○	○	○
Turbineslang	○	○	○
INTRA LUX Motor KL 703 LED™	○	○	○
Geïntegreerde torque control (endo)	○	○	○
KaVo eSCALER/ultrasone scaler	○	○	○
SONICflex™ sonische scaler	○	○	○
3F-spuit	x	x	x
Minilight 3F/G3F	x	x	x
MF-spuit	○	○	○
Fysiologische zoutoplossing	○	○	○
S600 LED chirurgische motor	○	○	○
Sprayverwarming voor instrumenten	○	○	○
USB-interface	○	○	○
Pneumatische remmen voor armsysteem	-	○	-
Trayhouder voor twee standaardtrays	○	○	-
Servicetablet 1568 voor twee standaardtrays	-	-	○

Assistentelement

Capacitief touchscreen	●
3 instrumenthouders	●
Spraynevelafzuiging	●
Speekselafzuiging	●
3F-spuit	○

Minilight 3F/G3F	○
Satelec MiniLED polymerisatie-instrument	○
Trayhouder	○
Draai- en hoogteverstelling	●
Selectief ventielen	●
Korte arm	x
Rechts/links draaiend assistente element	○

Spittoon

Spittoonschaal van porselein	x
Glazen spittoonschaal, rookgrijs	x
Hygiëncentrum	●
Continu desinfectie ¹	○
Intensieve desinfectie ¹	○
HYDRoclean (spoelsysteem voor afzuiging)	●
Boiler voor warm water	○
VACUstopp	●
Draadloos voetpedaal	○

Watersysteem

Compact waterblok	●
DVGW-waterblok	○
DVGW-waterfles	○
Aansluiting op externe apparaten	○
Vacuümventiel	○

Afzuigstelsysteem

Externe nat-afzuiging	●
DÜRR-amalgaamafscheider	○
DÜRR automatische afscheider	○


Operatielamp

KaVo Lumina	○
MAIA LED	○
Bevestigingskolom voor operatielamp	○
Adapter voor bevestigingskolom voor operatielamp (bv. voor KaVo ProXam iX)	○

Patiënt communicatie

KaVo CONNECTbase	○
CONEXIO	○
KaVo Screen	○
KaVo ProXam iCam	○
KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○


Bekledingskleuren 'Inspired by Nature'

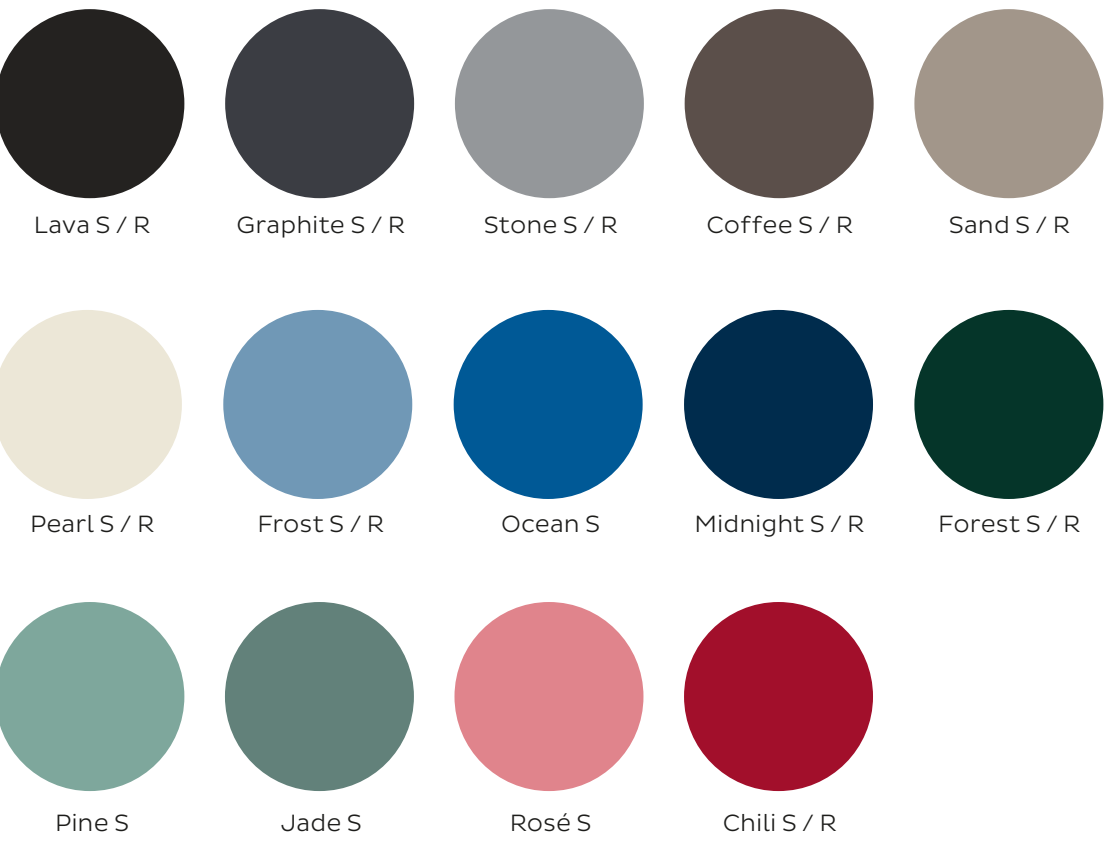

Verkrijgbaar als:
S – Standard
R – RELAXline



Standard
Traditionele bekleding met matte finish.

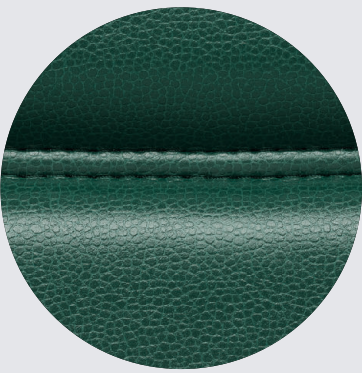

RELAXline
Finish in leerlook, geheugenschuim met decoratieve naden.

Moderne designstijl van topkwaliteit: alle bekleding van KaVo wordt met de hand vervaardigd in Duitsland met designstudiokwaliteit. Zowel de RELAXline-bekleding met een zacht oppervlak in leerlook en opvallende stiksels, als de traditionele bekleding met een matte finish zijn elegant uitgevoerd in de 'Inspired by Nature'-kleuren. Afhankelijk van de bekleding die u kiest, staat de kleurencollectie garant voor veelbelovende opties voor esthetische accenten aan uw tandheelkundige unit, passend bij de nieuwste interieurtrends.

● Standaardapparatuur | ○ Optionele apparatuur | x Moet geselecteerd worden | - Niet beschikbaar
¹ Uitsluitend in combinatie met DVGW-waterblok en DVGW-waterfles | ² Voor een lagere prijs

Dental Excellence op elk gebied

Waar ons merk voor staat

KaVo is een betrouwbare fabrikant die zich al heel lang bewijst en dat ook blijft doen. Wij en onze producten staan al meer dan 100 jaar voor de hoogste kwaliteiten en betrouwbaarheid, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op wat belangrijk is.

KaVo is flexibel en compromisloos als het gaat om het combineren van essentiële voorwaarden, ergonomie, de hoogste hygiëne- en designstandaarden om te komen tot het beste totaalpakket. Door ons perfecte samenspel van dynamiek en expertise lopen wij altijd voorop.



KaVo tandheelkundige units –
een investering in uw gezondheid



KaVo-instrumenten –
voel het verschil.



KaVo-beeldvorming –
zie meer, plan beter



Tandheelkundige training –
effectief leren

De producten, apparatuur en diensten die in deze brochure worden weergegeven en beschreven, zijn mogelijk niet in ieder land verkrijgbaar. De hier gegeven informatie is een afspiegeling van de kennis die op het moment van afdrukken beschikbaar is. KaVo Dental GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afwijkingen voor wat betreft kleur en vorm in de afbeeldingen, of mogelijke fouten of drukfouten, en behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de brochures.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Primus en Lumina zijn gedeponeerde handelsmerken van KaVo Dental GmbH.