

KAVO


AMIQA

Tout Simplement
Indispensable.



KAVO
Dental Excellence

KaVo – Le fauteuil dentaire. Un investissement pour votre santé

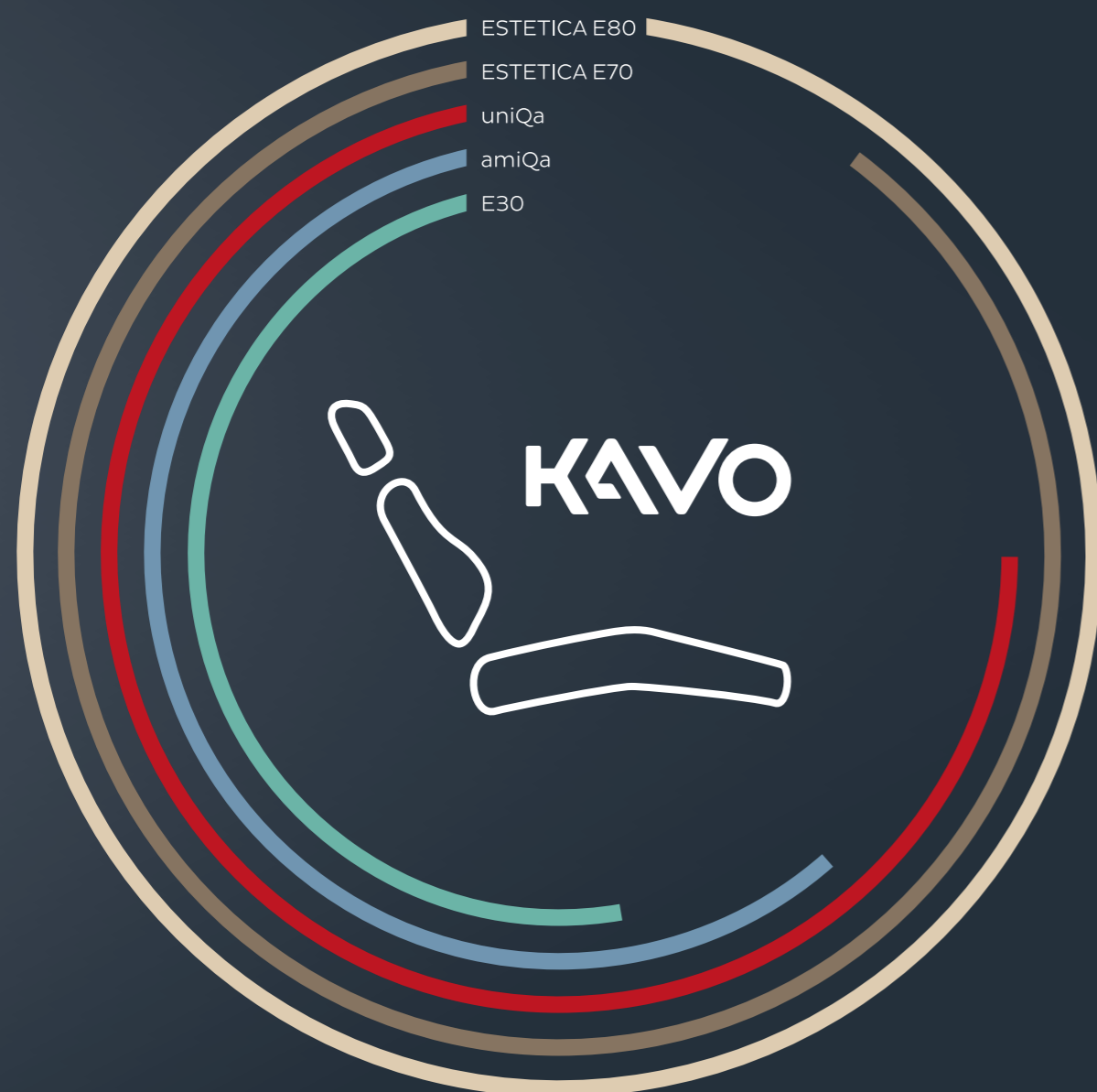

Les fauteuils dentaires KaVo sont les partenaires de confiance de votre cabinet. Les fauteuils dentaires KaVo sont incomparables lorsqu'il s'agit de favoriser une posture naturelle avec une liberté de mouvement et de courtes distances d'accès. Ils constituent la solution ergonomique idéale à toutes les conditions de traitement que vous pouvez imaginer. Notre objectif est de combiner les normes d'hygiène les plus strictes et une conception hautement esthétique pour ensuite créer une expérience agréable, tant pour les utilisateurs que pour les patients. Ce pack se caractérise par une longue durée de vie et une fiabilité totale : Made in Germany.



ERGONOMIE

Le confort ultime à la fois pour les dentistes et pour les patients. Le bien-être et la santé à long terme de l'équipe de votre cabinet sont notre priorité absolue.



EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Quand la fonctionnalité ingénieuse rencontre une personnalisation intelligente : le duo gagnant pour des cabinets efficaces et performants.



HYGIÈNE

Une plus grande sécurité à chaque processus : découvrez l'hygiène complète signée KaVo. Vivez nos processus entièrement automatisés, ainsi que nos solutions d'hygiène intelligentes et intuitives.



QUALITÉ

Une fiabilité éprouvée grâce au Made in Germany : KaVo offre la meilleure qualité depuis plus de 100 ans. Nous utilisons uniquement des composants robustes et de haute qualité et contrôlons la conformité de l'ensemble de nos produits avec les normes de qualité internationales et nationales les plus strictes. Pour plus de durabilité, de stabilité et de fiabilité.



ERGONOMIE



**EXPÉRIENCE
UTILISATEUR**



HYGIÈNE



QUALITÉ

Le meilleur choix : quelle que soit la position

- L'espace optimal pour les jambes, ainsi que la finesse du dossier et de l'appuie-tête, permettent d'accéder facilement au patient
- Le confort de la tête aux pieds pour les patients et les utilisateurs
- Une atmosphère relaxante : éclairage indirect et SPALight
- Ajustement flexible grâce à une grande plage de réglage en hauteur et une capacité de charge élevée
- Commande au pied ergonomique: légère, multifonctionnelle et idéale pour travailler avec sereinement
- Voyez davantage avec le nouveau scialytique Lumina

Technologie de pointe, maniement intuitif et efficacité maximale pour une utilisation optimale en cabinet

- Écran tactile haute-résolution 7" : réactif, intuitif, rapide et facile à utiliser
- Travail efficace : l'accès rapide à toutes les fonctions optimise votre travail quotidien
- Commande centrale : utilisation rapide et facile des fonctions du fauteuil du patient, de l'hygiène et du scialytique pour les dentistes et les assistantes
- Communication directe avec le patient au niveau du fauteuil pour plus de confiance et de transparence

Une expérience agréable avant, pendant et après le traitement

- Bloc d'eau DVGW, l'incontestable pionnier : sécurité et fiabilité
- La station d'hygiène entièrement automatisée assure la préparation et le traitement de l'eau
- Conseils d'experts avec instructions simples étape par étape
- Unique, la réduction du niveau de germes par aspiration avec le gel permet aux tuyaux d'aspiration d'être particulièrement efficaces

Conçu, développé et fabriqué en Allemagne

- Extrêmement robuste : base solide formée de 143 kg de métal
- Matières plastiques haute-qualité : certifiées pour répondre aux exigences élevées du quotidien
- Peu de maintenance et entretien facilité : une technologie de pointe associée à des composants électroniques éprouvés
- Fiable même avec des charges lourdes : testé pour durer plus de 10 ans et supporter des charges de 660 kg
- Assistance professionnelle rapide : service de techniciens et d'assistance téléphonique en ligne

Facile. Précis. Excellent

Parce que les vraies valeurs sont celles qui comptent.

KaVo amiQa incarne les principaux aspects de l'amitié, notamment avec son nom. Les vrais amis ne nous abandonnent jamais. Ils nous rassurent et nous donnent toujours le sourire. Avec amiQa, l'essence de l'ADN KaVo a donc été insufflée en un concept rationalisé : qualité optimale, processus d'hygiène simples mais ingénieux, ergonomie sophistiquée et conception pleine de fraîcheur. Des fonctionnalités de base aux équipements spécialisés, amiQa séduit par ses qualités extérieures et intérieures.

Vous pourrez compter sur lui : amiQa sera votre fidèle compagnon, en principe pour toute la vie.

KaVo amiQa – points forts :



Conception : dynamique, moderne et compacte

1. Aspect élégant avec une finition ultra-sportive
2. Corps de l'unité fin avec des lignes épurées
3. Élément assistant compact avec trois supports d'instruments. Également disponible en modèle pivotant droite/gauche pour transformation en fauteuil pour droitiers et gauchers
4. 14 couleurs de sellerie assorties aux tendances actuelles en matière d'intérieur
5. Élément d'éclairage optionnel pour une lumière décalée et une atmosphère de spa reposante

Élément du praticien : fiez-vous à votre intuition

6. Trois modèles de tablette compacts pour droitiers et gauchers : tablette TM, tablette S et cart
7. Écran tactile haute-résolution 7" : technologie intuitive et tactile pour un accès direct et rapide à toutes les fonctions essentielles
8. Modèle compact avec 4 supports d'instruments. Versions 5 ou 6 supports d'instruments également disponibles
9. Large gamme d'options d'équipement (de basique à spécialiste) : pour toutes les indications, avec fonctions endodontiques et chirurgicales intégrées
10. KaVo eSCALER : détartréur ultrasonique fiable et entièrement réutilisable pour une prophylaxie efficace. 100 % Made by KaVo.
11. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD : caméra intraorale 3-en-1 pour des diagnostics de caries optimisées en résolution full HD
12. Communication avec le patient simple et indépendante du réseau avec KaVo CONNECTbase autonome ou la version en réseau avec CONNECTlink

Concept d'ergonomie KaVo : un travail ergonomique quelles que soient les conditions de traitement

13. Fauteuil du patient compact pour un confort ergonomique exceptionnel : espace pour les jambes, commande au pied légère et librement positionnable, dossier et appui-tête fins pour un accès au patient facilité
14. Sellerie souple pour un confort et une décontraction en position allongée
15. Les accoudoirs pivotent vers le bas : le patient peut donc s'installer et sortir du fauteuil plus facilement sans restreindre sa liberté de mouvement.
16. Courtes distances d'accès et options d'équipement intégrées

Fonctions d'hygiène : pour plus de sécurité

17. Guide d'hygiène intuitif et station d'hygiène compacte pour le rinçage automatisé et la réduction du niveau de germes des tuyaux d'instruments. Robinet d'eau additionnel pour les tuyaux d'aspiration

L'accessoire qui se démarque : une technologie de pointe pour une excellente visibilité

18. Nouveau scialytique Kavo Lumina avec technologie UX Light, SPALight, mode COMPOshape et facilité d'utilisation

Ciao, bella !

Le nouveau KaVo amiQa n'affiche pas seulement des fonctionnalités technologiques impressionnantes : il fait aussi sensation dès la première utilisation. Sa conception élégante et sportive, ainsi que ses lignes épurées, lui permettent de parfaitement s'intégrer aux petites pièces d'un cabinet. Fin et compact, le corps de l'unité aux contours superbement conçus s'inscrit totalement dans le style de la toute nouvelle génération KaVo.

L'aspect frais et unique d'amiQa est renforcé par les couleurs de sellerie « Inspired by Nature », des couleurs entièrement assorties aux toutes dernières tendances en matière d'intérieur. La collection de couleurs KaVo compte 14 nuances qui peuvent être choisies pour la sellerie haut de gamme confortable de RELAXline (avec des coutures de designer automobiles haute-qualité) et pour la sellerie souple traditionnelle KaVo (avec une finition mate et des lignes sportives).

L'élément d'éclairage optionnel figurant sur le fauteuil du patient offre également une lumière douce et indirecte, ainsi qu'une atmosphère de SPA détendue.

LITTÉRALEMENT INCROYABLE : LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉCRANS TACTILES



Vitesse de réponse et netteté de la nouvelle génération d'écrans tactiles séduisent les utilisateurs. Intuitive et explicite, l'interface utilisateur de l'élément du praticien et son panneau en verre haute-qualité arantissent des flux de travail fluides, rapides et détendus.

Un ami pour la vie

Le principe d'amiQa est parfaitement simple : vous pourrez compter sur lui pour vous accompagner et faire un excellent travail, quelle que soit la situation de traitement. Soutien indéfectible, il répondra parfaitement à vos besoins en proposant une gamme d'options d'équipement pour les éléments du praticien et les éléments assistante. amiQa offre des paramètres personnalisés facilement programmables pour différents utilisateurs, y compris l'affectation des touches sur l'écran d'accueil. Et même si les circonstances changent, amiQa vous restera fidèle. Le rétrofit permet une série d'adaptations allant de cinq ou six plateaux à l'ajout de fonctions endodontiques et chirurgicales. Voilà la véritable amitié !



Tout est prêt : les paramètres enregistrés (jusqu'à cinq types de traitement) peuvent être appelés rapidement et avec fiabilité pour chaque instrument et pour un maximum de six praticiens.

Fabuleusement intuitif

Ecran tactile de toute dernière génération : l : son écran haute-résolution, son utilisation simple et intuitive, ainsi que sa vitesse élevée de réponse, en feront également votre compagnon du quotidien. Cet écran vous présentera immédiatement toutes les informations-clés et vous permettra d'accéder aux fonctions avec rapidité et facilité.

Simplement parfait !

Tablette TM



Tablette S



Cart



Droitier ou gaucher ? Et, pourquoi pas les deux ?

Les trois modèles de tablette amiQa conviennent aux droitiers et aux gauchers. Au besoin, vous pourrez convertir n'importe quelle version choisie. Des combinaisons personnalisées sont également possibles. La tablette S et le cart peuvent être par exemple couplés à un élément assistante pivotant à droite et à gauche : vous pourrez ainsi changer facilement de côté à n'importe quel moment.



Intelligence et simplicité : en harmonie avec vos besoins

Pratiques, les 4 supports d'instruments de l'élément du praticien répondent parfaitement aux exigences de base ou aux applications de prophylaxie. L'élément du praticien de l'amiQa peut être aussi mis à niveau et afficher une configuration à 5, voire 6 supports d'instruments. Vous choisissez ce dont vous avez besoin au quotidien.

Les bonnes choses se déclinent au nombre de trois : choisissez votre modèle idéal

Les trois versions de l'élément du praticien amiQa offrent des manipulations courtes et ergonomiques. Selon votre préférence, la tablette TM, le cart et la tablette S présentent une série d'avantages au quotidien. La tablette S, par exemple, compte trois positions de verrouillage ergonomiques qui équilibrent parfaitement le poids des tuyaux des instruments avec trois longueurs (50 cm, 70 cm ou 90 cm). En version cart, l'élément du praticien n'est pas suspendu au-dessus du patient, mais monté sur des roulettes à côté du fauteuil.

La version de tablette TM affiche une surface de rangement particulièrement spacieuse formant une passerelle utile entre le dentiste et l'assistante.

INSTRUMENTS KAVO : SENTEZ LA DIFFÉRENCE.



Nos instruments sont fabriqués avec les meilleurs matériaux exclusivement pour nos produits. Ces éléments sont couplés à l'architecture unique de nos produits constitués d'une seule pièce de matériau solide : pour une précision et une durabilité extraordinaires. Nous définissons la norme des instruments dentaires d'aujourd'hui. Cette riche expérience, issue de plus d'un siècle d'innovation constante, se reflète dans la conception et la fonctionnalité de nos instruments actuels. Résultat : des performances optimales pour l'utilisateur grâce à un travail précis et sans fatigue.



Des produits qui répondent à vos attentes

Lorsqu'il s'agit de vos instruments, vous voulez le meilleur. Les instruments Kavo couvrent tous les champs d'application et offrent la meilleure visibilité, ainsi que le meilleur accès possible à la cavité buccale : pour que vous puissiez toujours offrir un traitement de qualité et de précision. En combinaison avec le micromoteur INTRA LUX KL 703 LED léger, ultra-compact et silencieux, vous pourrez travailler efficacement et sans vous fatiguer avec SMARTdrive sur toute la plage de vitesse (de 100 à 40 000 tr/min).



Une technologie d'expert pour tous



Le nouveau KaVo eScaler

Le nouveau KaVo eScaler : Made in Germany – Made by KaVo.

eSCALER nettoie les dents avec une précision et une rapidité extrêmes : l'oscillation linéaire de l'insert est très efficace (jusqu'à 30 000 Hz). La vibration ultrasonique définie avec précision, la pièce à main à forme ergonomique, l'éclairage à la lumière du jour et les inserts fins, qui permettent aux utilisateurs d'accéder facilement aux zones difficiles d'accès, offrent un confort de traitement maximal pour le patient et le praticien.



KaVo SONICflex : un professionnel polyvalent pour les meilleurs résultats

SONICflex est un professionnel polyvalent : il peut gérer presque n'importe quel type d'indication et offre un traitement confortable et doux pour l'émail. Avec une vibration sonore légèrement pulsée à environ 6 000 Hz et un choix de plus de 50 inserts, ce détartreur est apprécié des patients et des praticiens. Il se prête parfaitement à tous les champs d'application (y compris la prophylaxie, l'endodontie, la parodontie, le traitement mini-invasif des caries et la préparation).

Une endodontie de pointe

Avec 3 modes de contrôle des fichiers différents, les fonctions endodontiques intégrées vous évitent d'avoir à acheter un dispositif endodontique coûteux.

La base de données intégrée comprenant près de 200 fichiers prédéfinis vous permet d'appeler, de paramétrer et d'enregistrer des paramètres-clés (p. ex le rapport de transmission et les valeurs de couple via l'élément praticien), mais aussi d'ajouter à tout moment de nouveaux fichiers.




L'option chirurgicale intelligente

L'amiQa est équipé de l'INTRA LUX S600 LED : les interventions les plus complexes vous procureront un confort inédit. Ce moteur chirurgical est l'un des plus légers et des plus petits.


En combinaison avec les instruments chirurgicaux KaVo et la pompe à sérum physiologique intégrée, vous disposerez de toutes les fonctions d'un appareil chirurgical moderne.



PARCE QUE LA SANTÉ EST NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

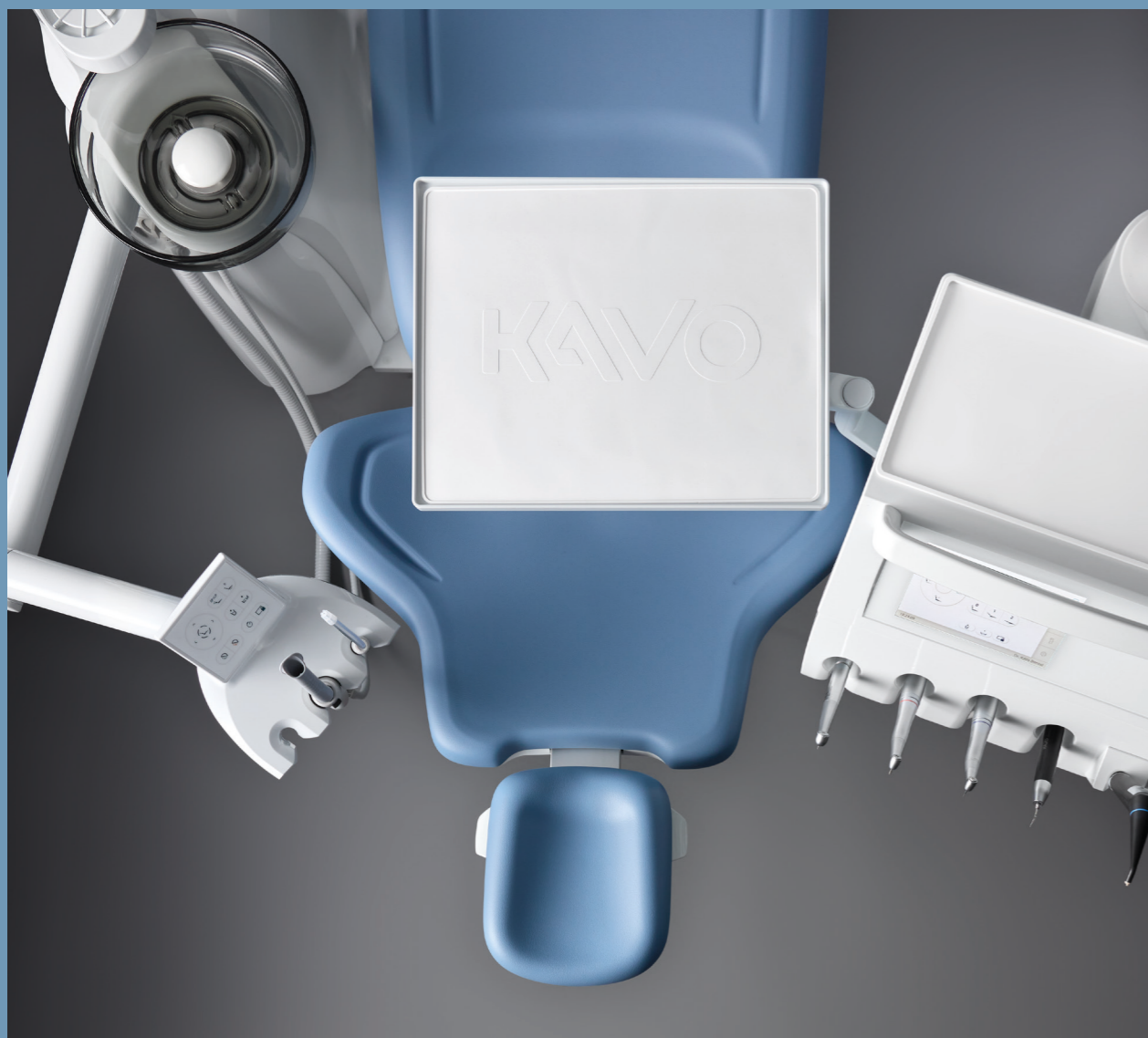

Le fauteuil KaVo offre un concept ergonomique sophistiqué : investir dans cet équipement signifie aussi investir pour la santé de votre cabinet. L'ergonomie générale de l'amiQa est conçue pour que les procédures de traitement soient les moins stressantes possibles : avec des processus intuitifs, elle favorise en effet une posture équilibrée et agréable pour le dos. Vos patients en profiteront également, car ils seront allongés sur l'amiQa dans une position confortable et détendue.

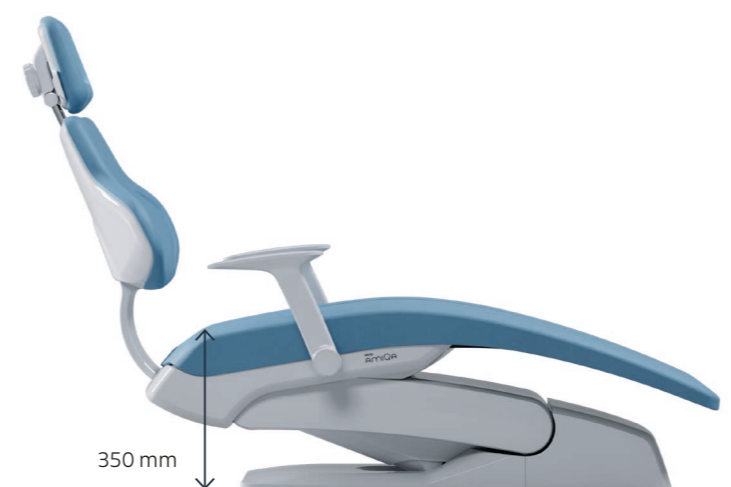

amiQa offre toutes les fonctions d'un fauteuil dentaire, même quand il est occupé par un patient très corpulent.



Les vrais amis...

... se mettent à votre niveau

Le fauteuil peut être réglé à une hauteur allant de 350 mm à 830 mm : vous bénéficierez donc d'un confort ergonomique optimal, que vous préférerez intervenir assis ou debout.

... vous donnent de la liberté

Le fauteuil du patient =amiQa offre beaucoup de place et d'espace pour les jambes. Vous pouvez également positionner la commande au pied à l'endroit qui vous convient le mieux, la conception fine du fauteuil du patient et la plaque d'appui pour les pieds offrant beaucoup d'espace. Vous pourrez donc travailler dans une position détendue et agréable pour le dos, tout en étant suffisamment proche du patient.





Le meilleur choix : quelle que soit la position

Un positionnement optimal n'est pas seulement confortable pour le patient : il est également essentiel à une position de travail ergonomique. Selon la taille du patient et l'indication, le coussin réversible polyvalent et l'appuie-tête à double articulation réglable en continu permettent de s'allonger confortablement ; avec ces éléments, vous pourrez aussi voir et accéder correctement à votre espace de travail. Le RELAXline et le coussin de tête confort offrent davantage de confort. La sellerie haut de gamme contient de la mousse à mémoire de forme qui épouse parfaitement le corps du patient : pour un confort garanti en position allongée, même pendant les traitements longs. Vos patients seront totalement détendus et vous disposerez d'un accès optimal.



Dossier « Progress » : posture de travail optimale et accès à la bouche du patient. Coudière large pour davantage de confort.

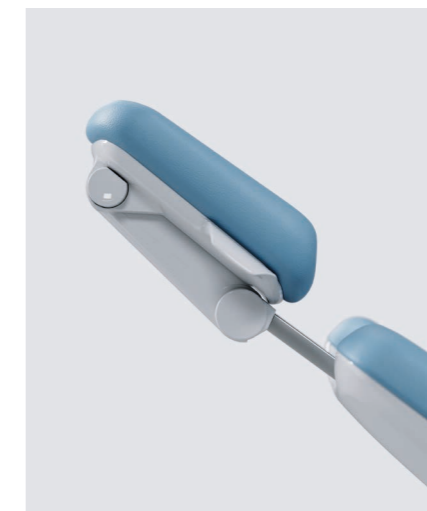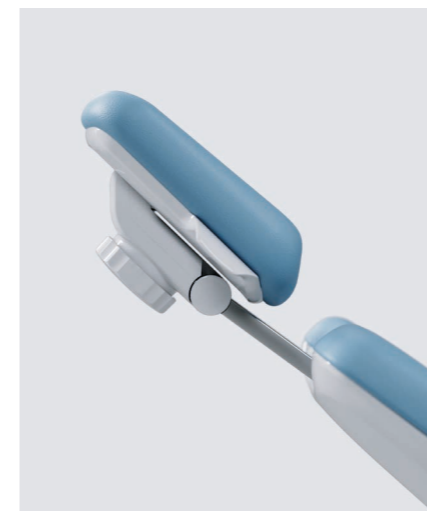

Simple et pratique : appuie-tête à double articulation facile à utiliser avec bouton de rotation ou bouton-poussoir et coussin de tête pivotant.




La position parfaite

amiQa permet à vos patients d'être allongés dans une position ergonomique et confortable. La position de Trendelenburg intégrée permet au repose-pied de s'incliner et de se relever automatiquement en fonction de l'inclinaison du dossier. Cette position combinée empêche que le dos du patient ne se comprime ou ne s'étire au moment du réajustement du dossier. La position surélevée des jambes favorise également la circulation sanguine du patient.

Facilité d'entrée et de sortie


Les accoudoirs amiQa pivotent vers le bas, ce qui facilite l'entrée et la sortie. Vous offrez à vos patients un soutien et une sécurité sans compromettre leur liberté de mouvement.

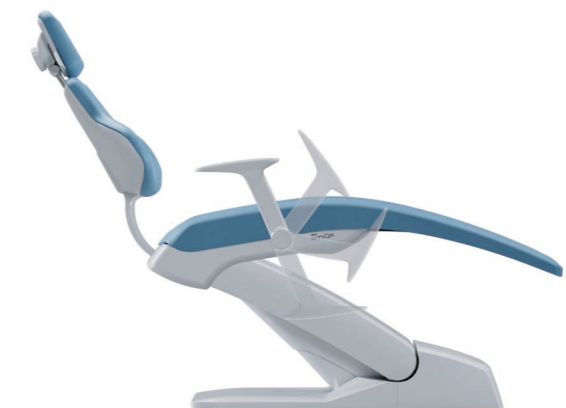

Un vrai amiQa : fiable quelle que soit la situation

Chaque mouvement est un chef-d'œuvre

Un traitement exige que chaque mouvement soit parfaitement effectué. Les distances à parcourir doivent être courtes et intuitives, que vous fassiez le traitement seul ou avec un assistant. Les éléments du praticien amiQa, le sup-

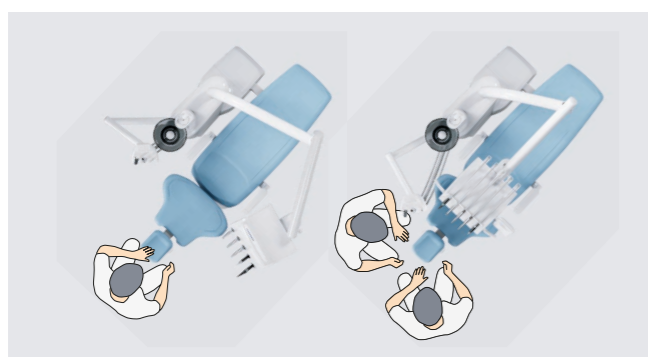

port de plateau et l'élément assistante offrent une grande amplitude de mouvement et en fonction des besoins, peuvent être positionnés quel que soit le moment. La version à bras pivotant vous donnera aussi un espace supplémentaire grâce à une extension maximale des tuyaux d'instruments de 90 cm et une table de seulement 45 cm de haut.



Une aide pour les assistantes

L'élément assistante compact d'amiQa est équipé d'un panneau tactile capacitif et d'une interface utilisateur clairement configurée. Les fonctions centrales du fauteuil côté patient, de rinçage et d'éclairage sont accessibles rapidement et directement. Le réglage flexible de la hauteur et la grande plage de pivotement offrent aussi une meilleure ergonomie.



Vous avez les mains prises ? Pas avec la commande au pied KaVo !

La commande au pied permet de contrôler l'ensemble des fonctions et dispositifs intégrés avec simplicité et ergonomie, y compris la communication avec le patient. Outre sa facilité d'utilisation, elle présente l'avantage supplémentaire de réduire le risque d'infection croisée. Le positionnement est encore plus souple avec le modèle sans fil.



Les flux de travail efficaces exigent de courtes distances

Au cœur de l'action

Le système KaVo Centro se situe au cœur du fauteuil. Ce système intelligent permet de ranger en un seul endroit tous les dispositifs de manière judicieuse et ergonomique. Chaque dispositif est rapide et facile d'accès. Vous souhaitez convertir votre appareil ou l'équiper ultérieurement de nouvelles technologies ? Avec le système Centro, aucun problème. Les dispositifs et composants peuvent être échangés rapidement et facilement avec de nombreux adaptateurs. Avec sa courte portée, votre amiQa permet d'optimiser les flux de travail : vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel.



Une souplesse exceptionnelle : le système KaVo Centro



Radiographies intraorales sur place

Le KaVo ProXam iX peut être facilement installé sur la tige de montage de la lumière avec un adaptateur. Vous pourrez donc créer sur le fauteuil lui-même des images radiographiques adaptées à l'indication radiologique : rapidité, précision et facilité.



LA PROPRETÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ : L'HYGIÈNE AVEC AMIQA



Avec amiQa, le processus d'hygiène optimal est simple, sans effort et entièrement fiable. Les composants-clés peuvent être facilement retirés pour la réduction du niveau de germes, les surfaces sont aussi faciles à nettoyer et le rinçage des tuyaux d'instruments est automatisé.

Quand les bonnes pratiques d'hygiène sont plus faciles

Une station d'hygiène est intégrée au corps de l'unité amiQa : pour un nettoyage fiable et une réduction du niveau de germes dans les tuyaux d'instruments. Les tuyaux d'instruments sont placés à cet endroit pour faciliter le rinçage automatique. La station d'hygiène comprend également des robinets permettant de rincer manuellement les tuyaux d'aspiration à l'eau claire. Cette station est détachable et thermodésinfectable.


Quand l'eau est à l'honneur

Le programme automatisé HYDROclean nettoie sans effort les systèmes de drainage et de séparation et est automatiquement combiné aux programmes de rinçage des instruments. Avec amiQa, votre système d'aspiration sera donc plus durable.



Programmes de rinçage automatique


Les protocoles de nettoyage préprogrammés vous offrent une assistance complète dans le fonctionnement d'amiQa, conformément aux spécifications du RKI. Le guide d'hygiène vous aide à préparer l'appareil étape par étape, que ce soit après le traitement, le matin, le soir ou sur une base hebdomadaire. Les programmes se chargent ensuite eux-mêmes du rinçage et du nettoyage des tuyaux d'instruments.

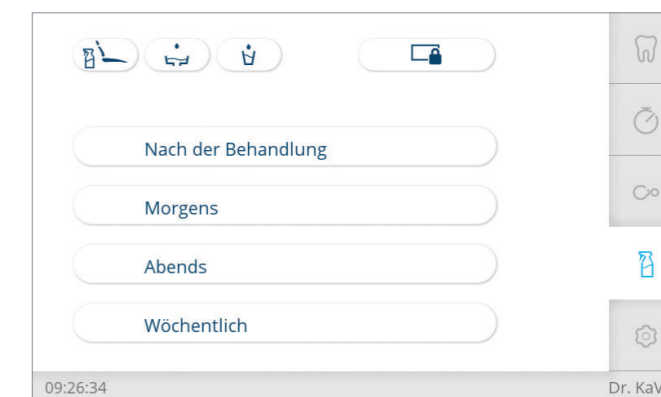

Sécurité, hygiène et flexibilité : aucune exception, aucun compromis.
Avec le bloc d'eau DVGW.

Avec sa technologie d'eau nouvelle génération, KaVo définit de nouvelles normes pour la pièce centrale de son fauteuil dentaire.

Le bloc d'eau DVGW fournit l'eau du vaporisateur et de rinçage pour les instruments et le patient, et distribue automatiquement la concentration correcte d' OXYGENAL 6. La conception en cascade du bloc d'eau empêche l'eau du fauteuil de revenir dans le système d'eau potable. La qualité de votre approvisionnement en eau est donc respectée, tout comme les normes rigoureuses du DVGW. L'inondation du bassin collecteur avec le concentré OXYGENAL 6 permet aussi de nettoyer le trajet en cascade. Vos patients bénéficieront donc des niveaux d'hygiène et de sécurité les plus élevés.

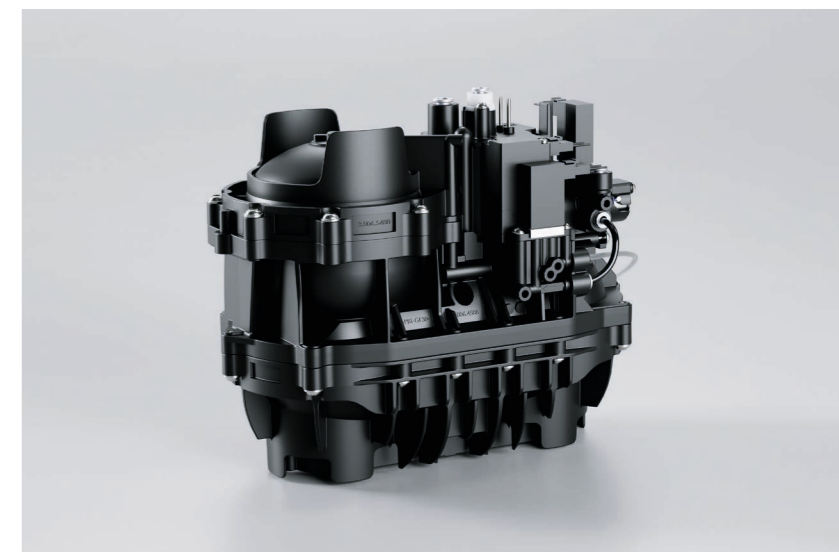

Système d'alimentation en eau protégé

Les instruments et moteurs KaVo sont équipés d'un système anti-reflux qui empêche l'eau du vaporisateur contaminé d'être aspirée dans le fauteuil. Le système d'alimentation en eau est donc protégé.



Gain de temps : DEKASEPTOL Gel prêt à l'emploi peut être appliqué directement dans les tuyaux et systèmes d'aspiration. Avantage particulier : le gel adhère aux points critiques au lieu d'être simplement rincé.

Une protection optimale contre la contamination

Grâce à amiQa, la protection contre la contamination sera également un jeu d'enfant. Avec OXYGENAL 6, la réduction du niveau de germes continu garantit qu'aucun micro-organisme ne peut se propager pendant les activités normales du cabinet. Le programme intensif de ré-


duction du niveau de germes (programme de nettoyage « hebdomadaire ») vous permet de protéger vos patients des micro-organismes pouvant se former pendant les temps d'arrêt (p. ex. les week-ends ou les vacances), et de garantir la qualité irréprochable des liquides de refroidissement et de rinçage.



Les poignées, les supports d'instruments, les crachoirs, les bras pivotants et les tapis en silicone sont faciles à retirer et à désinfecter. Les parties supérieures et inférieures du boîtier sont entièrement fermées : aucune poussière ne peut donc pénétrer dans votre fauteuil. La poignée hygiénique permet de changer les filtres d'aspiration facilement et en toute sécurité.

KaVo Lumina avec technologie UX Light. Appréciez la lumière de la dentisterie

KaVo Lumina établit de nouvelles normes d'éclairage dans les cabinets dentaires. Cet équipement véritablement éblouissant met la technologie de l'éclairage à un tout autre niveau, affiche une série de fonctions intelligentes et constitue une référence en matière d'expérience utilisateur. La technologie innovante UX Light permet d'éclairer parfaitement tous les niveaux jusqu'à la zone molaire, sans qu'il n'y ait de reflets gênants sur les dents antérieures. Combinée au champ lumineux optimisé, cette technologie est agréable pour les yeux et permet de travailler avec davantage de concentration. Avec son rendu de couleurs précis, le spectre de la lumière naturelle offre la qualité « Made by KaVo », améliorant ainsi le travail quotidien des passionnés de technologie et des amateurs de conception.

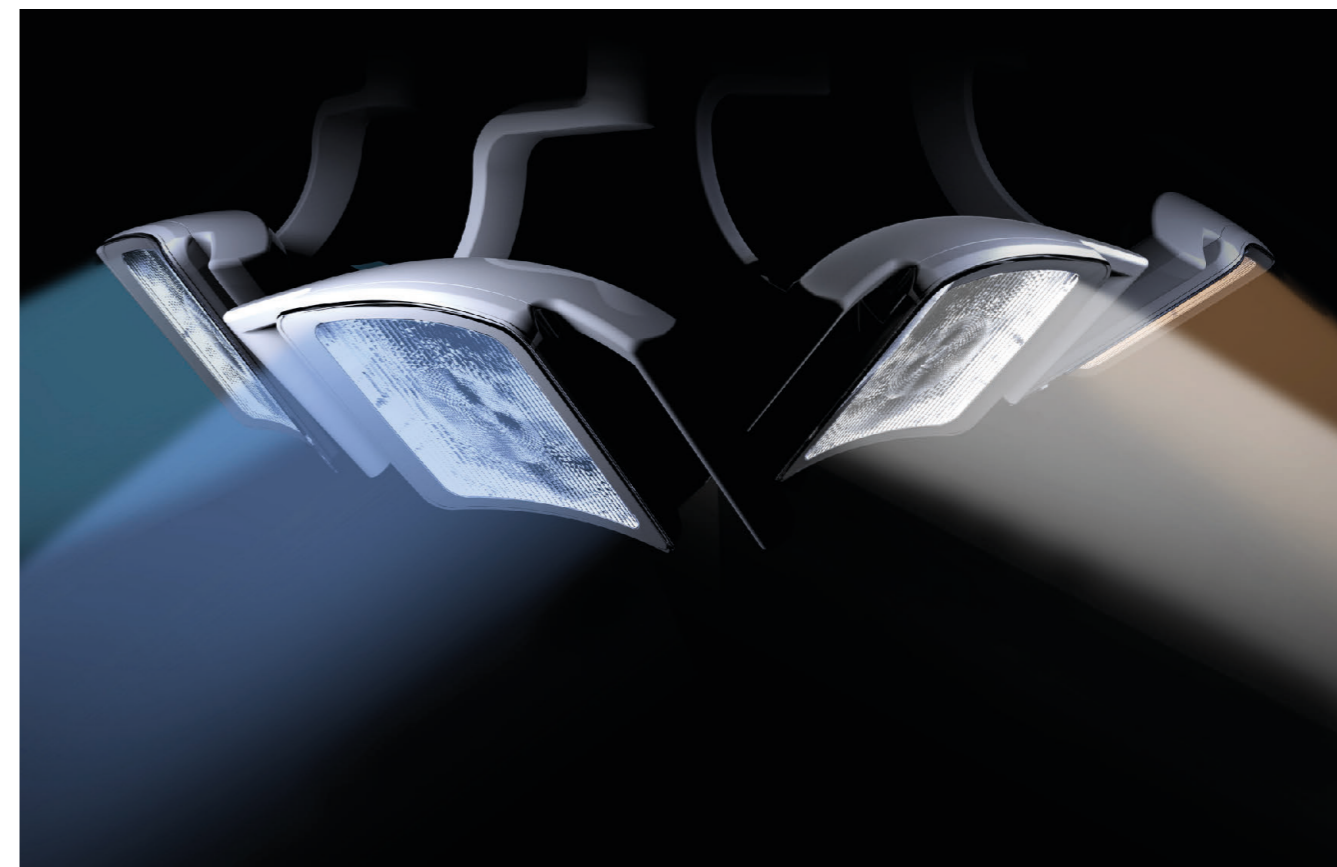

La fluidité du mouvement redéfinie

La combinaison d'une structure équilibrée et de poignées confortables, inspirées des couteaux utilisés par les chefs japonais, parfait le mouvement, ainsi que le positionnement en douceur de KaVo Lumina.



Mode COMPOshape

Avec sa proportion de bleu réduite, le spectre de couleurs du nouveau mode COMPOshape favorise une stratification esthétique. Une meilleure reproduction des teintes et des structures permet donc de voir les contrastes sans que le composite ne durcisse prématurément.



Technologie UX Light

La combinaison d'un seul système optique innovant et d'un collimateur unique donne naissance à la nouvelle technologie UX Light de Lumina. Cette technologie génère une lumière sans impulsion constante de qualité optimale. Avec le spectre de couleurs naturelles créé par la technologie UX Light, il n'est plus nécessaire de régler la température de couleur. Ce spectre permet aussi d'optimiser l'éclairage des molaires sans reflets gênants sur les dents antérieures. Il forme aussi un nouveau champ lumineux ergonomique.



Découvrez les différents modes de couleurs de Lumina

Mode SPALight

Le SPALight offre un jeu de couleurs composé de nuances de bleu et de vert à l'effet apaisant avéré (selon la psychologie des couleurs). Ce mode peut donc être utilisé pour créer une atmosphère relaxante, ainsi qu'une ambiance ressemblant à celle d'un spa avant et entre les traitements.

Les bons accessoires à portée de main



Avec les bons accessoires, donnez une touche personnelle en plus à votre amiQa ! Profitez du concept KaVo mix & match pour améliorer amiQa à vos goûts. KaVo propose un éventail d'options permettant d'intégrer des flux de travail efficaces et pratiques. L'écran tactile et la commande au pied facilitent l'accès à l'ensemble des fonctions et paramètres de vos dispositifs spéciaux intégrés. Faites d'amiQa le partenaire de confiance de votre quotidien, que ce soit pour la prophylaxie, l'orthodontie, la chirurgie ou l'endodontie.

KaVo MAIA LED

MAIA LED offre une technologie d'éclairage LED moderne à prix exceptionnel.

- Intensité lumineuse personnalisable jusqu'à 35 000 lux
- Éclairage uniforme d'une qualité proche de la lumière du jour (5 000 K) pour des couleurs et des textures naturelles.
- Champ lumineux constant quel que soit le positionnement grâce à la lumière indirecte donnée par les réflecteurs
- Poignées amovibles stérilisables pour des pratiques d'hygiène faciles et en toute sécurité.



La position parfaite

Il est difficile, mais essentiel pour un dentiste de garder une posture ergonomique équilibrée et confortable, quelle que soit la situation de traitement. Et rien n'affecte plus votre posture que le tabouret sur lequel vous asseyez tous les jours. Les KaVo PHYSIO Evo et Evo F sont précisément adaptés aux besoins et aux flux de travail des dentistes et de leurs assistants.



Confort ergonomique et commodité jusque dans les moindres détails

Les fonctions de réglage séparées permettent d'adapter l'assise et le dossier à votre anatomie et à votre manière de soigner. Le dossier et la sellerie d'assise de PHYSIO Evo sont moulés de manière ergonomique. L'élévation centrée de la sellerie d'assise crée une stabilité et empêche l'assise de glisser, même avec des mouvements de roulement rapides et brefs. Le support arrondi au niveau des cuisses vous offre une grande liberté de mouvement. Le dossier à ressorts soutient constamment les muscles du dos, notamment la région lombaire, et les protège ainsi durablement.

Un concept remarquable

Le fauteuil de traitement PHYSIO Evo a reçu le label de qualité de la « Campagne pour un dos en bonne santé » (Aktion gesunder Rücken, AGR). Un comité d'experts indépendant et pluridisciplinaire décerne ce prix en s'appuyant sur des critères stricts d'évaluation de l'ergonomie et de la santé.



LAISSEZ ALLER VOTRE IMAGINATION : VERS UNE COMMUNICATION OPTIMALE AVEC LE PATIENT.



Expliquez clairement et en détail à vos patients les traitements nécessaires grâce à des images de diagnostic haute-résolution et à des images avec un excellent rendu de couleurs.



DIAGNOcam Vision Full HD Le meilleur de l'innovation.

Imaginez une caméra vous offrant trois images ayant une importance clinique pour le diagnostic des caries, d'une netteté remarquable et en moins d'une seconde. Eh bien, le rêve devient réalité : avec DIAGNOcam Vision Full HD, vous pouvez choisir de prendre une image intraorale, par transillumination ou par fluorescence, ou encore combiner deux ou trois modes de prise de vue. Avec la résolution HD 1920 pixels x 1080 pixels, toutes les images s'affichent avec une netteté éclatante. Le faible poids et l'équilibre idéal de la caméra permettent de travailler sans fatigue et d'avoir une manipulation ergonomique.

KaVo ProXam iCam : Une petite caméra pour un grand impact

Exploitez des images parfaites d'une grande profondeur de champ et d'un excellent rendu de couleurs pour fournir des explications à vos patients. Facile à utiliser, ProXam iCam vous donne toujours l'image optimale. Cette caméra permet d'afficher une image nette à une distance de 9 à 35 mm. Elle compte aussi un mode macro. La capture d'images peut être déclenchée manuellement ou à l'aide de la commande au pied.



Des images à montrer à vos patients

L'écran KaVo 22" offre une qualité d'image haute-résolution Full HD, des valeurs de contraste impressionnantes, ainsi qu'un excellent rendu de couleurs. Avec ses deux entrées numériques, il fonctionne en coordination avec toutes les fonctions des appareils d'imagerie comme les caméras ou les microscopes. Pour une hygiène maximale, l'écran est équipé d'une vitre de protection, de petites ouvertures sur le boîtier et peut être ajusté d'une seule main. Le choix de l'évidence !



KaVo **CONNECT**
base

Le nouveau pilier de votre communication avec le patient : intégré, simple et efficace.

CONNECTbase ouvre la voie à un nouveau flux de travail dans la communication avec le patient. Vous pouvez utiliser CONNECTbase pour expliquer à vos patients leur situation dentaire directement sur amiQa, sans installer de logiciel supplémentaire. Connectez simplement votre caméra et démarrez immédiatement. Les images s'affichent sur l'écran du fauteuil et peuvent être comparées à celles enregistrées précédemment.

Principe du « plug-and-play » : des flux de travail rationalisés plus faciles


En utilisant les caméras directement avec le fauteuil KaVo, vous pouvez accéder aux images en un rien de temps et les exporter par USB.

Vous aurez tout autant de facilité à l'utiliser avec l'écran tactile ou la commande au pied de votre fauteuil : vous n'aurez donc pas à quitter votre poste de travail pendant le traitement ou à interrompre inutilement votre flux de travail.

Vous souhaitez accéder à des données supplémentaires ? Aucun problème. Vous pourrez afficher différentes sources HDMI sur l'écran de votre fauteuil en passant simplement d'un élément du praticien à l'autre.

Faites de vos traitements une expérience

Vous vous ennuyez moins pendant les temps d'attente et, si nécessaire, vous pourrez offrir un moment de détente bienvenu à vos patients en leur proposant des expériences visuelles sur le KaVo amiQa. Le grand choix de supports (y compris un écran d'accueil personnalisable et divers économiseurs d'écran avec un grand choix de photos ou de diaporamas) ravira les patients de tous âges. Vous pourrez en même temps utiliser votre écran pour promouvoir votre cabinet ou donner des informations utiles. amiQa vous permet de créer une expérience sur mesure.

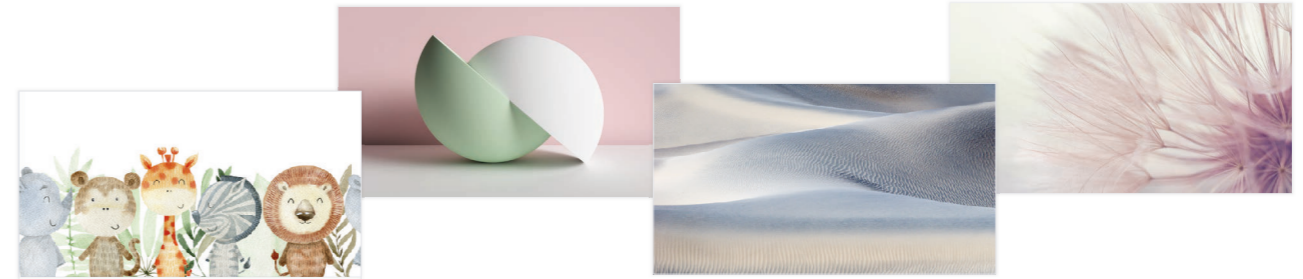

Assortissez le design de votre cabinet en choisissant parmi une grande variété de thèmes pour l'arrière-plan de votre écran.



KaVo **CONNECT**
link

Connectez votre logiciel de gestion de cabinet en toute simplicité.

Le logiciel CONNECTlink associe votre logiciel de gestion de cabinet au fauteuil KaVo : vous pourrez ainsi transférer rapidement et facilement les données de vos patients et les images cliniques. Vous accéderez directement à toutes les données utiles sur l'écran tactile de l'élément du praticien de votre fauteuil KaVo et pourrez ajouter, comme d'habitude, de nouvelles images cliniques avec les caméras KaVo. Grâce à CONNECTlink, ces images sont automatiquement transférées au logiciel de gestion de cabinet et affectées au dossier du patient concerné.

Le logiciel CONNECTlink peut être acheté en tant que module séparé pour votre système de communication patient CONNECTbase existant. L'utilisation du logiciel CONNECTlink requiert CONNECTbase, ainsi que la licence CONNECTlink correspondante sur le fauteuil KaVo concerné.

Options d'équipement

Fauteuil patient

- Sellerie souple ●
- Sellerie souple RELAXline ○
- Dossier ○
- Progress (optimisé) ●

Appuie-tête

- Double articulation avec bouton rotatif ●
- Double articulation avec bouton-poussoir ○
- Coussin de tête confort ○

Accoudoir

- Gauche ○
- Droite ○

Élément du praticien

- | | TM | S | C |
|---|----|---|---|
| Écran tactile | ● | ● | ● |
| SMARTdrive | ● | ● | ● |
| 4 supports d'instruments ² | ○ | ○ | ○ |
| 5 supports d'instruments | ● | ● | ● |
| 6 supports d'instruments | ○ | ○ | ○ |
| Tuyau de turbine | ○ | ○ | ○ |
| INTRA LUX Motor KL 703 LED™ | ○ | ○ | ○ |
| Contrôle du couple intégré (endo) | ○ | ○ | ○ |
| KaVo eSCALER/détartreur ultrasonique | ○ | ○ | ○ |
| SONICflex™ sonic scaler | ○ | ○ | ○ |
| Pièce à main triple fonction | x | x | x |
| Minilight 3F/G3F | x | x | x |
| Pièce à main multifonctionnelle | ○ | ○ | ○ |
| Solution saline physiologique | ○ | ○ | ○ |
| Moteur chirurgical LED S600 | ○ | ○ | ○ |
| Réchauffement par vaporisation pour instruments | ○ | ○ | ○ |
| Interface USB | ○ | ○ | ○ |
| Freins pneumatiques pour système de bras | - | ○ | - |
| Support de tablette pour deux plateaux standards | ○ | ○ | - |
| Tablette de service 1568 pour deux plateaux standards | - | - | ○ |

Élément assistante

- Panneau tactile capacitive ●
- 3 supports d'instruments ●
- Aspiration des brouillards de pulvérisation ●
- Éjecteur de salive ●
- Pièce à main triple fonction ○

- Minilight 3F/G3F ○
- Pièce à main de polymérisation Satelec MiniLED ○
- Support de plateau pour support de tablette ○
- Pivotant et réglable en hauteur ●
- Kit de support sélectif ●
- Bras court x
- Rotation droite/gauche ○

Corps de l'unité

- Crachoir porcelaine x
- Crachoir en verre, gris fumé x
- Station d'hygiène ●
- Réduction du niveau de germes constante¹ ○
- Réduction du niveau de germes intense¹ ○
- HYDROclean (système de rinçage par aspiration) ●
- Chauffe-eau ○
- VACUstopp ●
- Commande au pied sans fil ○

Système d'alimentation

- Bloc d'eau compact ●
- Bloc d'eau DVGW ○
- Bouteille d'eau DVGW ○
- Raccordement aux dispositifs externes ○
- Soupape de régulation du vide ○

Système d'évacuation

- Système d'aspiration humide externe ●
- Séparateur d'amalgames DÜRR ○
- Séparateur automatique DÜRR ○


Scialytique

- KaVo Lumina ○
- MAIA LED ○
- Tige de montage de la lumière ○
- Adaptateur pour tige de montage de la lumière (p. ex. pour ProXam iX) ○

Communication avec le patient

- KaVo CONNECTbase ○
- CONEXIO ○
- KaVo Screen ○
- KaVo ProXam iCam ○
- KaVo DIAGNOcam Vision Full HD ○


Couleurs de sellerie « Inspired by Nature »

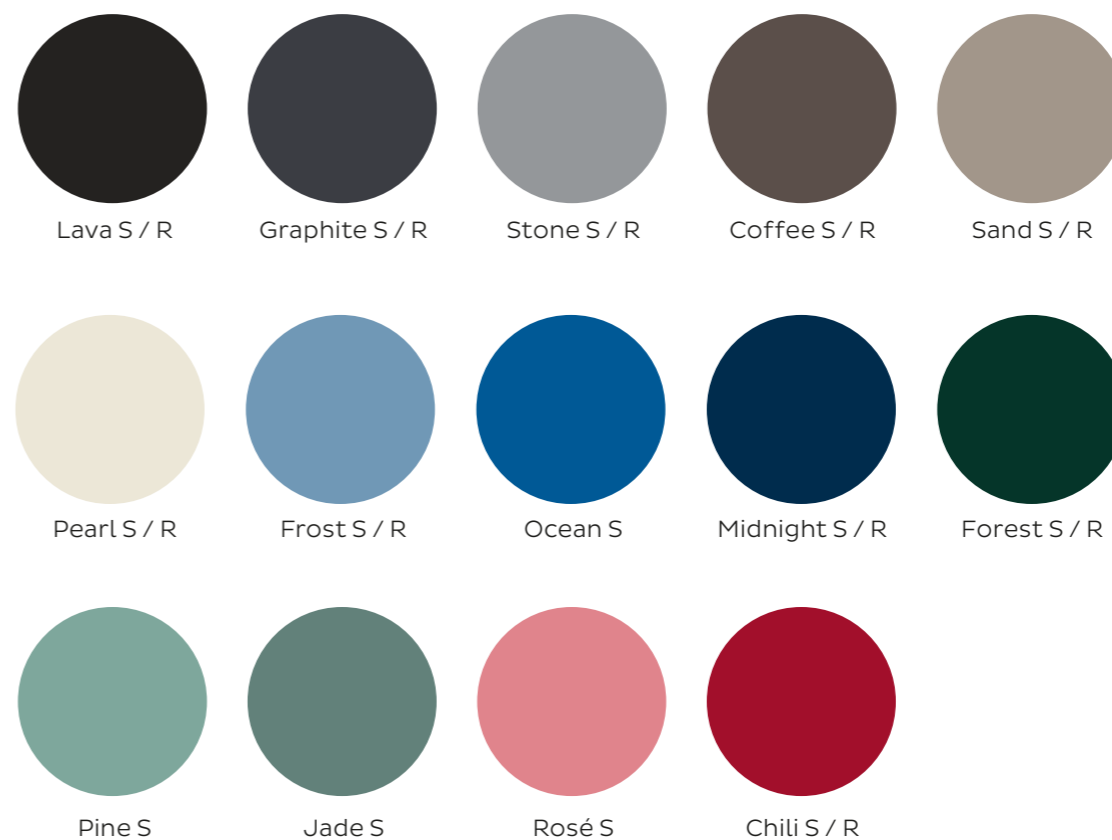

Disponible en :
S – Standard
R – RELAXline



Standard
 Sellerie traditionnelle avec dessus mat.

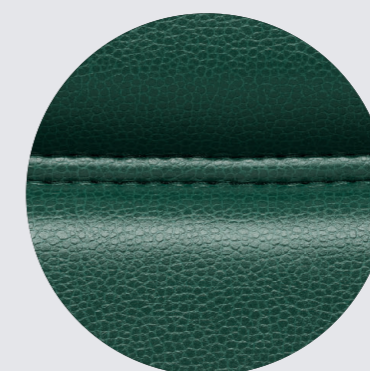

RELAXline
 Dessus à l'aspect cuir, mousse à mémoire de forme avec coutures décoratives.

Un design moderne de qualité optimale : toutes les selleries KaVo sont fabriquées à la main en Allemagne et sont de haute qualité raffinée. La collection de couleurs « Inspired by Nature » complète avec élégance la sellerie RELAXline (avec sa surface douce à l'aspect cuir et ses coutures éclatantes), ainsi que la sellerie traditionnelle à finition mate. Quelle que soit la ligne de sellerie que vous choisissez, la collection de couleurs vous offrira des options prometteuses qui vous permettront de donner des accents esthétiques à votre fauteuil, en harmonie avec les dernières tendances en matière d'intérieur.

● Équipement standard | ○ Équipement optionnel | x doit être sélectionné | - Non disponible
¹ Uniquement en combinaison avec le bloc d'eau DVGW et la bouteille d'eau DVGW | ² À prix réduit

L'Excellence Dentaire dans tous les domaines

Les valeurs de notre marque

KaVo est un fabricant fiable établi depuis longtemps. Une fiabilité qui perdurera. Depuis plus de 100 ans, nos produits et notre entreprise sont synonymes de qualité et de fiabilité maximales : nos clients peuvent donc se concentrer sur l'essentiel.

KaVo fait preuve d'expertise et d'intransigeance lorsque la création de la meilleure formule globale implique d'associer exigences élevées, ergonomie, normes d'hygiène strictes et design. Une combinaison parfaite entre dynamisme et expertise nous permet d'être toujours à la pointe du progrès.



Fauteuils dentaires KaVo –
un investissement pour votre santé



Instruments KaVo –
sentez la différence.



Imagerie KaVo –
mieux voir, mieux planifier



Formation dentaire –
pour un apprentissage efficace

Les produits, équipements et services présentés et décrits dans la présente brochure ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les informations données ici reflètent les connaissances disponibles au moment de l'impression. KaVo Dental GmbH décline toute responsabilité légale quant aux différences de couleur et de forme figurant dans les illustrations, aux erreurs ou fautes d'impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux brochures.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Primus et Lumina sont des marques commerciales déposées de KaVo Dental GmbH.