

Endy 7 | the micromotor with apex locator

**3 JAAR*
GARANTIE**



BEN JE OP ZOEK NAAR EEN EFFICIËNT APPARAAT DAT EEN MICROMOTOR EN APEXLOCATOR COMBINEERT ?

Met de **Endy 7** profiteer je van een oplossing die specifiek is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen:

100% digitale meting

Het signaal dat door de Endy 7 wordt uitgezonden, is volledig digitaal. Hierdoor treedt er geen drift op en verandert de nauwkeurigheid van je IONYX-apexlocator niet in de loop van de tijd.

Geïntegreerde geïsoleerde sensor in het hoekstuk

Zodra je vijl in het hoekstuk wordt geplaatst, wordt de meetsensor automatisch geactiveerd.

De contra-angle is vervaardigd van Peek-plastic en zorgt voor volledige isolatie van het meetsignaal.


Consistent koppel en snelheid

De snelheid van de Endy 7 blijft constant, ongeacht de kracht waarmee je het instrument in het wortelkanaal gebruikt.

Deze varieert nooit, zelfs niet als de batterij minder dan 50% is opgeladen. Het koppel wordt altijd gecontroleerd om jouw instrumenten te beschermen.

ionyx: uw partner al meer dan 25 jaar

Opricht in 1993 en gevestigd in de Bordeaux-streek van Frankrijk, ontwerpt en produceert het bedrijf IONYX gespecialiseerde apparatuur voor endodontie. Gericht op tandartsen die de kwaliteit van hun behandelingen en hun werkcomfort willen verbeteren, is de volledige IONYX-lijn ontworpen voor dagelijks en gemakkelijk gebruik. Wereldwijd actief via een uitgebreid netwerk van distributeurs is IONYX een van de meest erkende experts in het tandheelkundig vakgebied.

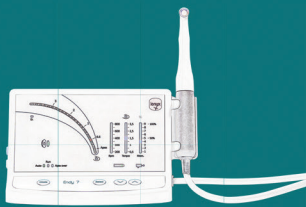

Endy 7 micromotor with apex locator

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Direct meetsysteem

Het meetsysteem geeft je onmiddellijk informatie over de positie van je vijl in het kanaal zodra het contact maakt met het endokanaal.

Snelle motoruitschakeling

Zodra het ingestelde koppel is bereikt, wordt de motor snel uitgeschakeld via een elektronische vergrendeling, waardoor het risico op breuk van het instrument wordt beperkt.

Snelheidsbereik geschikt voor wortelkanaalinstrumenten

De Endy 7 laat je de snelheid van je vijl instellen tussen 100 en 800 omwentelingen per minuut.

Langzame omkeerfunctie

Deze technologie van 1 seconde vertraging, die IONYX sinds 1996 gebruikt, laat je het instrument verwijderen zonder tandheelkundig debris terug naar de apex te duwen.

9 geheugeninstellingen

De Endy 7 heeft 9 geheugeninstellingen voor het programmeren van koppel- en snelheidsinstellingen die overeenkomen met elk van de gebruikte instrumenten. Programmeren is eenvoudig en intuïtief.

Langdurige batterijduur

De Endy 7 laat je werken op een batterijvermogen van 1 uur met een gemiddeld koppel van 1,5 N-cm (gemiddeld 40 wortelkanaalbehandelingen).

Snellader

De snelle oplader van het apparaat laadt je batterij volledig op in 2 uur. Om de batterij te beschermen, wordt het opladen automatisch gestopt zodra het maximale niveau is bereikt.

A46619 Endy 7 micromotor en apex locator

Inhoud van de verpakking:

- Motor
- Hoekstuk
- Labiale electrode (2x)
- Witte draad (2x)
- Vijlgreep voor handmatige meting
- Smeeradapter
- Oplader

*De Endy 7 elektronische behuizing heeft een garantie van 3 jaar. Het hoekstuk, de batterij en de accessoires hebben een garantie van 2 jaar.



**Direct
leverbaar !**

www.denta.be

03 450 93 20

verkoop@denta.be

A REAL PROGRESS IN ENDODONTIC PRACTICE



Denta
Heiveldekens 2
2550 Kontich

Prijs geldig tot 15-09-2025

