

## Endy 7 | the micromotor with apex locator



### ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE D'UN APPAREIL EFFICACE COMBINANT UN MICROMOTEUR ET UN LOCALISATEUR D'APEX ?

Avec l'**Endy 7**, profitez d'une solution conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins :

#### **Mesure 100 % numérique**

Le signal émis par votre Endy 7 est entièrement numérique. Il n'y a aucune dérive ni modification au fil du temps dans la précision de votre localisateur d'apex IONYX.

#### **Capteur isolé intégré dans le contre-angle**


Dès l'insertion de votre lime dans le contre-angle, le capteur de mesure se connecte automatiquement. Le contre-angle en plastique Peek assure une isolation totale du signal de mesure.

#### **Couple et vitesse constants**

La vitesse de l'Endy 7 reste constante, quel que soit l'effort exercé sur la lime dans le canal. Elle ne varie pas, même si la batterie est chargée à moins de 50 %. Le couple est toujours contrôlé afin de préserver vos limes.

### **ionyx: votre partenaire depuis plus de 25 ans**

Fondée en 1993 et située en France dans la région bordelaise, la société IONYX conçoit et fabrique des machines spécialisées en endodontie. Destinée aux omnipraticiens souhaitant améliorer la qualité de leurs traitements et leur confort, l'ensemble de la gamme IONYX est conçu pour une pratique quotidienne et facile. Présente dans le monde entier grâce à son large réseau de distributeurs, IONYX est l'un des experts les plus reconnus dans le domaine dentaire.

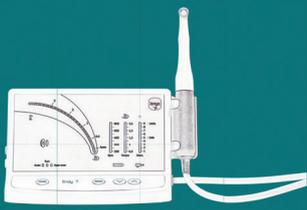

# Endy 7 micromotor with apex locator

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mesure instantanée

Le système de mesure instantanée vous informe de la position de votre lime dans le canal dès qu'elle entre en contact avec celui-ci.

### Arrêt rapide du moteur

Dès que le couple programmé est atteint, le moteur s'arrête rapidement grâce à un verrouillage électronique, limitant ainsi le risque de rupture de l'instrument. +2

### Plage de vitesses adaptée aux limes canalaires

L'Endy 7 permet de régler la vitesse de votre lime entre 100 et 800 tours par minute.

### Retour lent

Cette technologie de retour lent d'une seconde, utilisée par IONYX depuis 1996, permet de retirer l'instrument sans refouler les débris dentinaires vers l'apex.

### 9 mémoires

L'Endy 7 dispose de 9 mémoires permettant de programmer autant de couples et vitesses adaptés à chaque lime utilisée. La programmation est simple et intuitive.

### Autonomie prolongée

L'Endy 7 permet de travailler sur batterie pendant 1 heure avec un couple moyen de 1,5 N-cm (environ 40 traitements canalaires en moyenne).

### Chargeur rapide

Le chargeur rapide de l'appareil recharge complètement la batterie en 2 heures. Pour préserver la batterie, la charge s'arrête automatiquement dès que le niveau maximal est atteint.

### A46619 Endy 7 micromoteur et localisateur d'apex

#### Contenu de l'emballage :

- Moteur
- Contre-angle
- Électrode labiale (2x)
- Fil blanc (2x)
- Manchon pour mesure manuelle
- Adaptateur de lubrification
- Chargeur

\*Le boîtier électronique de l'Endy 7 est garanti 3 ans. Le contre-angle, la batterie et les accessoires sont garantis 2 ans.



**En stock  
immédiatement !**

[www.denta.be](http://www.denta.be)

03 450 93 20

[vente@denta.be](mailto:vente@denta.be)

A REAL PROGRESS IN ENDODONTIC PRACTICE



**Denta**  
Heiveldekens 2  
2550 Kontich

Prix valable jusqu'à 15-09-2025

