


ONGEËVENAARDE ESTHETIEK

ERVAAR DE NATUURGETROUWE ESTHETISCHE RESULTATEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GECONTROLEERDE GROOTTE, VORMGEVING EN CONFIGURATIE VAN HARMONIZE'S **ART** NANOVLSTOFDEELTJES:

- LICHTDIFFUSIE EN REFLECTIE **ZOALS HET NATUURLIJK GLAZUUR.**
- EEN **VERHOOGD CHAMELEON EFFECT** VOOR BETERE BLENDING.

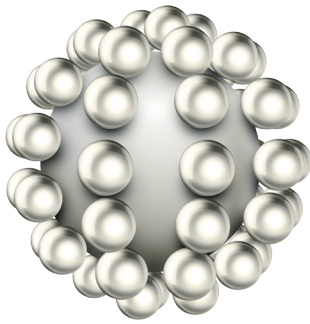

2 VAN DE 3 DOKTERS ZOUDEN OVERWEGEN OM TE VERANDEREN VAN HUN HUIDIG COMPOSIT NAAR HARMONIZE DAT SUPERIEUR SCOORT IN VERGELIJKING MET HUN HUIDIG COMPOSIT²

² 18 out of 27 Leading EU Dentists
Harmonize Field Evaluation EMEA Sept 2016


LICHTREFLECTIE ZOALS EEN NATUURLIJK ELEMENT

KORTERE GOLFLENGTES
- BLAUWE KLEUR -



DIFFUSE REFLECTIE

LANGERE GOLFLENGTES
- RODE KLEUR -

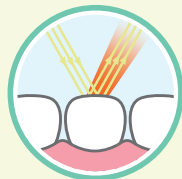

SPIEGELLENDE REFLECTIE


NET ALS NATUURLIJKE TANDEN EN ANDERS DAN ANDERE UNIVERSELE COMPOSITIEN, PAST HARMONIZE ZICH AAN, AAN DE GOLFLENGTE VAN HET LICHT DOOR HET REFLECTEREN VAN DIFFUUS LICHT MET KORTERE GOLFLENGTES EN SPIEGELEND MET LANGERE GOLFLENGTES.

DIT RESULTEERT IN EEN **BETERE BLENDING** DAN TOONAANGEVENDE COMPOSITIEN ZOALS FILTEK™ SUPREME ULTRA. (internal data available upon request).

HOOGGLANS EN DUURZAAM POLIJSTEN

DE PARTIKELGROOTTE EN ZIJN STRUCTUUR LATEN EEN **VERBETERDE POLIJSTBAARHEID** TOE EN MET HET GEBRUIK VAN DE OPTI1STEP POLIJSTER BEKOMT MEN BETERE EN DUURZAMERE RESULTATEN ALS DE CONCURRENTIE.³

ZIJ ZIJN OOK ONTWERPEN VOOR **SUPERIEUR GLANSBEHOUD**, VERGELEKEN MET ANDERE WELGEKENDE COMPOSITIEN ZOALS TPH SPECTRA®, GRANDIOSO EN TETRIC EVOCERAM®. (internal data available upon request).

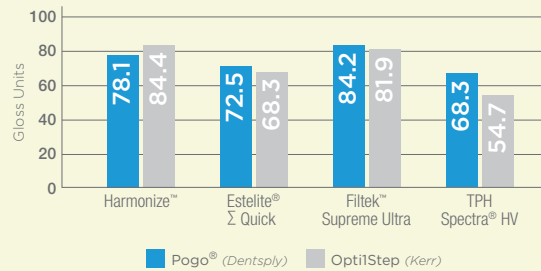

³Study conducted at University of Alabama, 2016.

Harmonize - Syringe Trial Kit

BEVAT: 4x 2g Syringe (1x Dentine A3, 1x Dentine A3.5, 1x Enamel A2, 1x Enamel A3); Instructions for Use.

Part No.	Description
36631	Harmonize – Syringe Trial Kit

Harmonize - Unidose Trial Kit

BEVAT: 20x 0.25g Unidose (5x Dentine A3, 5x Dentine A3.5, 5x Enamel A2, 5x Enamel A3); Gebruiksaanwijzing.

Part No.	Description
36632	Harmonize – Unidose Trial Kit

Harmonize - Refill

Shade	1x 4g Syringe	20x 0.25g Unidose
Dentine A1	36545	36571
Dentine A2	36536	36572
Dentine A3	36546	36573
Dentine A3.5	36547	36574
Dentine A4	36548	36575
Dentine B3	36549	36576
Dentine C4	36550	36577
Dentine XL2	36551	36578
Enamel A1	36552	36579
Enamel A2	36537	36542
Enamel A3	36553	36581
Enamel A3.5	36554	36582
Enamel A4	36555	36583
Enamel B1	36556	36584
Enamel B2	36557	36585
Enamel B3	36558	36586
Enamel B4	36559	36587
Enamel C1	36560	36588
Enamel C2	36561	36589
Enamel C3	36562	36590
Enamel C4	36563	36591
Enamel D2	36564	36592
Enamel D3	36565	36593
Enamel D4	36566	36594
Enamel XL	36567	36595
Incisal Translucent Amber	36538	36543
Incisal Translucent Blue	36568	36597
Incisal Translucent Clear	36569	36598
Incisal Translucent Gray	36570	36599
Incisal Translucent SuperClear*	36539	Not Available

* 3g Syringe

Harmonize - Syringe Intro Kit

BEVAT: 4x 4g Syringe (1x Dentine A3, 1x Dentine A3.5, 1x Enamel A2, 1x Enamel A3); Gebruiksaanwijzing.

Part No.	Description
36633	Harmonize – Syringe Intro Kit

Harmonize - Unidose Intro Kit

BEVAT: 40x 0.25g Unidose (10x Dentine A3, 10x Dentine A3.5, 10x Enamel A2, 10x Enamel A3); Gebruiksaanwijzing.

Part No.	Description
36634	Harmonize – Unidose Intro Kit

Harmonize - Syringe Advanced Kit

BEVAT: 8x 4g Syringe (1x Dentine A3, 1x Dentine A3.5, 1x Dentine A4, 1x Enamel A2, 1x Enamel A3, 1x Enamel A4, 1x Incisal Clear, 1x Incisal Gray); Gebruiksaanwijzing.

Part No.	Description
36635	Harmonize – Syringe Advanced Kit

Harmonize - Unidose Advanced Kit

BEVAT: 80x 0.25g Unidose (10x Dentine A3, 10x Dentine A3.5, 10x Dentine A4, 10x Enamel A2, 10x Enamel A3, 10x Enamel A4, 10x Incisal Clear, 10x Incisal Gray); Gebruiksaanwijzing.

Part No.	Description
36636	Harmonize – Unidose Advanced Kit

Harmonize, Herculite and Opti1Step are either registered trademarks or trademarks of Kerr Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Harmonize™
Nanohybrid Universal Composite



ERVAAR HET COMPOSIT VAN DE NIEUWSTE GENERATIE MET MEER
ARTISTIEK TALENT



NATUURGETROUWE RESTAURATIES HEBBEN UW PENSEELSTREEK EN ARTISTIEK TALENT NODIG

HARMONIZE™ STAAT VOOR, **A**DAPTIVE **R**ESPONSE **T**ECHNOLOGY, MET EEN SYSTEEMCONCEPT VAN NANOVLSTOFDEELTJES DIE HET MOGELIJK MAKEN OM **NATUURGETROUWE RESTAURATIES** TE VERWEZELIJKEN EENVOUDIGER ALS OOI

TE VOREN. MET DIT NIEUWE **A**RT CONCEPT ZAL MEN IN STAAT ZIJN EEN **BETERE BLENDING CAPACITEIT** EN VERHOOGDE **STRUCTURELE INTEGRATIE** TE BEKOMEN, WAT BUITENGEWONE STERKTE EN ONGEËVENAARDE ESTHETIEK VERSCHAFT.

WETENSCHAP EN SCHOONHEID KOMEN EINDELIJK TEZAMEN.



GEMAKKELIJKER VERWERKBAAR

ERVAAR HOE GEMAKKELIJK U ANATOMIE KUNT MODELEREN MET DIT COMPOSIT DANKZIJ DE COMBINATIE VAN DE UNIEKE SFERISCHE **A**RT NANOPARTIKELTJES EN DE RHEOLOGIC MODIFIER VAN HARMONIZE:

- **ADAPTIEVE VISCOSITEIT GEDURENDE HET AANBRENGEN**, IS AFHANKELIJK VAN DE DRUK UITGEOEFEND MET HET INSTRUMENT.
- **MINIMAAL KLEVEND EN NIET WEGZAKKEND**. ZODAT GEEN BIJKOMENDE HANDELINGEN NODIG ZIJN.

94%

VAN DE TANDHEELKUNDIGE EXPERTEN UIT DE USA, WAARDEERDE HARMONIZE ALS UITSTEKEND QUA VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN⁴

⁴ In a blind evaluation, 94% of leading US dentists stated Harmonize had excellent handling characteristics including stickiness, carvability, spreadability, and viscosity.



BUITENGEWONE STERKTE

REKEN OP DUURZAME RETAURATIES, DANKZIJ HET **SOLIDE VERSTERKTE VULSTOFCONCEPT** GECREËERD DOOR DE INTERACTIE VAN HARMONIZE'S ART NANOPARTIKELTJES:



- **VERHOOGDE STERKTE**, DANKZIJ EEN GROTERE HOEVEELHEID VULSTOF (81% GELADEN).
- **STERKERE VERBINDING TUSSEN KUNSTHARS EN VULSTOF**, VOOR BESTENDIGE EN PERFORMANTE RESULTATEN.



ZIRKONIUM
(Positieve lading)



COLLOÏDAAL
SILICIUMDIOXIDE
(Negatieve lading)

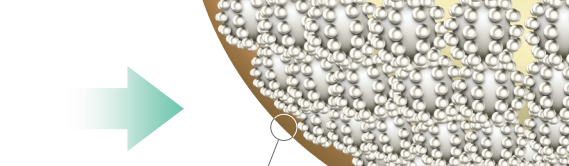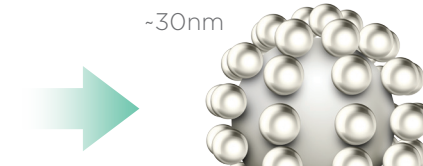

Het totaal geïmpregneerd
polymeernetwerk biedt een structurele integratie
en uitstekende verbinding met de kunststofmatrix.

2 VAN DE 3 DOKTERS Zouden overwegen om te veranderen van hun huidig composit naar HARMONIZE¹



¹18 out of 27 Leading EU Dentists – Harmonize Field Evaluation EMEA Sept. 2016

DYNAMISCHE VISCOSITEIT

HET SYSTEEMCONCEPT VAN DE ART NANOVLSTOFDEELTJES **ADAPTEERT ZICH AAN DE WERKWIJZE VAN DE CLINICUS**:


DE EXCLUSIEVE **RHEOLOGIC MODIFIER** VERBETERT DE VLOEIBAARHEID WANNEER MEN SCULPTEERT WAT HET **MAKKELIJKER MAAKT OM HET COMPOSIT VORM TE GEVEN**.

WANNEER MEN KLAAR IS MET SCULPTEREN ZAL DE VISCOSITEIT TOENEMEN WAT **HET WEGZAKKEN VAN HET MATERIAAL VOORKOMT**.


DIT ALLES MINIMALISEERT DE INSPANNING DIE NODIG IS OM HET BEKOMEN VAN DE GEWENSTE VORM, EN VERMINDERT DE BENODIGDE TIJD VOOR HET BIJ- EN AFWERKEN. (internal data available upon request).

SFERISCHE VORM

DE SFERISCHE VORM VAN HET ART NANOVLSTOF SYSTEEMCONCEPT IS ZORGVULDIG GECONTROLEERD OM DE HOEVEELHEID VULSTOF TE MAXIMALISEREN WAT, **KLEVEN MINIMALISEERT EN MODELEREN VEREENVOUDIGD**. DIT REDUCEERT RISICO'S VAN TERUGTREKKEN VAN MATERIAAL EN HET INBRENGEN VAN POROSITEITEN AAN HET OPPERVLAK.

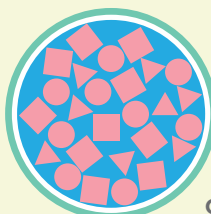

CONCURRENTIE

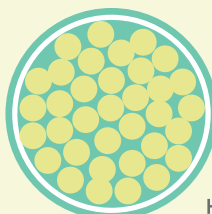

HARMONIZE

VERSTERKTE VULSTOFSTRUCTUUR


ZEER KLEINE SFERISCHE PARIKELTJES VAN SILICIUMDIOXIDE EN ZIRKONIUM WERDEN AAN ELKAAR GEKOPPELD EN VERSMOLTEN IN EEN VERSTERKTE STRUCTUUR.

DIT VERBETERT DE INTERACTIE EN DE CROSSLINKING VAN DE VULSTOF EN DE KUNSTHARSMATRIX WAT RESULTEERT IN EEN **EFFICIËNTERE POLYMERISATIE EN HOGERE STERKTE**.

ALS EINDRESULTAAT MAG MEN VERTROUWEN OP BESTENDIGE RESTAURATIES **MET HOGERE WEERSTAND TEGEN SCHIPPING EN BREUK OP LANGE TERMIJN**.

BEWEZEN MECHANISCHE STERKTE

ARMONIZE VERTOONT EEN SUPERIEURE STERKTE VERGELEKEN MET FILETEK SUPREME ULTRA, TETRIC EVOCERAM, ESTELITE® SIGMA QUICK AND ADMIRA FUSION.

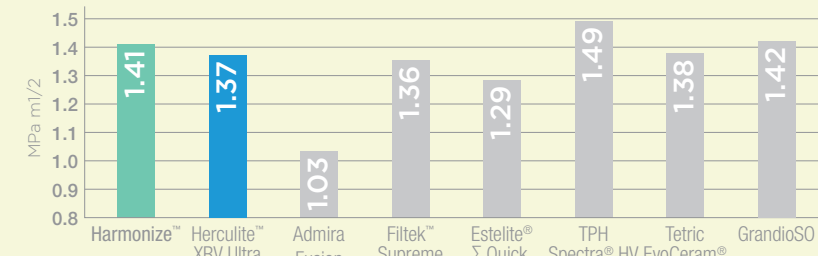

(Internal data on file.)