

voco

HIGHLIGHTS

Composite haute performance

GrandioSO Unlimited –
composite universel
4 mm en cinq teintes
cluster

Vitalité conservée au quotidien

Préservation de la vitalité pulpaire et
coiffage de la pulpe avec le biomatériau
MTA vpt (traitement de préservation de
la vitalité pulpaire)

De bon goût

Profluorid Varnish+BioMin
au bioverre est la nouvelle
puissance pour durcir
l'émail

Vos vœux
deviennent réalité

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Composite universel 4 mm en cinq teintes cluster

Alors que les matériaux composites universels esthétiques doivent être appliqués par couche et polymérisés de manière fastidieuse par incréments de 2 mm, les composites « bulk fill » présentent l'avantage de pouvoir être posés dans la cavité par couches jusqu'à 4 mm. Cependant, en raison de résultats esthétiques souvent médiocres, les composites « bulk fill » ne sont utilisés que pour les molaires et prémolaires. VOCO résout désormais ce problème avec le nouveau composite universel GrandioSO Unlimited. Ce matériau esthétique peut être appliqué dans la cavité par couches jusqu'à 4 mm et il est indiqué tant pour la zone antérieure que pour les molaires et prémolaires. Vous n'avez donc plus besoin que d'un seul matériau composite universel condensable.

Système de teintes cluster

De plus, vous avez en main la solution optimale pour tous vos cas avec seulement cinq teintes, vous pouvez ainsi désencombrer considérablement vos tiroirs. Grâce à son système de teintes simplifié, 5 teintes cluster suffisent pour couvrir les 16 teintes VITA® classical.

GrandioSO Unlimited

VITA® classical

A1				A2				A3				A3.5				A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4		

Composite haute performance

Avec un taux de charges impressionnant de 91 % (en masse), GrandioSO Unlimited définit par ailleurs de nouveaux critères de stabilité et de résistance. La faible rétraction volumétrique de 1,44 % réduit les risques de création d'hiatus et de décolorations des bords tout en contribuant à la grande qualité des obturations.



20%*
économie

Coffret test

10 × 0,3 g Caps
(2 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ carte chromatique

REF 6257

66,00 € ~~83,30 €~~**

Coffret seringue

5 × 4,5 g seringue
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ carte chromatique

REF 6258

356,70 € ~~446,50 €~~**

Coffret Caps

75 × 0,3 g Caps
(15 de chaque : A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ carte chromatique

REF 6270

356,70 € ~~446,50 €~~**

Vous trouverez d'autres présentations et teintes individuelles sous www.voco.dental.

Le composite haute performance

Universel

Pour les secteurs antéro-postérieurs

Stabilité et résistance les plus élevées

Taux de charges de 91 % (en masse)

5 teintes cluster

Couvrent les 16 teintes VITA®

Sans stratification

Incrémentation jusqu'à 4 mm

Excellente esthétique

Très bon polissage



MTA vpt

Préservation de la vitalité pulpaire pour une utilisation quotidienne – biocompatible et sans monomères

Pour préserver la vitalité de la pulpe, une protection pulpaire biocompatible, stable et étanche aux bactéries est essentielle. Avec MTA vpt, VOCO propose un matériau d'agrégats de trioxyde minéral (MTA) conçu précisément pour cette indication. Dans le cadre du traitement de préservation de la vitalité pulpaire (VPT), MTA vpt peut être utilisé pour des fonds de cavités, des coiffages directs et indirects ainsi que pour le traitement de la pulpe après une amputation vitale (pulpotomie partielle ou complète). MTA vpt permet également de recouvrir de manière fiable la dentine carieuse restante après une gestion des caries.

Lors de la prise, MTA vpt libère des ions de calcium et d'hydroxyde, ce qui stimule les processus régénératifs propres à l'organisme et la formation de la dentine tertiaire. La valeur pH élevée qui en résulte est connue pour son effet bactériostatique et favorise la reminéralisation. De cette manière, MTA vpt crée une barrière protectrice stable et étanche aux bactéries - la base idéale pour préserver la vitalité pulpaire.

- MTA pour une utilisation quotidienne – biocompatible, sans monomères
- Valeur pH élevée (12) – connue pour son effet bactériostatique
- Libération d'ions de calcium et d'hydroxyde – stimule la formation de la dentine tertiaire et la reminéralisation
- Protection pulpaire fiable – minéralise pour une protection étanche aux bactéries
- Efficace en termes de temps – pour un traitement suivant immédiat grâce à une superposition sans pression
- Manipulation simple – application à l'aide d'instruments standards ou directement avec la capsule
- Aucune décoloration liée au produit – exempt d'oxyde de bismuth et de composés ferreux
- Radio-opacité (290 % Al)



MTA vpt

Mélange manuel

10 g Poudre + 10 ml Liquide

REF 1645

165,00 €

MTA vpt AC

25 pcs Capsule d'application

REF 1646

179,00 €



Un matériau MTA à prix attractif pour un emploi quotidien

Ciment de fond de cavité pour tous les matériaux d'obturation

Coiffage indirect de la pulpe

Coiffage direct de la pulpe

Traitement pulpaire après une pulpotomie





Invisible au quotidien,

Bifix Temp fluorescent

Matériau de collage temporaire à durcissement dual,
à base de composite

Avec sa translucidité semblable à celle des dents, Bifix Temp fluorescent s'intègre harmonieusement dans la restauration provisoire. L'esthétique ne change pas à la lumière naturelle et, même sous lumière UVA, la fluorescence ne transparaît pas sur les restaurations provisoires. Sous lumière UVA, la fluorescence du matériau est très intensive, ce qui facilite la détection et l'élimination des moindres résidus de matériau après le retrait de la restauration provisoire et favorise ensuite la mise en place précise de la restauration définitive. Cet avantage à lui seul rend plus efficace le processus de post-traitement, habituellement laborieux.



Bifix Temp fluorescent

Seringue QuickMix 5 ml
+ accessoires

REF 1056

55,70 €

AlignerFlow LC

Composite fluorescent pour les taquets d'aligneurs

Les traitements par alignement font partie intégrante de la gamme de soins dentaires et orthodontiques et, souvent, les taquets y participent. Ces derniers doivent présenter une stabilité élevée pendant toute la durée du traitement et pouvoir se retirer en toute sécurité et sans laisser de traces une fois le traitement terminé. Avec AlignerFlow LC, VOCO vous propose le composite nanohybride avec effet de fluorescence conçu spécifiquement pour répondre à ces impératifs. Il est possible de contrôler les taquets à la lumière UVA ou d'identifier avec précision d'éventuels résidus lors de leur retrait et de les éliminer tout en préservant l'émail.



AlignerFlow LC

2 × 2 g seringue A1

REF 1526

2 × 2 g seringue A2

REF 1527

2 × 2 g seringue A3

REF 1528

81,00 €

Aperçu des avantages

- Application précise avec une fluidité parfaite
- Photopolymérisation à travers le template transparent
- Stabilité et résistance à l'usure sur toute la durée de l'application



Source: Dr. Montse Galiano, UK



Clip F fluorescent

Matériau d'obturation photopolymérisable
pour les restaurations temporaires

Clip F fluorescent convainc par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Le produit mono-composant est facile à mettre en place et à modeler. La photopolymérisation rend immédiatement Clip F fluorescent résistant et étanche à la salive. Les propriétés élastiques du matériau Clip F fluorescent permettent dans la plupart des cas une élimination sans résidus avec des limites de préparation propres et non endommagées.

Sous lumière UVA, la détection et l'élimination de petits excédents et résidus de matériau est beaucoup plus facile, en particulier en cas de couches de faible épaisseur qui sont difficilement visibles à l'œil nu. Clip F fluorescent convient à tout types d'obturations, de scellements et de restaurations temporaires, y compris la technique des onlays et des inlays.



Clip F fluorescent

2 x 4 g seringue

REF 1288

57,80 €

Rebilda DC fluorescent

Le premier système pour la reconstitution de moignons
et le collage de pivots radiculaires à fluorescence activable

Le système pour la reconstitution de moignons et le collage de pivots radiculaires à durcissement dual et à base de composite, Rebilda DC fluorescent, est le dernier venu de la gamme Rebilda. Bien présents sur le marché mondial depuis des décennies, les produits Rebilda sont considérés comme des valeurs sûres dans les cabinets dentaires, particulièrement en raison de leurs propriétés proches de la dentine. Outre les teintes dentine, blanc et bleu, il existe désormais aussi une variante fluorescente qui confirme une fois de plus l'esprit d'innovation de VOCO.



Cartouche 50 g,
fluorescent dentine,
+ accessoires

REF 1399

191,10 €

Seringue QuickMix 10 g,
fluorescent dentine,
+ accessoires

REF 1406

81,70 €

Fluorescent à la lumière UVA

Très bonne visibilité des excédents
et des limites de reconstitution,
même en profondeur sous-gingivale

Manipulation simple

Meulage comme la dentine,
consistance fluide –
adaptation parfaite

Excellente esthétique

Teinte dentine à la lumière du
jour, idéal pour les restaurations
hautement esthétiques

Durcissement dual

Utilisation également dans le canal
radiculaire pour le collage de tenons
(par ex. Rebilda Post)

Profluorid Varnish + BioMin

Durcit l'émail fortement fragilisé –
en quatre goûts agréables

Le bioverre de BioMin a été ajouté au vernis fluoré connu VOCO Profluorid Varnish. Ce bioverre non visible se dissout dans la salive et libère des ions de calcium et de phosphate, favorisant ainsi la reminéralisation de la dent. En liaison avec le fluor du vernis, des structures cristallines se forment sur la surface de la dent et durcissent notablement un émail fragilisé par l'acidité.

En combinaison avec la désensibilisation,
c'est une véritable double protection !

25%*
économie

200 × 0,40 ml SingleDose

Caramel	REF 2276
Cerise	REF 2277
Menthe	REF 2278
Bubble Gum	REF 2279

373,80 € ~~498,40 €**~~

50 × 0,40 ml SingleDose

Caramel	REF 2270
Cerise	REF 2271
Menthe	REF 2272
Bubble Gum	REF 2273

124,60 €

10 ml Tube

Caramel	REF 2266
Cerise	REF 2267
Menthe	REF 2268
Bubble Gum	REF 2269

35,30 €

Assortiment de parfums

48 × 0,40 ml SingleDose
comprenant : caramel, cerise,
menthe, bubble gum

REF 2274

124,60 €



Profluorid Varnish

Vernis aux fluorures pour la désensibilisation dentaire (5 % NaF)

En général, les tubulis dentinaires ouverts sont la cause d'hypersensibilités. L'objectif du traitement est donc le scellement des tubulis. Profluorid Varnish est un vernis fluoré pour le traitement des hypersensibilités. Il permet de sceller efficacement les tubulis dentinaires exposés après la préparation de cavités ou en cas de collets sensibles.

Aperçu des avantages

- Désensibilisation rapide et diffusion d'ions de fluor (22.600 ppm fluorures)
- Application simple – tolère l'humidité
- Disponible en sept parfums agréables
- Application d'une couche fine – très efficace

25%*
économie



10 ml Tube

Melon	REF 1267	Caramel	REF 2232
Menthe	REF 2234	Cerise	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

30,60 €

200 × 0,40 ml SingleDose

Melon	REF 1271	Bubble Gum	REF 2239
Menthe	REF 2231	Cerise	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Caramel	REF 2229		

324,90 € ~~433,20 €**~~

Assortiment de parfums

4 × 10 ml Tube
comprenant : menthe, melon,
cerise et caramel

REF 2971

91,80 € ~~122,40 €**~~

Futurabond U

En unidose (SingleDose) pratique

Le procédé de développement du Futurabond U avait un objectif : proposer un adhésif universel fiable qui offre à l'utilisateur de nombreux avantages et permet de remplacer tous les autres systèmes d'adhésif au cabinet dentaire.

Le nouveau Futurabond U offre de nouvelles dimensions en termes de valeurs d'adhésion, de variété et de flexibilité d'utilisations.

50 SingleDose

50 × Futurabond U
+ accessoires

REF 1571

118,80 €

200 SingleDose

200 × Futurabond U
+ accessoires

REF 1572

415,20 € ~~475,20 €~~**


12%
économie



Grandio blocs & Grandio disc

Matériau CFAO hybride nanocéramique
pour la restauration définitive de dents unitaires

Grandio blocs / Grandio disc convainquent par leurs caractéristiques physiques quant à leur élasticité, leur dureté et un taux de charges élevé de 86 % (en masse). Ainsi, le matériau est plus proche de la dent naturelle que tous les autres matériaux pour la restauration indirecte. Grandio blocs / disc est le matériau de choix, supérieur à la céramique traditionnelle. Les produits peuvent être facilement travaillés en intra-oral avec un polissage à reflets.

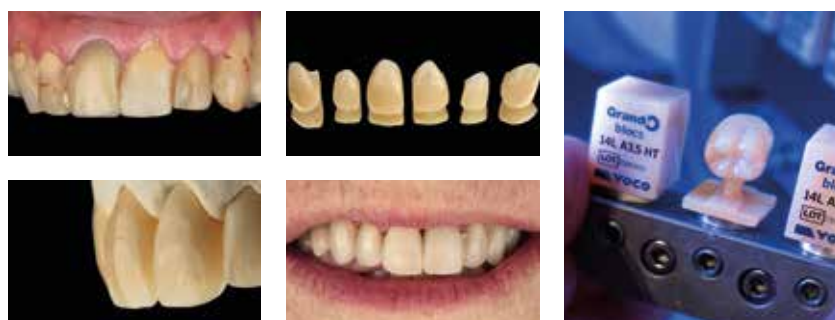

Source : Dr. Felipe Moura, Brésil

	Pour le secteur antérieur							Pour le secteur postérieur			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
no. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
no. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



NOUVEAU

Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)
par exemple :

A2 REF 6249
A3 REF 6250

369,00 €

Vous trouverez d'autres présentations et teintes individuelles sous www.voco.dental.

Egalement disponible pour Planmill®



Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT
REF voir tableau

112,40 €


Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT
REF voir tableau

121,20 €

Bifix Veneer LC


Simplement sûr, simplement esthétique –
le collage de facettes prothétiques avec un flux de travail optimisé

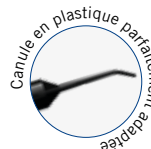

Bifix Veneer LC, le composite de collage nanohybride photopolymérisable particulièrement esthétique et chargé à 81 % (en masse), a été spécialement développé pour le collage adhésif simple et sûr de facettes, inlays et onlays translucides en composite ou en céramique.

Un système de teintes simple avec **trois teintes bright, clear et warm** facilite la mise en place des facettes et permet une prévisibilité du résultat esthétique. Les pâtes Try-In parfaitement adaptées facilitent le choix de la bonne couleur et permettent de vérifier préalablement le résultat.

Un concept de teintes intuitif et efficace pour un résultat esthétique optimal

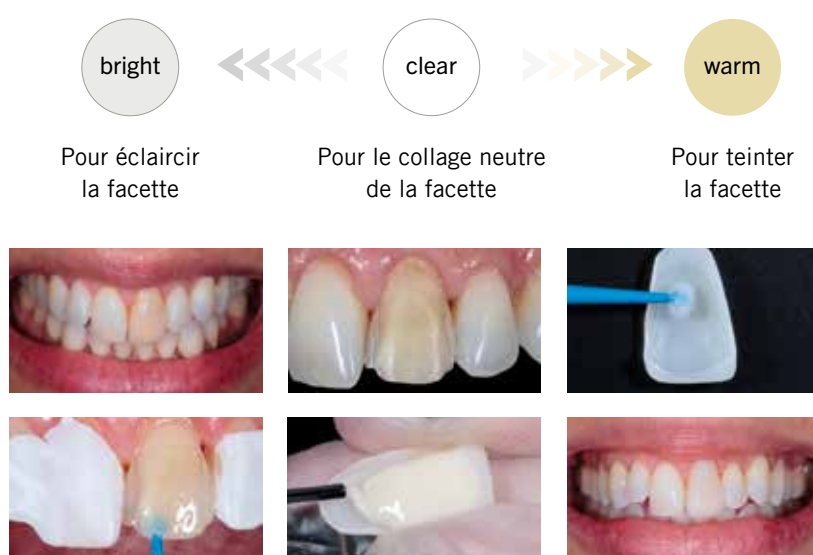

Source : Prof. Carlos Torres, Brésil

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt
ou votre délégué commercial VOCO.

*par rapport à un achat individuel **Cumul des prix individuels

Les offres ne sont valables qu'auprès des dépôts partenaires. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte.

Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s'entendent hors TVA. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.



20%*
économie

Bifix Veneer set

3 x 2 g seringue Bifix Veneer LC
3 x 2,5 g seringue Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ accessoires

REF 1428

164,00 € ~~204,90 €**~~

Bifix Veneer system set

3 x 2 g seringue Bifix Veneer LC
3 x 2,5 g seringue Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
2 ml seringue Vococid
20 pcs SingleDose Futurabond U
20 pcs SingleDose Ceramic Bond
10 pcs Sticky Tim
+ accessoires

REF 1429

257,20 € ~~325,00 €**~~

Vous trouverez d'autres
présentations et teintes individuelles sous
www.voco.dental.

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Service Clients VOCO

Numéro vert : 00 800 44 444 555
Fax : +49 4721-719-2931
service@voco.de



voco.dental

VOCO
LES DENTALISTES