

KAVO

eSCALER

Precisie en kwaliteit
van het hoogste niveau.



De highlights in één oogopslag.

Behandeloplossingen voor alle gevallen

Tips voor sub- en supragingivale toepassingen.

Dynamic Performance Technology™

De dynamische vermogensinstelling maakt zorgvuldige maar effectieve patiëntbehandelingen mogelijk.

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

'Made by KaVo' in Duitsland.

Intuïtief en nauwkeurig tegelijk

Lineair oscillerende tipbeweging en traploze vermogensinstelling.

Uitstekende zichtbaarheid

Perfekte verlichting dankzij innovatieve, ringvormige led-verlichting.

Maximale flexibiliteit

Kan geïntegreerd worden in alle actuele tandheelkundige units van KaVo en al bestaande tandheelkundige units met PiezoLED.


Eenvoudige reiniging

Alle componenten kunnen thermisch worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd.




Dynamic Performance Technology™

Dankzij de innovatieve Dynamic Performance Technology™ detecteert de KaVo eSCALER hoeveel druk er tijdens de behandeling wordt toegepast. Minder is meer bij het verwijderen van plaque en licht tandsteen om de tandstructuur te beschermen. Als de tandarts de druk voor het verwijderen van tandsteen of aanslag verhoogt, neemt het vermogen evenredig met de druk toe. Hierdoor is een zachte, comfortabele en tegelijkertijd effectieve behandeling mogelijk.

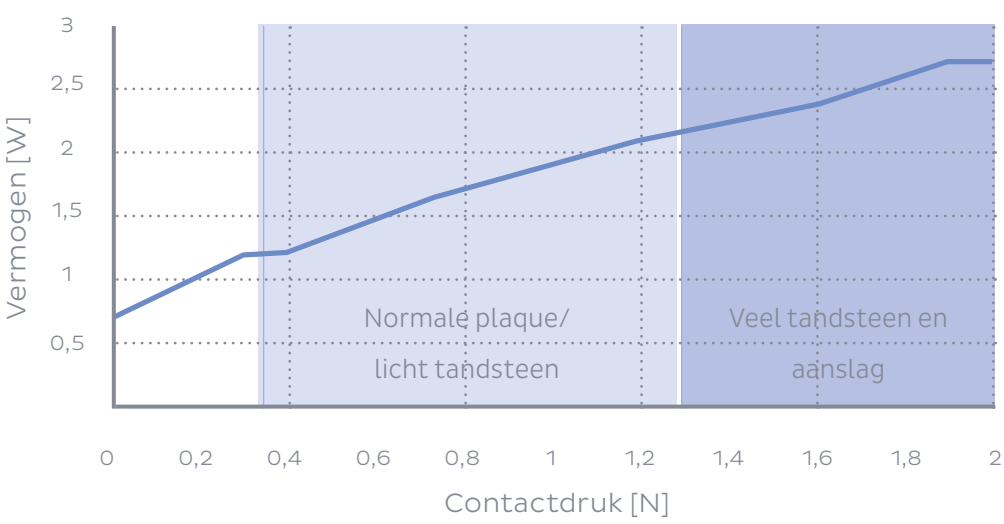

Reiniging


Met de KaVo eSCALER bent u verzekerd van ongeëvenaarde hygiëne en maximale veiligheid, en voldoet u altijd aan de normen. Dankzij het geavanceerde design kunnen de led-module en de lichtgeleiding eenvoudig worden verwijderd. Alle componenten, waaronder de tips, kunnen thermisch worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd. De reinigings voor thermische desinfectie wordt meegeleverd. U kunt vertrouwen op een oplossing die moeiteloos aan de huidige hygiënevoorschriften voldoet en uw dagelijkse praktijkwerkzaamheden merkbaar eenvoudiger maakt.

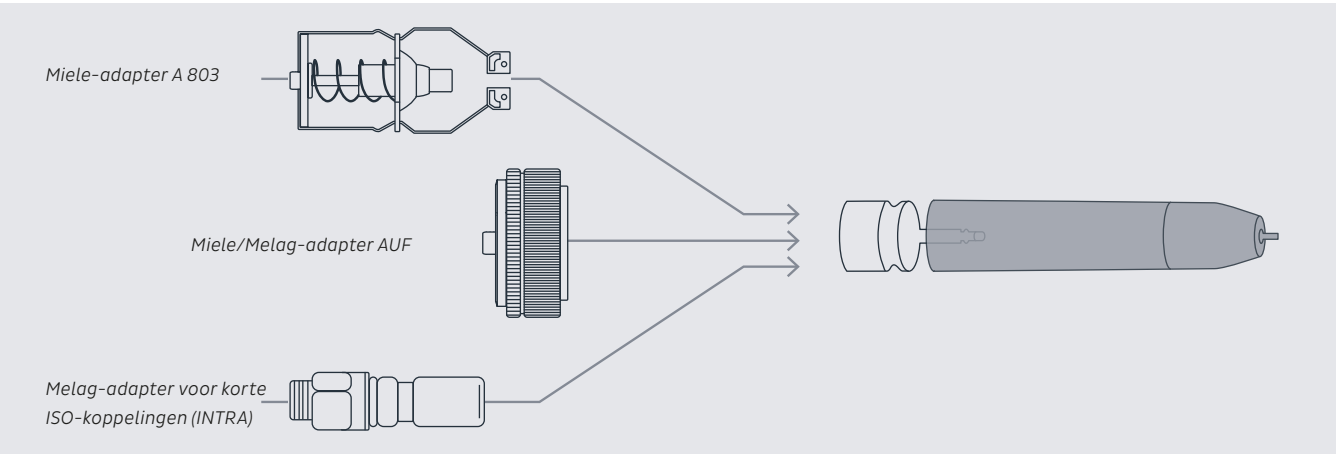

[Hygiënecentrum](#)
Dankzij een aangepast inzetstuk in het hygiënecentrum van de tandheelkundige units van KaVo is het reinigen van de KaVo eSCALER-instrumentenslang ook intuïtief en eenvoudig.



Accessoires/componenten

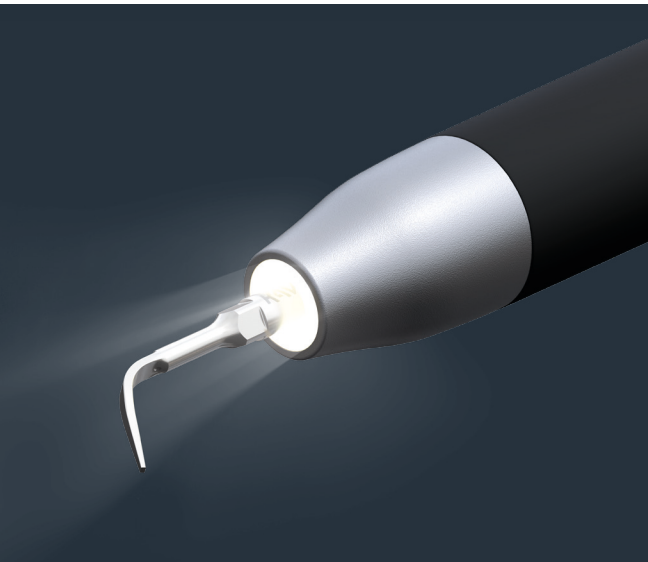

De KaVo eSCALER laat een uitmuntende betrouwbaarheid en robuustheid zien die uitsluitend Duitse technici te bieden hebben. Bovendien kunt u zowel de lichtgeleiding als de led-module van de KaVo eSCALER eenvoudig vervangen. Een vervangende lichtgeleiding wordt meegeleverd. Hierdoor bent u altijd flexibel.

Veelzijdig en uitgerust voor de toekomst: het KaVo eSCALER-tipassortiment

Veelzijdig tipassortiment voor het verwijderen van pigmentvlekjes tot het verwijderen van tandsteen en aanslag in de sub- en supragingivale gebieden.

eSCALER	Tip K201	Tip K202	Tip K203	Tip K214
Mat. nr.	1.015.4741	1.015.4742	1.015.4743	1.015.4744
Product	Universele tandsteentip	Universele tandsteentip	Perio-tip	Perio-tip
Toepassingsgebied	Voor het verwijderen van supragingivaal tandsteen in alle kwadranten	Voor het verwijderen van supragingivaal tandsteen en subgingivale aanslag tot een pocketdiepte van 4 mm in alle kwadranten	Voor het verwijderen van subgingivale afzet en aanslag voor diepe dentale pockets (tot 10 mm)	Voor gebruik in periodontale pockets. In het bijzonder geschikt voor controle- en herhalingsbehandelingen
Tandsubstantie	Glazuur	Glazuur en worteloppervlak	Glazuur en worteloppervlak	Worteloppervlak
Compatibiliteit van de KaVo eSCALER		✓	✓	✓
Compatibiliteit Piezo-LED/PIEZOssoft		✓	✓	✓

Let op de respectieve aanbevelingen voor vermogensinstellingen

- Alle producten kunnen afzonderlijk besteld worden.**
- De volgende componenten maken deel uit van de standaard levering van de KaVo eSCALER als de KaVo eSCALER wordt besteld als onderdeel van de configuratie van de tandheelkundige unit of als een retrofitset:
- 1x KaVo eSCALER Starter Set (1.015.2000)**
 - 1x KaVo eSCALER-instrument
 - 1x eSCALER-reinigingsadapter
 - 1x eSCALER vervangende lichtgeleiding
 - 1x eSCALER-tipslijtagekaart
 - 1x KaVo-tipset (1.015.2050)**
 - 1x eSCALER-tip K201
 - 1x eSCALER-tip K202
 - 1x eSCALER-tip K203
 - 3x eSCALER-momentsleutel



Dental Excellence op elk gebied

Waar wij als merk voor staan

KaVo is een alom bekend merk met een sterk verleden. Ons merk en onze producten staan voor de hoogst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid – en dat al meer dan 100 jaar. Dit geeft onze klanten vertrouwen zodat zij ook hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Om dit te bereiken, combineert KaVo de belangrijkste elementen van ergonomie, geoptimaliseerde hygiëne en design in één geweldig, compromisloos totaalpakket. Door deze perfecte mix van dynamiek en expertise lopen wij voorop in de moderne tandheelkunde.



KaVo tandheelkundige units –
Investeer in uw eigen gezondheid



KaVo-instrumenten –
Voel het verschil



KaVo-beeldvorming –
Meer zien voor betere planning



Tandheelkundige training –
Uitstekend leren



KaVo-service –
Wij staan klaar voor u

De producten, apparatuur en diensten die in deze catalogus worden weergegeven en beschreven, zijn mogelijk niet in ieder land verkrijgbaar. Alle informatie komt overeen met de kennis die beschikbaar is op het moment van druk. KaVo Dental GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afwijkingen voor wat betreft kleur en vorm in de afbeeldingen, of mogelijke fouten of drukfouten, en behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de brochures.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina en eSCALER zijn gedeponeerde handelsmerken van KaVo Dental GmbH.