

HIGHLIGHTS

High-performancecomposiet


GrandioSO Unlimited –
universeel composiet
van 4 mm in
vijf Cluster-kleuren

**Vitaal en geschikt voor
dagelijks gebruik**

Vitaliteitsbehoud en overkapping
van de pulpa met het biomateriaal
MTA vpt (vitale pulpathherapie)

Smaakvol

Profluorid Varnish+ BioMin
met Bioglas is de nieuwe
ondersteuning voor
verharding van tandglazuur

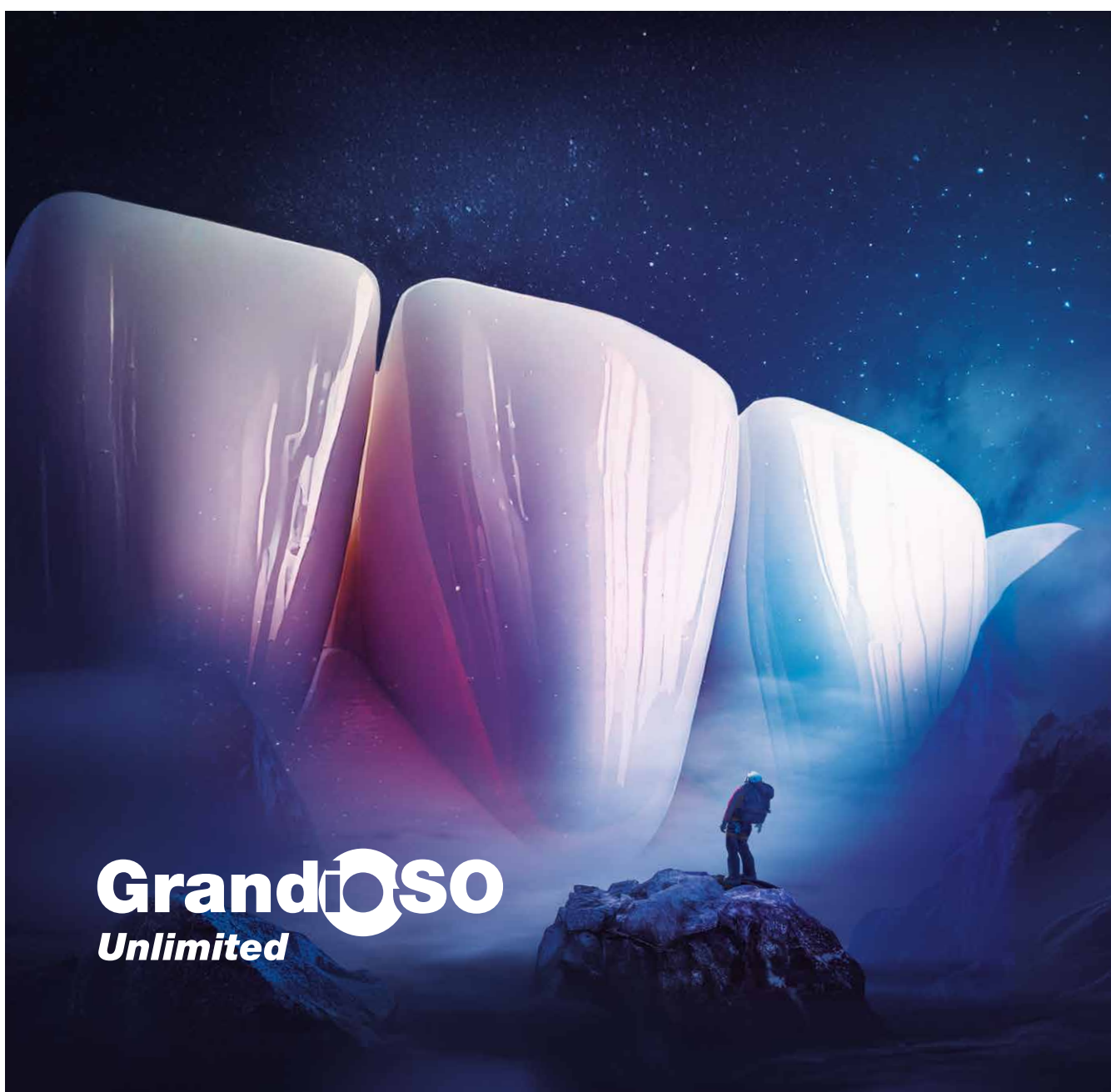

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Universeel composiet van 4 mm in vijf Cluster-kleuren

Terwijl esthetische universele composieten omslachtig in lagen van 2 mm opgebouwd en gepolymeriseerd moeten worden, bieden bulk-fillcomposieten het voordeel dat 4 mm in één keer in de caviteit kan worden aangebracht. Maar bulk-fillcomposieten worden vanwege de slechtere esthetische eigenschappen vaak alleen voor de laterale elementen gebruikt. Aan deze beperking maakt VOCO nu een einde met GrandioSO Unlimited. Het esthetische materiaal kan in lagen van 4 mm in de caviteit worden aangebracht en is zowel voor de frontale als de laterale elementen geïndiceerd. U heeft dus nog maar één universeel composiet nodig om op te vullen.

Cluster-kleuren-systeem

Bovendien hoeft u slechts 5 kleuren op voorraad te hebben om in uw dagelijkse praktijk optimaal voorbereid te zijn, zodat u minder voorraad hoeft te beheren. Want dankzij het vereenvoudigde kleursysteem zijn met slechts 5 Cluster kleuren alle 16 VITA® classical-kleuren te realiseren:

GrandioSO Unlimited	A1				A2				A3				A3.5				A4			
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4				

High-performance composiet

Met een indrukwekkend vulstofgehalte van 91 gew% verlegt GrandioSO Unlimited bovendien de grenzen voor stabiliteit en slijtvastheid. Ook de geringe volumekrimp van 1,44% verkleint het risico van rand aansluiting en randverkleuringen, en draagt bij aan de kwalitatief meest hoogwaardige vullingen.



Bespaar
20%*

Testverpakking

10 × 0,3 g Caps
(2 elk A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ kleurrand

REF 6257

66,00 € ~~83,30 €**~~

Set spuitje

5 × 4,5 g spuitje
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ kleurrand

REF 6258

356,70 € ~~446,50 €**~~

Caps Set

75 × 0,3 g Caps
(15 elk A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ kleurrand

REF 6270

356,70 € ~~446,50 €**~~

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder www.voco.dental

Het high-performancecomposiet


- Universeel**
Voor frontale en laterale elementen
- Hoogste stabiliteit en stevigheid**
91 gew% vulstofgehalte
- 5 cluster-kleuren**
Voorziet in alle 16 VITA® classical-kleuren
- Geen laagjes**
Incrementdikte van 4 mm
- Uitstekende esthetiek**
Voortreffelijke polijstbaarheid

MTA vpt

Vitaliteitsbehoud van de pulpa voor de dagelijkse praktijk –
biocompatibel en vrij van monomeren

Voor vitaliteitsbehoud van de pulpa is een biocompatibele, stabiele pulpabescherming nodig die afsluit tegen bacteriën. Met MTA vpt biedt VOCO een materiaal van mineraal trioxideaggregaat (MTA) dat precies voor dit doel is ontwikkeld. Binnen de vitale pulptherapie (VPT) kan MTA vpt worden ingezet voor onderlaag, indirecte en directe overkappingen en ook de restauratie van de pulpa na een vitale amputatie (gedeeltelijke of volledige pulpomotomie). Ook in het kader van cariësbehandeling kan carieus restdentine met MTA vpt betrouwbaar worden afgedekt.

Bij de uitharding van MTA vpt komen calcium- en hydroxide-ionen vrij, wat lichaamseigen regeneratieve processen en de vorming van tertiair dentine stimuleert. De hoge pH-waarde die daarbij ontstaat, staat bekend om zijn bacteriostatische werking en ondersteunt de remineralisatie. Op deze manier vormt MTA vpt een stabiele beschermingsbarrière die afsluit tegen bacteriën – de optimale basis voor behoud van een vitale pulpa.

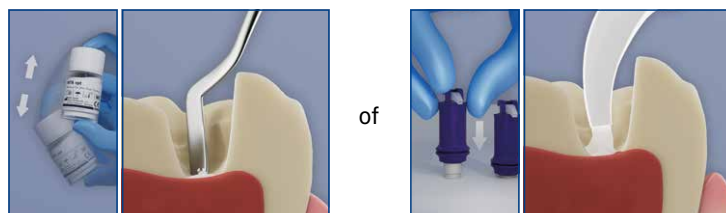

- **Betrouwbare pulpabescherming:** Mineraliseert en sluit af tegen bacteriën
- **Tijdsbesparend:** Onmiddellijk verdere verwerking door drukvrije overkappende lagen
- **Praktisch:** Geschikt voor de behandeling van cariës en vitale pulpa-therapie



MTA vpt
Handmix
10 g poeder + 10 ml vloeistof
REF 1645
165,00 €



MTA vpt AC
25 stuks applicatie capsule
REF 1646
179,00 €

Voorkom Endo. Bescherm de pulpa.

Behoud van pulpavitaliteit in de dagelijkse praktijk





Fluorescentie die niets mist: detecteert acht

Bifix Temp fluorescent

Duaalhardend tijdelijk op composiet gebaseerd bevestigingsmateriaal

5 ml QuickMix spuit

+ toebehoren

REF 1056

57,50 €



Fluorescerend bevestigingsmateriaal

Handstuk, batterijlader, netsnoer,
2 accu's, rubberen beschermkap,
beschermhoezen, veiligheidsbril

REF 9070

316,70 €



AlignerFlow LC

Fluorescerend composiet voor aligner attachments

2 x 2 g spuitje A1

REF 1526


2 x 2 g spuitje A2

REF 1527

2 x 2 g spuitje A3

REF 1528

83,50 €

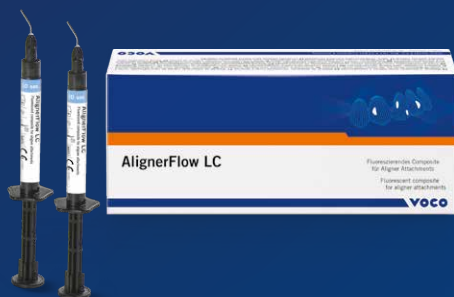


Fluorescerende composiet voor alignerbevestigingen

CURE & CHECK

TwinWave

- Hoge prestaties: geavanceerd 1300 mW/cm²
- Lichtgewicht en handig ontwerp
- Eenvoudig in gebruik: modus kan worden geselecteerd met
- Continu inzetbaar: meegeleve

tergebleven materiaal resten, bespaart tijd, garandeert veiligheid

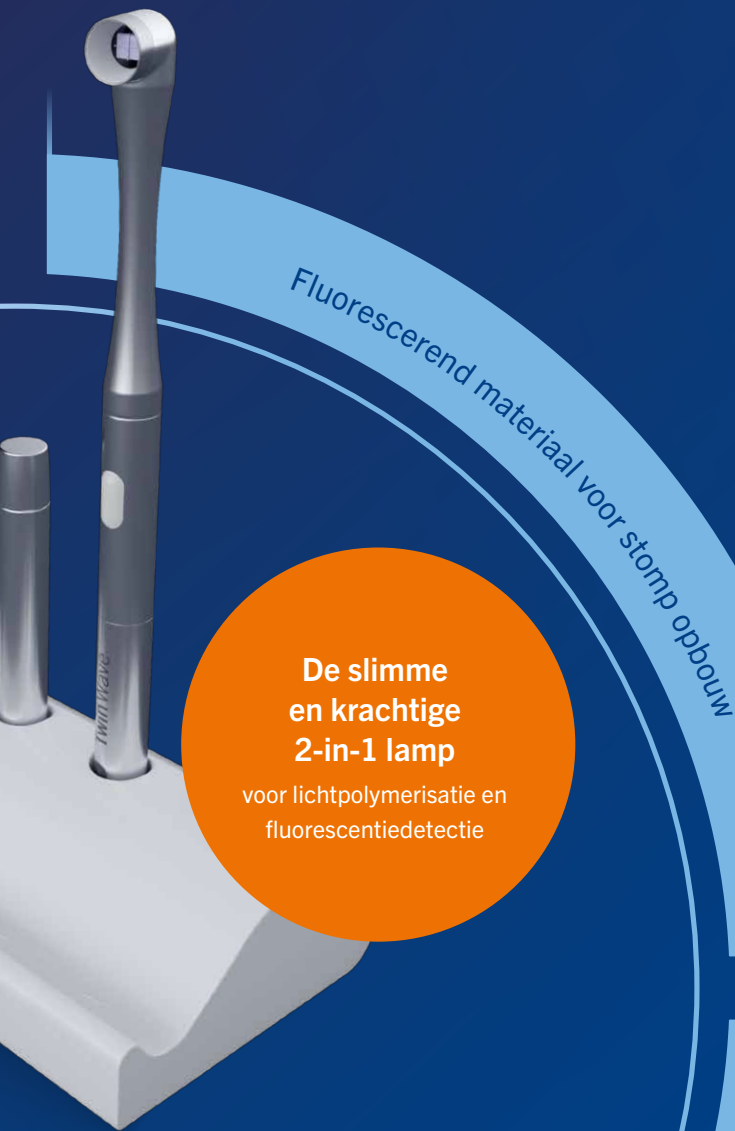

De slimme
en krachtige
2-in-1 lamp

voor lichtpolymerisatie en
fluorescentiedetectie

NIEUW

ave

de LED-technologie met een hoog vermogen van

orp: Metalen behuizing, totaalgewicht slechts 75 g
(lichtpolymerisatie, fluorescentiedetectie)

een praktische draaischakelaar

de reserveaccu

Fluorescerend materiaal voor stomp opbouw

Fluorescerend vulmateriaal voor tijdelijke voorzieningen

Rebilda DC fluorescent

Het eerste stompopbouw- en post-lutingsysteem met
activeerbare fluorescentie

Cartridge 50 g,
fluorescerende dentine,
+ toebehoren

REF 1399
197,00 €

QuickMix spuit 10 g
fluorescerende dentine,
+ toebehoren

REF 1406
84,30 €



Clip F fluorescent

Lichtuithardend vulmateriaal
voor tijdelijke restauraties

2 x 4 g spuitje

REF 1288
57,80 €




Bifix Veneer LC

Gewoon veilig, gewoon esthetisch – veneerbevestiging met geoptimaliseerde workflow



Het bijzonder esthetische en met 81 gew% gevulde lichtuithardende nanohybride bevestigingscomposiet Bifix Veneer LC is speciaal ontwikkeld voor eenvoudige en veilige adhesieve bevestiging van lichtdoorlatende veneers, inlays en onlays van composiet of keramiek.

Het overzichtelijke kleurconcept met de drie kleuren **bright**, **clear** en **warm** maakt dat veneers efficiënt aan te brengen zijn en heeft een positieve invloed op het esthetische resultaat. Dankzij de exact op elkaar afgestemde Try-In-pasta kan je de bijpassende kleur makkelijk selecteren en kan het eindresultaat vooraf worden gecontroleerd.

Een intuïtief en efficiënt kleurconcept voor een optimaal esthetisch resultaat

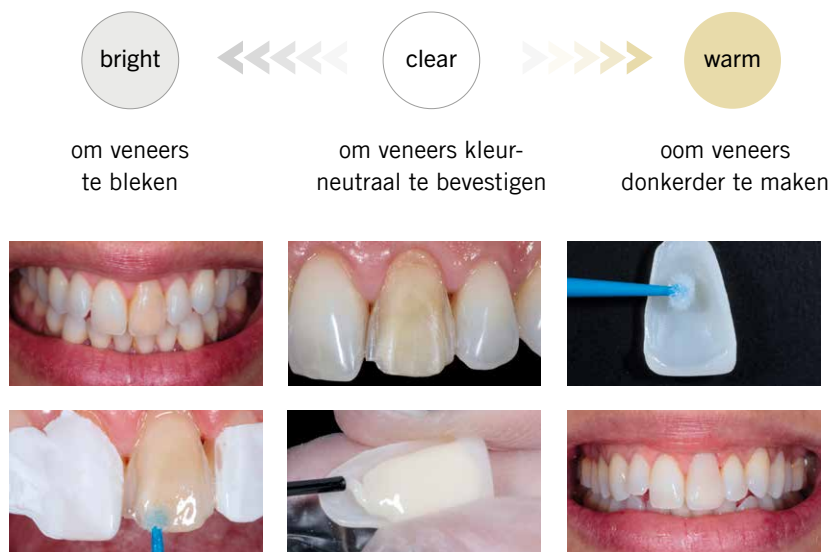

Bron: Prof. Carlos Torres, Brazilië

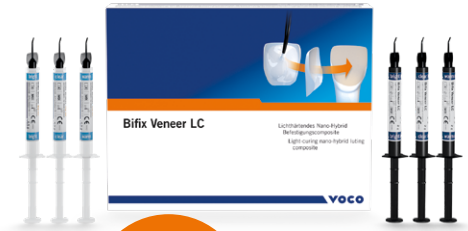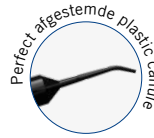

Bifix Veneer set

3 × 2 g spuitje Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g spuitje Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
+ toebehoren

REF 1428

168,90 € ~~211,80 €**~~

Bifix Veneer system set

3 × 2 g spuitje Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g spuitje Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
2 ml spuitje Vococid
20 stuks SingleDose Futurabond U
20 stuks SingleDose Ceramic Bond
10 stuks Sticky Tim
+ toebehoren

REF 1429

265,00 € ~~335,00 €**~~

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder www.voco.dental

Voor het bestellen van de genoemde VOCO acties kunt u zich wenden tot uw VOCO dentalconsultant of uw dentaldepot.

*vergeleken met individuele aankoop **totaal prijs per stuk

Aanbiedingen alleen via aangesloten depots. Met prijzen van uw depot wordt in elk geval rekening gehouden.

Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief B.T.W. Fouten en vergissingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Duitsland

VOCO Customer Service
service@voco.de



voco.dental