

Cap sur les **PROMOTIONS**

JUILLET-AOÛT 2026



ENDODONTIE

CanalPro CalciSeal p.2



RESTAURATION

BRILLIANT Crios p.9



ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT

HySolate **SyntX** p.11



CanalPro CalciSeal

NOUVEAU !

-10%sur CanalPro
CalciSeal

Ciment canalaire biocéramique à base de silicate de calcium

Sa formulation bioactive et hydrophile favorise l'interaction minérale avec la dentine tout en conservant une fluidité élevée pour une adaptation optimale, y compris dans l'anatomie des canaux latéraux. Sa tolérance à l'humidité simplifie sa manipulation, permettant des résultats constants et des procédures endodontiques rapides.



Pourquoi choisir CanalPro CalciSeal ?



Concentration élevée en silicate de calcium



Thixotropie idéale pour une obturation parfaite



Excellente radio-opacité



Embouts fins et flexibles pour une application précise




pH élevé pour une protection antimicrobienne



CanalPro CalciSeal

60043033	99,90€	89,91€
----------	-------------------	--------

1 x Seringue 2 g
15 x Embouts jetables

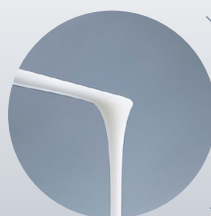

BIOACTIF
HYDROPHILE
FLUIDE



Pour plus d'informations, scannez ce QR code



REPÉRAGE MANUEL ET MISE EN FORME DU CANAL RADICULAIRE

HyFlex K-Files

NOUVEAU !

Limes de sécurisation manuelles

Les limes-K HyFlex permettent d'évaluer l'anatomie, la courbure et la minéralisation du canal. Elles facilitent la planification d'un traitement fiable en indiquant dès le début la complexité du cas et aident à choisir la séquence de mise en forme optimale tout en minimisant le stress mécanique initial. Elles conviennent à la reconnaissance manuelle et à la mise en forme initiale des canaux radiculaires pendant le traitement endodontique.



Tailles 006 à 045
en longueurs
21, 25 et 31 mm



Blister de
6 limes
pré-stérilisées



Section carrée
pour une meilleure
résistance à la torsion

**HyFlex K-Files****10,42 €**

Le blister de 6 limes

Diamètre ISO/Longueur		21 mm	25 mm	31 mm
006		60041155	60041156	60041157
008		60041158	60041159	60041160
010		60041161	60041162	60041163
015		60041164	60041165	60041166
020		60041167	60041168	60041169
025		60041170	60041171	60041172
030		60041173	60041174	60041175
035		60041176	60041177	60041178
040		60041179	60041180	60041181
045		60041182	60041183	60041184



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code



CanalPro X-Move

Totale liberté de mouvement

- Localisateur d'apex intégré
- Mouvement en rotation continue ou en réciprocity (angles ajustables)
- Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- Interface intuitive
- Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)

12
PRODUITS
POUR
1€

OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat d'un **CanalPro X-Move + 1€**, obtenez :

HySolate Latex Dental Dam Black medium, 36 pcs (60031352)	x1
HyFlex EDM OGSF Séquence 25 mm, 4 pcs (60036142)	x5
HyFlex EDM Finishing Set 25 mm, 3 pcs (60019364)	x1
ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set 5 ml (60019560)	x1
HyFlex EDM OGSF Gutta points 30/.04, 60 pcs (60036504)	x1
HyFlex EDM Gutta points Assortiment, 60 pcs (60022705)	x1
HyFlex EDM OGSF Paper points 30/.04, 100 pcs (60036503)	x1
HyFlex EDM Paper points Assortiment, 100 pcs (60022744)	x1



PACK CanalPro X-Move (réf. 65002739) + 12 produits (réf. SALESBUNDLEXM1)



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

CanalPro X-Move

65002739



Contre-angle :
rotation
à 360 degrés



Plage de couple :
0,4 - 5,0 Ncm



Plage de vitesse :
100 - 2500 tr/min



Angle de
mouvement
oscillatoire réglable :
intervalle de 10°



Plage de réglage :
20 - 400°



Mini contre-angle
isolé d'un diamètre
de 8 mm et d'une
hauteur de 9,7 mm



SYSTÈME DE LIMES EDM NiTi


HyFlex Séquence OGSF

-25%sur HyFlex
OGSF

AVANTAGES :

- **Résultats prévisibles**
en appliquant le protocole standard OGSF
- **Préparation rapide des cas quotidiens** grâce à la correspondance optimisée entre l'extrémité et la conicité pour toute la séquence
- **Sécurité du patient accrue** grâce à une plus grande résistance à la rupture du matériau et à l'application du protocole standard OGSF

**NOUVEAU ! Limes disponibles en 31 mm**

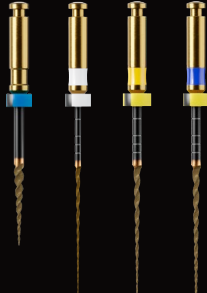HyFlex OGSF Réassorts 3 pcs.					HyFlex OGSF Séquence 4 pcs.
54,38€ 40,79€					72,30€ 54,23€
	Opener 18/11	Glider (sécurisation) 15/03	Shaper (mise en forme) 18/045	Finisher (finition) 30/04	
					
18 mm	60036140	-	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138	60036141
25 mm	-	60023492	60036137	60036139	60036142
31 mm	-	60041082	60041083	60041086	60041090



HyFlex EDM

Restez sur la bonne voie

NOUVEAU ! Limes disponibles en 31 mm

-25%
sur HyFlex EDM

HyFlex EDM Réassort

~~54,38 €~~

40,79 €

3 x Lime de votre choix (tableau ci-dessous)

	Orifice Opener 25/12	HandFiles 10/1	Limes de sécurisation au choix suivant l'anatomie canalaire		Lime de préparation 20/05	Mise en forme 25/~ OneFile	Limes de finition		
									
	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm		Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min 2,5 Ncm		
Long.	15 mm	60019596	-	-	-	-	-	-	-
	21 mm	-	Lime de votre choix		60023493	60022269	60022275	60022270	60022271
	25 mm	-	60023492	60019594	60022276	60019595	60019597	60019598	60019599
	31 mm	-	60041082	60041081	60041084	60041085	60041087	60041088	60041089

HyFlex EDM - OGSF

Pointes de Guttapercha

~~24,44 €~~

19,55 €

60 x Pointes de Guttapercha



Taille	60 pcs.
EDM 20/05	60022706
EDM OneFile 25/~	60022707
EDM 40/04	60022708
EDM 50/03	60022709
EDM 60/02	60022710
Assortiment EDM 20/05 - 60/02	60022705
OGSF 30/04	60036504

-20%
sur les pointes
EDM - OGSF


HyFlex EDM - OGSF

Pointes de Papier

~~14,85 €~~

11,88 €

100 x Pointes de Papier

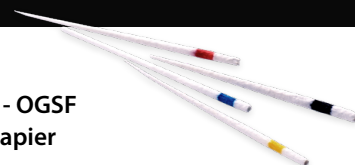

Taille	100 pcs.
EDM 20/05	60022742
EDM OneFile 25/~	60022743
EDM 40/04	60022676
EDM 50/03	60022741
EDM 60/02	60022740
Assortiment EDM 20/05 - 60/02	60022744
OGSF 30/04	60036503



CIMENT RÉSINE ET COMPOSITE À POLYMÉRISATION DUALE

ParaCore

Composite pour
la reconstitution
corono-radiculaire :
1 produit, 3 indications.

SCELLEMENT
DE TENONRECONSTITUTION
CORONAIRESCELLEMENT DES
COURONNES, BRIDGES,
INLAYS ET ONLAYS

Réassort seringue automix,
2 × 5 ml

112,03 €

2 × 5 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Résine composite renforcée
avec des particules de verre,
à polymérisation duale,
radio-opaque et disponible
en trois teintes : dentine,
blanc et translucide.

- Reconstitution des moignons
- Collage des tenons fibrés
- Collage des couronnes
et des bridges sans métal



Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

Réassort cartouche automix,
1 × 25 ml

236,85 €

1 × 25 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs,
embouts intra-oraux

White	5854
Dentine	5853





ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans toutes les situations

Le **ONE COAT 7 UNIVERSAL**, photopolymérisable, est le seul agent adhésif dont vous avez besoin pour le traitement d'obturation direct et indirect dans votre cabinet. Pas d'apprêt, pas de silanisation – il suffit d'appliquer, de disperser à l'air et de polymériser – c'est tout !



Un seul agent adhésif universel pour toutes les indications et techniques de mordançage



Extrêmement économique : jusqu'à 300 applications par flacon



Valeurs d'adhésion exceptionnelles et excellent scellement marginal



PRODUIT DU MOIS
JUILLET
-33%
sur le flacon 5 ml
Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

ONE COAT 7 UNIVERSAL Réassort flacon

60019539

104,62€

1 × Flacon 5 ml


ONE COAT 7 UNIVERSAL Réassort unidoses

60019540

134,19€

50 × Unidose 0,1 ml

50 × Brossettes noires

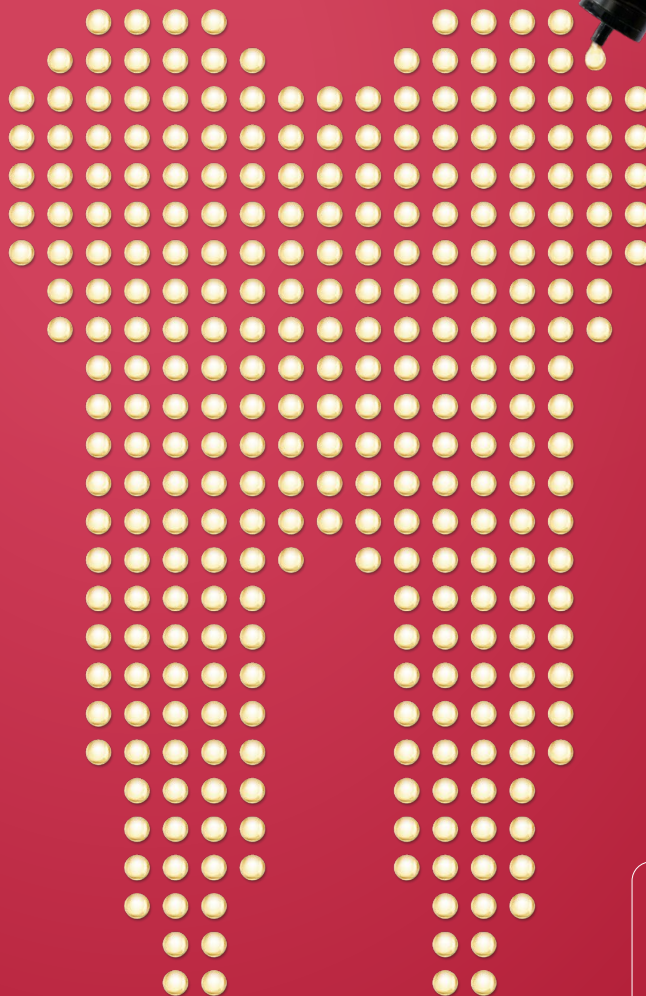

Pour plus
d'informations,
scannez ce QR code

*Diéhydrogénophosphate de méthacryloyloxydécyle




POLISSOIRS POUR TOUS LES COMPOSITES,
COMPOMÈRES ET CÉRAMIQUE HYBRIDES

KENDA Deluxe

Le luxe du polissage de composite

Développé en étroite collaboration
avec des experts cliniques, KENDA Deluxe
est un système de polissage diamanté
en deux étapes très performant, conçu
pour la dentisterie esthétique moderne.

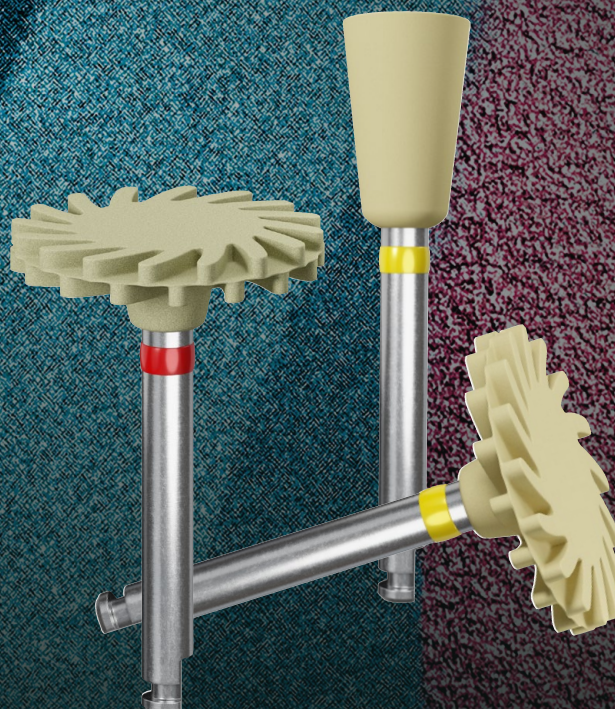

Un pré-polissoir - lissage adaptatif
et délicat sans modifier la
morphologie de la surface établie



Un seul polissoir haute
brillance - des résultats
brillants en quelques secondes



ShapeGuard - Une
forme pour toutes
les surfaces

KENDA Deluxe

Polissoirs pour tous les composites, compomères et céramique hybrides



Scannez ce QR code
pour consulter le
catalogue KENDA



Réf. par 12 0405.012 0406.012 0407.012 0408.012 0409.012

54,39€ 54,39€ 94,57€ 54,39€ 54,39€

Ø mm 6,5 3,3 14 5 10

L tête en mm 10 7,4 2 10 5,5

TPM Rec 7 500 - 10 000 5 000 - 7 000 7 500 - 10 000
Max 10 000



0455.012 0456.012 0457.012 0458.012 0459.012

54,39€ 54,39€ 94,57€ 54,39€ 54,39€

Ø mm 6,5 3,3 14 5 10

L tête en mm 10 7,4 2 10 5,5

TPM Rec 5 000 - 7 500 6 000 - 8 000 5 000 - 7 500
Max 10 000

Polissoirs disponibles également en conditionnements par 6, 25 et 100.



NOUVEAU !

HySolate SyntX Dam

La digue dentaire sans latex la plus avancée pour une isolation plus rapide et une étanchéité optimale.



Gabarit
pré-imprimé



Élasticité et résistance
exceptionnelle à la
déchirure (polyisoprène)



Couleur bleue
pour un excellent
contraste



Sans latex –
supprime les risques
d'allergies

Découvrez la nouvelle génération de digues sans latex avec HySolate SyntX Dam, conçue pour une mise en place rapide et une rétraction fiable.

Fabriquée à partir de polyisoprène, cette matière avancée offre les mêmes performances tactiles que le latex naturel, notamment une résistance à la déchirure et une élasticité supérieures, sans le risque d'allergies liées au latex.

Conçue dans une teinte bleue très contrastée pour améliorer

la visibilité, la digue est dotée d'un gabarit préimprimé, similaire à celui de notre digue dentaire HySolate Latex BLACK EDITION.

Son épaisseur moyenne offre un équilibre parfait entre flexibilité et durabilité, ce qui en fait un choix polyvalent pour un large éventail de procédures.



Digues sans latex HySolate SyntX

Taille	Couleur	Medium	Quantité
127 x 127 mm	Bleue	60037566	42 € x30
152 x 152 mm	Bleue	60037567	45,12 € x30
	Bleue	60037568	109,90 € x75

NOUVEAUTÉS

p.2

CanalPro CalciSeal




p.3

HyFlex K-Files



p.11

HySolate SyntX Dam

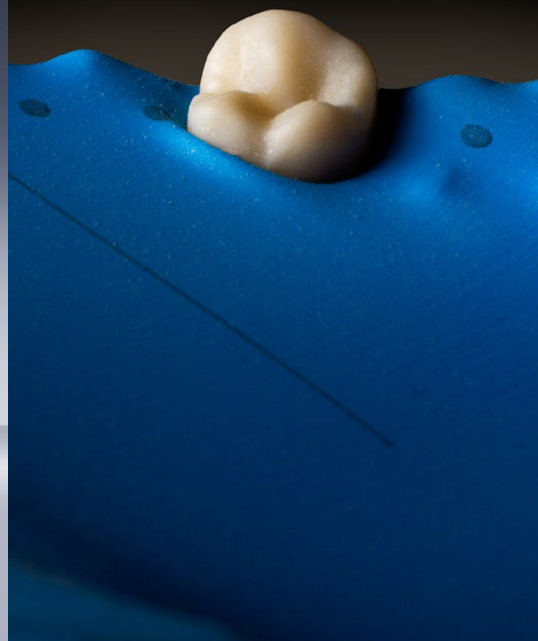

Pour découvrir la gamme complète, visitez le site **coltene.com**
ou contactez votre représentant commercial.



Restauration



Endodontie



Prothèse



Accessoires pour
le traitement



Contrôle des infections



Instruments rotatifs

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :



Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035



Belgique - Wallonie
(FR) Celine.Poels@coltene.com
+32 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix. Offres valables jusqu'au 31 août 2026. Design : www.filigranestudio.fr. Crédits photo : banque d'images COLTENE, Adobe Stock.

Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Centre de service

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Du lundi au vendredi
de 08h00 à 17h00 (CEST)

www.coltene.com

 **COLTENE GROUP**